


Inoly

PISTOLET DO MASAŻU MIĘŚNI

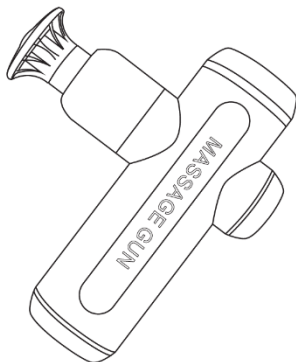

HZ-JMQ-2

INSTRUKCJA OBSŁUGI - POLSKA

Masażer model HZ-JMQ-2, w instrukcji nazwana też "urządzenie". Obowiązkowo zapoznaj się z tą instrukcją przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia.

Konserwacja i użytkowanie

Urządzenia nie jest wodoodporne, nie należy narażać go na zamoczenie. Nie otwierać urządzenia. Nie narażaj urządzenia na działanie wysokich (ponad +40°C) i niskich (poniżej +5°C) temperatur jak i na nagrzewanie poprzez działanie promieni słonecznych lub innego źródła ciepła. Nie narażaj urządzenia na działanie środków żrących. Nie należy narażać urządzenia na upadek czy wygięcie. Urządzenie przeznaczone do użytku domowego. Niezastosowanie się po powyższych wytycznych może spowodować uszkodzenie urządzenia. Urządzenie nie jest zabawką, nie należy udostępniać go dzieciom poniżej 12 roku życia oraz należy przechowywać je w miejscu w którym nie będą one miały do niego dostępu.

Cechy produktu

1. Technologia inteligentnego nacisku. Urządzenie zwiększa siłę wibracji jeśli dociśnięte jest od masowanego miejsca.
2. Nowoczesny silnik o wysokim momencie obrotowym i komfortowej, cichej pracy.
3. Ergonomicznie zaprojektowane końcówki pozwalające na skuteczny i bezpieczny masaż mięśni.
4. Zasilanie akumulatorem wielokrotnego ładowania.
5. Cztery poziomy intensywności pracy.

Bezpieczeństwo

1. Nie używaj urządzenia na uszkodzonych mięśniach.
2. Nie używaj na zranionej, podrażnionej, mokrej lub brudnej skórze.
3. Nie używaj na szyi oraz na miejscach pozbawionych mięśni.
4. Nie używaj urządzenia na stłuczeniach, siniakach i bolących miejscach.
5. Nie zanurzaj urządzenia w wodzie, nie jest wodoodporne.
6. Nie narażaj urządzenia na działanie ognia i wysokich temperatur.
7. Nie narażaj urządzenia na upadek.
8. Nie rozkręcaj i nie otwieraj urządzenia.
9. Nie zbliżaj swoich włosów i palców do masującej części urządzenia.

Specyfikacja produktu

Nazwa produktu: pistolet do masażu

Model: HZ-JMQ-2

Materiał: ABS

Wejście: USB 5 V – 1A

Wbudowana bateria: 2000mAh

Skład zestawu:

Masażer

Kabel USB do ładowania

Instrukcja obsługi


Normalne warunki pracy

Wilgotność względna: $\leq 80\%$

Ciśnienie atmosferyczne: 86kpa-106kpa

Temperatura otoczenia: $+5\text{ }^{\circ}\text{C} \sim +40\text{ }^{\circ}\text{C}$


Opis produktu

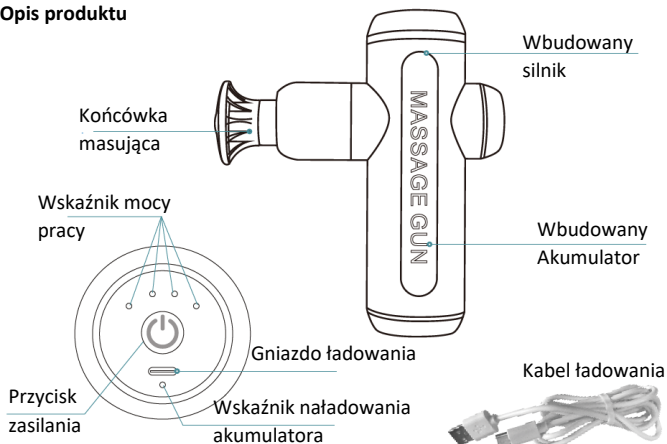

Wskazówki użytkowania

1. Po zakończeniu ładowania akumulatora, odłącz urządzenia od zasilacza.
2. W zależności od masowanego miejsca różne końcówki lepiej sprawdzają się do masowania.

Końcówki masujące

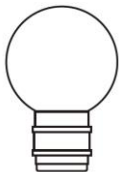

Okrągła końcówka
Ramiona, talia i plecy



Końcówka Y
Okolice Szyi i
kręgosłupa



Końcówka T
Okolice
kręgosłupa




Końcówka pocisk
Do głębokiego
masażu

Instalacja końcówki masującej

Uwaga: Końcówki masujące instalować/wymieniać można jedynie gdy urządzenie jest wyłączone.

Końcówki wyjmujemy poprzez złapanie końcówki jedną ręką a urządzenia drugą i pociągnięcie ich w przeciwnym od siebie kierunku. Aby zainstalować końcówkę masującą należy umieścić ją w gnieździe urządzenia jak na rysunku poniżej i docisnąć.

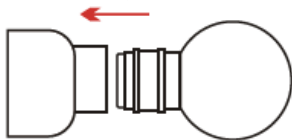

Ładowanie

1. Gdy poziom baterii jest niski, wskaźnik zmienia kolor na czerwony i zacznie migać.
2. Aby naładować urządzenie, podłącz kabel USB do gniazda ładowania urządzenia a drugie złącze kabał do źródła zasilania jak zasilacz USB lub gniazdo USB komputera.
3. Gdy bateria zostanie w pełni naładowana wskaźnik zmieni kolor na niebieski
4. Czas ładowania: 4 godziny.
5. Nie uruchamiaj urządzenia podczas ładowania

6. Urządzenie jest zasilane baterią. Jeśli nie jest używane przez ponad 3 miesiące, urządzenie należy naładować, w przeciwnym razie bateria może obniżyć swoją efektywność lub całkowicie przestać działać.

Użytkowanie

1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez 3 sekundy aby włączyć/wyłączyć urządzenie.
2. Krótkie naciśnięcie przycisku zasilania zmieni intensywność pracy.
3. Inteligentny system zwiększa intensywność wibracji kiedy masażer dociskany jest do masowanego miejsca.

Czyszczenie i konserwacja

Gdy urządzenie jest brudne, użyj suchej miękkiej szmatki lub ręcznika do wytarcia.

Magazynowanie

1. Proszę trzymać urządzenie w miejscu niedostępnym dla dzieci.
2. Proszę nie przechowywać urządzenie w bezpośrednim świetle słonecznym, wysokiej temperaturze i wilgotnym miejscu.
3. Proszę przechowywać urządzenie w suchym i wentylowanym miejscu.

Przewożenie i przechowywanie

1. Najlepiej przechowywać w dołączonym pudełku.
2. Podczas przewożenia nie należy narażać urządzenia na wstrząsy, upadek czy zgniecenie.

Uwaga

Osoby które powinny skonsultować się z lekarzem przed użyciem urządzenia:
Kobiety w ciąży. Osoby z powikłaniami cukrzycy (np. neuropatia lub uszkodzenie siatkówki), noszące rozrusznik serca, Po niedawno przebytej operacji, z padaczką lub migreną, przepukliną dysku, spondylolizą, odwarstwieniem kręgosłupa lub stawów kręgosłupa, po niedawnej wymianie stawu.



Prawidłowa utylizacja produktu. Urządzenia nie należy wyrzucać do zwykłych pojemników na odpady komunalne. Aby zapobiec potencjalnym zagrożeniom dla środowiska i zdrowia ludzkiego powodowanym nieprawidłową utylizacją odpadów, należy obowiązkowo przekazać zużyte urządzenie do wyznaczonego punktu zbiórki sprzętu elektronicznego lub do miejsca zakupu urządzenia w celu recyklingu odpadów powstałych ze sprzętu elektronicznego.



Niniejsze urządzenie, Masażer model HZ-JMQ-2, jest zgodne z Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/30/EU. Kompletna deklaracja zgodności jest dostępna online pod linkiem: <https://4cv.pl/do-pobrania/>

Niniejsza instrukcja obsługi nie jest objęta gwarancją. Gwarant zastrzega sobie prawo do modyfikowania instrukcji obsługi w dowolnym momencie bez uprzedniego powiadomienia.

Maksymalne zużycie energii – 25W; Pobór mocy roboczej – 15W; Pobór mocy w trybie czuwania – $\leq 20\text{ua}$ 10-16ua; Zakres częstotliwości pracy - 0-50HZ

Producent: 4cv Mobile Sp. z o.o. Sp. K.

Adres: ul. Broniewskiego 28, 01-771, Warszawa, POLSKA

Wyprodukowano w Chinach

KARTA GWARANCYJNA

Producent: 4cv Mobile Sp. z o.o. Sp. K.
Adres: ul. Broniewskiego 28
01-771, Warszawa, POLSKA
serwis@4cv.gsm.pl

Nazwa sprzętu

Model sprzętu

Nr. seryjny

Data sprzedaży

Podpis

Pieczętka sklepu

Data przyjęcia	Data zwrotu	Opis naprawy	Podpis i pieczętka serwisu