


# Inoly

PODUSZKA DO MASAŻU SZYI

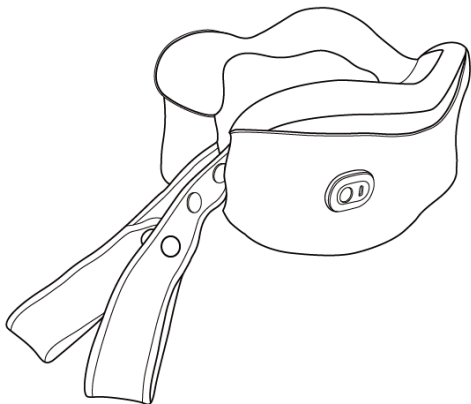

HZ-U1

INSTRUKCJA OBSŁUGI - POLSKA

**Masażer model HZ-U1**, w instrukcji nazwana też “urządzenie”. Obowiązkowo zapoznaj się z tą instrukcją przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia.

### **Konserwacja i użytkowanie**

Urządzenia nie jest wodoodporne, nie należy narażać go na zamoczenie. Nie otwierać urządzenia. Nie narażaj urządzenia na działanie wysokich (ponad +40°C) i niskich (poniżej +5°C) temperatur jak i na nagrzewanie poprzez działanie promieni słonecznych lub innego źródła ciepła. Nie narażaj urządzenia na działanie środków żrących. Nie należy narażać urządzenia na upadek czy wygięcie. Urządzenie przeznaczone do użytku domowego. Niezastosowanie się po powyższych wytycznych może spowodować uszkodzenie urządzenia. Urządzenie nie jest zabawką, nie należy udostępniać go dzieciom poniżej 12 roku życia oraz należy przechowywać je w miejscu w którym nie będą one miały do niego dostępu.

### **Wskazówki użytkowania**

1. Nie narażaj na zamoczenie
2. Po zakończeniu ładowania akumulatora, odłącz urządzenia od zasilacza.
3. Nie używaj produktu jednorazowo dłużej niż 30 minut.
4. Podczas masowania szyi, masażer powinien przylegać równo do obu stron.
5. produkt posiada blokadę bezpieczeństwa na wypadek zbyt dużego oporu podczas masowania. Jeśli zostanie on zablokowany przez 3 sekundy (np. zbyt mocnym naciśnięciem do masowanego miejsca), blokada wyłączy urządzenie.
6. Urządzenie jest zasilane baterią. Jeśli nie jest używane przez ponad 3 miesiące, urządzenie należy naładować, w przeciwnym razie bateria może obniżyć swoją efektywność lub całkowicie przestać działać.

### **Specyfikacja produktu**

Nazwa produktu: Poduszka do masażu szyi

Model: HZ-U1

Moc: 3,5W

Tkanina: 80% bawełna + 20% terylen


Wypełniacz: 100% pianka z pamięcią kształtu

Wejście: USB 5 V – 1A

Wbudowana bateria

Bezpieczna temperatura otoczenia podczas pracy: +5 °C ~ + 40 °C

## Opis produktu

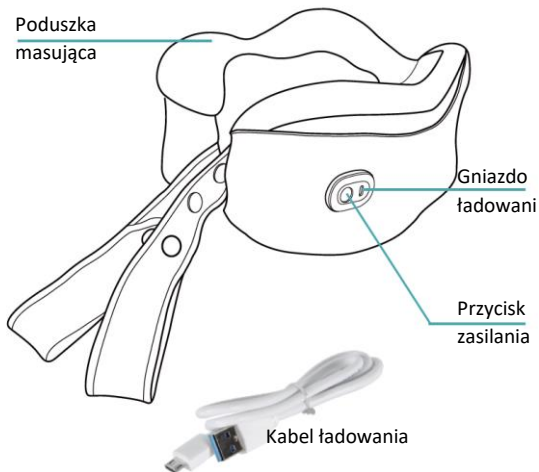

## Jak zdjąć pokrowiec

1. Naciśnij plastikowy element z włącznikiem by oddzielić wewnętrzną część urządzenia od pokrowca



2. Rozepnij pokrowiec i zdejmij go z urządzenia



## **Użytkowanie**

1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez 3 sekundy aby włączyć urządzenie. Po włączeniu zapali się żółta dioda i uruchomi się pierwszy tryb masażu. Aby uruchomić drugi tryb masażu naciśnij przycisk zasilania, zostanie to zasygnalizowane zapaleniem się czerwonej diody.
2. Ponownie naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez 3 sekundy aby wyłączyć urządzenie.
3. Urządzenie automatycznie wyłączy się po 15 minutach pracy.

## **Ładowanie**

1. Gdy poziom baterii jest niski, wskaźnik zmienia kolor na czerwony i zacznie migać.
2. Aby naładować urządzenie, podłącz kabel USB do gniazdo ładowania urządzenia a drugie złącze kabela do źródła zasilania jak zasilacz USB lub gniazdo USB komputera. Podczas ładowania czerwona dioda będzie migać.
3. Gdy bateria zostanie w pełni naładowana wskaźnik zmieni kolor na niebieski.
4. Czas ładowania: 4 godziny.
5. Nie uruchamiaj urządzenia podczas ładowania.
6. Urządzenie jest zasilane baterią. Jeśli nie jest używane przez ponad 3 miesiące, urządzenie należy naładować, w przeciwnym razie bateria może obniżyć swoją efektywność lub całkowicie przestać działać.

## **Bezpieczeństwo**

1. Nie kładź dłoni na rolkach masażera.
2. Nie używaj na zranionej, podrażnionej, mokrej lub brudnej skórze.
3. Nie używaj tego urządzenia w wysokiej temperaturze, w nasłonecznionym miejscu, w sąsiedztwie ognia lub innego źródła wysokiej temperatury, obszarze promieniowania elektromagnetycznego, wilgotnych miejscach.
4. Zabrania się demontażu, samodzielnej naprawy i modyfikacji urządzenia.
5. Nie zanurzaj urządzenia w wodzie, nie jest wodoodporne.
6. Urządzenie do użytku domowego, nie narażaj go na działanie warunków atmosferycznych.
7. Nie używaj urządzenia na uszkodzonych mięśniach.
8. Urządzenie to nie może zastąpić leków i sprzętu medycznego.

9. Ten produkt jest elektronicznym produktem do użytku domowego, nieodpowiednim do diagnozowania, leczenia i innych celów komercyjnych.

10. Gdy podczas lub po użyciu pojawią się bule, lub alergia w masowanych miejscach należy zaprzestać używania urządzenia i skonsultować się z lekarzem.

11. Osoby po urazach szyi, przed użyciem urządzenia powinny skonsultować to z lekarzem.

12. Urządzenia nie mogą używać dzieci poniżej 12 roku życia

### **Problemy i ich rozwiązania**

<b>Usterka</b>	<b>Możliwe przyczyny</b>	<b>Rozwiązania</b>
Nie można włączyć	Niski poziom baterii	Proszę naładować produkt
Nie można naładować lub nie wyświetla się ładowanie	Kabel ładujący USB nie jest prawidłowo podłączony	Proszę prawidłowo podłączyć kabel
	Używasz niewłaściwego kabla USB	Podłącz właściwy kabel

### **Konserwacja**

Nie czyść urządzenia kiedy jest ono włączone.

Po użyciu umieść urządzenie w bezpiecznym miejscu, nie narażaj go na upadek czy zgniecenie.

### **Przewożenie i przechowywanie**

Zakres temperatury otoczenia: -20C~+ 55C

Zakres wilgotności względnej: ≤93%

Zakres ciśnienia atmosferycznego: 50kPa ~ 106kPa

Proszę trzymać urządzenie w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Proszę nie przechowywać urządzenie w bezpośrednim świetle słonecznym, wysokiej temperaturze i wilgotnym miejscu.

Proszę przechowywać urządzenie w suchym i wentylowanym miejscu.

Najlepiej przechowywać w dołączonym pudełku.

Podczas przewożenia nie należy narażać urządzenia na wstrząsy, upadek czy zgniecenie

### **Gdzie można używać**

Urządzenie dedykowane jest to masaż szyi, ale można go również używać do masażu innych części ciała



### **Skład zestawu**

1. Masażer - poduszka do masażu szyi
2. Kabel USB do ładowania
3. Instrukcja obsługi

Uwaga: Produktu nie myć, nie czyścić chemicznie, nie wybielać, nie prasować, nie suszyć w suszarce.



Prawidłowa utylizacja produktu. Urządzenia nie należy wyrzucać do zwykłych pojemników na odpady komunalne. Aby zapobiec potencjalnym zagrożeniom dla środowiska i zdrowia ludzkiego powodowanym nieprawidłową utylizacją odpadów, należy obowiązkowo przekazać zużyte urządzenie do wyznaczonego punktu zbiórki sprzętu elektronicznego lub do miejsca zakupu urządzenia w celu recyklingu odpadów powstałych ze sprzętu elektronicznego.



Niniejsze urządzenie, Masażer(Poduszka do masażu szyi) model HZ-U1, jest zgodne z Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/30/EU. Kompletna deklaracja zgodności jest dostępna online pod linkiem: <https://4cv.pl/do-pobrania/>

Niniejsza instrukcja obsługi nie jest objęta gwarancją. Gwarant zastrzega sobie prawo do modyfikowania instrukcji obsługi w dowolnym momencie bez uprzedniego powiadomienia.

Maksymalne zużycie energii – 12W; Pobór mocy roboczej – 8W; Pobór mocy w trybie czuwania –  $\leq 1\text{ua}$  0.1-0.3ua; Zakres częstotliwości pracy - 0-50HZ

Producent: 4cv Mobile Sp. z o.o. Sp. K.

Adres: ul. Broniewskiego 28, 01-771, Warszawa, POLSKA

Wyprodukowano w Chinach





# KARTA GWARANCYJNA

**Producent:** 4cv Mobile Sp. z o.o. Sp. K.  
Adres: ul. Broniewskiego 28  
01-771, Warszawa, POLSKA  
serwis@4cv.gsm.pl

Nazwa sprzętu .....

Model sprzętu .....

Nr. seryjny .....

Data sprzedaży .....

Podpis .....

Pieczętka sklepu .....

Data przyjęcia	Data zwrotu	Opis naprawy	Podpis i pieczętka serwisu