

# **MPM<sup>®</sup>** **PRODUCT**

## **INSTRUKCJA OBSŁUGI**



## **MASAŻER DO STÓP**

**model: HX-9600**

## UŻYCIE MASAŻERA

- Masażer może być używany do „suchego” wibracyjnego masażu oraz do wodnego z ciepłą lub zimną wodą.
- Masaż wibracyjny poprawia krążenie krwi w organizmie, neutralizuje napięcie mięśni.
- Masaż wodny (może być dodana sól do kąpeli, nie wytwarzająca piany) uspokaja i relaksuje poprzez odczowanie delikatnych ukłuć na stopach.

### UWAGA!

W przypadku jakichkolwiek schorzeń nóg przed użyciem masażera należy skonsultować się z lekarzem!

1. Postaw urządzenie na podłodze (powierzchnia powinna być stabilna) przed wygodnym miejscem siedzenia.
2. Sprawdź, czy urządzenie jest odłączone od źródła prądu.
3. Napełnij zbiornik masażera wodą o odpowiedniej dla Ciebie temperaturze. Należy uważać, aby nie przekroczyć wskaźnika poziomu wody „**Max**”, znajdującego się wewnątrz obudowy (w zbiorniku) pod pokrywą masażera (6).
4. Podłącz masażer do źródła prądu.
5. Usiądź wygodnie i włóż nogi do wody.
6. Włącz urządzenie, w zależności od swoich potrzeb wybierz jedną z trzech funkcji masażera:

0 - wyłączony

1 -   masaż + utrzymywanie temperatury wody

2 -    masaż + bąbelki + utrzymywanie temperatury wody

3 -   bąbelki + utrzymywanie temperatury wody

Opcja masowanie + utrzymywanie temperatury wody (masaż wibracyjny na sucho):

1. Możliwy jest szybki masaż bez użycia wody.
2. Postaw stopy na magnetycznych wałkach masujących (9) i ustaw gałkę kontrolną (1) w pozycji „masaż + utrzymywanie temperatury wody”.

Opcja masowanie + bąbelki + utrzymywanie temperatury wody:

1. Wibracje z podgrzaniem i bąbelkami znakomicie relaksuje i poprawia krążenie krwi w organizmie.

Opcja bąbelki + utrzymywanie temperatury wody:

1. Woda jest wyrzucana poprzez szczeliny, wtwarzając pęcherzyki powietrzne, masujące delikatnie skórę nóg.
2. Efekt tej funkcji może być zwiększony poprzez dodanie niepieniących soli do kąpeli.
3. Szczególnie relaksujący jest masaż z zimną wodą podczas upalnych dni.

Opcja masowanie punktowe:

1. Funkcja polega na stymulowaniu silnie unerwionych punktów na stopach. Punkty te są połączone z innymi organami, które są w ten sposób pośrednio stymulowane, co znacznie poprawia krążenie krwi w organizmie.
2. Wymienne przystawki do masowania umożliwiają trzy rodzaje masażu punktowego stóp w zależności od potrzeb użytkownika.

### **CZAS MASAŻU**

1. Dla poprawienia kondycji psychofizycznej wystarczy codzienny masaż, trwający ok. 10 min.
2. Można również wydłużać masowanie oraz zwiększać częstotliwość masażu.

#### **UWAGA!**

Żaden zabieg nie może trwać dłużej niż 20 minut! Należy wtedy wyłączyć masażer i poczekać, aż ostygnie, po czym masażer nadaje się do powtórnego użycia.

### **CZYSZCZENIE I KONSERWACJA**

1. Przed rozpoczęciem czyszczenia należy najpierw odłączyć urządzenie od źródła prądu.
2. Po zakończeniu masażu wylej wodę z masażera poprzez otwór wylewu wody (5).
3. Następnie wypłucz zbiornik masażera wodą z dodatkiem delikatnego detergentu, szczególnie po użyciu soli do kąpeli. Nie wolno używać silnych środków czyszczących, gdyż mogą one uszkodzić obudowę masażera.
4. Po wypłukaniu osusz zbiornik za pomocą miękkiej ściereczki.

## **WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA UŻYTKOWANIA**

- Przed użyciem przeczytaj dokładnie instrukcję obsługi.
- Zachowaj szczególną ostrożność gdy w pobliżu urządzenia znajdują się dzieci.
- Nie wieszaj przewodu na otrych krawędziach i nie pozwól, aby stykał się z gorącymi powierzchniami.
- Zawsze wyjmuj wtyczkę z gniazdka sieciowego zaraz po skończeniu masażu oraz przed rozpoczęciem czyszczenia.
- Nie używaj uszkodzonego urządzenia, również wtedy gdy uszkodzony jest przewód lub wtyczka – w takim wypadku oddaj urządzenie do naprawy w autoryzowanym punkcie serwisowym.
- Użycie akcesoriów nie polecanych przez producenta może spowodować uszkodzenie urządzenia lub obrażenia ciała.
- Nie zanurzaj urządzenia, przewodu i wtyczki w wodzie lub innych płynach - przewód sieciowy i wtyczka muszą być zawsze suche.
- Podczas masowania urządzenie powinno znajdować się w odległości przynajmniej 1 m od wanny lub prysznica.
- Pamiętaj, aby zawsze przed wyjęciem wtyczki z gniazdka sieciowego wyłączyć najpierw urządzenie.
- Nigdy nie zostawiaj włączonego urządzenia bez nadzoru podczas pracy.
- Nie wykorzystuj urządzenia do innych celów niż zostało przeznaczone.
- Nie przekraczaj maksymalnego poziomu wody, zaznaczonego w obudowie urządzenia.
- Masażer można obsługiwać wyłącznie suchymi rękoma
- Nie wolno stać na urządzeniu - masaż należy wykonywać będąc w pozycji siedzącej!
- Należy używać tylko wody z kranu oraz dodawać niepieniących się soli i płynów do kąpieli - wytworzona piana może zatkać wloty urządzenia.
- Należy zwracać uwagę, aby otwory wlotu powietrza w podstawie urządzenia nie były zakrywane przez miękkie materiały podłoża.
- Podczas masowania nie wolno przesuwac urządzenia oraz wyciągać wtyczki z gniazdka sieciowego.
- Po użyciu wodę należy wylewać tylko przez specjalny otwór wylewu wody (5), znajdujący się w przedniej części obudowy, pod niebieską pokrywą (6).
- Urządzenie to nie jest przeznaczone do profesjonalnego użytku medycznego
- Osoby niewrażliwe na ciepło powinny zachować szczególną ostrożność podczas korzystania z tego urządzenia.

- Niniejszy sprzęt nie jest przeznaczony do użytkowania przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej zdolności fizycznej, czuciowej lub psychicznej, lub osoby nie mające doświadczenia lub znajomości sprzętu, chyba że odbywa się to pod nadzorem lub zgodnie z instrukcją użytkowania sprzętu, przekazanej przez osoby odpowiedzialne za ich bezpieczeństwo.
- Należy zwracać uwagę na dzieci, aby nie bawiły się sprzętem/urządzeniem.


## OPIS URZĄDZENIA

1. Gałka kontrolna
2. Wypustki masujące
3. Przystawka I do masażu punktowego
4. Otwory bąbelków
5. Otwór wylewu wody
6. Uchylna pokrywa masażera
7. Przystawka II do masażu punktowego
8. Przystawka III do masażu punktowego
9. Przystawka IV do masażu punktowego
10. Magnetyczne wałki masujące (6 szt.)

Urządzenie wyposażone jest w 4 wymienne przystawki do masażu

Urządzenie posiada 3 tryby pracy:

- masaż i utrzymywanie temperatury wody
- masaż, bąbelki oraz utrzymywanie temperatury wody
- bąbelki oraz utrzymywanie temperatury wody

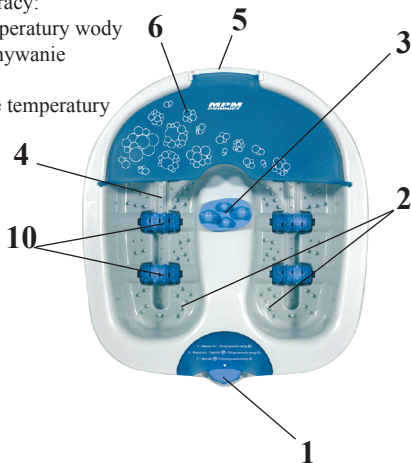

## DANE TECHNICZNE

Moc: 110 W

Zasilanie: 230 V 50 Hz

Maksymalny czas pracy: KB MAX = 20 min.

Poziom hałas:  $L_{WA} = 65$  dB



**UWAGA!:** Firma **MPM Product** zastrzega sobie możliwość zmian technicznych.

**Poland**



### **Prawidłowe usuwanie produktu (zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny)**

Oznaczenie umieszczane na produkcie lub w odnoszących się do niego tekstach wskazują, że produktu po upływie okresu użytkowania nie należy usuwać z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych. Aby uniknąć szkodliwego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi wskutek niekontrolowanego usuwania odpadów, prosimy o oddzielenie produktu od innego typu odpadów oraz odpowiedzialny recykling w celu promowania ponownego użycia zasobów materialnej jako stałej praktyki. W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska recyklingu tego produktu użytkownicy w gospodarstwach domowych powinni skontaktować się z punktem sprzedaży detalicznej, w którym dokonali zakupu produktu, lub z organem władz lokalnych. Użytkownicy w firmach powinni skontaktować się ze swoim dostawcą i sprawdzić warunki umowy zakupu. Produktu nie należy usuwać razem z innymi odpadami komercyjnymi.

Życzymy zadowolenia z użytkowania naszego wyrobu  
i zapraszamy do skorzystania z szerokiej oferty handlowej  
firmy MPM Product

**MPM Product Sp. z o. o.**

ul. Brzozowa 3

05-822 Milanówek

tel.: (0-22) 380 52 00

fax: (0-22) 724 70 00

**[www.mpmproduct.pl](http://www.mpmproduct.pl)**