

SONICZNA SZCZOTECZKA DO ZĘBÓW DLA DZIECI OD 0 DO 6 LAT

Model TB8220A-CE

INSTRUKCJA UŻYWANIA

Przed użyciem należy zapoznać się z instrukcją.

WPROWADZENIE

Dziękujemy za wybór szczoteczki sonicznej VITAMMY ePuppy (TB8220).

Ta instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa, zasady dbania o zakupiony produkt oraz przewodnik, jak poprawnie korzystać z

urządzenia.

△ Przed pierwszym użyciem należy dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi.

OSTRZEŻENIA

Używając urządzeń elektrycznych, należy zawsze stosować się do podstawowych zasad bezpieczeństwa wraz z poniższymi:

- △ Przeczytaj wszystkie instrukcje dostarczone przez producenta.
- △ Nie wkładaj baterii do ognia, nie zwieraj jej biegunów.
- △ Nie ładuj baterii, która nie jest akumulatorem.
- △ Należy ściśle przestrzegać instrukcji umieszczonej na baterii.
- △ Nie używaj baterii do ponownego ładowania (akumulatorków).
- △ Przed wymianą baterii wyłącz szczoteczkę i osusz jej obudowę. Następnie włóż nową baterię zgodnie z oznaczeniami biegunów.
- △ Zużyta baterię należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami.
- △ Jeśli szczoteczka nie będzie używana przez pół miesiąca lub dłużej, wyjmij z niej baterię.
- △ Nie używaj baterii, której termin przydatności upłynął.
- △ Ponieważ opakowanie zawiera małe elementy, które mogą być niebezpieczne dla dziecka (bateria, śrubokręt), zadbaj by Twoje dziecko nie miało dostępu do opakowania.
- △ Chroń szczoteczkę przed upadkiem i uderzeniami.
- △ To urządzenie może być obsługiwane przez dzieci wyłącznie pod

nadzorem dorosłych. Dzieci nie powinny bawić się tym urządzeniem.


- △ To urządzenie może być używane przez dzieci i osoby niepełnosprawne lub w pobliżu dzieci i osób niepełnosprawnych wyłącznie pod nadzorem.
- △ Czyszczenie i konserwacja urządzenia nie powinny być powierzane dzieciom bez nadzoru osób dorosłych.
- △ Nie przyciskaj szczoteczki do zębów i/lub dziąseł z dużą siłą. Nie myj jednego miejsca przez dłuższy czas, by uniknąć uszkodzenia powierzchni zębów i/lub dziąseł.
- △ Przed każdym użyciem szczoteczki sprawdź, czy nie jest uszkodzona.
- △ Skonsultuj ze stomatologiem, czy Twoje dziecko może bezpiecznie korzystać ze szczoteczki sonicznej, jeśli jest po przebytej operacji lub zabiegu dentystycznym.
- △ Szczoteczka jest przeznaczona do użytku indywidualnego – nie używaj jej razem z innymi ludźmi.
- △ Zaleca się wymianę końcówki szczoteczki co 3 miesiące.
- △ Zachowaj instrukcję na przyszłość.

OPIS URZĄDZENIA**PRZYCIŚK I/O - WYBÓR TRYBU PRACY**


Jedno naciśnięcie przycisku I/O powoduje włączenie podświetlenia szczoteczki. Dioda zmienia kolory.

Ponowne naciśnięcie uruchamia wibracje szczoteczki, a dioda zaczyna świecić na niebiesko.


Trzecie naciśnięcie przycisku wyłącza szczoteczkę.

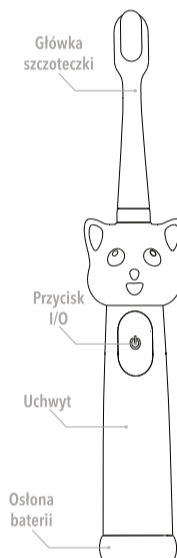**PRZED UŻYCIEM****ZAINSTALUJ BATERIĘ**

1. Za pomocą załączonego śrubokręta krzyżakowego poluzuj śrubkę zabezpieczającą osłonę baterii. Nie wykręcaj śrubki do końca, żeby jej nie zgubić.
2. Przekręć osłonę baterii w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Następnie zdejmij pokrywę baterii z uchwytu.

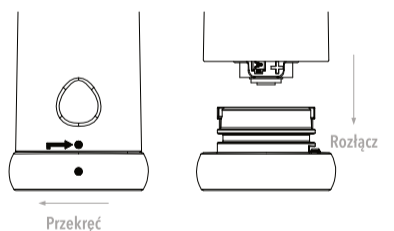


3. Włóż baterię do komory na baterię zgodnie z oznaczoną polaryzacją.

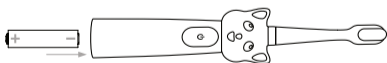

4. Nasuń osłonę baterii na uchwyt, a następnie przekręć zgodnie z uchem wskazówek zegara. Następnie zabezpiecz osłonę baterii dokręcając śrubkę śrubokrętem krzyżakowym.

ZAINSTALUJ GŁÓWKĘ SZCZOTECZKI

1. Załóż główkę szczoteczki zgodnie z rysunkiem:

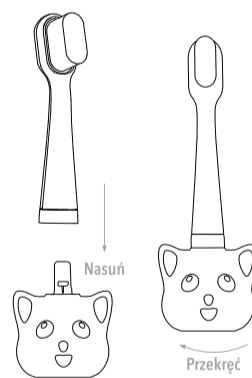

2. Przekręć główkę szczoteczki zgodnie z ruchem wskazówek zegara, by zabezpieczyć ją przed zsunięciem.
3. Aby zdjąć główkę szczoteczki (np. by ją wymienić na nową), postępuj w odwrotnej kolejności – najpierw przekręć główkę ruchem przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, a następnie zdejmij główkę z uchwytu szczoteczki.

OBSŁUGA URZĄDZENIA

1. Nałóż pastę do zębów na **wyłączoną** szczoteczkę.
 2. Włóż szczoteczkę do ust i przyłóż włókna szczoteczki do powierzchni zębów.
 3. Używając przycisku I/O wybierz tryb pracy szczoteczki i rozpocznij szcztokowanie.
- △ UWAGA! Nie naciskaj przycisku paznokciem, bo możesz w ten sposób

uszkodzić gumę.

4. Zaleca się myć zęby przez 2 minuty. Po upływie 30 sekund szczoteczka zrobi krótką przerwę by przypomnieć o zmianie miejsca szcztokowania.
5. Po upływie 2 minut szczoteczka wyłączy się automatycznie.
6. Następnie oplucz główkę szczoteczki pod bieżącą wodą. Strzepnij nadmiar wody z główki szczoteczki, osusz uchwyt ręcznikiem.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

- △ Oplucz całą szczoteczkę pod bieżącą wodą o temperaturze niższej niż 45°C.
- △ UWAGA: Nigdy nie zanurzaj całej szczoteczki w wodzie.
- △ Nigdy nie używaj do czyszczenia trujących środków czyszczących.
- △ Nigdy nie zdejmuj osłony baterii przed czyszczeniem całego urządzenia.

- △ UWAGA: Do czyszczenia nie używaj żrących środków chemicznych, szorstkich materiałów ściernych czy włókniny stalowej.

Zalecamy wymianę końcówki szczoteczki co 3 miesiące.

Obecność tego symbolu na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że nie można pozbyć się tego produktu w taki sam sposób jak odpadów z gospodarstw domowych. W związku z tym jesteście Państwo odpowiedzialni za utylizację zużytego sprzętu i jesteście zobowiązani dostarczyć go do autoryzowanego punktu recyklingu niepotrzebnego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Sortowanie, usuwanie i recykling zużytego sprzętu przyczyni się do ochrony zasobów naturalnych i zapewni, że recykling odbywa się według zasad poszanowania zdrowia ludzkiego i środowiska. Aby uzyskać więcej informacji na temat punktów zbiórki zużytego sprzętu, należy skontaktować się z lokalnymi władzami bądź z lokalnym punktem utylizacji odpadów domowych.

OBJAŚNIENIA UŻYTYCH ZNAKÓW

Znaki ostrzeżeń i symbole, które mogą pojawiać się w instrukcji i na obudowie urządzenia są istotne dla zapewnienia bezpiecznego korzystania z zakupionego sprzętu. Ich znaczenie objaśnia poniższa tabela:

	Numer partii		Producent		Przeczytaj instrukcję
	Prąd stały		Importer		Produkt zgodny z unijną dyrektywą Restriction of Hazardous Substances
	Urządzenie zgodne z wymaganiami określonymi w obowiązujących Dyrektywach CE				Produkt zgodny z rozporządzeniem PE i Rady UE nr 1907/2006
	Stosować się do dyrektywy WEEE 2012/19/UE: Zużyty sprzęt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami.				

ZAWARTOŚĆ PUDEŁKA

1. Uchwyt szczoteczki VITAMMY ePuppy (TB8220)
2. 1 główka szczoteczki z włóknami nano
3. 1 główka szczoteczki z włóknami standardowymi
4. 1 bateria AAA
5. 1 śrubokręt krzyżakowy
6. Instrukcja używania

GWARANCJA

Urządzenie	VITAMMY ePuppy (TB8220)	
Gwarant	Novamed.pl S.A. Dr. Stefana Kopcińskiego 62D, 90-032 Łódź, Poland	
Wsparcie techniczne	Infolinia – tel. 887 11 00 66 e-mail: pomoc@novamed.pl	
Gwarancja	Gwarant zapewnia Nabywcę, że urządzenie VITAMMY, którego dotyczy niniejsza gwarancja, zostało zaprojektowane i wyprodukowane w oparciu o wysokie standardy jakości oraz o dobrej jakości urządzenia, brak wad materiałowych i produkcyjnych, które mogłyby zakłócać jego prawidłowe działanie. W przypadku wad, uszkodzeń i usterek ujawnionych w okresie niniejszej gwarancji Gwarant bezpłatnie naprawi lub wymieni urządzenie na nowe bezpłatnie w możliwie krótkim terminie nie przekraczającym 14 dni . W przypadku braku zgodności rzeczy sprzedanej z umową kupującemu z mocy prawa przysługują środki ochrony prawnej ze strony i na koszt sprzedawcy. Gwarancja nie ma wpływu na te środki.	
Typ gwarancji	Niniejsza gwarancja zakłada, że reklamowany sprzęt będzie dostarczony do serwisu na koszt Nabywcy, bezpłatnie naprawiony oraz bezpłatnie dostarczony z powrotem do Nabywcy.	
Okres gwarancji	24 miesiące na urządzenie. Bez gwarancji na części i akcesoria ulegające zużyciu podczas normalnego użytkowania: baterie, główki	
Bieg okresu gwarancji	Gwarancja jest ważna od dnia zakupu potwierdzonego dowodem zakupu, który należy dołączyć do karty gwarancyjnej.	
Obszar bowiązywania gwarancji	Niniejsza gwarancja obowiązuje na terytorium Polski.	
Postępowanie w przypadku stwierdzenia usterki	Aby skorzystać z gwarancji, w ciągu w ciągu 14 dni od chwili ujawnienia wady, należy skontaktować się z infolinią pomocy i wsparcia technicznego w celu uzyskania pomocy i w razie konieczności uruchomienia procedury reklamacji. W ramach procedury reklamacyjnej reklamowany sprzęt należy wysłać na adres serwisu, dołączając niniejszą kartę gwarancyjną i dowód zakupu.	
Warunki ważności gwarancji	W celu zachowania ważności gwarancji razem z reklamowanym urządzeniem należy dostarczyć niniejszą kartę gwarancyjną (poprawnie wypełnioną i podpisaną) oraz dowód zakupu zawierający datę zakupu wraz z nazwą zakupionego urządzenia.	
Ograniczenia i wyłączenia gwarancji	Gwarancja nie przewiduje żadnej rekompensaty za szkody pośrednie lub bezpośrednie, wyrządzone osobom bądź urządzeniom, gdy urządzenie nie działało lub znajdowało się w serwisie. Gwarancja nie obejmuje mechanicznych uszkodzeń sprzętu oraz wad i uszkodzeń wynikłych na skutek: <ul style="list-style-type: none"> • niewłaściwego (niezgodnego z przeznaczeniem) lub w sposób niezgodny z instrukcją użytkowania • niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją przechowywania i konserwacji (np. użycia niewłaściwych środków czyszczących) oraz użycia niewłaściwych materiałów eksploatacyjnych • ingerencji nieautoryzowanego serwisu, samowolnych napraw, przeróbek i zmian konstrukcyjnych • przyczyn natury zewnętrznej (zjawisk atmosferycznych, przepięcia w sieci energetycznej, niewłaściwego zasilania, itp.) Gwarancja nie obejmuje niesprawności produktu z powodu zmiany właściwości (obniżenia jakości) elementów, które ulegają naturalnemu zużyciu. Naprawami gwarancyjnymi nie są czynności związane z konserwacją i czyszczeniem urządzenia opisane w Instrukcji używania.	
Data	Pieczęć i podpis sprzedawcy	Podpis klienta

INFORMACJE KONTAKTOWE

Novamed.pl S.A.

Dr. Stefana Kopcińskiego 62D, 90-032 Łódź, Poland
Infolinia pomocy i wsparcia technicznego: 887 11 00 66

Guang Dong Xinbao Electrical Appliances Holdings Co., LTD.

Zhenghe South Road, Leliu Town, Shunde District, Foshan City, Guangdong Province, China



Wyprodukowano w Chinach / Made in China

V EPUPPY #TB8220A-CE MANNUAL 2025-04-29 01.03