

Masażer liftingujący do twarzy i szyi

Beauty Pretty Face Glow



Instrukcja obsługi

Dziękujemy za wybór urządzenia **Garett Beauty Pretty Face Glow**

Wprowadzenie

Pretty Face Glow to domowy masażer liftingujący do twarzy i szyi. Łączy działanie mikrostymulacji EMS z masażem rolkowym oraz światłem LED, wspierając codzienną pielęgnację skóry, poprawę komfortu masażu i efekt wygładzenia oraz ujędrnienia.

O produkcie

Urządzenie przeznaczone jest do codziennej pielęgnacji wybranych partii twarzy i szyi, z wyłączeniem okolic oczu. Może być stosowane jako element domowego rytuału pielęgnacyjnego wspierającego poprawę wyglądu skóry, jej jędrności oraz komfortu masażu. Produkt nie jest wyrobem medycznym i nie służy do diagnozowania, leczenia ani łagodzenia chorób.

Zasady bezpieczeństwa

- Używaj urządzenia wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Nie używaj urządzenia podczas ładowania.
- Nie zanurzaj urządzenia w wodzie ani innych cieczach.
- Nie używaj urządzenia na suchej skórze.
- Przed zabiegiem nałóż serum, żel lub ulubiony kosmetyk pielęgnacyjny.
- Nie rozkręcaj, nie modyfikuj ani nie naprawiaj urządzenia samodzielnie.
- Nie pozostawiaj urządzenia bez nadzoru, gdy jest podłączone do zasilania.
- Nie przekraczaj zalecanego czasu i częstotliwości stosowania.


Przeciwwskazania

Nie używaj urządzenia:

- w ciąży i w okresie karmienia piersią,
- jeśli masz skórę nadwrażliwą na ciepło,

- w przypadku wysypek, atopowego zapalenia skóry i innych chorób skóry,
- w przypadku otwartych ran, obrzęków, silnych podrażnień lub świeżych oparzeń słonecznych,
- jeśli masz ograniczenia fizyczne, sensoryczne lub poznawcze uniemożliwiające bezpieczne korzystanie z urządzenia bez nadzoru,
- w okolicy oczu.

Poznaj swoje urządzenie

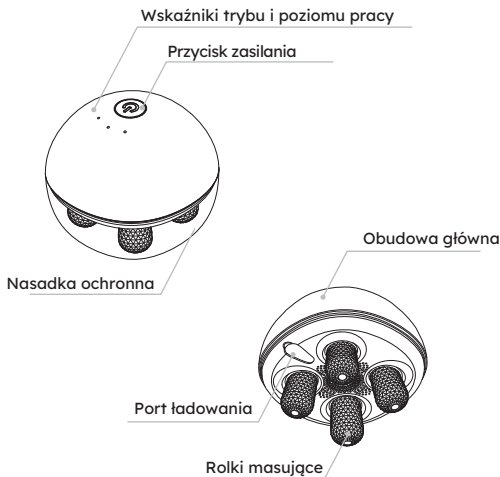

Elementy urządzenia

Pretty Face Glow składa się z obudowy głównej, rolek masujących, przycisku zasilania, wskaźników trybu i poziomu pracy, portu ładowania oraz nasadki ochronnej.

Przyciski i porty

Przycisk zasilania

- naciśnij i przytrzymaj przez około 2 sekundy, aby włączyć urządzenie,
- krótkie naciśnięcie zmienia kolejne poziomy i tryby pracy,
- naciśnij i przytrzymaj przez około 2 sekundy, aby wyłączyć urządzenie.

Port ładowania


- służy do ładowania urządzenia za pomocą przewodu dołączonego do zestawu.

Wskaźniki LED

- niebieskie wskaźniki oznaczają tryb masażu rolkowego,
- czerwone wskaźniki oznaczają tryb masażu rolkowego z EMS,
- liczba zapalonych wskaźników pokazuje poziom intensywności.

Szybki Start

1. W pełni naładuj urządzenie przed pierwszym użyciem.
2. Oczyszcz skórę twarzy i szyi.
3. Nałóż serum, żel lub inny kosmetyk pielęgnacyjny.
4. Włącz urządzenie, przytrzymując przycisk przez 2 sekundy.
5. Wybierz odpowiedni tryb i poziom intensywności.
6. Wykonuj delikatny masaż na wybranych partiach twarzy i szyi.
7. Po zabiegu wyłącz urządzenie i oczyść jego powierzchnię.

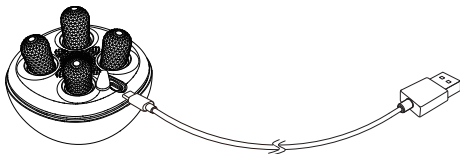

Ładowanie

- przed pierwszym użyciem lub po dłuższym okresie nieużywania w pełni naładuj urządzenie,
- podłącz przewód do portu ładowania, a następnie do odpowiedniego źródła zasilania USB,
- podczas ładowania wskaźniki świecą i migają na czerwono,
- po pełnym naładowaniu wskaźniki pozostają zapalone przez chwilę, a następnie gasną,
- urządzenie nie działa podczas ładowania.

Jak działa technologia Garrett Beauty

Pretty Face Glow wykorzystuje połączenie kilku technologii pielęgnacyjnych.

Masaż rolkowy

Ruch rolek wspiera codzienny masaż skóry, poprawia komfort zabiegu i pomaga rozprowadzać kosmetyk na wybranych partiach twarzy i szyi.

Mikrostymulacja EMS

EMS to delikatne impulsy elektryczne wspierające pielęgnację skóry i efekt liftingującego masażu. Funkcja EMS aktywuje się w trybie czerwonym, gdy wszystkie cztery rolki mają kontakt ze skórą.

Światło LED

W trybie masażu rolkowego urządzenie pracuje ze światłem niebieskim, a w trybie liftingującym z EMS – ze światłem czerwonym.

Regularne stosowanie urządzenia **Pretty Face Glow** może wspierać poprawę wyglądu skóry, jej jędrności oraz komfort codziennej pielęgnacji.

Tryby pracy urządzenia

Pretty Face Glow oferuje 2 główne tryby pracy i łącznie 6 poziomów działania.

Tryb 1–3 — Masaż twarzy

- **Co robi:** masaż rolkowy ze światłem niebieskim.
- **Dla kogo:** dla osób, które chcą wykonać codzienny, relaksujący masaż skóry.
- **Jak długo stosować:** maksymalnie 5 minut na jedną stronę twarzy.
- **Częstotliwość:** według potrzeb, z 2-dniową przerwą po każdym 5 dniach stosowania.
- **Główne efekty:** relaks, redukcja napięcia i wsparcie codziennej pielęgnacji.
- **Poziomy intensywności:**
 - **Poziom 1** – niska prędkość rolek + niebieskie światło LED
 - **Poziom 2** – średnia prędkość rolek + niebieskie światło LED
 - **Poziom 3** – wysoka prędkość rolek + niebieskie światło LED

Tryb 4–6 — Lifting i ujędrnianie

- **Co robi:** masaż rolkowy połączony z EMS i czerwonym światłem LED.
- **Dla kogo:** dla osób, które chcą wykonać bardziej intensywny zabieg liftingujący i ujędrniający.
- **Jak długo stosować:** maksymalnie 5 minut na jedną stronę twarzy.
- **Częstotliwość:** według potrzeb, z 2-dniową przerwą po każdym 5 dniach stosowania.
- **Główne efekty:** wsparcie jędrności, poprawa owalu twarzy i bardziej intensywny masaż.
- **Poziomy intensywności:**
 - **Poziom 4** – niska prędkość rolek + EMS + czerwone światło LED
 - **Poziom 5** – średnia prędkość rolek + EMS + czerwone światło LED
 - **Poziom 6** – wysoka prędkość rolek + EMS + czerwone światło LED

Instrukcja użytkowania

Krok 1. Przygotowanie skóry

Dokładnie oczyść twarz i szyję. Usuń resztki makijażu, sebum i innych kosmetyków. Odsuń włosy od twarzy i szyi.

Krok 2. Nałóż kosmetyk

Nałóż na skórę serum, żel lub ulubiony kosmetyk pielęgnacyjny. Nie używaj urządzenia na suchej skórze.

Krok 3. Włączenie urządzenia

Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez około 2 sekundy. Urządzenie uruchomi się w trybie masażu rolkowego na najniższym poziomie.


Krok 4. Wybór trybu i poziomu

Krótkim naciśnięciem przycisku przechodź kolejno przez poziomy pracy:

- poziom 1 – niski masaż rolkowy,
- poziom 2 – średni masaż rolkowy,
- poziom 3 – wysoki masaż rolkowy,
- poziom 4 – niski masaż rolkowy + EMS,
- poziom 5 – średni masaż rolkowy + EMS,
- poziom 6 – wysoki masaż rolkowy + EMS.

Krok 5. Prawidłowe ruchy urządzenia

Prowadź urządzenie powoli po wybranych partiach twarzy i szyi. Wykonuj delikatne ruchy okrężne lub krótkie, płynne przesunięcia zgodnie z konturami twarzy. Omijaj okolice oczu.

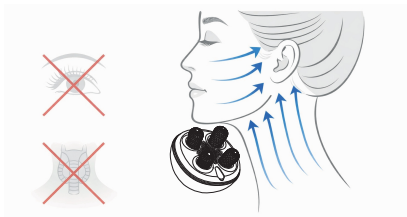

Wykonuj delikatny masaż na wybranych partiach twarzy i szyi. Omijaj okolice oczu.

Krok 6. Korzystanie z EMS

W trybie EMS funkcja mikrostymulacji aktywuje się wtedy, gdy wszystkie cztery rolki dotykają skóry. Rozpocznij od poziomu 1 i zwiększaj intensywność stopniowo, w miarę przyzwyczajania się skóry do zabiegu.

Krok 7. Czas trwania zabiegu

Masaż nie powinien trwać dłużej niż 5 minut na jedną stronę twarzy. Zaleca się zrobić 2 dni przerwy po każdym 5 dniach stosowania.

Krok 8. Co zrobić po zabiegu

Po zakończeniu zabiegu wyłącz urządzenie, przytrzymując przycisk zasilania. Sprawdź, czy na urządzeniu nie ma zabrudzeń, a następnie oczyść je zgodnie z zaleceniami.

Wskazania i efekty

Problem skóry / potrzeba	Tryb / ustawienie	Częstotliwość	Efekt
Potrzeba delikatnego startu	tryb masażu, poziom 1	zgodnie z zalecanym rytmem stosowania	łagodniejsze odczucie masażu
Codzienny relaks skóry	tryb masażu, poziom 1-2	zgodnie z zalecanym rytmem stosowania	redukcja napięcia i komfort zabiegu
Intensywniejszy masaż rolkowy	tryb masażu, poziom 3	zgodnie z zalecanym rytmem stosowania	mocniejsze odczucie masażu
Potrzeba ujędrnienia	tryb liftingujący z EMS, poziom 4-5	zgodnie z zalecanym rytmem stosowania	wsparcie jędrności i efektu liftingu
Bardziej intensywny zabieg	tryb liftingujący z EMS, poziom 6	zgodnie z zalecanym rytmem stosowania	wyraźniejsze odczucie EMS i mocniejszy zabieg

Zalecany rytm stosowania: maksymalnie 5 minut na jedną stronę twarzy; po każdym 5 dniach stosowania zrób 2 dni przerwy.

Dla bezpieczeństwa Twojej skóry

- Nie używaj urządzenia w okolicy oczu.
- Nie wykonuj zabiegu na skórze podrażnionej, uszkodzonej lub objętej stanem zapalnym.
- Nie używaj urządzenia na suchej skórze.
- Zawsze nakładaj kosmetyk pielęgnacyjny przed zabiegiem.
- Nie zanurzaj urządzenia w wodzie i nie myj go pod bieżącą wodą.
- Nie pozostawiaj urządzenia bez nadzoru podczas ładowania.
- Jeśli skóra jest wrażliwa, rozpocznij od najniższego poziomu intensywności.
- Jeśli podczas zabiegu odczuwasz ból, pieczenie lub silny dyskomfort, natychmiast przerwij używanie urządzenia.
- Nie używaj urządzenia, jeśli spadło, jest uszkodzone lub działa nieprawidłowo.

- Przechowuj urządzenie z dala od słońca, wysokiej temperatury, wrzółtu i źródeł ognia.

Czyszczenie i konserwacja

- Przed czyszczeniem wyłącz urządzenie i odłącz je od ładowarki.
- Czyść urządzenie wilgotną chusteczką lub miękką, lekko wilgotną ściereczką.
- Po czyszczeniu dokładnie osusz urządzenie i pozostaw je w dobrze wentylowanym miejscu.
- Nie zanurzaj urządzenia w wodzie i nie myj go pod bieżącą wodą.
- Po wysuszeniu załóż nasadkę ochronną.
- Jeśli nie używasz urządzenia przez dłuższy czas, dokładnie oczyść je przed schowaniem.
- Przechowuj urządzenie w suchym miejscu, z dala od wysokiej temperatury i wilgoci.

Najczęstsze pytania (FAQ)

Czy mogę używać urządzenia codziennie?

Tak, ale zaleca się zrobić 2 dni przerwy po każdym 5 dniach stosowania.

Czy mogę używać urządzenia w okolicy oczu?

Nie. Urządzenie nie powinno być używane w okolicy oczu.

Czy muszę używać serum lub żelu?

Tak. Przed zabiegiem należy nałożyć kosmetyk pielęgnacyjny na skórę.

Od jakiego poziomu zacząć?

Najlepiej rozpocząć od poziomu 1, zwłaszcza w trybie EMS, i stopniowo zwiększać intensywność.

Dlaczego nie czuję EMS?

W trybie EMS funkcja działa wtedy, gdy wszystkie cztery rolki mają kontakt ze skórą.

Jak długo powinien trwać zabieg?

Maksymalnie 5 minut na jedną stronę twarzy.

Czy urządzenie działa podczas ładowania?

Nie. Urządzenie nie działa podczas ładowania.

Jak czyścić urządzenie?

Czyść je wilgotną chusteczką lub miękką ściereczką, a następnie dokładnie osusz. Nie zanurzaj urządzenia w wodzie i nie myj go pod bieżącą wodą.

Specyfikacja techniczna

- **Nazwa produktu:** Garrett Beauty Pretty Face Glow
- **Typ urządzenia:** masażer liftingujący do twarzy i szyi
- **Zasilanie:** 5 V / 1000 mA
- **Ładowanie:** Type-C
- **Czas ładowania:** do 3 godzin
- **Automatyczne wyłączenie:** 5 ± 1 minut
- **Napięcie EMS:**
 - poziom 1 – $55 \text{ V} \pm 10 \text{ V}$
 - poziom 2 – $75 \text{ V} \pm 20 \text{ V}$
 - poziom 3 – $95 \text{ V} \pm 20 \text{ V}$
- **Prąd czuwania:** $\leq 60 \text{ uA}$
- **Poziom hałasu:** $\leq 65 \text{ dB}$ z odległości 10 cm
- **Wymiary produktu:** $76 \times 67 \pm 2 \text{ mm}$
- **Waga:** $190 \pm 5 \text{ g}$
- **Nasadka ochronna:** tak

Więcej informacji na temat tego urządzenia dostępnych jest na stronie www.garett.pl. Odwiedź naszą stronę, aby poznać więcej produktów i akcesoriów.



W przypadku jakichkolwiek problemów z użytkowaniem urządzenia zachęcamy do odwiedzenia zakładki Pomoc Techniczna na naszej stronie internetowej (zeskanuj kod QR/skorzystaj z linku) lub kontaktu z Działem Pomocy Technicznej: serwis@garett.pl



<https://garett.com.pl/pl/i/Pomoc-techniczna/145>

Odwiedź nas:



Rozszerz swój rytuał z Garrett Beauty

Garrett Beauty Pretty Face Glow to ważny element Twojego codziennego rytuału pielęgnacyjnego. Poznaj inne urządzenia **Garrett Beauty**, które wspierają pielęgnację twarzy, szyi, dłoni i włosów:

Garrett Beauty AeroGlow

Aeroprostownica 2w1 do suszenia i prostowania włosów – szybka stylizacja, wygładzenie i ochrona włosów podczas codziennego modelowania.



Garrett Beauty Skin Ritual Face & Neck

Zestaw masek LED na twarz i szyję – zaawansowana pielęgnacja światłem wspierająca ujędrnienie, regenerację i wyrównanie wyglądu skóry.



Garrett Beauty Skin Ritual Hands

Maska LED do dłoni – światłoterapia wspierająca regenerację, wygładzenie i poprawę wyglądu skóry dłoni.



Garrett Beauty Flash Sense

Depilator IPL do domowego usuwania owłosienia – komfortowa epilacja, długotrwały efekt gładkiej skóry i wygoda użytkowania.



**Zobacz, jak Pani Kosmetolog korzysta z
tych urządzeń na naszym
kanale YouTube!**



**Odkryj wszystkie urządzenia
Garett Beauty**





GARETT

BEAUTY

Gwarancja i reklamacja

Produkt jest objęty 24-miesięczną gwarancją producenta liczoną od daty zakupu. Gwarancja nie obejmuje: wad i uszkodzeń powstałych z winy użytkownika bądź wskutek niewłaściwego użytkowania (niezgodnego z przeznaczeniem), uszkodzeń mechanicznych oraz powstałych wskutek stosowania akcesoriów innych niż dołączone w zestawie, materiałów eksploatacyjnych.

Szczegółowe warunki gwarancji oraz dane kontaktowe dostępne są na stronie internetowej:

www.garett.pl

Producent/Osoba odpowiedzialna na terenie EU:

GARETT sp. z o.o.

ul. Sandomierska 209

25 - 330 Kielce, Polska

www.garett.pl

kontakt@garett.pl



Prawidłowe usuwanie
produktu (zużyty sprzęt
elektryczny i elektroniczny)

Oznaczenie umieszczone na produkcie lub w odnoszących się do niego tekstach wskazuje, że po upływie okresu użytkowania nie należy usuwać go z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych. Aby uniknąć szkodliwego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi wskutek niekontrolowanego usuwania odpadów, prosimy o oddzielenie produktu od innego typu odpadów oraz odpowiedzialny recykling w celu promowania ponownego użycia zasobów materialnych jako stałej praktyki. Informacje na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska recyklingu tego produktu użytkownicy w gospodarstwach domowych mogą uzyskać w punkcie sprzedaży detalicznej, w którym dokonali zakupu produktu, lub u organów władz lokalnych. Użytkownicy w firmach powinni skontaktować się ze swoim dostawcą i sprawdzić warunki umowy zakupu. Produktu nie należy usuwać razem z innymi odpadami komercyjnymi.



GARETT SPÓŁKA Z O. O. niniejszym oświadcza, że produkt jest zgodny z Dyrektywą 2014/30/UE oraz 2011/65/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: www.garett.pl