

Masażer do twarzy i szyi
z funkcją próżniową

Beauty Lift Skin Pulse



Instrukcja obsługi

Dziękujemy za wybór urządzenia **Garett Beauty Lift Skin Pulse**

Wprowadzenie

Lift Skin Pulse to domowy masażer do twarzy i szyi z funkcją próżniową. Łączy działanie mikrostimulacji EMS, podciśnienia, terapii ciepłem oraz światła LED, wspierając codzienną pielęgnację skóry i komfort zabiegu.

O produkcie

Urządzenie przeznaczone jest do pielęgnacji szyi, linii żuchwy i wybranych partii twarzy. Może być stosowane jako element domowego rytuału pielęgnacyjnego wspierającego poprawę wyglądu skóry, komfort masażu oraz codzienną pielęgnację okolic szyi i żuchwy. Produkt nie jest wyrobem medycznym i nie służy do diagnozowania, leczenia ani łagodzenia chorób.

Zasady bezpieczeństwa

- Używaj urządzenia wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Nie używaj urządzenia podczas ładowania.
- Nie zanurzaj urządzenia w wodzie.
- Nie używaj urządzenia na suchej skórze.
- Przed zabiegiem zawsze nałóż żel przewodzący lub serum.
- Jeśli urządzenie jest uszkodzone, natychmiast przerwij użytkowanie.
- Nie rozkręcaj, nie modyfikuj ani nie naprawiaj urządzenia samodzielnie.
- Nie przekraczaj zalecanego czasu i częstotliwości stosowania.


Przeciwwskazania

Nie używaj urządzenia:

- w ciąży i w okresie karmienia piersią,
- jeśli masz rozrusznik serca lub inne wszczepione urządzenie medyczne,
- w przypadku ran, infekcji, stanów zapalnych, nasilonego trądziku lub innych zmian skórnych,

- w przypadku ciężkich chorób serca, nadciśnienia, padaczki lub chorób nowotworowych,
- jeśli masz skłonność do krwawień, hemofilii, trombocytopenię lub przyjmujesz leki przeciwzakrzepowe,
- w przypadku nadczynności tarczycy, obrzękniętych węzłów chłonnych, żylaków szyi lub stanów zapalnych w obrębie szyi,
- jeśli masz niewyjaśnione guzki, podejrzane zmiany lub zmiany nowotworowe w obrębie szyi,
- jeśli jesteś szczególnie wrażliwa(-y) na bodźce fizyczne lub masz historię silnych reakcji alergicznych.

Poznaj swoje urządzenie

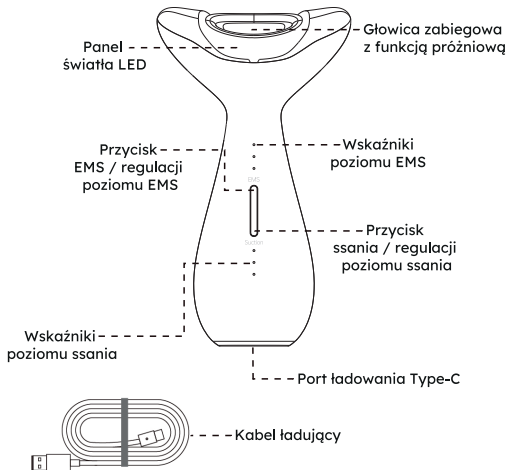

Elementy urządzenia

Lift Skin Pulse składa się z podgrzewanej głowicy zabiegowej z funkcją próżniową, panelu światła LED, przycisku ssania, przycisku EMS, wskaźników poziomu oraz portu ładowania Type-C.

Przyciski i porty

Przycisk ssania

- naciśnij i przytrzymaj, aby uruchomić tryb ssania,
- krótko naciśnij, aby zmienić poziom intensywności ssania,
- tryb ssania oferuje 3 poziomy intensywności.

Przycisk EMS

- naciśnij i przytrzymaj, aby uruchomić tryb EMS,
- krótko naciśnij, aby zmienić poziom intensywności EMS,
- tryb EMS oferuje 3 poziomy intensywności.

Tryb łączony

- uruchom jeden z trybów, a następnie przytrzymaj drugi przycisk, aby włączyć działanie łączone,
- w trybie łączonym możesz niezależnie regulować poziom ssania i poziom EMS.

Port ładowania

- służy do ładowania urządzenia za pomocą przewodu Type-C dołączonego do zestawu.

Wskaźniki LED

- w trybie ssania urządzenie pracuje ze światłem czerwonym,
- w trybie EMS urządzenie pracuje ze światłem żółtym,
- w trybie łączonym urządzenie pracuje ze światłem pomarańczowym,
- wskaźniki poziomu pokazują aktualny poziom intensywności,
- podczas ładowania wskaźniki sygnalizują poziom naładowania baterii,
- po pełnym naładowaniu wskaźniki pozostają zapalone przez około 2 minuty, a następnie gasną.

Szybki Start

1. W pełni naładuj urządzenie przed pierwszym użyciem.
2. Oczyszć skórę szyi, linii żuchwy i wybranych partii twarzy.
3. Nałóż żel przewodzący lub serum.
4. Wybierz tryb: ssanie, EMS lub tryb łączony.
5. Przyłóż urządzenie do skóry i rozpocznij zabieg.
6. Używaj przez około 5 minut.
7. Po zabiegu wyłącz urządzenie i oczyść głowicę.

Jak działa technologia Garrett Beauty

Lift Skin Pulse wykorzystuje połączenie kilku technologii pielęgnacyjnych.

Mikrostymulacja EMS

EMS to delikatne impulsy elektryczne wspierające komfort zabiegu oraz codzienną pielęgnację skóry.

Funkcja próżniowa

Funkcja ssania zapewnia masaż próżniowy, wspierając pielęgnację szyi, linii żuchwy i wybranych partii twarzy.

Terapia ciepłem

Urządzenie pracuje z funkcją grzania o temperaturze około 42°C, zwiększając komfort zabiegu.

Światło LED

Lift Skin Pulse wykorzystuje światło czerwone, żółte oraz pomarańczowe, zależnie od wybranego trybu pracy.

Regularne stosowanie urządzenia może wspierać codzienną pielęgnację skóry szyi i linii żuchwy oraz poprawiać komfort domowego masażu.

Tryby pracy urządzenia

Tryb ssania

Co robi: łączy masaż próżniowy, ciepło i czerwone światło LED.

Dla kogo: dla osób, które chcą wykonać masaż próżniowy okolic szyi, linii żuchwy i dolnej części twarzy.

Jak długo stosować: około 5 minut.

Częstotliwość: 2-3 razy w tygodniu lub co drugi dzień.

Główne efekty: komfortowy masaż, uczucie ciepła i pielęgnacja skóry.

Poziomy intensywności: 3.

Tryb EMS

Co robi: łączy mikrostymulację EMS, ciepło i żółte światło LED.

Dla kogo: dla osób preferujących zabieg z impulsami EMS bez funkcji ssania.

Jak długo stosować: około 5 minut.

Częstotliwość: 2-3 razy w tygodniu lub co drugi dzień.

Główne efekty: stymulacja EMS i komfortowy zabieg pielęgnacyjny.

Poziomy intensywności: 3.

Tryb łączony

Co robi: łączy jednocześnie działanie ssania, EMS, ciepła i pomarańczowego światła LED.

Dla kogo: dla osób oczekujących bardziej intensywnego zabiegu pielęgnacyjnego.

Jak długo stosować: około 5 minut.

Częstotliwość: 2-3 razy w tygodniu lub co drugi dzień.

Główne efekty: połączenie masażu próżniowego i mikrostymulacji EMS w jednym zabiegu.

Poziomy intensywności: 3 poziomy ssania i 3 poziomy EMS, regulowane niezależnie.

Instrukcja użytkowania

Krok 1. Przygotowanie skóry

Dokładnie oczyść skórę szyi, linii żuchwy i wybranych partii twarzy. Usuń resztki makijażu, sebum i potu. Zepnij włosy lub odsuń je tak, aby nie zostały wciągnięte przez urządzenie.

Krok 2. Nałóż kosmetyk

Nałóż odpowiednią ilość żelu przewodzącego lub serum na całą strefę zabiegową. Nie używaj urządzenia na suchej skórze.

Krok 3. Wybierz tryb pracy

Uruchom wybrany tryb:

- naciśnij i przytrzymaj przycisk ssania, aby włączyć tryb ssania,
- naciśnij i przytrzymaj przycisk EMS, aby włączyć tryb EMS,
- aby uruchomić tryb łączony, włącz jeden tryb, a następnie przytrzymaj drugi przycisk.

Krok 4. Prawidłowe ruchy urządzenia

Prowadź urządzenie powoli i płynnie po skórze szyi, linii żuchwy oraz dolnej części twarzy. Nie zatrzymuj urządzenia zbyt długo w jednym miejscu. Unikaj środkowej części gardła, okolicy tarczycy, rejonu tętnic szyjnych po obu stronach szyi oraz wyraźnie wystających partii kostnych.

Krok 5. Czas trwania zabiegu

Zalecany czas jednego zabiegu to około 5 minut. Urządzenie wyłącza się automatycznie po około 5 minutach pracy.

Krok 6. Co zrobić po zabiegu

Po zakończeniu zabiegu wyłącz urządzenie. Oczyść głowicę miękką, suchą lub lekko wilgotną ściereczką. Jeśli wykonujesz zabieg w ciągu dnia, stosuj odpowiednią ochronę przeciwsłoneczną.

Krok 7. Pierwsze użycie

Przy pierwszym użyciu zaleca się wykonać test na wewnętrznej stronie przedramienia na niskim poziomie przez 10–20 sekund.

Następnie obserwuj skórę przez 24 godziny przed użyciem urządzenia na szyi i twarzy.



✓ **Wykonuj zabieg**, przesuwając urządzenie powoli po bocznych partiach szyi, wzdłuż linii żuchwy i dolnej części twarzy.

✗ **Nie stosuj** urządzenia na środku gardła, w okolicy tarczycy, przy tętnicach szyjnych ani na wyraźnie wystających partiach kostnych.

Wskazania i efekty

Problem skóry / potrzeba	Tryb / ustawienie	Częstotliwość	Efekt
Potrzeba delikatnego startu	tryb ssania lub tryb EMS, poziom 1	2-3 razy w tygodniu	łagodniejsze odczucie zabiegu
Chęć wykonania masażu próżniowego	tryb ssania	2-3 razy w tygodniu	komfortowy masaż i uczucie ciepła
Preferencja dla stymulacji impulsami	tryb EMS	2-3 razy w tygodniu	zabieg EMS bez funkcji ssania
Potrzeba intensywniejszego zabiegu	tryb łączony	co drugi dzień	jednoczesne działanie EMS i ssania
Pielęgnacja szyi i linii żuchwy	tryb dobrany do komfortu użytkownika	2-3 razy w tygodniu	regularna pielęgnacja wybranych obszarów

Dla bezpieczeństwa Twojej skóry

- Nie używaj urządzenia na suchej skórze.
- Zawsze nakładaj żel przewodzący lub serum przed zabiegiem.
- Nie wykonuj zabiegu na skórze podrażnionej, uszkodzonej lub objętej stanem zapalnym.
- Nie stosuj urządzenia bezpośrednio po intensywnej ekspozycji na słońce.
- Po zabiegu dziennym stosuj odpowiednią ochronę przeciwsłoneczną.
- Nie zatrzymuj urządzenia długo w jednym miejscu.
- Nie stosuj urządzenia na środku gardła, nad tarczycą, przy tętnicach szyjnych ani na wyraźnie wystających partiach kostnych.
- Jeśli podczas zabiegu odczuwasz ból, zawroty głowy, silny dyskomfort lub zauważysz niepokojącą reakcję skóry, natychmiast przerwij używanie urządzenia.
- Jeśli masz wrażliwą skórę, rozpocznij od najniższego poziomu intensywności.

- Upewnij się, że włosy są odsunięte od strefy zabiegowej, aby nie zostały wciągnięte przez urządzenie.

Czyszczenie i konserwacja

- Przed czyszczeniem wyłącz urządzenie i odłącz je od ładowarki.
- Czyść urządzenie miękką, suchą ściereczką.
- W razie potrzeby użyj lekko wilgotnej ściereczki.
- Nie zanurzaj urządzenia w wodzie.
- Nie używaj agresywnych środków czyszczących.
- Jeśli nie używasz urządzenia przez dłuższy czas, doładuj akumulator raz na 2-3 miesiące.
- Przechowuj urządzenie w chłodnym, suchym miejscu, z dala od źródeł ciepła, promieni słonecznych i materiałów łatwopalnych.

Najczęstsze pytania (FAQ)

Czy mogę używać urządzenia codziennie?

Nie ma takiej potrzeby. Zalecana częstotliwość to 2-3 razy w tygodniu lub co drugi dzień.

Czy można stosować urządzenie w ciąży?

Nie. Urządzenie nie powinno być używane w ciąży ani w okresie karmienia piersią.

Kiedy zobaczę efekty?

Najlepsze efekty uzyskuje się przy regularnym, systematycznym stosowaniu zgodnie z zalecaną częstotliwością.

Czy to normalne, że skóra jest ciepła po zabiegu?

Tak. Urządzenie pracuje z funkcją grzania, dlatego po zabiegu może być odczuwalne ciepło skóry.

Czy można używać urządzenia na szyję?

Tak. Urządzenie zostało zaprojektowane do pielęgnacji szyi, linii żuchwy i wybranych partii twarzy, ale należy omijać środek gardła, okolice tarczycy i tętnice szyjne.

Czy można używać urządzenia na twarzy?

Tak, ale tylko na wybranych partiach twarzy, głównie w dolnej części twarzy i przy linii żuchwy.

Czy mogę używać urządzenia bez żelu lub serum?

Nie. Przed zabiegiem należy zawsze nałożyć żel przewodzący lub serum.

Czy urządzenie wyłącza się automatycznie?

Tak. Urządzenie wyłącza się automatycznie po około 5 minutach pracy.

Specyfikacja techniczna

- **Nazwa produktu:** Garrett Beauty Lift Skin Pulse
- **Typ urządzenia:** masażer do twarzy i szyi z funkcją próżniową
- **Akumulator:** litowo-jonowy 3,7 V / 700 mAh
- **Czas ładowania:** 1,5–3 godziny
- **Automatyczne wyłączenie:** po około 5 minutach
- **Tryby pracy:** ssanie, EMS, tryb łączony
- **Poziomy intensywności:** 3 poziomy ssania, 3 poziomy EMS
- **Temperatura pracy:** 42°C ± 3°C
- **Światło LED:** czerwone 630 nm, żółte 590 nm, pomarańczowe 630 nm + 590 nm
- **Parametry ssania:** poziom 1 – 13 ± 5 kPa, poziom 2 – 17 ± 5 kPa, poziom 3 – 21 ± 5 kPa
- **Przepływ:** ≥48 L/H
- **Pobór prądu roboczego:** ≤1200 mA
- **Klasa wodoodporności:** IPX0
- **Wymiary urządzenia:** 143,2 × 82 × 40 mm
- **Waga:** 113 g ± 10 g

Więcej informacji na temat tego urządzenia dostępnych jest na stronie www.garett.pl. Odwiedź naszą stronę, aby poznać więcej produktów i akcesoriów.



W przypadku jakichkolwiek problemów z użytkowaniem urządzenia zachęcamy do odwiedzenia zakładki Pomoc Techniczna na naszej stronie internetowej (zeskanuj kod QR/skorzystaj z linku) lub kontaktu z Działem Pomocy Technicznej: serwis@garett.pl



<https://garett.com.pl/pl/i/Pomoc-techniczna/145>

Odwiedź nas:



Rozszerz swój rytuał z Garrett Beauty

Garrett Beauty Lift Skin Pulse to ważny element Twojego codziennego rytuału pielęgnacyjnego. Poznaj inne urządzenia **Garrett Beauty**, które wspierają pielęgnację twarzy, szyi, dłoni i włosów:

Garrett Beauty AeroGlow

Aeroprostownica 2w1 do suszenia i prostowania włosów – szybka stylizacja, wygładzenie i ochrona włosów podczas codziennego modelowania.



Garrett Beauty Skin Ritual Face & Neck

Zestaw masek LED na twarz i szyję – zaawansowana pielęgnacja światłem wspierająca ujędrnienie, regenerację i wyrównanie wyglądu skóry.



Garrett Beauty Skin Ritual Hands

Maska LED do dłoni – światłoterapia wspierająca regenerację, wygładzenie i poprawę wyglądu skóry dłoni.



Garrett Beauty Flash Sense

Depilator IPL do domowego usuwania owłosienia – komfortowa epilacja, długotrwały efekt gładkiej skóry i wygoda użytkowania.



**Zobacz, jak Pani Kosmetolog korzysta z
tych urządzeń na naszym
kanale YouTube!**



**Odkryj wszystkie urządzenia
Garett Beauty**





GARETT

BEAUTY

Gwarancja i reklamacja

Produkt jest objęty 24-miesięczną gwarancją producenta liczoną od daty zakupu. Gwarancja nie obejmuje: wad i uszkodzeń powstałych z winy użytkownika bądź wskutek niewłaściwego użytkowania (niezgodnego z przeznaczeniem), uszkodzeń mechanicznych oraz powstałych wskutek stosowania akcesoriów innych niż dołączone w zestawie, materiałów eksploatacyjnych.

Szczegółowe warunki gwarancji oraz dane kontaktowe dostępne są na stronie internetowej:

www.garett.pl

Producent/Osoba odpowiedzialna na terenie EU:

GARETT sp. z o.o.

ul. Sandomierska 209

25 - 330 Kielce, Polska

www.garett.pl

kontakt@garett.pl



Prawidłowe usuwanie produktu (zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny)

Oznaczenie umieszczone na produkcie lub w odnoszących się do niego tekstach wskazuje, że po upływie okresu użytkowania nie należy usuwać go z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych. Aby uniknąć szkodliwego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi wskutek niekontrolowanego usuwania odpadów, prosimy o oddzielenie produktu od innego typu odpadów oraz odpowiedzialny recykling w celu promowania ponownego użycia zasobów materialnych jako stałej praktyki. Informacje na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska recyklingu tego produktu użytkownicy w gospodarstwach domowych mogą uzyskać w punkcie sprzedaży detalicznej, w którym dokonali zakupu produktu, lub u organów władz lokalnych. Użytkownicy w firmach powinni skontaktować się ze swoim dostawcą i sprawdzić warunki umowy zakupu. Produktu nie należy usuwać razem z innymi odpadami komercyjnymi.



GARETT SPÓŁKA Z O. O. niniejszym oświadcza, że produkt jest zgodny z Dyrektywą 2014/30/UE oraz 2011/65/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: www.garett.pl