

[Środki ostrożności]

W celu bezpiecznego użytkowania urządzenia należy dokładnie przeczytać instrukcję obsługi i stosować produkt zgodnie z jej zaleceniami.



Niebezpieczeństwo - Treści oznaczające ryzyko uszkodzenia ciała lub śmierci.



Ostrzeżenie - Treści oznaczające ryzyko poważnego uszkodzenia ciała.



Uwaga - Treści oznaczające ryzyko uszkodzenia ciała lub szkód materialnych.



Niebezpieczeństwo:

- Urządzenie nie powinno być używane przez osoby korzystające z elektronicznych wyrobów medycznych, takich jak rozruszniki serca, skanery EKG (elektrokardiografy), sztuczne płuco-serca, pompy infuzyjne itp. Nieprawidłowe działanie medycznych urządzeń elektronicznych może prowadzić do wypadków oraz poważnego uszczerbku na zdrowiu.
- Nie należy używać tego produktu w pobliżu napełnionych wodą wanien, brodzików, umywalek lub innych zbiorników. Produkt oraz jego źródło zasilania należy bezwzględnie utrzymywać w suchości.
- Nie używać urządzenia w bezpośrednim sąsiedztwie kucharek (pieców) ani strumienia ciepłego powietrza z klimatyzacji, aby uniknąć wypadków oraz awarii produktu.
- Jeśli produkt, pilot (kontroler) lub przewód zasilający są uszkodzone, należy natychmiast zaprzestać ich używania, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem.

- Nie należy umieszczać urządzenia w miejscach łatwo dostępnych dla niemowląt i dzieci, aby zapobiec niebezpiecznym wypadkom.
- Produkt nie jest wodoodporny. Nie należy zanurzać go w wodzie, aby zapobiec awariom lub wypadkom. W przypadku zanurzenia w wodzie, należy natychmiast zaprzestać jego użytkowania.



! Ostrzeżenie:

- Produkt jest przeznaczony wyłącznie do pielęgnacji twarzy; nie należy stosować go niezgodnie z przeznaczeniem.
- Nie należy samodzielnie demontować, modyfikować ani naprawiać urządzenia, aby zapewnić jego prawidłowe i bezpieczne działanie.
- Nie stosować w połączeniu ze składnikami fotouczulającymi lub kwasowymi kosmetykami do pielęgnacji skóry.
- Poniższe grupy osób nie powinny korzystać z urządzenia, a używanie go pomimo przeciwwskazań może prowadzić do wypadków lub problemów skórnych:
 - Osoby poniżej 18. roku życia
 - Osoby cierpiące na choroby serca
 - Pacjenci z nowotworami złośliwymi
 - Osoby ze skłonnością do powstawania bliznowców (keloidów)
 - Osoby z ostudą (melasmą) na twarzy
 - Osoby z zaburzeniami psychicznymi
 - Pacjenci z chorobami zakaźnymi
 - Osoby ze skórą uszkodzoną przez słońce (np. poparzenia słoneczne)
 - Osoby z nieprawidłowym ciśnieniem krwi
 - Kobiety w ciąży, matki karmiące piersią oraz inne osoby o podwyższonej wrażliwości
 - Osoby ze stwierdzoną nadwrażliwością na światło (fotouczulenie)
 - Pacjenci z cukrzycą
 - Osoby na stałe przyjmujące leki

- Pacjenci onkologiczni, w szczególności osoby z rakiem skóry lub znamionami przednowotworowymi
- Osoby z zaburzeniami gojenia się ran
- Osoby z chorobami autoimmunologicznymi
- Osoby, które w ciągu ostatnich trzech miesięcy poddały się zabiegowi wstrzyknięcia botoksu w okolicy twarzy
- Osoby z przebarwieniami lub kontaktowym zapaleniem skóry wywołanym przez włókna chemiczne (syntetyczne)
- Osoby długotrwale przyjmujące leki sterydowe lub z zaburzeniami naczyń włosowatych wynikającymi z dysfunkcji wątroby
- Jeśli w miejscu aplikacji znajdują się wypełniacze stałe (permanentne) lub tymczasowe wypełniacze podskórne, przed użyciem urządzenia należy skonsultować się z lekarzem.
- Osoby w trakcie leczenia szpitalnego powinny skonsultować się z lekarzem przed użyciem urządzenia.
- Urządzenia nie należy stosować w następujących obszarach (użycie w tych miejscach może prowadzić do wypadków lub problemów skórnych):
 - Obszary inne niż wskazane w instrukcji
 - Skóra uszkodzona przez słońce
 - Miejsca ze stanem zapalnym, np. z aktywnym trądzikiem
 - Znamię Oty
 - Miejsca ze stanem zapalnym wywołanym przez kosmetyki
 - Duże obszary skóry zmienionej chorobowo lub uszkodzonej
 - Zmiany skórne wywołane światłem, zaczerwienieniem lub podrażnieniem mechanicznym



Uwaga:


- Podczas obsługi tego produktu należy upewnić się, że ręce są całkowicie suche.
- Urządzenie jest instrumentem precyzyjnym. Nie wolno go zginać (składać), ciągnąć, siadać na nim ani w żaden inny sposób doprowadzać do zwarcia, które mogłoby wpłynąć na jego działanie. Po użyciu należy produkt odpowiednio przechowywać.

- Aby uniknąć dyskomfortu, urządzenie należy stosować zgodnie z czasem i częstotliwością określoną w instrukcji obsługi.
- W przypadku odczuwania dyskomfortu podczas zabiegu należy natychmiast przerwać użytkowanie urządzenia.
- Nie dopuszczać do uderzenia bądź upuszczenia urządzenia oraz źródła zasilania

【Zawartość opakowania】



Maska laserowa do odmładzania skóry
(w tym pilot / kontroler sterujący)

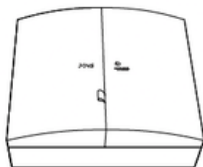


Pudełko do przechowywania



Kabel ładujący TYP-C




Karta gwarancyjna

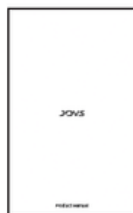

Instrukcja obsługi

【Wprowadzenie do spektrum światła】


Urządzenie wyposażone jest w 140 skupionych wiązek światła FPT, łączących 4 rodzaje fal świetlnych. Dzięki uporządkowanemu rozmieszczeniu precyzyjnie trafiają one w obszar całej twarzy, cienie pod oczami, doliny łez oraz bruzdy nosowo-wargowe, umożliwiając wysokoenergetycznemu światłu czerwonemu i bliskiej podczerwieni dokładne działanie na skórę.

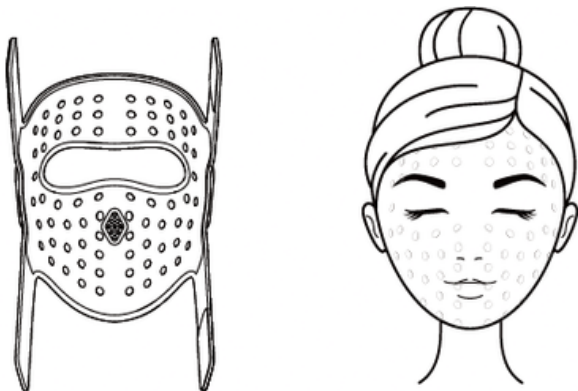


- $660 \pm 2 \text{ nm}$ — Aktywuje układ mikrokrążenia, stymuluje aktywność komórkową, przyspiesza metabolizm skóry i rozjaśnia cerę.
- $850 \pm 2 \text{ nm}$ — Stymuluje regenerację kolagenu u podstawy skóry, napina i nawilża skórę oraz poprawia jej strukturę.
- $940 \pm 2 \text{ nm}$ — Redukuje zaczerwienienia twarzy, stabilizuje równowagę skóry, hamuje produkcję melaniny i zmniejsza wiotkość.
- $1064 \pm 2 \text{ nm}$ — Wygładza drobne linie, stymuluje regenerację kolagenu w głębokich tkankach, poprawia ujędrnienie (wypełnienie) skóry oraz wzmacnia wewnętrzne krążenie skórne.

【Wprowadzenie do produktu】

W celu bezpiecznego użytkowania urządzenia należy dokładnie przeczytać instrukcję obsługi i stosować produkt zgodnie z jej zaleceniami.

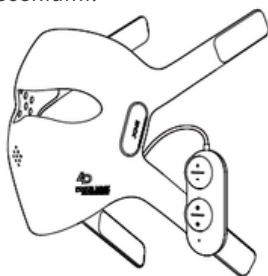

- 6 skupionych źródeł światła FPT + 67 połączonych skupionych źródeł światła FPT;
- Wskaźnik pulsacyjny (światło oddechowe) – wskazuje stan pracy urządzenia po włączeniu zasilania.

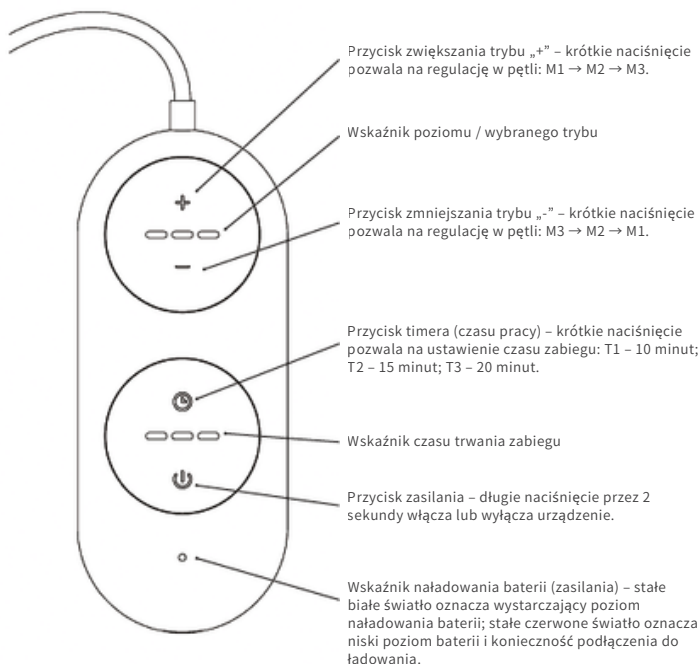



www.jovs.com



03.04.02.0120 V1.0

【Rekomendowane programy zabiegowe】

M1: Tryb łagodzący (10 minut) + M3: Tryb głęboki (10 minut)

Przeznaczenie: Skóra sucha wrażliwa, skóra tłusta wrażliwa.

Działanie: Stabilizuje barierę ochronną skóry, stymuluje mikrokążenie, poprawia strukturę skóry, działa przeciwstarzeniowo i redukuje zmarszczki.

M2: Tryb standardowy (10 minut) + M3: Tryb głęboki (10 minut)

Przeznaczenie: Skóra mieszana, inne typy skóry.

Działanie: Rozjaśnia cerę i redukuje przebarwienia, zmniejsza czerwone oraz ciemne cienie pod oczami, działa przeciwstarzeniowo i redukuje zmarszczki.

M2: Tryb standardowy (15–20 minut)

Przeznaczenie: Skóra mieszana, inne typy skóry.

Działanie: Głębokie rozjaśnianie skóry i intensywna redukcja przebarwień.

M3: Tryb głęboki (15–20 minut)

Przeznaczenie: Skóra mieszana, inne typy skóry.

Działanie: Głębokie działanie przeciwstarzeniowo-odmładzające oraz redukcja zmarszczek.

【Specyfikacja produktu】

Nazwa produktu	JOVS 4D FOCUS MASK
Model	JM2
Wymiary	499 * 256 * 200 mm
Waga	395g
Długość fali wyjściowej	660-1064 nm
Długość przewodu zasilającego	75 cm
Moc wyjściowa	6 W
Normy i standardy	FCC Part 15B Class B

【Specyfikacja produktu】


Przed pierwszym użyciem należy przeprowadzić test na skórze twarzy trwający 1 minutę. Jeśli nie wystąpi żaden dyskomfort, można rozpocząć normalne użytkowanie produktu.

* Jeśli zajdzie potrzeba ponownego uruchomienia, należy ponownie włączyć urządzenie; jeśli chcesz przerwać zabieg w trakcie jego trwania, wyłącz urządzenie i schowaj produkt do pudełka.




KROK 1: Przed rozpoczęciem zabiegu skóra powinna być czysta i sucha.


KROK 2: Dopasuj długość paska i załóż maskę na twarz.

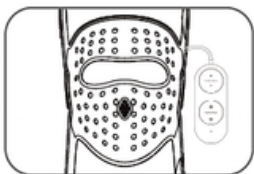

KROK 3: Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania na kontrolerze (pilocie) przez 2 sekundy, aby włączyć urządzenie i uruchomić naświetlanie.

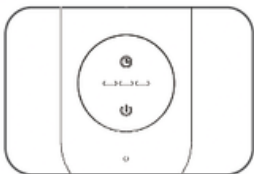

KROK 4: Krótco naciśnij przycisk timera, aby ustawić czas trwania zabiegu (domyślne ustawienie po włączeniu urządzenia to T1: 10 minut).

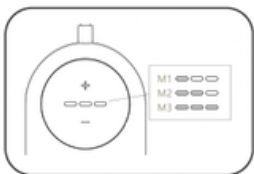


KROK 5: Urządzenie oferuje 3 tryby pracy; użyj przycisku „+”, aby zwiększyć intensywność, lub „-”, aby ją zmniejszyć, i dopasuj tryb odpowiedni dla siebie.



KROK 6: Odpręż się i ciesz się zabiegiem, aż naświetlanie dobiegnie końca, a urządzenie automatycznie się wyłączy. Po zakończeniu sesji możesz przejść do swojej standardowej pielęgnacji nawilżającej.

【Ładowanie】

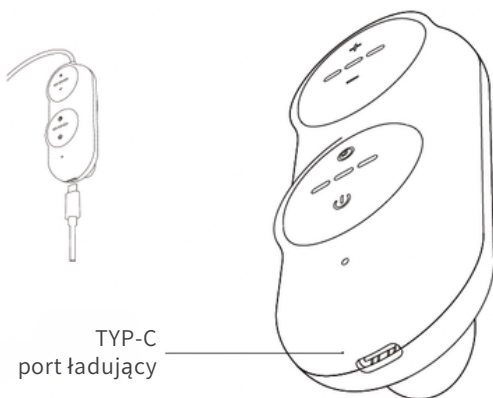

KROK 1: Podczas ładowania pilota kontroler głównego urządzenia pozostaje wyłączony i nie ma możliwości uruchomienia maski w trakcie procesu ładowania.

KROK 2: Ładuj urządzenie za pomocą dołączonego kabla ładującego (migający czerwony wskaźnik na pilocie oznacza ładowanie, a stałe białe światło oznacza pełne naładowanie).

* Gdy poziom naładowania baterii jest niski, wskaźnik zasilania na pilocie zapala się na czerwono. Należy wówczas niezwłocznie naładować urządzenie, aby nie wpłynęło to negatywnie na kolejne użycie produktu.


【Częstotliwość stosowania】

- Urządzenie może być stosowane codziennie; po każdym zabiegu należy intensywnie nawilżyć skórę.
- Maksymalna częstotliwość to dwa zabiegi dziennie, przy czym łączny czas naświetlania nie może przekraczać 30 minut.
- Po zbudowaniu odpowiedniej tolerancji skóry można stopniowo zwiększać intensywność lub czas wybranego programu pielęgnacyjnego.

【Częstotliwość stosowania】



Aby zapewnić optymalne działanie i jak najdłuższą żywotność produktu, po każdym użyciu należy przechowywać go w etui/pudełku, co pozwoli uniknąć uszkodzeń spowodowanych długotrwałym gromadzeniem się kurzu lub przypadkowymi zdarzeniami.

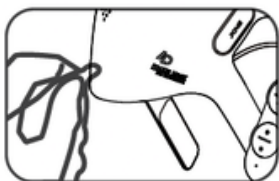

Jeśli produkt wymaga wyczyszczenia, należy zwilżyć czystą wodą bezpyłową ściereczkę lub włókninę i przetrzeć zakurzone miejsca.



Produkt zawiera baterie. Podczas utylizacji urządzenia nie należy wyrzucać go razem ze zwykłymi odpadami domowymi. Zamiast tego należy przekazać je do wyznaczonego punktu zbiórki i recyklingu.

【Częstotliwość stosowania】

Niniejszy rozdział opisuje problemy, które mogą wystąpić podczas korzystania z tego produktu. Jeśli poniższe informacje nie pozwolą na rozwiązanie problemu, skontaktuj się z centrum obsługi klienta platformy zakupowej, na której zakupiono produkt JOVS, w celu uzyskania dalszych informacji.

Problem	Diagnoza usterki	Rozwiązanie
Część światła wewnątrz maski się nie świeci	Czy urządzenie zostało poddane naciskowi lub doszło do jego zgięcia?	Należy natychmiast oddać produkt do naprawy lub wymienić go na nowy.
Urządzenie nie włącza się po długim okresie nieużywania	Aktywacja zabezpieczenia przed głębokim rozładowaniem baterii.	Przed użyciem produktu należy podłączyć go do ładowania za pomocą kabla zasilającego.
Nie można włączyć urządzenia za pomocą pilota	Czy bateria jest wystarczająco naładowana?	Podłącz kabel ładowający, aby upewnić się, że produkt działa prawidłowo.

【Instrukcje specjalne】

Firma JOVS zastrzega sobie pełne prawo do wprowadzania zmian oraz interpretacji niniejszej instrukcji obsługi, dokładając wszelkich starań, aby zapewnić dokładność jej treści. Treść tego materiału została dokładnie sprawdzona. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek błędów drukarskich lub pominięć, firma zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji w granicach obowiązującego prawa. Firma zastrzega sobie również prawo do ulepszania i modyfikowania produktu oraz instrukcji. W przypadku zmiany danych produktu, nie będziemy o tym informować osobno. Ilustracje zamieszczone w niniejszej instrukcji służą wyłącznie celom poglądowym. Jeśli obraz nie odpowiada rzeczywistemu produktowi, należy odnieść się do stanu faktycznego urządzenia.

【Instrukcje specjalne】

Nazwa części	Nazwa szkodliwych substancji lub pierwiastków w produkcie					
	Substancje lub pierwiastki szkodliwe					
	Ołów (Pb)	Rtęć (Hg)	Kadm (Cd)	Chrom sześciowartościowy (Cr(VI))	Polibromowane bifenyle (PBBs)	Polibromowane etery difenylowe (PBDEs)
Komponenty elektroniczne	X	○	○	○	○	○
Komponenty metalowe (Hardware)	○	○	○	○	○	○
Komponenty plastikowe	○	○	○	○	○	○
Elementy opakowania	○	○	○	○	○	○

Niniejsza tabela została sporządzona zgodnie z przepisami normy SJ/T 11364.

○ – Oznacza, że zawartość danej substancji szkodliwej we wszystkich materiałach jednorodnych tej części mieści się w granicach wymagań określonych w normie GB/T26572-2011.

X – Oznacza, że zawartość danej substancji szkodliwej w co najmniej jednym materiale jednorodnym tej części przekracza limit określony w normie GB/T26572-2011.

Wykazane w tabeli „substancje szkodliwe” oraz odpowiadające im części nie stanowią żadnego zagrożenia ani nie mają negatywnego wpływu na ludzkie ciało oraz środowisko naturalne pod warunkiem normalnego (prawidłowego) użytkowania produktu. Informacje te służą celom opisowym dla konsumentów oraz pracowników sektora recyklingu, co sprzyja właściwej utylizacji urządzenia po zakończeniu jego eksploatacji.



W warunkach normalnego użytkowania opisanych w niniejszej instrukcji obsługi, okres bezpiecznego dla środowiska użytkowania tego produktu (Environmental Protection Use Period) wynosi 5 lat. W tym czasie można bez obaw korzystać z urządzenia.

JOVS

Instrukcja obsługi