

JOVS

LED Neck & Chest Mask




Instrukcja | Przed użyciem należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją, która zawiera "Kartę gwarancyjną produktu".

1 WSTĘP

Dziękujemy za wybór produktów marki JOVS. Aby zapewnić optymalne wrażenia z użytkowania oraz najwyższą skuteczność, przed użyciem należy dokładnie zapoznać się z treścią niniejszej instrukcji.


2 ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

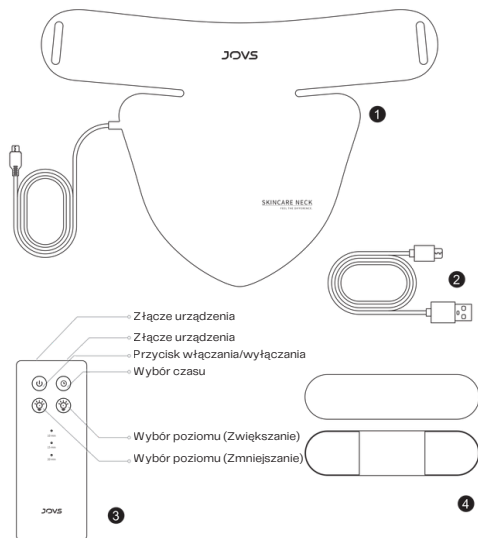


- 1 Maska LED na szyję i dekolty JOVS
- 2 Kabel ładowania Type-C
- 3 Kontroler / Pilot
- 4 Pasek mocujący

Uwaga: Akcesoria mogą się różnić w zależności od otrzymanego zestawu.


3 KRÓTCA INSTRUKCJA OBSŁUGI

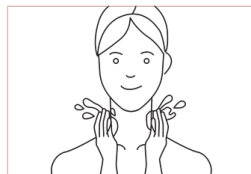

Krok 1: Oczyszcz i osusz skórę szyi.

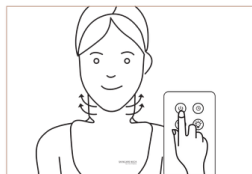

Krok 2: Połącz jednostkę główną z kontrolerem i dopasuj pasek. Załóż produkt, a następnie naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez 1,5 sekundy, aby go włączyć. Po włączeniu urządzenie domyślnie uruchamia się w trybie 1. Używaj krótkich naciśnień przycisku wyboru trybu, aby przełączać tryby.

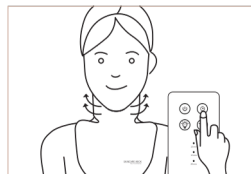

Krok 3: Urządzenie oferuje trzy ustawienia czasu: 10, 15 i 20 minut. Domyślnie po włączeniu ustawia się czas 10 minut, który można dostosować za pomocą krótkich naciśnień przycisku czasu.



Krok 4: Po upływie ustawionego czasu urządzenie wyłączy się automatycznie. Zdejmij produkt i kontynuuj swoją rutynową pielęgnację skóry. Zalecamy stosowanie urządzenia 3-5 razy w tygodniu.

4 ŚRODKI OSTROŻNOŚCI



Nie używaj tego produktu, jeśli należysz do którejkolwiek z następujących grup:

- Kobiety w ciąży lub planujące ciążę.
- Osoby wrażliwe na światło lub obecnie przyjmujące leki fototoksyczne / światłoczułujące.
- Osoby z genetycznymi schorzeniami oczu lub chorobami skóry (takimi jak tocznia rumieniowata, egzema fototoksyczna lub bielactwo).



Instrukcje dotyczące ładowania

- Kontroler zawiera baterię litowo-polimerową. Nie używaj urządzenia podczas ładowania. (Uwaga: Używanie kontrolera podczas ładowania uszkodzi baterię oraz urządzenie. Główna jednostka nie zaświeci się ani nie będzie działać).
- Przed pierwszym użyciem należy całkowicie naładować kontroler. Podłącz kabel ładowania USB do kontrolera, a następnie do źródła zasilania, aby rozpocząć ładowanie. (Uwaga: Poza sterowaniem zasilaniem, wyborem trybu i czasu, kontroler pełni również funkcję powerbanka. Dlatego podczas ładowania wystarczy podłączyć kabel Type-C do kontrolera).
- Gdy wskaźnik kontrolera miga, urządzenie się ładuje. Gdy wskaźnik świeci światłem ciągłym (nie miga), ładowanie zostało zakończone.

5 TEST WRAŻLIWOŚCI NA ŚWIATŁO

Przed pierwszym użyciem tego produktu należy przeprowadzić test wrażliwości na światło.

Krok 1

Umieść produkt na przedramieniu i włącz go, aby naświetlać skórę przez 10 minut. Jeśli na skórze wystąpią objawy takie jak zaczerwienienie lub świąd, wskazuje to na potencjalną nadwrażliwość na światło. Zalecamy zaprzestanie używania urządzenia i skonsultowanie się z dermatologiem przed ponownym użyciu.

Krok 2

Przed użyciem oczyść i upewnij się, że skóra jest sucha (bez makijażu), aby zapobiec wpływowi potencjalnie światłoczułujących składników kosmetyków na skuteczność pielęgnacji.

Krok 3

Po użyciu skóra może wykazywać lekkie zaczerwienienie, co jest normalną reakcją i powinno ustąpić w ciągu 1–2 godzin. Jeśli odczuwasz pieczenie lub jakikolwiek dyskomfort, natychmiast zaprzestań używania urządzenia.



NIEBEZPIECZEŃSTWO

NIE UŻYWAĆ W
ŁAZIENIE

- Osoby korzystające z urządzeń elektronicznych, takich jak rozruszniki serca, aparaty EKG, sztuczne płucoserca, pompy infuzyjne itp., nie powinny używać tego produktu. Nieprawidłowe działanie medycznych urządzeń elektronicznych może spowodować wypadki i dyskomfort fizyczny.
- Unikaj używania w pobliżu napełnionych wanien, brodzików, umywalk lub innych zbiorników z wodą. Utrzymuj produkt i źródła zasilania w stanie suchym.
- Unikaj używania w pobliżu pieców lub pod nawiewami klimatyzacji, aby zapobiec wypadkom i uszkodzeniom urządzenia.
- Nie używaj produktu, pilota ani przewodu zasilającego, jeśli są uszkodzone, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem.
- Przechowuj poza zasięgiem niemowląt i dzieci, aby zapobiec wypadkom.
- Ten produkt nie jest wodoodporny. Nie zanurzaj go w wodzie, aby zapobiec awariom lub wypadkom. Nie używaj urządzenia, jeśli zostało zanurzone.



UWAGA

- Ten produkt jest przeznaczony do stosowania na szyi. Nie używaj go do celów innych niż niezgodne z przeznaczeniem.
- Nie rozbieraj, nie modyfikuj ani nie naprawiaj produktu samodzielnie, aby zapewnić jego prawidłowe działanie.
- W okresie menstruacji lub laktacji stosuj produkt po konsultacji lekarskiej, jeśli to konieczne.
- Używaj ładowarki dopasowanej do napięcia wejściowego produktu i przestrzegaj zasad bezpieczeństwa elektrycznego. Nie zaleca się stosowania niekompatybilnych ładowarek.

W warunkach normalnego użytkowania produkt objęty jest jednoroczną gwarancją na wszelkie wady jakościowe jednostki głównej. Uszkodzenia lub problemy uznane za niezwiązane z jakością produktu nie są objęte gwarancją.

W przypadku jakichkolwiek problemów lub pytań podczas użytkowania, prosimy o kontakt z działem obsługi klienta w celu uzyskania pomocy.

PRZECHOWYWANIE

Przechowuj produkt w chłodnym, suchym miejscu, unikając miejsc zakurzonych, bezpośrednio nasłonecznionych lub wilgotnych.

CZYSZCZENIE

Przed i po użyciu wyczyść maskę ściereczką nasączoną wodą lub wilgotną ściereczką do czyszczenia. Upewnij się, że urządzenie jest wyłączone i odłączone od zasilania podczas czyszczenia.



UTYLIZACJA

Kontroler zawiera baterię wielokrotnego ładowania. Przed utylizacją produktu wyjmij baterię z kontrolera. Baterię należy zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi recyklingu baterii. Podczas wyjmowania baterii upewnij się, że zasilanie jest odłączone, i oddaj ją do wyznaczonego punktu recyklingu baterii w celu prawidłowego demontażu.

9 SERWIS GWARANCYJNY

Nazwa produktu: JOVS LED Neck & Chest Mask

Kontrola jakości: Certyfikowany produkt wysokiej jakości

Data: _____

Kontroler: _____

10 SPECYFIKACJA PRODUKTU

Typ urządzenia	Domowe przenośne urządzenie kosmetyczne
Nazwa produktu	JOVS LED Neck & Chest Mask
Marka	JOVS
Model	JNL1
Moc robocza	3W
Prąd	1A
Napięcie wejściowe	5V
Wymiary produktu	340 x 236 x 5,5 mm
Normy	GB 4706.1-2005, GB 4706.15-2008

11 SERWIS I NAPRAWA

- Jednostka główna tego urządzenia jest objęta gwarancją przez okres jednego roku od daty zakupu (z dowodem zakupu). Akcesoria i materiały eksploatacyjne nie są objęte gwarancją. Usługi napraw i aktualizacji poza okresem gwarancji lub nieobjęte gwarancją są dostępne odpłatnie.
- W celu zakupu dodatkowych lub zamiennych akcesoriów oraz materiałów eksploatacyjnych należy skontaktować się z dystrybutorem.
- Bezpłatny serwis naprawczy nie przysługuje w przypadku usterek spowodowanych następującymi czynnikami ludzkimi:
 - Usterki spowodowane samodzielnym demontażem lub modyfikacją urządzenia.
 - Usterki spowodowane niewłaściwym użytkowaniem lub brakiem odpowiedniej konserwacji.
 - Usterki spowodowane przypadkowym upuszczeniem lub uderzeniem.

12 KARTA GWARANCYJNA

Nazwa produktu		
Numer zamówienia		
Data zakupu		
Imię, nazwisko, nr tel. klienta		
Czas naprawy	Rejestr naprawy	Podpis technika