

JOVS

Instrukcja obsługi

[Środki ostrożności]

W celu bezpiecznego użytkowania urządzenia należy dokładnie przeczytać instrukcję obsługi i stosować produkt zgodnie z jej zaleceniami.



Niebezpieczeństwo - Treści oznaczające ryzyko uszkodzenia ciała lub śmierci.



Ostrzeżenie - Treści oznaczające ryzyko poważnego uszkodzenia ciała.



Uwaga - Treści oznaczające ryzyko uszkodzenia ciała lub szkód materialnych.



Niebezpieczeństwo:

- Osoby korzystające z elektronicznych wyrobów medycznych, w tym między innymi z rozruszników serca, skanerów EKG, sztucznych płuco-serc oraz pomp infuzyjnych, nie powinny używać tego produktu. Takie zastosowanie może prowadzić do zakłócenia pracy medycznego sprzętu elektronicznego, co stwarza ryzyko wypadków oraz negatywnych konsekwencji zdrowotnych.
- Zachowaj ostrożność i nie używaj produktu w bezpośrednim sąsiedztwie wanien, brodzików, umywalek ani innych zbiorników napełnionych wodą. Urządzenie oraz jego źródło zasilania należy bezwzględnie utrzymywać w suchości.
- Unikaj umieszczania produktu w pobliżu kucharek/pieców oraz w bezpośrednim strumieniu ciepłego powietrza z grzejników lub klimatyzatorów, aby zmniejszyć ryzyko wypadków i uszkodzenia urządzenia.
- Nie należy używać produktu w środowisku, w którym występują substancje żrące (korozyjne), ponieważ może to doprowadzić do wypadków lub awarii urządzenia.
- Upewnij się, że produkt jest przechowywany w miejscu niedostępnym dla niemowląt i małych dzieci.

- Aby zapobiec wypadkom, unikaj bezpośredniego patrzenia (zostawiania wzroku) w wewnętrzne źródło światła urządzenia.
- Nie należy używać produktu, jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, aby zapobiec ryzyku porażenia prądem oraz innym wypadkom.
- Należy pamiętać, że produkt nie jest wodoodporny. Unikaj zanurzania go w wodzie, ponieważ może to doprowadzić do awarii lub wypadków. W przypadku zanurzenia urządzenia w wodzie należy natychmiast zaprzestać jego dalszego użytkowania.



Ostrzeżenie:

- Nie należy podejmować prób samodzielnego demontażu, modyfikacji ani naprawy produktu, ponieważ może to zakłócić jego prawidłowe funkcjonowanie.
- **Stosowanie produktu jest odradzane poniższym grupom osób ze względu na potencjalne ryzyko wypadków lub problemów skórnych:**
 - Osoby poniżej 18. roku życia
 - Osoby ze skórą uszkodzoną przez słońce (np. poparzenia słoneczne)
 - Pacjenci z zaburzeniami gojenia się ran
 - Osoby z zaburzeniami neurologicznymi
 - Osoby obecnie przyjmujące leki
 - Osoby z nieprawidłowym ciśnieniem krwi
 - Osoby cierpiące na choroby psychiczne
 - Kobiety w ciąży oraz osoby w okresach podwyższonej wrażliwości
 - Osoby, które w ostatnim czasie przeszły operację w obrębie głowy
 - Osoby z ograniczonymi sprawnościami fizycznymi, sensorycznymi lub umysłowymi bądź z niepełnosprawnością intelektualną
 - Byli lub obecni pacjenci onkologiczni oraz osoby z potencjalnie ciężkimi schorzeniami
 - Osoby w trakcie zabiegów z zakresu medycyny estetycznej powinny skonsultować się z lekarzem przed użyciem urządzenia
 - Osoby gorączkujące
 - Pacjenci z chorobami serca
 - Pacjenci z chorobami układu odpornościowego (autoimmunologicznymi)
 - Pacjenci z nowotworami złośliwymi

- Pacjenci z przebarwieniami lub kontaktowym zapaleniem skóry wywołanym przez włókna chemiczne (syntetyczne)
 - W przypadku występowania niejednoznacznych lub niepokojących objawów zaleca się skonsultowanie z lekarzem przed użyciem urządzenia
 - Osoby będące w trakcie leczenia medycznego powinny skonsultować się z lekarzem przed rozpoczęciem korzystania z produktu
- Stosowanie produktu nie jest zalecane w następujących obszarach (użycie w tych miejscach może prowadzić do wypadków lub problemów skórnych):
 - Miejsca po urazach / zranione
 - Obszary inne niż wskazane w instrukcji
 - Rozległe obszary ze zmianami chorobowymi lub ranami
 - Błona śluzowa jamy ustnej oraz okolice narządów płciowych
 - Miejsca ze stanem zapalnym wywołanym przez kosmetyki
 - Zmienione chorobowo miejsca z plamami, charakteryzujące się świądem, zaczerwienieniem lub podrażnieniem mechanicznym




Uwaga:


- Podczas obsługi tego produktu upewnij się, że ręce są całkowicie suche.
- Produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku domowego i nie jest wyrobem medycznym. Nie nadaje się do zastosowań diagnostycznych, terapeutycznych ani innych celów komercyjnych.
- Urządzenie jest instrumentem precyzyjnym — unikaj jego upuszczania, uderzania oraz stawiania na nim ciężkich przedmiotów, ponieważ działania te mogą wpłynąć na jego funkcjonowanie. Po każdym użyciu należy odpowiednio przechowywać produkt.
- Stosuj się do zaleceń zawartych w instrukcji dotyczących czasu i częstotliwości użytkowania, aby zapobiec wystąpieniu dyskomfortu.
- Nie zaleca się stosowania tego produktu w trakcie menstruacji oraz w okresie karmienia piersią. W razie potrzeby należy zasięgnąć porady lekarskiej.

- W przypadku wystąpienia jakiegokolwiek dyskomfortu podczas użytkowania należy natychmiast zaprzestać stosowania urządzenia.
- Unikaj narażania jednostki głównej oraz źródła zasilania na uderzenia i wstrząsy.
- Ładuj urządzenie za pomocą ładowarki odpowiadającej napięciu wejściowemu produktu i przestrzegaj zasad bezpieczeństwa elektrycznego. Odradza się stosowanie niedopasowanych ładowarek.
- Aby uzyskać optymalne rezultaty, zaleca się stosowanie oficjalnego serum opracowanego specjalnie dla tego produktu. Łączenie urządzenia z innymi kosmetykami może negatywnie wpłynąć na efekty zabiegu.


【Zawartość opakowania】

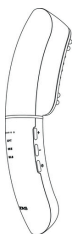


① Urządzenie Slimax

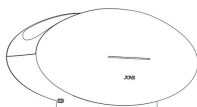

② Stacja ładująco-przechowująca

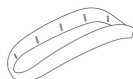

③ Pierścień mocujący
płatek bawełniany

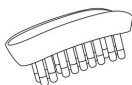


④ Dedykowana głowica
grzebieniowa (*Element
opcjonalny, dostępność
zależy od zakupionej
wersji urządzenia)



⑤ Kabel ładujący TYP-C




⑥ Bezpieczny dla
skóry, pogrubiony
płatek bawełniany

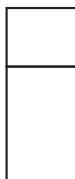


- ⑦ Karta gwarancyjna ⑧ Instrukcja obsługi ⑨ Dedykowane serum pielęgnacyjne
(*Dostępność zależy od zakupionej wersji)


【Opis produktu】

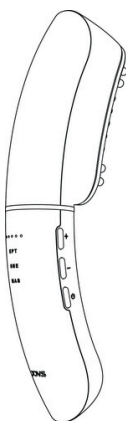

Kształt “ C ”

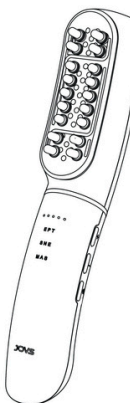


Kształt “ S ”

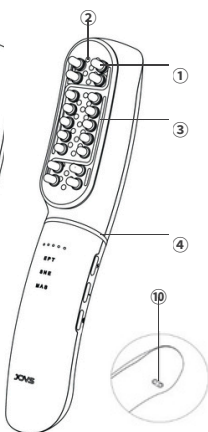

Urządzenie Slimax:

- ① Sprężynująca głowica z elektrodami
- ② Skupione źródło światła
- ③ Pasek świetlny
- ④ Obrotowy przegub / oś
- ⑤ Wskaźnik poziomu intensywności
- ⑥ Wskaźnik i oznaczenia wybranego trybu
- ⑦ Przycisk zwiększania poziomu „+”
- ⑧ Przycisk zmniejszania poziomu „-”
- ⑨ Przycisk zasilania / zmiany trybu
(Długie naciśnięcie przez 2 sekundy włącza/wyłącza urządzenie; krótkie naciśnięcie przełącza tryby)
- ⑩ Styki ładowania

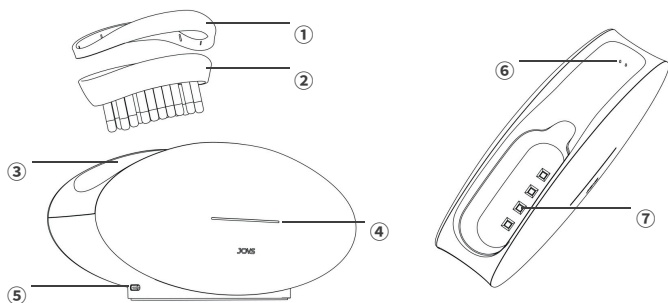


Stacja bazowa + Akcesoria:

- ① Pierścień mocujący płatek bawełniany
- ② Dedykowana głowica grzebieniowa
(*Element opcjonalny, dostępność zależy od zakupionej wersji urządzenia)
- ③ Schowek / przegroda do przechowywania
- ④ Pasek świetlny wskaźnika
- ⑤ Port ładowania TYP-C
- ⑥ Styki ładowania
- ⑦ Światło dezynfekujące UV

【Opis trybów pracy】

Produkt oferuje trzy tryby pracy, zapewniając kompleksowe doświadczenie pielęgnacyjne w celu odmłodzenia skóry i przywrócenia jej młodzieńczego wyglądu.

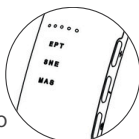

• Tryb EPT (Pielęgnacja twarzy):

Wykorzystuje ciągłe, intensywne bioniczne fale impulsów elektrycznych działające na skórę, aby szybko ujędrnić i unieść owal twarzy, zapewniając napiętą i elastyczną cerę.

Sposób użycia: Pierścień mocujący + płatek bawełniany + butelka serum kolagenowego / peptydowa maska kolagenowa.

• Tryb SNE (Pielęgnacja ciała):

Stosuje przerywane, silne fale impulsów elektrycznych na skórę, aby stymulować skurcze mięśni, modelując estetyczne linie ciała, łagodząc napięcia i dodając energii.


Sposób użycia: Pierścień mocujący + płatek bawełniany + butelka serum.

- **Tryb MAS (Pielęgnacja skóry głowy):**

Wykorzystuje ciągłe, delikatne fale impulsów elektrycznych stymulujące bioniczne prądy w wrażliwych obszarach skóry głowy. Pobudza mikrokążenie oraz aktywuje mieszki włosowe, tworząc odprężone i zdrowe środowisko skóry głowy. Sposób użycia: Dedykowana głowica grzebieniowa + rewitalizujące serum do skóry głowy.

【Focused Light Source】

Wyposażone w precyzyjnie ukierunkowaną matrycę świetlną, urządzenie aktywuje układ mikrokążenia, stymuluje aktywność komórkową, przyspiesza metabolizm skóry oraz rozjaśnia i wygładza cerę

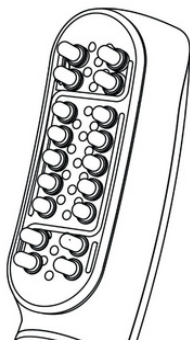

【Product Specifications】

Nazwa produktu	Urządzenie odmładzające JOVS Slimax
Model	JE2
Długość fali wyjściowej	540-660± 2 nm
Parametry wejściowe zasilania	5V $\overline{\text{---}}$ 1A
Obowiązujące normy	FCC CFR Title 47 Part 15 Subpart B

【Poziomy intensywności】

Urządzenie wyposażone jest w 8 poziomów intensywności (biegów), co zapewnia elastyczność w doborze odpowiedniej mocy w zależności od tolerancji Twojej skóry. Osobom korzystającym z urządzenia po raz pierwszy zaleca się rozpoczęcie zabiegów od poziomu 1 lub 2.

Poziom intensywności	Stan wskaźnika świetlnego
Poziom 0	●○○○○
Poziom 1	●◎○○○
Poziom 2	●●○○○
Poziom 3	●●◎○○
Poziom 4	●●●○○
Poziom 5	●●●◎○
Poziom 6	●●●●○
Poziom 7	●●●●◎
Poziom 8	●●●●●

*“●” oznacza światło ciągłe (stałe)

“◎” oznacza światło migające

“○” oznacza światło wyłączone

【Pielęgnacja twarzy EPT — rutyna codzienna】



Przygotowanie do zabiegu: Pierścień mocujący, płatek bawełniany, butelka z serum kolagenowym.


1. Dokładnie oczyść skórę twarzy i upewnij się, że jest całkowicie sucha.
2. Ustaw urządzenie główne w pozycji o kształcie litery „S”.
3. Umieść płatek bawełniany na głowicy urządzenia i zabezpiecz go pierścieniem mocującym.
4. Równomiernie rozprowadź serum na środku płatka bawełnianego, tak aby zakryć punkty elektrod.
5. Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez 2 sekundy, aby włączyć urządzenie — tryb EPT uruchomi się automatycznie.
6. Dostosuj poziom intensywności (osobom korzystającym z urządzenia po raz pierwszy zaleca się wybór poziomu 1 lub 2).
7. Rozpocznij zabieg pielęgnacyjny, stosując poniższe techniki i wykonując 2–3 powtórzenia na każdej stronie twarzy w łącznym czasie do 5 minut. Po zakończeniu sesji urządzenie wygeneruje wibrację przypominającą o konieczności powrotu do poziomu 0:

- ① — Wykonaj ruch przesuwany od bocznej części szyi w dół w kierunku ramienia.
- ② — Przytrzymaj urządzenie w punkcie w obszarze linia ramiona-szyja.
- ③ — Zastosuj poziomy nacisk punktowy wzdłuż linii żuchwy.
- ④ — Zastosuj poziomy nacisk punktowy od kąnika ust.
- ⑤ — Zastosuj poziomy nacisk punktowy w obszarze bruzd nosowo-wargowych (linii uśmiechu).
- ⑥ — Zastosuj pionowy nacisk punktowy na bocznej części policzków.
- ⑦ — Zastosuj poziomy nacisk punktowy rozpoczynając od doliny łez.
- ⑧ — Zastosuj pionowy nacisk punktowy na skroniach.
- ⑨ — Zastosuj poziomy nacisk punktowy na czole.

8. Po zakończeniu zabiegu wyłącz urządzenie i schowaj je. Delikatnie wklep pozostałości serum w policzki, aż do całkowitego wchłonięcia, a następnie przejdź do swojej standardowej rutyny pielęgnacyjnej.

【Pielęgnacja twarzy EPT — rutyna intensywna (z maską)】

*Dostępność zależy od zakupionej wersji urządzenia

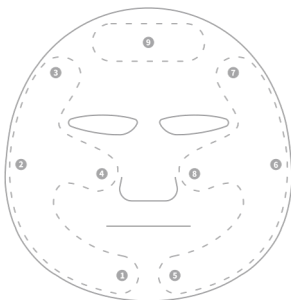

Przygotowanie do zabiegu: Multipeptydowa maska kolagenowa.

1. Dokładnie oczyść skórę twarzy i upewnij się, że jest całkowicie sucha.
2. Nałóż maskę na twarz.
3. Osusz dłonie i ustaw urządzenie główne w pozycji o kształcie litery „S”. Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez 2 sekundy, aby włączyć urządzenie — tryb EPT uruchomi się automatycznie.
4. Dostosuj poziom intensywności (osobom korzystającym z urządzenia po raz pierwszy zaleca się wybór poziomu 1 lub 2).
5. Kierując się oznaczeniami pozycji i sekwencji umieszczonymi na masce, wykonaj 2–3 powtórzenia na każdej stronie twarzy w łącznym czasie do 5 minut. Po zakończeniu sesji urządzenie wygeneruje wibrację przypominającą o konieczności powrotu do poziomu 0.
6. Wyłącz urządzenie i schowaj je. Pozostaw maskę na twarzy przez dodatkowe 5–10 minut, a następnie ją zdejmij. Delikatnie oklepuj skórę twarzy, aby ułatwić wchłanianie pozostałości serum.

[Pielęgnacja ciała SNE — np. pielęgnacja karku i ramion]



Przygotowanie do zabiegu: Pierścień mocujący, płatek bawełniany, butelka z serum.

1. Ustaw urządzenie główne w pozycji o kształcie litery „C”.
2. Umieść płatek bawełniany na głowicy urządzenia i zabezpiecz go pierścieniem mocującym.
3. Równomiernie rozprowadź serum na środku płata bawełnianego, tak aby zakryć punkty elektrod.
4. Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez 2 sekundy, aby włączyć urządzenie — uruchomi się automatycznie w trybie EPT, a następnie krótko naciśnij przycisk zasilania, aby przełączyć na tryb SNE.
5. Dostosuj poziom intensywności (osobom korzystającym z urządzenia po raz pierwszy zaleca się wybór poziomu 1 lub 2).
6. Zastosuj stały nacisk punktowy przez 8 sekund w każdym zaznaczonym miejscu, a następnie przejdź do kolejnych obszarów; powtórz całą sekwencję dwukrotnie, utrzymując łączny czas zabiegu na poziomie około 5 minut. Po zakończeniu sesji urządzenie wygeneruje wibrację przypominającą o konieczności powrotu do poziomu 0.
7. Wyłącz urządzenie i schowaj je. Delikatnie wklep pozostałości serum w pielęgnowany obszar, aż do całkowitego wchłonięcia.

*Uwaga: Tę samą procedurę można stosować na innych częściach ciała w celu rozluźnienia i łagodzenia napięcia mięśniowego.

【Pielęgnacja skóry głowy MAS】

*Dostępność zależy od zakupionej wersji urządzenia



Przygotowanie do zabiegu: Dedykowana głowica grzebieniowa, rewitalizujące serum do skóry głowy.

1. Ustaw urządzenie główne w pozycji o kształcie litery „C”.
2. Zamontuj dedykowaną głowicę grzebieniową na głowicy roboczej urządzenia.
3. Nałóż serum, aby nawilżyć całą skórę głowy (aplikuj produkt bezpośrednio na skórę głowy).
4. Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez 2 sekundy, aby włączyć urządzenie — uruchomi się automatycznie w trybie EPT, a następnie krótko naciśnij przycisk zasilania dwukrotnie, aby przełączyć na tryb MAS.
5. Dostosuj poziom intensywności (osobom korzystającym z urządzenia po raz pierwszy zaleca się wybór poziomu 1 lub 2).
6. Wykonuj przeczesywanie głowy, stosując technikę masażu ruchem zygzakowatym (w kształcie litery „Z”), aby złagodzić napięcie skóry głowy.
7. Zabieg pielęgnacyjny powinien trwać 5 minut; po tym czasie urządzenie powiadomi o zakończeniu sesji sygnałem wibracyjnym przypominającym o konieczności powrotu do poziomu 0.
8. Po zakończeniu użycia wyłącz urządzenie i schowaj je.


【Funkcja dezynfekcji】

1. Stacja bazowa jest wyposażona w lampę do dezynfekcji promieniowaniem UV.
2. Po wykryciu odłożenia urządzenia stacja automatycznie rozpoczyna 1-minutowy proces dezynfekcji, po czym przechodzi w tryb ładowania.


*Migające fioletowe światło na stacji bazowej oznacza, że trwa proces dezynfekcji.

【Procedura ładowania】

1. Jeśli wskaźnik świetlny jednostki głównej świeci na czerwono, sygnalizuje to niski poziom naładowania akumulatora. Należy wówczas wykonać następujące kroki:

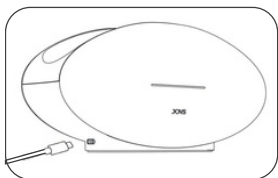

1. Podłącz stację bazową do źródła zasilania za pomocą kabla ładującego TYP-C. Ciągłe zielone światło na stacji oznacza stabilne zasilanie.

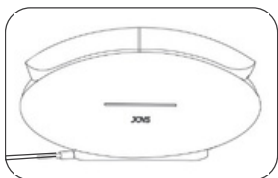

2. Umieść rozładowane urządzenie na podłączonej do prądu stacji ładującej, aby je naładować i przygotować do kolejnego użycia. Migające zielone światło na stacji

wskazuje, że trwa ładowanie, natomiast stałe zielone światło oznacza, że proces ładowania został zakończony.

【Zalecana częstotliwość stosowania】

Urządzenie jest odpowiednie do codziennego użytku.

*Uwaga: Tryb EPT w połączeniu z serum jest przeznaczony do codziennej pielęgnacji skóry, natomiast w połączeniu z maską – do pielęgnacji intensywnej. Unikaj jednoczesnego stosowania obu tych wariantów podczas jednej sesji. W razie potrzeby stosuj tryb pielęgnacji codziennej rano, a tryb pielęgnacji intensywnej wieczorem.

【Czyszczenie i konserwacja】

Aby zapewnić optymalne działanie i wydłużyć żywotność produktu, po każdym użyciu należy przechowywać go w dedykowanym pudełku, co zapobiegnie gromadzeniu się kurzu lub przypadkowemu uszkodzeniu. Jeśli konieczne jest wyczyszczenie urządzenia, użyj miękkiej, lekko wilgotnej szmatki do usunięcia kurzu.

* Jeśli czyszczenie samą wodą okaże się niewystarczające, użyj bezpyłowej ściereczki nasączonej kilkoma kroplami 75% alkoholu, aby przetrzeć zewnętrzne elementy produktu.



Produkt zawiera wbudowany akumulator. Podczas wyrzucania urządzenia nie należy wyrzucać go razem z odpadami z gospodarstwa domowego. Umieszczony w urządzeniu akumulator oraz samo urządzenie należy przekazać do wyznaczonego punktu zbiórki i recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego w celu właściwej utylizacji.

【Najczęstsze problemy i ich rozwiązania】

Problem	Diagnostyka usterki	Rozwiązanie
Światło na głowicy urządzenia nie świeci się	Czy urządzenie zostało upuszczone lub nieprawidłowo obsłużone?	Skontaktuj się z serwisem w celu natychmiastowej naprawy lub wymiany.
Jednostka główna nie ładuje się	Czy urządzenie jest prawidłowo umieszczone na stacji ładującej?	Popraw pozycję urządzenia, aby zapewnić prawidłowy styk ze stykami ładującymi.
	Czy kabel zasilający stację bazową jest luźny?	Zabezpiecz połączenie kabla, aby zapewnić prawidłowe działanie.
Silne uczucie klucia/mrowienia na skórze	Czy wybrany poziom intensywności jest zbyt wysoki?	Zmniejsz intensywność do odpowiedniego poziomu.
	Czy nie użyto dedykowanego serum?	Użyj oficjalnie zalecanego serum, aby uzyskać optymalne rezultaty i komfort.
Jednostka główna nie włącza się	Czy akumulator jest wystarczająco naładowany?	Naładuj niezwłocznie jednostkę główną.
Światło dezynfekujące stacji bazowej nie świeci się	Czy stacja została upuszczona lub nieprawidłowo obsłużona?	Skontaktuj się z serwisem w celu natychmiastowej naprawy lub wymiany.

【Uwaga specjalna】

Firma JOVS ponosi pełną odpowiedzialność za aktualizację oraz wyjaśnienie treści niniejszej instrukcji obsługi, dążąc do zapewnienia najwyższej dokładności zawartych w niej informacji. Mimo że materiał ten został poddany rzetelnej weryfikacji, wszelkie błędy w druku lub przeoczenia zastrzega się do korekty w granicach obowiązującego prawa.

Firma zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji treści oraz posiada uprawnienia do ulepszania i modyfikowania zarówno produktu, jak i niniejszej instrukcji. Dane techniczne produktu mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia. Niektóre ilustracje w niniejszej instrukcji mają charakter wyłącznie poglądowy; w przypadku jakichkolwiek rozbieżności między zdjęciami a rzeczywistym produktem, rozstrzygający jest produkt rzeczywisty.

【Instrukcje specjalne】

Nazwa części	Nazwa szkodliwych substancji lub pierwiastków w produkcie					
	Substancje lub pierwiastki szkodliwe					
	Ołów (Pb)	Rtęć (Hg)	Kadm (Cd)	Chrom sześciowartościowy (Cr(VI))	Polibromowane bifenyle (PBBs)	Polibromowane etery difenyłowe (PBDEs)
Komponenty elektroniczne	X	○	○	○	○	○
Komponenty metalowe (Hardware)	○	○	○	○	○	○
Komponenty plastikowe	○	○	○	○	○	○
Elementy opakowania	○	○	○	○	○	○

Tabela została sporządzona zgodnie z przepisami normy SJ/T 11364.

○ – Oznacza, że zawartość danej substancji szkodliwej we wszystkich materiałach jednorodnych danej części mieści się w limitach określonych w dyrektywie RoHS 2015/863/UE
X – Oznacza, że zawartość danej substancji szkodliwej w co najmniej jednym materiale jednorodnym tej części przekracza limit określony w dyrektywie RoHS 2015/863/UE.

Wykazane w tabeli „substancje szkodliwe” oraz odpowiadające im elementy nie stanowią żadnego zagrożenia ani nie mają negatywnego wpływu na zdrowie człowieka i środowisko w warunkach normalnego użytkowania produktu. Informacje te służą zapewnieniu odpowiedniego opisu materiałowego dla konsumentów oraz podmiotów zajmujących się recyklingiem, co ułatwia prawidłową utylizację wyrobu po zakończeniu jego eksploatacji.



W warunkach normalnego użytkowania opisanych w niniejszej instrukcji obsługi, okres bezpiecznego dla środowiska użytkowania tego produktu (Environmental Protection Use Period) wynosi 5 lat. W tym czasie można bez obaw korzystać z urządzenia.