

JOVS


Instrukcja obsługi

Parametry produktu

Produkt ten bazuje na zabiegu DPL oferowanym przez salony kosmetyczne. Dzięki zastosowaniu wąskopasmowego filtra pasmowoprzepustowego, który umożliwia wyodrębnienie skutecznych długości fal, oraz precyzyjnemu systemowi kontroli energii, urządzenie to skutecznie rozjaśnia i odmładza skórę.

Specyfikacja	
Nazwa produktu	JOVS Blacken Pro Photorejuvenation Device
Model	JP1P
Obszar naświetlania	1,6 cm ²
Zasilanie wejściowe	24 V = 2,5 A
Zasilacz	Wejście: 100–240 V ~ 50/60 Hz, 1,5 A Wyjście: 24 V = 2,5 A
Obowiązując normy	GB 4706.1-2005 GB 4706.15-2008

Opis produktu

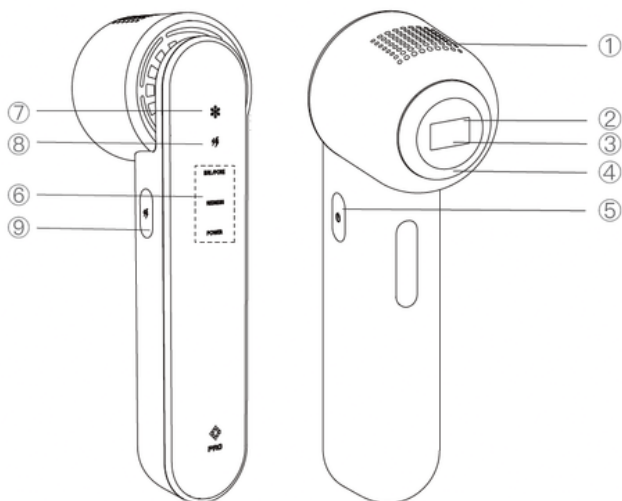

Budowa urządzenia

1. Otwory wentylacyjne
2. Szafirowy panel chłodzący
3. Okienko błysku (ujście światła)
4. Kontrolka wskaźnika
5. Przycisk zasilania/trybu
6. Ikona trybu
7. Ikona trybu chłodzenia
8. Ikona trybu automatycznego błysku
9. Przycisk zabiegowy

(Naciśnij i przytrzymaj przycisk przez 2 sekundy, aby włączyć lub wyłączyć tryb automatycznego błysku; tryb ten wyłącza się automatycznie po serii następujących po sobie błysków)

※ Uwaga: W przypadku zablokowania otworów wentylacyjnych urządzenie może ulec uszkodzeniu lub przejść w tryb wyłączenia z powodu wysokiej temperatury.

Trzy tryby pracy

Ponieważ skóra każdego człowieka jest inna, zalecamy rozpoczęcie zabiegów od trybu BRI./PORE i stopniowe zwiększanie intensywności. W przypadku wystąpienia jakiegokolwiek dyskomfortu podczas korzystania z produktu, prosimy o natychmiastowy kontakt z nami online. W razie potrzeby przed użyciem urządzenia skonsultuj się z lekarzem.



Tryb BRI./PORE (Rozjaśnianie / Pory)

- Niska intensywność
- Zalecany do skóry twarzy
- Wyrównuje koloryt skóry, nadaje jej blask, zwęża pory



Tryb REDNESS (Zaczerwienienia)

- Średnia intensywność
- Dostosowany do skóry z odpowiednimi problemami (zaczerwienienia)
- Zmniejsza zaczerwienienia na skórze



Tryb POWER (Mocny)

- Wysoka intensywność
- Do usuwania przebarwień i plam
- Do obszarów z uporczywymi plamami / śladami po trądziku

(Unikaj stosowania produktu na obszarach, które nie tolerują światła, zgodnie z informacjami zawartymi w instrukcji obsługi).

Przeciwwskazania i grupy ryzyka (Grupy i sytuacje nieodpowiednie do stosowania)

- Nie należy stosować produktu u osób poniżej 16 roku życia, kobiet w ciąży, w okresie laktacji lub menstruacji, a także u osób ze bliznami na powierzchni ciała, cukrzycą, wyjątkowo wrażliwą skórą lub nadwrażliwością na światło (fotonadwrażliwością).
- Zabrania się stosowania produktu u osób cierpiących na ciężkie choroby serca, umiarkowane lub ciężkie nadciśnienie tętnicze, nowotwory złośliwe, zapalenie mieszków włosowych, zakaźne choroby skóry, oparzenia skóry lub zaburzenia krzepnięcia krwi.
- Nie należy stosować produktu u osób z zaburzeniami metabolizmu kolagenu, w tym ze starymi bliznami lub utrudnionym gojeniem się starych ran.
- Nie należy stosować produktu u osób cierpiących na choroby naczyń krwionośnych (np. żylaki w obszarze docelowym zabiegu).
- Nie należy stosować produktu na obszarach skóry dotkniętych infekcjami, opryszczką zwykłą, zmianami chorobowymi (patologicznymi) lub krwinkami.
- Nie należy stosować produktu u osób z obniżoną odpornością (immunosupresją), np. z HIV, toczniem rumieniowatym lub porfirią.
- Zabrania się stosowania produktu u osób ze skazą krwotoczną/zaburzeniami krzepnięcia oraz u osób stosujących leki lub preparaty miejscowe, takie jak izotretynoina, kwasy alfa-hydroksylowe (AHA), kwasy beta-hydroksylowe (BHA) lub kwas azelainowy.
- Należy zachować ostrożność w przypadku osób, które w ciągu 30 dni przed planowanym użyciem urządzenia stosowały chemiczne środki do depilacji twarzy.
- Należy zachować ostrożność w przypadku osób, które w ciągu tygodnia przed planowanym użyciem urządzenia stosowały produkty rozjaśniające skórę lub kosmetyki zawierające witaminę A.
- Produktu nie wolno stosować jednocześnie z olejkami eterycznymi. Skóra powinna być czysta, sucha i wolna od pozostałości kremów, balsamów, środków nawilżających/poślizgowych oraz innych kosmetyków.
- Zabrania się stosowania produktu u osób przyjmujących leki takie jak leki immunosupresyjne, aspiryna oraz izotretynoina.
- Zabrania się stosowania produktu u osób, które w ostatnim czasie przyjmowały leki mogące wywoływać nadwrażliwość na światło (np. tetracyklinę).
- Zabrania się stosowania produktu na jakichkolwiek wrażliwych częściach ciała (np. miejscach objętych stanem zapalnym oraz błonach śluzowych).
- Osoby narażone na intensywne światło słoneczne w ciągu ostatnich 3 dni lub cierpiące na uszkodzenia wywołane światłem (oparzenia słoneczne) nie powinny używać tego produktu do czasu zagojenia się skóry.
- Zabrania się stosowania produktu na jakichkolwiek ranach, które jeszcze się nie zagoiły.
- Nie zaleca się stosowania produktu u osób cierpiących na hirsutyzm (nadmierne owłosienie).
- W dniu korzystania z urządzenia nie należy pić alkoholu oraz należy unikać pikantnych potraw i innych pokarmów, które mogą powodować podrażnienia skóry.

- Przed użyciem urządzenia na twarzy przetestuj je na wewnętrznej stronie przedramienia. Możesz używać produktu, jeśli po upływie godziny w miejscu testu nie wystąpią żadne niepokojące objawy.
- Nie należy zbyt intensywnie stosować urządzenia w tym samym miejscu, aby uniknąć uszkodzenia skóry wywołanego wysoką temperaturą. (W razie potrzeby skonsultuj się z lekarzem przed użyciem produktu).

Produkt został zaprojektowany specjalnie z myślą o skórze twarzy. Wyjątkiem jest wewnętrzna strona przedramienia – żadne inne części ciała nie mogą być wykorzystywane do przeprowadzenia testu skórniego. Surowo zabrania się stosowania urządzenia na następujących wrażliwych obszarach:

1. Wnętrze jamy ustnej, wargi, błony śluzowe itp.
2. Obszary poddane operacjom plastycznym lub innym zabiegom
3. Jądro Adama (grdyka)
4. Gałki oczne, powieki i worki pod oczami
5. Uszy
6. Obszary dotknięte trądzikiem
7. Duże naczynia krwionośne
8. Obszary z znamionami / pieprzykami
9. Wnętrze pępka
10. Brwi i włosy
11. Brodawki sutkowe i ich otoczki
12. Obszary z tatuażami, malunkami na ciele oraz bliznami

(Uwaga: Powyższa lista nie jest wyczerpująca. W przypadku wątpliwości, czy możesz używać tego produktu, skonsultuj się z lekarzem).

Nie nakładaj żadnych produktów do pielęgnacji skóry na obszar zabiegowy przed użyciem tego urządzenia! Prosimy o zmontowanie i użytkowanie produktu ściśle według instrukcji obsługi.



Niebezpieczeństwo - Nieprawidłowa obsługa może spowodować obrażenia ciała.



Ostrzeżenie - Nieprawidłowa obsługa może stwarzać zagrożenie.



Uwaga - Nieprawidłowa obsługa może prowadzić do obrażeń ciała lub strat materialnych.



Uwaga: Przed użyciem



Oczyszczenie skóry: Oczyszczyć obszar skóry przeznaczony do zabiegu i upewnij się, że jest całkowicie suchy przed użyciem.



Ochrona przed słońcem: Nie wystawiaj obszaru zabiegowego na działanie intensywnego światła słonecznego przed ani po użyciu urządzenia.



Golenie: Zgol wąsy/zarost przed użyciem. (Należy zgolić wszelkie ciemne włosy z twarzy).



Próba uczuleniowa: Przed przystąpieniem do zabiegu należy wykonać test naskórkowy (próbę płatkową).



Przechowywać z dala od osób
poniżej 16 roku życia.



Nie uderzać gwałtownie ani nie
potrząsać produktem.



Nie używać produktu w ciemnym
miejscu.



Podczas korzystania z urządzenia
należy nosić okulary ochronne.



Uwaga: Po użyciu



Nałóż nawilżającą maseczkę do
twarzy (zimny kompres).



Nie myj twarzy gorącą wodą w
dniu korzystania z urządzenia.



Pamiętaj o stosowaniu
rygorystycznej ochrony
przeciwśłonecznej przez jeden
tydzień.



Nie używaj żadnych
funkcyjnych produktów do
pielęgnacji skóry (np. z kwasami,
retinolem) w ciągu 24 godzin.

Ostrzeżenie:

- **Dzieci:** Nie używaj tego produktu w pobliżu dzieci, ponieważ emituje on błyskające światło, które może stwarzać zagrożenie dla ich wzroku.
- **Czyszczenie okienka błysku:** Regularnie oczyszczaj okienko błysku z wszelkich zanieczyszczeń, aby zapobiec awarii urządzenia oraz uszkodzeniu samego okienka.
- **Rozmagnetowaniach:** Trzymaj okienko błysku z dala od przedmiotów mogących wywołać rozmagnetowanie, aby uniknąć uszkodzenia lub awarii sprzętu.
- **Wentylacja:** Nie używaj produktu, gdy otwory wentylacyjne są zasłonięte, aby zapobiec usterce lub pożarowi.
- **Kierunek światła:** Nie kieruj światła na ubrania, włosy ani inne przedmioty, aby zapobiec przypaleniu, odbarwieniu lub uszkodzeniu.
- **Zwierzęta:** Nie używaj produktu na zwierzętach, aby uniknąć wyrządzenia im krzywdy.
- **Zabiegi medycyny estetycznej:** Przed użyciem urządzenia skonsultuj się z lekarzem, jeśli jesteś w trakcie zabiegów fotoelektrycznych / laserowych z zakresu kosmetologii medycznej.
- **Usuwanie włosów z urządzenia:** Po użyciu wytrzymaj wszelkie włoski przylegające do urządzenia, aby zapobiec jego awarii lub uszkodzeniu skóry przy kolejnym zabiegu.
- **Reakcja skóry:** Łagodne uczucie ciepła lub zaczerwienienie skóry po użyciu urządzenia jest normalnym objawem. Aby je złagodzić, nałóż maseczkę nawilżającą.
- **Odczuwanie bólu:** W zależności od typu skóry, podczas zabiegu możesz odczuwać ból. Jeśli ból jest intensywny, przełącz urządzenie na tryb o niższym poziomie energii lub zaprzestań jego używania.

- Okolice oczu: Gdy używasz produktu na skórze w okolicach oczu, nie stosuj trybu automatycznego błysku (Auto-flash). Zamiast tego załóż okulary ochronne, zamknij oczy i wykonuj pojedyncze błyski.
- Nadzór nad urządzeniem: Nie pozostawiaj włączonego urządzenia bez nadzoru. Pamiętaj, aby natychmiast po użyciu wyłączyć produkt, odłączyć go od zasilania i odłożyć na miejsce.
- Temperatura otoczenia: Produktu należy używać w temperaturze otoczenia od 0°C do 25°C. Przed przeniesieniem urządzenia z jednego miejsca do drugiego, w którym temperatura jest wyższa lub niższa o nawet 20°C, wyłącz je i pozostaw nieużywane przez około 2 godziny przed ponownym włączeniem. Nie zaleca się używania produktu podczas bardzo wilgotnej pogody.
- Wysoka wilgotność: W okresach o wysokiej wilgotności (np. podczas długotrwałych deszczów/odwilży) zaleca się czasowo powstrzymać od używania tego produktu.
- Materiały łatwopalne: Nie używaj produktu w pobliżu substancji łatwopalnych lub wybuchowych (takich jak aerozole czy stacje benzynowe), aby zapobiec obrażeniom ciała spowodowanym pożarem wywołanym przez urządzenie lub porażeniem prądem.
- Promieniowanie UV: Nie wystawiaj obszaru zabiegowego bezpośrednio na działanie promieniowania ultrafioletowego (UV) w ciągu 48 godzin po użyciu produktu.
- Ochrona przed światłem: Nie wystawiaj urządzenia na długotrwałe działanie intensywnego światła słonecznego ani działającej lampy UV, gdyż może to spowodować jego poważne uszkodzenie.
- Wentylator: Nie używaj produktu, jeśli wbudowany wentylator nie działa po włączeniu zasilania (np. nie słysząc dźwięku pracy wentylatora), aby zapobiec awarii urządzenia lub innym zagrożeniom.




Niebezpieczeństwo:

- **Kontakt z wodą:** Nie używaj tego produktu w pobliżu wanien, miednic, umywalek ani innych zbiorników napełnionych wodą.
- **Dostęp dzieci:** Urządzenie należy zawsze przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- **Nadzór:** Osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, a także osoby nieposiadające odpowiedniego doświadczenia i wiedzy, muszą używać, czyścić i konserwować ten produkt wyłącznie pod nadzorem i ze wskazówkami opiekunów.
- **Ochrona przed wilgocią:** Zarówno produkt, jak i jego zasilacz muszą być zawsze suche.
- **Uszkodzenia:** W przypadku uszkodzenia produktu należy natychmiast zaprzestać jego używania i nie dotykać żadnych elementów wewnętrznych, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem.
- **Czystość skóry:** Zabrudzona skóra w miejscu zabiegu zmniejsza skuteczność działania i może powodować niekontrolowana emisję światła lub całkowity brak błysku.
- **Wielokrotne naświetlanie:** Nie naświetlaj wielokrotnie tego samego obszaru skóry, ponieważ może to doprowadzić do oparzeń lub uszkodzeń cieplnych. Przyłóż urządzenie do wybranego miejsca, wykonaj jeden błysk, a następnie przesunij je na kolejny obszar.
- **Ograniczenie wiekowe:** Przechowuj i używaj produktu poza zasięgiem dzieci poniżej 15 roku życia.
- **Docisk do skóry:** Dociskaj okienko błysku bezpośrednio do skóry, aby uniknąć uszkodzeń cieplnych lub oparzeń.

Test naskórkowy (próba płatkowa)

- Ponieważ skóra każdego człowieka jest inna, przed pierwszym użyciem należy wykonać test naskórkowy, aby określić odpowiedni tryb i intensywność do dalszych zabiegów.
- Przykładowy przebieg testu naskórkowego na wewnętrznej stronie przedramienia:
- Wybierz tryb BRI./PORE, docisnąć okienko błysku do wybranego obszaru skóry i naciśnij przycisk naświetlania (błysku) jeden raz, gdy wskaźnik się świeci.
- Delikatnie przesunąć urządzenie po skórze do następnego miejsca, aby wykonać kolejny błysk. Powtórz ten krok 5 razy. Jeśli po upływie godziny w miejscu testu nie wystąpią żadne niepożądane objawy, możesz bezpiecznie korzystać z produktu.

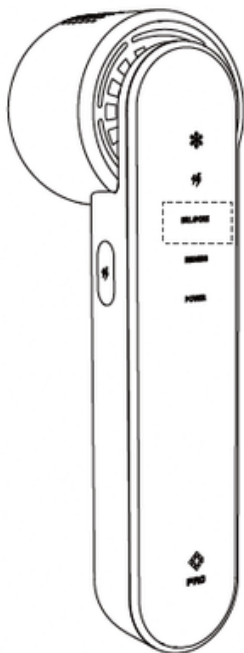

Sposób użycia



KROK 1

Dokładnie oczyść twarz. (Jeśli po oczyszczeniu skóra jest ściągnięta i sucha, możesz użyć nawilżającej mgiełki do twarzy, aby ją nawilżyć i wygładzić).



KROK 2

Podłącz urządzenie do gniazdka, naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez 2 sekundy, aby je włączyć, a następnie naciskaj przycisk zasilania, aby wybrać żądany tryb. Prosimy o rozpoczęcie zabiegów od trybu BRI./PORE.




KROK 3

Założ prawidłowo okulary ochronne. (Chroń oczy przed światłem).



KROK 4

Skieruj okienko błysku na wybrany obszar skóry i gdy kontrolka się zaświeci, naciśnij przycisk naświetlania (błysku), aby wyemitować światło. (Naciśnij i przytrzymaj przycisk przez 2 sekundy, aby włączyć lub wyłączyć tryb automatycznego błysku. Jeśli używasz urządzenia w okolicach oczu, nie stosuj trybu automatycznego błysku – załóż okulary ochronne, zamknij oczy i wykonuj pojedyncze błyski).

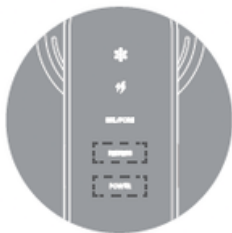

KROK 5

Przełącz na tryb REDNESS w celu redukcji zaczerwienień skóry (zabrania się używania produktu na obszarach skóry objętych alergią lub stanem zapalnym) lub przełącz na tryb WHITEN [POWER] w celu redukcji plam i przebarwień na twarzy (prosimy o naklejenie naklejek ochronnych na znamiona/pieprzyki).

※ Prosimy o wybór trybu odpowiedniego dla Twojego typu skóry.



KROK 6

Nałóż nawilżającą maseczkę do twarzy na 15–20 minut po zabiegu.

Zalecenia dotyczące częstotliwości i sposobu użycia

- Częstotliwość: 2–3 razy w tygodniu.
- Test naskórkowy: Ponieważ skóra każdego człowieka jest inna, przed pierwszym użyciem należy ściśle przestrzegać środków ostrożności oraz instrukcji obsługi, aby wybrać odpowiedni tryb i przeprowadzić test naskórkowy (próbę płatkową).
- Rekomendowany tryb początkowy: Prosimy o rozpoczęcie zabiegów od trybu BRI./PORE.
- Zwiększanie intensywności / zmiana trybów: Jeśli skóra wykazuje dobrą tolerancję po przeprowadzeniu procesu rozjaśniania w trybie BRI./PORE, można przejść do stosowania innych trybów w miejscach objętych konkretnymi problemami skórnymi. Jeśli skóra nie adaptuje się dobrze, należy pozostać wyłącznie przy trybie BRI./PORE lub zaprzestać używania urządzenia.

Rozwiązywanie problemów (Problemy i rozwiązania)

W tej sekcji podsumowano problemy, które mogą wystąpić podczas użytkowania produktu, oraz odpowiednie sposoby ich rozwiązania. Jeśli poniższe informacje nie pomogą w rozwiązaniu problemu, prosimy o kontakt z Centrum Obsługi Klienta w swoim kraju lub regionie.

Problem	Możliwa przyczyna	Rozwiązanie
Urządzenie nie włącza się.	Produkt nie jest podłączony do źródła zasilania.	Sprawdź, czy urządzenie jest prawidłowo podłączone do zasilania.
Urządzenie nie emituje światła (błysku).	Głowica lub korpus urządzenia uległy przegrzaniu ALBO głowica nie przylega ściśle do skóry.	Odczekaj chwilę, aż urządzenie ostygnie przed ponownym użyciem, a następnie dociśnij głowicę do skóry, aż kontrolka zacznie migać.
Ikona trybu nie podświetla się.	Wada fabryczna / produkcyjna.	Sprawdź, czy zasilacz działa prawidłowo. Natychmiast oddaj produkt do naprawy lub wymień go.
Podczas zabiegu wyczuwalny jest specyficzny zapach (np. spalenizny).	Okienko błysku jest zabrudzone LUB ciemne włoski/zarost nie zostały zgolone.	Przed użyciem upewnij się, że okienko błysku jest czyste. Zgol ciemne włoski / zarost na twarzy.
Obszar zabiegowy robi się czerwony.	Lekkie zaczerwienienie jest normalne, nieszkodliwe dla ciała i szybko ustępuje.	Zaprzestań używania produktu i nie wznowiaj zabiegów, dopóki objaw nie ustąpi. W razie jakichkolwiek pytań skonsultuj się ze specjalistą ds. obsługi posprzedażowej.

Problem	Możliwa przyczyna	Rozwiązanie
Odczuwasz ból nie do zniesienia.	Ciemne włoski lub zarost w miejscu zabiegu nie zostały zgolone.	Zgol ciemne włoski lub zarost z obszaru zabiegowego przed użyciem urządzenia. (Unikaj golenia na sucho, które może uszkodzić warstwę rogową naskórka i wywołać alergię skórą).
	Urządzenie nie jest odpowiednie dla danego obszaru skóry.	Przed użyciem produktu dokładnie zapoznaj się ze środkami ostrożności dotyczącymi grup użytkowników oraz obszarów skóry, na których nie należy go stosować.
	Okienko błysku jest uszkodzone.	Natychmiast oddaj produkt do naprawy lub wymień go.
Rezultat zabiegu jest niezadowolający.	Wybrany tryb nie jest odpowiedni dla Twojego stanu skóry.	Wybierz tryb odpowiadający aktualnemu stanowi i potrzebom Twojej skóry.
Rezultat zabiegu jest niezadowolający.	Nie osiągniesz zadowolającego rezultatu, jeśli obszary naświetlane kolejno po sobie są od siebie zbyt oddalone (co powoduje pozostawienie wielu pominiętych miejsc) lub jeśli czas zabiegu jest zbyt krótki.	Używaj urządzenia zgodnie z instrukcją obsługi: przesuwaj je płynnie i w uporządkowany sposób podczas emisji światła, wykonuj jeden błysk na danym obszarze skóry i przechodź do kolejnego, aż obsłużysz całą twarz.
	Częstotliwość stosowania jest niewystarczająca.	Wybierz odpowiedni tryb.
	Ochrona przeciwsłoneczna przed użyciem i po nim jest niewystarczająca.	W przypadku niewłaściwej ochrony przeciwsłonecznej promieniowanie UV może łatwiej doprowadzić do ciemnienia skóry.
	Twoja reakcja na promieniowanie świetlne jest powolna.	Używaj produktu nieco dłużej i pamiętaj o ochronie skóry przed słońcem.
	Gdy intensywne światło impulsowe (IPL) trafia na skórę, powoduje odparowanie wilgoci, przez co skóra staje się sucha. Jest to normalny objaw.	Po użyciu produktu nałóż maseczkę do twarzy, aby nawilżyć i wygładzić skórę.
Produkt staje się wilgotny i ciepły podczas użycia.	Jest to normalne zjawisko.	Aby poprawić komfort użytkowania, przełącz urządzenie w tryb gotowości na jedną minutę przed ponownym rozpoczęciem zabiegu.

W przypadku nieprawidłowości lub braku możliwości rozwiązania problemu, prosimy o kontakt ze specjalistą ds. obsługi posprzedażowej posługującym się Twoim językiem w celu uzyskania pomocy. Zachowaj dowód zakupu oraz Kartę Gwarancyjną na potrzeby przyszłych zgłoszeń serwisowych.



Utylizacja: W przypadku wyrzucania produktu prosimy nie wyrzucać go razem z niedzielnymi odpadami komunalnymi. Zamiast tego należy przekazać go do wyznaczonego punktu zbiórki i recyklingu odpadów elektrycznych i elektronicznych.

Uwagi specjalne

Firma JOVS ponosi wyłączną odpowiedzialność za zmiany i interpretację niniejszej instrukcji obsługi oraz dokłada wszelkich starań, aby zapewnić poprawność i rzetelność zawartych w niej treści.

W zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, firma JOVS zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji niniejszej instrukcji w przypadku wystąpienia błędów w druku lub przeoczeń, a także prawo do modyfikacji i/lub ulepszania produktu oraz samej instrukcji obsługi.

Konstrukcja produktu może ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia. Niektóre rysunki w niniejszej instrukcji mają charakter wyłącznie poglądowy i referencyjny. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności między rysunkami a rzeczywistym produktem, wiążący jest stan faktyczny produktu; można również skontaktować się z nami w celu uzyskania najnowszej wersji instrukcji.

Instrukcja specjalna

Nazwa części	Nazwa szkodliwych substancji lub pierwiastków w produkcie					
	Substancje lub pierwiastki szkodliwe					
	Ołów (Pb)	Rtęć (Hg)	Kadm (Cd)	Chrom sześciowartościowy (Cr(VI))	Polibromowane bifenyle (PBBs)	Polibromowane etery difenyłowe (PBDEs)
Komponenty elektroniczne	X	O	O	O	O	O
Komponenty metalowe (Hardware)	O	O	O	O	O	O
Komponenty plastikowe	O	O	O	O	O	O
Elementy opakowania	O	O	O	O	O	O

Tabela ta została sporządzona zgodnie z wymogami normy SJ/T 11364.

O – Oznacza, że zawartość danej niebezpiecznej substancji we wszystkich materiałach jednorodnych danej części znajduje się poniżej wartości granicznej określonej w normie GB/T 26572-2011.

X – Oznacza, że zawartość danej niebezpiecznej substancji w co najmniej jednym materiale jednorodnym danej części przekracza wartość graniczną określoną w normie GB/T 26572-2011.

„Substancje szkodliwe” oraz odpowiadające im komponenty przedstawione w tej tabeli nie powodują żadnych szkód dla zdrowia ludzkiego ani środowiska w warunkach normalnego użytkowania produktu. Informacje te służą zapewnieniu konsumentom oraz specjalistom ds. recyklingu odpowiednich opisów substancji, co ułatwia prawidłową utylizację produktu po jego wycofaniu z eksploatacji.



W normalnych warunkach użytkowania określonych w niniejszej instrukcji obsługi, produkt ten może być stosowany jako przyjazny dla środowiska przez okres 10 lat. W tym czasie produkt może być bezpiecznie użytkowany.