

JOVS

EMS Lifting Mask

INSTRUKCJA



Zeskanuj kod QR, aby uzyskać dostęp:

Wideo instruktażowe

Skrócona instrukcja obsługi


Wskazówki dotyczące rozwiązywania problemów

Spis treści


1.Nazwy elementów.....	02
2.Sposób użycia.....	04
3.Środki ostrożności.....	06
4.Przeciwwskazania.....	07
5.Parametry produktu.....	07
6.Ochrona środowiska.....	08
Certyfikat zgodności.....	08

1. Nazwy elementów



Maska na twarz

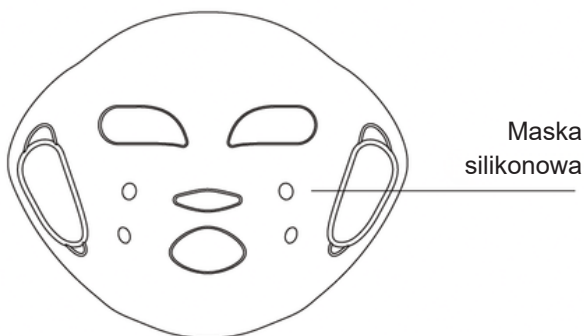


Pilot zdalnego sterowania

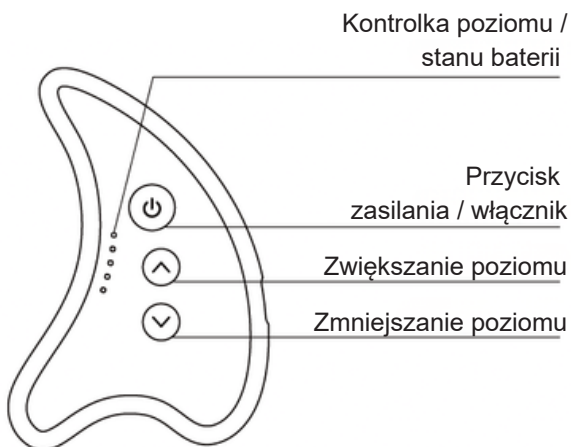


Jednostka główna

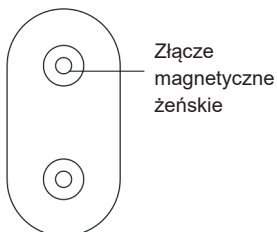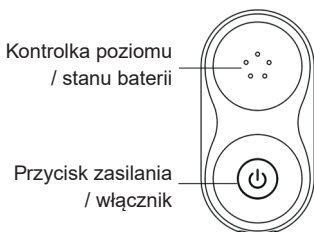


Płytki elektrodowe

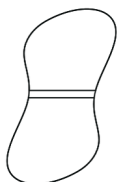


Przód prawej płytki elektrodowej

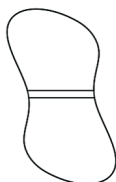

Przód lewej płytki elektrodowej

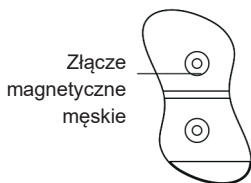

Tył prawej nakładki elektrodowej

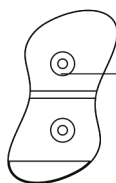


Tył lewej nakładki elektrodowej


2. Sposób użycia

Przygotowanie przed użyciem

1. Sprawdź kompletność urządzenia oraz jego akcesoriów.
2. Zgodnie z rysunkiem zamontuj jednostkę główną oraz nakładki twarzowe na masce. Dopasuj magnetyczne złącze żeńskie jednostki głównej do magnetycznego złącza męskiego nakładki twarzowej i upewnij się, że połączenie magnetyczne osadziło się prawidłowo na swoim miejscu. Zwróć uwagę na odpowiednie rozmieszczenie lewej i prawej nakładki twarzowej.

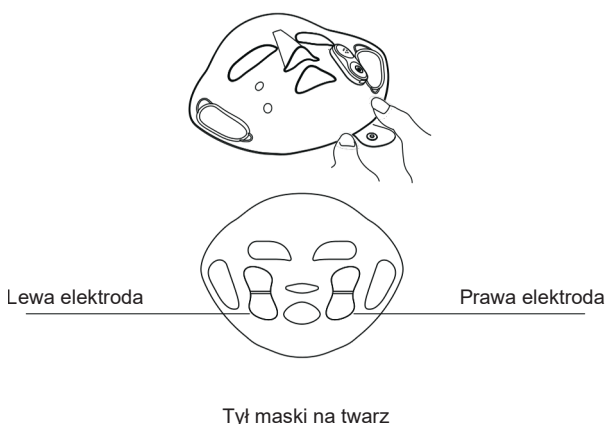

3. Po nałożeniu maseczki w płachcie (lub po nałożeniu na twarz żelu / aloesu) załóż w pełni zmontowaną maskę na twarz. Unikaj stosowania z produktami oleistymi (takimi jak tłuste maseczki, olejki do twarzy itp.), ponieważ mogą one zakłócać przewodnictwo prądu w urządzeniu.

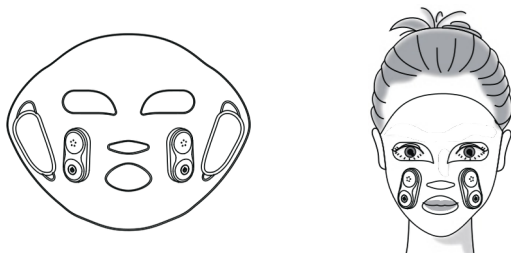

Obsługa za pomocą pilota zdalnego sterowania

1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk „ ☰ ” przez 2 sekundy, aby włączyć jednostkę główną. Kontrolka poziomu / stanu baterii zaświeci się na stałe.
2. Po włączeniu jednostki głównej naciskaj przyciski „ + / - ” (lub odpowiednie ikony regulacji), aby dostosować poziom intensywności mikroprawy / stymulacji EMS. Możesz swobodnie regulować poziom w zakresie 1–10. Domyślnie urządzenie uruchamia się na poziomie 1. Poziomy 1–5: Kontrolka zwiększa swój poziom w kolorze zielonym. Poziomy 6–10: Kontrolka zwiększa swój poziom w kolorze czerwonym.
3. Po zakończeniu zabiegu naciśnij i przytrzymaj przycisk „ ☰ ” przez 2 sekundy, aby wyłączyć jednostkę główną.
4. Po podłączeniu pilota do zasilania rozpocznie się ładowanie, a kontrolka wskaźnika zaświeci się ciągłym czerwonym światłem. Gdy bateria zostanie całkowicie naładowana, kontrolka zmieni kolor na ciągłe zielone światło. Gdy bateria w pilocie będzie wyczerpana, kontrolka zacznie migać na czerwono.
5. Domyślny czas pracy urządzenia po włączeniu wynosi 12 minut, po czym nastąpi automatyczne wyłączenie. Jeśli chcesz kontynuować zabieg, musisz ponownie włączyć urządzenie.

Obsługa jednostki głównej

1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk „ ☰ ” przez 2 sekundy, aby włączyć jednostkę główną. Kontrolka poziomu / stanu baterii zaświeci się na stałe.
2. Po włączeniu dostosuj poziom intensywności stymulacji EMS jednostki głównej za pomocą pilota. Kontrolka poziomu na jednostce głównej będzie wyświetlać się synchronicznie ze wskazaniem na pilocie.
3. Po zakończeniu zabiegu naciśnij i przytrzymaj przycisk „ ☰ ” przez 2 sekundy, aby wyłączyć jednostkę główną.
4. Po podłączeniu jednostki głównej do zasilania rozpocznie się ładowanie, a kontrolka wskaźnika zaświeci się ciągłym czerwonym światłem. Gdy bateria zostanie całkowicie naładowana, kontrolka zmieni kolor na ciągłe zielone światło. Gdy poziom naładowania baterii będzie niski, kontrolka zacznie migać na czerwono.
5. Domyślny czas pracy urządzenia po włączeniu wynosi 12 minut, po czym nastąpi automatyczne wyłączenie. Jeśli chcesz kontynuować zabieg, musisz ponownie włączyć urządzenie.

3. Środki ostrożności



Ostrzeżenie

- Produkt jest zalecany do użytku osobistego (dla jednej osoby) – zabrania się współdzielenia go z innymi osobami.
- Jeśli w trakcie lub po użyciu urządzenia odczujesz dyskomfort, zaleca się natychmiastowe zaprzestanie zabiegu i skonsultowanie się z lekarzem.
- Ten produkt zawiera baterie litowe.
- Zabrania się samodzielnego demontażu, modyfikacji, zanurzania w wodzie lub wrzucania produktu do ognia – w przeciwnym razie może to doprowadzić do uszkodzenia urządzenia lub wybuchu.
- Nie używaj urządzenia do celów innych niż masaże/pielęgnacja określone w niniejszej instrukcji obsługi, ponieważ może to doprowadzić do wypadku lub awarii.

Środki ostrożności podczas użytkowania

Nie zbliżaj urządzenia do kuchenek/pieców ani nie używaj go w pobliżu grzejników elektrycznych czy urządzeń grzewczych, ponieważ może to wywołać pożar lub awarię.

Środki ostrożności dotyczące konserwacji

Nie używaj produktu w pobliżu wanien, pryszniców, umywalki ani innych zbiorników i miejsc o wysokiej wilgotności zawierających wodę.

Unikaj stosowania i przechowywania w następujących warunkach:



Miejsca bezpośrednio
nasłonecznione



Wysokie temperatury i
wilgotność



Bliskość źródeł ognia /
materiałów łatwopalnych



Nadmierne zapylenie /
kurz

4. Przeciwwskazania

Stosowanie urządzenia jest zabronione w następujących przypadkach:

- Osoby ze skłonnością do krwawień.
- Kobiety w ciąży oraz w okresie poporodowym.
- Osoby z porażeniem spastycznym.
- Osoby z zaburzeniami neurologicznymi lub zaburzoną reakcją na bodźce nerwowe.
- Osoby wrażliwe na działanie mikroprądu (mikroprądów).
- Osoby uczulone na silikon.

Uwaga

- Przed rozpoczęciem użytkowania produktu należy dokładnie zapoznać się z instrukcją obsługi.
- Jeśli poczujesz się źle z powodu nieprawidłowości w działaniu urządzenia, natychmiast zaprzestań jego używania. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek nietypowych odczuć w ciele lub na skórze skonsultuj się z lekarzem i stosuj do jego zaleceń.

5. Parametry produktu

Nazwa produktu: JOVS EMS Lifting Mask

Model: MZ01

Pojemność baterii jednostki głównej: 45 mAh

Pojemność baterii pilota: 90 mAh

Prąd wejściowy znamionowy: 5V = 0,1A

Napięcie znamionowe: 3,7V

Normy wykonania: FCC CFR Title 47 Part 15 Subpart B

Zawartość opakowania: Maska na twarz, Jednostka główna x2, Płytki elektrodowa x2, Pilot zdalnego sterowania, Kabel do transmisji danych / ładowania, Instrukcja obsługi

Stosowanie urządzenia jest zabronione w następujących przypadkach:

Nazwa produktu:	JOVS EMS Lifting Mask
Model produktu:	MZ01
Normy wykonania:	FCC CFR Title 47 Part 15 Subpart B
Ocena jakości:	Pozytywna / Dopuszczono do użytku

Ochrona środowiska

Dziel odpady na różne kategorie w celu ich recyklingu i ponownego wykorzystania, co ułatwia odzysk cennych surowców.

Instrukcja wyjmowania baterii:

- Przed wyrzuceniem urządzenia należy koniecznie wyjąć z niego baterię.
- Podczas wyjmowania baterii urządzenie musi być całkowicie wyłączone, aby zapewnić bezpieczny demontaż.

Sposób utylizacji zużytych baterii:

- Wrzuć baterię do specjalistycznych pojemników na odpady, oddaj do punktu zbiórki odpadów, stacji recyklingu lub innych miejsc zajmujących się utylizacją zużytych baterii.
- Przekaż baterię do agencji zajmującej się recyklingiem zużytych baterii, aby profesjonalny personel zajął się jej bezpiecznym przetwarzaniem.

Instrukcje specjalne

Firma JOVS ponosi wyłączną odpowiedzialność za przegląd i objaśnienie niniejszej instrukcji obsługi w celu zapewnienia dokładności jej treści.

Treść niniejszych informacji została starannie sprawdzona. W przypadku wystąpienia błędów w druku lub przeoczeń, w granicach wyznaczonych przez prawo, firma zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji oraz do wprowadzania ulepszeń i modyfikacji.

Konstrukcja produktu może ulec zmianie bez powiadomienia.

Niektóre ilustracje zawarte w niniejszej instrukcji mają charakter poglądowy i służą wyłącznie jako punkt odniesienia. Jeśli ilustracja nie odpowiada rzeczywistemu produktowi, należy kierować się wyglądem rzeczywistego produktu lub skonsultować się z działem obsługi klienta w celu weryfikacji wersji.

Nazwa części	Nazwa szkodliwych substancji lub pierwiastków w produkcie					
	Substancje lub pierwiastki szkodliwe					
	Ołów (Pb)	Rtęć (Hg)	Kadm (Cd)	Chrom sześciowartościowy (Cr(VI))	Polibromowane bifenyle (PBBs)	Polibromowane etery difenylowe (PBDEs)
Komponenty elektroniczne	X	O	O	O	O	O
Komponenty metalowe (Hardware)	O	O	O	O	O	O
Komponenty plastikowe	O	O	O	O	O	O
Elementy opakowania	O	O	O	O	O	O

Tabela została sporządzona zgodnie z przepisami normy SJ/T 11364.

O – Oznacza, że zawartość danej substancji szkodliwej we wszystkich materiałach jednorodnych danej części mieści się w limitach określonych w dyrektywie RoHS 2015/863/UE
X – Oznacza, że zawartość danej substancji szkodliwej w co najmniej jednym materiale jednorodnym tej części przekracza limit określony w dyrektywie RoHS 2015/863/UE.

Wykazane w tabeli „substancje szkodliwe” oraz odpowiadające im elementy nie stanowią żadnego zagrożenia ani nie mają negatywnego wpływu na zdrowie człowieka i środowisko w warunkach normalnego użytkowania produktu. Informacje te służą zapewnieniu odpowiedniego opisu materiałowego dla konsumentów oraz podmiotów zajmujących się recyklingiem, co ułatwia prawidłową utylizację wyrobu po zakończeniu jego eksploatacji.



W warunkach normalnego użytkowania opisanych w niniejszej instrukcji obsługi, okres bezpiecznego dla środowiska użytkowania tego produktu (Environmental Protection Use Period) wynosi 5 lat. W tym czasie można bez obaw korzystać z urządzenia.

Jest nam bardzo przykro, że tym razem marka JOVS nie zapewniła Ci najlepszych wrażeń. Dołożymy wszelkich starań, aby pomóc Ci w rozwiązaniu poniższych kwestii posprzedażowych. Prosimy o szczegółowe wypełnienie poniższych informacji, co pomoże naszemu personelowi szybko rozwiązać Twój problem.

Platforma zakupowa	☐ jovs.com ☐ Amazon ☐ Others
Data zakupu	
Konto / ID użytkownika	
Dane kontaktowe	
Usługa posprzedażowa (Powód)	☐ Zwrot ☐ Wymiana ☐ Naprawa
Kontroler	
Pieczętka sprzedawcy	
Karta gwarancyjna	1 rok okresu gwarancyjnego

◆ Polityka posprzedażowa

- Roczna wymiana: Od daty zakupu przysługuje bezpłatna usługa wymiany produktu w przypadku wystąpienia wad jakościowych w ciągu 1 roku.
- Wypełnienie karty: Prosimy o szczegółowe wypełnienie wszystkich sekcji niniejszej karty gwarancyjnej. W przypadku zakupów dokonanych w kanałach innych niż oficjalna sprzedaż bezpośrednia wymagana jest pieczętka sprzedawcy – w przeciwnym razie karta będzie nieważna.
- Warunki zwrotu: Składając wniosek o zwrot, należy zwrócić produkt główny wraz ze wszystkimi akcesoriami oraz dołączonymi prezentami. Po weryfikacji przez markę zwracany zestaw nie może wpływać na możliwość jego ponownej sprzedaży (powinien być w stanie nienaruszonym).

◆ Wyłączenia z gwarancji

- Brak dowodu zakupu: Brak możliwości przedstawienia karty gwarancyjnej lub dowodu zakupu (faktury bądź zrzutu ekranu z potwierdzeniem zamówienia) pozbawia prawa do bezpłatnego serwisu posprzedażowego.
- Po okresie gwarancji: Jeśli okres użytkowania przekracza 1 rok od daty zakupu, a konieczna jest wymiana części zamiennych, zostanie pobrana uzasadniona opłata za naprawę.
- Uszkodzenia mechaniczne / wynikające z użytkowania: Uszkodzenia produktu spowodowane czynnikami ludzkimi (nieprawidłowa obsługa, użytkowanie w niewłaściwym środowisku, np. w wilgoci lub przy nadmiernej ekspozycji na słońce, uszkodzenia wyglądu zewnętrznego) nie kwalifikują się do bezpłatnego serwisu posprzedażowego.

JOVS