

cecotec

FACECARE LÜM ICE

FaceCare LÜM Ice Champagne

Máscaras LED/ LED mask



Manual de instrucciones
Instruction manual
Manuel d'instructions
Bedienungsanleitung
Manuale di istruzioni
Manual de instruções
Handleiding
Instrukcja obsługi
Návod k použití
Kullanma kılavuzu
Οδηγίες χρήσης
Manual d'istruccions
Használati útmutató
تاميل عئل ليلي

5. Reiniging en onderhoud	147
6. Probleemoplossing	148
7. Technische specificaties	148
8. Recycling van elektrische en elektronische apparatuur	149
9. Garantie en technische dienst	149
10. Copyright	149
11. Vereenvoudigde EU-conformiteitsverklaring	150

SPIS TREŚCI

1. Części i komponenty	151
2. Przed użyciem	151
3. Montaż produktu	152
4. Obsługa	152
5. Czyszczenie i konserwacja	156
6. Rozwiązywanie problemów	156
7. Dane techniczne	157
8. Recykling urządzeń elektrycznych i elektronicznych	158
9. Gwarancja i Serwis Pomocy Technicznej	158
10. Copyright	158
11. Uproszczona deklaracja zgodności UE	158

INDEX

1. Součásti a komponenty	159
2. Před použitím	159
3. Montáž produktu	160
4. Provoz	160
5. Čištění a údržba	164
6. Řešení problémů	164
7. Technické specifikace	165
8. Recyklace elektrických a elektronických zařízení	165
9. Záruka a SAT	166
10. Autorská práva	166
11. Zjednodušené prohlášení EU o shodě	166

İNDEKS

1. Parçalar ve bileşenler	167
2. Kullanmadan önce	167
3. Ürün montajı	168
4. İşlem	168
5. Temizlik ve bakım	171
6. Problem çözme	172
7. Teknik özellikler	173
8. Elektrikli ve elektronik ekipmanların geri dönüşümü	173
9. Garanti ve SAT	174
10. Telif Hakkı	174
11. Basitleştirilmiş AB Uy conformity Beyanı	174

ΔΕΙΚΤΗΣ

1. Μέρη και εξαρτήματα	175
------------------------	-----

2. Πριν από τη χρήση	175
3. Συναρμολόγηση προϊόντος	176
4. Λειτουργία	176
5. Καθαρισμός και συντήρηση	180
6. Επίλυση προβλημάτων	181
7. Τεχνικές προδιαγραφές	181
8. Ανακύκλωση ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού	182
9. Εγγύηση και SAT	182
10. Πνευματικά δικαιώματα	183
11. Απλουστευμένη Δήλωση Συμμόρφωσης ΕΕ183	

ÍNDEx

1. Peces i components	184
2. Abans de fer servir	184
3. Muntatge del producte	185
4. Funcionament	185
5. Neteja i manteniment	190
6. Resolució de problemes	190
7. Especificacions tècniques	191
8. Reciclatge d'aparells elèctrics i electrònics	192
9. Garantia i SAT	192
10. Copyright	192
11. Declaració UE de conformitat simplificada	192

INDEX

1. Alkatrészek és részegységek	193
2. Használat előtt	193
3. Termékösszeszerelés	194
4. Működés	194
5. Tisztítás és karbantartás	198
6. Problémamegoldás	198
7. Műszaki adatok	199
8. Elektromos és elektronikus berendezések újrahasznosítása	200
9. Garancia és SAT	200
10. Szerzői jog	200
11. Egyszerűsített EU-megfelelőségi nyilatkozat	200

فهرس

1. الأجزاء والمكونات	201
2. قبل الاستخدام	201
3. تجميع المنتج	201
4. التشغيل	202
5. التنظيف والصيانة	205
6. حل المشكلات	205
7. المواصفات الفنية	206
8. إعادة تدوير المعدات الكهربائية	206
والإلكترونية	207
9. الضمان و SAT	207
10. حقوق النشر	207
11. إعلان المطابقة المبسط للاتحاد الأوروبي	207

NOTA

EU01_128883 FaceCare LÜM Ice
EU01_128883 FaceCare LÜM Ice Champagne

ES • La codificación de este manual es genérica y se aplica a todas las variantes de códigos del aparato.

EN • The coding in this manual is generic and applies to all code variants of the appliance.

FR • Le codage figurant dans ce manuel est générique et s'applique à toutes les variantes de code de l'appareil.

DE • Die Codierung in dieser Bedienungsanleitung ist allgemein und gilt für alle Codevarianten des Geräts.

IT • La codifica riportata nel presente manuale è generica e si applica a tutte le varianti di codici dell'apparecchio.

PT • A codificação apresentada neste manual é genérica e aplica-se a todas as variantes de código do aparelho.

NL • De codering in deze handleiding is algemeen en geldt voor alle codevarianten van het apparaat.

PL • Kody podane w niniejszej instrukcji są ogólne i mają zastosowanie do wszystkich wariantów kodowych urządzenia.

CZ • Kódování obsažené v tomto návodu je generické a platí pro všechny kódové varianty spotřebiče.

TR • Bu kılavuzdaki kodlama geneldir ve cihazın tüm kod varyantları için geçerlidir.

GR • Η κωδικοποίηση σε αυτό το εγχειρίδιο είναι γενική και ισχύει για όλες τις παραλλαγές κώδικα της συσκευής.

CAT • La codificació del manual és genèrica i s'aplica a totes les variants de codis de l'aparell.

HU • Ez a kézikönyv egységes kódolást használ, amely az eszköz minden típusára érvényes

عربي • الدليل عالمًا وينطبق على جميع متغيرات التعليمات البرمجية الخاصة بالجهاز.

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

Przed użyciem produktu należy uważnie przeczytać poniższe instrukcje. Zachowaj tę instrukcję do wykorzystania w przyszłości lub dla nowych użytkowników.

- To urządzenie może być używane przez dzieci w wieku 8 lat i starsze oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub bez doświadczenia i wiedzy, jeśli znajdują się pod nadzorem lub zostały poinstruowane w zakresie korzystania z urządzenia w bezpieczny sposób i rozumieją związane z tym zagrożenia. Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem. Czyszczenie i konserwacja urządzenia, które ma przeprowadzać użytkownik nie mogą być wykonywane przez dzieci bez nadzoru.
- **OSTRZEŻENIE.** Nieprzestrzeganie instrukcji może spowodować uszkodzenie oczu (prowadzące do utraty wzroku) lub uszkodzenie skóry. Przeczytaj i postępuj zgodnie z instrukcjami.
- **UWAGA.** Należy używać wyłącznie materiałów jednorazowego użytku i materiałów eksploatacyjnych zalecanych przez producenta.
- **OSTRZEŻENIE.** Długotrwałe lub wielokrotne stosowanie produktu w tym samym miejscu może spowodować uszkodzenie skóry.
- **OSTRZEŻENIE.** Niewłaściwe użycie może spowodować uszkodzenie wzroku. Należy chronić oczy przed kontaktem z urządzeniem. Nie należy używać urządzenia na powiekach ani w pobliżu oczu.
- **OSTRZEŻENIE.** Nie wolno wyłączać mechanizmów zabezpieczających wbudowanych w urządzenie.
- **OSTRZEŻENIE.** Jeśli zażywasz leki zwiększające wrażliwość na światło lub preparaty ziołowe, przed użyciem urządzenia

skonsultuj się z lekarzem, ponieważ ich stosowanie może spowodować uszkodzenie skóry.

- **OSTRZEŻENIE.** Urządzeń tych nie powinny używać dzieci ani nie należy ich stosować u dzieci.
- Nie należy używać urządzenia w miejscach, gdzie integralność skóry jest naruszona (np. w przypadku oparzeń, urazów, pęcherzy, blizn, skaleczeń, otwartych ran, aktywnych chorób skóry, świeżej opalenizny lub poparzeń słonecznych i/lub infekcji).
- Urządzenie to nie jest przeznaczone do leczenia schorzeń. W celu leczenia np. pieprzyków, wysypek, swędzenia skóry, grzybicy skóry lub infekcji, guzków na skórze lub brodawek należy zasięgnąć porady lekarza.
- Wskazówki dotyczące stosowania w przypadku różnych przebarwień skóry.
- Należy unikać nadmiernego stosowania i nie przekraczać wskazanych parametrów użytkowania, takich jak kumulacja impulsów i/lub zwiększona częstotliwość stosowania.
- Należy sprawdzić, czy na optyce emisyjnej lub obudowie urządzenia nie ma widocznych uszkodzeń. W przypadku uszkodzeń nie należy używać urządzenia.

Przeciwwskazania

- NIE należy stosować maski do terapii LED, jeśli w przeszłości występowały napady drgawkowe wywołane światłem. Zaleca się przeprowadzenie testu na niewielkim, mniej wrażliwym obszarze skóry (patrz punkt 5.2 – Test wrażliwości na światło).
- NIE należy stosować maski do terapii LED w celach innych niż wskazane. Urządzenie nie zostało przetestowane pod kątem schorzeń, a ryzyko związane z jego stosowaniem jest nieznane.

- NIE należy używać maski do terapii LED w przypadku ciąży, planowania ciąży lub karmienia piersią. Nie została przetestowana u kobiet w ciąży lub karmiących piersią, dlatego ryzyko dla płodu, noworodka lub kobiet w ciąży jest nieznane.
- NIE używaj maski do terapii LED, jeśli występuje toczén rumieniowaty, egzema światłoczuła lub albinizm. Użycie maski w leczeniu tych schorzeń może wywołać ciężką reakcję skórą.
- NIE używaj maski do terapii LED, jeśli cierpisz na zaburzenia nadwrażliwości na światło (nadwrażliwość na światło). Jeśli użyjesz maski i cierpisz na zaburzenia nadwrażliwości na światło, może to spowodować poważną reakcję skórą.
- Nie wkładaj żadnych przedmiotów do otworów urządzenia.
- NIE używaj maski do terapii LED, jeśli przyjmujesz leki, które mogą powodować nadwrażliwość na światło. Jeśli użyjesz maski i przyjmujesz lek, który może powodować nadwrażliwość na światło, może to wywołać poważną reakcję skórą. Nadwrażliwość na światło jest częstym skutkiem ubocznym wielu leków. Mogą to być niektóre antybiotyki, leki stosowane w chemioterapii, leki nasercowe i diuretyki. Jeśli nie masz pewności co do przyjmowanego leku, skonsultuj się z lekarzem.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

OSTRZEŻENIA:

- Maska do terapii LED jest urządzeniem elektrycznym, które w pewnych okolicznościach może stwarzać dla użytkownika ryzyko porażenia prądem elektrycznym. Prosimy o uważne zapoznanie się z załączoną instrukcją obsługi i przestrzeganie zawartych w niej wskazówek,

aby zapewnić maksymalne bezpieczeństwo podczas użytkowania.

- Pasek maski do terapii LED jest wykonany z mieszanki poliestru, nylonu i lycry. Jeśli masz uczulenie na którykolwiek z tych materiałów, możesz nie być w stanie używać tego paska.
- Maski do terapii LED nie można używać podczas ładowania.
- Przed każdym użyciem, gdy urządzenie jest wyłączone, należy wycisnąć maskę.
- NIE należy używać środków czyszczących innych niż wskazane w instrukcji czyszczenia. Użycie innych środków czyszczących może spowodować uszkodzenie maski.
- Przechowuj maskę w temperaturze pokojowej, w suchym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego.
- Natychmiast WYŁĄCZ i ZDEJMIJ maskę do terapii światłem LED, jeśli czujesz, że jest gorąca lub jeśli Twoja skóra jest nieprzyjemnie rozgrzana. Ze względu na długość przewodu ładującego może dojść do uduszenia, dlatego należy przechowywać produkt poza zasięgiem dzieci.
- NIE należy używać maski do terapii światłem LED bez usunięcia makijażu PRZED zabiegiem. Niektóre składniki tych produktów mogą powodować uczulenie skóry lub osłabiać efekt zabiegu. Używanie maski bez usunięcia tych produktów może spowodować reakcję skórą lub osłabić efekt zabiegu. Urządzenie to nie jest przeznaczone do użytku przez dzieci. Należy pilnować dzieci, aby nie bawiły się urządzeniem, co pozwoli uniknąć ryzyka pożaru i poparzeń.
- NIGDY nie należy używać maski do terapii światłem LED w pobliżu wody ani w miejscach, gdzie woda może się na nią wylać. NIE używaj maski do terapii światłem LED, jeśli podejrzasz, że miała ona kontakt z wodą. Nie

narażaj urządzenia na silne uderzenia, aby uniknąć ryzyka uszkodzenia światła.

- Trzymaj maskę do terapii światłem LED z dala od GORĄCYCH powierzchni.
- NIE próbuj w żaden sposób modyfikować maski do terapii światłem LED. Modyfikacja maski do terapii światłem LED spowoduje utratę gwarancji. Modyfikacja maski do terapii światłem LED może spowodować porażenie prądem podczas ponownego użycia urządzenia. Urządzenie nie zawiera części nadających się do naprawy. Używanie akcesoriów innych niż określone lub dostarczone przez producenta tego urządzenia może skutkować zwiększoną emisją elektromagnetyczną lub zmniejszeniem odporności elektromagnetycznej.
- NIE używaj maski do terapii światłem LED, jeśli maska, pilot zdalnego sterowania lub przewód są w jakikolwiek sposób uszkodzone. Nie pozostawiaj urządzenia bez nadzoru, gdy jest włączone, aby uniknąć ryzyka pożaru lub poparzeń.
- Po wyjęciu urządzenia z miejsca przechowywania o minimalnej lub maksymalnej temperaturze zaleca się pozostawienie go na 2 godziny przed użyciem.
- Nie należy patrzeć bezpośrednio na światło ani kierować go w stronę oczu podczas pracy urządzenia.

Bezpieczeństwo elektryczne

- NIE przechowuj urządzenia w temperaturach powyżej 60°C/140°F. Wzrost temperatury wewnętrznej może spowodować nieprawidłowe działanie lub pożar.
- W przypadku pojawienia się dymu lub dziwnego zapachu należy zaprzestać użytkowania, wyłączyć urządzenie i odłączyć ładowarkę.

- NIE wolno uszkadzać, zginać, skręcać ani podgrzewać przewodu USB. Uszkodzenie przewodu może spowodować pożar lub porażenie prądem.

Oznaczenia symboli

Symbol	Znaczenie
	Więcej informacji można znaleźć w instrukcji obsługi
	Sprzęt klasy II
	Ogólny znak ostrzegawczy
IP22	Stopień ochrony IP
	Chronić przed światłem słonecznym
	Uwaga

1. CZĘŚCI I KOMPONENTY

Jednostka główna

Rysunek 1

1. Silikonowa nakładka na oczy
2. Opaska na głowę
3. Port połączeniowy

Pilot zdalnego sterowania

Rysunek 2

1. Ekran LCD: Do sprawdzenia wybranego trybu i pozostałego czasu
2. Przycisk włączania/wyłączania
3. Przycisk zmiany trybu: Do przełączania między różnymi trybami.
4. Przycisk timera: Ustawienie czasu użytkowania.

Uwaga:

Grafika tej instrukcji obsługi jest schematyczna i możliwe, że nie będzie całkowicie zgodna z produktem.

2. PRZED UŻYCIEM

- To urządzenie jest zapakowane w opakowanie zaprojektowane w celu ochrony podczas transportu. Wyjmij urządzenie z pudełka. Oryginalne pudełko i inne elementy opakowania należy przechowywać w bezpiecznym miejscu, aby zapobiec uszkodzeniu urządzenia w przypadku konieczności jego transportu w przyszłości. Jeśli chcesz pozbyć się oryginalnego opakowania, pamiętaj o prawidłowym recyklingu wszystkich jego elementów.
- Upewnij się, że wszystkie części i komponenty są dołączone i są w dobrym stanie. Jeśli brakuje jakiegokolwiek części lub jest ona w złym stanie, należy natychmiast skontaktować się z oficjalnym Serwisem Pomocy Technicznej Cecotec.

Zawartość opakowania:

- Jednostka główna
- Pilot zdalnego sterowania
- Przewód ładowania typu C
- Akcesorium IceTech
- Ta instrukcja obsługi
- Nie usuwaj numeru seryjnego produktu, aby można było zidentyfikować urządzenie w przypadku wymagania pomocy technicznej.

3. MONTAŻ PRODUKTU

1. Podłączenie: Podłącz przewód maski do odpowiedniego portu na pilocie zdalnego sterowania.
2. Ładowanie/Zasilanie: Upewnij się, że urządzenie jest podłączone do źródła energii lub że bateria jest naładowana przed użyciem.
3. Mocowanie akcesoriów: Jeśli chcesz użyć maski żelowej, przymocuj ją wewnątrz urządzenia za pomocą wbudowanych magnesów.
4. Weryfikacja: Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania, aby sprawdzić, czy ekran LCD i diody LED aktywują się prawidłowo.

Uwaga: Nie są wymagane narzędzia ani skomplikowany montaż; zintegrowany system rzepów umożliwia natychmiastową regulację po podłączeniu.

4. OBSŁUGA

Konfiguracja urządzenia

1. Rozpakuj urządzenie i wszystkie akcesoria.
2. Urządzenie posiada wewnętrzną baterię wielokrotnego ładowania. Przed pierwszym użyciem należy całkowicie naładować urządzenie przez około 3,5 godziny.

Test wrażliwości na światło

Postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami, aby sprawdzić, czy masz wrażliwość na światło:

1. Włącz urządzenie, długo naciskając przycisk „Włącz/Wyłącz” na masce LED, a następnie zmieniaj tryby kolorów za pomocą przycisku „Zmiana trybu” na pilocie zdalnego sterowania
2. Umieść urządzenie na przedramieniu, utrzymując kontakt przez cały trzy minutowy cykl zabiegu.
3. Ponownie naciśnij przycisk „wyboru trybów kolorów”, aby wybrać inny tryb na kolejny trzuminutowy zabieg na tym samym obszarze przedramienia.
4. Odczekaj 24 godziny. W ciągu najbliższych 24 godzin nie powinny wystąpić żadne działania niepożądane.
5. Działaniem niepożądanym jest ból lub dyskomfort w miejscach poddanych zabiegowi lub jakiegokolwiek długotrwałe zaczerwienienie skóry.

Ładowanie baterii

Przed użyciem należy naładować baterię pilota LED w sposób opisany poniżej.

Czas ładowania może się różnić w zależności od stanu baterii i może trwać do 3,5 godziny.

1. Podłącz dostarczony przewód ładowania do portu typu C w pilocie zdalnego sterowania.
2. Podłącz przeciwny koniec USB do adaptera ładującego 5 V 2 A DC.

3. Gdy cyfrowe światło na pilocie przestanie się obracać i pozostanie stałe, ładowanie jest zakończone.

Uwaga: Wskaźnik na pilocie zmienia się w zależności od stanu naładowania maski LED.

- **Wskaźnik niskiego poziomu baterii:** Ikona baterii będzie migać, ostrzegając o konieczności naładowania. Jeśli nie zostanie naładowana na czas, urządzenie wyłączy się automatycznie.
- **Wskaźnik ładowania:** Paski ikony baterii będą stopniowo podświetlać się na ekranie.
- **Wskaźnik pełnego naładowania:** Ikona baterii na ekranie będzie świecić w sposób ciągły.

Wskazówki dotyczące konserwacji baterii litowej

- Unikaj całkowitego rozładowania baterii przed ponownym naładowaniem.
- Unikaj nadmiernego ładowania baterii i ogranicz czas ładowania do maksymalnie 8 godzin.
- Jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, zaleca się ładowanie baterii co najmniej raz na trzy miesiące.

Sposób użycia

Przygotowanie

1. Przed rozpoczęciem dokładnie oczyść twarz, aby usunąć resztki makijażu lub zanieczyszczenia. Całkowicie osusz skórę, ponieważ technologia światła najlepiej działa na czystej twarzy.
2. Jeśli chcesz przeprowadzić sesję z efektem chłodzenia, załóż akcesorium IceTech wcześniej schłodzone w lodówce lub zamrażarce. Dzięki systemowi magnesów można łatwo je przymocować do wewnętrznej części maski LED przed założeniem.

Instrukcje użytkowania

1. Załóż maskę na twarz i zamocuj ją za pomocą wbudowanego rzepu, aby wygodnie leżała na twarzy. Upewnij się, że jest stabilna, ale nie wywiera nadmiernego ucisku.
2. Podłącz pilot zdalnego sterowania do przewodu typu C maski LED do terapii światłem. Rys. 2
3. Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania (On/Off) na pilocie zdalnego sterowania przez 1,5 sekundy. Urządzenie automatycznie aktywuje się w trybie światła pomarańczowego z domyślnym czasem trwania 5 minut.
4. Naciśnij kilkakrotnie przycisk „M”, aby przełączać się między 9 trybami światła. Każdy kolor ma określoną funkcję.
5. Krótko naciśnij przycisk zasilania, aby przełączać się między 3 poziomami intensywności światła, w zależności od wrażliwości i potrzeb.
6. Naciśnij przycisk „Time”, aby wybrać żądany czas trwania sesji (5, 10, 15 lub 20 minut). Ekran LCD rozpocznie odliczanie i będzie wskazywać pozostały czas.
7. Urządzenie wyłączy się automatycznie, gdy timer osiągnie zero. Jeśli chcesz zakończyć sesję wcześniej, naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania.

Wskazówki dotyczące regulacji opaski na głowę

1. Siedząc lub stojąc, upewnij się, że nacisk na oczodół jest minimalny, umożliwiając silikonowej nakładce odpowiednie dopasowanie, podczas gdy opaska zabezpiecza produkt.
2. Jeśli silikonowa nakładka wywiera zbyt duży nacisk, poluzuj opaskę na głowę po obu stronach.
3. Jeśli światło wpada przez szczelinę między nakładką a oczodółem, zaciśnij opaskę na głowę.
4. Jeśli maska się zsuwa, zaciśnij opaskę na głowę.
5. Wybierz żądany tryb za pomocą przycisków na pilocie zdalnego sterowania.
6. Jeśli odczuwasz dyskomfort, wyreguluj pasek lub zdejmij maskę, aż poczujesz się lepiej.
7. Produkt wyłączy się automatycznie po zakończeniu ustawionego trybu i czasu.

Użycie

Parametry trybów są następujące:

Tryb LED	Ilość diod LED	Czas trwania (minuty)	Długość fali (nm)	Moc światła (mW/cm ²)
POMARAŃCZOWY 	70 czerwonych diod + 70 zielonych diod	5/10/15/20	630 + 530	Poziom 1: 10 mW/cm ² Poziom 2: 15 mW/cm ² Poziom 3: 20 mW/cm ²
CYJAN 	70 niebieskich diod + 70 zielonych diod	5/10/15/20	465 + 530	Poziom 1: 15 mW/cm ² Poziom 2: 20 mW/cm ² Poziom 3: 30 mW/cm ²
BIAŁY 	70 czerwonych diod + 70 niebieskich diod + 70 zielonych diod	5/10/15/20	630 + 465 + 530	Poziom 1: 15 mW/cm ² Poziom 2: 20 mW/cm ² Poziom 3: 30 mW/cm ²
CZERWONY + NIR 	70 czerwonych diod + 70 diod podczerwieni	5/10/15/20	630 + 850	Poziom 1: 10 mW/cm ² Poziom 2: 15 mW/cm ² Poziom 3: 20 mW/cm ²
NIR 	70 diod podczerwieni	5/10/15/20	850	Poziom 1: 10 mW/cm ² Poziom 2: 15 mW/cm ² Poziom 3: 20 mW/cm ²

NIEBIESKI + NIR 	70 niebieskich diod + 70 diod podczerwieni	5/10/15/20	465 + 850	Poziom 1: 10 mW/cm ² Poziom 2: 20 mW/cm ² Poziom 3: 30 mW/cm ²
ZIELONY + NIR 	70 zielonych diod + 70 diod podczerwieni	5/10/15/20	530 + 850	Poziom 1: 10 mW/cm ² Poziom 2: 15 mW/cm ² Poziom 3: 25 mW/cm ²
ŻÓŁTY 	70 czerwonych diod + 70 zielonych diod	5/10/15/20	630 + 530	Poziom 1: 15 mW/cm ² Poziom 2: 20 mW/cm ² Poziom 3: 25 mW/cm ²
LILIOWY 	70 czerwonych diod + 70 niebieskich diod	5/10/15/20	630 + 465	Poziom 1: 15 mW/cm ² Poziom 2: 20 mW/cm ² Poziom 3: 35 mW/cm ²

Funkcje

- **Pomarańczowe światło:** Idealne dla skóry o matowym lub pozbawionym blasku wyglądzie. Pomaga ożywić wygląd twarzy, natychmiast przywracając jej naturalny blask i promienność, nadając jej wypoczęty wygląd.
- **Cyjanowe światło:** Działa kojąco na skórę skłoną do podrażnień. Pomaga złagodzić widoczność powierzchniowych zaczerwienień i przyczynia się do wizualnego wyrównania nadmiernego wydzielania sebum.
- **Białe światło:** Dzięki połączeniu różnych widm światła poprawia jędrność skóry pozbawionej napięcia, nadając jej ogólnie gładki, świeży i odmłodzony wygląd.
- **Czerwone światło + NIR:** Nasza flagowa funkcja przeznaczona dla skóry dojrzałej. Pomaga złagodzić widoczność zmarszczek mimicznych i drobnych zmarszczek, sprawiając, że skóra wygląda i staje się bardziej elastyczna oraz jędrna.
- **Podczerwone światło:** Zwiększa witalność skóry. Regularne stosowanie poprawia blask i strukturę skóry, nadając jej zdrowszy i bardziej promienny wygląd.
- **Niebieskie światło + NIR:** Przeznaczone do skóry skłonnej do niedoskonałości. Pomaga utrzymać skórę w czystości i zapewnić jej zrównoważony wygląd, zmniejszając widoczność porów i zapobiegając powstawaniu wyprysków.
- **Zielone światło + NIR:** Idealny sprzymierzeniec w wizualnym ujednoliceniu kolorytu skóry. Pomaga zniwelować widoczność przebarwień i zapewnia relaksujący efekt, który zmniejsza oznaki zmęczenia.
- **Żółte światło:** Ma na celu poprawę jednolitości cery. Wizualnie zmniejsza zaczerwienienia lub podrażnienia skóry, zapewniając uczucie komfortu i bardziej równomierny koloryt twarzy.
- **Fioletowe światło:** Łączy właściwości kosmetyczne światła czerwonego i niebieskiego. Doskonale nadaje się do poprawy wyglądu nierównej tekstury skóry oraz do rewitalizacji obszarów, które utraciły swoją naturalną gładkość.

Informacja: Ten produkt jest urządzeniem przeznaczonym do celów kosmetycznych i nie służy do diagnozowania, leczenia ani zapobiegania jakimkolwiek chorobom lub schorzeniom. Nie jest to urządzenie medyczne. Jeśli cierpisz na jakąkolwiek chorobę skóry, przed użyciem skonsultuj się z dermatologiem.

5. CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

1. Przechowuj maskę LED do terapii światłem w temperaturze pokojowej i w suchym miejscu.
2. Unikaj przechowywania jej w zakurzonych warunkach, w bezpośrednim świetle słonecznym lub w wilgotnych pomieszczeniach.
3. Maską LED do terapii światłem nie zawiera części wymagających konserwacji.
4. Przed każdym użyciem, przy wyłączonym urządzeniu, wyczyść maskę do twarzy zgodnie z poniższymi instrukcjami czyszczenia.

Czyszczenie maski LED do terapii światłem

1. NIE używaj innych środków czyszczących, ponieważ mogą one uszkodzić urządzenie.
2. Wyczyść powierzchnię urządzenia chusteczką wilgotną lub czystą, wilgotną ściereczką. Trudne plamy można delikatnie usunąć 70% alkoholem. Następnie należy wytrzeć powierzchnię czystą, suchą ściereczką.
3. Po czyszczeniu wizualnie sprawdź urządzenie, aby upewnić się, że jest czyste. Jeśli nie, powtórz czyszczenie.

Warunki przechowywania

- Temperatura: -20°C do +60°C
- Wilgotność: 10% do 95% RH
- Ciśnienie atmosferyczne: 700 hPa do 1060 hPa

Utylizacja

- NIE wyrzucaj żadnej części maski LED do terapii światłem razem z odpadami domowymi. Maską i pilot zdalnego sterowania zawierają baterię litowo-jonową polimerową.
- W celu ochrony środowiska, zwróć to urządzenie przedstawicielowi po zakończeniu jego żywotności lub bezpiecznie zutylizuj je zgodnie z lokalnymi przepisami.

6. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Usterki i rozwiązania

1. Ekran LCD pilota nie świeci się po naciśnięciu przycisku, a maski nie można kontrolować.

Rozwiązanie: Sprawdź, czy w komorze pilota nie została wyjęta wkładka izolacyjna baterii. Jeśli została usunięta, a pilot nadal nie działa, sprawdź, czy bateria nie jest wyczerpana. Jeśli

jest to problem z baterią, możesz skontaktować się z oficjalnym Serwisem Pomocy Technicznej Cecotec w celu jej wymiany.

2. Pilot nie ładuje się.

Rozwiązanie:

- a. Wymień przewód ładowania. Jeśli problemem jest przewód, możesz skontaktować się z oficjalnym Serwisem Pomocy Technicznej Cecotec w celu jego wymiany.
- b. Sprawdź, czy adapter ładujący, do którego podłączone jest urządzenie, działa, lub czy napięcie wskazane na urządzeniu odpowiada napięciu lokalnej sieci elektrycznej.

7. DANE TECHNICZNE

Produkt: FaceCare LÜM Ice / FaceCare LÜM Ice Champagne

Numer referencyjny produktu: EU01_128883

Moc znamionowa wejściowa: 5 V = 2 A

Znamionowy pobór mocy: 7,4 W

Bateria: litowo-jonowa 3,7 V, 4000 mAh, 14,8 Wh

Maksymalny czas działania: 3,5 godziny (w zależności od trybu)

Czas ładowania: 3,5 godziny

Ochrona przed porażeniem prądem: Klasa II, część aplikacyjna typu BF (część emitująca światło)

Wymiary maski LED: ok. 69,9 x 20,8 x 0,9 (cm)

Wymiary pilota zdalnego sterowania: ok. 12,6 x 4,4 x 3,2 (cm)

Waga maski LED: ok. 250 g

Waga pilota zdalnego sterowania: ok. 140 g

Źródło światła: Diody elektroluminescencyjne

Długość fali: Czerwony: 630 nm; Niebieski: 465 nm; Zielony: 530 nm; Podczerwień: 850 nm

Energia świetlna: Pomarańczowy: 20 mW/cm²; Cyjan: 30 mW/cm²; Białe: 30 mW/cm²;

Czerwony + NIR: 20 mW/cm²; NIR: 20 mW/cm²; Niebieski + NIR: 30 mW/cm²; Zielony + NIR: 25

mW/cm²; Żółty: 25 mW/cm²; Fioletowy: 35 mW/cm²

Do ładowania akumulatora/baterii zaleca się użycie zasilacza o następujących parametrach:

Wejście: 100-240 V~, 50/60 Hz

Wyjście: 5 V =, 2 A

Specyfikacje techniczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia w celu poprawy jakości produktu.

Wyprodukowano w Chinach | Zaprojektowano w Hiszpanii

8. RECYKLING URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH



Ten symbol oznacza, że zgodnie z obowiązującymi przepisami produkt i/lub baterię/akumulator należy utylizować oddzielnie od odpadów domowych. Kiedy ten produkt osiągnie koniec okresu użytkowania, należy wyjąć baterie/akumulatory i przekazać go do punktu zbiórki wyznaczonego przez lokalne władze.



Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat najbardziej odpowiedniego sposobu utylizacji sprzętów elektrycznych i elektronicznych i/lub odpowiednich baterii, konsument powinien skontaktować się z lokalnymi władzami.

Informacje na temat krajowych programów recyklingu opakowań i ich oznakowania można znaleźć na naszej stronie internetowej.

Przestrzeganie powyższych wytycznych pomoże chronić środowisko.

9. GWARANCJA I SERWIS POMOCY TECHNICZNEJ

Cecotec odpowiada przed użytkownikiem lub konsumentem końcowym za wszelkie niezgodności występujące w momencie dostawy produktu na warunkach określonych w obowiązujących przepisach.

Zaleca się, aby naprawy były przeprowadzane przez wyspecjalizowany personel.

Jeśli wykryjesz problem z produktem lub masz jakiegokolwiek pytania, skontaktuj się z oficjalnym Serwisem Pomocy Technicznej Cecotec pod numerem telefonu +34 96 321 07 28.


10. COPYRIGHT

Prawa własności intelektualnej do tekstów tej instrukcji obsługi należą do CECOTEC INNOVACIONES, S.L. Wszelkie prawa zastrzeżone. Treść niniejszej publikacji nie może być, w całości lub w części, powielana, przechowywana w systemie wyszukiwania, przesyłana lub rozpowszechniana za pomocą jakichkolwiek środków (elektrycznych, mechanicznych, fotokopii, nagrywania lub podobnych) bez uprzedniej zgody CECOTEC INNOVACIONES, S.L.


11. UPROSZCZONA DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE





Niniejszym Cecotec Innovaciones oświadcza, że ten produkt spełnia podstawowe wymogi i jest zgodny z innymi odpowiednimi przepisami obowiązującymi w Unii Europejskiej. Ten produkt został zaprojektowany, wyprodukowany i przetestowany spełniając wymagane normy bezpieczeństwa i jakości. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: <https://cecotec.es/es/information/declaration-of-conformity>

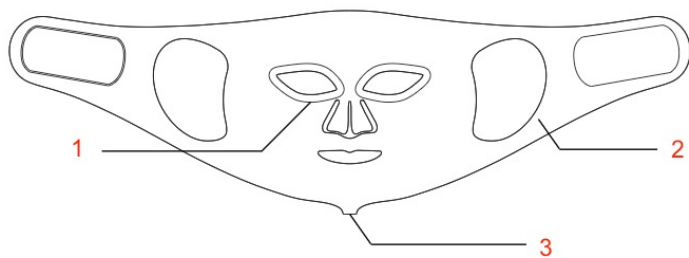

لکشلا 1 Fig.

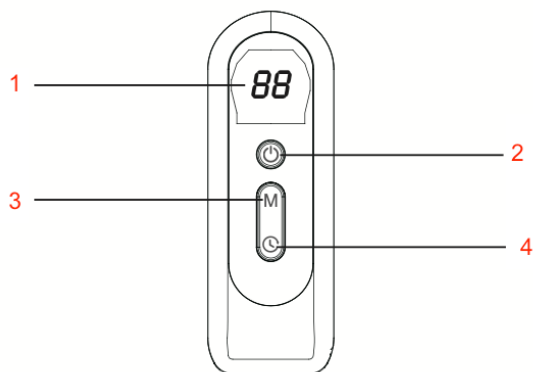

لکشلا 2 Fig.

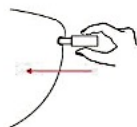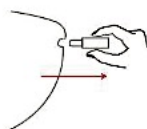

لكشلا 3 Fig.

www.cecotec.es

Cecotec Innovaciones S. L.
Av. Reyes Católicos, 60
46910, Alfafar (Valencia), Spain

