


# IRYGATOR I SONICZNA SZCZOTECZKA DO ZĘBÓW S31 AQUASONIC

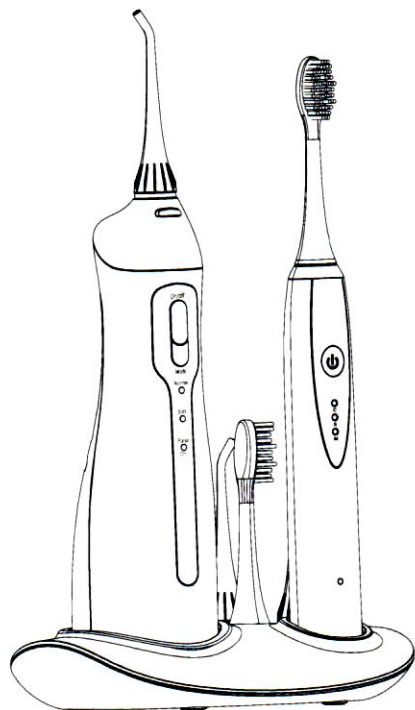

the beauty **specialists**


## OSTRZEŻENIA

- **Należy dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję i zachować ją do późniejszego wykorzystania.**
- To urządzenie może być używane przez dzieci w wieku powyżej 8 lat i przez osoby o ograniczonych zdolnościach psychicznych, fizycznych i ruchowych lub o niewystarczającym doświadczeniu i wiedzy, pod warunkiem, że będą nadzorowane lub pouczone przez osobę, która jest za nie odpowiedzialna, o bezpiecznym użytkowaniu urządzenia i o ryzyku z nim związanym. Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem. Czyszczenie i konserwacja nie powinny być wykonywane przez dzieci bez nadzoru osoby dorosłej.
- Jeśli stacja akumulatorowa wpadła do wody lub do innego płynu, należy ją natychmiast odłączyć od źródła zasilania. Nigdy nie należy podejmować próby natychmiastowego wyjęcia stacji z wody.
- **NIE** należy zanurzać urządzenia **w wodzie**.
- Nie należy używać urządzenia **podczas kąpieli** lub pod prysznicem.
- **NIE** należy używać urządzenia, **jeśli urządzenie** nie działa prawidłowo lub jeśli zostało upuszczone lub uszkodzone.
- uszkodzona, należy zaprzestać stosowania urządzenia i skontaktować się z działem obsługi klienta w celu wymiany.
- Urządzenie nie zawiera żadnych części, które mogą być naprawiane przez użytkownika.
- Nie należy na siłę wkładać wtyczki przewodu zasilania do gniazdka. Jeśli wtyczka nie pasuje do gniazdka, należy zaprzestać używania urządzenia.
- Jeśli stosowana pasta do zębów zawiera nadtlenki, sodę oczyszczoną lub diwęglan sodowy (często stosowany w wybielających pastach do zębów), należy dokładnie czyścić szczoteczkę po użyciu, by uniknąć zniszczenia plastikowych elementów.

# OSTRZEŻENIA ciąg dalszy


- Należy skontaktować się ze stomatologiem, w przypadku wystąpienia obfitego krwawienia podczas stosowania urządzenia lub w przypadku gdy mniejsze krwawienia będą się utrzymywały po tygodniu stosowania urządzenia.
- Należy zaprzestać stosowania urządzenia i skontaktować się ze stomatologiem, gdy podczas stosowania urządzenia odczuwany jest dyskomfort lub ból.
- Nie należy stosować urządzenia w przypadku ran otwartych w jamie ustnej.
- Urządzenie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci i zwierząt domowych.
- Nie należy umieszczać ani przechowywać urządzenia w miejscu, w którym może wpaść lub zostać ściągnięte do wanny lub umywalki.

## BUDOWA URZĄDZENIA

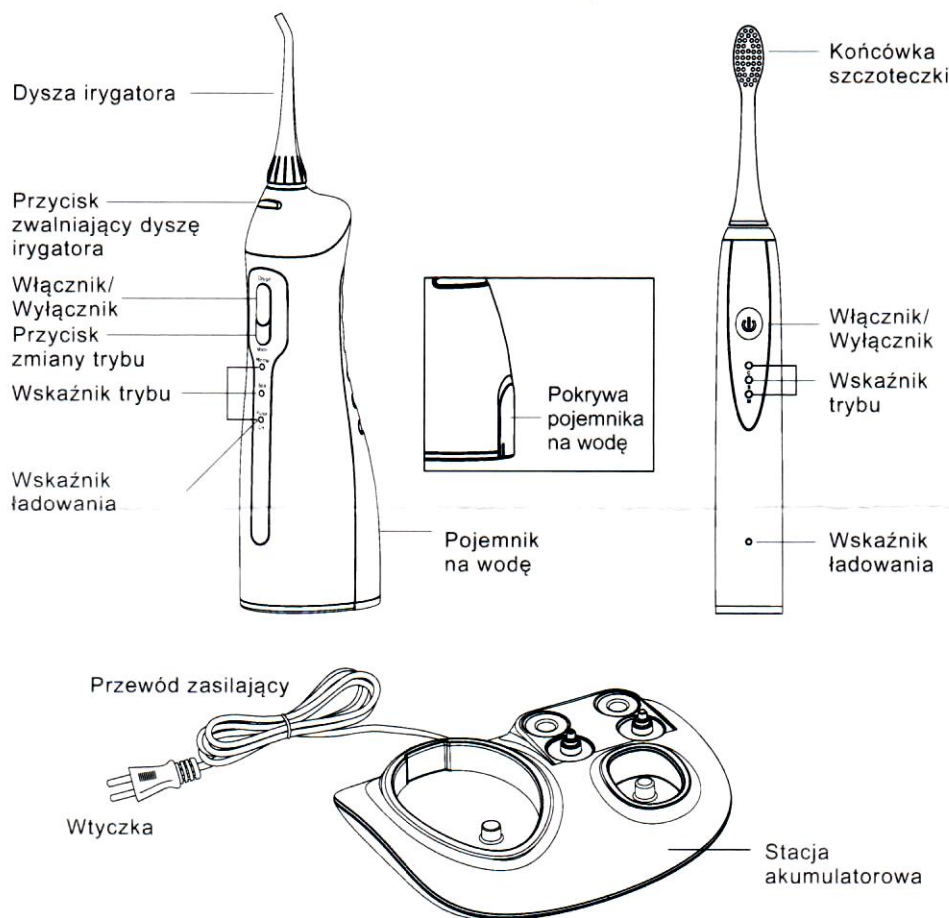


## ŁADOWANIE

1. Włożyć wtyczkę przewodu zasilania do gniazdka. (Rys. 1)
2. Następnie włożyć szczoteczkę i irygator do stacji akumulatorowej. (Rys. 2)
3. Wskaźnik ładowania na irygatorze zacznie migać, będzie to oznaczać, że urządzenie się ładuje. Gdy urządzenie będzie w pełni naładowane wskaźnik będzie się świecił jednostajnie.
4. Podczas ładowania, szczoteczka będzie ciepła. Jest to normalne zjawisko.
5. Przed pierwszym użyciem lub gdy urządzenie nie jest używane przez ponad trzy miesiące, pełne ładowanie urządzenia trwa 24 godziny.
6. By bateria była zawsze w pełni naładowana, należy przechowywać urządzenie w stacji akumulatorowej, gdy urządzenie nie jest używane.

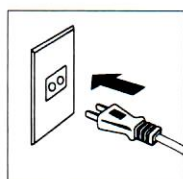


Rys. 1

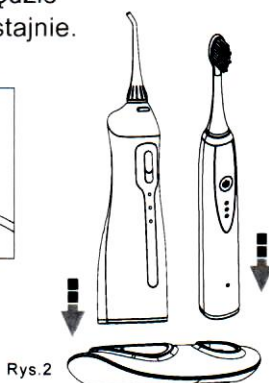

Rys. 2


# OBSŁUGA IRYGATORA

1. Założyć dyszę irygatora na urządzenie. (Rys. 3)
2. Otworzyć pojemnik na wodę, napęlić go wodą i zamknąć za pomocą przykrywki.

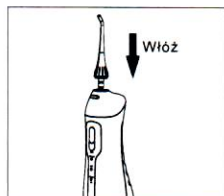

Rys. 3

**Uwaga:** Temperatura wody nie powinna przekraczać 40°C. (Rys. 4)

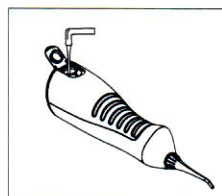

Rys. 4


3. Nacisnąć przycisk wyboru trybu i wybrać odpowiedni tryb czyszczenia.

**Normal (Normalny)** - czyszczenie normalne;

**Soft (Delikatny)** - delikatne czyszczenie w przypadku wrażliwych dziąseł.


**Pulse (Pulsacyjny)** - czyszczenie i delikatny masaż dziąseł.

Tryby można zmieniać podczas używania irygatora. (Rys. 5)

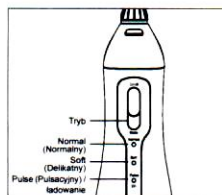


Rys. 5

4. Przytrzymać urządzenie w pozycji pionowej i skierować końcówkę dyszy irygatora na zęby. Podczas używania irygatora, usta powinny być lekko otwarte tak, aby woda mogła swobodnie spływać do umywalki.

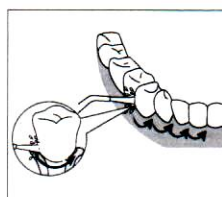

Rys. 6

5. Nacisnąć włącznik/wyłącznik, skierować strumień wody pod kątem 90 stopni do linii dziąseł i powoli przesuwając końcówkę wzdłuż zębów i linii dziąseł czyszczyć zewnętrzną i wewnętrzną stronę górnych i dolnych zębów. Urządzeniem można wyczyścić zęby jak również przestrzenie między zamkami ortodontycznymi, koronkami lub mostkami. (Rys. 6)

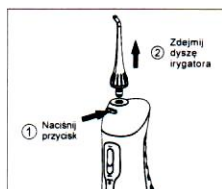

Rys. 7


6. Po zakończonym czyszczeniu, nacisnąć włącznik/wyłącznik w celu wyłączenia urządzenia. Urządzenie wyłączy się automatycznie po dwóch minutach.

**Uwaga:** W celu zdjęcia dyszy irygatora, należy nacisnąć przycisk zwalniający dyszę irygatora. (Rys. 7)

Jeśli wskaźnik ładowania miga podczas lub po użyciu urządzenia, może to oznaczać, że urządzenia wymaga naładowania.

## Po użyciu

1. Otworzyć pojemnik na wodę i wylać resztę wody z pojemnika.
2. Nacisnąć włącznik/wyłącznik w celu włączenia urządzenia i opróżnienia urządzenia z pozostałości wody.
3. Nacisnąć włącznik/wyłącznik w celu wyłączenia urządzenia i zamknąć pojemnik na wodę.
4. Wytrzeć urządzenie suchą ściereczką. (Fig 8)


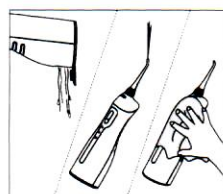


Rys. 8


**Uwaga:** Aby zapobiec rozwojowi bakterii, po każdym użyciu należy dokładnie opróżnić pojemnik na wodę. Jeżeli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, należy dokładnie wytrzeć je suchą ściereczką.

# OBSŁUGA SZCZOTECZKI SONICZNEJ

Nasunąć końcówkę szczoteczki na rączkę i lekko ją docisnąć. Pomiędzy końcówką a rączką szczoteczki powinna pozostać wolna przestrzeń. (Rys. 3)

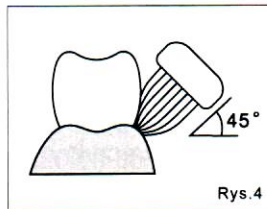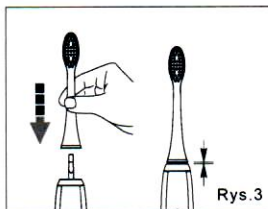

1. Zamoczyć końcówkę szczoteczki i nałożyć na nią pastę do zębów.
2. Ustawić włosie szczoteczki pod kątem 45 stopni do linii dziąseł. (Rys. 4)
3. Nacisnąć włącznik/wyłącznik, by włączyć szczoteczkę. Wybrać odpowiedni tryb za pomocą przycisku wyboru trybu.


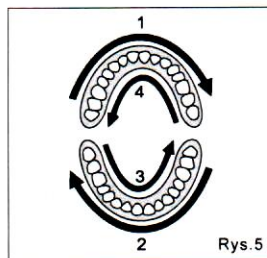


**Clean (Czyszczenie)** - Standardowy tryb do dokładnego mycia zębów.

**Soft (Delikatny)** - Delikatne czyszczenie zębów lub obszarów wrażliwych.

**Massage (Masaż)** - Tryb pulsacyjny do delikatnego masażu dziąseł.

4. Lekko docisnąć szczoteczkę do powierzchni zębów i przesuwając ją delikatnie do przodu i do tyłu. (Rys. 5) Resztę szczoteczka zrobi za Ciebie. Dla największej efektywności należy podzielić jamę ustną na cztery obszary i każdy obszar szczotkować przez 30 sekund. Co 30 sekund szczoteczka zasygnalizuje sugerowaną zmianę obszaru szczotkowania poprzez krótką pauzę, a po dwóch minutach szczoteczka wyłączy się automatycznie.
5. W celu wyłączenia szczoteczki należy przytrzymać włącznik/wyłącznik przez 5 sekund.
6. Pociągnąć za końcówkę szczoteczki, by odłączyć ją od rączki. (Rys. 6)  
Przemyć końcówkę i rączkę szczoteczki pod bieżącą wodą, a następnie wytrzeć do sucha. (Rys. 7)
7. Umieścić szczoteczkę w stacji akumulatorowej.

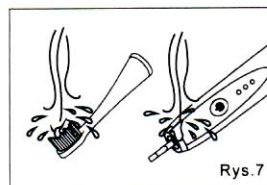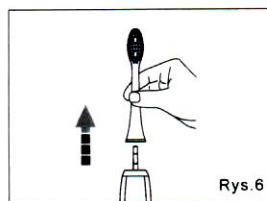

# KONSERWACJA

- Przed przystąpieniem do mycia urządzenia, należy odłączyć stację akumulatorową od źródła zasilania i upewnić się, że urządzenie jest suche przed ponownym podłączeniem urządzenia do źródła zasilania.
- Do mycia urządzenia stosować tylko ciepłą wodę.
- Przetrzeć urządzenie wilgotną ściereczką.
- NIE zanurzać urządzenia w wodzie.

Nie należy używać żadnych rozpuszczalników, ani środków czyszczących, które mogłyby porysować urządzenie.



- Zawsze należy wytrzeć urządzenie do sucha po myciu.

- Przechowywać z dala od źródeł wysokiej temperatury i chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.

- Dyszę irygatora należy wymieniać co sześć miesięcy.


- Jeśli irygator nie będzie używany przez dłuższy czas, należy wytrzeć do sucha pojemnik na wodę.

- Przemyć końcówkę szczoteczki sonicznej po każdym użyciu. Końcówkę szczoteczki należy wymieniać co trzy miesiące.

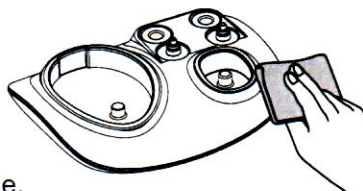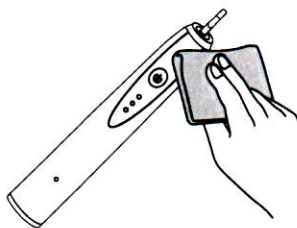

## ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

| Problem                                                                                   | Rozwiązanie                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Urządzenie nie działa                                                                     | Urządzenie może wymagać naładowania. Należy podłączyć je do ładowania na co najmniej 24 godziny.                                                                                                                                                          |
| Urządzenie działa tylko kilka minut nawet po naładowaniu lub traci moc po krótkim czasie. | Może to oznaczać, że czas ładowania nie był wystarczająco długi, lub że żywotność baterii dobiegła końca. Należy podłączyć urządzenie do ładowania na 24 godziny. Jeśli naładowanie urządzenia nie rozwiąże problemu, należy skontaktować się z serwisem. |
| Ciśnienie strumienia wody jest niskie                                                     | Może to być spowodowane zabrudzeniem dyszy irygatora lub filtra, lub że dysza irygatora jest uszkodzona lub zdeformowana. Należy wyczyścić filtr lub wymienić dyszę irygatora.                                                                            |
| Woda nie wypływa z irygatora                                                              | Pojemnik na wodę jest pusty lub urządzenie jest zbyt mocno przechylone podczas użytkowania. Należy upewnić się, że pojemnik na wodę jest pełny i trzymać irygator w bardziej pionowej pozycji.                                                            |
| Drgania szczoteczki sonicznej są bardzo słabe                                             | Działanie szczoteczki sonicznej z założenia jest bardziej delikatne, jednakże może to oznaczać, że zastosowana zostaje zbyt duża siła podczas użytkowania urządzenia. Należy dociskać urządzenie do linii dziąseł i zębów z mniejszą siłą.                |

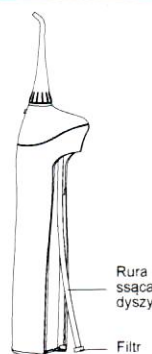

# SPECYFIKACJA

**Napięcie wejściowe:** 100 - 240V ~ 50/60Hz

**Moc:** 1.2 - 2.8W

IPX7



NALEŻY DOKŁADNIE PRZECZYTAĆ NINIEJSZĄ  
INSTRUKCJĘ I ZACHOWAĆ JĄ DO PÓŹNIEJSZEGO  
WYKORZYSTANIA.



TO URZĄDZENIE JEST PRZEZNACZONE WYŁĄCZNIE DO  
UŻYCIA W POMIESZCZENIACH.



TO URZĄDZENIE JEST ZGODNE Z OBOWIĄZUJĄCYMI  
PRZEPISAMI PRAWA UNIJNEGO.

## UTYLIZACJA



Dyrektywa numer 2012/19/UE w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE) weszła w życie, aby regulować przepisy dotyczące recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Podczas utylizacji urządzeń należy wykorzystać możliwie najlepsze dostępne techniki przetwarzania, odzysku i recyklingu w celu zminimalizowania negatywnego wpływu na środowisko, ograniczenia stosowania substancji niebezpiecznych oraz zminimalizowania liczby składowanych odpadów. Należy upewnić się, że nie działający sprzęt elektryczny i elektroniczny jest utylizowany zgodnie ze stosownymi wymaganiami lokalnych władz. Zużytego urządzenia nie należy wyrzucać wraz z normalnymi odpadami gospodarstwa domowego.

## OBSŁUGA TECHNICZNA

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości, należy skontaktować się z naszym działem obsługi klienta pod numerem telefonu: **01242 702345** lub za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: **online@riobeauty.com**

W celu zamówienia dodatkowych akcesoriów, należy odwiedzić stronę **www.riobeauty.com** lub skontaktować się z naszym lokalnym dystrybutorem.

## GWARANCJA

W celu zarejestrowania dwurocznej gwarancji online należy odwiedzić stronę:  
**www.riobeauty.com/warranty\_online.html**

Rio, Dezac oraz irygator i soniczna szczoteczka do zębów 31 Aquasonic  
są znakami handlowymi The Dezac Group Ltd.

© The Dezac Group Ltd 2018, PO Box 17, Cheltenham Spa, England GL53 7ET

**www.riobeauty.com**

1-IN-DCIT-PL/1.0