


Łucznik

Instrukcja Obsługi

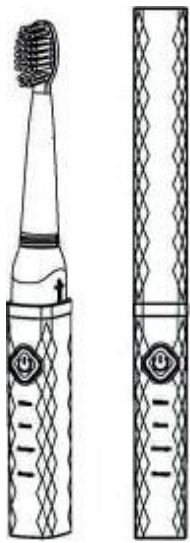

Soniczna szczoteczka do zębów Łucznik SG 516

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA:

- 1 szczoteczka SG 516 z akumulatorem litowo-jonowym
- 1 przewód USB
- 1 pokrywka
- 2 standardowe główki szczoteczek

ISTOTNE WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM NALEŻY PRZECZYTAĆ WSZYSTKIE INSTRUKCJE. INSTRUKCJE NALEŻY PRZECHOWYWAĆ W BEZPIECZNYM MIEJSCU I ZACHOWAĆ NA PRZYSZŁOŚĆ!

WAŻNE! Z racji na specyfikę ogniw o podstawie litowej, pamiętaj, aby nie zwlekać z naładowaniem szczoteczek. Jeśli podczas pracy szczoteczka zasygnalizuje konieczność ładowania, podepnij ją do ładowania natychmiast po zakończeniu mycia zębów. Brak ładowania może spowodować nieodwracalne uszkodzenie ogniw, w rezultacie którego szczoteczka przestanie działać.

OSTRZEŻENIA

Aby zmniejszyć ryzyko odniesienia urazów, w tym oparzeń, pożaru lub porażenia prądem:

1. NIE NALEŻY umieszczać żadnych komponentów produktu w zmywarce.
2. NIE NALEŻY używać części zamiennych innych niż zalecane przez producenta.
3. W razie wystąpienia jakichkolwiek uszkodzeń (główka szczoteczek, rączka) należy przerwać użytkowanie produktu.
4. Przewód należy trzymać z dala od źródeł ciepła.
5. Nie należy używać szczoteczek z uszkodzonym włosiem. Polamane lub wygięte włosie może oderwać się podczas szczotkowania. Główkę szczoteczek należy wymieniać co 3 miesiące lub częściej, w przypadku wcześniejszego zużycia. Nieprawidłowe czyszczenie może uszkodzić włosie. (patrz Czyszczenie)
6. SG 516 należy używać zgodnie z przeznaczeniem opisanym w niniejszej instrukcji. Produkt został stworzony wyłącznie do mycia zębów, dziąseł i języka. W razie wystąpienia bólu lub dyskomfortu, należy przerwać użytkowanie produktu i skontaktować się z dentystą lub lekarzem, gdyż może to być objaw innych dolegliwości zdrowotnych.
7. Sprzęt może być użytkowany przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat i przez osoby o obniżonych możliwościach fizycznych, umysłowych i osoby o braku doświadczenia i znajomości sprzętu, jeżeli zapewniony zostanie nadzór lub instruktaż odnośnie użytkowania sprzętu w bezpieczny sposób tak, aby związane z tym zagrożenia były zrozumiałe. Dzieci nie powinny bawić się sprzętem. Dzieci bez nadzoru nie powinny wykonywać czyszczenia i konserwacji sprzętu.
8. Aby zagwarantować właściwe korzystanie z produktu i zapobiec bawieniu się produktem, dzieci powinny korzystać z produktu wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej.
9. W razie używania pasty zawierającej nadtlenki, sodę oczyszczoną lub wodorowęglany, będące często składnikami wybielających past do zębów, należy po każdym użyciu obficie obmyć wodą główkę i rączkę szczoteczek. Zapobiega to pękaniu plastiku spowodowanego długotrwałą ekspozycją na ww. substancje chemiczne.
10. Przed użyciem upewnij się, że uszczelka zasilająca port ładowania została poprawnie zamknięta.
11. Unikaj doprowadzania do pełnego zanurzenia szczoteczek.

OSTRZEŻENIA MEDYCZNE

1. Przed użyciem SG 516 należy skontaktować się z lekarzem, aby upewnić się, że nie występują żadne przeciwwskazania medyczne.
2. Jeśli w ciągu ostatnich dwóch miesięcy przeszedłeś zabiegi stomatologiczne, przed użyciem produktu skonsultuj się z dentystą.
3. W razie obfitego krwawienia po użyciu produktu lub krwawień występujących tydzień po użyciu, należy skontaktować się z dentystą, ponieważ może być to objaw innych dolegliwości zdrowotnych.

ROZPOCZĘCIE UŻYTKOWANIA

PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM SZCZOTECZKI SG 516 NALEŻY JĄ NAŁADOWAĆ.

Pełne naładowanie szczoteczek z użyciem adaptera 250 mA trwa około 1 godziny. Użycie mocniejszego adaptera skracia czas ładowania. Nigdy nie pozostawiaj szczoteczek podłączonej do ładowania na dłużej niż 2 godzin.

Jak ładować:

1. Otwórz pokrywę USB na dolnej części szczoteczek
2. Podłącz końcówkę micro USB kabla USB do gniazdka szczoteczek
3. Podłącz standardową końcówkę USB kabla do adaptera USB lub innego portu USB.
4. Podłącz adapter do gniazdka sieciowego.

MONTAŻ GŁÓWKI SZCZOTECZKI

1. Nałóż główkę szczoteczek na szyjkę szczoteczek SG 516. Dopasuj znak na tyle główki szczoteczek do początku znaku na tyle szczoteczek tak, jak pokazano na rysunku
2. Obróć główkę szczoteczek w taki sposób, aby znak na tyle główki szczoteczek i znak na szczoteczce dopasowały się tak, jak pokazano na rysunku.

Dentyści rekomendują wymianę główki szczoteczek SG 516 co trzy miesiące w celu uzyskania optymalnych rezultatów.

SPOSÓB UŻYTKOWANIA

Instrukcje dotyczące szczotkowania:

1. Zmocz główkę szczoteczek i nałóż pastę do zębów.
2. Delikatnie oprzyj włosie szczoteczek o zęby pod kątem ok. 45° do linii dziąseł.
3. Wciśnij przycisk zasilania, aby aktywować wibracje soniczne.
4. Lekko dociśnij szczoteczkę SG 516, aby uzyskać optymalne rezultaty.
5. Podczas szczotkowania powoli i delikatnie przesuwaj do przodu i do tyłu główkę szczoteczek po zębach i dziąsłach. Upewnij się, że włosie dociera między zęby i masuje dziąsła.
6. Szczotkuj zęby na każdą ćwiartkę szczęki przez 30 sekund (metoda 4/30).
7. Po wyszczotkowaniu wszystkich ćwiartek, soniczne wibracje automatycznie ustaną po 2 minutach ciągłego używania, co jest czasem szczotkowania zalecanym przez dentyistów.
8. Aby zatrzymać szczotkowanie, wciśnij przycisk zasilania.

Uwaga: Szczoteczka SG 516 jest bezpieczna w użyciu przy aparatach i wypełnieniach (korony, licówki, mosty itd.). W przypadku używania przy aparacie ortodontycznym, główka szczoteczek zużyje się szybciej.



TRYBY SONIC

Podczas pierwszego użycia SG 516 automatycznie uruchomi się w trybie domyślnym. Kolejne włączenie będzie odbywało się w uprzednio wybranym trybie. Wybierz odpowiedni tryb wciskając przycisk Wyboru trybu W połączeniu z dołączonymi główkami, szczoteczka SG 516 oferuje trzy tryby dla różnych potrzeb jamy ustnej.

Wybierz jeden z poniższych:

- wybielanie (usuwa przebarwienia)
- czyszczenie (dla najlepszego czyszczenia codziennego)
- masaż (delikatny masaż dziąseł)

CZYSZCZENIE I PRZECHOWYWANIE

NIE NALEŻY MYĆ ŻADNYCH CZĘŚCI LUB KOMPONENTÓW W ZMYWARCE.

1. Po każdym użyciu oplucz główkę szczoteczek i włosie wodą.
2. Usuń nadmiar wody.
3. Raz w tygodniu oplucz złącze główki szczoteczek ciepłą wodą.

Czyszczenie szczoteczek:

1. Zdejmij główkę szczoteczek i oplucz złącze szczoteczek ciepłą wodą.
2. Użyj czystej ściereczki, aby wytrzeć całą szczoteczkę.

Przechowywanie:

Jeśli nie planujesz używać szczoteczek SG 516 przez dłuższy czas, odłącz ją od zasilania, wyczyść i przechowuj w chłodnym i suchym miejscu z dala od promieni słonecznych.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Szczoteczka SG 516 nie włącza się:

Upewnij się, że szczoteczka jest naładowana lub przeprowadź ładowanie zgodnie z instrukcją. (patrz Rozpoczęcie użytkowania > Jak ładować)

Uczucie mrowienia/łaskotania podczas szczotkowania:

Możesz doświadczyć uczucia mrowienia/łaskotania wynikające z wibracji sonicznych podczas pierwszego użycia szczoteczek SG 516. Uczucie to z ustąpi w miarę oswojania się z wibracjami.

Główka szczoteczek stuką o zęby podczas szczotkowania:

Utrzymuj główkę szczoteczek pod niewielkim kątem do linii dziąseł. Dopasuj kąt w taki sposób, aby główka szczoteczek nie dotykała powierzchni zębów.

Wibracje soniczne wydają się być słabe:

Naładuj szczoteczkę. Konieczna może być też wymiana główki na nową. Każdy tryb pracy szczoteczek charakteryzuje się innymi wibracjami.



INFORMACJA o postępowaniu ze użytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym

W związku z obowiązkiem informacyjnym wynikającym z wprowadzenia ustawy o użytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym informujemy, że:

1. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny nie może być umieszczany z innymi odpadami. Sprzęt taki powinien być zbierany selektywnie o czym przypomina załączone oznakowanie (przekreślony, kołowy kontener na odpady).

2. Nieprzestrzeganie tej zasady może, przy nieprawidłowej utylizacji zużytego sprzętu, stanowić zagrożenie dla środowiska i zdrowia ludzi, wynikające z obecności w sprzęcie składników niebezpiecznych (takich jak np. okablowanie elektryczne, tworzywa sztuczne, baterie, wyłączniki, płytki obwodów drukowanych, itp.). Aby uniknąć takiego zagrożenia, składniki takie powinny zostać zebrane i w odpowiedni sposób przetworzone przez wyspecjalizowane firmy.

3. Ta instrukcja zawiera informacje o wszystkich podstawowych parametrach urządzenia. Gospodarstwo domowe spełnia ważną rolę w przyczynianiu się do ponownego użycia i odzysku, w tym recyklingu, zużytego sprzętu. Odbywa się to w szczególności poprzez uczestnictwo w systemie zbierania zużytych urządzeń.

Informujemy, że zużyty sprzęt możecie Państwo oddać bezpłatnie w sklepie, w którym został on zakupiony. Samodzielne demontowanie zużytego sprzętu jest niedopuszczalne. Ze sklepu zużyty sprzęt trafi następnie do wyspecjalizowanej firmy zajmującej się przetwarzaniem, odzyskiem (w tym recyklingiem) i unieszkodliwieniem składników niebezpiecznych.

4. Produkt ma zasilanie akumulatorowe (Akumulator litowo-jonowy DC 3,7 V, 260 mAh). Zużyte baterie/akumulatory przenośne należy przekazać do zbierającego zużyte baterie lub zużyte akumulatory lub do miejsca odbioru, których wykaz znajdują Państwo w Internecie. Proszę pamiętać, iż nie wolno umieszczać zużytych baterii i akumulatorów razem z innymi odpadami w tym samym pojemniku.

IMPORTER:
ASPA Electro Sp. z o.o.
ul. Miechowity 1, 51-162 Wrocław

ŻYCZYMY SATYSFAKCJI Z UŻYTKOWANIA NINIEJSZEGO WYROBU.

Importer deklaruje, że wyrób został wyprodukowany zgodnie z Dyrektywą o Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC 2014/30/EU, Dyrektywą ws. ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym ROHS 2011/65/EU.



KARTA GWARANCYJNA

Soniczna szczoteczka do zębów Łucznik SG 516

Szanowny Kliencie, zapewniamy o sprawnym działaniu zakupionego urządzenia pod warunkiem użytkowania go zgodnie z instrukcją obsługi. Urządzenie objęte jest 24-miesięczną gwarancją liczoną od daty zakupu.

- 1) Gwarancja na sprzedany towar nie wyłącza, nie ogranicza i nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.
- 2) Urządzenie przeznaczone jest wyłącznie do eksploatacji w warunkach indywidualnego gospodarstwa domowego.
- 3) Wszelkie usterki urządzenia wynikłe z wad materiałowych lub wadliwego wykonania stwierdzone w okresie gwarancji będą usuwane bezpłatnie w terminie 14 dni od daty dostarczenia urządzenia z kartą gwarancyjną do miejsca zakupu poprzez wymianę wadliwych części lub (jeśli uznamy za stosowne) wymianę całego urządzenia na nowe. Okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas naprawy.
- 4) W przypadku wymiany urządzenia na nowe potrąca się równowartość brakujących lub uszkodzonych przez Kupującego elementów oraz ich wymiany.
- 5) Jeżeli wymiana urządzenia na nowe jest niemożliwa, kupującemu przysługuje prawo do zwrotu zapłaconej kwoty.
- 6) Usługa gwarancyjna jest świadczona wyłącznie po dostarczeniu kompletnego urządzenia wraz z dowodem zakupu (paragonu, faktury itp.) oraz kartą gwarancyjną do sprzedawcy, w miarę możliwości w oryginalnym opakowaniu lub innym odpowiednim dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem. W razie braku kompletnego opakowania fabrycznego, ryzyko uszkodzenia urządzenia podczas transportu do i z miejsca zakupu ponosi reklamujący.
- 7) Naprawa gwarancyjna nie obejmuje czynności przewidzianych w instrukcji obsługi, do wykonania których zobowiązany jest kupujący we własnym zakresie i na własny koszt.
- 8) Gwarancją nie są objęte uszkodzenia mechaniczne oraz wady i uszkodzenia urządzenia powstałe na skutek:
 - A) transportu i przeladunku,
 - B) niewłaściwego użytkowania, niedbałości kupującego lub stosowania urządzenia niezgodnie z instrukcją obsługi albo przepisami bezpieczeństwa,
 - C) pożaru, powodzi, uderzenia pioruna czy też innych klęsk żywiołowych, nieprawidłowego napięcia zasilającego, normalnego zużycia w eksploatacji, czy też innych czynników zewnętrznych powodujących np. korozję czy plamy,
 - D) naruszenia plomb gwarancyjnych lub jakiegokolwiek innej ingerencji osób innych niż serwis (w tym również Kupującego).
- 9) Gwarancją nie są objęte również urządzenia, w których Kartę Gwarancyjną w jakimkolwiek sposób zmieniono, zamazano, usunięto lub zatarto.
- 10) Gwarancja nie ma zastosowania, jeśli na Karcie Gwarancyjnej nie ma daty sprzedaży, pieczętki punktu sprzedaży.
- 11) Gwarancja obowiązuje jedynie w zakresie w niej określonym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i dotyczy wyłącznie urządzeń marki Łucznik wprowadzonych do obrotu przez firmę Aspa Electro Sp. z o.o. na terytorium Polski.

IMPORTER:
ASPA Electro Sp. z o.o.
ul. Miechowity 1, 51-162 Wrocław

MAGAZYN GŁÓWNY/SERVIS:
ASPA Electro sp. z o.o.
ul. Bierutowa 81 bud. A
51-317 Wrocław
tel./fax: +48 71 722 52 88
e-mail: reklamacje@aspa.pl

.....
Data sprzedaży

.....
Pieczęćka sprzedawcy