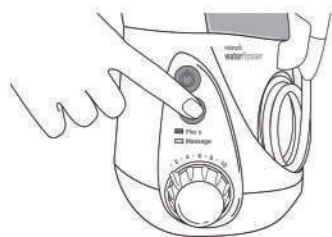


TRYB MASAŻU HYDRO-PULSE

Masaż hydro-Pulse oferuje pulsację wody zaprojektowaną w celu zwiększenia stymulacji dziąseł. Aby uzyskać najlepsze rezultaty, należy używać urządzenia zgodnie z instrukcją. Po użyciu trybu Floss przez 1 minutę, należy przełączyć urządzenie w tryb masażu, dostosować ciśnienie, i skierować strumień wody na dziąsła i masować dziąsła i całą jamę ustną. Aby określić, w którym trybie jest urządzenie podczas gdy jest wyłączone, wystarczy nacisnąć przycisk MODE selector button wówczas dioda LED wskaże aktualny tryb. Aby zmienić tryb, ponownie naciśnij przycisk MODE selector button. Można także zmienić tryb Floss/Massage gdy urządzenie jest włączone.

Po zakończeniu irygacji należy wyłączyć zasilanie. Opróżnić zbiornik z cieczy.


UWAGA: Jeśli używana był płyn lub płukanka do jamy ustnej Patrz. Czyszczenie i Pięknogacja

**ZASTOSOWANIE KOŃCÓWEK**


The Pik Pocket®-Końcówka podziąsłowa została specjalnie zaprojektowana aby dostarczać wodę lub antybakteryjne płyny w głąb kieszonek przyzębnych. Aby korzystać z **Pik Pocket®-końcówki** podziąsłowej należy, ustawić tryb Floss i najniższe ciśnienie ustawić przełącznik OFF na rączce/uchwycie. Umieść końcówkę przed zębem pod kątem 45 stopni i delikatnie umieścić miękką część końcówki w kieszeni podziąsłowej. Włączyć zasilanie, ustawić przełącznikiem na uchwycie/rączce ON

**Tongue Cleaner - Końcówka do czyszczenia języka**

Ustawić przełącznik na rączce/uchwycie OFF. Ustawić na najniższe ciśnienie, końcówkę umieścić na środku języka włączyć przycisk zasilania znajdujący się na podstawie urządzenia i ustawić przełącznikiem na rączce/uchwycie ON, przeciągnąć końcówkę po języku do przodu z lekkim naciskiem, można zwiększyć ciśnienie.

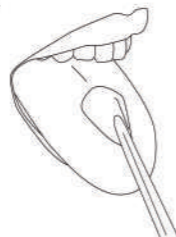**Orthodontic Tip - Końcówka ortodontyczna**

Delikatnie przesuwaj końcówkę wzdłuż dziąseł, zatrzymując się na krótko i lekko szczotkować między zębami i wokół zamków ortodontycznych.

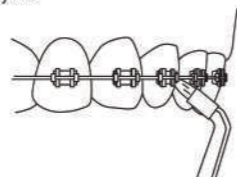**Toothbrush Tip - Końcówka szczoteczki**

Umieścić główkę szczoteczki na zębach i linii dziąseł, można używać z pastą lub bez pasty do zębów, ustawić tryb Massage, (włosie nie powinno się zginać), wykonywać bardzo krótkie pociągnięcia -tak jak przy użyciu szczoteczki manualnej.

**Plaque Seeker®Tip - Końcówka do koron, mostów, implantów**

Umieść końcówkę blisko zębów, tak aby włosie delikatnie dotykały zęby, delikatnie przesuwaj końcówkę wzdłuż linii dziąseł, zatrzymując na krótko między zębami, delikatnie myć, umożliwiając swobodny przepływ wody między zębami.

**SERWIS I GWARANCJA 12 miesięcy**

POLKARD Bis Sp. z o.o. gwarantuje pierwszemu nabywcy nowego urządzenia, że jest ono wolne od wad wykonania i materiałowych w ciągu 1-go roku od daty zakupu urządzenia. Należy zachować i przedłożyć dowodu zakupu urządzenia oraz prawidłowo wypełnioną gwarancję w oryginale. POLKARD Bis Sp. z o.o. naprawi lub wymieni jakkolwiek część urządzenia, która w naszej opinii jest wadliwa zakładając, iż urządzenie było użytkowane zgodnie z jego przeznaczeniem, nie zostało celowo uszkodzone, ani naprawiane poza autoryzowanymi punktami serwisowymi i było używane zgodnie z powyższą instrukcją obsługi. Gwarancja nie obejmuje końcówek irygatora.

W przypadku stwierdzenia uszkodzenia lub niewłaściwego działania, należy skontaktować się z serwisem: **POLKARD BIS Sp. z o.o.** ul. Marka Kotańskiego 2, 10-166 Olsztyn, tel/fax 089/5338777, tel. 089/5334850 w celu naprawy lub wymiany urządzenia. Koszty dostarczenia urządzenia do naprawy pokrywa nabywca natomiast zwrot urządzenia po naprawie gwarancyjnej odbywa się na koszt serwisu.

Jeżeli urządzenie zostanie zarejestrowane w ciągu 14 dni od daty zakupu na stronie, rejestracja.polkardbis.pl, zostanie ono objęte 2 letnią gwarancją.

Producent:

waterpik®

1730 East prospect Road
Fort Collins, CO 80553-0001
USA

Dystrybucja w Polsce:



Polkard bis

Polkard Bis Sp. z o.o.
Ul. Marka Kotańskiego 2
10-166 Olsztyn
tel/fax. 089/5338777
www.polkardbis.pl
e-mail: biuro@polkardbis.pl


Data zakupu:

Nr Seryjny:

Pieczczęć i podpis sprzedawcy

waterpik®

Waterpik® Water Flosser Model WP-660 Irygator

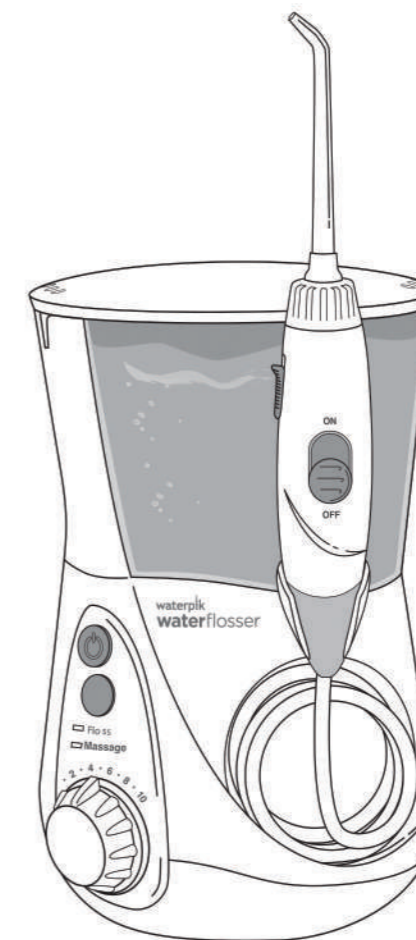

.....
www.waterpik.com

WAŻNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

OPIS PRODUKTU

PRZYGOTOWANIE

ZASTOSOWANIE, KOŃCÓWKI

SERWIS I GWARANCJA

str 2

str 3

str 4

str 5

str 6

WAŻNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Podczas korzystania z produktów elektrycznych, w szczególności w pobliżu dzieci, należy zawsze przestrzegać podstawowych środków ostrożności, w tym następujących:

PRZECZYTAJ WSZYSTKIE INSTRUKCJE PRZED KORZYSTANIEM Z PRODUKTU.

NIEBEZPIECZEŃSTWO:

Aby zmniejszyć ryzyko porażenia prądem:

- Zawsze wyciągnij wtyczkę produktu z kontaktu po zakończeniu korzystania.

- Nie dotykaj wtyczki mokrymi rękoma.

- Nie pozwól, aby produkt znalazł się w wodzie lub innym płynie.
- Sprawdź czy przewód zasilania nie jest uszkodzony.

UWAGA:

Aby zmniejszyć ryzyko oparzeń, porażenia prądem, pożaru i obrażeń ciała:


- Nie podłączaj urządzenia do systemu napięcia odmiennego od systemu napięcia określonego na urządzeniu bądź ładowarce.
- Nie korzystaj z produktu, jeżeli ma uszkodzony kabel lub wtyczkę, jeżeli nie działa właściwie, jeżeli upuszczono lub uszkodzono go bądź wpadł do wody. Skontaktuj się z Waterpik International, Inc. albo najbliższym dystrybutorem, którego można znaleźć na stronie internetowej www.waterpik.com/intl.
- Nie kieruj wody pod język, do ucha, nosa ani w inne delikatne miejsca. Produkt jest w stanie wytworzyć ciśnienie mogące poważnie zranić te miejsca.
- Korzystaj z produktu wyłącznie zgodnie z niniejszą instrukcją i zaleceniami Twojego stomatologa.
- Korzystaj wyłącznie z końcówek i akcesoriów zalecanych przez Water Pik, Inc.
- Nie upuszczaj ani nie wprowadzaj żadnych ciał obcych w otwory lub wężyk.





- Trzymaj kabel zasilania z dala od gorących powierzchni.
- Nie korzystaj na otwartym powietrzu ani w miejscach, gdzie stosuje się produkty w aerozolu (sprayu) lub podaje się tlen.
- Nie korzystaj z jodyny, środka wybielającego ani nierozpuszczalnych w wodzie skoncentrowanych olejków eterycznych razem z produktem. Korzystanie z nich może pogorszyć działanie produktu i zmniejszyć jego trwałość.
- Usuń wszelkie ozdoby nazębne przed korzystaniem z produktu.

- Nie używaj produktu, jeżeli masz otwartą ranę na języku lub w jamie ustnej.

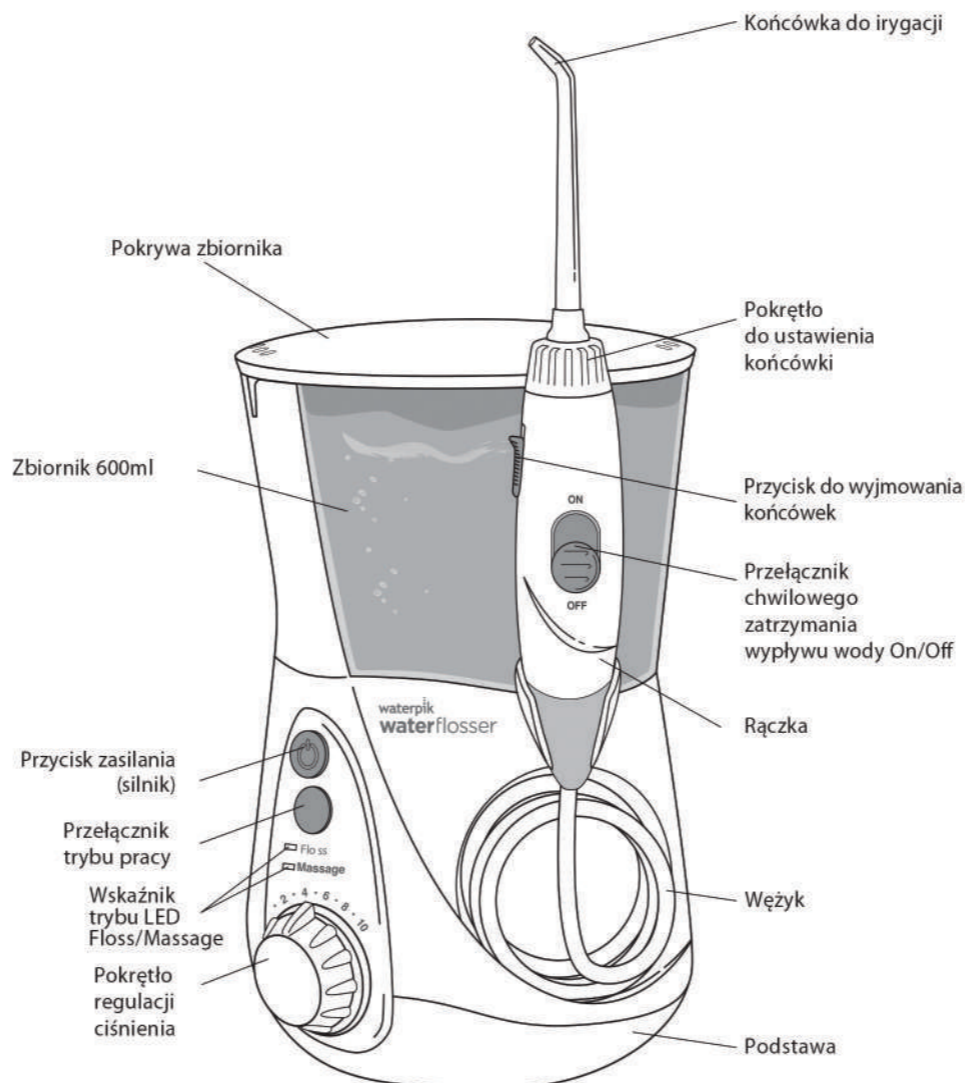- Jeżeli lekarz albo kardiolog zalecił Ci uzyskać premedykację antybiotykową przed zabiegami stomatologicznymi, powinieneś/ powinnas skonsultować się ze stomatologiem przed rozpoczęciem korzystania z niniejszego urządzenia i innych środków higieny ustnej.
- Jeżeli końcówka Pik Pocket® (nie jest dołączana do każdego modelu) oddzieli się z jakiegokolwiek powodu od trzonka, wyrzuć końcówkę i trzonek oraz wymień na nową końcówkę Pik Pocket®.
- Nie korzystaj z produktu dłużej niż pięć minut w ciągu każdego okresu dwóch godzin.
- **Dokładnie poucz i nadzoruj dzieci w wieku co najmniej 8 lat i osoby o specjalnych potrzebach przy właściwym korzystaniu z produktu.**
 - **Należy nadzorować dzieci, aby upewnić się, że nie bawią się urządzeniem.**
- Niniejsze urządzenie nie zawiera części obsługiwanych przez konsumenta i nie wymaga konserwacji.
- Napełniaj zbiornik wyłącznie ciepłą wodą albo innym roztworem zalecanym przez stomatologów.

ZACHOWAJ NINIEJSZĄ INSTRUKCJĘ



| Wymieniaj co 3 miesiące | |
|---|---|
| Końcówka ortodontyczna | NAJLEPSZA DO |
|  | <input checked="" type="checkbox"/> Aparaty korekcyjne <input checked="" type="checkbox"/> Ogólnego przeznaczenia |
| Końcówka Pik Pocket® | NAJLEPSZA DO |
|  | <input checked="" type="checkbox"/> Kieszonki przyzębne <input checked="" type="checkbox"/> Rozwidlenia |
| Końcówka Plaque Seeker® | NAJLEPSZA DO |
|  | <input checked="" type="checkbox"/> Implanty <input checked="" type="checkbox"/> Korony <input checked="" type="checkbox"/> Mosty <input checked="" type="checkbox"/> Ogólnego przeznaczenia |
| Końcówka – szczoteczka | NAJLEPSZA DO |
|  | <input checked="" type="checkbox"/> Ogólnego przeznaczenia |

NOTE: All tips not included in all models.

Zasilanie urządzenia

Podłącz przewód do gniazda elektrycznego. Jeżeli gniazdo jest sterowane wyłącznikiem ściennym, upewnij się, że jest włączone.

Przygotowanie i stosowanie

Szybki przewodnik po instrukcji


Jednominutowy Timer / 30 sekund Stymulator (Tryb Floss tylko)

Urządzenie stworzy krótką pauzę na 30-sekund, aby pamiętać, żeby przenieść Strumień do kolejnej części jamy ustnej i kolejna krótka przerwa po 1 minucie urządzenie zasygnalizuje, że został osiągnięty zalecany czas czyszczenia. Urządzenie będzie kontynuować pracę bez przerw dopóki urządzenie zostanie wyłączone. W zależności od ustawienia ciśnienia, trochę wodę pozostanie w zbiorniku po upływie 1 minuty. Timer może być wyłączony, w zależności od potrzeby aby wyłączyć należy:

1. Podczas gdy urządzenie jest wyłączone, naciśnij jeden raz przycisk - Mode selector button jedna z diod LED powinna się zaświecić.

Wymieniaj co 6 miesięcy

| | |
|---|---|
| Końcówka klasyczna | NAJLEPSZA DO |
|  | <input checked="" type="checkbox"/> Ogólnego przeznaczenia |
| Końcówka do czyszczenia języka | NAJLEPSZA DO |
|  | <input checked="" type="checkbox"/> Bardziej świeżego oddechu |

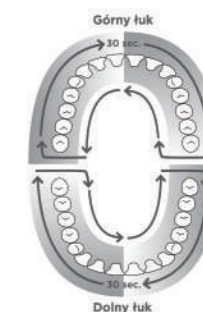

2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk Mode selector button przez około 3-sekundy, aż dioda Massage zacznie migać. Timer jest wyłączona.

Jeśli chcesz ponownie aktywować timer:

1. Podczas gdy urządzenie jest wyłączone, naciśnij jeden raz przycisk Mode selector button jedna z diod LED powinna się zaświecić.

2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk MODE selector button przez około 3-sekundy, aż zacznie migać dioda Floss. Timer jest teraz aktywny lub wyjąć wtyczkę urządzenia z gniazda, aby przywrócić ustawienia fabryczne.