


Ładowanie szczoteczki Sensonic® Professional Plus

Przed pierwszym użyciem szczoteczka musi być ładowana 24 godziny.


Gdy urządzenie będzie całkowicie naładowane to wszystkie trzy wskaźniki będą zapalone. W pełni naładowana szczoteczka może działać około 1 tygodnia (2 minuty mycia każdego dnia). Jeśli szczoteczka ma być przechowywana przez dłuższy czas (sześć miesięcy lub więcej) to należy upewnić się, że jest całkowicie naładowana.

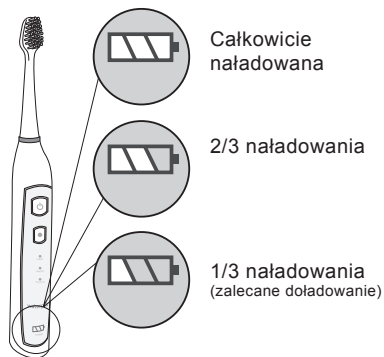

Całkowicie naładowana

2/3 naładowania

1/3 naładowania (zalecane doładowanie)

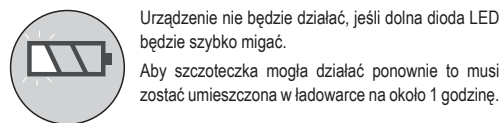

Urządzenie nie będzie działać, jeśli dolna dioda LED będzie szybko migać.

Aby szczoteczka mogła działać ponownie to musi zostać umieszczona w ładowarce na około 1 godzinę.

Szczotkowanie szczoteczką soniczną

- Nasunąć głowicę szczoteczki na uchwyt i zamocować.
- Umieścić głowicę szczoteczki w ustach przed załączeniem.
- Wcisnąć przycisk raz dla niskiej prędkości i dwukrotnie dla wysokiej.
- Przytrzymując przycisk wł./wył. przy położeniu niskiej prędkości spowoduje wyłączenie szczoteczki.
- Dla uzyskania najlepszych wyników należy ustawić szczoteczkę pod kątem 45 stopni do linii dziąsła.
- Lekko docisnąć wykonując niewielkie, powolne ruchy w przód i w tył na jednym lub dwóch zębach jednocześnie.




kolejnej ćwiartki zębów.

- 2-minutowy timer:** Szczoteczka będzie automatycznie wyłączać się po dwóch minutach działania.

Tryby pracy/Mode

Wybrać tryb pracy przez naciśnięcie przycisku, aż dioda led wskaże żądaną tryb:

- clean/czyszczenie,**
 - whiten/wybielanie,**
 - massage/masaż**
- następnie nacisnąć przycisk **ON/OFF**

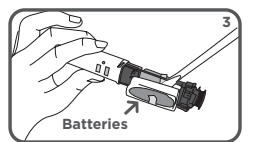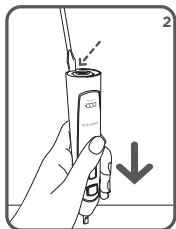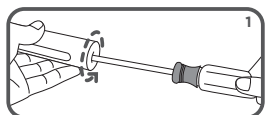


Wymiana bateii


- Użyć śrubokręta do odkręcenia śruby pokrywy baterii
- Trzymać rączkę do góry nogami nacisnąć nasadkę i zwolnić dwa zaczepy wewnątrz rączki za pomocą płaskiego śrubokrętu.
- Włożyć śrubokręt obok połączeń baterii i odzielić od płytki drukowanej obwodu elektronicznego
- Recyklingować lub utylizować baterię prawidłowo.

Czyszczenie

- Po każdym użyciu, wyłączyć urządzenie, wyjąć głowicę szczotki z rączki i spłukać główkę szczoteczki pod bieżącą wodą.
- Przetrzeć rączkę do sucha po każdym użyciu.

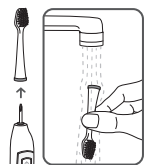


UŻYWANIE KOŃCÓWEK

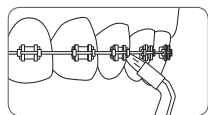


Końcówka do aparatów ortodontycznych

Aby użyć końcówkę ortodontyczną należy ostrożnie przesunąć ją wzdłuż linii dziąsła trzymając się na chwilę, aby delikatnie szczotkować obszar pomiędzy zębami oraz w okolicy aparatu a następnie przejść do następnego zęba.

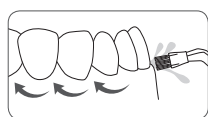

Końcówka Plaque Seeker®

Aby użyć końcówki Plaque Seeker® umieścić końcówkę blisko zębów tak, aby włosie delikatnie dotykało zęby. Delikatnie przesunąć końcówkę wzdłuż linii dziąsła zatrzymując się pomiędzy zębami, aby delikatnie szczotkować i umożliwić wodzie przepłynięcie pomiędzy zębami.

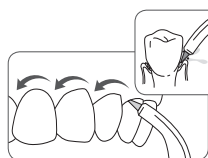


Końcówka poddziąsłowa Pik Pocket®

Końcówka Pik Pocket® jest zaprojektowana do dostarczania wody lub roztworów antybakteryjnych w głąb kieszonek przy zębnych. Aby użyć końcówkę Pik Pocket® ustaw najniższą wartość ciśnienia. Umieść miękką końcówkę pod kątem 45 stopni delikatnie w dziąsła (kieszonke dziąsłowej).




Końcówka do czyszczenia języka

Ustaw najniższą wartość ciśnienia, umieść końcówkę pośrodku języka, pociągnij do przodu z lekkim naciskiem. Zwiększ ciśnienie jakiej Ty preferujesz.

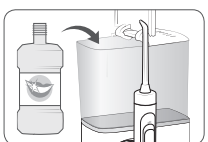

Używanie płynu do płukania jamy ustnej i innych roztworów

Urządzenie Waterpik® Water Flosser może być używane do podawania roztworów do płukania jamy ustnej i antybakteryjnych. Po użyciu specjalnego roztworu należy przepłukać urządzenie, aby zapobiec zatkaniu częściowo napełniając zbiornik ciepłą wodą i uruchomienie go z końcówką skierowaną do zlewu aż zbiornik zostanie opróżniony.

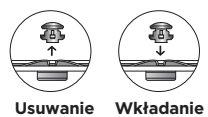

Usuwanie Wkładanie



Czyszczenie

Przed czyszczeniem należy odłączyć urządzenie od gniazdka elektrycznego. Wyczyścić produkt, gdy zajdzie taka konieczność za pomocą miękkiej szmatki i delikatnego nieściernego środka czyszczącego. Dla ułatwienia czyszczenia zbiornik wody może zostać zdemontowany a górna część może być myta w zmywarce.

UWAGA: Usunąć zawór zbiornika przed umieszczeniem go w zmywarce.

Usuwanie osadów twardej wody

Dodać 2 łyżki stołowe białego octu na pełny zbiornik ciepłej wody. Ustawić pokrętko w położeniu „HIGH” (górne), skierować uchwyt i końcówkę do zlewu. WŁĄCZYĆ urządzenie (I) i pozwolić pracować do opróżnienia zbiornika. Przemycać powtórnie napełniając zbiornik do pełna czystą i ciepłą wodą.

Wyciek

Końcówki zamiennie/nasadki mogą być zakupione od lokalnego dystrybutora, (Patrz str 8). W przypadku wycieku ze zbiornika należy upewnić się, że zawór jest we właściwym położeniu lub skontaktować się z lokalnym dystrybutorem w celu pozyskania zaworu zamiennego.

Konserwacja serwisowa

Irygatory Water Flosser Waterpik® nie posiadają części, które mogłyby być serwisowane przez użytkownika i nie wymagają okresowej konserwacji. W przypadku wszelkich potrzeb serwisowych należy skontaktować się z lokalnym dystrybutorem, (Patrz str. 8)

Proszę nie wysłać produktu do biur firmy Waterpik International, Inc. gdyż opóźni to wykonanie usługi.

SERWIS I GWARANCJA 12 miesięcy

POLKARD Bis Sp. z o.o. gwarantuje pierwszemu nabywcy nowego urządzenia, że jest ono wolne od wad wykonania i materiałowych w ciągu 1-go roku od daty zakupu urządzenia. Należy zachować i przedłożyć dowodu zakupu urządzenia oraz prawidłowo wypełnioną gwarancję w oryginale. **POLKARD Bis Sp. z o.o.** naprawi lub wymieni jakąkolwiek część urządzenia, która w naszej opinii jest wadliwa zakładając, iż urządzenie było użytkowane zgodnie z jego przeznaczeniem, nie zostało celowo uszkodzone, ani naprawiane poza autoryzowanymi punktami serwisowymi i było używane zgodnie z powyższą instrukcją obsługi. Gwarancja nie obejmuje końcówek irygatora.

W przypadku stwierdzenia uszkodzenia lub niewłaściwego działania, należy skontaktować się z serwisem: **POLKARD BIS Sp. z o.o.** ul. M.Kotańskiego 2, 10- 166 Olsztyn, tel/fax 089/5338777, tel. 089/5334850 w celu naprawy lub wymiany urządzenia. Koszty dostarczenia urządzenia do naprawy pokrywa nabywca natomiast zwrot urządzenia po naprawie gwarancyjnej odbywa się na koszt serwisu.

Jeżeli urządzenie zostanie zarejestrowane w ciągu 14 dni od daty zakupu na stronie: rejestracja.polkardbis.pl, zostanie objęte 2 letnią gwaracją.

Producent:

waterpik®

1730 East prospect Road
Fort Collins, CO 80553-0001
USA

Dystrybucja w Polsce:



Polkard bis

Polkard Bis Sp. z o.o.
Ul. Żołnierska 41 A
10-560 Olsztyn
tel/fax. 089/5338777
www.polkardbis.pl
e-mail: **biuro@polkardbis.pl**

Data zakupu:


Nr Seryjny:

Pieczęć i podpis sprzedawcy

.....

waterpik®

Waterpik® Kompletna Ochrona Model CC-01 | CC-02

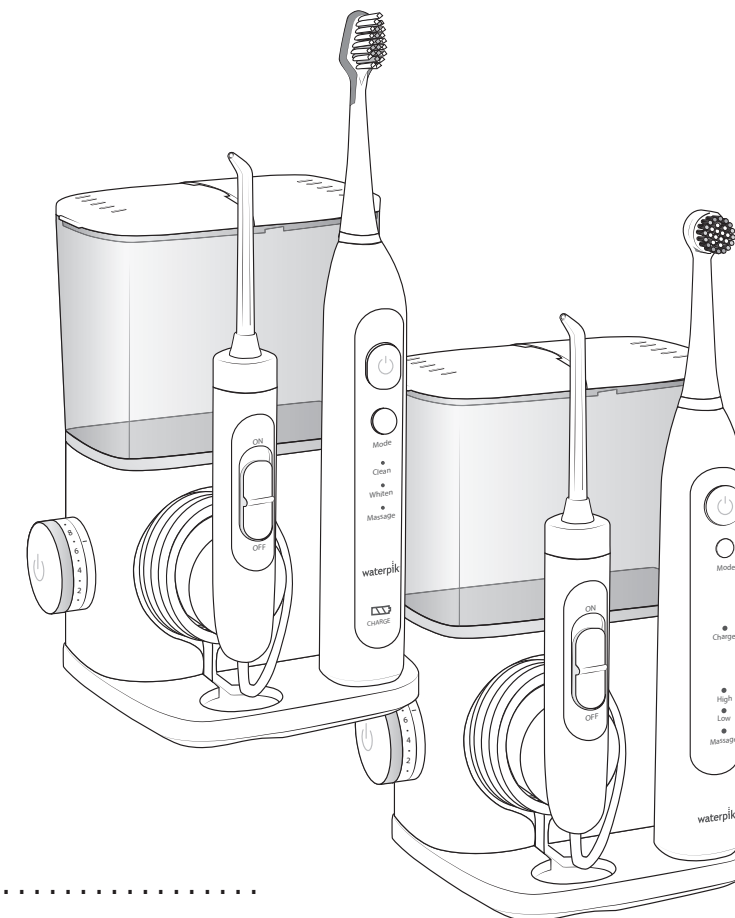

.....
www.waterpik.com

WAŻNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI	str 2
OPIS PRODUKTU	str 3
PRZYGOTOWANIE - ROZPOCZĘCIE UŻYTKOWANIA, UŻYWANIE KOŃCÓWEK, KONSERWACJA	str 4
PIELĘGNACJA SZCZOTECZKI OSCYLACYJNEJ	str 5
PIELĘGNACJA SZCZOTECZKI SONICZNEJ	str 6
UŻYWANIE KOŃCÓWEK, KONSERWACJA	str 7
SERWIS I GWARANCJA	str 8

WAŻNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI


Używając produktów elektrycznych, w szczególności w obecności dzieci, należy zawsze przestrzegać podstawowych środków ostrożności łącznie z:

PRZECZYTANIEM WSZYSTKICH INSTRUKCJI PRZED UŻYCIEM.

NIEBEZPIECZEŃSTWO:

Aby zmniejszyć zagrożenie porażenia prądem elektrycznym:

- Nie obsługiwać wtyczki mokrymi rękami.
- Nie umieszczać ani nie wkładać do wody lub innych cieczy.
- Nie używać podczas kąpieli.
- Nie umieszczać ani nie przechowywać produktu w miejscu, gdzie może spaść lub zostać wciągniętym do wanny lub zlewu.
- Nie sięgać po urządzenie, które spadło do wody.
- Natychmiastowo odłączyć wtyczkę.
- Sprawdzić czy przewód zasilania nie jest uszkodzony przed pierwszym użyciem i podczas eksploatacji urządzenia.

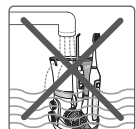

OSTRZEŻENIE:

Aby zmniejszyć zagrożenie oparzeniami, porażeniem prądem elektrycznym, pożarem lub urazem osób:


- Nie podpinąć opisanego urządzenia do systemu o napięciu innym niż określone na urządzeniu.
- Nie używać urządzenia, jeśli jego przewód lub wtyczka są uszkodzone, jeśli nie działa prawidłowo, jeśli zostało uszkodzone lub uszkodzone lub wpadło do wody. Skontaktować się z lokalnym dystrybutorem (patrz str.8).
- Nie kierować wody pod język, do uszu, nosa lub innych delikatnych stref. Produkt może wytworzyć ciśnienia, które mogą spowodować poważne uszkodzenia tych stref.
- Używać produkt wyłącznie w sposób podany w niniejszych instrukcjach lub jak zaleca stomatolog.
- Używać wyłącznie końcówek lub akcesoriów zalecanych przez Water Pik, Inc.

- Nie upuszczać ani nie umieszczać żadnych obiektów w otworze lub węży.
- Trzymać przewód elektryczny z daleka od ogrzewanych powierzchni.
- Nie używać irygatora Water Flosser lub Szczoteczki Sonicznej na zewnątrz pomieszczeń ani w miejscach gdzie używane są produkty w aerozolu lub gdzie podawany jest tlen.
- Nie używać jodu, wybielacza lub stężonych olejków eterycznych nierozpuszczalnych w wodzie. Użycie wspomnianych produktów może zakłócić działanie urządzenia i skrócić jego działanie.
- Przed użyciem urządzenia zdjąć biżuterię znajdującą się w jamie ustnej.
- Nie używać irygatora Water Flosser ani Szczoteczki Sonicznej, jeśli użytkownik ma otwarte rany na języku lub w ustach.
- Jeśli lekarz lub kardiolog zalecił przyjmowanie antybiotyków przed zabiegami dentystycznymi to należy zasięgnąć porady dentysty przed użyciem opisywanego urządzenia lub każdego innego środka higieny ustnej.
- Produkt jest zgodny z normami bezpieczeństwa dla urządzeń elektromagnetycznych. Jeśli użytkownik posiada rozrusznik serca lub inne wszczone urządzenie zawierające magnes bądź elektronikę to należy skontaktować się z lekarzem lub producentem urządzenia przed rozpoczęciem użytkowania Szczoteczki Sonicznej.
- Jeśli końcówka Pik Pocket® (niedolączona we wszystkich modelach) oddzieli się sama od trzonka z jakiegokolwiek powodu to należy wyrzucić ją wraz z trzonkiem i zastąpić nową końcówką Pik Pocket®.
- Nie używać produktu dłużej niż przez 5 minut w ciągu 2 godzin.
- Urządzenie nie posiada części, które użytkownik mógłby sam serwisować i nie wymagają one konserwacji. Nie próbować otwierać żadnego elementu poza wymianą baterii. Patrz strona 10-11 „Wymywanie baterii”.
- Używanie past do zębów zawierających nadtlenek, wodorowęglan sodu, ściernie lub chemiczne środki czyszczące.
- W przypadku stosowania produktu przez dzieci w wieku 8 lat i starsze bądź też osoby o specjalnych wymaganiach należy je dokładnie poinstruować i nadzorować.
- Dzieci muszą być nadzorowane dla zapewnienia, że nie będą się bawić urządzeniem.
- Urządzenie nie posiada części, które użytkownik mógłby sam serwisować i nie wymagają one konserwacji.
- Napełniać zbiornik wyłącznie ciepłą wodą lub roztworem zalecanym przez stomatologów.

ZACHOWAĆ NINIEJSZE INSTRUKCJE.


IRYGATOR

1. POKRYWA ZBIORNIKA
2. ZBIORNIK
3. WĘŻYK
4. POKRĘTŁO REGULACJI CIŚNIENIA
5. PRZYCIŚK ZASILANIA (NACIŚNIJ ABY WŁĄCZYĆ /WYŁĄCZYĆ URZĄDZENIE)
6. PRZEWÓD ZASILAJĄCY
7. UCHWYT MAGNETYCZNY
8. KOŃCÓWKA
9. PRZEŁĄCZNIK WYSUWANIA KOŃCÓWKI
10. PRZEŁĄCZNIK WŁĄCZANIA /WYŁĄCZANIA WODY
11. STOJAK I ŁADOWARKA SZCZOTECZKI
12. PODSTAWA URZĄDZENIA

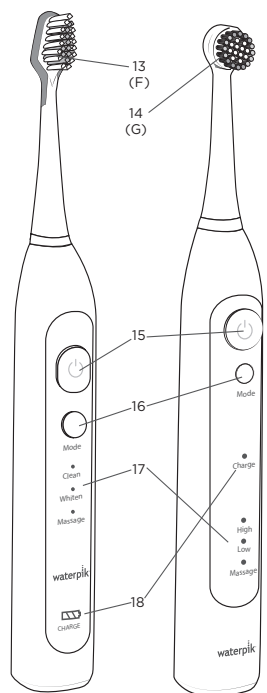


SZCZOTECZKA SONICZNA

SZCZOTECZKA OSCYLACYJNA

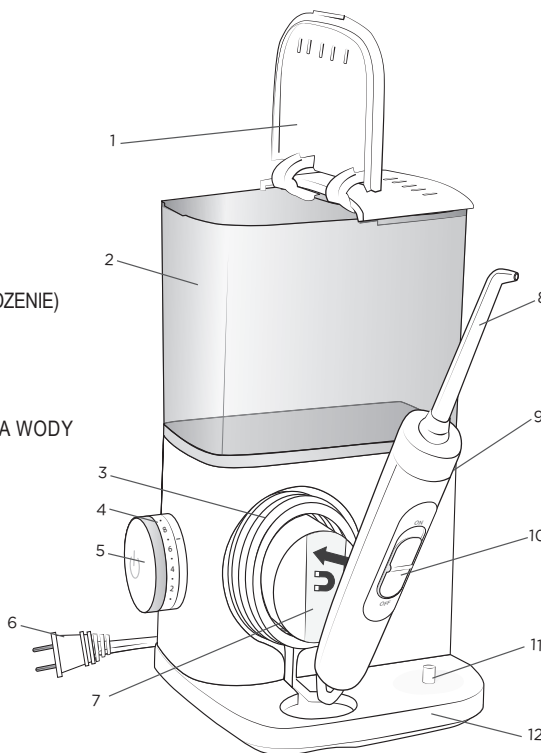

SZCZOTECZKA SONICZNA /OSCYLACYJNA





13. SZCZOTECZKA SONICZNA
14. SZCZOTECZKA OSCYLACYJNA
15. PRZYCIŚK WŁĄCZAJĄCY/WYŁĄCZAJĄCY
16. PRZEŁĄCZNIK ZMIANY TRYBÓW PRACY SZCZOTECZKI
17. LAMPKI KONTROLNE TRYBU PRACY
18. WSKAŹNIK ŁADOWANIA SZCZOTECZKI

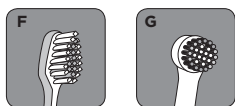

GŁOWICA SZCZOTECZKI

- F. POTRÓJNA GŁOWICA SZCZOTECZKI SONICZNEJ
 - G. POTRÓJNA GŁOWICA SZCZOTECZKI OSCYLACYJNEJ
- REKOMENDOWANA WYMIANA KOŃCÓWEK CO 3 MIESIĄCE**

Wymieniać co 3 miesiące	
 Kończówka do aparatów ortodontycznych	Najlepsza do Aparatów korekcyjnych Ogólnego stosowania
 Kończówka Pik Pocket ®	Najlepsza do Kieszonek zębowych Przestrzeni międzyzębowych
 Kończówka Plaque Seeker	Najlepsza do Implantów Koron Mostów Ogólnego stosowania
 Kończówka szczotkująca Potrójna funkcja soniczna	Najlepsza do Usuwania kamienia

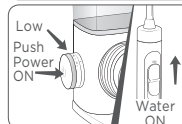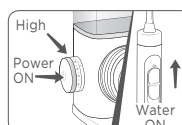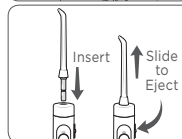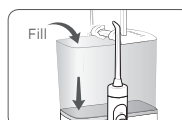

Przygotowanie zbiornika

Podnieść pokrywę, zdjąć zbiornik i napełnić letnią wodą. Umieścić zbiornik na podstawie, mocno przycisnąć i zamknąć pokrywę.

Włączanie irygatora

Podłączyć kabel do gniazdka elektrycznego. Jeśli gniazdko posiada przełącznik ścienny to należy upewnić się, że jest włączony.

Instalacja i demontaż końcówek

Umieścić końcówkę na środku uchwytu irygatora Water Flosser. Kolorowy pierścień będzie ściśle przylegać do górnej części uchwytu, jeśli końcówka jest prawidłowo zainstalowana.

Przygotowanie urządzenia (tylko przy pierwszym użyciu)

Ustawić pokrętkę na podstawie w położeniu „HIGH” (górne), skierować rączkę i końcówkę do zlewu. WŁĄCZYĆ urządzenie (I) aż woda zacznie płynąć z końcówki. WYŁĄCZYĆ urządzenie (O).

Regulacja ustawienia ciśnienia

Przełączyć pokrętkę na podstawie urządzenia do najniższego ustawienia (ustawienie ciśnienia nr 1) dla pierwszego użycia. Stopniowo zwiększać ciśnienie do preferowanego ustawienia - lub zgodnie z zaleceniami stomatologa.

Po zakończeniu

WYŁĄCZYĆ urządzenie (O). Opróżnić pozostały płyn w zbiorniku. Odłączyć urządzenie od zasilania.

Zalecana technika

Dla uzyskania najlepszych wyników należy rozpocząć od tylnych zębów i przesuwając się w kierunku przednich zębów. Przesunąć końcówkę wzdłuż linii dziąseł i zatrzymać się na chwilę pomiędzy zębami. Kontynuować do wyczyszczenia wewnętrznej i zewnętrznej części zębów górnych i dolnych. Nachylić się nad zlewem. Skierować strumień pod kątem 90 stopni do linii dziąseł z końcówką umieszczoną w ustach. Delikatnie zamknąć usta, aby uniknąć rozpryskiwania, ale umożliwić wodzie swobodne wypływanie z ust. Ustawić ciśnienie na żądanym poziomie i WŁĄCZYĆ urządzenie (I). Rozpocząć czyszczenie.

UWAGA: W przypadku stosowania roztworu do płukania jamy ustnej lub innego niż woda patrz rozdział „Korzystanie z płynu do płukania ust bądź innych roztworów”. (Patrz str 7).

Ładowanie szczoteczki oscylacyjnej

Ładuj przez 24 godziny przed pierwszym użyciem. Gdy szczoteczka do zębów jest w pełni naładowana, wskaźnik naładowania będzie zielony. W pełni naładowana szczoteczka będzie działać około 1 tygodnia (2 minuty szczotkowania 2 razy dziennie).

Jeśli szczoteczka ma być przechowywana przez dłuższy czas (6 miesięcy lub więcej) to należy upewnić się, że jest całkowicie naładowana

Kontrolki ładowania

Kontrolka ładowania wskazuje poziom naładowania baterii przez około 10 sekund po użyciu i po wyjęciu z bazy ładującej, a następnie wyłącza się.

Pełne naładowanie - wskaźnik CHARGE jest zielone

2/3 naładowania - Oba wskaźniki MASSAGE i LOW migają na zielono.

1/3 naładowania - wskaźnik Massage jest zielone. Zalecane jest ładowanie.

Tryby




HIGH : wysoka wydajność czyszczenia

LOW: Delikatne ruchy do skutecznego czyszczenia wrażliwych zębów

MASSAGE: mikro-pulsu dla zwiększenia stymulacji dziąseł

UWAGA: Jeśli wskaźnik ładowarki miga na czerwono i zielono, gdy jest wyjęta z ładowarki, urządzenie ma niski poziom naładowania i może nie działać.

Aby szczoteczka znów zaczęła działać, musi być umieszczona w ładowarce na około 1 godzinę.

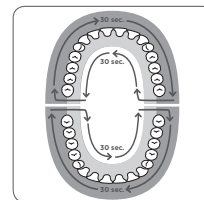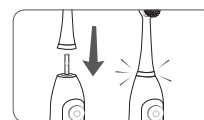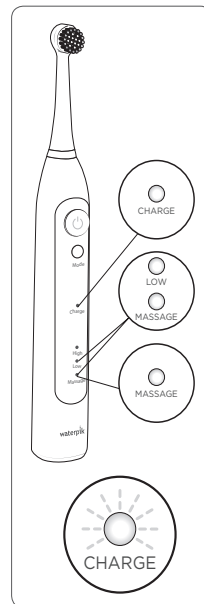

Szczotkowanie

- Wsuń główkę szczoteczki w uchwyt i mocno ją popchnij.
- Wybierz tryb, naciskając przycisk trybu, dopóki światło nie pojawi się w żądanym trybie naciskając przycisk zasilania.
- Umieść główkę szczotki w ustach przed włączeniem urządzenia.
- Używaj lekkiego nacisku z niewielkim, powolnym ruchem w tył iw przód jeden lub dwa zęby na raz.
- Quad Timer: tworzy krótką pauzę co 30 sekund, co przypomina o przejściu do następnej ćwiartki zębów.
- 2-minutowy timer : Szczotka wyłączy się automatycznie po 2 minutach pracy.