

Masażer pod oczy

*Beauty Lift Eye*



Instrukcja obsługi

Dziękujemy za zakup urządzenia Garrett Beauty Lift Eye

## O produkcie

**Garrett Beauty Lift Eye** to soniczny masażer pod oczy, który równie dobrze sprawdzi się do pielęgnacji okolic oczu. Wygodny w użyciu, funkcjonalny i dopasowany. To narzędzie, dzięki któremu w kilka chwil pobudzisz komórki skóry pod oczami do regeneracji.

## Opis produktu



## Specyfikacja techniczna

| Nazwa produktu: Garrett Beauty Lift Eye |                                 |
|---|---------------------------------|
| Pojemność baterii: 500 mAh              | Typ zasilania: akumulatorowe    |
| Czas ładowania: ok. 120 min             | Temperatura: 36 - 40°C          |
| Waga produktu (netto): 52 g             | Wymiary: 138,9 x 43,9 x 31,9 mm |

Więcej informacji na temat tego urządzenia dostępnych jest na stronie [www.garett.pl](http://www.garett.pl). Odwiedź naszą stronę, aby poznać więcej produktów i akcesoriów.

## Instrukcja użytkowania

1. Przed pierwszym użyciem sprawdź, czy urządzenie jest naładowane.
2. W przypadku braku reakcji na przycisk zasilania podłącz urządzenie do ładowania.
3. Aby włączyć urządzenie, naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez około 2 sekundy.
4. Za pomocą jednokrotnego naciśnięcia przycisku zasilania zmienisz tryb pracy na odpowiadający Twoim indywidualnym potrzebom. Urządzenie domyślnie pracuje na najniższym poziomie.
5. Możesz nałożyć esencję lub krem na okolice oczu.
6. Zbliź głowicę masującą tak, aby dotykała okolic oczu. Masaż rozpocznie się automatycznie.
7. Aby wyłączyć urządzenie naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez około 2 sekundy.

**Uwaga:** Urządzenie posiada funkcję auto-wyłączenia po 5 minutach bez interakcji użytkownika.

## Uwagi dla użytkowników

1. Przed użyciem tego produktu prosimy o uważne przeczytanie instrukcji i zachowanie jej na przyszłość.
2. Produkt jest ładowany za pomocą dołączonego zestawu ładującego.
3. Zabrania się używania tego produktu podczas ładowania.
4. Produkt nie jest wodoodporny, nie należy zanurzać go w wodzie.
5. Nie należy próbować odłączać urządzenia od gniazda ani używać go mokrymi rękami.
6. Aby uniknąć wypadków, nie należy dotykać metalowej części wtyczki.
7. Nie należy niszczyć, modyfikować, zginać czy skręcać przewodu zasilającego - może to skutkować jego uszkodzeniem.
8. Należy unikać zabrudzeń portu ładowania oraz przewodu zasilającego.
9. Należy zaprzestać ładowania w przypadku uszkodzenia wtyczki lub przewodu zasilającego lub nagrzewania się ich podczas ładowania.
10. Należy czyścić urządzenie, aby uniknąć gromadzenia się kurzu i zabrudzeń.
11. Nie należy przechowywać produktu w łazience, wilgotnych miejscach, wysokiej temperaturze, ponieważ może to spowodować porażenie prądem lub pożar.
12. Nie należy niszczyć produktu, rzucać nim czy modyfikować go. W przypadku uszkodzenia należy zaprzestać użytkowania.
13. Nie należy używać urządzenia w okolicach skóry podrażnionej, uczulonej lub w stanie zapalnym. W takim przypadku należy skontaktować się z lekarzem.
14. Nie należy pozwalać używać urządzenia dzieciom.
15. Kobiety w ciąży lub podczas cyklu menstruacyjnego nie powinny używać produktu bez wcześniejszego skontaktowania się z lekarzem.

## Naprawa i konserwacja

1. W przypadku uszkodzenia lub awarii prosimy o zaprzestanie użytkowania tego produktu i kontakt z serwisem firmy Garrett.
2. Podejmowanie prób własnoręcznej naprawy może prowadzić do uszkodzenia urządzenia oraz skutkuje unieważnieniem gwarancji.
3. Urządzenie nie jest całkowicie wodoodporne. Aby uniknąć uszkodzenia, nie należy myć go wodą.
4. W przypadku dłuższego nieużywania urządzenia, zaleca się ładowanie przynajmniej 1-2 razy w miesiącu oraz przechowywanie go w suchym i chłodnym miejscu, aby przedłużyć jego żywotność.

## Gwarancja i reklamacja

Produkt jest objęty 24-miesięczną gwarancją producenta. Gwarancja nie obejmuje: wad i uszkodzeń powstałych z winy użytkownika bądź wskutek niewłaściwego użytkowania (niezgodnego z przeznaczeniem), uszkodzeń mechanicznych oraz powstałych wskutek stosowania akcesoriów innych niż dołączone w zestawie, materiałów eksploatacyjnych. Reklamując produkt, należy wypełnić kartę gwarancyjną dołączoną do urządzenia oraz wysłać ją wraz z dowodem zakupu i produktem na adres serwisu podany na karcie gwarancyjnej.

Dane kontaktowe dostępne na stronie:

**www.garett.pl**


### Producent:

GARETT sp. z o.o.

ul. Targowa 18/1413

25 - 520 Kielce

**www.garett.pl**

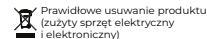

Oznaczenie umieszczone na produkcie lub w odnoszących się do niego tekstach wskazuje, że po upływie okresu użytkowania nie należy usuwać go z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych. Aby uniknąć szkodliwego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi wskutek niekontrolowanego usuwania odpadów, prosimy o oddzielenie produktu od innego typu odpadów oraz odpowiedzialny recykling w celu promowania ponownego użycia zasobów materialnych jako stałej praktyki. Informacje na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska recyklingu tego produktu użytkownicy w gospodarstwach domowych mogą uzyskać w punkcie sprzedaży detalicznej, w którym dokonali zakupu produktu, lub u organów władz lokalnych. Użytkownicy w firmach powinni skontaktować się ze swoim dostawcą i sprawdzić warunki umowy zakupu. Produktu nie należy usuwać razem z innymi odpadami komercyjnymi.



Wyprodukowano w P. R. C.