

Zestaw do wybielania zębów

Beauty Smile Lite




Instrukcja obsługi

Dziękujemy za zakup urządzenia Garrett Beauty Smile Lite


O produkcie

Garrett Beauty Smile Lite to zestaw do wybielania zębów składający się z czterech podstawowych części:

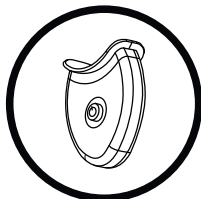


Lampa LED

To specjalna technologia zimnego światła o wysokiej częstotliwości zapewniająca skuteczne wybielanie zębów. Lampa posiada w środku wymienną baterię.

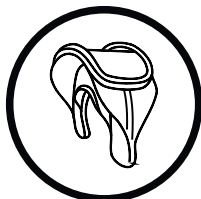


Lampa LED

Miękki ustnik został zaprojektowany tak, aby jak najlepiej dopasować się do standardowego łuku zębowego pokrywając całe uzębienie. Dzięki temu proces wybielania zębów będzie komfortowy dla użytkownika.

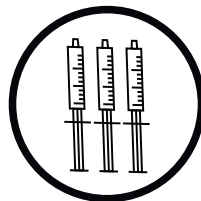

Żel wybielający

Niebieskie światło LED reaguje z żelem wybielającym, który skutecznie usuwa przebarwienia na powierzchni zębów. W pudełku znajdują się trzy aplikatory.

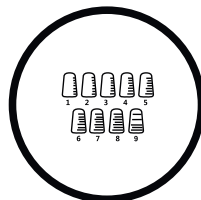

Lampa LED


Wzornik odcieni to wzorec umożliwiający dobranie aktualnego koloru zębów i porównanie go z efektami kuracji wybielania.

Instrukcja użytkownika




CZYSZCZENIE ZĘBÓW I UST

Wyczyść nakładkę na zęby i wysusz. Następnie delikatnie umyj zęby pastą do zębów i spłukaj wodą.

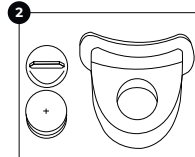


PRZYGOTUJ URZĄDZENIE

Usuń plastikowy krążek spod baterii i włóż ją z powrotem do urządzenia wybielającego zęby.

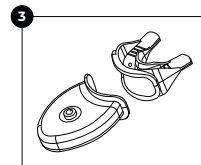


ŁĄCZENIE URZĄDZEŃ

Złącz nakładkę na zęby z lampą wybielającą LED.

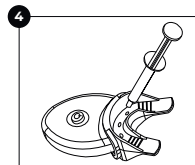

APLIKACJA ŻELU

Zaaplikuj 1/4 strzykawki żelu wybielającego na każdą stronę nakładki na zęby. Należy nałożyć tylko tyle, aby pokryć przednią powierzchnie zębów unikając kontaktu z dziąsłami.

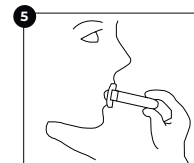

WYBIELANIE


Umieść nakładkę na zębach. Zetrzyj żel który jest w kontakcie z twoimi dziąsłami. Naciśnij przycisk START, aby rozpocząć pracę urządzenia. Zamknij usta, aby zaciśnąć nakładkę na zębach.



OCZYSZCZANIE

Po 30 minutach wyłącz urządzenie i wyjmij nakładkę z ust. Wypłucz usta ciepłą wodą, a następnie rozłącz nakładkę na zęby od lampy wybielającej i dokładnie ją wyczyść.

Nie jedz ani nie pij niczego oprócz wody przez 30 minut po zakończeniu kuracji.

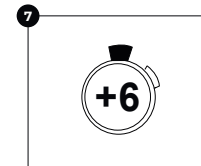

PROCES WYBIELANIA

Dla uzyskania prawidłowych efektów wybielania zębów, powtarzaj opisaną procedurę przez kolejnych sześć dni.

Skład żelu

Woda dejonizowana, glicerol, glikol propylenowy, wodorowęglan sodu, chlorek sodu, sok z liści aloesu, ekstrakt z nasion granatu, ekstrakt z kwiatów rumianku, kwas cytrynowy, guma ksantanowa, karbomer, mentol.

Zakres zastosowania

Plamy na zębach z kawy, tytoniu, barwników spożywczych, starzenia i inne czynniki, które mogą powodować przebarwienia.

Przechowywanie żelu

Unikaj światła słonecznego i przechowuj w chłodnym i suchym miejscu (można przechowywać w lodówce). Po zakończeniu kuracji należy nałożyć nasadkę na końcówkę aplikatora. Dzięki temu można uniknąć ulatniania się substancji czynnych żelu wybielającego.

Uwagi

1. Nie należy stosować urządzenia w przypadku uszkodzonego szkliwa, zębiny lub występowania chorób dziąseł.
2. Nie należy stosować urządzenia w przypadku uczulenia na składniki żelu.
3. Nie należy połykać żelu.
4. Urządzenie nie jest odpowiednie dla osób poniżej 16 roku życia i kobiet w ciąży lub karmiących piersią.
5. Urządzenie nie jest odpowiednie dla osób z nadwrażliwością zębów.
6. Urządzenie nie jest przystosowane do wybielania zębów ceramicznych i sztucznych (wypełnienia, korony, licówki, mosty itp.).
7. Urządzenie nie jest przystosowane do usuwania przebarwień zębów spowodowanych uszkodzeniem lub powstałych w skutek zabiegów medycznych.

8. Urządzenie nie jest przystosowane do usuwania przebarwień powstałych w skutek przyjmowania leków.

FAQ

Na jak długo wystarczy jeden aplikator żelu wybielającego?

Jeden pojemnik powinien wystarczyć na około 4 - 5 aplikacji.

Jak długo utrzymuje się efekt wybielonych zębów?

Efekt wybielania powinien utrzymać się na około 2 - 3 miesiące od zakończenia 14 - dniowej kuracji. Utrzymywanie efektu zależy od unikania spożywania żywności, która powoduje przebarwienia zębów.

Czy żel wybieli również sztuczne zęby?

W przypadku imitacji zębów takich jak wypełnienia, mosty, korony licówki i implanty nasz żel może jedynie rozjaśnić je do oryginalnego koloru.

Czy żel wybielający jest szkodliwy dla zdrowia?

Składniki naszego żelu są w 100% bezpieczne. Przed użyciem zalecamy zapoznać się ze składnikami żelu zamieszczonym na instrukcji i opakowaniu urządzenia. W przypadku problemów alergicznych należy skonsultować jego użycie z lekarzem.

Nasze produkty

Garett Beauty Smile Strips - to paski wybielające, które zapewniają błyskawiczny efekt rozjaśnienia zębów. Wystarczy przykleić je do oczyszczonych zębów na około 30 minut, a następnie odkleić je od uzębienia. Paski Beauty Smile Strips to idealne połączenie dla użytkowników nakładki wybielającej firmy Garrett.

Garett Beauty Smile Powder - to proszek do oczyszczania zębów przed każdym wybielaniem z nakładką wybielającą Garrett. Skutecznie usuwa resztki po kawie, herbacie, winie i nikotynie. Proszku Beauty Smile Powder można używać od 3 do 5 razy w tygodniu przed każdym użyciem nasadki wybielającej.

Garett Beauty Smile Bamboo Toothbrush - to szczoteczka do zębów wykonana z bambusa i łupin kokosa. Włosie szczoteczki zostało nasączone proszkiem z węgla drzewnego, który skutecznie usuwa lekkie przebarwienia zębów i zapewnia efekt rozjaśnienia.


GE
Beauty

Gwarancja i reklamacja

Produkt jest objęty 24 - miesięczną gwarancją producenta. Gwarancja nie obejmuje: wad i uszkodzeń powstałych z winy użytkownika bądź wskutek niewłaściwego użytkowania (niezgodnego z przeznaczeniem), uszkodzeń mechanicznych oraz powstałych wskutek stosowania akcesoriów innych niż dołączone w zestawie, materiałów eksploatacyjnych. Reklamując produkt, należy wypełnić kartę gwarancyjną dołączonej do urządzenia oraz wysłać ją wraz z dowodem zakupu i produktem na adres serwisu podany na stronie gwarancyjnej.

Dane kontaktowe dostępne na stronie:
www.garett.pl

Producent:
GARETT sp. z o.o.
ul. Targowa 18/1413
25 - 520 Kielce
www.garett.pl

 Prawidłowe usuwanie produktu (zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny)

Oznaczenie umieszczone na produkcie lub w odnoszących się do niego tekstach wskazuje, że po upływie okresu użytkowania nie należy usuwać go z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych. Aby uniknąć szkodliwego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi wskutek niekontrolowanego usuwania odpadów, prosimy o oddzielenie produktu od innego typu odpadów oraz odpowiedzialny recykling w celu promowania ponownego użycia zasobów materialnych jako stałej praktyki. Informacje na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska recyklingu tego produktu użytkownicy w gospodarstwach domowych mogą uzyskać w punkcie sprzedaży detalicznej, w którym dokonali zakupu produktu, lub u organów władz lokalnych. Użytkownicy w firmach powinni skontaktować się ze swoim dostawcą i sprawdzić warunki umowy zakupu. Produktu nie należy usuwać razem z innymi odpadami komercyjnymi.

    
Wyprodukowano w P. R. C.