



meriden®

Traveller & Home Irrigator


Przed użyciem zapoznaj się z instrukcją obsługi.
Zachowaj instrukcję do ewentualnego
wykorzystania w przyszłości.



Instrukcja obsługi

MD 1522

Opis urządzenia

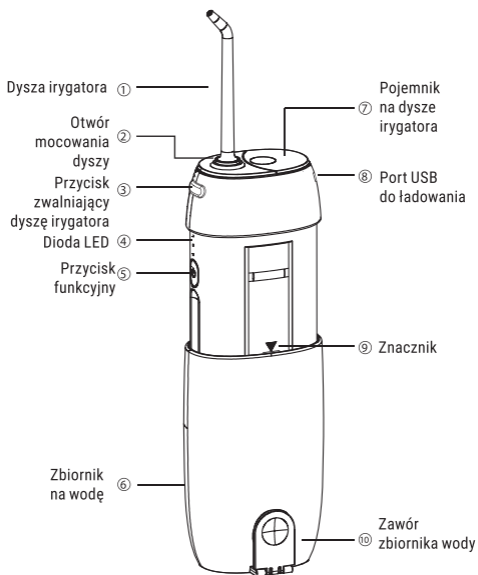

Klasyczna końcówka dyszy:
Dokładnie czyści zęby
i usuwa płytkę nazębną.



Tryby pracy: Normal Soft Pulse

Napięcie znamionowe: 5V DC

Moc znamionowa: 8W

Ciśnienie znamionowe wody: 30-90PSI, 2.07-6.21 bar

Częstotliwość pulsacyjna: 1600 uderzeń na minutę

Czas ładowania: 3 Godziny

Pojemność zbiornika na wodę: 120 ML

Specyfikacja baterii: Bateria litowo-jonowa 1500mAh 3.7V


Standard wykonania: GB 4706.1-2005 GB 4706.59-2008

Q/RMZN 5-2017

Instrukcja obsługi


Ładowanie

- a. Wyłącz urządzenie.
- b. Umieść zbiornik na wodę w jego oryginalnym położeniu.
- c. Podłącz ładowarkę Micro USB do portu ładowania irygatora.
- d. Podłącz wtyczkę do sieci, upewnij się, że wskaźnik ładowania świeci się.
- e. Wskaźnik będzie rozświecłał się na biało podczas ładowania a po jego zakończeniu przestanie świecić. Urządzenie może być używane przez 60 min po pojedynczym pełnym ładowaniu przez 3 godziny.

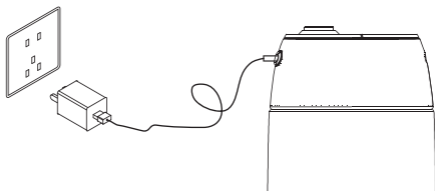

Instalacja i wyjmowanie dyszy


- Wyjmij klasyczną dyszę z pojemnika.
- Wsuń końcówkę do otworu mocowania dyszy.
- Usłyszysz kliknięcie, gdy dysza zostanie poprawnie zamontowana.
- Przy wyjmowaniu dyszy, najpierw naciśnij przycisk zwalniający a następnie wyjmij dyszę i umieść ją w pojemniku.

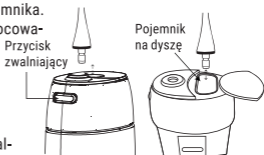

Ostrzeżenie: Proszę nie naciskać przycisku zwalniającego dyszę podczas pracy urządzenia.

Napełnianie zbiornika na wodę

- Otwórz zawór zbiornika na wodę i pociągnij go w dół.
- Napełnij zbiornik na wodę trzymając go poziomo.
- Zamknij zawór zbiornika.
- Uwaga: Przed wyciągnięciem zbiornika należy najpierw odkręcić jego zawór. W innym wypadku wyjęcie zbiornika będzie utrudnione przez ciśnienie.

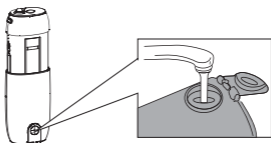

Do czyszczenia zaleca się użycie wody bieżącej. Jeśli uważasz, że woda jest zbyt zimna można użyć letniej wody nie przekraczającej 40°C, wody z solą nie przekraczającej 50% koncentracji lub płynu do płukania jamy ustnej.

Tryby i przycisk funkcyjny

- Naciśnij przycisk funkcyjny, zapali się dioda.
- Przełączaj się pomiędzy trybami – 'Normal', 'Soft', 'Pulse' poprzez kolejne naciśnięcie przycisku funkcyjnego w ciągu 5 sekund. Dla początkujących użytkowników zaleca się rozpoczęcie od trybu 'Soft'. Urządzenie posiada inteligentny chip, który zapamięta Twoje ustawienie. Urządzenie automatycznie rozpocznie pracę w trybie, z którego ostatnio korzystano.



Instrukcje dotyczące korzystania:

- Umieść dyszę w jamie ustnej i naciśnij przycisk funkcyjny aby wybrać odpowiedni tryb. Kieruj strumień wody pionowo na zęby, szczeliny lub dziąsła.
- Zwróć szczególną uwagę na obszar pomiędzy zębami i wokół zębodołu.
- Podczas czyszczenia zębów nieznacznie otwórz usta by odprowadzić wodę.
- Podczas użytkowania trzymaj urządzenie pionowo aby nie dopuścić do przerwania strumienia wody, poprzez przemieszczenie się rurki w zbiorniku na wodę.



Czyszczenie i konserwacja

Czyszczenie

- Wyłącz urządzenie, otwórz osłonę zbiornika na wodę i opróżnij go.
- Włącz urządzenie i pozbądź się reszty wody ze zbiornika.
- Produkt posiada klasę szczelności IPX7 i może być czyszczony bezpośrednio bieżącą wodą.
- Po dokładnym oczyszczeniu, wylej wodę i pozostaw do wyschnięcia.



Konserwacja

Końcówka

- Umyj wodą i wysusz szmatką.
- Zaleca się wymianę końcówki co 6 miesięcy. Jeśli końcówka ulegnie odkształceniu, należy ją na czas wymienić, w przeciwnym razie wpłynie ona na użytkowanie produktu i może doprowadzić do jego zniszczenia.

Rękojeść

- Użyj miękkiej szmatki lekko zmoczonej w łagodnym detergencie do oczyszczenia zewnętrznej części urządzenia.
- W celu łatwego czyszczenia zbiornik na wodę jest usuwalny.
- Zaleca się czyszczenie zbiornika na wodę raz w tygodniu.

Uwaga:

- Nie należy myć urządzenia wodą o temperaturze przekraczającej 50°C.
- Do czyszczenia nie należy używać rozpuszczalników, alkoholu lub innych stymulantów. Urządzenie ulegnie odbarwieniu lub uszkodzeniu.



Uwaga

W celu zredukowania ryzyka poparzeń, porażenia prądem, pożaru lub uszczerbku na zdrowiu należy stosować się do poniższego:

- Nie podłączać urządzenia do sieci elektrycznej o napięciu innym, niż wskazane na urządzeniu bądź ładowarce.
- Nie dotykać ładowarki mokrymi rękoma.
- Nie użytkować produktu jeśli uszkodzeniu uległ przewód zasilający, wtyczka lub gdy sam produkt nie działa poprawnie.
- Nie kierować strumienia wody pod język, do ucha, nosa lub innych delikatnych obszarów ciała. Ciśnienie wody może spowodować ich poważne uszkodzenie.
- Używaj urządzenia w sposób wskazany w tej instrukcji bądź sposób zalecony przez dentystę.
- Napełniaj zbiornik wodą lub innym roztworem zaleconym przez dentystę.
- Nie narażaj urządzenia na upadek oraz nie wkładaj żadnych przedmiotów do jakiegokolwiek otworu w produkcie. Przewód zasilający nie może zostać wymieniony. Jeśli przewód zasilający został uszkodzony, należy zaprzestać korzystania z urządzenia.
- Nie używać w produkcie jodiny, wybielaczy lub olejków nierozpuszczalnych w wodzie. Użycie powyższych wpłynie na pracę urządzenia i skróci jego czas używalności.
- Usunąć biżuterię w jamie ustnej przed użytkowaniem produktu.
- Nie używaj produktu, jeśli masz jakąkolwiek ranę otwartą języka bądź jamy ustnej.
- Jeśli przyjmujesz antybiotyki przygotowujące do zabiegu dentystycznego, skonsultuj się ze swoim dentystą przed użyciem tego produktu lub jakiegokolwiek innej formy higieny jamy ustnej.
- Podczas używania produktu, dzieci powinny być nadzorowane przez osobę dorosłą.
- Miejsce przechowywania produktu powinno być czyste i suche, chroń urządzenie przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych i gorącem.
- Jeśli urządzenie musi być przechowywane przez dłuższy okres (ponad 3 miesiące), należy wcześniej w pełni je naładować.
- Nie włączaj urządzenia, gdy zbiornik na wodę jest pusty aby uniknąć uszkodzenia urządzenia.

Ochrona środowiska

Nie wyrzucaj urządzenia razem z odpadami domowymi. Urządzenie należy przekazać do wyznaczonego centrum recyklingowego, gdzie bateria w nim zawarta zostanie zutylicowana w odpowiedni sposób, wspomagając tym samym ochronę środowiska.

Obchodzenie się z akumulatorem

Wbudowany akumulator zawiera substancje mogące zanieczyścić środowisko. Przed pozyciem się urządzenia, proszę upewnić się, że akumulator został wyjęty. Następnie akumulator bądź całe urządzenie należy przekazać do oficjalnego centrum recyklingowego.

Nie wyjmuj akumulatora urządzenia, jeśli nie zamierzasz go wyrzucić. Przed usunięciem akumulatora, upewnij się, że został on w pełni wyczerpany.

Rozwiązywanie problemów

Problem	Przyczyna	Rozwiązanie
Urządzenie nie działa.	Produkt został właśnie zakupiony lub nie był w użyciu przez okres dłuższy niż 3 miesiące	Podłącz urządzenie do bazy ładowania, ładuj je przez 24 godziny.
Wystąpił wyciek pomiędzy końcówką szczoteczki a rękojeścią.	Szczoteczka nie ja zamontowana poprawnie	Wymij końcówkę szczoteczki i wymień ją.
Niskie ciśnienie wody.	Końcówka jest zabrudzona. Końcówka uległa deformacji. Zabrudzenie pompy.	Wymień końcówkę. Skontaktuj się z obsługą klienta.
Woda nie wydobywa się z dyszy	Zabrudzony filtr Zbiornik na wodę jest pusty. Zbytne przechylenie urządzenia podczas użytkowania. Rurka doprowadzająca wodę nie jest zainstalowana. Pompa wody jest zatkana.	Wyczyść filtr Napełnij zbiornik wodą. Używaj urządzenia pionowo. Zainstaluj rurkę doprowadzającą. Skontaktuj się z obsługą klienta.



Meriden Sp. z o.o.
ul. Piastów 96
42-290 Blachownia, Poland
NIP: 9492217625
meriden@meriden.pl
www.meridenglobal.com

www.facebook.com/meridenglobal
www.instagram.com/meridenglobal

Designed by Meriden in Poland
Made in P.R.C.

Model: MD 1522