



**GARETT**  
ELECTRONICS

[www.garett.pl](http://www.garett.pl)

Masażer do oczu

*Beauty Relax*



Instrukcja obsługi

---

Dziękujemy za zakup urządzenia Garrett Beauty Relax Eye

## O produkcie

**Garrett Beauty Relax Eye** to inteligentny masażer do oczu, który wykorzystując technologię ciśnienia powietrza oraz wibracje, rozluźnia i odpręża mięśnie oczu. Ciepły kompres pomaga się zrelaksować i pozbyć uczucia zmęczenia. Dodatkowo pomogą w tym wbudowany głośnik i miękkie, pompujące się poduszki.

## Funkcje produktu

**1. Kompresja powietrzna:** Pompowane poduszki pobudzają układ nerwowy, poprawiają jakość i efekty masażu oczu.


**2. Funkcja ciepłego kompresu:** Podgrzewane poduszki to innowacyjne rozwiązanie w kwestii masażu oczu. Wpływają pozytywnie na pracę mięśni oczu, pobudzają krążenie krwi, łagodzą suchość oczu, redukują uczucie zmęczenia.

**3. Masaż wibracyjny:** Funkcja masażu wibracyjnego pobudza krążenie krwi w celu zmniejszenia elastyczności mięśni rzęskowych, poprawia zdolność mięśnia oka do dostosowywania się.

**4. Czujnik ruchu na podczerwień:** Za pomocą wbudowanego czujnika ruchu na podczerwień można sterować urządzeniem ruchem ręki. Proste przełączanie pomiędzy dwoma trybami ciśnienia powietrza oraz 6-stopniowa regulacja intensywności masażu.

**5. Wbudowane głośniki:** Możliwość odtwarzania relaksującej muzyki za pomocą połączenia Bluetooth. Komunikaty głosowe ułatwiają korzystanie z masażera.

## Opis produktu

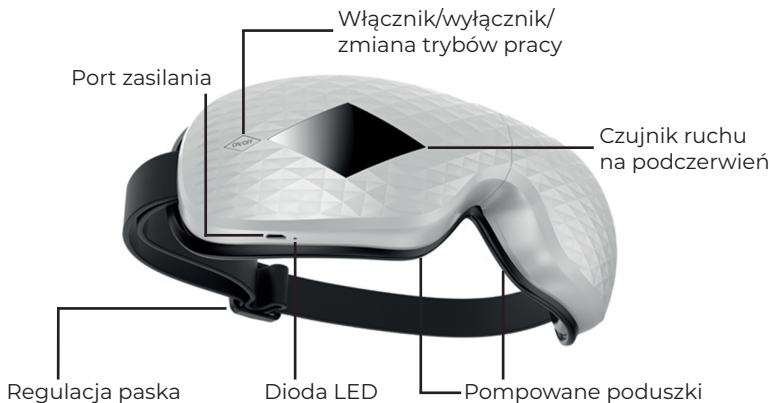

## Specyfikacja techniczna

<b>Nazwa produktu: Garrett Beauty Relax Eye</b>	
Pojemność baterii: 1650 mAh	Ciśnienie powietrza: 86 - 106 kPa
Czas ładowania: ok. 180 min	Moc: 3,75 W
Waga produktu (netto): 310 g	Wymiary: 242 x 96 x 78 mm

**Więcej informacji na temat tego urządzenia dostępnych jest na stronie [www.garett.pl](http://www.garett.pl). Odwiedź naszą stronę, aby poznać więcej produktów i akcesoriów.**

# Instrukcja użytkowania

1. Przed pierwszym użyciem sprawdź, czy urządzenie jest naładowane.
2. W przypadku braku reakcji na przycisk zasilania podłącz urządzenie do ładowania.
3. Podczas ładowania dioda LED świeci na czerwono, po pełnym naładowaniu kolor diody zmieni się na niebieski.

**Uwaga: Urządzenie jest zabezpieczone przed uruchomieniem go podczas ładowania. Za pomocą komunikatu głosowego, powiadamia o niskim poziomie naładowania baterii.**

4. Aby włączyć urządzenie, naciśnij i przytrzymaj przycisk **ON/OFF** przez około 3 sekundy. Włączenie zostanie zasygnalizowane komunikatem głosowym, a masażer rozpocznie pracę w trybie domyślnym - Integrated mode.
5. Po włączeniu urządzenia możesz je sparować z telefonem w celu odtwarzania muzyki:
  - \* Włącz łączność Bluetooth w telefonie oraz upewnij się, że masażer jest włączony.
  - \* Otwórz ustawienia Bluetooth telefonu, wyszukaj urządzenie o nazwie **IF-999** i sparuj je ze swoim telefonem.
  - \* Po udanym parowaniu usłyszysz krótki sygnał dźwiękowy.
  - \* Podwójne kliknięcie przycisku **ON/OFF** włącza funkcję odtwarzania muzyki przez Bluetooth. Ponowne podwójne kliknięcie służy jako **PAUZA/START** odtwarzanej muzyki.
6. Jednokrotne naciśnięcie przycisku **ON/OFF** zmienia tryb pracy (dostępnych 5) na odpowiadający Twoim indywidualnym potrzebom. Rozpoczęcie trybu pracy rozpoczyna się od komunikatów.
7. Możesz sterować urządzeniem za pomocą ruchu ręki dzięki wbudowanemu czujnikowi ruchu ręki na podczerwień.



Przełączanie trybów masażu uciskowego



Zmiana intensywności masażu uciskowego

8. Aby zmienić tryb masażu uciskowego (dostępne 2 tryby: **A** i **B**), przysłoń czujnik ruchu ręką na około 2 sekundy. Zmiana zostanie zasygnalizowana komunikatem głosowym.

9. Aby zmienić intensywność masażu uciskowego (dostępne 6 poziomów), porusz ręką tak, aby tylko na chwilę przysłonić czujnik ruchu.

10. Aby wyłączyć urządzenie, naciśnij i przytrzymaj przycisk **ON/OFF** przez około 3 sekundy. Wyłączenie zostanie zasygnalizowane komunikatem głosowym.

**Uwaga: Domyślny czas pracy urządzenia to 15 minut. Jeśli chcesz przedłużyć użytkowanie, uruchom je ponownie.**

## Tryby pracy urządzenia



# Uwagi dla użytkowników

1. Przed użyciem tego produktu prosimy o uważne przeczytanie instrukcji i zachowanie jej na przyszłość.
2. Produkt jest ładowany za pomocą dołączonego zestawu ładującego.
3. Zabrania się używania tego produktu podczas ładowania.
4. Produkt nie jest wodoodporny, nie należy zanurzać go w wodzie.
5. Nie należy próbować odłączać urządzenia od gniazda ani używać go mokrymi rękami.
6. Aby uniknąć wypadków, nie należy dotykać metalowej części wtyczki.
7. Nie należy niszczyć, modyfikować, zginać czy skręcać przewodu zasilającego może to skutkować jego uszkodzeniem.
8. Należy unikać zabrudzeń portu ładowania oraz przewodu zasilającego.
9. Należy zaprzestać ładowania w przypadku uszkodzenia wtyczki lub przewodu zasilającego lub nagrzewania się ich podczas ładowania.
10. Należy czyścić urządzenie, aby uniknąć gromadzenia się kurzu i zabrudzeń.
11. Nie należy przechowywać produktu w łazience, wilgotnych miejscach, wysokiej temperaturze, ponieważ może to spowodować porażenie prądem lub pożar.
12. Nie należy niszczyć produktu, rzucać nim czy modyfikować go. W przypadku uszkodzenia należy zaprzestać użytkowania.
13. Przed użyciem urządzenia należy zdjąć soczewki oraz wszelakie akcesoria do włosów.
14. Zabieg masażu należy przeprowadzać na zamkniętych oczach.
15. Nie należy używać urządzenia w okolicach skóry podrażnionej, uczulonej lub w stanie zapalnym. W takim przypadku należy skontaktować się z lekarzem.
16. Urządzenia nie powinny używać osoby po zabiegach chirurgicznych, mające problemy z ciśnieniem oraz ze schorzeniami oczu (m.in. jaskra, zaćma).
17. Nie należy pozwalać używać urządzenia dzieciom.
18. Nie należy użytkować urządzenia pod wpływem alkoholu lub złego samopoczucia.

## Naprawa i konserwacja

1. W przypadku uszkodzenia lub awarii prosimy o wstrzymanie użytkowania tego produktu i kontakt z serwisem firmy Garrett. Podejmowanie prób własnoręcznej naprawy może prowadzić do uszkodzenia urządzenia oraz skutkuje unieważnieniem gwarancji.
2. Po każdym użyciu należy dokładnie wyczyścić produkt. Nie należy używać w tym celu silnych detergentów i innych stymulantów do czyszczenia produktu.
3. Urządzenie nie jest całkowicie wodoodporne i nie należy myć go wodą.
4. Nie użytkując urządzenia przez dłuższy czas, zaleca się regularne ładowanie i przechowywanie urządzenia w suchym i chłodnym miejscu, aby przedłużyć jego żywotność.

# Gwarancja i reklamacja

Produkt jest objęty 24-miesięczną gwarancją producenta. Gwarancja nie obejmuje: wad i uszkodzeń powstałych z winy użytkownika bądź wskutek niewłaściwego użytkowania (niezgodnego z przeznaczeniem), uszkodzeń mechanicznych oraz powstałych wskutek stosowania akcesoriów innych niż dołączone w zestawie, materiałów eksploatacyjnych. Reklamując produkt, należy wypełnić kartę gwarancyjną dołączoną do urządzenia oraz wysłać ją wraz z dowodem zakupu i produktem na adres serwisu podany na karcie gwarancyjnej.

Dane kontaktowe dostępne na stronie:

**[www.garett.pl](http://www.garett.pl)**

## **Producent:**

GARETT sp. z o.o.  
ul. Targowa 18/1413  
25 - 520 Kielce  
**[www.garett.pl](http://www.garett.pl)**



Prawidłowe usuwanie produktu  
(zużyty sprzęt elektryczny  
i elektroniczny)

Oznaczenie umieszczone na produkcie lub w odnoszących się do niego tekstach wskazuje, że po upływie okresu użytkowania nie należy usuwać go z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych. Aby uniknąć szkodliwego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi wskutek niekontrolowanego usuwania odpadów, prosimy o oddzielenie produktu od innego typu odpadów oraz odpowiedzialny recykling w celu promowania ponownego użycia zasobów materialnych jako stałej praktyki. Informacje na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska recyklingu tego produktu użytkownicy w gospodarstwach domowych mogą uzyskać w punkcie sprzedaży detalicznej, w którym dokonali zakupu produktu, lub u organów władz lokalnych. Użytkownicy w firmach powinni skontaktować się ze swoim dostawcą i sprawdzić warunki umowy zakupu. Produktu nie należy usuwać razem z innymi odpadami komercyjnymi.



Wyprodukowano w P.R.C.