



1. Opis urządzenia

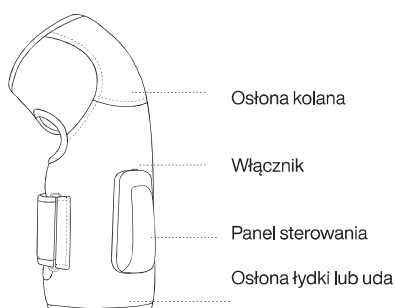

2. Opis mocowania

Urządzenie może być założone na dwa różne sposoby jak na załączonym schemacie. Możemy dowolnie masować obszar ud lub łydek według własnych upodobań

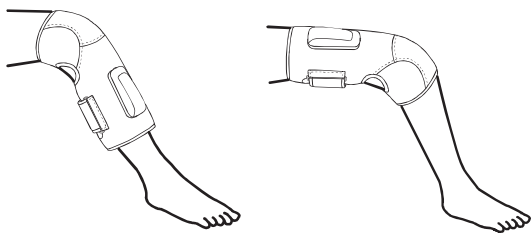

3. Instrukcja użycia

Urządzenie posiada funkcję masażu powietrznego oraz funkcję grzania. Funkcja pierwsza funkcja dotyczy łydki/ud i kolan, a funkcja ogrzewania dotyczy kolana. Istnieją trzy tryby masażu i trzy poziomy intensywności funkcji masażu ciśnieniowego. Masażer posiada wbudowany akumulator - podczas ładowania wskaźnik intensywności zmieni kolor na niebieski, zielony lub czerwony. Po pełnym naładowaniu, kontrolka będzie zielona. Naciśnij włącznik zasilania na dole kontrolera, aby przejść do stanu gotowości, zielona kontrolka miga.

Funkcje przycisków są następujące:

 W stanie gotowości krótko naciśnij ten przycisk, aby wyłączyć urządzenie, a kontrolka tego przycisku świeci na czerwono. Domyślnym trybem jest tryb 1 z niebieską kontrolką, domyślną intensywnością jest poziom 2 z zieloną kontrolką, a funkcja ogrzewania jest włączona. Rozpoczyna się odliczanie (domyślny TIMER to 20 minut). Krótko naciśnij ten przycisk ponownie, aby wyłączyć funkcję ogrzewania, a lampka kontrolna będzie niebieska. Krótko naciśnij ten przycisk po raz trzeci, aby włączyć funkcję ogrzewania. W podczas pracy naciśnij i przytrzymaj przycisk dłużej niż 3 sekundy aby wyłączyć masażer, lub poczekaj 15 min aż masażer wyłączy się automatycznie.

 Podczas pracy urządzenia - naciśnij ten przycisk aby cyklicznie zmieniać tryb masażu. Masażer będzie zmieniał tryb pracy w cyklach: tryb 1 > tryb 2 > tryb 3> brak masażu uciskowego > tryb 1.

 Naciskając ten przycisk, cyklicznie zmieniamy intensywność masażu. Działa to w podobny sposób jak w przypadku zmiany trybów.

To urządzenie nie powinno być używane przez osoby (w tym dzieci) z upośledzonymi zdolnościami sensorycznymi lub umysłowymi lub które nie mają odpowiedniego doświadczenia i/lub wiedzy na temat takich urządzeń, chyba że są one nadzorowane przez opiekuna. Trzymaj ostre i spiczaste przedmioty z dala od urządzenia.