

VITAMMY®

infant

waga dla noworodków i niemowląt

SBS-30860



INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

⚠ Przed użyciem należy zapoznać się z instrukcją.

WPROWADZENIE

Bardzo dziękujemy za wybranie naszej cyfrowej wagi dla niemowląt. Przeczytaj instrukcję obsługi i ostrzeżenia przed pierwszym użyciem urządzenia. Zwróć szczególną uwagę na wskazówki dotyczące bezpieczeństwa, aby uniknąć wypadków i / lub uszkodzenia produktu podczas korzystania z niego. Zachowaj instrukcję obsługi na przyszłość.

Ta elektroniczna waga to domowe urządzenie do sprawdzania wagi dziecka, szczególnie przydatne do ważenia niemowląt i wcześniaków, gdzie waga dziecka jest niezwykle ważnym czynnikiem rozwoju. Dolażyliśmy wszelkich starań, aby produkt był najwyższej jakości, komfortowy dla dziecka, łatwy w użyciu i bezpieczny podczas ważenia.

OPIS URZĄDZENIA



1. Przycisk **Włącz / Wylącz / Tara**
2. Przycisk zmiany jednostek **UNIT**
3. Ekran LCD
4. Wynik ważenia
5. Wybrana jednostka wagi (kg / lb / st / g)

INSTRUKCJA OBSŁUGI


INSTALOWANIE BATERII

- △ Przed pierwszym użyciem należy zainstalować baterie.

 1. Otwórz osłonę baterii i wyjmij izolator z komory baterii.
 2. Zainstaluj 2 baterie typu AAA (1,5 V) zgodnie z oznaczoną polaryzacją.
 3. Zamknij osłonę baterii.

WAŻENIE

1. Postaw wagę na twardej, płaskiej i poziomej powierzchni.
- △ Nie stawiaj wagi na miękkich powierzchniach takich jak dywan, czy wykładzina, ponieważ może to wpłynąć na wynik pomiaru.
2. Włącz wagę przyciskiem **Włącz / Wylącz / Tara**. Na ekranie pojawi się komunikat „Hi”.
 3. Kiedy na ekranie pojawią się same zera i jednostka wagi można przystąpić do ważenia.
 4. Jeśli chcesz zmienić jednostkę wagi, (kg / lb / st / g) naciśnij przycisk **UNIT**.
 5. Połóż dziecko na wadze. Wynik pojawi się na ekranie. Jeśli nie chcesz kłaść dziecka bezpośrednio na wadze, najpierw połóż na wadze ręcznik, naciśnij przycisk **Włącz / Wylącz / Tara**, by wyzerować wagę, a następnie połóż na wadze dziecko.
 6. Wylącz wagę naciskając przycisk **Włącz / Wylącz / Tara** lub poczekaj aż waga sama się wyłączy po 30 sekundach.
- △ Jeśli chcesz wykonać kolejny pomiar, po zdjęciu dziecka z wagi, wyzeruj wagę przed kolejnym ważeniem naciskając przycisk **Włącz / Wylącz / Tara**.

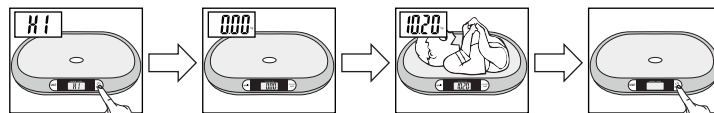


FUNKCJA AUTO LOCK

Kiedy dziecko leży na wadze niespokojnie, waga automatycznie ustabilizuje się i wyświetli wynik po trzykrotnym mignięciu cyfr na ekranie.


TAROWANIE

Wagę VITAMMY INFANT można ważyć kolejno dzieci. Przed wykonaniem kolejnego pomiaru, należy zdjąć dziecko z wagi, nacisnąć przycisk **Włącz / Wylącz / Tara**, co wytaruje wagę, a następnie położyć na wadze kolejne dziecko.

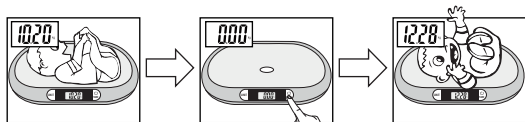

ZMIANA JEDNOSTEK WAGI

Aby zmienić jednostkę wagi (kg/lb / st / g), naciśnij przycisk **UNIT**.

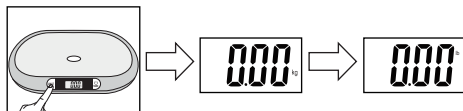

WSKAŹNIK PRZEKROCZENIA LIMITU WAGI

Jeśli ciężar dziecka przekracza maksimum dla tej wagi (20 kg), na ekranie pojawi się symbol „0-Ld”.

0-Ld

WSKAŹNIK NISKIEGO STANU BATERII

Waga zasygnalizuje niski stan baterii poprzez wyświetlenie na ekranie symbolu „Lo”.

Lo

OSTRZEŻENIA

- △ W trakcie użytkowania wagę należy umieścić na płaskiej, suchej, stabilnej i twardej powierzchni.
- △ Używaj tego urządzenia w domu, zgodnie z jego przeznaczeniem.
- △ Nie przeciążaj wagi, maksymalnie 20 kg.
- △ Unikaj potrząśnięcia lub uderzenia wagi.
- △ Nie zanurzaj w wodzie.
- △ Podczas przechowywania nie kładź niczego na wadze.
- △ Optymalna temperatura do obsługi i przechowywania wagi wynosi od 5 do 30 ° C.
- △ Do czyszczenia nie używać agresywnych detergentów ani środków ściernych

SPECYFIKACJA

- △ Wszelkie modyfikacje urządzenia są niedozwolone

MODEL	SBS-30860
WAGA	1600 g
TYP WYŚWIETLACZA	LCD 60×21 mm
WYMIARY	550×330×27 mm
ZAWARTOŚĆ ZESTAWU	Waga, instrukcja, 2 baterie typu AAA 1,5 V
WARUNKI DZIAŁANIA	Temperatura: 5-40°C; Wilgotność: 15-93%; Ciśnienie atmosferyczne: 70-106 kPa
WARUNKI PRZECHOWYWANIA I TRANSPORTU	Temperatura: -25-70°C; Wilgotność: ≤93%; Ciśnienie atmosferyczne: 70-106 kPa
CZUJNIKI	4 precyzyjne czujniki tensometryczne
MAKSYMALNE OBCIĄŻENIE	20 kg
DOKŁADNOŚĆ	0,01 kg
ZASILANIE	2 baterie typu AAA 1,5 V

GWARANCJA

URZĄDZENIE: VITAMMY infant (model SBS-30860)

GWARANT: Novamed.pl Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. j. ul. Traktorowa 143, 91-203 Łódź

WSPARCIE TECHNICZNE: INFOLINIA – TEL. 887 11 00 66 E-MAIL: POMOC@NOVAMED.PL

GWARANCJA: Gwarant zapewnia Nabywcę, że urządzenie VITAMMY, którego dotyczy niniejsza gwarancja, zostało zaprojektowane i wyprodukowane w oparciu o wysokie standardy jakości oraz o dobrej jakości urządzenia, brak wad materiałowych i produkcyjnych, które mogłyby zakłócać jego prawidłowe działanie.

W przypadku wad, uszkodzeń i usterek ujawnionych w okresie niniejszej gwarancji Gwarant bezpłatnie naprawi lub wymieni urządzenie na nowe bezpłatnie w możliwie krótkim terminie nie przekraczającym 14 dni.

TYP GWARANCJI: Niniejsza gwarancja zakłada, że reklamowany sprzęt będzie dostarczony do serwisu na koszt Nabywcy, bezpłatnie naprawiony oraz bezpłatnie dostarczony z powrotem do Nabywcy.

OKRES GWARANCJI: 24 miesiące na urządzenie. Bez gwarancji na części i akcesoria ulegające zużyciu podczas normalnego użytkowania: baterie

BIEG OKRESU GWARANCJI: Gwarancja jest ważna od dnia zakupu potwierdzonego dowodem zakupu, który należy dołączyć do karty gwarancyjnej.

OBZAR OBOWIĄZYWANIA GWARANCJI: Niniejsza gwarancja obowiązuje na terytorium Polski.

POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU STWIERDZENIA USTERKI: Aby skorzystać z gwarancji, w ciągu w ciągu 14 dni od chwili ujawnienia wady, należy skontaktować się z infolinią

pomocy i wsparcia technicznego w celu uzyskania pomocy i w razie konieczności uruchomienia procedury reklamacji. W ramach procedury reklamacyjnej reklamowany sprzęt należy wysłać na adres serwisu, dołączając niniejszą kartę gwarancyjną i dowód zakupu.

WARUNKI WAŻNOŚCI GWARANCJI: W celu zachowania ważności gwarancji razem z reklamowanym urządzeniem należy dostarczyć niniejszą kartę gwarancyjną (poprawnie wypełnioną i podpisaną) oraz dowód zakupu zawierający datę zakupu wraz z nazwą zakupionego urządzenia.

OGRANICZENIA I WYŁĄCZENIA GWARANCJI:

- Gwarancja nie przewiduje żadnej rekompensaty za szkody pośrednie lub bezpośrednie, wyrządzone osobom bądź urządzeniom, gdy urządzenie nie działało lub znajdowało się w serwisie.
- Gwarancja nie obejmuje mechanicznych uszkodzeń sprzętu oraz wad i uszkodzeń wynikłych na skutek:
 - niewłaściwego (niezgodnego z przeznaczeniem) lub w sposób niezgodny z instrukcją użytkowania
 - niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją przechowywania i konserwacji (np. użycia niewłaściwych środków czyszczących) oraz użycia niewłaściwych materiałów eksploatacyjnych
 - ingerencji nieautoryzowanego serwisu, samowolnych napraw, przeróbek i zmian konstrukcyjnych
 - przyczyn natury zewnętrznej (zjawisk atmosferycznych, niewłaściwego zasilania, itp.)
- Gwarancja nie obejmuje niesprawności produktu z powodu zmiany właściwości (obniżenia jakości) elementów, które ulegają naturalnemu zużyciu.
- Naprawami gwarancyjnymi nie są czynności związane z konserwacją i czyszczeniem urządzenia opisane w Instrukcji obsługi.

Pieczęć i podpis sprzedawcy
klienta

Data

Podpis

UTYLIZACJA NIEPOTRZEBNEGO SPRZĘTU PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW DOMOWYCH W UNII EUROPEJSKIEJ



Obecność tego symbolu na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że nie można pozbyć się tego produktu w taki sam sposób jak odpadów z gospodarstw domowych. W związku z tym jesteście Państwo odpowiedzialni za utylizację zużytego sprzętu i jesteście zobowiązani dostarczyć go do autoryzowanego punktu recyklingu niepotrzebnego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Sortowanie, usuwanie i recykling zużytego sprzętu przyczyni się do ochrony zasobów naturalnych i zapewni, że recykling odbywa się według zasad poszanowania zdrowia ludzkiego i środowiska. Aby uzyskać więcej informacji na temat punktów zbiórki zużytego sprzętu, należy skontaktować się z lokalnymi władzami bądź z lokalnym punktem utylizacji odpadów domowych.

Produkt posiada certyfikat CE



INFORMACJE KONTAKTOWE

PRODUCENT:

 **AEMAXX CO.,LTD**

4F, Building A, Donghu Industrial Park, No61, Dongpu Er Road, Tianhe District, Guangzhou, People's Republic of China

DYSTRYBUTOR:

NOVAMEDPL

Novamed.pl Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. j.

ul. Traktorowa 143; 91-203 Łódź, Poland

Infolinia pomocy i wsparcia technicznego: 887 11 00 66

Wyprodukowano w Chinach / Made in China

Wersja instrukcji: 01.06 / 14.05.2021