

OSTRZEŻENIE

- ⚠ Przed użyciem termometru dokładnie zapoznaj się z jego instrukcją obsługi.
- ⚠ Ryzyko zadławienia: połknięcie przykrywką i baterii stanowi duże niebezpieczeństwo. Dzieci mogą używać termometru wyłącznie w obecności osób dorosłych.
- ⚠ Nie używaj termometru do pomiaru temperatury w uchu.
- ⚠ Niniejszy termometr przeznaczony jest wyłącznie do pomiarów temperatury ciała w ustach, pod pachą lub w odbycie.
- ⚠ Nie trzymaj termometru w wysokich temperaturach, ponieważ może wybuchnąć.
- ⚠ Uwaga: użycie kapturka na czujnik może spowodować, że wynik temperatury będzie różnił się o ok. 0.1°C od rzeczywistej temperatury ciała.
- ⚠ Zaleca się przeprowadzenie kontroli działania termometru co dwa lata.
- ⚠ Jeśli termometr nie będzie używany przez dłuższy czas, wyjmij baterie.


PRZECZYTAJ UWAŻNIE PRZED UŻYCIEM TERMOMETRU

Niniejszy termometr elektroniczny gwarantuje szybki i dokładny pomiar temperatury ciała. Przed użyciem należy dokładnie zapoznać się z instrukcją obsługi, aby poznać wszystkie funkcje termometru oraz zapewnić dokładne wyniki pomiaru przez długi czas. Niniejszy termometr wyprodukowany jest zgodnie z systemem EN12470-3 9, ASTM E1112-00. Producent posiada certyfikaty ISO 13485:2012+AC:2012.

ZAWARTOŚĆ

Termometr, instrukcja obsługi, etui

OPIS URZĄDZENIA

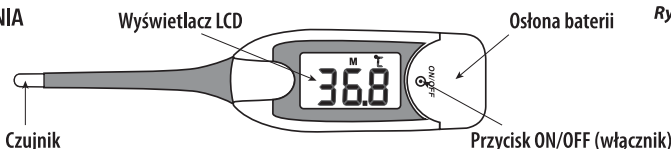

Rysunek 1

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI



- Nie zginać, ani nie rzucać termometrem. Termometr nie jest odporny na wstrząsy.
- Nie gotuj czujnika w celu dezynfekcji.
- Nie wystawiaj termometru na bezpośrednie działanie promieni słonecznych lub wysokich temperatur.
- Nie rozkręcaj termometru. Aby wymienić baterie, przeczytaj punkt „Wymiana baterii”.
- Nie zostawiaj termometru w pobliżu mikrofalówek lub telefonów komórkowych, aby nie powodować zakłóceń elektromagnetycznych.



Prąd stały.



Urządzenie typu B.



Uwaga! Zapoznaj się z instrukcją.



Numer seryjny



Producent



Autoryzowany Przedstawiciel w Unii Europejskiej

DANE TECHNICZNE

Zakres: 32°C - 42,9°C

Dokładność: $\pm 0.1^\circ\text{C}$ w zakresie 35,5°C - 42°C, $\pm 0.2^\circ\text{C}$ poza tym zakresem

W temperaturze pokojowej 18°C - 28°C

Czas pomiaru: 15 sekund.

Wyświetlacz: Ciekłokrystaliczny

Pamięć: Przechowywanie ostatniego wyniku pomiaru

Bateria: 1 x 1,5 VDC LR1130

Żywotność baterii: ok. 200 godzin ciągłej pracy

Wymiary: 12,4 x 1,8 x 0,9 cm

Waga: ok. 10 gramów (z baterią)

Warunki użytkowania:

Temperatura: 5°C - 40°C

Wilgotność względna: 15-85% RH

Warunki przechowywania i transportu:

Temperatura: MIN -20°C MAX 55°C

Wilgotność względna: $\leq 85\%$ RH

Wodoodporność: IP55

Klasyfikacja: Urządzenie typu B

OBSŁUGA

1. Naciśnij przycisk ON/OFF znajdujący się obok wyświetlacza LCD. Kiedy na ekranie pojawią się wszystkie elementy ekranu, usłyszysz sygnał dźwiękowy, a następnie wyświetli się ostatni zapisany wynik pomiaru. Po przeprowadzeniu autotestu termometr przejdzie w tryb pomiaru, na ekranie pojawią się symbole „L” i „°C”.


2. Umieść termometr w wybranym miejscu pomiaru (usta, odbył lub pod pachą):

a) **pomiar w ustach:** umieść termometr pod językiem, w miejscu gdzie na rysunku 2 znajdują się symbole „V”. Zamknij usta i oddychaj równomiernie przez nos, aby wdychane i wydychane powietrze nie wpływało na wynik pomiaru. Zakres prawidłowych temperatur wynosi 35,5°C-37,5°C.

b) **pomiar w odbycie:** nasmaruj wazeliną srebrną końcówkę czujnika dla łatwiejszego pomiaru. Delikatnie wsuń czujnik w odbył na głębokość ok. 1 cm.

Zakres prawidłowych temperatur wynosi 36,6°C-37,7°C.

c) **pomiar pod pachą:** wytrzyj pachę do sucha, umieść termometr pod pachą i przyciśnij termometr ramieniem do ciała. Z medycznego punktu widzenia pomiar pod pachą zawsze będzie nie dokładny i nie powinien być stosowany jeśli potrzebne jest precyzyjny wynik pomiaru. Zakres prawidłowych temperatur wynosi 34,7°C-37,2°C.

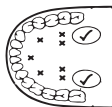

Rysunek 2


3. W trakcie przeprowadzania pomiaru miga symbol „°C”. Pomiar zakończy się gdy usłyszysz sygnał dźwiękowy – „Bi-Bi-Bi”. Na wyświetlaczu pojawi się wynik pomiaru – najwyższa zmierzona temperatura. Bez wyjątków należy utrzymać minimalny czas pomiaru (15 sekund) do chwili usłyszenia sygnału. Pomiar trwa także po sygnale, jeśli termometr nadal znajduje się w miejscu pomiaru. Po wyjściu termometru z miejsca pomiarowego wyświetlany wynik nie zmienia się. Między pomiarami należy zachować minimalny odstęp 30 sekund.

Uwaga: Jeśli wynik pomiaru jest niższy niż 32°C, na wyświetlaczu pojawi się symbol „Lo”; jeśli wynik jest wyższy niż 42°C, na wyświetlaczu pojawi się symbol „Hi”. Aby przedłużyć żywotność baterii, po zakończeniu pomiaru wyłącz termometr, naciskając przycisk ON/OFF. Termometr wyłączy się automatycznie po ok. 8 minutach, jeżeli nie będzie przez ten czas używany lub gdy nie zostanie wyłączony ręcznie.

5. Przechowuj termometr w etui ochronnym.

PRZECZYTAJ UWAŻNIE PRZED UŻYCIEM TERMOMETRU

1. Wymień baterię, gdy w prawym dolnym rogu pojawi się symbol: 
2. Zdejmij osłonę baterii i uszczelkę, jak pokazano na rys. 3.
3. Użyj przedmiotu zakończonego czubkiem, jak długopis, aby wyjąć zużytą baterię. Zutilizuj baterię zgodnie z przepisami (Utylizacja niepotrzebnego sprzętu przez użytkowników domowych w Unii Europejskiej). Wymień baterię na nową 1,5VDC LR1130. Sprawdź, czy bateria włożona jest zgodnie z polaryzacją (rys. 5).
5. Załóż z powrotem uszczelkę i osłonę baterii.

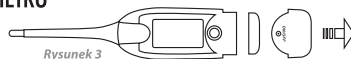

UTYLIZACJA NIEPOTRZEBNEGO SPRZĘTU PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW DOMOWYCH W UNII EUROPEJSKIEJ



Obecność tego symbolu na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że nie można pozbyć się tego produktu w taki sam sposób jak odpadów z gospodarstw domowych. W związku z tym jesteście Państwo odpowiedzialni za utylizację zużytego sprzętu i jesteście zobowiązani dostarczyć go do autoryzowanego punktu recyklingu niepotrzebnego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Sortowanie, usuwanie i recykling zużytego sprzętu przyczyni się do ochrony zasobów naturalnych i zapewnia, że recykling odbywa się w/g zasad poszanowania zdrowia ludzkiego i środowiska. Aby uzyskać więcej informacji na temat punktów zbiórki zużytego sprzętu, należy skontaktować się z lokalnymi władzami bądź z lokalnym punktem utylizacji odpadów domowych.

GWARANCJA

- Gwarant zapewnia Nabywcę, że urządzenie VITAMMY, którego dotyczy niniejsza gwarancja, zostało zaprojektowane i wyprodukowane w oparciu o wysokie standardy jakości oraz o dobrej jakości urządzenia, brak wad materiałowych i produkcyjnych, które mogłyby zakłócać jego prawidłowe działanie. Niniejsza gwarancja zakłada, że reklamowany sprzęt będzie dostarczony do serwisu na koszt Nabywcy, bezpłatnie naprawiony oraz bezpłatnie dostarczony z powrotem do Nabywcy.
- OKRES GWARANCJI: 24 miesiące na urządzenie.
- Części i akcesoria ulegające zużyciu podczas normalnego użytkowania: baterie nie podlegają gwarancji.
- Gwarancja jest ważna od dnia zakupu potwierdzonego dowodem zakupu, który należy dołączyć do karty gwarancyjnej.
- Niniejsza gwarancja obowiązuje na terytorium Polski.
- W celu zachowania ważności gwarancji razem z reklamowanym urządzeniem należy dostarczyć poniższą kartę gwarancyjną (poprawnie wypełnioną i podpisaną) oraz dowód zakupu zawierający datę zakupu wraz z nazwą zakupionego urządzenia. Niniejsza Gwarancja nie zachowuje ważności, gdy model i/lub numer seryjny (jeśli dostępny) jest zmienione, usunięte lub są nieczytelne.
- Gwarancja nie przewiduje żadnej rekompensaty za szkody pośrednie lub bezpośrednie, wyrządzone osobom bądź urządzeniom, gdy urządzenie nie działało lub znajdowało się w serwisie.
- Gwarancja nie obejmuje mechanicznych uszkodzeń sprzętu oraz wad i uszkodzeń wynikłych na skutek: niewłaściwego (niezgodnego z przeznaczeniem) lub w sposób niezgodny z instrukcją użytkowania; niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją przechowywania i konserwacji (np. użycia niewłaściwych środków czyszczących) oraz użycia niewłaściwych materiałów eksploatacyjnych; ingerencji nieautoryzowanego serwisu, samowolnych napraw, przeróbek i zmian konstrukcyjnych; przyczyn natury zewnętrznej (zjawisk atmosferycznych, przepięcia w sieci energetycznej, niewłaściwego zasilania, itp.)
- Gwarancja nie obejmuje niesprawności produktu z powodu zmiany właściwości (obniżenia jakości) elementów, które ulegają naturalnemu zużyciu.
- Naprawami gwarancyjnymi nie są czynności związane z konserwacją i czyszczeniem urządzenia opisane w Instrukcji obsługi.

INFOLINIA POMOCY I WSPARCIA TECHNICZNEGO: 887 11 00 66, e-mail: pomoc@novamed.pl

KARTA GWARANCYJNA

Model: VITAMMY CONTROL KXF-05

Data zakupu:

Podpis i pieczęć sprzedawcy

Dystrybutor / Distributed by:

Novamed.pl Sp. z o.o. S.K.A. ul. Traktorowa 143 91-203 Łódź POLAND



Kangfu Medical Equipment Factory

N0.380 Ningkang East Road, Yueqing, Zhejiang 325600,

People's Republic of China



ROVAL MED SRL Industriilor 2M, Sector 3, Bucharest 032895, Romania



Produkt zgodny
z wymogami MDD 93/42/EEC