


# LIBEREX

Odkurzacz do wagrów, zaskórników Liberex

Instrukcja obsługi

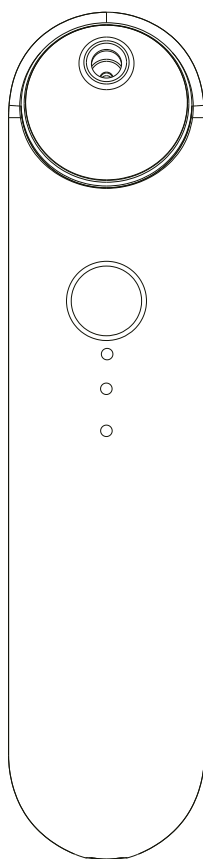


Dziękujemy za wybór odkurzacza do usuwania zaskórników Liberex. Przed użyciem należy uważnie przeczytać poniższe instrukcje.

1. Urządzenie zostało stworzone do celów kosmetycznych i jest przeznaczone do domowej pielęgnacji skóry. Nie należy używać go do celów medycznych.
2. Ten produkt nie jest odpowiedni dla części ciała, które miały kosmetyczne lub plastyczne operacje, kobiet w ciąży, pacjentów z chorobami serca oraz dzieci.
3. Ten produkt nie jest odpowiedni dla osób niepełnosprawnych fizycznie, sensorycznie lub umysłowo i muszą one mieć opiekuna z najbliższego otoczenia, który będzie monitorował i kierował korzystaniem z naszych produktów i będzie ponosił odpowiedzialność.
4. Nie otwieraj ani nie demontuj urządzenia samodzielnie.
5. Trzymaj urządzenie z dala od płomieni ognia.
6. Upuszczenie urządzenia może spowodować jego uszkodzenie.

Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

## Cechy produktu

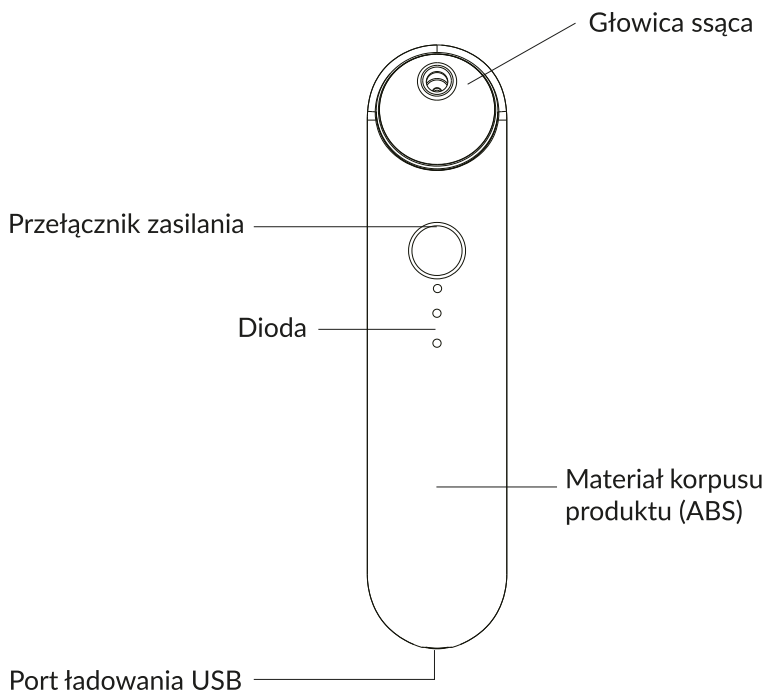

# Akcesoria produktu

Mała głowica



Odpowiednie do oczyszczania porów w trudno dostępnych obszarach. Może być stosowana w dowolnym miejscu na twarzy, nawet na wrażliwej skórze wokół oczu.

Duża głowica



Silne ssanie, idealne do uporczywych zaskórników.

Uwaga: Nie do stosowania wokół oczu.

Owalna głowica



Szczególnie nadaje się do stosowania na zewnętrznej stronie nozdrzy oraz wokół oczu i ust.


Diamantowa głowica  
mikrokryształiczna




Delikatne złuszczenie skóry twarzy. Unikaj ekspozycji na słońce przez 5-7 dni po użyciu tej głowicy ssącej.



Kabel ładujący USB

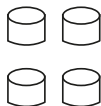

Filtr wymienny

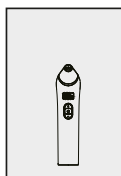

Instrukcja obsługi

## Wskazówki dotyczące stosowania

\*Ten produkt nie jest przeznaczony do stosowania na obszarach ciała, które zostały poddane jakimkolwiek zabiegom chirurgicznym lub posiadające blizny.

\*Jeśli masz zbyt wrażliwą skórę, zażywasz leki związane z dermatologią, jesteś w trakcie leczenia, w ciąży lub cierpisz na istniejące wcześniej schorzenia, przed użyciem urządzenia należy skonsultować się z lekarzem.

\*Przed użyciem urządzenia należy sprawdzić wrażliwość skóry na ramieniu, aby wybrać odpowiedni poziom intensywności.

\*W przypadku wystąpienia bólu lub dyskomfortu należy zaprzestać korzystania z urządzenia.

\*Nie należy używać urządzenia na tym samym obszarze skóry dłużej niż 30 sekund, aby uniknąć siniaków.

\*Urządzenie ssące należy stosować w zależności od stanu skóry, raz w tygodniu w przypadku skóry suchej, dwa razy w przypadku skóry tłustej, każdorazowo w ciągu 5 minut.

\* Po zakończeniu pielęgnacji skóry, skóra może być lekko mrowiąca i zarumieniona. Jest to normalne i zniknie w ciągu 30 minut. Można zastosować okład z lodu na 1-2 minuty w miejscach, gdzie pojawiają się siniaki.

\* Po zakończeniu pielęgnacji skóry należy zwrócić większą uwagę na nawilżanie i pielęgnację.

\* Nie należy stosować kremów peelingujących ani środków złuszczających przed lub po pielęgnacji skóry.

\* Przed użyciem należy upewnić się, że gąbka została włożona do filtra. Gąbka musi być sucha, w przeciwnym razie płyn uszkodzi urządzenie.

## Użycie

### Wyczyść pory

KROK 1: Oczyszczyć skórę z makijażu i zanieczyszczeń.

KROK 2: Zaczynij od otwarcia porów, myjąc twarz ciepłą wodą, parą wodną lub gorącym, mokrym ręcznikiem.

KROK 3: Wybierz głowicę ssącą, odpowiednio do różnych obszarów użytkowania.

KROK 4: Naciśnij przycisk włączania/wyłączania, aby włączyć urządzenie.

KROK 5: Sprawdź wrażliwość swojej skóry na ramieniu, aby wybrać pożądany poziom intensywności.

KROK 6: Skieruj głowicę ssącą na miejsce, w którym znajdują się zaskórniki i przesuwaj powoli, aby je usunąć. Poziomy intensywności można zmieniać w zależności od potrzeb.


## Wygładzanie drobnych zmarszczek

KROK 1: Zmień sondę na owalną, używaj na nosie, w kącie ust i innych miejscach, w których łatwo o drobne zmarszczki.

KROK 2: Naciśnij przycisk włączania/wyłączania, aby włączyć urządzenie.

KROK 3: Sprawdź wrażliwość skóry na swoim ramieniu, aby wybrać pożądany poziom intensywności.

KROK 4: Nałóż urządzenie na twarz zgodnie z załączoną grafiką. Powoli przesuwaj głowicę ssącą po twarzy, nie zatrzymując jej w jednym miejscu dłużej niż 2 sekundy.

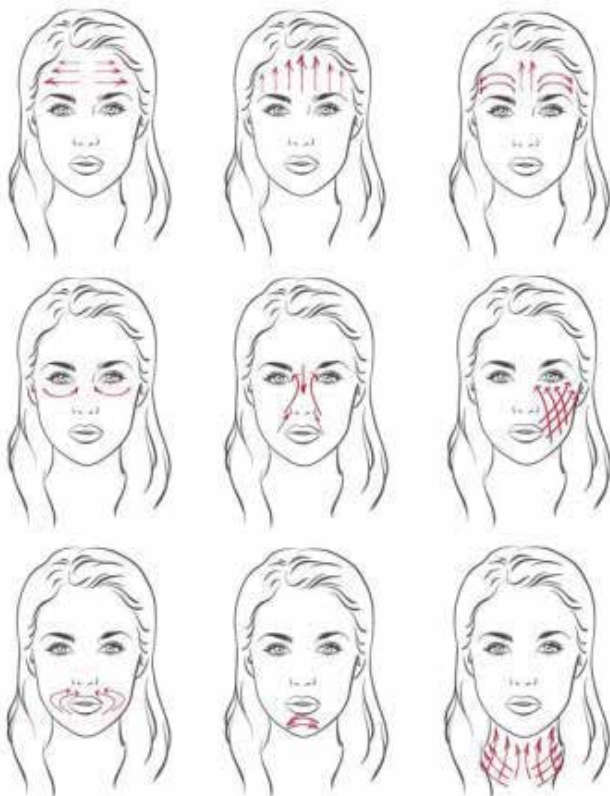

## Wygładzanie skóry

KROK 1: Wybierz diamentową mikrokrystaliczną głowicę ssącą.


KROK 2: Naciśnij przycisk włączania/wyłączania, aby włączyć urządzenie.

KROK 3: Sprawdź wrażliwość swojej skóry na ramieniu, aby wybrać pożądany poziom intensywności.

KROK 4: Przyłóż urządzenie do twarzy, zgodnie z załączoną grafiką. Powoli przesuwaj głowicę ssącą po twarzy, nie zatrzymując jej w jednym miejscu dłużej niż 2 sekundy.


### OSTRZEŻENIE!

\*Podczas wykonywania mikrodermabrazji należy unikać skóry powiek i ust.

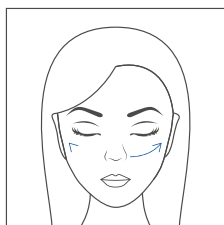


POLICZKI

Delikatnie przesuwaj od nosa na zewnątrz (przez 1 minutę)

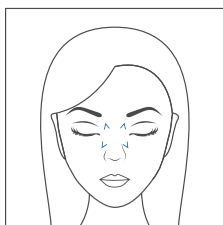


NOS

Delikatnie przesuwaj w górę i w dół, po bokach i środkowej części nosa (przez 30 sekund).

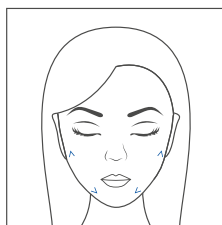


LINIA ŻUCHWY

Delikatnie przesuwaj w górę i w dół linii żuchwy (przez 30 sekund).

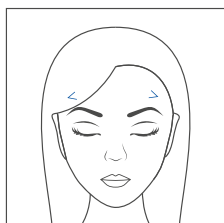


CZOŁO

Delikatnie przesuwaj od środka czoła na zewnątrz w kierunku skroni (przez 30 sekund).

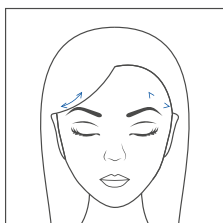

SKRONIE

Delikatnie przesuwaj od jednej do drugiej strony (przez 30 sekund).

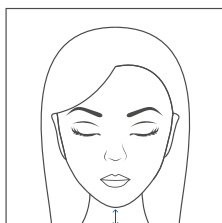

SZYJA

Delikatnie przesuwaj w górę i w dół szyi (przez 1 minutę).

## Zmiana nasadki ssącej



1. Przekręć nasadkę, aby zdjąć ją z urządzenia i zdejmij pokrywę z głowicy ssącej.



2. Umieścić filtr na głowicy ssącej, a następnie nałożyć na nią pokrywę. Upewnij się, że filtr jest suchy.



3. Umieść nasadkę, której chcesz użyć na głowicy ssącej.

**UWAGA: NALEŻY WYMIENIAĆ FILTR PO KAŻDYM UŻYCIU.**

## Najczęściej zadawane pytania

Ssanie jest dla mnie zbyt mocne - co mam zrobić?

Zalecamy rozpoczęcie pracy od pierwszego poziomu ssania. Bardzo ważne jest sprawdzenie wrażliwości skóry na ramieniu, aby wybrać pożądany poziom intensywności. Jeśli czujesz, że ssanie jest na niekomfortowym poziomie, można go obniżyć według własnego uznania.

Czy to urządzenie musi być używane z innymi narzędziami?

Aby uzyskać najlepszy rezultat odsysania zaskórników, należy użyć gorącego ręcznika na skórze przez 10-15 minut, aby najpierw całkowicie otworzyć pory.

Jak należy czyścić urządzenie/głowicę?

Po każdym użyciu należy wyczyścić głowicę ssącą, spłukując ją ciepłą wodą. Należy pozostawić głowicę ssącą do wyschnięcia na powietrzu. Aby wyczyścić jednostkę główną, przetrzyj ją miękką, wilgotną ściereczką.

Jak często należy korzystać z urządzenia?

Raz w tygodniu w przypadku skóry suchej, dwa razy w przypadku skóry tłustej, za każdym razem przez 5 minut.

Kiedy należy wymieniać głowice ssące/uszczelki/filtry?

Głowice ssące należy wymieniać mniej więcej co sześć miesięcy lub rzadziej. Jeśli gumowa uszczelka poluzuje się lub ulegnie uszkodzeniu, można ją wymienić w dowolnym momencie. Filtry należy wymieniać po każdym użyciu.

Kiedy nie należy go używać?

Nie używaj odkurzacza do zaskórników, jeśli masz nadmierny trądzik, nadmiernie wrażliwą skórę, zimne owrzodzenia, pęcherze, otwarte rany, zakażenia grzybicze infekcje lub choroby skóry, takie jak trądzik różowaty, łojotokowe zapalenie skóry, egzema, łuszczyca, znamiona wypukłe, opryszczka, stany zapalne lub zaczerwienienie. Jeśli nie jesteś pewien, czy powinieneś używać tego urządzenia, skonsultuj się najpierw z lekarzem.

Czy można dzielić się urządzeniem z inną osobą?

Tak, pod warunkiem, że główki ssące są dokładnie czyszczone i nie występują żadne choroby, które mogłyby zostać przeniesione między wami, np. grzyby i inne schorzenia.



## Ochrona środowiska



Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.



Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkowania, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.

Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji dystrybutora / producenta dostępne na stronie internetowej <https://serwis.innpro.pl/gwarancja.php>