


# ANLAN

## DEPILATOR IPL

### Instrukcja obsługi

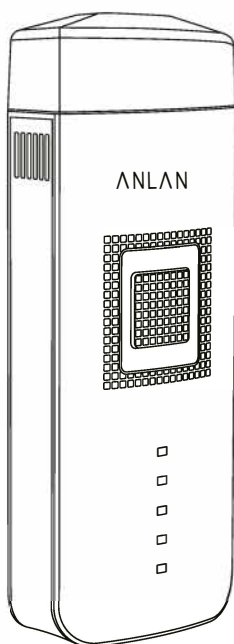

\*Przed użyciem należy dokładnie zapoznać się z instrukcją obsługi i zachować ją w bezpiecznym miejscu. Prosimy o dołączenie niniejszej instrukcji w przypadku przekazania tego produktu innym użytkownikom.

## Ostrzeżenia

1. Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego lub prywatnego, ale nie do użytku komercyjnego.
2. Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie dla osób powyżej 18 roku życia.
3. Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem.
4. Przed każdym użyciem należy sprawdzić szczelność urządzenia i przewodu zasilającego.
5. Nie wolno uruchamiać urządzenia, jeśli jest ono uszkodzone.
6. Nie używaj urządzenia w pobliżu wanien, zlewów, pryszniców lub innych zbiorników zawierających wodę lub inne płyny - ryzyko porażenia prądem!
7. Zawsze upewnij się, że urządzenie jest stabilne i wypoziomowane.
8. Nigdy nie należy patrzeć na laser.
9. Nie wolno wkładać żadnych przedmiotów do otworów wentylacyjnych urządzenia.
10. Upewnij się, że otwory wentylacyjne urządzenia nie są zasłonięte.

## Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

Przed użyciem urządzenia należy uważnie przeczytać instrukcje dotyczące bezpieczeństwa i dokładnie ich przestrzegać w przypadku korzystania z urządzenia do usuwania włosów ANLAN. Nieprzestrzeganie poniższych zaleceń może spowodować obrażenia ciała lub szkody materialne. Zachowaj niniejszą instrukcję obsługi i udostępnij ją innym użytkownikom. Należy upewnić się, że niniejsza instrukcja zostanie dołączona w przypadku przekazania urządzenia osobom trzecim.

1. Nie należy używać depilatora ANLAN w czasie ciąży lub karmienia piersią.
2. Jeśli na skórze pojawi się silne zaczerwienienie, pęcherze lub pieczenie, należy natychmiast zaprzestać korzystania z urządzenia!
3. Na 48 godzin przed pierwszym użyciem urządzenia do usuwania owłosienia ANLAN IPL należy wykonać test zgodności ze skórą na niewielkim obszarze skóry w miejscu planowanego zabiegu.
4. Nigdy nie należy patrzeć bezpośrednio na światło wydobywające się z kasy. Produkt ten może emitować niebezpieczne promieniowanie optyczne. Upewnij się, że przezroczysta powierzchnia wkładu jest całkowicie w kontakcie ze skórą.
5. Nigdy nie próbuj emitować impulsów światła w powietrze!
6. Zapoznaj się z tabelą kolorów włosów i skóry, wybierz natężenie światła najlepsze dla Twojego koloru skóry i włosów lub czy ta metoda jest dla Ciebie odpowiednia (jeśli nie, jest to oznaczone znakiem "X" w tabeli).
7. Nie należy używać urządzenia do usuwania włosów ANLAN IPL na naturalnie ciemnej skórze lub opalanej skórze lub po niedawnym naświetlaniu. Leczenie ciemnej skóry za pomocą urządzenia do usuwania włosów ANLAN IPL może mieć szkodliwe skutki takie jak oparzenia, pęcherze i zmiana koloru skóry (np. hipopigmentacja).

9. Urządzenie do depilacji ANLAN IPL działa najlepiej na ciemniejszych typach włosów lub na włosach zawierających więcej melaniny. Czarne i ciemnobrązowe włosy reagują lepiej i chociaż brązowe i jasnobrązowe włosy również reagują, zazwyczaj wymagają więcej sesji depilacji. Może wystąpić reakcja na kolor czerwony. Urządzenie do depilacji ANLAN IPL zazwyczaj nie działa na włosy białe, siwe lub blond, chociaż niektórzy użytkownicy zauważyli rezultaty po kilku sesjach depilacji.
10. Urządzenie do depilacji ANLAN IPL może powodować tymczasową pigmentację.
11. Nie należy próbować otwierać ani naprawiać urządzenia do usuwania włosów ANLAN IPL. Otwierając urządzenie do usuwania włosów ANLAN IPL, można zetknąć się z niebezpiecznymi elementami elektrycznymi lub z pulsującą energią świetlną, co może prowadzić do poważnych obrażeń lub trwałego uszkodzenia oczu.

## Obszary zabronione

### **Nigdy nie należy używać depilatora ANLAN w następujących miejscach:**

- Na błonach śluzowych w nosie i uszach.
- Powyżej lub obok aktywnego implantu, takiego jak rozrusznik serca, urządzenie do inkontynencji, pompa insulinowa itp.
- Na twarzy nad policzkiem, wokół oczu, brwi lub rzęsach, ponieważ może to spowodować poważne uszkodzenie oczu.
- Na sutkach, narządach płciowych (męskich lub żeńskich) lub wokół odbytu.
- Na kolczykach lub innych metalowych przedmiotach, takich jak biżuteria.
- Na tatuaż lub makijaż permanentny w miejscu, które ma być leczone.
- Na brązowych lub czarnych plamach, takich jak duże piegi, znamiona, plamy wątrobowe, pęcherze lub brodawki.
- W przypadku egzemy, łuszczycy, zmian skórnych, otwartych ran lub ostrych zakażeń. Przed użyciem urządzenia do depilacji ANLAN IPL należy poczekać, aż dotknięty obszar się zagoi.
- Na uszkodzonej lub popękanej skórze lub w miejscach, gdzie istnieje ryzyko wystąpienia nowotworu złośliwego.
- Na części ciała, na której później może pojawić się owłosienie.



### **Nie należy używać urządzenia do usuwania włosów ANLAN IPL na opalanej skórze lub po niedawnej ekspozycji na słońce!**


Nie należy używać depilatora ANLAN IPL w ciągu 2 tygodni od ekspozycji na słońce (lub więcej niż 15 minut bezpośredniego działania promieni słonecznych), ponieważ może to spowodować poważne poparzenia lub uszkodzenia skóry. Depilowanie laserowe skóry, która niedawno była narażona na działanie promieni słonecznych może mieć szkodliwe skutki, takie jak oparzenia, pęcherze i zmiany w kolorze skóry (hiper- lub hipopigmentacja). Unikaj bezpośredniej ekspozycji na słońce przez ponad 15 minut przez co najmniej 48 godzin po zabiegu. Jeśli skóra poddana niedawno zabiegowi jest wystawiona na słońce w tym okresie, należy pamiętać o zastosowaniu kremu z filtrem SPF 30 lub wyższym.

## Zakaz

### Nie należy używać urządzeń do usuwania włosów ANLAN, jeśli pacjent przyjmuje którykolwiek z następujących środków:

- Jeśli przyjmujesz leki, które zwiększają wrażliwość skóry na światło, w tym niesteroidowe leki przeciwzapalne (np. aspiryna, ibuprofen, paracetamol), tetracykliny, fenotiazyny, tiazydowe leki moczopędne, sulfonilomoczniki, sulfonamidy, DTIC, fluorouracyl, winblastyna, alfa-gryzofulwina, hydroksykwasy (AHA), beta-hydroksykwasy (BHA), RetinA®, Accutane® i / lub miejscowo stosowane retinoidy.
- Jeśli w ostatnim czasie byłeś lub jesteś leczony kwasem azelainowym.
- Jeśli w ciągu ostatnich dwóch tygodni przyjmowałeś antybiotyki tetracyklinowe.
- Jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy byłeś leczony preparatem Accutane® (izotretynoina).
- Jeśli w ciągu ostatnich 3 miesięcy stosowałeś dietę sterydową.
- Jeśli w ciągu ostatnich 6 do 8 tygodni stosowano peeling lub inną metodę wygładzania skóry.
- Jeśli pacjent był poddawany radioterapii lub chemioterapii w ciągu ostatnich 3 miesięcy. Powyższa lista nie jest wyczerpująca. Jeśli nie jesteś pewien, czy urządzenie do usuwania włosów ANLAN IPL jest dla Ciebie bezpieczne, poproś swojego lekarza lub dermatologa o poradę.

## Opis produktu

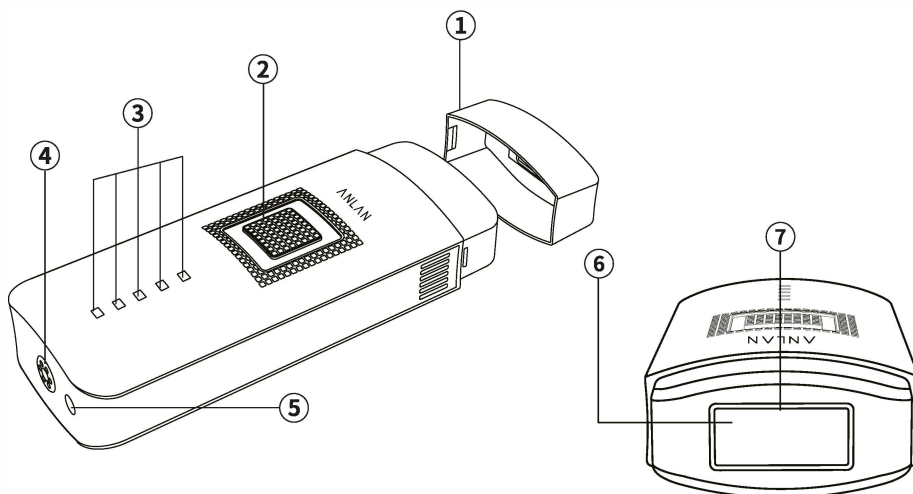

- ① Pokrywa
  - ② Przycisk lampy błyskowej
  - ③ Wskaźnik poziomu (1-5)
  - ④ Przycisk zasilania
  - ⑤ Port zasilania
  - ⑥ Wbudowany sensor skóry
  - ⑦ Port terapii światłem
- ※ Wciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy by włączyć/ wyłączyć urządzenie
- ※ Szybko wciśnij by wybrać poziom mocy

- ※ Depilator ANLAN IPL jest wyposażony w zintegrowany sensor kontaktu ze skórą, którego celem jest ochrona oczu. Impuls świetlny nie będzie emitowany jeśli depilator nie posiada wystarczającego kontaktu ze skórą.
- ※ Depilator ANLAN IPL posiada wbudowaną ochronę przed promieniowaniem UV, która blokuje szkodliwe promienie UV.

## Informacje o produkcie

Obszar działania	4cm <sup>2</sup>
Światło	IPL (intensywne światło impulsowe) do użytku domowego
Długość fali	530-1150nm
Energia promieniowania	1.3 -5.3J/cm <sup>2</sup>
Poziomy napromieniowania	5
Zasilanie	24V/2A
Prędkość pulsowania	1 impuls co 1,4-3 sekundy
Maksymalna moc w impulsie	50W
W zestawie	Depilator IPL Ładowarka AC Maszynka do golenia Okulary ochronne Flanelowa torba


## Informacje o produkcie



Depilator laserowy IPL\*1




Ładowarka AC\*1

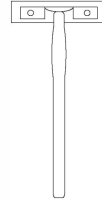


Maszynka do golenia\*1



Okulary ochronne\*1

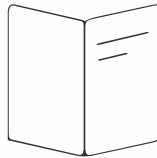

Instrukcja obsługi\*1

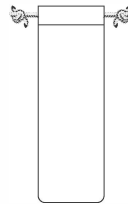


Flanelowa torba\*1

## Definicja

Depilator laserowy IPL jest stosowany do usuwania zbędnego owłosienia, a także może trwale ograniczyć wzrost włosów. Depilator IPL można stosować na różnych obszarach ciała takich jak: twarz, nogi, ramiona, pachy, okolice ust, okolice bikini.

## Fazy wzrostu włosa

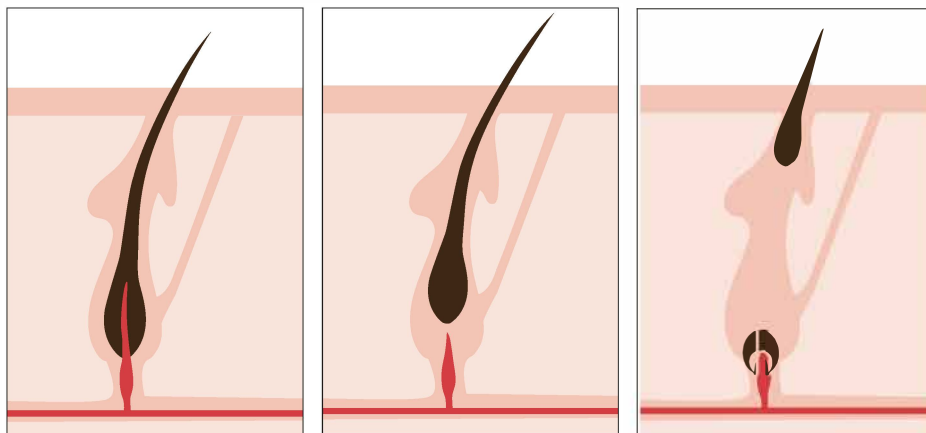

1 Faza aktywnego wzrostu

2 Faza degradacji

3 Faza spoczynku

**Każdy włos w naszym organizmie przechodzi przez trzy fazy cyklu wzrostu włosa:**

fazę aktywnego wzrostu, fazę degradacji i fazę spoczynku.

**Fazy te mają znaczący wpływ na działanie depilacji IPL:**


faza aktywnego wzrostu to faza wzrostu, podczas gdy faza degradacji i faza spoczynku to fazy odpoczynku.

※ Długość pełnego cyklu wzrostu włosa jest zależna od osoby i części ciała, na której włosy rosną, ale zwykle wynosi od 18 do 24 miesięcy. W tym czasie większość mieszków włosowych na powierzchni skóry znajduje się w fazie spoczynku.

Urządzenie do usuwania włosów ANLAN IPL jest najbardziej skuteczne, gdy włosy znajdują się w fazie aktywnego wzrostu.

※ Należy pamiętać, że aby uzyskać całkowite usunięcie włosów za pomocą depilatora ANLAN IPL, konieczne jest korzystanie z niego przez pełny cykl wzrostu włosa.

## Zasady działania

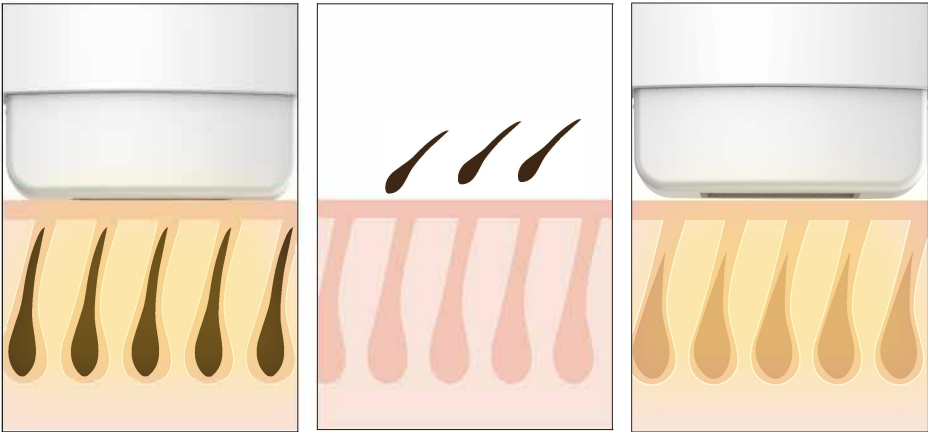

- ※ IPL oznacza "intensywne światło impulsowe". Gdy urządzenie jest umieszczone przy skórze, delikatne impulsy intensywnego światła są kierowane na mieszek włosowy w celu usunięcia korzenia włosa bez wpływu na otaczający go obszar. Mieszek włosowy zostaje uszkodzony w wyniku trwałego uszkodzenia korzenia włosa. Energia świetlna jest pochłaniana przez melaninę we włosie, co powoduje szybkie nagrzewanie się mieszka włosowego, a ciepło niszczy komórki odpowiedzialne za wzrost włosa. Ostatecznie zapobiega to wzrostowi nowych włosów.
- ※ Depilacja IPL działa tylko wtedy, gdy włos znajduje się w specjalnej fazie wzrostu. Z tego powodu rezultaty zabiegu IPL nie pojawiają się po pierwszym użyciu urządzenia. Zamiast tego, aby zobaczyć rezultaty, zwykle potrzeba kilku zabiegów.

## Przygotowanie przed użyciem

### 1. Kompatybilność

\* Przed pierwszym użyciem depilatora ANLAN IPL należy sprawdzić, czy jest on odpowiedni dla użytkownika. Aby sprawdzić, czy urządzenie ANLAN IPL jest odpowiednie dla Ciebie, przeczytaj "Ostrzeżenia i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa" i skorzystaj z "Tabeli kolorów skóry" na ostatniej stronie instrukcji, aby określić, jaka jest prawidłowa intensywność światła dla Twojej skóry i typu włosa. (Nieodpowiednia metoda korzystania z urządzenia jest oznaczona znakiem "x" w tabeli).



## 2. Test zgodności ze skórą

※ Przed użyciem urządzenia do usuwania włosów ANLAN IPL należy wykonać test zgodności ze skórą. Test tolerancji skóry ma na celu określenie reakcji skóry na zabieg z użyciem urządzenia do usuwania owłosienia ANLAN IPL. Pomaga on również określić optymalny poziom energii dla każdego obszaru zabiegowego. Test tolerancji skóry należy przeprowadzić na każdym obszarze skóry, który ma zostać poddany zabiegowi na 48 godzin przed pełnym zabiegiem.

※ W przypadku zabiegów na twarz test tolerancji skóry powinien być przeprowadzony na nieowłosionej powierzchni, np. pod uchem lub z boku szyi.

① Przed użyciem upewnij się, że skóra jest ogolona, czysta i sucha (wolna od pozostałości takich jak puder, krem, makijaż, antyperspirant czy dezodorant..

\* NIE myj skóry łatwopalnymi płynami takimi jak alkohol, czy aceton na krótko przed użyciem urządzenia.

② Skonfiguruj urządzenie.

③ Przyłóż okienko lampy błyskowej na wybrane miejsce i upewnij się, że jest w pełnym kontakcie ze skórą.

④ Urządzenie automatycznie ustawione jest na najniższy tryb mocy. Aktywuj pierwszy impuls świetlny poprzez wciśnięcie przycisku lampy błyskowej. Pojawi się jasne światło i trzaskający dźwięk. Możesz poczuć lekkie uczucie pieczenia/nagrzania. Urządzenie będzie gotowe do kolejnego użycia po 3 sekundach.

⑤ Odsuń urządzenie od skóry i umieść je w kolejnym miejscu na powierzchni testowej. Uwaga! Zwiększ poziom mocy pulsowania tylko jeśli nie odczuwasz dyskomfortu przy aktualnym poziomie. Jeśli czujesz dyskomfort przy poziomie 1 nie zwiększaj poziomu mocy.

⑥ Możesz zwiększyć poziom energii o 1 przy użyciu przycisku zasilania. LEDy poziomu mocy będą świecić zależnie od wybranego poziomu mocy.

⑦ Powtórz krok 5 i 6 jeśli nie odczuwasz dyskomfortu, aż do uzyskania poziomu 6.

Przerwij test jeśli zaczniesz czuć dyskomfort gdyż istnieje ryzyko wystąpienia niebezpiecznych konsekwencji podczas zwiększania poziomu mocy. Należy natychmiast przerwać test jeśli zauważysz takie skutki uboczne jak zaczerwienienie, czy pojawianie się pęcherzy.

⑧ Odczekaj 48 godzin i dokładnie sprawdź miejsce testu. Jeśli skóra wygląda normalnie (brak zaczerwienienia lub innych skutków ubocznych) możesz kontynuować depilację laserową na najwyższym wybranym przez siebie poziomie mocy podczas trwania testu. Jeśli zauważysz skrajne zaczerwienienie, opuchliznę lub pęcherze nawet na niskim poziomie mocy nie używaj ponownie urządzenia w danym miejscu.

\* Nie należy przeprowadzać pełnego leczenia na poziomie energii, który nigdy wcześniej nie był testowany! Na testowany obszar należy przeprowadzić kurację nie wcześniej niż 1 tydzień po zakończeniu testu.

### 3. Planowanie

- ※ Typowy cykl wzrostu włosa może trwać od 18 do 24 miesięcy. W tym czasie może być konieczne przeprowadzenie kilku sesji z użyciem urządzenia do usuwania włosów ANLAN IPL, aby uzyskać długotrwałe usunięcie owłosienia. Skuteczność usuwania włosów jest różna u różnych osób i zależy od obszaru ciała i koloru włosów oraz sposobu użycia urządzenia do usuwania włosów ANLAN IPL. Typowy plan usuwania włosów za pomocą urządzenia do usuwania włosów ANLAN IPL podczas pełnego cyklu wzrostu włosów:
- ※ Pierwsze 3-4 sesje depilacji za pomocą urządzenia do depilacji ANLAN IPL powinny odbywać się w odstępach około dwóch tygodni.
- ※ Sesje depilacji 5-7 za pomocą urządzenia do depilacji ANLAN IPL powinny odbywać się w odstępie około czterech tygodni.
- ※ Następnie należy okresowo i w razie potrzeby korzystać z urządzenia do depilacji ANLAN IPL, aż do uzyskania długotrwałych rezultatów. Odpowiada to zalecanemu planowi leczenia, który, jak wykazano, pozwala osiągnąć najlepsze rezultaty. Można również inaczej opracować swój indywidualny plan leczenia i nadal uzyskiwać zadowalające wyniki.
- ※ Jeśli ta sama część ciała będzie poddawana zabiegowi częściej niż raz na dwa tygodnie, wyniki usuwania włosów nie ulegną poprawie.
- ※ Nie należy przeprowadzać zabiegu na tym samym obszarze skóry więcej niż raz na sesję depilacji! Wielokrotne poddawanie danego obszaru skóry zabiegowi podczas sesji usuwania włosów może zwiększyć prawdopodobieństwo wystąpienia skutków ubocznych. Należy starać się unikać nakładania się impulsów.


### 4. Budowanie zaufania

\* Jeśli urządzenie do usuwania włosów ANLAN IPL jest używane zgodnie z instrukcjami zawartymi w niniejszej instrukcji, skutki uboczne i powikłania związane z używaniem urządzenia do usuwania włosów ANLAN IPL występują rzadko. Jednak każdy zabieg kosmetyczny, także ten opracowany do użytku domowego, wiąże się z pewnym ryzykiem. Dlatego ważne jest, aby użytkownik zrozumiał i zaakceptował ryzyko i powikłania, które mogą wystąpić w przypadku systemów depilacji światłem pulsacyjnym do użytku domowego.


Komplikacje	Prawdopodobieństwo wystąpienia komplikacji	Skutki uboczne	Prawdopodobieństwo wystąpienia skutków ubocznych
Skutki wielokrotnego stosowania światła pulsacyjnego na tym samym obszarze skóry	Nieznaczne	Lekkie podrażnienie skóry	Nieznaczne
		Zaczerwienienie skóry	Nieznaczne
		Zwiększona wrażliwość skóry	Nieznaczne
		Rany i oparzenia	Rzadkie
		Blizny	Rzadkie
		Zmiana pigmentu	Rzadkie
		Nadmierne zaczerwienienie i opuchlizna	Rzadkie
		Infekcja	Znikome
		Krwiak	Znikome

## Użytkowanie


- ※ Przed użyciem należy ogolić obszar, który ma zostać depilowany.
- ※ Podczas depilacji IPL wytwarzane jest ciepło, które może powodować zwęglenie lub przypalenie włosów. Przed użyciem depilatora należy ogolić wybrane miejsce maszynką do golenia.
- ※ Przed użyciem należy upewnić się, że skóra jest ogolona, czysta i sucha (bez pozostałości takich jak puder, krem, makijaż, antyperspirant lub dezodorant).  
Przed użyciem należy założyć okulary ochronne.

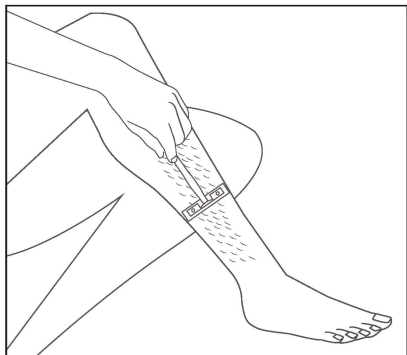


1. Użyj maszynki do golenia by pozbyć się włosów, które muszą być usunięte.

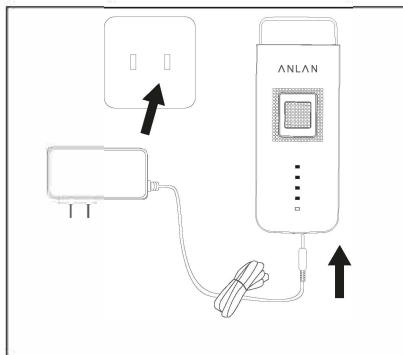


2. Podłącz ładowarkę do gniazdka. Drugi koniec umieść w specjalnym porcie w depilatorze IPL.

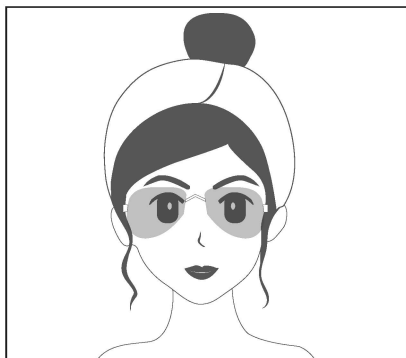


3. Załóż okulary ochronne.

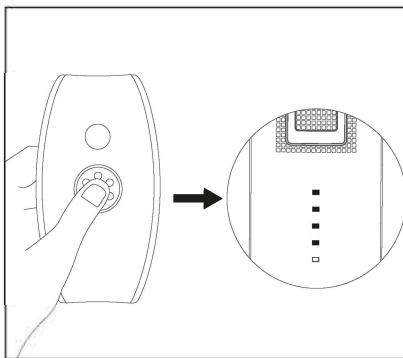

4. Wciśnij przycisk zasilania i przytrzymaj przez 3 sekundy by włączyć urządzenie. Wciśnij szybko ten sam przycisk by wybrać poziom mocy. LEDy podświetlą się zależnie od wybranego poziomu od góry do dołu (od 1 do 5).

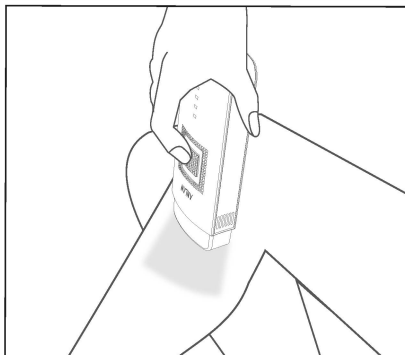

5. Gładką stroną sensora dotknij skóry, która ma być depilowana. Po wciśnięciu przycisku pojawi się rozbłysk światła i wyraźny dźwięk. Możesz poczuć lekkie uczucie pieczenia lub nagrzania.

 <b>UWAGA</b>	Wykonaj test tolerancji skóry na dwa dni przed pierwszym użyciem
	Wybierz odpowiedni poziom mocy zgodny z wynikiem testu tolerancji skóry.
	Urządzenie do usuwania włosów ANLAN IPL posiada funkcję "flash glide". Jeśli naciśniesz i przytrzymasz przycisk przez 3 sekundy, impuls świetlny będzie wyzwalany automatycznie co 3 sekundy, więc nie musisz za każdym razem naciskać przycisku zwalniającego.

- ※ Nie traktować tego samego obszaru skóry więcej niż raz podczas jednej sesji usuwania włosów! Wielokrotne poddawanie tego samego obszaru skóry zabiegom w trakcie jednej sesji depilacji może zwiększyć prawdopodobieństwo wystąpienia skutków ubocznych. Należy starać się unikać nakładania się impulsów.
- ※ Impulsy urządzenia do usuwania włosów ANLAN IPL należy stosować w liniach - zaczynając od jednego końca każdej linii i przechodząc do drugiego końca. Technika ta pozwala lepiej kontrolować obszary skóry, które były już poddawane zabiegowi, a także uniknąć wielokrotnego poddawania tego samego obszaru zabiegowi lub nakładania się na siebie różnych obszarów skóry.

## Po zastosowaniu

### Po zabiegu

- Po zakończeniu depilacji za pomocą urządzenia ANLAN IPL odchyl urządzenie i naciśnij wyłącznik zasilania, aby je wyłączyć.
- Odłącz przewód zasilający od gniazdka.
- Po każdej depilacji zaleca się wyczyszczenie urządzenia do depilacji ANLAN IPL, zwłaszcza jego powierzchni.
- Po wyczyszczeniu zaleca się przechowywanie urządzenia do depilacji ANLAN IPL w oryginalnym pudełku i z dala od wody.

### Ostrzeżenia przed depilacją twarzy

- Nigdy nie używaj depilatora ANLAN IPL na twarzy z funkcją "flash-glide".
- Nie należy używać depilatora ANLAN IPL na twarzy powyżej kości policzkowych ani na oczach, brwiach i rzęsach, ponieważ może to spowodować poważne uszkodzenie oczu.
- Nie należy używać urządzenia do usuwania włosów ANLAN IPL na błonach śluzowych nosa i uszu.
- Owłosienie na twarzy może mieć podłoże hormonalne, dlatego do trwałej redukcji owłosienia może być konieczne przeprowadzenie kilku sesji.
- Należy unikać depilacji nozdrzy i warg, ponieważ te obszary są bardziej wrażliwe.
- Można "zagiąć" wargi do środka lub docisnąć je do siebie, aby zacieśnić obszar poddawany zabiegowi, albo nałożyć grubą białą kredkę na wargi i ich krawędź. Ta biała linia gwarantuje, że energia błysku zostanie odbita i nie dotrze do ust, jeśli przypadkowo skierujemy impuls w ich stronę.

### Pielęgnacja twarzy

- Zastosować balsam łagodzący, np. z aloesu.
- Przez co najmniej 24 godziny należy unikać stosowania kremów wybielających lub podobnych produktów, ponieważ mogą one podrażnić skórę poddaną zabiegowi.

- Należy unikać usuwania włosów z leczonych miejsc za pomocą wosku lub wrywania. Należy pamiętać, że uzyskania całkowitych rezultatów usuwania włosów może potrwać do momentu ukończenia pełnego cyklu wzrostu włosa.

## Q&A

**Q. Czy depilator ANLAN IPL jest naprawdę skuteczny?**

**A. Tak.** Testy kliniczne przeprowadzone przez lekarzy wykazały, że technologia urządzenia do depilacji ANLAN IPL pozwala bezpiecznie osiągnąć długotrwałe rezultaty w zakresie usuwania owłosienia.

**Q. Na jakich częściach ciała mogę stosować urządzenie do usuwania owłosienia ANLAN IPL?**

**A. Urządzenie do depilacji ANLAN IPL zostało opracowane do usuwania owłosienia z całego ciała. Najczęstsze obszary poddawane działaniu depilatora ANLAN IPL to nogi, pachy, ramiona, linia bikini i twarz pod kośćmi policzkowymi.**

**Q. Jak długo trwa sesja zabiegowa z użyciem urządzenia do usuwania owłosienia ANLAN IPL?**

**A. Czas zabiegu może się różnić w zależności od obszaru ciała, który ma zostać poddany zabiegowi. Zabieg na całe ciało (nogi, ramiona, pachy, linia bikini i twarz pod kośćmi policzkowymi) trwa około 26 minut. Ponieważ urządzenie do usuwania owłosienia ANLAN IPL działa normalnie na prąd elektryczny, można go używać tak długo, jak to konieczne do przeprowadzenia pełnej sesji usuwania owłosienia na wybranej części ciała.**

**Q. Czy urządzenie do usuwania włosów ANLAN IPL jest bezpieczne?**

**A. Urządzenie do usuwania włosów ANLAN IPL zostało zaprojektowane z myślą o bezpieczeństwie użytkownika i wykorzystuje technologię przetestowaną klinicznie. Jednak urządzenie to, podobnie jak każdy inny produkt lub urządzenie elektroniczne przeznaczone do stosowania na skórze, musi być używane zgodnie z instrukcją obsługi i informacjami dotyczącymi bezpieczeństwa dla użytkowników.**

**Q. Czy urządzenie do usuwania włosów ANLAN IPL powoduje ból?**

**A. Przy prawidłowym stosowaniu większość użytkowników depilatora ANLAN IPL zgłasza, że odczuwa lekkie uczucie ciepła po podaniu impulsu świetlnego. Użytkownicy z grubszymi, ciemniejszymi włosami mogą odczuwać nieco większy dyskomfort, ale znika on po zakończeniu sesji depilacji. Urządzenie do depilacji ANLAN IPL ma 5 ustawień mocy, których można używać w zależności od wrażliwości użytkownika.**

**Q. Jak często należy używać urządzenia do usuwania włosów ANLAN IPL?**

**A.** W przypadku stosowania urządzeń do depilacji ANLAN IPL do leczenia owłosienia, pierwsze cztery sesje należy wykonywać co dwa tygodnie. Jeśli włosy odrastają, wszystkie pozostałe zabiegi należy przeprowadzać aż do uzyskania pożądanego efektu.

W przypadku depilacji włosów na twarzy pod kośćmi policzkowymi, pierwsze sześć sesji należy wykonywać co dwa tygodnie. Jeśli włosy odrastają, wszystkie inne zabiegi należy wykonywać do momentu uzyskania pożądanego efektu.

**Q.** Czy urządzenie do usuwania włosów ANLAN IPL jest skuteczne w przypadku włosów białych, siwych lub blond?

**A.** Jakość zabiegu IPL zależy głównie od koloru włosów i rodzaju skóry. Usuwanie włosów za pomocą impulsów świetlnych działa szczególnie dobrze w przypadku osób o jasnej skórze i naturalnie ciemnych włosach. Jeśli masz siwe, białe, rude lub blond włosy, urządzenie IPL zwykle daje niewielki efekt lub nie daje go wcale. Podobnie, urządzenie do depilacji IPL nie jest odpowiednie dla osób o ciemnej skórze: kontrast między włosami a ciemną skórą jest zazwyczaj niewystarczający do uzyskania efektu.

**Q.** Czy mogę używać urządzenia do usuwania włosów ANLAN IPL na brązowej lub czarnej skórze?

**A.** Jeśli masz ciemną skórę, technologia IPL może ją uszkodzić. Jeśli kolor skóry nie różni się od koloru włosów, światło może skupić się na skórze, a nie na włosach.

**Q.** Kiedy można zobaczyć rezultaty działania urządzenia do usuwania włosów ANLAN IPL?


**A.** Podobnie jak w przypadku każdego urządzenia do depilacji świetlnej lub laserowej, rezultaty nie są widoczne od razu i można nawet pomyśleć, że nic się nie stało. Wygląd włosów czasami odrasta po sesji depilacji, ale na ogół wiele z nich po prostu wypada po dwóch tygodniach. Ponadto włosy rosną w trzech różnych fazach, a urządzenie do usuwania włosów ANLAN IPL oddziałuje tylko na włosy w aktywnej fazie wzrostu. Jest to jeden z głównych powodów, dla których do osiągnięcia pożądanego rezultatu konieczne jest przeprowadzenie kilku sesji.

**Q.** Czy mężczyźni mogą używać urządzenia do usuwania włosów ANLAN IPL?

**A.** Chociaż urządzenie do usuwania owłosienia ANLAN IPL zostało opracowane dla kobiet, może być również odpowiednie dla mężczyzn. Jednak u mężczyzn, zwykle w przypadku owłosienia na klatce piersiowej, włosy wymagają większej liczby sesji depilacji niż u kobiet, aby osiągnąć pożądane rezultaty.



Tabela kolorów skóry

Typ włosów/ skóry	1	2	3	4	5	6	
czarny 	moc 1-5		moc 1-4		moc 1-3		×
ciemny brąz 	moc 1-5		moc 1-4		moc 1-3		×
brąz 	moc 1-5		moc 1-4		moc 1-3		×
ciemny blond 	moc 1-5		moc 1-4		moc 1-3		×
blond 	moc 1-5		moc 1-4		moc 1-3		×
jasny blond 	moc 1-5		moc 1-4		moc 1-3		×
rudy 	moc 1-5		moc 1-4		moc 1-3		×
siwy/ biały 	×		×		×		×

※ Poziom mocy należy wybrać głównie na podstawie własnego samopoczucia (po wykonaniu testu tolerancji skóry).  
 ※ Im wyższy poziom mocy, tym skuteczniejszy zabieg.

## Ochrona środowiska



Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.



Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkowania, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.

Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji dystrybutora / producenta dostępne na stronie internetowej <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Urządzenie wyposażone jest w akumulator który z uwagi na swoją fizyczną i chemiczną budowę starzeje się z biegiem czasu i użytkowania. Producent określa maksymalny czas pracy urządzenia w warunkach laboratoryjnych gdzie występują optymalne warunki pracy dla urządzenia a sam akumulator jest nowy i w pełni naładowany. Czas pracy w rzeczywistości może się różnić od deklarowanego w ofercie i nie jest to wada urządzenia a cecha produktu.