


ANLAN

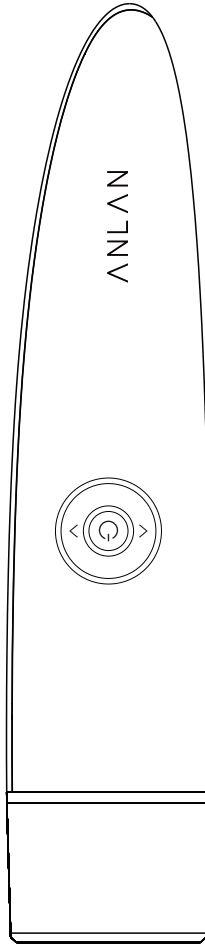

FACIAL MASSAGER

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Dziękujemy za wybranie masażera do twarzy ANLAN. Przed jego użyciem należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję, aby zapewnić prawidłowe działanie, oraz zachować ją do wykorzystania w przyszłości.

Uwagi:

1. Jeśli wystąpią jakiegokolwiek dolegliwości, należy natychmiast zaprzestać używania urządzenia.
2. Po użyciu tego urządzenia skóra może być lekko zaczerwieniona i podrażniona. Jest to normalne i wkrótce zniknie. Jeśli objawy nie ustąpią w ciągu 3 dni, zaleca się konsultację z lekarzem.
3. Pacjenci z chorobami zakaźnymi, niewydolnością serca, nieprawidłowym ciśnieniem krwi i chorobami skóry powinni skonsultować się z lekarzem przed użyciem urządzenia.
4. Jeśli korzystasz z materiałów medycznych lub przeszedłeś zabieg mikrodermabrazji, przed użyciem tego urządzenia skonsultuj się z dermatologiem.
5. Nie używać w wysokiej temperaturze lub wilgotnym środowisku.
6. Urządzenie należy przechowywać z dala od wody i ognia.
7. Przed pierwszym użyciem urządzenia należy je naładować.
8. Dzieciom nie wolno używać tego urządzenia.
9. Nie należy demontować, naprawiać ani modyfikować urządzenia, gdyż może to spowodować jego uszkodzenie lub awarię.
10. Urządzenie jest skomplikowanym urządzeniem elektronicznym, nie należy go używać w środowisku silnego pola magnetycznego lub elektrycznego.

SPECYFIKACJA:

Nazwa produktu: Masażer do twarzy

Nr modelu: S0153W

Napięcie znamionowe : 3.7V

Moc znamionowa: 2.6W

Napięcie ładowania: 5V

Prąd znamionowy: 700mA

Metoda ładowania: USB

Regulowany bieg: 3 biegi

Temperatura: 38 °C stała temperatura

Tryby funkcji: RF + wibracje, EMS + wibracje

Ultradźwiękowa Częstotliwość: 3MHz

Częstotliwość wibracji: 8500Times/min

Rozmiar: Około 168 x 36 x 23 mm (6,6 x 1,4 x 0,9 cala)

Waga: Około 0,17lb

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE ŁADOWANIA: Czerwony wskaźnik świeci się podczas ładowania, niebieski wskaźnik świeci się po pełnym naładowaniu.


W ZESTAWIE:

1x masażer do twarzy


1x kabel USB do ładowania

1x torba do przechowywania

1x instrukcja obsługi

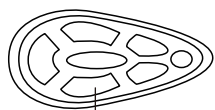


Masażer głowy

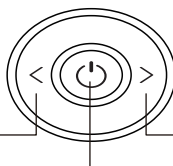



Przycisk -

Przycisk +


Włącznik/ przycisk MODE

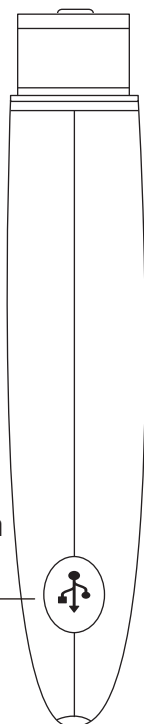


Port ładowania
USB

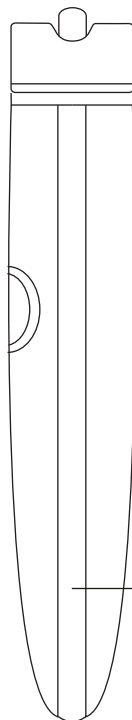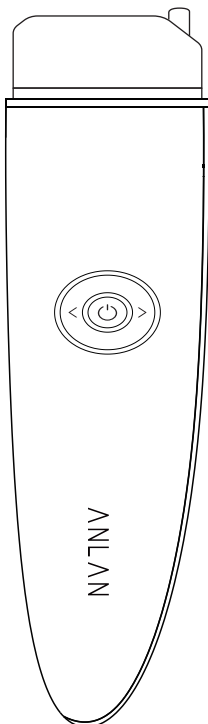

Dioda

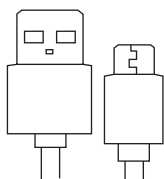

Kabel ładowania USB

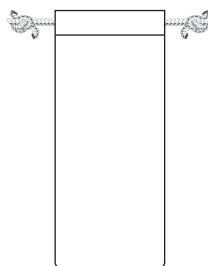


Torba
transportowa

Funkcje:

1. Dwa tryby: RF + wibracja, EMS (mikroprąd) + wibracja
2. RF + wibracja: 3 biegi regulowane (możliwość regulacji w zależności od odczuć ciała)
3. EMS (mikroprąd) + wibracja: 3 biegi regulowane (regulowane zgodnie z czuciem ciała)

Gdy urządzenie pracuje na niskim poziomie J brzęczyk wyemituje 5 sygnałów dźwiękowych i przejdzie w tryb EMS, a niebieska dioda LED zaświeci się po włączeniu zasilania włącza się pierwszy bieg.


1. Sposób użycia

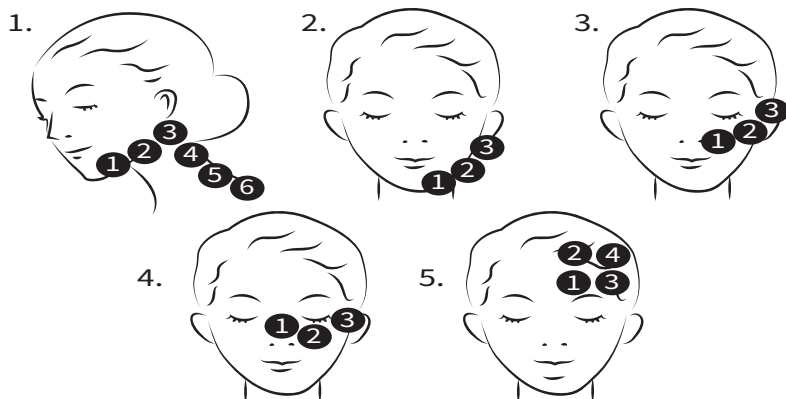

Metoda masażu

Kontynuuj powolne przesuwanie w kierunku wskazanym strzałką. Nie należy pozostawać na skórze dłużej niż 3 sekundy. Można to powtórzyć 2-3 razy. Jeżeli podczas masażu żel wyschnie, należy go odpowiednio uzupełnić.

2. Sugestia

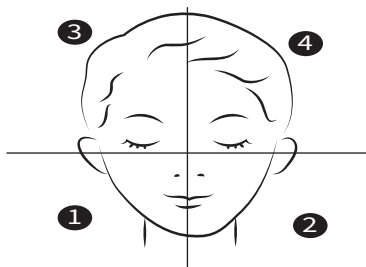

Przy nakładaniu żelu, proszę nie należy nakładać go na całą twarz jednocześnie

KONSERWACJA URZĄDZENIA:

Oczyść twarz letnią wodą, dokładnie spłucz środek czyszczący, taki jak płyn do mycia i po wyschnięciu twarzy równomiernie nałóż żel.

Zaleca się stosowanie specjalnego żelu do masażu, aby uniknąć korzystania z żeli z zawartością alkoholu lub kontaktu z produktami kwaśnymi. Można też użyć żelu aloesowego.

Urządzenie nie jest wodoodporne i nie można go myć bezpośrednio wodą. Po użyciu należy przetrzeć więcej niż 3 razy wodą lub przetrzeć bezalkoholowym mokrym ręcznikiem papierowym, a następnie poczekać, aż urządzenie wyschnie lub włożyć je do pudełka po wysuszeniu.

ANLAN

FACIAL MASSAGER

www.anlan.co Zaprojektowano przez ANLAN

Wyprodukowano w Chinach

Ochrona środowiska



Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.



Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkownika, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.