

TheraFace PRO

Instrukcja obsługi

Przegląd produktu

TheraFace PRO

Zaawansowane rozwiązanie do terapii twarzy.


TheraFace PRO to przenośne urządzenie 4 w 1, które w kompleksowy sposób pozwoli Ci zadbać o dobre samopoczucie i zdrowy wygląd twarzy. Pomaga zmniejszyć napięcie, rozluźnić mięśnie twarzy i poprawić wygląd skóry. Oferuje zabiegi mikroprądami, terapię światłem LED (niebieskim, czerwonym i czerwonym z podczerwienią) oraz zabiegi oczyszczające. Z TheraFace PRO dostosujesz zabiegi do swoich aktualnych potrzeb. Użyj różnych pierścieni, aby ujędrnić twarz i poprawić jej owal, a także zapewnić głębokie oczyszczenie i relaks.

Przeznaczenie

TheraFace PRO ma za zadanie pomóc zmniejszyć napięcie, rozluźnić mięśnie twarzy i poprawić wygląd skóry poprzez delikatną stymulację twarzy. Pierścienie do różnorodnych zabiegów mają działanie liftingujące, tonizujące napięcie, odmładzające i oczyszczające.

Terapia perkusyjna


Terapia perkusyjna dopasowana do potrzeb twarzy. Masaż zmniejsza napięcie i rozluźnia mięśnie twarzy.

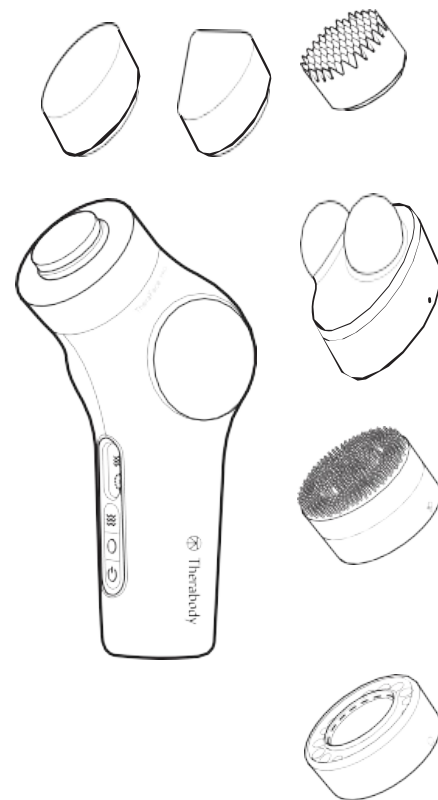



Żel przewodzący **TheraOne™ Conductive Gel**


Żel bazowy do stosowania z urządzeniem TheraFace PRO. Należy nałożyć go na twarz przed rozpoczęciem zabiegu mikroprądami, aby skuteczną i bezpieczną terapię.

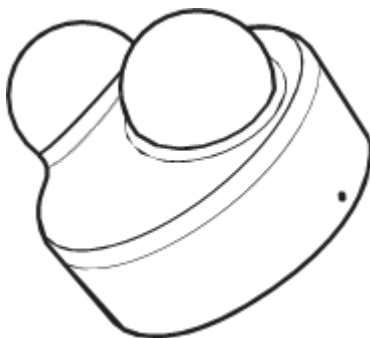

Pierścień do mikroprądów

Mikroprądy ujędrniają i napinają skórę. Zabieg poprawia napięcie mięśni i kontur twarzy / szyi


- Połączenie z urządzeniem przez magnes – łatwe do rozłączenia przez pociągnięcie
- Zabieg mikroprądowy jest wykonywany dzięki pierścieniowi do mikroprądów.

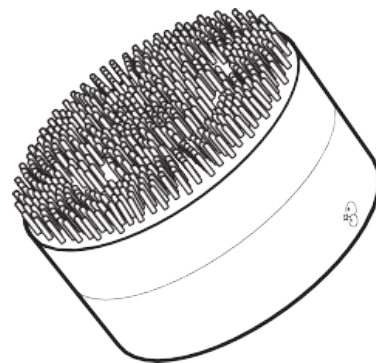

Pierścień oczyszczający

Oczyszczanie usuwa nagromadzone na twarzy kosmetyki, sebum i zanieczyszczenia

- Magnetyczne połączenie z urządzeniem – łatwe do rozłączenia przez pociągnięcie
- Oczyszczanie jest uzyskiwane dzięki pierścieniowi oczyszczającemu.

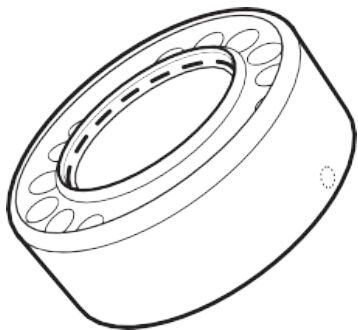

Pierścień LED: światło czerwone

Światło czerwone redukuje zmarszczki wokół oczu.

Pierścień LED: światło niebieskie

Światło niebieskie pomaga w redukcji trądziku (od małego do umiarkowanego)

Pierścień LED: światło czerwone + podczerwień

Spłyca zmarszczki wokół oczu i zapewnia terapeutyczne rozgrzewanie, dzięki czemu zmniejsza napięcie i uczucie dyskomfortu.

**Światło niebieskie nie jest przeznaczone do leczenia ani łagodzenia silnych zmian trądzikowych.*

Pierścień LED:

**światło niebieskie/ czerwone/
czerwone + podczerwień**

- Magnetyczne połączenie z urządzeniem – łatwe do rozłączenia przez pociągnięcie
- Terapia światłem przed pierścień LED



Poznaj swoje urządzenie TheraFace PRO

A Przycisk zasilania

Włącza / wyłącza urządzenie

B Przycisk terapii perkusywnej

Kontroluje pracę końcówek perkusyjnych

C Przycisk pierścienia


Kontroluje pracę pierścieni

Pierścień mocujący

- D** • Magnetyczne połączenie – rozłączenia pierścieni przez pociągnięcie
- Wszystkie pierścienie mocujące mają tylko jedną prawidłową pozycję

Końcówki do terapii perkusywnej


- E** • Magnetyczne połączenie – łatwe rozłączenie pierścieni przez pociągnięcie
- Wszystkie pierścienie mocujące mają 2
- tylko jedną prawidłową pozycję

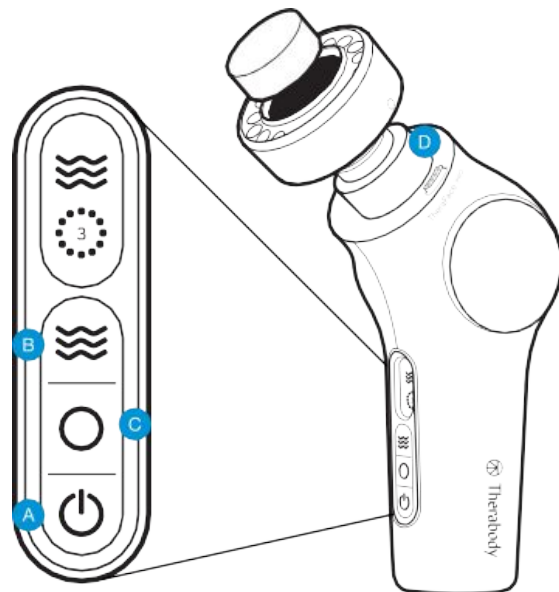

E **Flat** – do masażu całej twarzy, szyi i dekoltu.



E **Cone** – do precyzyjnego masażu okolic wokół oczu i zmarszczek mimicznych oraz punktów akupresurowych.

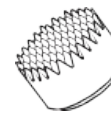

E **Micro-point** – dla poprawy krążenia w większych obszarach, t.j. czoło, policzki czy dekol.



Pierścienie do terapii zimnem i ciepłem

(sprzedawane oddzielnie)

- Magnetyczne połączenie – rozłączenie pierścieni przez pociągnięcie
- Umożliwia 3 warianty ustawienia temperatury (ciepła i zimna)

Pierwsze kroki

Włączanie urządzenia TheraFace PRO

Naciśnij i przytrzymaj przycisk ON/OFF, aby włączyć urządzenie – ekran OLED aktywuje się.

Wyłączania

Ponownie naciśnij i przytrzymaj przycisk ON/OFF, aby wyłączyć urządzenie – ekran OLED wygaśnie.

Automatyczne wyłączanie

Jeśli urządzenie nie zostanie ręcznie wyłączone przez naciśnięcie przycisku zasilania, urządzenie wyłączy się automatycznie po 10 minutach braku aktywności.

Podstawowe kroki wprowadzające:

1. **Zacznij na czystej, suchej twarzy**
2. **Wybierz i załóż odpowiedni pierścień mocujący**
3. **Włącz urządzenie**
4. **Wybierz swoje ustawienia**
5. **Rozpocznij zabieg**

Uwaga: Przed zdejmowaniem pierścieni upewnij się, że wyłączyłeś zasilanie urządzenia.

Korzystanie z TheraFace PRO

Na początku dokładnie oczyść twarz i opłucz wodą. Przed rozpoczęciem zabiegu pozwól skórze całkowicie wyschnąć. Koniecznie odwiedź www.therabody.com – znajdziesz tam protokoły zabiegów i filmy instruktażowe.

Uwaga: Urządzenie co 15 sekund będzie wydawać sygnał dźwiękowy. Pozwoli ci to kontrolować czas w ramach każdego zabiegu i poinformuje o jego przerwaniu/ zakończeniu.

- 1 beep = czasowa informacja zwrotna co 15 sekund dla kontroli zabiegu
- 2 beepy = pierścień LED, ciepły, zimny lub do mikroprądów został odłączony
- 3 beepy = zakończenie terapii światłem, mikroprądami, ciepłem lub zimnem.

A. Terapia perkusyjna

1. Wybierz i zamocuj żądaną przystawkę do terapii perkusyjnej.
2. Po podłączeniu do TheraFace PRO włącz urządzenie naciskając przycisk zasilania przez 2 sekundy.
3. Uruchom terapię perkusyjną naciskając raz na przycisk perkusyjny.
4. Aby przełączać się między 3 opcjami częstotliwości (1750, 2100 oraz 2400 obr./min), naciśnij ponownie przycisk perkusyjny.
5. Aby zatrzymać masaż naciśnij przycisk perkusyjny po raz trzeci.

Note: • Mogą być łączone z pierścieniami do terapii światłem LED.
• Nie można łączyć z pierścieniem do mikroprądów lub ciepłem i zimnem (sprzedawane oddzielnie).

B. Terapia światłem LED

Pierścień LED ma 3 opcje długości światłoterapii: światło czerwone, niebieskie i czerwona + podczerwień.

1. Aby rozpocząć terapię światłem LED załóż pierścień LED na urządzenie TheraFace PRO.
2. Włącz urządzenie TheraFace PRO naciskając przycisk zasilania przez 2 sekundy.
3. Włącz pierścień LED naciskając przycisk pierścienia. Aby przełączać się między opcjami światła (niebieskie, czerwone i czerwony+podczerwień), ponownie naciśnij ten sam przycisk.
4. Pierścień LED jest wyposażony w system czujników zbliżeniowych. Osiągnie pełną intensywność światła (jasność) dopiero po umieszczeniu urządzenia w odpowiedniej odległości od twarzy (0,5 cala). Unikaj bezpośredniego kontaktu ze skórą.
5. Wyłącz pierścień LED przełączając go na tryb światła czerwonego + podczerwieni i naciśnij jeszcze raz przycisk pierścienia (przez 2 sekundy) lub całkowicie wyłącz urządzenie za pomocą przycisku zasilania.

Ostrzeżenie: Nie umieszczaj pierścienia LED bezpośrednio na skórze – trzymaj go w odległości około 0,5 cala.

C. Zabieg mikroprądami

1. Przed założeniem pierścienia mikroprądowego zdejmij końcówkę do terapii perkusywnej.
2. Przed rozpoczęciem zabiegu mikroprądowego nałóż żel przewodzący (polecamy TheraOne™) na czystą, suchą skórę twarzy lub obszar zabiegowy, aby zapewnić prawidłowe przewodzenie prądu.
3. Podłącz pierścień mikroprądowy do TheraFace PRO a następnie włącz urządzenie naciskając przycisk zasilania przez 2 sekundy.
4. Naciśnij raz przycisk pierścienia, aby rozpocząć zabieg.
5. Użyj ponownie przycisku pierścienia, aby wybrać jedną z trzech intensywności.
6. Aby przerwać zabieg mikroprądami naciśnij przycisk pierścienia po raz trzeci.

Wskazówka: Podczas zabiegu mikroprądami powoli przesuwaj urządzenie używając lekkiego lub średniego nacisku. Obie kule powinny być w stałym kontakcie ze skórą. Terapia mikroprądami powinna być wykonywana przez 5-8 minut, maksymalnie co 24 godziny. Koniecznie odwiedź therabody.com, aby zapoznać się z protokołami zabiegów i filmami instruktażowymi.

Uwaga:

- Wstępnie ustawiony czas zabiegu wynosi 8 minut.
- Nie można łączyć z nasadkami do terapii perkusyjnej.
- Chociaż pierścień mikroprądowy będzie działał z każdym żelem przewodzącym, to polecamy żel TheraOne™.

Ostrzeżenie: Podczas korzystania z TheraFace PRO z pierścieniem mikroprądowym wymagany jest krem przewodzący. **NIE WYKONUJ** terapii mikroprądami na linii środkowej szyi lub w bliskiej okolicy oczu.

D. Podkład do mikroprądów: żel przewodzący TheraOne Conductive Gel

Żel przewodzący TheraOne™ przeznaczony jest do stosowania z urządzeniem TheraFace PRO przed rozpoczęciem terapii mikroprądami. Zapewnia bezpieczny i skuteczny zabieg.

Wskazówki:

- Zaczynij na czystej, suchej twarzy.
- Nałóż warstwę żelu przewodzącego na wszystkie obszary zabiegowe twarzy i szyi.
- Po zabiegu pierścieniem mikroprądowym spłucz żel i nałóż ulubiony kosmetyk nawilżający.

Ostrzeżenia: Używaj tylko zgodnie z zaleceniami. Unikaj kontaktu z oczami. Nie wykonuj terapii mikroprądami na linii środkowej szyi. Przed rozpoczęciem zabiegu wykonaj test alergiczny. W tym celu nałóż żel przewodzącego TheraOne na niewielki obszar skóry. Podczas sesji mikroprądowej skóra może wchłoniąć żel – w razie potrzeby nałóż go ponownie, aby zapewnić równomierne przesuwanie się urządzenia po skórze.

Po zabiegu mikroprądami użyj ulubionych kosmetyków, tj. podkład, serum, czy krem nawilżający i/lub SPF.

Zastosuj krok po kroku protokół TheraFace PRO.

Podkład: użyj wacika nasączonego tonikiem – delikatnie przesuwaj nim po twarzy, omijając okolice oczu i koncentrując się na nosie, fałdzie nosowym oraz podbródku

Serum: Zastosuj serum

Nawilżanie: Zastosuj krem nawilżający

SPF: Stosuj SPF tylko rano lub w ciągu dnia

TheraFace PRO po oczyszczeniu i pielęgnacji

Po zabiegu na skórę

Oczyść twarz ciepłą, wilgotną ściereczką.

Konserwacja urządzenia

Należy stosować poniższe instrukcje dotyczące konserwacji, aby utrzymać prawidłowe działanie urządzenia. Nieprzestrzeganie instrukcje może spowodować, że urządzenie przestanie działać.

Czyszczenie i pielęgnacja

Sprawdź wzrokowo urządzenie TheraFace PRO i pierścienie pod kątem widocznych śladów nagromadzenia zanieczyszczeń. Przetrzyj elementy wilgotną szmatką lub ściereczką czyszczącą z płynem bezalkoholowym. Pozostaw je do dokładnego wyschnięcia przed schowaniem lub rozpoczęciem kolejnego zabiegu. Prawidłowo wyczyszczone urządzenie nie powinno mieć widocznych śladów zanieczyszczeń lub wilgoci.

Uwaga: ten produkt nie jest wodoodporny. Należy go czyścić wilgotną szmatką lub ściereczką z płynem bezalkoholowym, przecierając urządzenie i pierścienie. Nie zanurzaj urządzenia w wodzie ani nie czyść go pod bieżącą wodą (poza końcówką czyszczącą). Nie dopuszczaj do kontaktu urządzenia z roztworami powodującymi korozję, które mogłyby uszkodzić wygląd i działanie. Przechowuj urządzenie w chłodnym i suchym miejscu (Temperatura: 0°C/32°F - 40°C/104°F) Wilgotność względna:

10~95% wilgotności względnej). Nie przechowuj urządzenia ani baterii w miejscach, gdzie temperatura może przekraczać 40°C/104°F, na przykład bezpośrednio na słońcu czy w pojeździe.

Ładowanie TheraFace PRO

- TheraFace PRO ładowanie jest za pomocą kabla USB-C (złączem w dolnej części urządzenia).
- TheraFace PRO zawiera kabel USB-C do USB-A.
- Urządzenie można podłączyć do dowolnego standardowego adaptera USB.
- TheraFace PRO umożliwia szybkie ładowanie, jeśli jest ładowany za pomocą adaptera USB-C.

Uwaga: upewnij się, że ładowarka pochodzi od certyfikowanego producenta i nie ma żadnych uszkodzeń strukturalnych. Urządzenie TheraFace PRO nie będzie działać podczas ładowania.

Ostrzeżenia i wskazówki (Środki ostrożności i przeciwwskazania)

Wskazania

To urządzenie jest przeznaczone do zabiegów na twarzy, szyi i górnej części klatki piersiowej. Jeśli masz jakieś szczególne schorzenia lub obawy, przed użyciem skonsultuj się z lekarzem. Będą sytuacje, w których wskazane jest zmodyfikowanie sposobu korzystania z urządzeń (środki ostrożności) lub takie, w których korzystanie z niektórych elementów nie będzie właściwe (przeciwwskazania). Poniższy dokument podkreśla te kwestie dla każdego zabiegu lub nakładki dołączonej do urządzenia TheraFace PRO na dzień druku. Aby uzyskać aktualne informacje, odwiedź stronę therabody.com.

Ważne informacje dotyczące bezpiecze

Ogólne zasady użytkowania TheraFace PRO

Przed użyciem TheraFace PRO przeczytaj wszystkie ostrzeżenia i wskazówki. To urządzenie nie powinno być używane przez osoby, które miały w przeszłości epizody padaczki, drgawek lub kardiomiopatii. TheraFace PRO nie jest polecane dla osób z wszczepionym elektronicznym urządzeniem (takim jak rozrusznik serca), arytmia serca, guzami, ostrym stanem chorób zapalnych, miażdżycą, zakrzepicą lub implantami w leczonym obszarze ciała. Implanty stomatologiczne powinny być mocno zakotwiczone przed użyciem urządzenia. Nie używaj urządzenia na oczy, powieki lub obszar bezpośrednio otaczający oko (okołoooczodołowy). Urządzenie nie powinno być używane jeśli masz ciemnobrązowe lub czarne plamy, takie jak duże piegi, znamiona, pieprzyki lub brodawki na obszarze zabiegowym. Urządzenie nie jest zalecane, jeśli masz egzemę, łuszczycę, zmiany chorobowe, otwarte rany lub aktywne infekcje inne niż trądzik (od lekkiego do umiarkowanego), takie jak opryszczka wargowa, w obszarze objętym zabiegiem. Przed użyciem urządzenia poczekaj, aż zainfekowany obszar się zagoi. Urządzenie nie powinno być używane, jeśli masz nieprawidłowy stan skóry spowodowane cukrzycą lub innymi chorobami ogólnoustrojowymi czy metabolicznymi. Nie zaleca się korzystania z tego urządzenia, jeśli w przeszłości występowały ogniska opryszczki w obszarze leczenia (możliwe po konsultacji z lekarzem i zabiegom zapobiegawczym).

Jeśli jesteś w ciąży i/lub karmisz piersią przed użyciem skonsultuj się z lekarzem.

Jeśli poczujesz dyskomfort natychmiast przerwij stosowanie.

Urządzenie nie jest zalecane dla osób poniżej 18 roku życia bez nadzoru osoby dorosłej i powinno być przechowywane w miejscu niedostępnym dla dzieci. Jeśli masz jakiegokolwiek problemy zdrowotne, przyjmujesz leki, które powodują nadwrażliwość na światło lub przeszedłeś operację twarzy lub inną operację chirurgiczną to przed użyciem urządzenia skonsultuj się z lekarzem.

Pierścień do mikroprądów

Zalecenia te stworzono we współpracy z ekspertami medycznymi oraz na podstawie badań naukowych dotyczących środków ostrożności i przeciwwskazań i są aktualne w dniu druku. Aby uzyskać aktualne informacje, odwiedź nas online.

Przy zabiegach z użyciem mikroprądów niezbędne jest zastosowanie żelu przewodzącego. Przed zabiegiem przetestuj go nakładając niewielką ilość na małej powierzchni skóry.

Środki ostrożności

- Niedawny uraz, zabieg chirurgiczny w obszarze twarzy t.j. neurotoksyna, wypełniacz skórny, mikrodermabrazja, laser i/lub peeling chemiczny do czasu całkowitego zagojenia się skóry
- Nie stosować podczas wyprysku z wirusem Herpes Simplex
- Nie stosować na zarost (przed użyciem należy zgolić zarost ponieważ włosy zakłócać przewodnictwo)
- Nie używać, jeśli cierpisz na chorobę serca
- Nie stosować bezpośrednio na środek szyi (kości), w szczególności unikać tarczycy
- Nie stosować na okolice piersi
- Nie stosować w poprzek klatki piersiowej
- Nie stosować na okolice pachwin
- Nie stosować bezpośrednio na oczy, powieki lub okolice oczodołów.
- Nie nakładaj na uszkodzoną skórę
- Nie stosować u dzieci

Przeciwwskazania

Poniżej przedstawiono okoliczności, w których potencjalne ryzyko może przewyższać korzyści – przed użyciem skonsultuj się z lekarzem.

- Wysypka skórna, otwarte rany, pęcherze, miejscowe zapalenie tkanek, infekcje, siniaki lub guzy
- Rozrusznik serca lub inne wszczepione urządzenia elektroniczne
- Padaczka
- Ciąża
- Rak/guzy
- Zakrzepica
- Zapalenie żył
- Metalowe płytki lub szpilki w obszarze aplikacji
- Wszczepione defibrylatory/stymulatory

Pierścień LED do terapii światłem (czerwonym, czerwonym + IR, niebieskim)

Zalecenia te stworzono we współpracy z ekspertami medycznymi oraz na podstawie badań naukowych dotyczących środków ostrożności i przeciwwskazań i są aktualne w dniu druku. Aby uzyskać aktualne informacje odwiedź nas online.

Środki ostrożności

- Niedawny uraz, zabieg chirurgiczny lub leczenie twarzy, tj. neurotoksyna, wypełniacz skórny, mikronakłuwanie, laser i/lub peeling chemiczny do całkowitego wygojenia skóry.

- Aktywny wirus opryszki
- Przy zarostie: użyj diody LED zgodnie ze wzorem wzrost włosów (zazwyczaj ruch w dół)
- Nie aplikuj bezpośrednio na gałkę oczną/powiekę
- Nie aplikuj na uszkodzoną skórę
- Nie nakładaj retinolu przed użyciem czerwonego światła LED

Przeciwwskazania

Poniżej przedstawiono okoliczności, w których potencjalne ryzyko może przewyższać korzyści – przed użyciem skonsultuj się z lekarzem.

- Wysypka skórna, otwarte rany, pęcherze, miejscowe zapalenie tkanek, infekcje, siniaki lub guzy
- Ciąża/karmienie piersią
- Nieprawidłowe odczucia (np. drętwienie)
- Rak/guzy
- Padaczka
- Kardiomiopatia (choroba serca)
- Fotoalergia lub zaburzenie (np. toczeń, porfiria)
- Leki powodujące nadwrażliwość na światło
- Leki na ciężki trądzik
- Ekstremalna nadwrażliwość na światło
- Melasma lub przebarwienia (zwłaszcza zaostrezone przez łagodne ciepło)
- Podejrzane zmiany lub rak skóry – do konsultacji z lekarzem
- Jeśli przyjmujesz lub stosujesz retinol czy inne leki wrażliwe na słońce lub nadtlenek benzoilu nie korzystaj z terapii światłem podczerwonym.

Końcówki perkusywne (Flat, Cone, Micro-point)

Zalecenia te stworzono we współpracy z ekspertami medycznymi oraz na podstawie badań naukowych dotyczących środków ostrożności i przeciwwskazań i są aktualne w dniu druku. Aby uzyskać aktualne informacje odwiedź nas online.

Środki ostrożności

W poniższych przypadkach należy zastosować szczególną ostrożność, a użycie urządzeń może wymagać modyfikacji (takich jak wybór końcówki, przyłożona siła, pozycja ciała, unikanie użycia w bezpośredni kontakt z danym obszarem itp.). Jeśli masz jakiegokolwiek wątpliwości skonsultuj się z lekarzem.

- Niedawny uraz, zabieg chirurgiczny lub leczenie twarzy, tj. neurotoksyna, wypełniacz skórny, mikronakłuwanie, laser i/lub peeling chemiczny do całkowitego wygojenia skóry.
- Aktywny wirus opryszki
- Nadciśnienie (kontrolowane)
- Nieprawidłowe odczucia (np. drętwienie)
- Wrażliwość na ucisk
- Leki, które mogą zmieniać odczucia
- Nie stosować bezpośrednio na gałkę oczną/powiekę
- Nie stosować na uszkodzoną skórę

Przeciwwskazania

Poniżej przedstawiono okoliczności, w których potencjalne ryzyko może przewyższać korzyści – przed użyciem skonsultuj się z lekarzem.

- Wysypka skórna, otwarte rany, pęcherze, miejscowe zapalenie tkanek, infekcje, siniaki, guzy
- Aktywne wypryski trądzikowe
- Złamanie kości lub zapalenie okostnej
- Nadciśnienie (niekontrolowane)
- Ostra lub ciężka choroba serca, wątroby, nerek
- Stany neurologiczne powodujące utratę lub zmiany czucia
- Bezpośrednia aplikacja na oczy lub gardło
- Zaburzenia krwawienia
- Niedawna operacja lub uraz
- Schorzenia tkanki łącznej
- Niewydolność lub choroba naczyń obwodowych
- Leki rozrzedzające krew lub pogarszające czucie
- Bezpośredni nacisk na miejsce zabiegu chirurgicznego
- Ekstremalny dyskomfort lub ból
- Rozrusznik serca, ICD lub zatorowości w przeszłości

Pierścień oczyszczający

Zalecenia te stworzono we współpracy z ekspertami medycznymi oraz na podstawie badań naukowych dotyczących środków ostrożności i przeciwwskazań i są aktualne w dniu druku. Aby uzyskać aktualne informacje odwiedź nas online.

Środki ostrożności

- Niedawny uraz, zabieg chirurgiczny lub leczenie twarzy, tj. neurotoksyna, wypełniacz skórny, mikronakłuwanie, laser i/lub peeling chemiczny do całkowitego wygojenia skóry.
- Aktywny wirus opryszki
- Przy zaroście: użyj diody LED zgodnie ze wzorem wzrost włosów (zazwyczaj ruch w dół)
- Nie aplikuj bezpośrednio na gałkę oczną/powiekę
- Nie aplikuj na uszkodzoną skórę

Przeciwwskazania

Poniżej przedstawiono okoliczności, w których potencjalne ryzyko może przewyższać korzyści – przed użyciem skonsultuj się z lekarzem.

- Wysypka skórna, otwarte rany, pęcherze, miejscowe zapalenie tkanek, infekcje, siniaki lub guzy

Pierścień do terapii ciepłem

Zalecenia te stworzono we współpracy z ekspertami medycznymi oraz na podstawie badań naukowych dotyczących środków ostrożności i przeciwwskazań i są aktualne w dniu druku. Aby uzyskać aktualne informacje odwiedź nas online.

Środki ostrożności

- Niedawny uraz, zabieg chirurgiczny lub leczenie twarzy, tj. neurotoksyna, wypełniacz skórny, mikronakłuwanie, laser i/lub peeling chemiczny do całkowitego wygojenia skóry.

- Aktywny wirus opryszki
- Nie stosować bezpośrednio na gałkę oczną/powiekę
- Nie stosować na uszkodzonej skórze

Przeciwwskazania

Poniżej przedstawiono okoliczności, w których potencjalne ryzyko może przewyższać korzyści – przed użyciem skonsultuj się z lekarzem.

- Wysypka skórna, otwarte rany, pęcherze, infekcje, miejscowe zapalenie tkanek, siniaki lub guzy.

Cold Ring Attachment

Zalecenia te stworzono we współpracy z ekspertami medycznymi oraz na podstawie badań naukowych dotyczących środków ostrożności i przeciwwskazań.

Środki ostrożności

- Niedawny uraz, zabieg chirurgiczny lub leczenie twarzy, tj. neurotoksyna, wypełniacz skórny, mikronakłuwanie, laser i/lub peeling chemiczny do całkowitego wygojenia skóry.
- Aktywny wirus opryszki
- Przy zarosie: użyj diody LED zgodnie ze wzorem wzrost włosów (zazwyczaj ruch w dół)
- Nie aplikuj bezpośrednio na gałkę oczną/powiekę
- Nie aplikuj na uszkodzoną skórę

Przeciwwskazania

Poniżej przedstawiono okoliczności, w których potencjalne ryzyko może przewyższać korzyści – przed użyciem skonsultuj się z lekarzem.

- Wysypka skórna, otwarte rany, pęcherze, guzy, infekcje, miejscowe zapalenie tkanek, siniaki,
- Nadwrażliwość na zimno/odmrożenia
- Niewydolność krążenia

Dodatkowe ostrzeżenia

Podczas korzystania z urządzenia należy zawsze przestrzegać poniższe środków ostrożności:

1. UŻYWAJ WYŁĄCZNIE ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ.

Używaj urządzenia w sposób opisany w instrukcji obsługi. Używaj tylko zalecanych akcesoriów i części zamiennych. Nie wykonuj samodzielnie prac konserwacyjnych.

2. NIE DLA DZIECI. Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez małe dzieci lub osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych czy poznawczych lub braku doświadczenia i wiedzy o sposobie obsługi urządzenia, chyba że znajdują się pod nadzorem lub zostały poinstruowane przez opiekuna. Nie wolno używać urządzenia jako zabawki. Należy pilnować dzieci, aby nie bawiły się urządzeniem.

3. MIEJSCA ŁADOWANIA. Urządzenie należy ładować w pomieszczeniu wewnętrznym, w dobrze wentylowanym i suchym miejscu. Nie ładuj urządzenia na zewnątrz, w łazience ani w promieniu 3,1 metra od wanny lub basenu. Nie używaj urządzenia ani ładowarki na mokrych powierzchniach i nie wystawiaj jej na działanie wilgoci, deszczu lub śniegu. Nie używaj urządzenia w obecności substancji wybuchowych (opary gazowe, pył lub materiały łatwopalne). Mogą spowodować powstanie isker i wywołać pożar.

4. NIE PRZEŁADOWUJ. Nie pozostawiaj baterii w ładowarce dłużej niż 1 godzinę po całkowitym naładowaniu. Akumulator zawiera system Theragun Protection, aby uniknąć ryzyka przeładowania. Jednak może ono z czasem skrócić żywotność baterii.

5. NIE WOLNO PODPALAĆ ANI SPALAĆ URZĄDZENIA LUB BATERII. Bateria może wybuchnąć, powodując obrażenia lub uszkodzenia. Podczas spalania powstają toksyczne opary i materiały.

6. NIE ZGNIATAĆ, UPUSZCZAĆ ANI NIE USZKADZAĆ BATERII LUB ŁADOWARKI. Nie używaj ładowarki, która została mocno uderzona, upuszczona, przejechana lub jakkolwiek uszkodzona.

7. CHEMIKALIA Z AKUMULATORA POWODUJĄ POWAŻNE OPARZENIA. Nigdy nie dopuszczaj do kontaktu wnętrza baterii ze skórą, oczami lub ustami.

Jeśli z uszkodzonego akumulatora wyciekają chemikalia należy go wyrzucić za pomocą gumowych lub neoprenowych rękawiczek. Jeśli skóra jest narażona na działanie płynów z akumulatora umyj ją wodą z mydłem i spłucz octem. Jeśli oczy są narażone na działanie chemikaliów z baterii, natychmiast przepłucz je wodą przez 20 minut i zasięgnij pomocy medycznej. Zdjąć i wyrzucić skażoną odzież.

8. NIE DOPUSZCZAJ DO ZWARCIA.

Akumulator ulegnie zwarceniu, jeśli metalowy przedmiot połączy dodatnie i ujemne styki akumulatora lub złącze 16V. Nie umieszczaj baterii w pobliżu wszystkiego, co może spowodować zwarcie, np. monet, kluczy lub gwoździ w kieszeni. Zwarcie baterii może spowodować pożar i obrażenia ciała.

9. NIE UŻYWAĆ POD KOCEM I PODUSZKĄ LUB MIĘDZY PODUSZKAMI NA KANAPIE.

Może wystąpić nadmierne nagrzewanie i spowodować pożar, porażenie prądem lub obrażenia.

10. PRZECHOWYWANIE URZĄDZENIA I

BATERII. Przechowywać w chłodnym, suchym miejscu. Urządzenie należy ładować tylko wtedy, gdy temperatura otoczenia wynosi od 0°C do 40°C. Nie przechowuj urządzenia ani baterii w miejscach, gdzie temperatura może przekraczać 40°C, na przykład w bezpośrednim świetle słonecznym lub w pojeździe.

11. UTYLIZACJA BATERII. Baterie litowo-jonowe w urządzeniu TheraFace PRO są bardziej przyjazne dla środowiska niż niektóre inne

rodzaje baterii. Zawsze utylizuj baterie zgodnie z lokalnymi przepisami. Skontaktuj się z agencją recyklingową w swojej okolicy, aby uzyskać informacje o miejscach recyklingu. Nawet rozładowane baterie zawierają trochę energii. Przed wyrzuceniem należy zakleić złącze urządzenia taśmą izolującą, aby zapobiec zwarceniu baterii, które mogłoby spowodować pożar lub wybuch.

12. NIE ROZBIERAJ. Demontaż lub nieprawidłowy ponowny montaż może spowodować ryzyko porażenia prądem, pożaru lub narażenia na działanie chemikaliów z akumulatora. Gwarancja traci ważność jeśli urządzenie, baterie lub ładowarka są zdemontowane lub jeśli jakiegokolwiek części zostały usunięte.

13. SERWIS. Nie należy korzystać jeśli urządzenie, baterie lub ładowarka nie działają prawidłowo, zostały mocno uderzone, zostały upuszczone, uszkodzone, pozostawione na zewnątrz lub wrzucone do wody. Nie próbuj naprawiać ani demontować urządzenia – może to spowodować porażenie prądem lub pożar.

14. NIE UŻYWAJ PODCZAS KĄPIELI, POD PRYSZNICEM w WANNIE LUB UMYWALCE.

Nie umieszczaj ani nie przechowuj urządzenia czy baterii w miejscu, w którym może spaść lub zostać wciągnięte do wanny lub zlewu. Nie wkładaj ani nie wrzucaj do wody czy innej cieczy. Nie sięgaj po urządzenie, które wpadło lub miało kontakt z wodą. Natychmiast odłącz.

15. OGRANICZNIK TERMICZNY. Urządzenie posiada automatycznie resetowany ogranicznik

termiczny, który wyłącza urządzenie zapobiegając przegrzaniu i pożarowi.

16. WTYCZKA Z POLARYZACJĄ. Aby zmniejszyć ryzyko porażenia prądem urządzenie jest wyposażone w spolaryzowaną wtyczkę (jedno ostrze jest szersze od drugiego). Wtyczka ta zmieści się w spolaryzowanym gniazdku tylko w jeden sposób. Jeśli wtyczka nie pasuje całkowicie do gniazdka, odwróć ją. Jeśli nadal nie pasuje, skontaktuj się z wykwalifikowanym elektrykiem w celu zainstalowania właściwego gniazdka. Nie zmieniaj wtyczki w żaden sposób.

17. NIE UŻYWAJ urządzenia w miejscu, gdzie używany jest aerozol (spray) lub w którym podawany jest tlen.

PRZESTRZEGAJ PONIŻSZYCH INSTRUKCJI

1. Używaj urządzenia TheraFace PRO i pierścieni wyłącznie w sposób opisany w niniejszej instrukcji obsługi. Nie jest znane ryzyko i niebezpieczeństwa związane z używaniem urządzenia TheraFace PRO w jakiegokolwiek inny sposób – może ono powodować negatywne skutki uboczne.

2. Urządzenie TheraFace PRO nie zostało przetestowane pod kątem stosowania na gałce ocznej, oczodole lub powiekach, dlatego ryzyko jest nieznane.

Oznaczenia

Nr	Symbol	Opis
1		Certyfikat CE
2		Ograniczenie Substancji Niebezpiecznych
3		„WEEE (Zużyty Sprzęt Elektryczny i Elektroniczny)”. Z odpadami należy postępować zgodnie z prawem.
4		Utrzymuj suche
5		FCC Federalna Komisja ds. Łączności
6		Przed użyciem przeczytaj instrukcję obsługi
7		Typ BF nakładać częściami

Specyfikacja

PODSTAWOWA CHARAKTERYSTYKA

Źródło zasilania Adapter USB-A lub USB-C
(nie załączony w zestawie)

Wskaźnik świetlny TAK

Materiał obudowy PC

DODATKOWE FUNKCJE

Środowisko pracy Temperatura : 0 ~ 40° C
Wilgotność względna: <93% RH

Środowisko do przechowywania Temperatura: -25° C ~ 50° C
Wilgotność względna: 10~95% RH

Ciśnienie atmosferyczne 70-106 Kpa

Zabiegi mikroprądami:

Obszar zabiegu	Twarz i szyja
Liczba trybów	3
Poziom intensywności wyjściowej	4
Wskaźnik świetlny	Tak, wyświetlacz OLED
Czas stosowania	5-8 minut dziennie przez 6 tygodni
Materiały obudowy	Konsola: tworzywo PC

SPECYFIKACJA GNIAZDA WYJŚCIOWEGO

Kształt Fali	Dwufazowy impulsowy
Napięcie robocze	0-15.5 V
Moc Maksymalna	24 mW
Automatyczne wyłączanie	Tak
Maksymalna moc wyjściowa	210-280 mV @ 500 Ohm
Napięcie (+/- 10%)	0.8-1.2 V @ 2 kOhm 4.75-5.2 V @ 10 kOhm

Maksymalny prąd wyjściowy	420 μ A - 560 μ A @ 500 Ohm 400 μ A - 600 μ A @ 2 kOhm 475 μ A - 520 μ A @ 10 kOhm
Szerokość impulsu	Wł. 60 ms / Wył. 60 ms
Częstotliwość	8.3 Hz
Zużycie netto	nd. — zasilanie bateryjne
Maksymalna gęstość prądu	1.65 mA/cm ² @ 500 Ohm
Maksymalna gęstość mocy	1.36125 mW/cm ² @ 500 Ω

TERAPIA ŚWIATŁEM LED

Długość fali światła	IR + czerwone: 830 nm $\pm$ 10 nm/633 $\pm$ 10 nm Niebieskie: 415 nm $\pm$ 10 nm, czerwone: 633 nm $\pm$ 10 nm
Moc światła (mW//cm2)	IR+ Czerwone 70 $\pm$ 5%/60 $\pm$ 5%, Czerwone 60 $\pm$ 5%, niebieskie 45 $\pm$ 5%

TERAPIA PERKUSYWNA

Perkusje	1750, 2100 i 2400 obr/min
Częstotliwość	1750 obr./min: 29,1 Hz 2100 obr./min: 35 Hz 2400 obr./min: 40 Hz

Bezpieczeństwo, kompatybilność elektromagnetyczna i biokompatybilność

1. To urządzenie jest sprzętem klasy II z częścią aplikacyjną typu BF. Jest zgodny z medycznymi standardami bezpieczeństwa elektrycznego (IEC 60601-1).
2. Urządzenie jest zgodne z medycznym standardem EMC (IEC 60601-1-2).
3. Wszystkie materiały użyte do wykonania obudowy urządzenia głównego i styki wyjściowe w tym urządzeniu są biokompatybilne z przeznaczeniem. Spełniają normy biokompatybilności ISO 10993-5 (cytotoksyczność) i ISO 10993-10 (podrażnienie i uczulenie).

TheraFace PRO został przetestowany i uznany za zgodny z limitami kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) dla urządzeń medycznych zgodnie z normą IEC 60601-1-2: 2007. Ograniczenia te mają na celu zapewnienie odpowiedniej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w typowej instalacji medycznej.

OSTRZEŻENIE:

Nie należy umieszczać urządzenia w pobliżu urządzeń, które wywołują zakłócenia elektromagnetyczne (EMI), tj. telefony komórkowe, rezonans magnetyczny (MRI), skomputeryzowana tomografia osiowa (CT), diatermia, identyfikacja radiowa (RFID) itp. Urządzenia EMI, RF lub środowisko MR mogą wpływać na normalne funkcjonowanie urządzenia lub spowodować obrażenia u użytkownika.

Oświadczenie o zgodności FCC

To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC. Działanie podlega następującym dwóm warunkom: (1) to urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń oraz (2) to urządzenie musi wytrzymać wszelkie odbierane zakłócenia, w tym zakłócenia, które mogą powodować niepożądane działanie. Zmiany lub modyfikacje, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone przez stronę odpowiedzialną za zgodność, mogą unieważnić prawo użytkownika do obsługi sprzętu.

To urządzenie zostało przetestowane i uznane za zgodne z ograniczeniami dla urządzeń cyfrowych klasy B, zgodnie z częścią 15 przepisów FCC. Limity te mają na celu zapewnienie rozsądnej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacji mieszkaniowej. To urządzenie generuje, wykorzystuje i może emitować energię o częstotliwości radiowej i, jeśli nie zostanie zainstalowane i nie będzie używane zgodnie z instrukcjami, może powodować szkodliwe zakłócenia w komunikacji radiowej. Nie ma jednak gwarancji, że zakłócenia nie wystąpią w konkretnej instalacji.

Jeśli to urządzenie powoduje szkodliwe zakłócenia w odbiorze radia lub telewizji, co można stwierdzić wyłączając i włączając urządzenie, zachęca się użytkownika do podjęcia próby poprawienia ingerencji przez co najmniej jeden z następujących środków:

- Zmień orientację lub położenie anteny odbiorczej.
- Zwiększ odległość między urządzeniem a odbiornikiem.
- Podłącz urządzenie do gniazdka w innym obwodzie niż ten, do którego podłączony jest odbiornik.
- Skonsultuj się ze sprzedawcą lub doświadczonym technikiem radio-telewizyjnym w celu uzyskania pomocy.

DEKLARACJA PRODUCENTA – EMISJE ELEKTROMAGNETYCZNE

TheraFace PRO jest przeznaczony do użytku w środowiskach elektromagnetycznych określonych poniżej. Klient lub użytkownik TheraFace PRO powinien upewnić się, że jest on używany w takim środowisku.

TEST EMISJI	ZGODNOŚĆ	ŚRODOWISKO ELEKTROMAGNETYCZNE - WSKAZÓWKI
Emisje RF CISPR 11	Grupa 1	TheraFace PRO wykorzystuje energię RF tylko do swoich wewnętrznych funkcji. Dlatego jego emisje RF są bardzo niskie i prawdopodobnie nie będą powodować żadnych zakłóceń w pobliskim sprzęcie elektronicznym.
Emisje RF CISPR 11	Klasa B	TheraFace PRO nadaje się do użytku we wszystkich placówkach, w tym w budynkach mieszkalnych oraz tych bezpośrednio podłączonych do publicznej sieci niskiego napięcia zasilającej budynki wykorzystywane do celów mieszkaniowych.
Emisje harmoniczne IEC 61000-3-2	Klasa A	
Funkcja napięcia/emisje zmienne IEC 61000-3-2	Zgodne	

OŚWIADCZENIE PRODUCENTA – ODPORNOŚĆ ELEKTROMAGNETYCZNA

TheraFace PRO jest przeznaczony do użytku w środowisku elektromagnetycznym określonym poniżej.

Klient lub użytkownik TheraFace PRO powinien upewnić się, że jest on używany w takim środowisku.

TEST ODPORNOŚCI	POZIOM TESTOWY IEC 60601	POZIOM ZGODNOŚCI	ŚRODOWISKO ELEKTROMAGNETYCZNE - WSKAZÓWKI
Wyładowania elektrostatyczne (ESD) IEC 61000-4-2	styk ± 6 kV powietrze ± 8 kV	styk ± 6 kV powietrze ± 8 kV	Podłogi powinny być wykonane z drewna, betonu lub płytek ceramicznych. Jeśli podłogi są pokryte materiałem syntetycznym, wilgotność względna powinna wynosić co najmniej 30%.
Przebiegi elektrostatyczne / burst IEC 61000-4-4	± 2 kV dla linii zasilających ± 1 kV dla linii wejścia/wyjścia	± 2 kV dla linii zasilających ± 1 kV dla linii wejścia/wyjścia	Jakość zasilania sieciowego powinna odpowiadać typowemu środowisku komercyjnego lub szpitalnego.
Wzrost IEC 61000-4-5	± 1 kV tryb różnicowy ± 2 kV tryb wspólny	± 1 kV tryb różnicowy ± 2 kV tryb wspólny	Jakość zasilania sieciowego powinna odpowiadać typowemu środowisku komercyjnego lub szpitalnego.
Zapady napięcia, krótkie przerwy i wahania napięcia na liniach wejściowych zasilania IEC 61000-4-11	<5% UT (>95% spadek w UT) przez 5 sekund	<5% UT (>95% spadek w UT) przez 5 sekund	Jakość zasilania sieciowego powinna odpowiadać typowemu środowisku komercyjnego lub szpitalnego. Jeśli TheraFace PRO ma być używane ciągle podczas przerw w zasilaniu to zaleca się, aby było zasilane z zasilacza awaryjnego lub akumulatora.
Częstotliwość zasilania (pole magnetyczne 50/60 Hz) IEC 61000-4-8	3 A/m	3 A/m	Pola magnetyczne o częstotliwości sieciowej powinny być na poziomach charakterystycznych dla typowej lokalizacji w typowym środowisku komercyjnego lub szpitalnego.

UWAGA UT to a.c. napięcie sieciowe przed zastosowaniem poziomu testowego.

TEST ODPORNOŚCI	POZIOM TESTOWY IEC 60601	POZIOM ZGODNOŚCI	ŚRODOWISKO ELEKTROMAGNETYCZNE – WSKAZÓWKI
Przewodnictwo RF IEC 61000-4-6	3 V rms 150 kHz do 80 MHz	3V	Przenośny i mobilny sprzęt do komunikacji radiowej nie powinien być używany bliżej jakiegokolwiek części stacji high, w tym kabli, niż zalecana odległość separacji obliczona z zastosowania równania do częstotliwości nadajnika. Zalecana odległość separacji Gdzie p jest maksymalną znamionową mocą wyjściową nadajnika w watach (W) według producenta nadajnika, a d jest zalecaną odległością separacji w metrach (m).b Natężenia pola wytwarzanego przez stałe nadajniki RF, określone przez badanie terenu w obszarze elektromagnetycznym, a) powinny być mniejsze niż poziom zgodności w każdym zakresie częstotliwości. b) Zakłócenia mogą wystąpić w pobliżu sprzętu oznaczonego następującym symbolem:
Promieniowanie RF	3V/m 80 MHz do 2.5 GHz	3 V/m	UWAGA 1 Przy 80 MHz i 800 MHz obowiązuje wyższy zakres częstotliwości. UWAGA 2 Niniejsze wytyczne mogą nie mieć zastosowania we wszystkich sytuacjach. Na pole elektromagnetyczne wpływa absorpcja i odbicie od konstrukcji, przedmiotów i ludzi.

Natężenia pola z nadajników, takich jak stacje bazowe telefonów radiowych (komórkowych/bezprzewodowych) i naziemnych radiotelefonów komórkowych, radioamatorskie, audycje radiowe AM i FM oraz audycje telewizyjne, nie mogą być teoretycznie dokładnie przewidziane. Aby ocenić środowisko elektromagnetyczne ze względu na stałe nadajniki RF, należy rozważyć elektromagnetyczne badanie terenu. Jeśli zmierzona siła pola w miejscu, w którym używany jest TheraFace PRO, przekracza obowiązujący poziom zgodności RF podany powyżej. TheraFace PRO powinien być obserwowany, aby sprawdzić prawidłowe działanie. W przypadku zaobserwowania nieprawidłowego działania mogą być konieczne dodatkowe środki, takie jak zmiana orientacji lub przemieszczenie stacji high. W zakresie częstotliwości od 150 kHz do 80 MHz, moc pola powinna być mniejsza niż 3 V/m.

Zalecane odległości separacji między urządzeniami przenośnymi i mobilnymi

Sprzęt komunikacyjny RF i SPRZĘT lub SYSTEM – w przypadku SPRZĘTU i SYSTEMÓW, które nie służą do podtrzymywania życia

Zalecane odległości separacji między przenośnymi i mobilnymi urządzeniami komunikacyjnymi RF a stacją hygi

TheraFace PRO jest przeznaczony do użytku w środowisku elektromagnetycznym określonym poniżej. Klient lub użytkownik TheraFace PRO powinien upewnić się, że jest on używany w takim środowisku.

Znamionowa maksymalna moc nadajnika W	Odległość separacji zgodnie z częstotliwością nadajnika		
	150 kHz do 80 MHz	80 MHz do 800 MHz	800 MHz do 2.5 GHz
0.01	0.12	0.12	0.23
0.1	0.38	0.38	0.73
1	1.2	1.2	2.3
10	3.8	3.8	7.3
100	12	12	23

W przypadku nadajników o maksymalnej mocy wyjściowej niewymienionej powyżej zalecaną odległość d w metrach (m) można oszacować za pomocą równania dotyczącego częstotliwości nadajnika, gdzie P jest maksymalną znamionową mocą wyjściową nadajnika w watach (W) według producenta nadajnika.

UWAGA 1 Przy 80 MHz i 800 MHz obowiązuje odległość dla wyższego zakresu częstotliwości.

UWAGA 2 Niniejsze wytyczne mogą nie mieć zastosowania we wszystkich sytuacjach. Na propagację elektromagnetyczną wpływa absorpcja i odbicie od konstrukcji, przedmiotów i ludzi.

ZGŁOSZENIA GWARANCYJNE

WERON Bartosz Weron
ul. Hoffmanowej 21/2
35-016 Rzeszów
info@weron.pl

Należy pamiętać, że nie jest to adres zwrotny ani lokalizacja sprzedaży detalicznej. Żadne produkty ani opakowania Therabody nie będą akceptowane w tym miejscu.