

RENPHO

Instrukcja obsługi

INTELIGENTNA WAGA ŁAZIENKOWA

Modele: ES-WBE28, ES-BR001, R-A003



Dystrybutor w Polsce:

BRANDBOOK SERVICES SP. Z O.O. SP. K.

ul. Raclawicka 99, 02-634 Warszawa

NIP: 6751735834 KRS: 000086023

INSTRUKCJA OBSŁUGI
↓

RENPHO

Uwaga!

Podczas użytkowania wagi należy przestrzegać środków ostrożności.

1. Waga nie powinna być używana do diagnozowania lub leczenia jakichkolwiek stanów chorobowych. Przed podjęciem diety lub programu ćwiczeń należy zawsze skonsultować się z lekarzem.
2. Osobą które mogą być w ciąży, cierpią na osteoporozę, mają rozrusznik serca, protezy stawów, przenośne EKG lub inne metalowe urządzenia, odradza się korzystanie z produktu. W takim przypadku używaj wyłącznie podstawowej funkcji pomiaru wagi i noś obuwie aby uniknąć prądu elektrycznego podczas ważenia.
3. Jeśli waga działa nieprawidłowo, najpierw sprawdź zasilanie bateryjne. W razie potrzeby wymień baterie.


4. Sprawdź urządzenie przed każdym użyciem. Nie należy używać urządzenia, jeśli uległo uszkodzeniu. Może spowodować obrażenia lub niedokładne wyniki.
5. Dopilnuj aby waga pozostawała sucha. Zachowaj ostrożność podczas używania z mokrą powierzchnią.
6. Waga jest delikatna, proszę obchodzić się z nią ostrożnie.
7. Waga jest urządzeniem pomiarowym o wysokiej precyzji. Nie należy po niej skakać ani demontować jakichkolwiek części. Obchodź się z nią ostrożnie, aby uniknąć stłuczenia.
8. Waga nie jest wodoodporna; nie zanurzaj jej w wodzie. Do czyszczenia powierzchni używaj wilgotnej ściereczki lub środka do czyszczenia szkła. Nie należy używać mydła ani innych chemicznych środków czyszczących.
9. Przy pierwszym parowaniu należy włączyć

Bluetooth. Po zakończeniu pierwszego pomiaru zostaniesz zapytany czy chcesz sparować wagę z WiFi. Później możesz wybrać czy chcesz użyć WiFi/Bluetooth do synchronizacji danych.

Krok 1

Przed użyciem:

Zainstaluj prawidłowo baterie AAA;
jeden zestaw znajduje się w opakowaniu.

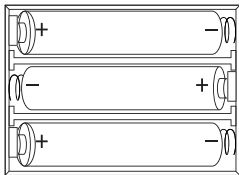

Ważne:

1. Nie należy mieszać starych i nowych baterii lub baterii o różnym składzie/marce, aby zapobiec ewentualnemu wyciekowi.
2. Dostarczone oryginalne baterie NIE NADAJĄ się do ponownego ładowania. NIE WOLNO próbować ładować baterii.
3. Jeśli na wyświetlaczu pojawi się napis „LO”, należy wymienić baterie.

Krok 2



Używaj wagi na płaskim i stabilnym podłożu.
Unikaj dywanów i nierównych podłóg.

Krok 3

Pobierz i zainstaluj na swoim smartfonie bezpłatną aplikację „Renpho Health”.



Ważne: Ze względu na ciągłe aktualizacje i ulepszenia, aplikacja „Renpho Health” może wyglądać nieco inaczej.

Krok 4

Otwórz aplikację i postępuj zgodnie z instrukcjami dotyczącymi konfiguracji i parowania:


- a. Zarejestruj swoje konto w aplikacji Renpho Health używając e-mail. Możesz również skorzystać z trybu Guest (Gość), jeśli nie chcesz się rejestrować.

Ważne: Urządzenie jest wagą działającą w trybie dualnym WiFi & Bluetooth. Tryb gościa nie obsługuje trybu WiFi, proszę zarejestrować konto, aby uzyskać pełną funkcjonalność produktu.


- b. Włącz funkcje Bluetooth na swoim smartfonie. Urządzenia z systemem iOS 13 lub nowszym, wymagają dodatkowego pozwolenia na korzystanie przez aplikację z funkcji Bluetooth:
 1. Przejdź do ustawień na swoim telefonie;
 2. Przewiń w dół, aby znaleźć aplikację Renpho Health;
 3. Pozwól na korzystanie przez aplikację z funkcji Bluetooth. Dla użytkowników systemu Android, upewnij się, że usługi lokalizacji są włączone dla urządzeń z Android 6.0 lub nowszym.

Krok 5

Aby sparować wagę ze smartfonem za pierwszym razem, należy włączyć Bluetooth w telefonie.

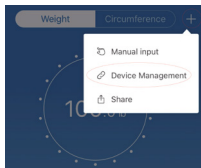

1. Stuknij „+” i wybierz „Device Management” na stronie pomiarowej.

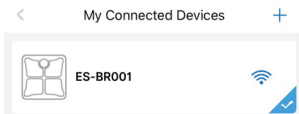

2. Wybierz „+” na „My Connected Devices”.




3. Stań na powierzchni wagi bosymi i suchymi stopami.



4. Stuknij nazwę urządzenia na stronie parowania.


Krok 6

Sparowanie wagi RENPHO z WiFi

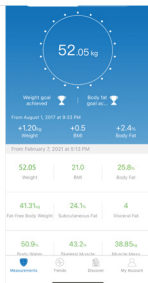

5. Stój na wadze przez 5–10 sekund. Parowanie jest prawidłowe, gdy Twój pomiar pojawi się w aplikacji Renpho Health.

Gratulacje! Pomyślnie zakończyłeś swój pierwszy pomiar i możesz teraz sprawdzić swoje dane zapisane w aplikacji.

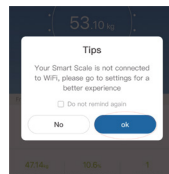


1. Po pierwszym ważeniu zostaniesz zapytany czy chcesz sparować wagę z WiFi, kliknij „OK”.



2. Wprowadź prawidłowe hasło WiFi.



3. Poczekał na połączenie wagi z WiFi.
W tym czasie na wadze będzie migać
ikona WiFi.

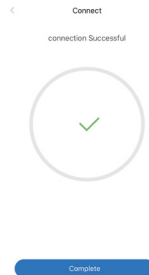

4. Gratulacje! Udało Ci się sparować swoją
wagę z WiFi.

Uwaga:

Jeśli przy pierwszym pomiarze nie sparowałeś wagi z WiFi, możesz wybrać urządzenie z logo WiFi w „Device Management”, aby skonfigurować ustawienia WiFi później.

Ważne!

Rekalibracja:


Jeśli waga została przeniesiona lub odwrócona do góry nogami, należy ją ponownie skalibrować, a by zachować dokładność pomiarów:

1. Proszę umieścić wagę na twardym, płaskim i stabilnym podłożu.
Unikaj wszelkich dywanów.
2. Postaw jedną stopę na wadze, aby ją wybudzić.
3. Gdy na monitorze pojawią się cyfry, zdejmij stopę z powierzchni.
4. Waga powinna wyświetlić „CAL”, a następnie „0,0” lub „0,00”.

CAL → 00

or

CAL → 000

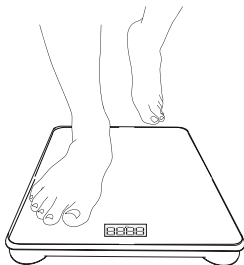

Aby uzyskać więcej informacji, proszę zeskanować kod QR lub skorzystać z naszej strony internetowej ze szczegółową instrukcją.

WARUNKI GWARANCJI

Zakupiony przez Państwa produkt RENPHO objęty jest dwuletnią ograniczoną gwarancją producenta liczoną od daty dostawy.

Warunki gwarancji znajdują się na stronie:

<https://renpho.com/pages/warranty-terms-and-conditions>

Uwaga: Rejestracja produktu nie jest wymagana do uzyskania gwarancji. Jeśli użytkownik zdecyduje się nie rejestrować produktu, nie spowoduje to ograniczenia gwarancji na produkt.



To oznaczenie wskazuje, że ten produkt nie powinien być wyrzucany z innymi odpadami domowymi na terenie UE. Aby zapobiec ewentualnym, szkodom dla środowiska lub zdrowiu ludzkiego wynikającym z niekontrolowanej utylizacji odpadów, podaj go odpowiedzialnemu recyklingowi, aby promować zrównoważone ponowne wykorzystanie zasobów materiałowych. Aby zwrócić zużyte urządzenie, należy skorzystać z punktu zwrotu i odbioru odpadów elektronicznych lub skontaktować się ze sprzedawcą, u którego produkt został zakupiony. Może on przekazać produkt do bezpiecznego dla środowiska recyklingu.

OBSŁUGA KLIENTA

Jeśli masz jakiegokolwiek pytania lub wątpliwości dotyczące produktu, nie wahaj się skontaktować z nami bezpośrednio pod adresem:

✉ Email: bok@brandbook.services

*W przypadku zgłoszeń wadliwych produktów lub zwrotów należy skontaktować się z nami podając numer zamówienia oraz datę zakupu. NIE wyrzucaj żadnych elementów produktów, ponieważ mogą one być potrzebne do procesu rozpatrywania reklamacji bądź naprawy.

RENPHO

Dystrybutor w Polsce:

BRANDBOOK SERVICES SP. Z O.O. SP. K.

ul. Raclawicka 99, 02-634 Warszawa

NIP: 6751735834 KRS: 000086023

