


Fairywill

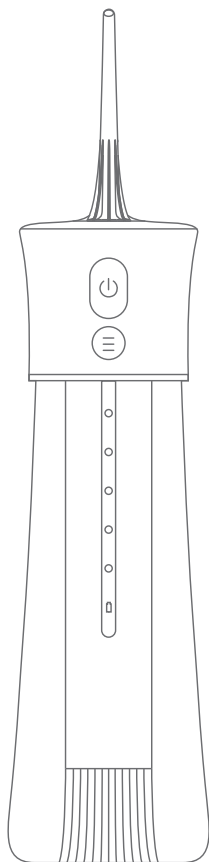

F30

Irygator

Instrukcja obsługi

Prosimy o dokładne zapoznanie się z instrukcją oraz zachowanie jej w celu późniejszego wykorzystania.

1. Środki bezpieczeństwa

Wszystkie informacje zawarte w tym rozdziale mają na celu poinstruowanie użytkownika o prawidłowej i bezpiecznej obsłudze tego urządzenia, aby mógł on uniknąć obrażeń ciała u siebie i innych osób, a także uszkodzenia mienia.


- Dzieci oraz osoby niepotrafiące obsługiwać urządzenia nie powinny same z niego korzystać. Należy przechowywać urządzenie poza zasięgiem dzieci.
- Nie należy modyfikować, demontować ani naprawiać urządzenia samodzielnie.
- Nie należy umieszczać ani przechowywać produktu w miejscu, w którym może upaść lub wpaść do wody.
- Nie należy sięgać po produkt, jeśli wpadł do wody. Należy natychmiast odłączyć urządzenie od zasilania.
- Nie należy używać produktu podczas kąpieli.

2. Ostrzeżenia

- Urządzenie może być użytkowane przez dzieci w wieku od 8 lat wzwyż oraz osoby o ograniczonych możliwościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, bądź nieposiadające doświadczenia i wiedzy, jeśli otrzymały nadzór lub instrukcję dotyczącą użytkowania urządzenia w bezpieczny sposób i rozumieją związane z tym zagrożenia.
- Nie należy dopuszczać, aby dzieci bawiły się urządzeniem. Czyszczenie i konserwacja nie mogą być wykonywane przez dzieci bez nadzoru.
- Urządzenie może być używane wyłącznie z zasilaczem dostarczonym wraz z urządzeniem.
- Nie należy napełniać zbiornika wodą cieplejszą niż 40°C.
- Jeśli zewnętrzny przewód urządzenia jest uszkodzony, powinien zostać wymieniony przez obsługę serwisową w celu uniknięcia zagrożenia.
- Należy utrzymywać przewód z dala od rozgrzanych powierzchni.
- Podczas użytkowania urządzenia należy zwracać uwagę, aby nie zgubić dyszy.
- Nie należy zanurzać urządzenia w wodzie.
- Nie należy używać urządzenia do celów innych niż czyszczenie jamy ustnej.

- Należy przechowywać dyszę poza zasięgiem małych dzieci. Dysza jest na tyle mała, że łatwo ją połknąć i może utknąć w gardle.
- Niektóre rodzaje płynów do płukania ust mogą uszkodzić urządzenie poprzez pęknięcie obudowy lub zbiornika wody. Dlatego nie należy używać płynów do płukania ust w zbiorniku wody.
- W przypadku bólu zębów lub dziąseł należy skontaktować się z dentystą przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia.
- Nie należy dociskać dyszy zbyt mocno do zębów lub dziąseł, ponieważ może to spowodować uszkodzenie dziąseł.
- W celu zastosowania dyszy do przyzębia należy włączyć irygator ustawiając go na najniższe ciśnienie (tryb Soft).
- Podczas ładowania urządzenia napięcie musi wynosić 5 V = 1000 mA.

3. Opis produktu

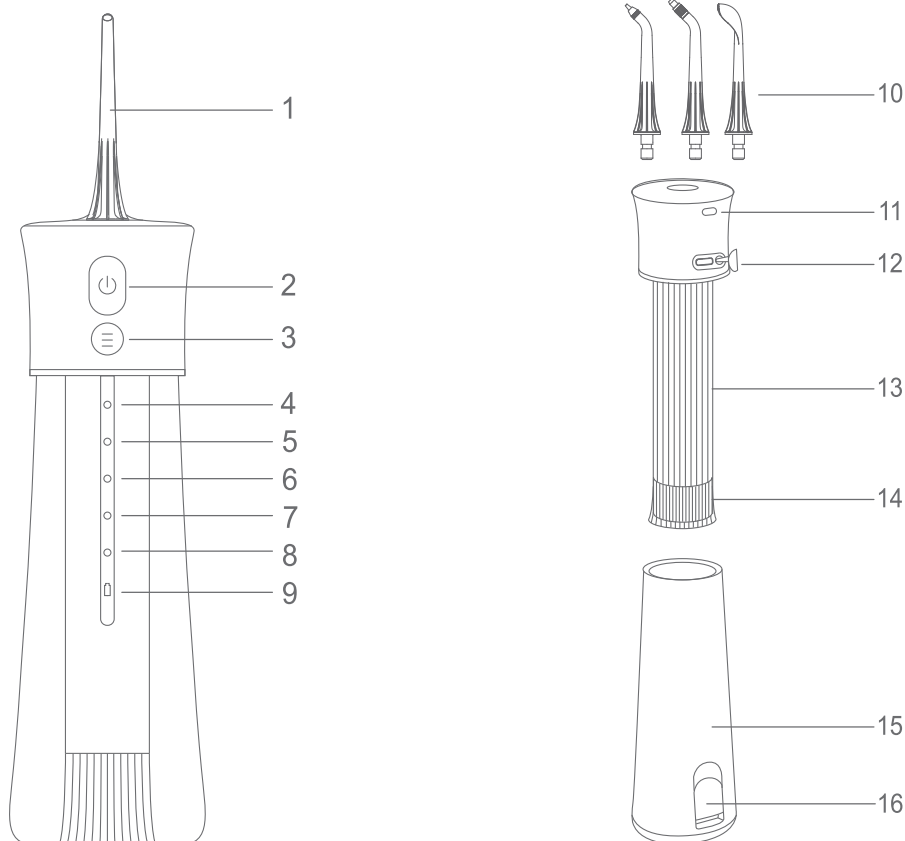

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Standardowa dysza | 9. Wskaźnik kontrolny |
| 2. Przycisk zasilania | 10. Dysza do przyzębia/ortodontyczna/do języka |
| 3. Przycisk trybu | 11. Przycisk blokady |
| 4. Tryb Soft | 12. Port ładowania (podstawa ładowarki) |
| 5. Tryb Normal | 13. Panel irygatora |
| 6. Tryb Potent | 14. Filtr |
| 7. Tryb Pulse | 15. Pojemnik na zbiornik |
| 8. Tryb Point | 16. Pokrywa zbiornika wody |

Uwaga

Wewnątrz urządzenia może znajdować się mała ilość cieczy (zbiornik, przewód zasysający wodę, itp.). Jest to pozostała woda destylowana, która została użyta do testu wydajności (przepływu wody). Woda destylowana nie stanowi zagrożenia dla zdrowia.


4. Prawidłowy sposób użytkowania

4.1 Ładowanie produktu (rys. 1)

- Przed rozpoczęciem korzystania z irygatora należy dokładnie zamknąć pokrywę zbiornika, aby uniknąć wycieku wody.
- Zdejmij osłonę portu ładowania (upewnij się, że wewnątrz wtyczki urządzenia nie znajduje się ciecz).
- Podłącz przewód zasilający do portu ładowania.
- Jeśli urządzenie będzie w pełni naładowane, wskaźnik kontrolny zacznie świecić na biało przez 2 minuty, a następnie się wyłączy.
- Po zakończeniu ładowania ponownie załóż osłonę na port ładowania.

Uwaga


Wskaźnik kontrolny będzie migać na czerwono, jeśli poziom naładowania jest niższy niż 10%. Jeśli poziom naładowania będzie niższy niż 3%, czerwony wskaźnik kontrolny zacznie migać 5 razy, a następnie zgaśnie, a urządzenie się wyłączy. Pełne naładowanie urządzenia zajmuje 4 godziny.

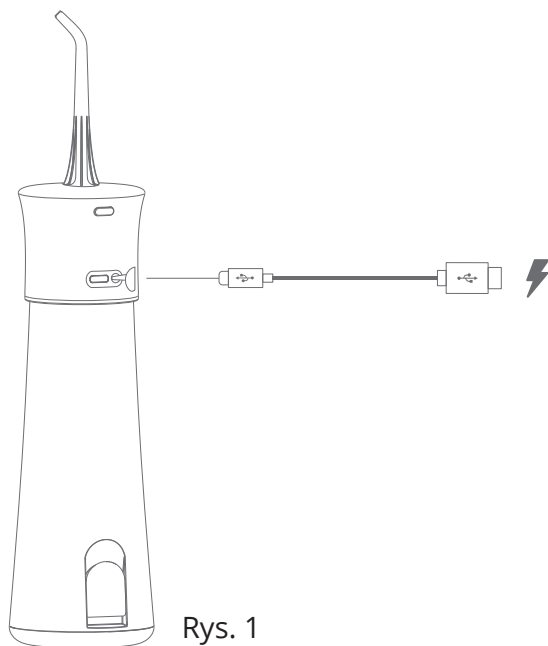

Rys. 1

4.2 Prawidłowa obsługa produktu

- Zamocuj dyszę na urządzeniu (rys. 2)
- Otwórz pokrywę pojemnika na wodę, aby napełnić go wodą o temperaturze nieprzekraczającej 40°C. Następnie zamknij pokrywę (rys. 3).

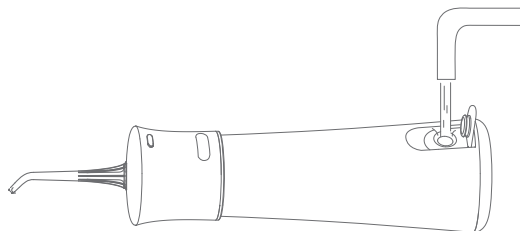


Rys. 3




Rys. 2

- Zdejmij pojemnik na wodę z urządzenia, napełnij go wodą o temperaturze nieprzekraczającej 40°C. Następnie przymocuj pojemnik do urządzenia (rys. 4).
- Naciśnij przycisk trybu (3), aby zmienić tryb pracy po włączeniu urządzenia. Tryb domyślny pozostanie taki sam jak przy ostatnim użytkowaniu (rys. 5).

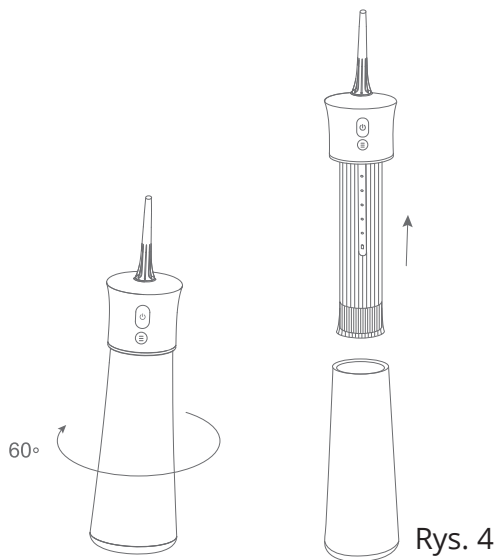

Rys. 4

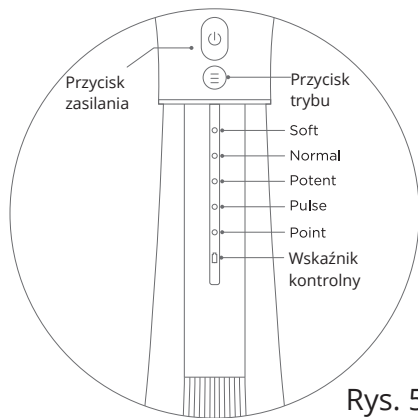

Rys. 5

Opis trybów:

Soft: do czyszczenia wrażliwych dziąseł, ciśnienie wody wynosi 4-6Kgf/cm²

Normal: standardowe czyszczenie, ciśnienie wody wynosi 6-8Kgf/cm².

Potent: dokładne czyszczenie zębów i dziąseł w celu pozbycia się kamienia nazębnego, ciśnienie wody wynosi 8-11 Kgf/cm².

Pulse: tryb przeznaczony do masażu dziąseł, ciśnienie wody wynosi ok. 4-6Kgf/cm².


Point: do czyszczenia określonego obszaru zębów lub dziąseł, ciśnienie wody wynosi 8-11Kgf/cm². Naciśnij przycisk, aby woda wypłynęła.

- Trzymaj urządzenie w pozycji pionowej z końcówką dyszy skierowaną w stronę zębów.



- Usta powinny być lekko otwarte, aby woda mogła wypłynąć.

- Naciśnij przycisk , aby włączyć urządzenie. Rygator rozpocznie pracę w poprzednio ustawionym trybie. Aby wyłączyć urządzenie, naciśnij przycisk  (rys. 6).

- 1) Skieruj strumień wody pod kątem 90 stopni do zębów i dziąseł.
- 2) Skieruj strumień wody stopniowo wzdłuż zębów.
- 3) Skieruj strumień wody wzdłuż linii dziąseł z końcówką dyszy ustawioną pod kątem 90 do dziąsła.
- 4) Dokładnie wyczyść przestrzeń między zębami. Jeśli posiadasz aparat ortodontyczny, koronki lub mostki, również możesz użyć irygatora do oczyszczenia.

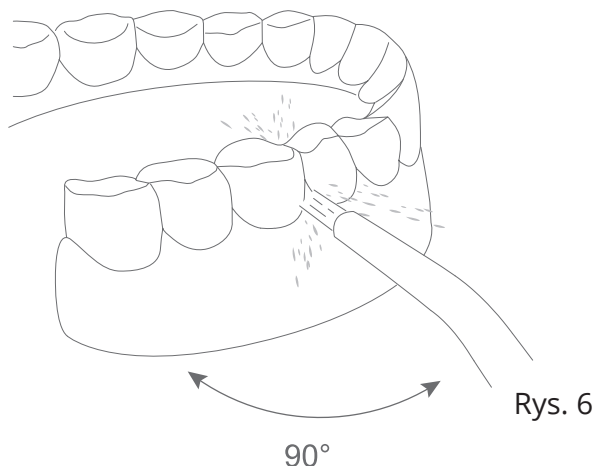

- Przytrzymaj urządzenie, a następnie wyciągnij dyszę (rys. 7).
- Po zakończeniu użytkowania naciśnij ponownie przycisk , aby wyłączyć urządzenie.

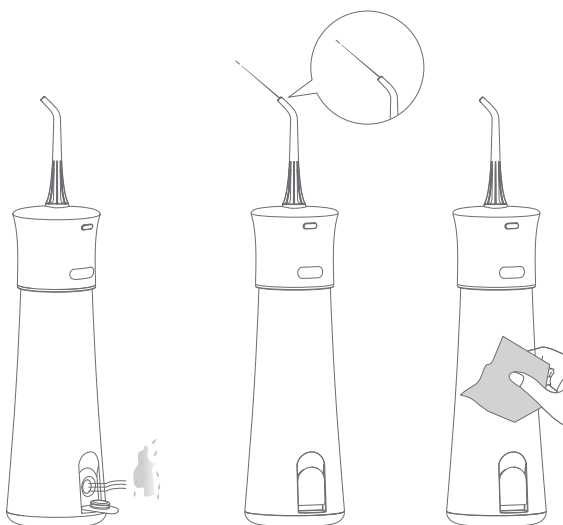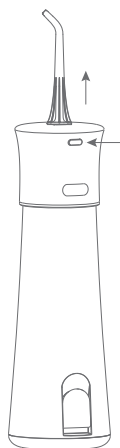

4.3 Zakończenie użytkowania (rys. 8)

- Otwórz pokrywę pojemnika na wodę i wylej pozostałą wodę.
- Naciśnij przycisk , aby włączyć urządzenie i opróżnić wodę wewnątrz urządzenia.
- Ponownie naciśnij przycisk , aby wyłączyć urządzenie, i zamknąć pokrywę pojemnika na wodę.
- Przetrzyj urządzenie suchą ściereczką.

Uwaga

Aby zapobiec rozwojowi bakterii, upewnij się, że wewnątrz urządzenia nie znajduje się pozostała woda. Jeśli nie zamierzasz używać tego urządzenia przez dłuższy czas, pamiętaj, aby jak najszybciej wysuszyć urządzenie przed jego przechowywaniem.

5. Specyfikacja

Temperatura pracy: 0-50°C

Napięcie pracy: DC 3,7 V

Napięcie wejściowe: DC 5 V

Moc znamionowa: 6-7 W

Stopień wodoodporności: IPX7

Ochrona środowiska



Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.



Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkowania, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.

Niniejszy dokument jest tłumaczeniem oryginalnej instrukcji obsługi, stworzonej przez producenta.

Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji dystrybutora / producenta dostępne na stronie internetowej <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Produkt należy regularnie konserwować (czyścić) we własnym zakresie lub przez wyspecjalizowane punkty serwisowe na koszt i w zakresie użytkownika. W przypadku braku informacji o koniecznych akcjach konserwacyjnych cyklicznych lub serwisowych w instrukcji obsługi, należy regularnie, minimum raz na tydzień oceniać odmiennosć stanu fizycznego produktu od fizycznie nowego produktu. W przypadku wykrycia lub stwierdzenia jakiegokolwiek odmiennosć należy pilnie podjąć kroki konserwacyjne (czyszczenie) lub serwisowe. Brak poprawnej konserwacji (czyszczenia) i reakcji w chwili wykrycia stanu odmiennosć może doprowadzić do trwałego uszkodzenia produktu. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z zaniedbania.

Dla akumulatorów LI-ION

Urządzenie wyposażone jest w akumulator LI ION (litowo-jonowy) który z uwagi na swoją fizyczną i chemiczną budowę starzeje się z biegiem czasu i użytkowania. Producent określa maksymalny czas pracy urządzenia w warunkach laboratoryjnych gdzie występują optymalne warunki pracy dla urządzenia a sam akumulator jest nowy i w pełni naładowany. Czas pracy w rzeczywistości może się różnić od deklarowanego w ofercie i nie jest to wada urządzenia a cecha produktu. Aby zachować maksymalną żywotność akumulatora nie zaleca się go rozładowywać do poziomu poniżej 3,18V lub 15% ogólnej pojemności. Niższe wartości, jak np. 2,5V dla ogniwa uszkadzają je trwale i nie jest to objęte gwarancją. W przypadku zaniechania używania akumulatora lub całego urządzenia przez czas dłuższy niż jeden miesiąc należy akumulator naładować do 50% i sprawdzać cyklicznie co dwa miesiące poziom jego naładowania. Przechowuj akumulator i urządzenie w miejscu suchym, z dala od słońca i ujemnych temperatur.

Dla akumulatorów LIPO

Urządzenie wyposażone jest w akumulator LI PO (litowo-polimerowy) który z uwagi na swoją fizyczną i chemiczną budowę starzeje się z biegiem czasu i użytkowania. Producent określa maksymalny czas pracy urządzenia w warunkach laboratoryjnych gdzie występują optymalne warunki pracy dla urządzenia a sam akumulator jest nowy i w pełni naładowany. Czas pracy w rzeczywistości może się różnić od deklarowanego w ofercie i nie jest to wada urządzenia a cecha produktu. Aby zachować maksymalną żywotność akumulatora nie zaleca się go rozładowywać do poziomu poniżej 3,5V lub 5% ogólnej pojemności. Niższe wartości, jak np. 3,2V dla ogniwa uszkadzają je trwale i nie jest to objęte gwarancją. W przypadku zaniechania używania akumulatora lub całego urządzenia przez czas dłuższy niż jeden miesiąc należy akumulator naładować do 50% i sprawdzać cyklicznie co dwa miesiące poziom jego naładowania. Przechowuj akumulator i urządzenie w miejscu suchym, z dala od słońca i ujemnych temperatur.