

SEAGO

Instrukcja obsługi

Soniczna szczoteczka do zębów

Model: S2


Dziękujemy za wybór sonicznej szczoteczki do zębów Saego. Saego dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wysoką jakość produktów, które mają pomóc w codziennym dbaniu o zdrowie i higienę jamy ustnej oraz jak najabrdziej efektywne czyszczenie zębów.

Raport z badań klinicznych, przeprowadzonych w znanej klinice stomatologicznej, wykazał, że ciągłe używanie szczoteczki sonicznej do zębów marki Saego przez 7 dni zmniejsza wskaźnik płytki nazębnej o 45% co może zmniejszyć jej gormadzenie się a także usunąć przebarwienia występujące po dymie papierosowym, kawie, herbacie itp.


Środki bezpieczeństwa:

1. Osoby, które wcześniej nie stosowały szczoteczek sonicznych mogą na początku jej użytkowania odczuwać dyskomfort (np. uczucie odrętwienia). Jest to całkowicie normalne zjawisko, które po około tygodniu użytkowania powinno zaniknąć.
2. Nie należy demontować, naprawiać ani modyfikować samodzielnie produktu.
3. Nie należy udzerzać ani doprowadzić do upadku produktu. Jeśli produkt ulegnie uszkodzeniu, należy zaprzestać jego używania.
4. Przed podłączeniem zasilacza należy sprawdzić, czy lokalne napięcie jest zgodne z napięciem oznaczonym na opakowaniu produktu.
5. Ten produkt może być używany wyłącznie ze specjalnie dydykowaną główką szczoteczki do zębów.
6. Jeżeli u osoby chcącej użytkować szczoteczkę soniczną wciągu ostatnich dwóch miesięcy przeprowadzono operację w obrębie jamy ustnej lub dziąseł, należy przed użyciem skonsultować się z lekarzem stomatologiem.
6. Jeżeli po użyciu szczoteczki występuje krwawienie lub krawienie trwa dłużej niż jeden tydzień, należy skonsultować się z lekarzem stomatologiem.
7. Ten produkt jest przeznaczony wyłącznie do czyszczenia zębów, dziąseł oraz języka.
8. Nie należy udostępniać tego produktom dzieciom w celu zabawy. Dzieci powinny używać tego produktu pod nadzorem osoby dorosłej.
9. Nie należy przechowywać produktu w miejscach o wysokiej tempematurze oraz narażonych na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.

Lista komponentów:

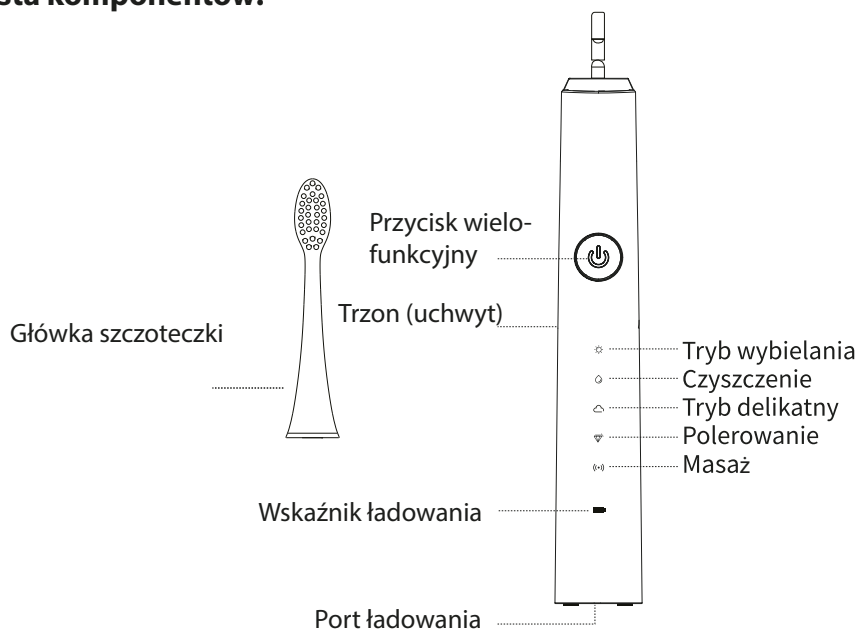

Instrukcje

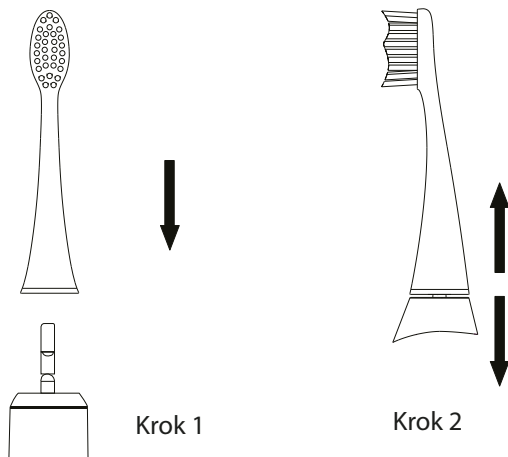

Właściwości

Właściwości produktu:

1. Skuteczne czyszczenie jamy ustnej z częstotliwością drgań 40000 razy na minutę.
2. Pięć trybów: Wybielania, czyszczenie, delikatny, polerowanie, masaż- aby używać jak najlepsze efekty higieny jamy ustnej
3. Funkcja sygnalizacji włączenia zasilania: wszystkie wskaźniki trybu świecą świecą się przez 1 s przed uruchomieniem.
4. Produkt jest ergonomicznie zaprojektowany, tak aby był łatwy do trzymania oraz antypoślizgowy.
5. Klasa wodoodporności IPX7.
6. Bezpieczna i wytrzymała bateria litowa wystarcza na około 45 dni pracy na pełnym naładowaniu (w trybie "sensitive") z funkcją przypominającą o braku zasilania i ładowaniem przez USB.
7. Produkt wyposażony jest w inteligentną pamięć trybu, 30-sekundowy timer przypominający o zmianie obszaru czyszczenia zębów oraz automatyczny wyłącznik, który aktywuje się po dwóch minutach szczotkowania.

Sposób używania:

1. Podłącz port ładowania do źródła zasilania i rozpocznij ładowanie.
2. Zamocuj główkę szczoteczki i upewnij się, że jest zablokowana we właściwym miejscu. Zmocz włosie i nałóż odpowiednią ilość pasty do zębów.
3. Delikatnie przyłóż główkę szczoteczki do zębów.
4. Przez 10 sekund delikatnie przesuwaj główkę szczoteczki po każdej części zębów, w tym po powierzchniach przednich, tylnych i żujących.
5. Przycisk wielofunkcyjny wymaga ciągłego naciskania przez 3 sekundy w celu przełączenia na pierwszy tryb, w przeciwnym razie urządzenie automatycznie przestanie działać.
6. W celu wybrania spośród pięciu trybów wciśnij przycisk wielofunkcyjny.
7. Funkcja automatycznego przypominania o zmianie obszaru szczotkowania uruchamia się co 30 sekund. Po dwóch minutach ciągłego szczotkowania urządzenie wyłączy się automatycznie.

Instrukcje dotyczące ładowania:

1. Jeśli po użyciu miga czerwony wskaźnik lub nie można normalnie włączyć produktu, oznacza to, że poziom naładowania baterii jest niski i należy ją naładować.
2. Gdy produkt jest ładowany, wskaźnik ładowania świeci na czerwono. Gdy bateria jest w pełni naładowana, wskaźnik ładowania zmieni kolor na zielony i ładowanie zostanie automatycznie wyłączone, aby zapobiec przeładowaniu baterii.
3. W przypadku pierwszego użycia lub gdy bateria jest niedoładowana przez długi okres czasu, wskaźnik może nie świecić się przez pierwsze pięć minut.

Informacje o produkcie:

Nazwa produktu: Supreme Clean Model: S2

Napięcie wejściowe: 5V =

Moc wejściowa: 1,5W

Materiał produktu: ABS/TPE/Nylon

Wymiary szczoteczki: 26,9 X 26,4 X 247mm

Czas ładowania: < 4 godziny

Temperatura pracy: 0-50°C


Norma operacyjna: GB4706.59-2008

Wyprodukowano w Chinach



Ochrona środowiska- recykling baterii wielokrotnego ładowania:

Ten produkt zawiera baterię litową. Przed wyrzuceniem, należy wyjąć baterię i poddać ją recyklingowi lub zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji odpadów. W razie wątpliwości należy skontaktować się z lokalnym departamentem gospodarki odpadami.


Podczas używania narzędzi należy przestrzegać podstawowych zasad bezpieczeństwa i stosować środki ochronne, aby uniknąć obrażeń.

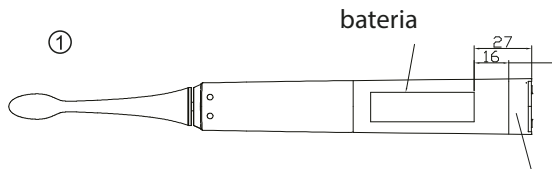


1. Odciąć koniec uchwytu, jak pokazano na rysunku.

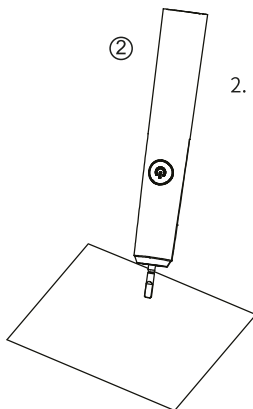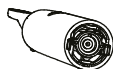


2. Przytrzymać uchwyt przy płaszczyźnie, np. pulpit.

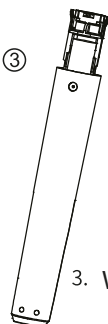

3. Wymij wspornik.

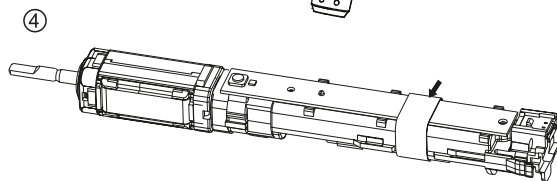

4. Rozerwij przezroczystą taśmę po wyjęciu uchwytu, przezroczysta taśma znajduje się na wysokości strzałki.

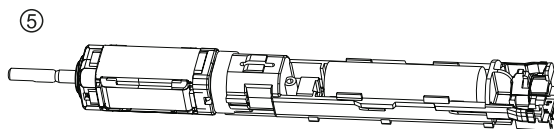

5. Wymij baterię z uchwytu po oderwaniu taśmy klejącej.

Usterki i sposoby ich naprawiania:

Usterka	Możliwa przyczyna usterki	Rozwiązanie
Słaba siła wibracji	Zbyt mocne dociskanie włosia do zębów	Delikatnie przyłóż główkę szczoteczki
Którki czas pracy urządzenia	1. Uchwyt nie znajduje się we właściwym miejscu 2. Bateria może się nie ładować	1. Upewnij się, że uchwyt jest ustawiony w prawidłowy sposób podczas ładowania 2. Wydłuż czas ładowania
Urządzenie nie działa	Upewnij się, że produkt jest w pełni naładowany	1. Naładuj baterię 2. Skontaktuj się z działem obsługi klienta

Ochrona środowiska



Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.



Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkowania, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.

Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji dystrybutora / producenta dostępne na stronie internetowej <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>