

SEAGO




**SONICZNA SZCZOTECZKA
DO ZĘBÓW
SG-2303
INSTRUKCJA OBSŁUGI**

Dziękujemy za wybór naszej sonicznej szczoteczki do zębów. SEAGO jest zaangażowane w dostarczanie efektywnych kosztowo produktów, które lepiej oczyszczą Twoje zęby i pomogą chronić zdrowie jamy ustnej.


Ważne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

1. Użytkownicy początkujący w używaniu elektrycznych szczoteczek do zębów mogą odczuwać lekkie drętwienie lub inne wrażenia po kilku pierwszych użyciach. Dyskomfort ten powinien zniknąć po kilku dniach. Jeśli po tym czasie nadal będzie występowało odczucie dyskomfortu, należy skonsultować się z lekarzem stomatologiem.
2. Nie wolno demontować, naprawiać ani modyfikować produktu bez autoryzacji.
3. Nie należy uderzać ani doprowadzać do upadku produktu. Jeśli produkt jest wadliwy, należy zaprzestać jego używania.
4. Przed ładowaniem należy sprawdzić, czy napięcie w miejscu instalacji jest zgodne z napięciem podanym na opakowaniu.
5. Ten produkt może być używany wyłącznie z dedykowanymi główkami szczoteczki marki Saego.
6. Jeśli w ciągu ostatnich dwóch miesięcy przeszedłeś zabieg chirurgiczny w obrębie jamy ustnej lub dziąseł, skonsultuj się z lekarzem stomatologiem przed użyciem produktu.
7. Jeśli po wielokrotnym stosowaniu produktu wystąpi krwawienie lub krwawienie utrzymuje się dłużej niż 7 dni, należy skonsultować się z lekarzem stomatologiem.
8. Ten produkt jest przeznaczony wyłącznie do czyszczenia zębów, dziąseł i języka.
9. Produkt nie może być udostępniany dzieciom w celu zabawy. Należy nadzorować, czy dzieci używają produktu w prawidłowy sposób.
10. Nie należy umieszczać produktu w miejscach o wysokich temperaturach oraz narażonych na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.


Nazwy komponentów produktu

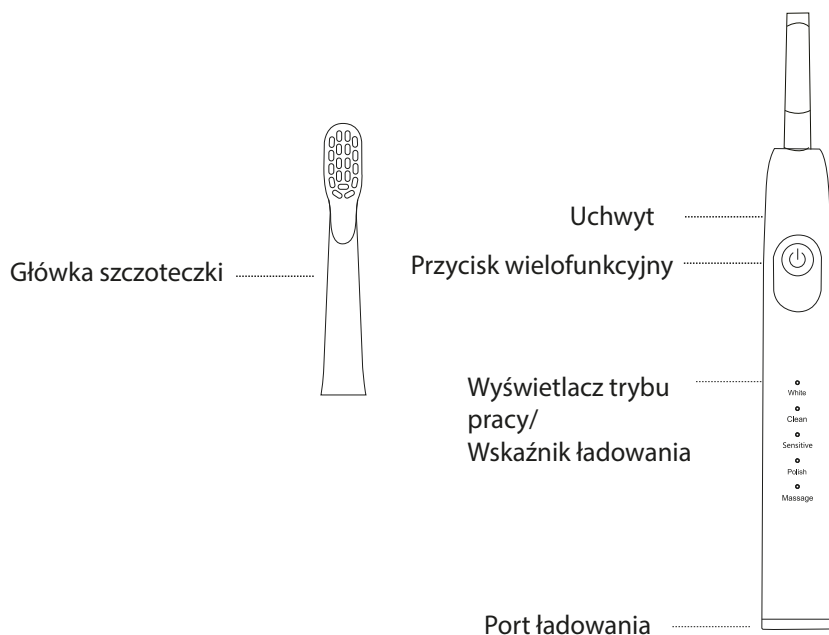

Wymiana główki szczoteczki- instrukcja

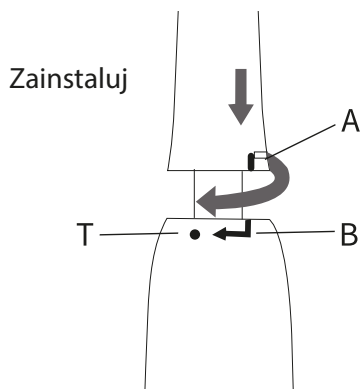

Przesuń główkę szczoteczki w dół zgodnie z kierunkiem A, obróć zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby A spotkało się z B.

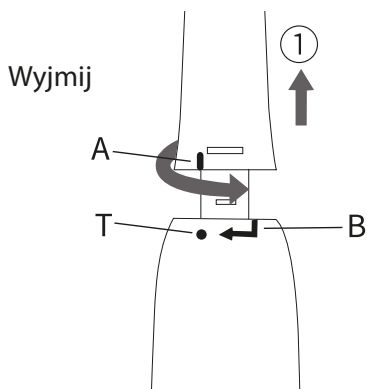

Obróć główkę szczoteczki do zębów w dół zgodnie z kierunkiem A, obróć w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aż A spotka się z B, następnie wyciągnij zgodnie z kierunkiem ①

Funkcje

1. Skuteczne czyszczenie jamy ustnej z prędkością 40000 razy na minutę.
2. Pięć trybów: Wybielanie, czyszczenie, delikatny, polerowanie, masaż.
3. Zalety: ergonomiczna konstrukcja, wodoodporna, antypoślizgowa oraz wygodna do trzymania w dłoni.
4. Produkt działa do 120 dni na pełnym naładowaniu dzięki bezpiecznej i wytrzymałej baterii litowej. Wskaźnik ładowania będzie migać, aby ostrzegać, że produkt wymaga naładowania.
5. Inteligentna pamięć trybu, automatyczne wyłączenie pod 2 minutach szczotkowania oraz 30-sekundowy timer przypominający o zmianie obszaru szczotkowania pozwolą na uzyskanie najlepszych efektów oraz wyrobienie dobrych nawyków dbania o higienę jamy ustnej.
6. Wskaźnik naładowania baterii:
Gdy produkt przestanie działać, wskaźniki LED zaświecą się.
Poziom naładowania baterii: <20%, dolny wskaźnik LED świeci się.
Poziom naładowania baterii: 20%-40%, świecą dwie dolne diody LED.
Poziom naładowania baterii: 40%-60%, świecą trzy dolne wskaźniki LED.
świecą dolne trzy wskaźniki LED.
Poziom naładowania baterii: 60%-80%, świecą cztery dolne wskaźniki LED.
Poziom naładowania baterii: 80%-100%, świecą wszystkie pięć wskaźników LED.

Sposoby użytkowania:

1. Zamocuj główkę szczoteczki i upewnij się, że jest ona właściwie umieszczona. Zmocz włosie i nałóż odpowiednią ilość pasty do zębów.
2. Umieść szczoteczkę do zębów w ustach przed włączeniem.
3. Delikatnie przesuwaj główkę szczoteczki po każdym odcinku zębów przez 10 sekund, włączając w to przednie, tylne i powierzchnie dziąseł.
5. W celu zmiany trybów działania należy przyciskać przycisk wielofunkcyjny przez 5 sekund, w przeciwnym razie produkt przestanie działać automatycznie.
6. Produkt wyłączy się automatycznie pod dwóch minutach szczotkowania.

Instrukcje dotyczące ładowania:

1. Gdy pojemność baterii jest niska, produkt nie uruchomi się lub wskaźnik ładowania będzie migać przez 10 razy, informując, że produkt wymaga naładowania.
2. Produkt należy ładować używając ładowarki z kablem USB, który jest dołączony do produktu.
3. Lampki kontrolne będą się świecić od dołu podczas ładowania i wyłączą się automatycznie gdy bateria będzie w pełni naładowana.
4. Podczas pierwszego użycia lub w sytuacji, gdy bateria nie była naładowana przez dłuższy czas, wskaźnik może nie zaświecić się w ciągu pierwszych pięciu minut.

Wymowanie baterii:


Ten produkt zawiera baterię litową. Przed wyrzuceniem, należy wyjąć baterię i poddać ją recyklingowi lub zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji odpadów. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lokalnym działem gospodarki odpadami.

Do wyjęcia baterii potrzebne są następujące narzędzia: szczypce, nożyczki.

Uwaga: Przed wyrzuceniem produktu należy wyjąć baterię. Przed jej wyjęciem upewnij się, że bateria jest rozładowana.


Podczas używania narzędzi należy przestrzegać podstawowych zasad bezpieczeństwa i podjąć środki ochronne, aby uniknąć obrażeń.

①

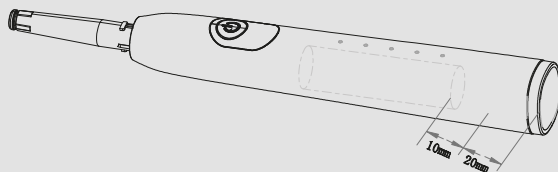


Najpierw zdejmij głowicę szczotki i za pomocą piły zaznacz 10 mm od położenia piły.

②

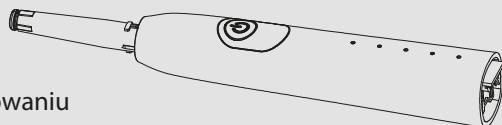


Po przepiłowaniu

③

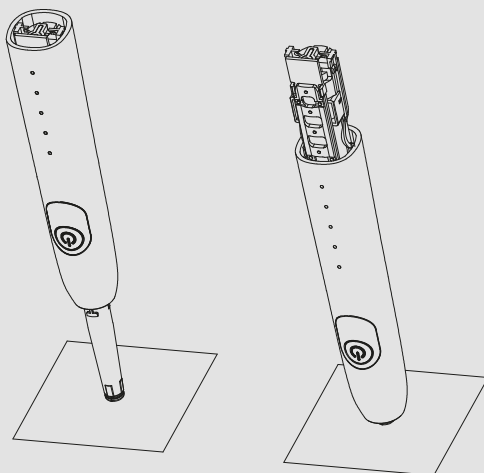

Przyłóż drążek wahadłowy do blatu stołu, chwyć za uchwyt i naciśnij w dół, aby wyjąć wewnętrzny wspornik.

④

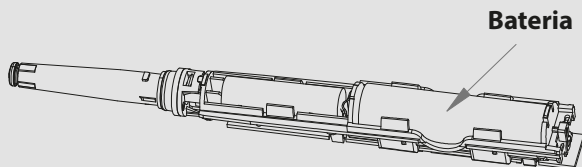

Po zdjęciu uchwytu widać baterię. Wyjmij ją z gniazda baterii i przetnij przewód baterii lub podkładkę.

Informacje o produkcie:

Model: SG-2303

Temperatura pracy: 5-40°C

Napięcie wejściowe :5V =

Czas ładowania: <4 godz.

Moc wejściowa :1.5W

Pochodzenie: Chiny

Operative standard:GB4706.59-2008

GB4706.1-2005

Usterki i sposób ich usuwania:

Usterka	Przyczyna usterki	Rozwiązanie
Słaba siła wibracji	Zbyt duża siła nacisku	Zmniejsz siłę nacisku główki szczoteczki na zęby
Krótki czas pracy produktu	1. Uchwyt nie znajduje się we właściwym miejscu, co powoduje usterkę ładowania 2. Niski poziom baterii	1. Umieść uchwyt we właściwym miejscu podczas ładowania 2. Wydłuż czas ładowania.
Produkt nie działa	1. Niski poziom naładowania baterii. 2. Inna przyczyna.	1. Naładuj baterię. 2. Skontaktuj się z działem obsługi klienta

NINGBO SEAGO ELECTRIC CO.,LTD

Adres:No.239 Jianghu Road, Jiangbei District, Ningbo, Zhejiang,Chiny

WYPRODUKOWANO W CHINACH

Ochrona środowiska



Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.



Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkowania, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.

Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji dystrybutora / producenta dostępne na stronie internetowej <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>