



FALI6 – Instrukcja obsługi PL

UWAGA

Prosimy o uważne przeczytanie wszelkich instrukcji i zachowanie ich na wypadek potrzeby w przyszłości.

- Urządzenia NIE MOGĄ UŻYWAĆ kobiety w ciąży lub osoby z rozrusznikiem serca, cierpiące na epilepsję, cukrzycę, sklerozę multiplex, lub w okresie rekonwalescencji po operacji.
- Należy zachować ostrożność używając styków w pobliżu oczu. Utrzymywać odległość styków minimalnie 1 cm od oczu.
- NIE UŻYWAĆ w miejscach dotkniętych trądzikiem różowatym, na trądzik ze stanem zapalnym, obtartą skórą lub bliznach, na znamionach barwnikowych lub żylakach.
- Jeżeli żel dostanie się do kontaktu z oczami, dokładnie wypłukać je wodą. Jeżeli wystąpi podrażnienie, zasięgnąć porady lekarza.
- Przechowywać poza zasięgiem dzieci i zwierząt domowych.

NAUKA

W miarę starzenia mięśnie naszej twarzy tracą swój tonus. Policzki zapadają się, pojawia się drugi podbródek i przybywają zmarszczki. Lift Plus łączy dwie technologie salonów kosmetycznych do liftingu, rejuwenacji i odmładzania cery.

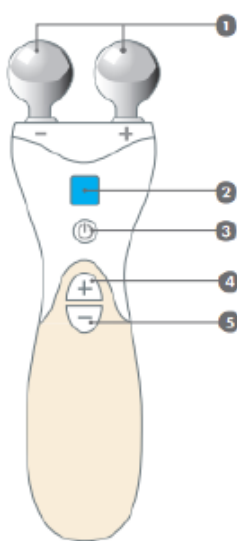


Elektrostymulacja – EMS Ujędźnia obwisłe rysy twarzy i ogólnie odmładza cerę. Z użyciem odrobiny przewodzącego żelu face lift zrobi całą pracę za Ciebie. Programy 1 – 3.



Infuzja galwaniczna (Jonoforeza) – wykorzystuje delikatny mikro prąd do transportu substancji czynnych głęboko do skóry. Z pomocą plastrów kolagenowo-retinolowych pomaga w redukcji zmarszczek i poprawia elastyczność skóry. Program 4.

ZAPOZNAJ SIĘ WYŚWIETLACZ LCD



Programy są oznaczone literą „P” i numerem.



Intensywność jest wyrażona tylko liczbą.

Krótkim naciśnięciem przycisku (+) lub (-) zmienia się intensywność. Przytrzymując przycisk (+) lub (-) szybko przemieszcza się po poziomach intensywności.

Niebieski wyświetlacz LCD świeci przez czas 5 sekund a następnie wyłączy się, jeżeli nie zostanie naciśnięty żaden przycisk.

Automatyczne wyłączenie: po 30 minutach bez naciśnięcia któregośkolwiek przycisk urządzenie zapiszczy i wyłączy się.

60 sekundowy timer: Jednostka piszcząc co 60 sekund sygnalizuje możliwość przemieszczenia na inne miejsce.

1 Styki kulkowe (-) i (+)

2 wyświetlacz LCD

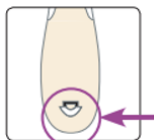
3 Przycisk Program On/Off

4 Przycisk zwiększenia intensywności (+)


5 Przycisk obniżenia intensywności (-)

6 Schowek na baterie

BATERIE



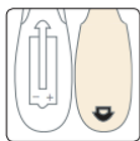W celu włożenia baterii zwolnić spinkę i otworzyć pokrywę. Podłączyć baterię alkaliczną PP3 9V i upewnić się, że styk **+** jest podłączony według rysunku. Włożyć pasek do wyjmowania baterii pod baterię i założyć z powrotem pokrywę.



- Jeżeli urządzenie nie będzie dłuższy czas używane, wyjąć baterię.
- **NIE UŻYWAĆ** akumulatorów.
- Zapewnić prawidłową likwidację starych baterii zgodnie z lokalnymi przepisami.


TEST TOLERANCJI

Ważne: Zawsze przeprowadzić test przewodności z żelem przewodzącym w mniej widocznym miejscu skóry dla sprawdzenia możliwej reakcji. Odczekać 24 godziny. Jeżeli wystąpi podrażnienie skóry, nie używać urządzenia. Jeżeli wystąpi reakcja skórna po użyciu kolagenu i retinolu, nie przeprowadzać zabiegów z plastrami.

PROGRAMY & ZABIEGI

Program	Zabieg	Technologia	Intensywność	Żel/Plastry
P1	Ujędrnienie Rytmiczne dwusekundowe skurcze mięśni dla uzyskania kondycji i krótkie trzy sekundowe pauzy między poszczególnymi impulsami.	 EMS	1- 20	Żel przewodzący
P2	Gruntowne ujędrnienie zapewnia maksymalne przećwiczenie mięśni dzięki nastawionej wariacji różnej intensywności skurczów.	 EMS	1 - 20	Żel przewodzący
P3	Oklepywanie masażowa stymulacja mięśni. Na przemian 5- sekundowy masaż z 3-sekundowym rozluźnieniem.	 EMS	1- 20	Żel przewodzący
P4	Jonoforeza Wykorzystuje słaby mikro prąd do dostarczania substancji czynnych głęboko do skóry.	 Jonoforeza	1- 10	Plastry kolagenowo-retinolowe i żel przewodzący

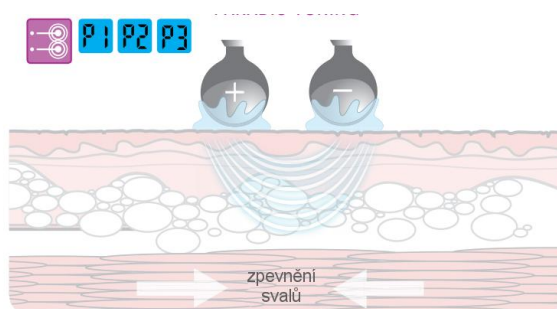ELEKTROSTYMULACYJNA GIMNASTYKA TWARZY



Już ponad 40 lat w salonach kosmetycznych wykorzystuje się elektrostymulację mięśni EMS do delikatnego kurczenia i rozluźniania mięśni twarzy dla liftingu i ujędrnienia cery. Ta stymulacja poprawia też krążenie, co przynosi więcej tlenu do komórek skóry i szybciej usuwa toksyny, skóra jest świeża i odmłodzona. Przeprowadza również drenaż limfatyczny.

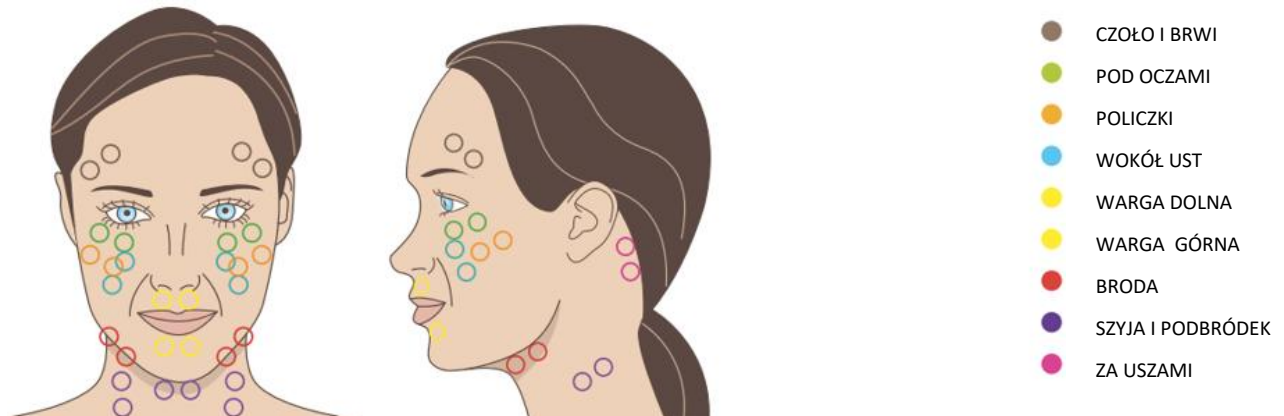
Tryb zabiegu

Dla uzyskania najlepszych wyników zalecamy przeprowadzanie elektrostymulacji codziennie przez okres pierwszych kilku tygodni, na przemian programy 1, 2 i 3 codziennie. Następnie stosować według potrzeby dla utrzymania jędrnych mięśni.

Co będziesz czuć

- Z początku poczujesz delikatne vibracje, wraz ze wzrostem intensywności mięsień zacznie się kurczyć.
- Twoje zęby mogą być wrażliwe w trakcie zabiegu, jest to zupełnie normalne.
- Efektywna pielęgnacja twarzy opiera się na przyjemnej stymulacji mięśni. W razie nieprzyjemnego wrażenia można dodać żel przewodzący lub obniżyć intensywność, ewentualnie przenieść się na inne miejsce.
- Przed przemieszczeniem na inne miejsce obniżyć intensywność.




MIEJSCE ZABIEGU



Zalecamy podczas zabiegu korzystanie z lustra.


	CZOŁO I BRWI Umieścić jeden styk nad koniec brwi, wycentrować między brwi i linię włosów. Skierować urządzenie tak, aby drugi styk był między brwiami i linią włosów.
	POD OCZAMI Użyć linii pod oczami, na krawędzi kości, umieścić jeden styk na tej linii i bezpośrednio pośrodku pod oko. Następny styk musi kopiować kontur w kierunku na zewnątrz.
	POLICZKI Umieścić styki pod i wzdłuż łuku kości jarzmowej. Znaleźć najlepszą pozycję według kształtu twarzy, w razie silnej kontrakcji z delikatniejszym mrowieniem.
	WOKÓŁ UST Te linie znajdują się między nosem i kąciem ust. Umieścić jeden styk na "jabłko" policzka a drugi styk po przekątnej pod ten punkt według naturalnej linii i równoległe do linii ust. Zmienić nieco pozycję, dopóki nie będą odczuwalne silniejsze kontrakcje
	WARGA DOLNA I GÓRNA Umieścić styki symetrycznie nad obrzeże wargi. Zwiększyć intensywność dla uzyskania dobrej kontrakcji. Powtórzyć tę procedurę pod dolną wargą. Jeżeli usta wyglądają niesymetrycznie w jedną stronę, jest to naturalne.
	BRODA Kopiować linię brody diagonalnie w dół i umieścić styki na którąś stronę szczęki. Zwiększyć intensywność dla uzyskania najlepszych kontrakcji. Może być konieczne nieznaczne poprawienie pozycji
	SZYJA I PODBRÓDEK Najpierw umieścić styki wzdłuż mięśni dźwigaczy głowy w przybliżeniu w miejscach, gdzie pulsuje krew. Następnie umieścić styki na mięsień pod brodą. Dla najlepszego umieszczenia trzymać styki w linii, ale przemieszczać je nieznacznie w górę lub w dół w celu znalezienia silniejszych kontrakcji.
	ZA USZAMI Umieścić styki w linii włosów jak najwyżej bez kontaktu z uszami. Będą wyczuwalne naprawdę silne kontrakcje przez linię szyi.

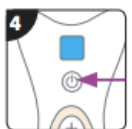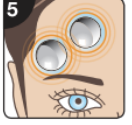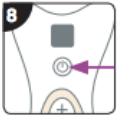UŽITIE URZÁDZENIA

	Krok 1 Naniešť dostatečnú ilość želu przewodzącego na styki kulkowe. Dostateczna ilość żelu jest ważna dla prawidłowego kontaktu ze skórą.
	Krok 2 Po naciśnięciu przycisku Program / On / Off przez czas 3 sekund urządzenie włączy się. Jak tylko włączy się, zapiszczy i niebieski wyświetlacz LCD zacznie świecić. Urządzenie zacznie od programu 1. naciskać wielokrotnie przycisk Program / On / Off w celu nastawienia żądanego programu. Uwaga: Za każdym razem, kiedy zostanie wybrany inny program, intensywność będzie na poziomie 1.
	Krok 3 Na czystą skórę umieścić styki kulkowe dla pielęgnacji pierwszego miejsca.
	Krok 4 Zwiększyć intensywność naciskając przycisk (+) i przemieścić styki, dopóki nie będą wyczuwalne żądane kontrakcje mięśni. Jeżeli są nieprzyjemne, obniżyć intensywność przyciskiem (-). Uwaga: W różnych miejscach twarzy nastawiać żądaną intensywność.
	Krok 5 Trzymać urządzenie w pozycji 60 sekund w celu dokończenia pielęgnacji danego miejsca. Po 60 sekundach urządzenie zapiszczy sygnalizując, że można się przemieścić na następne miejsce. Obniżyć intensywność przed przemieszczeniem na następne miejsce.
	Krok 6 Po użyciu wyłączyć urządzenie. Nacisnąć i przytrzymać przycisk /On/ Off przez 3 sekundy.

POZNAJ SWOJE GRUPY MIĘŚNIOWE

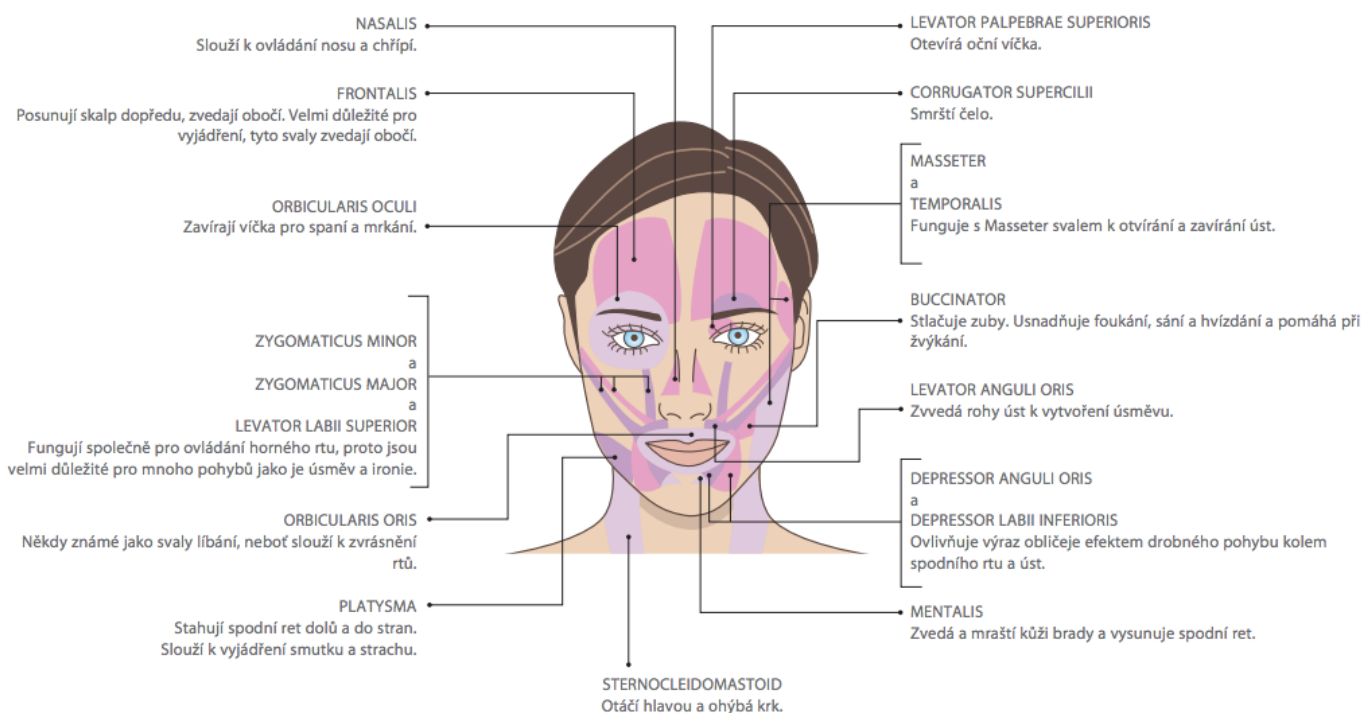Podczas używania twarzy ćwiczy się określone mięśnie. To jest instrukcja, która pomoże Ci dowiedzieć się, które mięśnie ćwiczysz i do czego służą.



NASALIS

Służą do obsługi nosa i nozdrzy

LEVATOR PALPEBRAE SUPERIORIS

Otwiera powieki

FRONTALIS

Posuwają skalp do przodu, podnoszą brwi. Bardzo ważne dla wyrażenia, te mięśnie podnoszą brwi.

CORRUGATOR SUPERCILII

Marszczą czoło.

ORBICULARIS OCULI

Zamykają powieki do snu i mrugania.

MASSETER i TEMPORALIS

Wraz z mięśniem Masseter służy do otwierania i zamykania ust.

ZYGOMATICUS MINOR i ZYGOMATICUS MAJOR i LEVATOR LABII SUPERIOR

Wspólnie obsługują górną wargę, dlatego są bardzo ważne dla wielu ruchów, takich jak uśmiech i ironia.

BUCCINATOR

Zaciska zęby. Ułatwia dmuchanie, ssanie i gwizdanie i pomaga w przeżuwaniu.

LEVATOR ANGULI ORIS

Podnosi kątki ust dla wytworzenia uśmiechu.

ORBICULARIS ORIS

Czasem znane jako mięśnie całowania, ponieważ służą do wydmania warg.

DEPRESSOR ANGULI ORIS i DEPRESSOR LABII INFERIORIS

Wpływa na wyraz twarzy efektem drobnego ruchu wokół dolnej wargi i ust.

PLATYSMA

Ściągają dolną wargę w dół i na boki.

Służą do wyrażenia smutku i strachu.

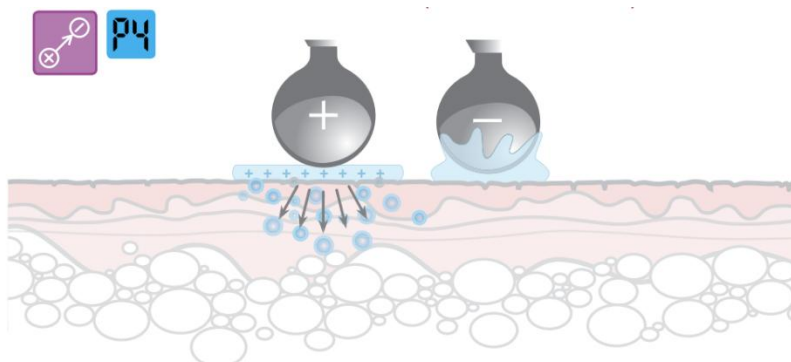
MENTALIS

Podnosi i marszczy skórę brody i wysuwa dolną wargę.

STERNOCLEIDOMASTOID

Obraca głowę i zgina szyję.

JONOFOREZA GALWANICZNA



Jonoforeza wykorzystuje mikro prąd do dostarczania substancji czynnych głęboko do skóry. Ta infuzja transdermalna skutecznie zwiększa efektywność środka aplikowanego lokalnie, który w przeciwnym wypadku trudno przenika przez skórę.

Kolagenowo-retinolowe plastry żelowe zawierają dodatnio naładowany kolagen i retinol jako środek przeciwko zmarszczkom i starzeniu. Po umieszczeniu dodatniego styku na każdy plaster i ujemnego styku na skórę te aktywne składniki są wprost "wtłaczane" do skóry.

Krótkotrwałe efekty są przeważnie zauważalne natychmiast. Regularne stosowanie efekt utrwała.

Zalecamy stosowanie plastrów kolagenowo-retinolowych raz na 24 godziny. W przypadku wrażliwej skóry wskazana jest przerwa 48 godzin między zabiegami.

Plastry są uformowane według obszarów pod oczami, na czoło, wokół ust i przez brodę.

Tryb zabiegu


Zalecamy używanie plastrów kolagenowo-retinolowych tylko raz na 24 godziny. W przypadku wrażliwej skóry zalecamy pauzę 48 godzin przed następną aplikacją plastra. Program 4.

Co możesz odczuwać

Zalecamy zaczynać od niskiego poziomu intensywności w każdym miejscu. Stopniowo zwiększać intensywność do pojawienia się niestabilnego mrowienia.







MIEJSCA ZABIEGU

- | | |
|-----------------------|---------------|
| ● CZOŁO | ● WOKÓŁ UST |
| ● USUWANIE ZMARSZCZEK | ● BRODA |
| ● POD OCZAMI | ● GÓRNA WARGA |

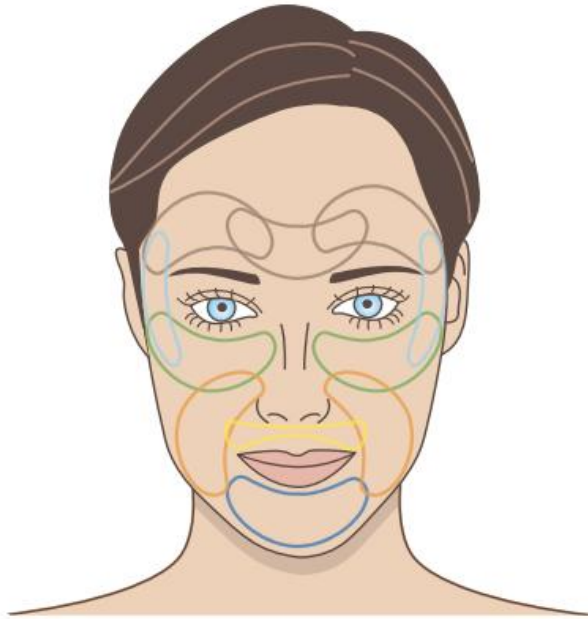

INFORMACJE O PASTRACH

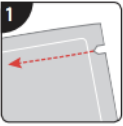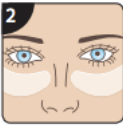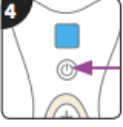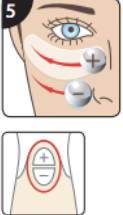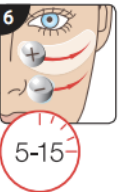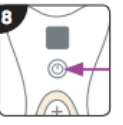- Główna część infuzji przebiega w ciągu pierwszych 5–15 minut zabiegu, ale plastry mogą zostać na twarzy 1 godzinę.
- Retinol łatwo traci swoje właściwości, dlatego należy przechowywać plastry w chłodnym i suchym miejscu chronionym przed bezpośrednim promieniowaniem słonecznym. Można je przechowywać w lodówce.
- Retinol może zwiększyć wrażliwość skóry na słońce. Nie narażać skóry po aplikacji na działanie światła słonecznego lub solarium. Po użyciu zalecamy użycie kremu z filtrem.
- Zapewnić, aby plastry dobrze przylepiły się na twarz.
- Używając urządzenia stosować delikatny ruch po skórze.
- Plastry są jednorazowe.

	WAŻNE Podczas infuzji należy dbać o prawidłową biegunowość styków. Styk (+) musi zostać na plastrze, natomiast styk (-) musi być na skórze.
	Krok 1 Dokładnie wyczyścić i wysuszyć skórę. Nie używać nawilzaczy. Otworzyć opakowanie z plastrem. Wyjąć plaster z opakowania i usunąć opakowanie w celu odkrycia styku plastra.
	Krok 2 Umieścić plaster na pielęgnowane miejsce. Następny plaster umieścić na przeciwległej stronie twarzy.
	Krok 3 Nanieść dostatek żelu na styk kulkowy (-). Użyć dostatecznej ilości żelu dla zapewnienia dobrego styku ze skórą.
	Krok 4 Wybrać program 4 - Jonoforeza naciskając przycisk Program/ On / Off cztery razy. Na wyświetlaczu LCD pojawi się P4.
	Krok 5 Ze stykiem (-) na skórze i stykiem (+) na plastrze poruszać do przodu i do tyłu przez czas 60 sekund. Zwiększyć intensywność, jeżeli jest wyczuwalne statyczne mrowienie.
	Krok 6 Powtarzać proces na drugim plastrze. Kontynuować pielęgnację między plastrami przez czas 10–30 minut (5–15 minut na każdej stronie).
	Krok 7 Plastry mogą zostać na skórze 1 godzinę po dokończeniu infuzji. Po zdjęciu plastra można wmasować wszelkie resztki do skóry.
	Krok 8 Po użyciu wyłączyć urządzenie. Nacisnąć i przytrzymać przycisk Program/ On/ Off przez 3 sekundy.

PODSTAWOWE INFORMACJE

- Urządzenie można czyścić wilgotną szmatką.
- NIE UŻYWAĆ rozpuszczalników.
- NIE ZANURZAĆ urządzenia do wody.
- NIE DEMONTOWAĆ. Wewnątrz nie ma żadnych części, które mógłby naprawić użytkownik. W razie konieczności skontaktować się z autoryzowanym warsztatem. Jeżeli urządzenie jest uszkodzone, nie używać go.
- NIE UŻYWAĆ w pobliżu urządzeń krótkofalowych lub mikrofalowych.
- W razie zauważenia niestandardowego zachowania urządzenia może to być spowodowane zewnętrznymi zakłóceniami elektromagnetycznymi, np. z silników / głośników. Usunąć to źródło zakłóceń i restartować urządzenie.

LIKWIDACJA

Dyrektywa w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE) (2012 / 19 / EU) wprowadzono dla zapewnienia recyklingu wyrobów z użyciem najlepszych dostępnych technologii recyklingu w celu minimalizacji wpływu na środowisko, oszczędności energii i zasobów naturalnych. Wyrób jest klasyfikowany jako urządzenie elektryczne i elektroniczne, dlatego po upływie jego żywotności należy zapewnić prawidłową likwidację zgodnie z lokalnymi przepisami. NIE WOLNO likwidować z odpadem komunalnym.

DANE KONTAKTOWE OŚRODKA SERWISOWEGO:

Wyłączny importer i dystrybutor na CZ i SK:

BORGY CZ, a.s.

Reklamacje / serwis

zakład RTK, Zápy 4, 250 01

Republika Czeska

E-mail: reklamace@borgy.cz

www.borgy.cz