

inFace

Odkurzacz do wągrów i zaskórników
InFace z kamerą CF-05E

Instrukcja obsługi

Funkcje produktu

Usuwanie zaskórników | Złuszczenie | Oczyszczanie porów | Światło niebieskie przeciwzapalne

Środki ostrożności

Prosimy o przeczytanie i przestrzeganie poniższych wskazówek dotyczących bezpieczeństwa:

- Ten produkt nie jest wodoodporny, prosimy nie moczyć produktu w jakiegokolwiek cieczy.
- Trzymaj produkt z dala od wanny, brodzika, umywalki lub innych naczyń zawierających wodę, a także utrzymuj produkt i zasilacz w stanie suchym.
- Wysusz ręce, aby zapobiec przedostaniu się wody lub innych płynów do produktu i jego uszkodzeniu.
- Nie należy nadużywać produktu na tym samym obszarze twarzy, ponieważ może to spowodować, że skóra stanie się zaczerwieniona i opuchnięta. Zaleca się, aby czas zatrzymania na tym samym obszarze podczas używania nie przekraczał 3 sekund, a czas każdego zabiegu nie przekraczał 5 minut.
- Nie należy używać produktu na delikatnych obszarach skóry, takich jak broda, kąciki ust i okolice oczu.
- Nie należy używać tego produktu na skórze z otwartymi ranami lub trądzikiem.
- Nie używaj produktu na obszarach poddanych zabiegom kosmetycznym oraz zapalnych stanach skóry.
- Jeśli czujesz się źle podczas używania, proszę natychmiast przestać używać produktu.
- Po dłuższym czasie ciągłego używania, jeśli na ciele pojawi się zjawisko nagrzewania, nie jest to wadą produktu, proszę spokojnie go używać.
- Po użyciu produktu, skóra może stać się zaczerwieniona, co jest normalnym zjawiskiem, zazwyczaj w ciągu 1 godziny zaczerwienienie zanika samoistnie.
- Nie należy patrzeć bezpośrednio na działające światło LED w bliskiej odległości.

Zawartość

Odkurzacz do wągrów i zaskórników InFace z kamerą x1

Końcówki x4


Silikonowy O Ring x2

Siatka przeciwkurzowa x2

Kabel USB do ładowania x1

Instrukcja obsługi x1

Opis produktu

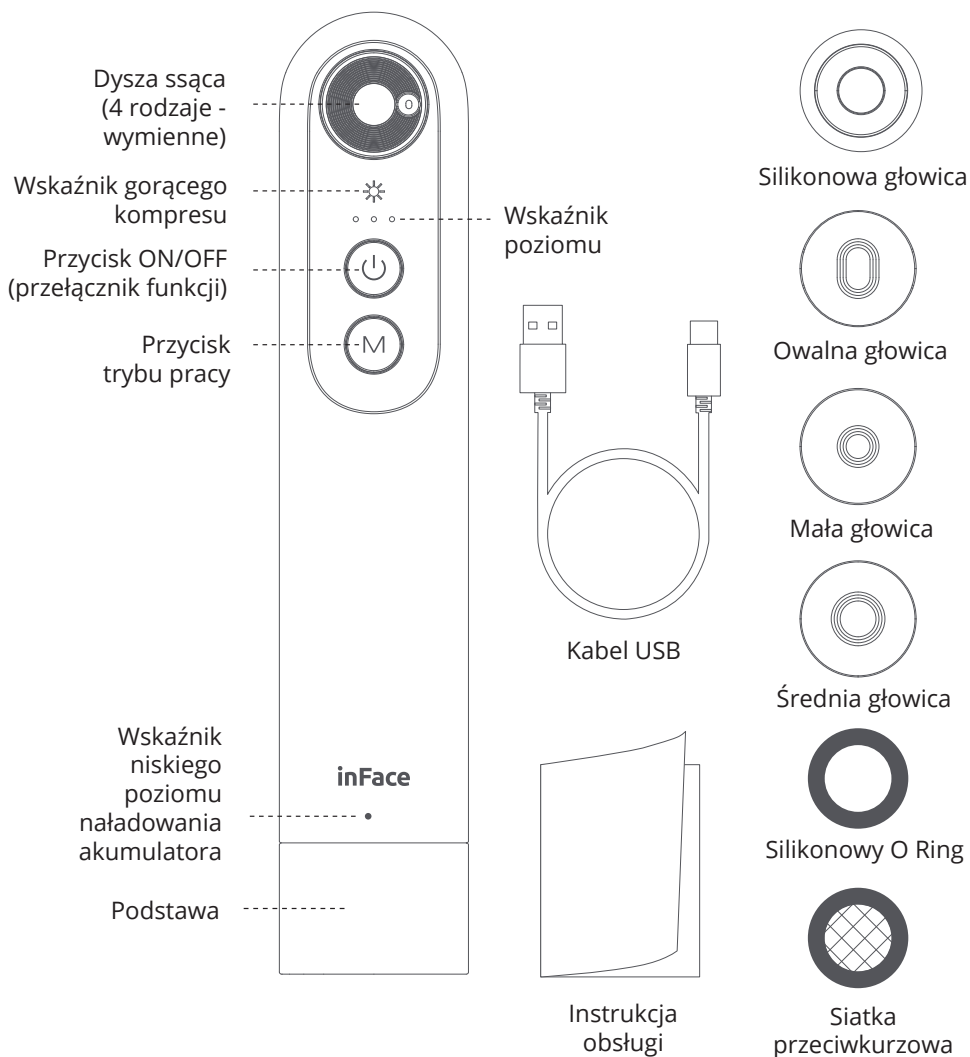

Uwaga: Zdjęcia produktów i opis istotnych cech przedstawionych w niniejszej instrukcji, jak również wyjaśnienia niektórych rzeczowników, mogą być używane jedynie jako odniesienie, użytkownicy powinni bazować na rzeczywistym przedmiocie. W związku z konsekwentną polityką ciągłego ulepszania produktów inFace, zastrzegamy sobie prawo do zmiany specyfikacji produktów bez uprzedniego powiadomienia.

Specyfikacja

Nazwa produktu: Odkurzacz do węgrów i zaskórników InFace z kamerą

Model: CF-05E

Pojemność akumulatora: 800mAh

Napięcie wejściowe: 5V

Moc wejściowa: 5W

Napięcie znamionowe: 3.7V

Moc znamionowa: 6W

Prąd czuwania: Około 30uA

Tryb ładowania: USB DC 5V

Czas ładowania: około 2 godziny

Prąd ładowania: 600mA

Rozmiar produktu: 160*31.5*31.5mm

Waga netto: Około 120g

Czas pracy ciągłej: około 60 minut

Zakres temperatur pracy: 0°C~40°C

Instrukcje użycia

1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk ON/OFF (przełącznik funkcji) przez 1,5 sekundy, aby włączyć urządzenie. Poziom 1 - biała dioda LED miga, wskazując stan czuwania.
2. Po włączeniu urządzenia, naciśnij przycisk trybu, aby przełączyć pomiędzy gorącym kompresem - niebieskim światłem - czyszczeniem; odpowiednia lampka kontrolna jest zawsze włączona.
3. Pracuj w każdym trybie przez 5 minut, aby wejść w tryb czuwania. Jeśli w ciągu 90 sekund nie zostanie wykonana jakakolwiek operacja, urządzenie automatycznie się wyłączy.
4. W każdym stanie pracy, naciśnij i przytrzymaj przycisk ON/OFF (przełącznik funkcji) przez 1,5 sekundy, a urządzenie wyłączy się.
5. W trybie czyszczenia, naciśnij przycisk ON/OFF (przełącznik funkcji), aby przełączyć pomiędzy poziomem 1- poziomem 2 - poziomem 3 - stan czuwania; odpowiednie lampki kontrolne będą włączone.
6. W trybie gorącego kompresu, gorąca część kompresu urządzenia jest podgrzewana do 40 +/- 2 stopni i utrzymywana w stałej temperaturze, a lampka kontrolna trybu jest zawsze włączona.
7. W trybie niebieskiego światła, niebieska dioda LED na górze urządzenia świeci się.
8. Gdy napięcie akumulatora jest niższe niż 3,4V, czerwony wskaźnik niskiego poziomu naładowania akumulatora miga przez 90 sekund i automatycznie się wyłącza.

Kroki dotyczące użytkowania

1. Pobierz i zainstaluj aplikację.
2. Połącz urządzenie z aplikacją.
3. Oczyszcz twarz przed użyciem, nałóż gorący ręcznik lub używaj parownicy do twarzy, aby ogrzać twarz przez pięć minut, co pomoże otworzyć pory, a następnie nałóż maskę na nos eksportującą zaskórniki. Włącz urządzenie oraz funkcję gorącego kompresu, aby przyspieszyć zmiękczenie zaskórników i łatwo je usunąć.
4. Wybierz końcówkę odpowiednią do Twoich potrzeb, zainstaluj ją na górze urządzenia i przed używaniem przetestuj siłę ssania na dłoni lub przedramieniu.
5. Podczas używania, można wybrać odpowiedni poziom w zależności od stanu skóry, naciskając przycisk ON/OFF (przełącznik funkcji).
6. Upewnij się, że głowica ssąca jest blisko skóry, w przeciwnym razie nie wytworzy się próżnia podciśnienia, a zaskórniki nie będą skutecznie odessane.
7. Podczas używania urządzenia należy pozostawać w ruchu, a czas zatrzymania na tym samym obszarze nie powinien przekraczać 3 sekund. Czas każdego zabiegu nie powinien przekraczać 5 minut.
8. Po czyszczeniu można przełączyć na tryb światła niebieskiego do pielęgnacji skóry.
9. Po używaniu, naciśnij i przytrzymaj przycisk ON/OFF (przełącznik funkcji) przez 1,5 sekundy, aby wyłączyć urządzenie.
10. Pielęgnacja zalecana jest raz w tygodniu. Konkretną częstotliwość używania należy dostosować do własnych warunków skóry.

Pobranie i instalacja aplikacji

Użyj przeglądarki w telefonie komórkowym, aby zeskanować kod QR w instrukcji, a następnie kliknij pobierz i zainstaluj.




Opis funkcji aplikacji

Połączenie z kamerą urządzenia poprzez aplikację sprawia, że oczyszczanie jest bardziej intuicyjne i wygodne.

1. Włącz urządzenie i wejdź w stan czuwania, następnie kliknij na stronie ustawień telefonu, aby wybrać nazwę WIFI odpowiadającą urządzeniu (taką jak inFace-xxxx), i połącz.
2. Otwórz aplikację "UDU" i przejdź do strony głównej. Jeśli urządzenie nie jest podłączone, aplikacja wyświetli monit o udzieleniu instrukcji.
3. Po kliknięciu przycisku zasilania, możesz zobaczyć obraz przesyłany przez kamerę urządzenia w interfejsie aplikacji.

Włącz

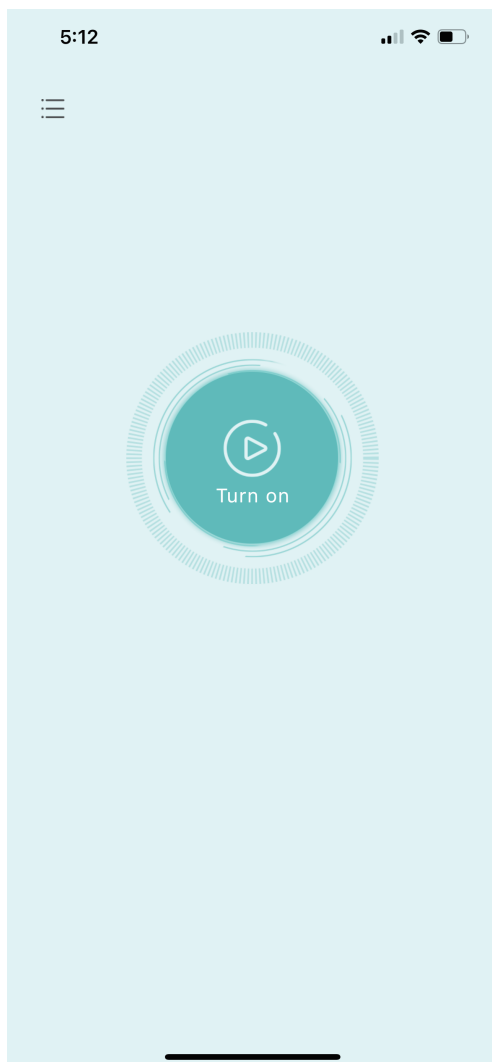

4. Podczas używania można odpowiednio dostosować pozycję roboczą miernika zaskórników w zależności od stanu wyświetlanej skóry twarzy.
5. Po kliknięciu "Video", obrazy przekazywane przez kamerę urządzenia można zapisać w telefonie komórkowym jako wideo.
6. Po kliknięciu "Photo", obraz przekazywany przez kamerę urządzenia może być zapisany w telefonie komórkowym jako zdjęcie.



Przycisk Photo/Video

7. Po używaniu produktu, po prostu zamknij aplikację w tle telefonu.

Instrukcja ładowania

Proszę w pełni naładować urządzenie przed używaniem go po raz pierwszy.

1. Proszę używać standardowego, kwalifikowanego adaptera DC5V/1A do ładowania.
2. Podczas procesu ładowania, trzy wskaźniki poziomu migają na zmianę.
3. Po pełnym naładowaniu, wskaźniki trzech poziomów są zawsze włączone.
4. Gdy akumulator jest słaby, czerwony wskaźnik będzie migał powoli przez 90 sekund. Proszę używać go po pełnym naładowaniu.

Czyszczenie i konserwacja

1. Podczas czyszczenia upewnij się, że urządzenie jest wyłączone. Urządzenie nie może być myte wodą, aby uniknąć porażenia prądem.
2. Podczas czyszczenia dyszy ssącej, proszę wyjąć dyszę ssącą z urządzenia i przepłukać ją ciepłą wodą.
3. Urządzenie nie jest wodoodporne, po każdym użyciu można użyć wilgotnej chusteczki lub mokrej szmatki, aby wytrzeć korpus. Nie wolno stosować żrącego roztworu do mycia produktu.
4. Nie dotykaj obiektywu kamery twardym przedmiotem, aby uniknąć jego zarysowania.
5. Proszę przechowywać urządzenie w pomieszczeniu o normalnej temperaturze.
6. Nie należy silnie uderzać ani upuszczać urządzenia.
7. Proszę nie demontować ani nie naprawiać tego urządzenia samodzielnie.

Najczęściej zadawane pytania

P: Dlaczego nie można usunąć zaskórników?

O: 1) W normalnych przypadkach, pory są zamknięte. Przed użyciem urządzenia zaleca się zastosowanie gorącego kompresu lub użycie parownicy do twarzy w celu otwarcia porów, a następnie używanie płynu do usuwania zaskórników.

2) Używaj odpowiedniej dyszy ssącej i wybierz odpowiedni poziom ssania w oparciu o warunki skóry.

P: Dlaczego może powstać zaczerwienienie?

O: 1) Ze względu na siłę podciśnienia. Skóra będzie lekko zarumieniona po zasysaniu, co jest normalne i zaniknie w ciągu 1 godziny.

2) Zaleca się, aby podczas używania urządzenia nie trzymać go na jednym obszarze skóry dłużej niż 3 sekundy.

P: Dlaczego odczuwalny jest ból podczas używania produktu?

O: 1) Proszę zastosować niższy poziom ssania.

2) Proszę wybrać mniejszą dyszę ssącą.

3) Proszę się poruszać podczas pracy i nie trzymać urządzenia na jednej części dłużej niż 3 sekundy.

4) Czas każdego zabiegu nie powinien przekraczać 5 minut.

P: Jak często używać produktu?

O: Raz w tygodniu dla skóry wrażliwej i suchej, dwa razy w tygodniu dla skóry tłustej i mieszanej.

P: Jak wybrać odpowiedni poziom?

O: Przed używaniem urządzenia proszę sprawdzić siłę ssania za pomocą dłoni lub przedramienia. Dla twarzy zaleca się rozpoczęcie testu od Poziomu 1, a następnie stopniowe dostosowanie do odpowiedniego poziomu.

P: Dlaczego nie można połączyć się z aplikacją?

O: 1) Proszę upewnić się, że urządzenie jest włączone.

2) Włącz WIFI w ustawieniach w telefonie, a następnie połącz się.

P: Dlaczego aplikacja się wyłącza?


O: Prawdopodobnie z powodu niskiego poziomu naładowania akumulatora, proszę spróbować ponownie, gdy urządzenie jest w pełni naładowane.


P: Jak długo można używać produktu, gdy jest w pełni naładowany?

O: Może być używany nieprzerwanie przez 60 minut, gdy jest podłączony do telefonu komórkowego i przez 90 minut, gdy nie jest podłączony do telefonu.

Urządzenie wyposażone jest w akumulator który z uwagi na swoją fizyczną i chemiczną budowę starzeje się z biegiem czasu i użytkowaniem. Producent określa maksymalny czas pracy urządzenia w warunkach laboratoryjnych gdzie występują optymalne warunki pracy dla urządzenia a sam akumulator jest nowy i w pełni naładowany. Czas pracy w rzeczywistości może się różnić od deklarowanego w ofercie i nie jest to wada urządzenia a cecha produktu.

Ochrona środowiska

 Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.

 Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkownika, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.

Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji dystrybutora / producenta dostępne na stronie internetowej <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>.

Uproszczona deklaracja zgodności

Producent: Shenzhen Migoosmart Co., Ltd.

Adres: Rm.807, Building U6, Junxiang U8 Intelligent Manufacturing Industrial Park, Gushu Community, Xixiang Sub-District, Bao'an District, Shenzhen, China

Produkt: Odkurzacz do wągrów i zaskórników InFace z kamerą

Model: CF-05E

Wyrób jest zgodny z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/53/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich dotyczących udostępniania na rynku urządzeń radiowych i uchylającą dyrektywę 1999/5/WE.

Deklaracja zgodności dostępna na stronie internetowej:

<https://innpro.pl/deklaracje-zgodnosci/>

Częstotliwość radiowa: 2400 do 2485 MHz

Maksymalna moc częstotliwości radiowej: 51dBm