

# S·E·Y·S·S·O

**PLANET**

**MERCURX/NEPTUNX**  
SONIC TOOTHBRUSH

**PLANET**

**MERCURX/NEPTUNX**  
SZCZOTECZKA SONICZNA



## User Manual *Instrukcja Obsługi*


**EN / PL**

Please read the user manual before use. Keep the manual for possible future reference.

*Przed użyciem zapoznaj się z instrukcją obsługi. Zachowaj instrukcję do ewentualnego wykorzystania w przyszłości.*

# Package includes:

*W zestawie:*

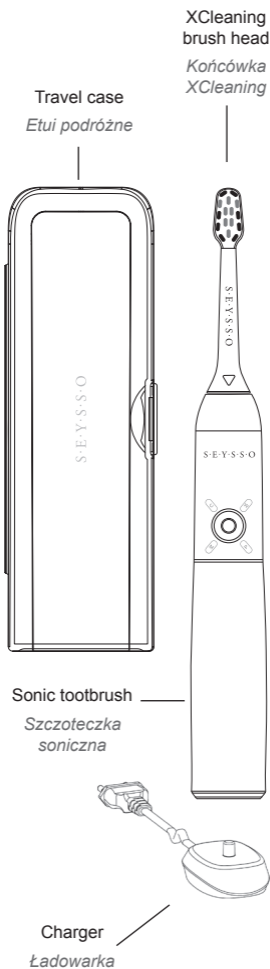

# 1 Instrukcje bezpieczeństwa

## Warning:

1. Przed podłączeniem do prądu upewnij się, czy napięcie w gniazdku elektrycznym jest zgodne z wymaganiami urządzenia - 100-240V~, 50-60Hz
2. Nie ładuj szczoteczki w miejscach, gdzie występuje wilgoć.
3. Przy odłączaniu ładowarki, nie ciągnij za przewód. Nie dotykaj przewodu mokrą dłonią.
4. Jeśli podczas ładowania, ładowarka wpadnie do wody, przed jej wyjęciem odłącz zasilanie.
5. Nie mocz szczoteczki w wodzie, o temperaturze wyższej niż 40°.
6. Nie ładuj, nie używaj, ani nie zostawiaj urządzenia narażonego na działanie wysokich temperatur, ani czynników zewnętrznych.
7. Urządzenie nie jest przeznaczone do samodzielnego użycia przez dzieci albo osoby o ograniczonej sprawności motorycznej, psychicznej albo poznawczej. Przechowuj urządzenie poza ich zasięgiem. Produkt nie jest zabawką.
8. Dzieci oraz osoby o ograniczonej sprawności motorycznej, psychicznej albo poznawczej mogą używać szczoteczki tylko pod odpowiednim nadzorem.
9. Nie dociskaj szczoteczki do zębów lub dziąseł, ani nie szczotkuj w tym samym miejscu przez długi czas, ponieważ może to doprowadzić do urazu dziąseł.
10. Obejrzyj dokładnie urządzenie przed użyciem. Nie używaj w przypadku widocznych uszkodzeń.
11. Jeśli przechodziłeś zabieg chirurgiczny w obrębie jamy ustnej lub leczenie zębów

i dziąseł w ciągu ostatnich dwóch miesięcy, zapytaj stomatologa, czy korzystanie ze szczoteczki jest wskazane.


12. Urządzenie może powodować delikatne krwawienie dziąseł w pierwszych dniach stosowania. Jeśli krwawienie nie ustanie w przeciągu tygodnia lub jest wyjątkowo obfite, skontaktuj się z lekarzem.
13. Osoby z wszczepionym rozrusznikiem serca lub innym urządzeniem elektronicznym, przed użyciem szczoteczki powinny skonsultować z lekarzem.
14. Nie próbuj samodzielnie naprawiać, modyfikować ani demontować części urządzenia. W przypadku uszkodzenia skontaktuj się z centrum obsługi klienta.
15. Zaleca się wymieniać końcówkę szczoteczki co 3 miesiące lub częściej, w zależności od częstotliwości użytkowania.
16. Jeśli stosujesz pasty zawierające substancje rozjaśniające lub wybielające np. wodorowęglan sodu lub inne dwuwęglany, dokładnie umyj szczoteczkę po każdym użyciu.
17. Urządzenie przeznaczone jest do czyszczenia zębów, dziąseł i języka. Nie używaj go w żaden inny sposób. Jeżeli po użyciu szczoteczki odczuwasz ból albo dyskomfort lub masz jakiegokolwiek obawy związane z wpływem urządzenia na Twoje zdrowie, skontaktuj się z lekarzem.

**Siła elektromotoryczna:**

Szczoteczka soniczna SEYSSO odpowiada wszelkim standardom eksploatacji urządzeń elektromagnetycznych. Jeśli będzie używana właściwie i zgodnie z niniejszą instrukcją, nie stanowi żadnego niebezpieczeństwa dla użytkownika.

## 2 Budowa szczoteczki

Kapturek ochronny na końcówkę

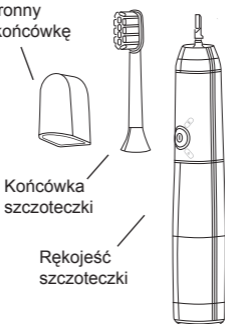

## 3 Ładowanie szczoteczki przed pierwszym użyciem

1. Przed pierwszym ładowaniem szczoteczka powinna zostać rozładowana całkowicie. Następnie należy ładować szczoteczkę do pełnego naładowania. Pierwsze ładowanie powinno trwać 32 godziny. W tym czasie szczoteczkę można zdejmować z ładowarki na czas mycia zębów.
2. Pierścień LED na szczoteczce miga w czterech różnych kolorach podczas ładowania. Pierścień LED gaśnie 2 minuty po pełnym naładowaniu szczoteczki.
3. Każde kolejne ładowanie powinno trwać 32 godziny lub do momentu aż zgaśnie pierścień LED.


**UWAGA:** Przed ładowaniem szczoteczka powinna zostać wyłączona. Podstawę ładowarki należy umieścić na płaskiej i stabilnej powierzchni, a otwór w dolnej części szczoteczki należy naprowadzić na bolec lokujący podstawy ładowarki. Szczoteczkę należy postawić na ładowarce, a wtyk podłączyć do gniazda zasilania.

**UWAGA:** Przed rozpoczęciem ładowania należy sprawdzić, czy specyfikacja prądu wyjściowego jest zgodna z 100-240 V AC 50 Hz/60 Hz 1,4 W. W przeciwnym razie ładowarki nie należy podłączać do zasilania.

## 4

Instrukcja używania  
szczoteczki

Krok 1: Umieść końcówkę wymienną na rękojeści szczoteczki.

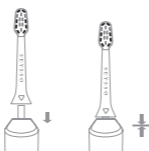

\* Schemat przedstawia poprawny sposób nakładania końcówki na szczoteczke

Krok 2: Następnie nałóż odpowiednią ilość pasty do zębów na włókna szczoteczki. Rekomendujemy stosowanie past dedykowanych dla szczoteczek sonicznych (Sonic Friendly). Polecamy pasty SEYSSO, które dzięki idealnemu składowi i konsystencji w pełni wykorzystują potencjał szczoteczek sonicznych.



Krok 3: Przed włączeniem szczoteczki umieść końcówkę w jamie ustnej. Ustaw szczoteczke przy zębach, tak aby jej włókna były ustawione pod kątem 45 stopni do linii dziąseł i włącz szczoteczke naciskając przycisk funkcyjny przez 3 sekundy.



Krok 4: Naciskaj krótko przycisk funkcyjny podczas pracy szczoteczki, aby wybrać odpowiedni program mycia zębów. Każde naciśnięcie przycisku powoduje przełączenie urządzenia kolejno pomiędzy czterema programami oraz zmianę koloru pierścienia LED.

Program	Kolor pierścienia LED	Symbol na szczoteczce	Funkcja
Clean	Żółty	C	Czyszczenie zębów
White	Niebieski	W	Wybielanie
Polish	Czerwony	P	Dodatkowe polerowanie przednich zębów
Massage	Zielony	M	Masaż dziąseł i czyszczenie zębów

Krok 5: Powoli przesuwaj szczoteczkę wzdłuż linii dziąseł, nie przyciskając jej za mocno do zębów. Szczoteczka posiada wbudowany automatyczny, 2-minutowy timer, który pomaga w przestrzeganiu zalecanego przez stomatologów czasu mycia zębów. Dzięki 30-sekundowym interwałom, sygnalizowanym przez chwilowe wstrzymanie pracy szczoteczki, możesz równomiernie podzielić czas mycia zębów na wszystkie ćwiartki uzębienia.



Krok 6: Urządzenie wyłączy się automatycznie po upływie 2 minut. Aby wyłączyć szczoteczkę podczas jej pracy, przytrzymaj przycisk przez 3 sekundy.



Krok 7: Po umyciu zębów zdejmij końcówkę z rękojeści szczoteczki, przepłucz wodą i osusz przed przechowywaniem. Pamiętaj, aby zdejmować końcówkę po każdym użyciu szczoteczki. Gdy akumulator szczoteczki ulegnie wyczerpaniu, umieść szczoteczkę na podstawie ładowarki i ładuj zgodnie ze wskazówkami opisanymi powyżej.



Krok 8 : Gdy poziom naładowania akumulatora spadnie poniżej 3,3 V, pierścień LED zacznie wolno migać. Natomiast kiedy spadnie poniżej 3 V, pierścień LED zacznie migać szybko i szczoteczka automatycznie się wyłączy.

## **5 Końcówki wymienne:**

W zestawie znajduje się końcówka SEYSSO Planet XCleaning. Używaj tylko oryginalnych końcówek SEYSSO dedykowanych dla tej szczoteczki. Ewentualne uszkodzenia spowodowane użyciem nieoryginalnych końcówek nie zostaną objęte gwarancją producenta.

## **6 Czyszczenie i konserwacja**

**OSTRZEŻENIE:** Odłącz szczoteczkę od źródła zasilania przed rozpoczęciem czyszczenia. Nie zanurzaj podstawy ładowarki w wodzie. Przepłucz rękojeść i końcówkę szczoteczki wodą o temperaturze nie wyższej niż 40°. Wytrzyj miękką ściereczką podstawę ładującą i rękojeść szczoteczki. Nigdy nie stosuj silnych środków czyszczących.

**OSTRZEŻENIE:** Do czyszczenia szczoteczki nie stosuj chemicznych środków czyszczących, ani narzędzi, które mogą ją uszkodzić. Końcówki, ładowarki ani rękojeści szczoteczki nie należy myć w zmywarce.

**OSTRZEŻENIE:** Akumulatory litowo-jonowe muszą być ładowane w temperaturze pokojowej. Zbyt niska (poniżej 0°) lub zbyt wysoka (powyżej 45°) temperatura może spowodować poważne problemy z bezpieczeństwem.

## **7 Gwarancja i serwis**

Szczoteczka SEYSSO objęta jest dwuletnią gwarancją producenta obowiązującą od daty zakupu. W okresie objętym gwarancją, producent zobowiązuje się do naprawy lub wymiany na nową wadliwej szczoteczki, jeśli wada została spowodowana defektem konstrukcyjnym. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń wynikających z niewłaściwego użytkowania urządzenia.

## **8 Gwarancja jakości – klauzula ograniczająca**

Gwarancja jakości obejmuje wyłącznie urządzenia marki SEYSSO.

### **Wyjaśnienie:**

Prosimy o dokładne wypełnienie karty gwarancyjnej i zachowanie jej do ewentualnego wykorzystania w przyszłości. Użytkownikowi przysługuje dwuletni okres darmowego serwisu licząc od dnia zakupu.



Darmowy serwis nie przysługuje  
użytkownikowi, jeśli:

1. Produkt został uszkodzony z powodu niewłaściwego sposobu użytkowania lub przechowywania;
2. Produkt został rozmontowany lub był naprawiany przez punkt naprawy inny niż wskazany przez producenta;
3. Użytkownik nie posiada ważnego dowodu zakupu produktu;
4. Uszkodzenia produktu spowodowane są niestabilnym poziomem napięcia w sieci albo napięciem przekraczającym określony zakres;
5. Okres gwarancji produktu minął.

SEYSSO Planet NeptunX/MercurX:  
100-240V~, 50/60 Hz; 1,4W;



**Utylizacja bezpieczna  
dla środowiska**



## **Karta poserwisowa:**

Model: .....

Data zakupu: .....

Nazwisko  
klienta: .....

Kontakt: .....

Opis uszkodzenia: .....

[www.seysso.pl](http://www.seysso.pl)

WM Brands Sp. z o.o.  
Ul. Dziupli 12  
02-454 Warszawa