


# kensen

## Depilator IPL Kensen Hammer

### Instrukcja obsługi

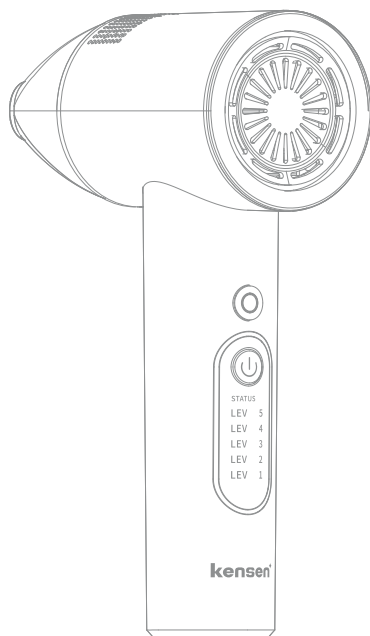

Dziękujemy za zakup produktu Kensen.  
Prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją przed użyciem, aby  
zapewnić prawidłowe działanie i bezpieczne użytkowanie.

# Środki ostrożności

Przekazując produkt innym osobom do użytku, należy pamiętać o dołączeniu instrukcji obsługi. Należy przestrzegać środków ostrożności, aby zapobiec obrażeniom użytkowników i innych osób oraz uszkodzeniu mienia. Prosimy o przeczytanie poniższej treści i upewnienie się, że przestrzegasz opisanych zaleceń.

## OSTRZEŻENIE

Wskazuje, że niewłaściwe użycie może spowodować śmierć lub poważne obrażenia.

1. NIE UŻYWAJ tego urządzenia do usuwania włosów, jeśli należysz do następujących grup osób:

- Kobiety, które są w trakcie ciąży lub w trakcie karmienia piersią
- Osoby, które nie ukończyły 18 roku życia
- Osoby o wrażliwej skórze
- Osoby o naturalnie ciemnej skórze
- Osoby z chorobami skóry i alergicznym zapaleniem skóry
- Osoby z zaburzeniami czucia
- Osoby z alergią na fale świetlne
- Osoby, które w ciągu ostatnich 2 tygodni były wystawione na działanie promieni słonecznych
- Osoby z aktywnymi implantami, takimi jak rozruszniki serca, urządzenia do inkontynencji, pompy wysepkowe itp.
- Osoby, które w ciągu ostatnich 3 miesięcy przeszły radioterapię lub chemioterapię
- Dzieci nie mogą korzystać z tego urządzenia.

2. NIE używaj tego urządzenia do usuwania włosów na następujących obszarach:

- na ciemnym lub opalonym obszarze skóry
- na brązowych lub czarnych plamach, takich jak duże piegi, znamiona, plamy wątrobowe, pęcherze lub brodawki
- na uszkodzonej lub popękanej skórze lub w miejscach, gdzie występują nowotwory, guzy, naczyniaki
- na błonach śluzowych w nosie i uszach; nad lub obok aktywnego implantu, takiego jak rozrusznik serca, urządzenie do inkontynencji, pompa insulinowa itp.
- Na twarzy nad policzkiem, wokół oczu, brwi lub rzęs
- Na sutkach, genitaliach (męskich lub żeńskich) lub wokół odbytu
- Na tatuażu lub makijażu permanentnym na obszarze, który ma być poddany zabiegowi
- Na części ciała, która może być później owłosiona

#### UWAGA:

Nieprawidłowe działanie może spowodować poważne obrażenia.

1. Jeśli włosy przekraczają 8 mm, należy je najpierw ogolić, a następnie odczekać 24 godziny przed użyciem.

Jeśli nie przekracza 8 mm, efekt bezpośredniego napromieniowania jest najlepszy. Podczas golenia, upewnij się, aby zwilżyć włosy, a następnie golić.


2. Przed użyciem urządzenia należy pamiętać, aby skóra była sucha i czysta. Zabronione jest nakładanie przed użyciem jakiegokolwiek płynu np. żelu aloesowego, w przeciwnym razie urządzenie nie będzie emitowało światła.

3. Im wyższy poziom, tym lepszy efekt, ale ściśle zabrania się używania wysokiego poziomu przy pierwszym użyciu. Zaczynaj od najniższego trybu. Po przyzwyczajeniu skóry, można wybrać wyższy poziom stopniowo, od 1-5.

4. Po użyciu urządzenia, skóra może być swędząca, co jest normalne. Surowo zabronione jest drapanie skóry i kontakt z substancjami płynnymi w ciągu 1 godziny, aby uniknąć infekcji bakteryjnej skóry. Nie należy wystawiać skóry na słońce w ciągu 24 godzin. Po 1 godzinie, można wykonywać wszystkie normalne czynności, takie jak kąpiel i stosowanie żelu pod prysznic, itp.

5. Nigdy nie używaj urządzenia pozostając na tym samym obszarze dłużej niż 50 sekund.

# Opis produktu

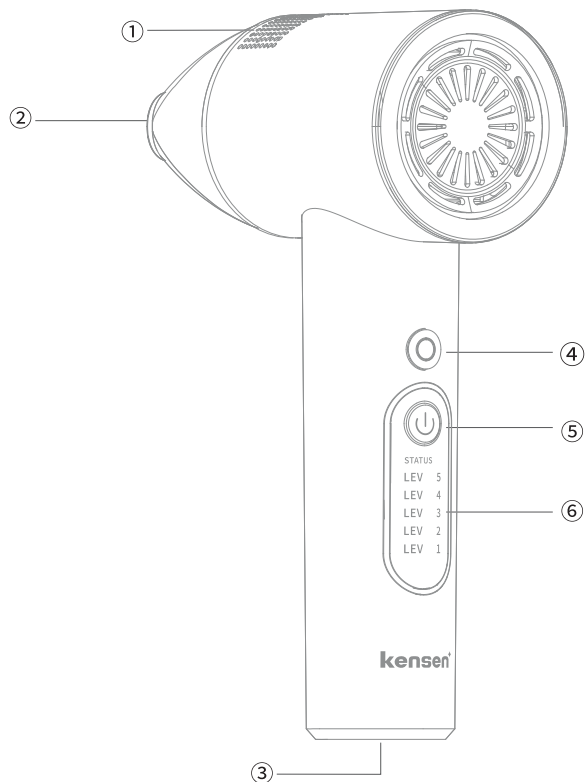

- 1 - Wylot powietrza
- 2 - Port świetlny
- 3 - Port ładowania
- 4 - Przycisk świetlny / przełączania poziomów
- 5 - Przycisk zasilania / regulacji poziomu
- 6 - Wskaźnik LED

# Specyfikacja

Nazwa produktu: Depilator IPL Kensen Hammer

Numer modelu: MZ-IPL01

Materiał: ABS

Liczba poziomów: 5

Długość fali: 470-1100nm

Światło: IPL Intense Pulsed Light

Impuls w świetle: 500 000 (MAX)

AC Adapter: AC 100-240V

Zasilacz: DC 12V 3A

Prąd wejściowy: 1A

Energia napromieniowania: 1.5-3.9J/cm<sup>2</sup>


Moc: 36W

Wymiary: około 165\*70\*50mm


Waga: około 210g

Zawartość: 1\* Depilator IPL, 1\* okulary ochronne, 1\* żyletka, 1\* adapter AC, 1\* instrukcja obsługi


## Zawartość

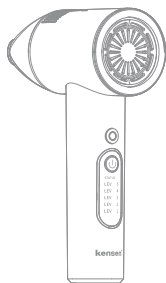


Depilator  
IPL \*1

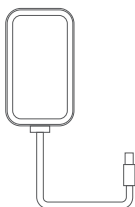


Adapter AC \*1

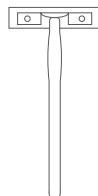

Żyletka \*1

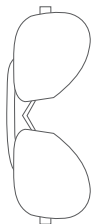

Okulary  
ochronne \*1

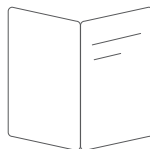

Instrukcja  
obsługi \*1

# Przygotowanie przed użyciem

## 1. Test na alergię skórą

Proszę przetestować mały kawałek skóry w ciągu 2 godzin przed użyciem, aby sprawdzić, czy nie ma żadnych niepożądanych reakcji.

### \*Metoda testu

Podczas pierwszego użycia urządzenia należy wybrać niewielki fragment skóry po wewnętrznej stronie ramienia i przetestować go osobno od niskiego do wysokiego poziomu energii w zakresie tolerancji na ciepło (błysk 1 do 2 razy w tej samej części);

Jeśli skóra stanie się czerwona i mrowiąca lub jeśli w ciągu 2 godzin po pierwszym błysku wystąpi ból lub mrowienia, proszę nie używać tego urządzenia do czasu konsultacji z lekarzem.

## Środki ostrożności przy stosowaniu

1. Podczas użytkowania nie należy patrzeć bezpośrednio na wylot światła ani na lampę błyskową.
2. Po użyciu, na skórze może pojawić się łagodne zaczerwienienie, co jest normalne. Prosimy o samodzielne schłodzenie lub zastosowanie kompresu z lodu.
3. Podczas czyszczenia płam na szkle w wylocie światła, zabrania się rozpylania alkoholu bezpośrednio na wylot światła i szkło.
4. Podczas użytkowania nie wolno nakładać na skórę żadnych kosmetyków o konsystencji żelu (takich jak woda w żelu itp.).
5. Podczas użytkowania staraj się nie spożywać pokarmów światłoczułych (takich jak: szpinak, rzepak, musztarda itp.).
6. Regulacja poziomu lasera jest od słabego do mocnego. Im wyższy poziom, tym lepszy efekt.
7. Osoby o ciemniejszej skórze mogą mieć opóźnione reakcje skórne, a poziom energii nie może być zwiększony, ponieważ natychmiastowa reakcja nie jest oczywista. Zwróć uwagę na nawilżanie skóry i ochronę przeciwsłoneczną po błysku.
9. Unikaj promieniowania ultrafioletowego podczas użytkowania. Nałóż ochronę przeciwsłoneczną, gdy wychodzisz na zewnątrz, staraj się unikać promieniowania komputerowego w pracy, a także stosuj filtr przeciwsłoneczny dla ochrony.
10. Podczas użytkowania, proszę nie blokować powietrza, gdyż może to wpłynąć na rozpraszanie ciepła.
11. Podczas użytkowania urządzenia, jeśli włosy lub plamy przykleją się do plastiku na krawędzi wylotu światła spowoduje to, że plastik na krawędzi wylotu światła zmieni kolor na czarny lub wytworzy czarne plamy, ale nie wpłynie to na wydajność i normalne użytkowanie urządzenia.

12. W przypadku "lampy świetlnej" wewnątrz wylotu światła urządzenia, wewnętrzna ściana lampy pojawi się w różnym stopniu czarna pod koniec określonego okresu użytkowania. Jest to normalny proces starzenia się lampy, a współczynnik tłumienia energii podczas życia nie będzie przekraczać określonego zakresu i może być normalnie używany.

13. Urządzenie bez funkcji wodoodpornej, proszę nie używać go w łazience podczas brania prysznica lub w innych miejscach, gdzie może być łatwo narażone na działanie wody.

14. Jeśli obudowa urządzenia, wylot światła jest uszkodzony lub urządzenie zostało przypadkowo zanurzone w wodzie, należy odesłać je do producenta w celu sprawdzenia czy można je naprawić; jeśli jest zanurzone w wodzie, gdy jest naelektryzowane, proszę odłączyć zasilanie, aby upewnić się o swoim bezpieczeństwie przed dotknięciem urządzenia.



15. Unikaj przechowywania produktu w miejscach o silnym polu magnetycznym i dużej wilgotności i zapyleniu lub miejscach o wysokiej temperaturze.

16. Nie należy silnie uderzać lub pukać urządzenia.

17. Zabronione jest używanie tego urządzenia do celów innych niż określone funkcje; poza specjalistami, innym osobom nie wolno otwierać obudowy, w przeciwnym razie istnieje ryzyko porażenia prądem. Zabrania się wykonywania czynności konserwacyjnych bez upoważnienia przez osoby nie będące profesjonalistami.


## Sposób użycia

\*Przed użyciem należy upewnić się, że lampa błyskowa nie ma kurzu, włosów lub innych zabrudzeń, a sprzęt nie jest uszkodzony lub nieprawidłowy. Wyczyść zabrudzenia, aby uniknąć awarii i pogorszenia jakości sprzętu.

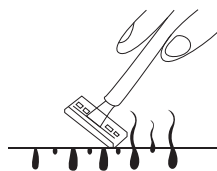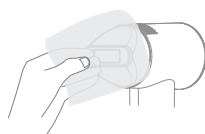

2. Podłącz urządzenie do zasilacza AC, podłącz adapter do gniazdka.

\* Po podłączeniu portu zasilania, domyślnie włącza się tryb czuwania, a wskaźnik czuwania świeci się (czerwone migające światło).

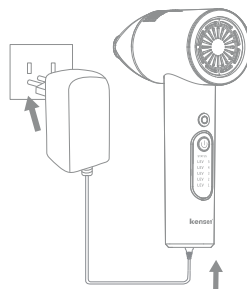


3. Pamiętaj, aby założyć okulary ochronne.



4. Naciśnij przycisk zasilania, aby rozpocząć tryb pracy.


\*Domyślne uruchomienie to poziom 1 (Wskaźnik świeci się na niebiesko, a czerwona kontrolka stanu jest zawsze włączona).

\*Można cyklicznie przełączać 5 poziomów (wskaźnik jest niebieski, a odpowiednie światło jest zawsze włączone; poziom 1 jest najniższym poziomem, a poziom 5 jest najwyższym poziomem).

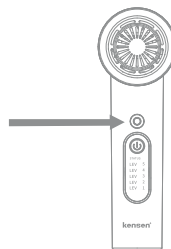


5. Przyłóż okno lampy błyskowej pionowo do skóry. Upewnij się, że wykrywanie skóry zostało zakończone, wybierz tryb ciągłego błysku lub podstawowy tryb błysku, aby powoli wykonać procedurę usuwania włosów.

\*Naciśnij i przytrzymaj przycisk lampy błyskowej przez 3 sekundy, aby przełączyć się na tryb automatycznego usuwania włosów.

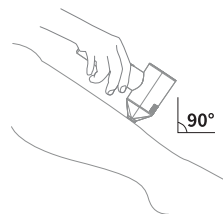

6. Po użyciu naciśnij przycisk zasilania, aby wyłączyć urządzenie, a następnie odłącz je od gniazdka.

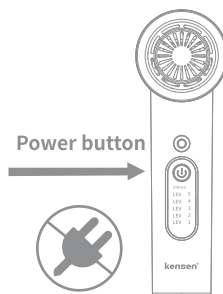



Porady dotyczące ciepła:

Po zakończeniu usuwania włosów, zaleca się schłodzić pielęgnowaną skórę.

Nawilżanie skóry: po usunięciu włosów, można użyć balsamu, aby nawilżyć skórę.

Sugestie dotyczące poziomu energii działania i czasu dla różnych części każdego rodzaju skóry (proszę zapoznać się z tabelą porównawczą poniżej).

Osoby o jaśniejszym kolorze skóry mogą przykładać lampę dwa razy z rzędu na jednej części. Ciągłe działanie migające nie jest zalecane dla osób o ciemniejszym kolorze skóry.

Gdy poziom energii jest wysoki należy odpowiednio zmniejszyć liczbę operacji.

# Tabela kolorów skóry

Typ skóry Włosy	1	2	3	4	5	6
Czarny 	Poziom 1-5		Poziom 1-4	Poziom 1-3		✗
Ciemny brązowy 	Poziom 1-5		Poziom 1-4	Poziom 1-3		✗
Brązowy 	Poziom 1-5		Poziom 1-4	Poziom 1-3		✗
Ciemny blond 	Poziom 1-5		Poziom 1-4	Poziom 1-3		✗
Blond 	Poziom 1-5		Poziom 1-4	Poziom 1-3		✗
Jasny blond 	Poziom 1-5		Poziom 1-4	Poziom 1-3		✗
Rudy 	Poziom 1-5		Poziom 1-4	Poziom 1-3		✗
Siwą/białą 	✗		✗	✗		✗
*Dobierz poziom głównie na podstawie własnego samopoczucia (po wykonaniu testu tolerancji skóry).						
*Im wyższy poziom, tym skuteczniejszy zabieg.						

## Korzystanie


\*Uwaga: Im wyższy poziom, tym lepszy wynik uzyskasz, dlatego zalecamy wybrać najwyższy poziom, który Twoja skóra może tolerować.

\*Po pierwszych kilku razach użycia, efekt może nie być widoczny. Musisz używać produktu przez ponad 20 dni, zanim będzie można zobaczyć, że włosy zaczynają rosnąć wolniej. Długotrwałe efekty wymagają około 3-4 miesięcy użytkowania produktu.

\* Konieczne jest usunięcie włosów zgodnie z cyklem wzrostu włosów, co wymaga czasu. Dlatego zalecamy co najmniej 8 tygodni pielęgnacji, aby usunąć wszystkie włosy.

Czas	Częstotliwość	Efekty
Pierwszy miesiąc	Raz na 4 dni	Brak widocznych efektów
Drugi miesiąc	Raz na tydzień	Włosy zaczynają być cieńsze i bardziej miękkie, a w niektórych miejscach rosną wolniej.
Trzeci miesiąc	Raz na 15 dni	Większość włosów została zahamowana przed wzrostem, a jedynie kilka włosów odrosło.
Czwarty miesiąc	Raz na 30 dni	Włosy prawie nie odrastają, więc nie ma potrzeby wielokrotnej depilacji.
*Jeśli czujesz, że Twoja skóra jest zbyt gorąca po depilacji, zalecamy przerwę na 1 lub 2 minuty przed depilacją po raz drugi i trzeci.		
*Przed użyciem urządzenia konieczne jest zgolenie włosów (jeśli długość włosów jest powyżej 8mm).		

## Zalecany czas dla każdej części ciała

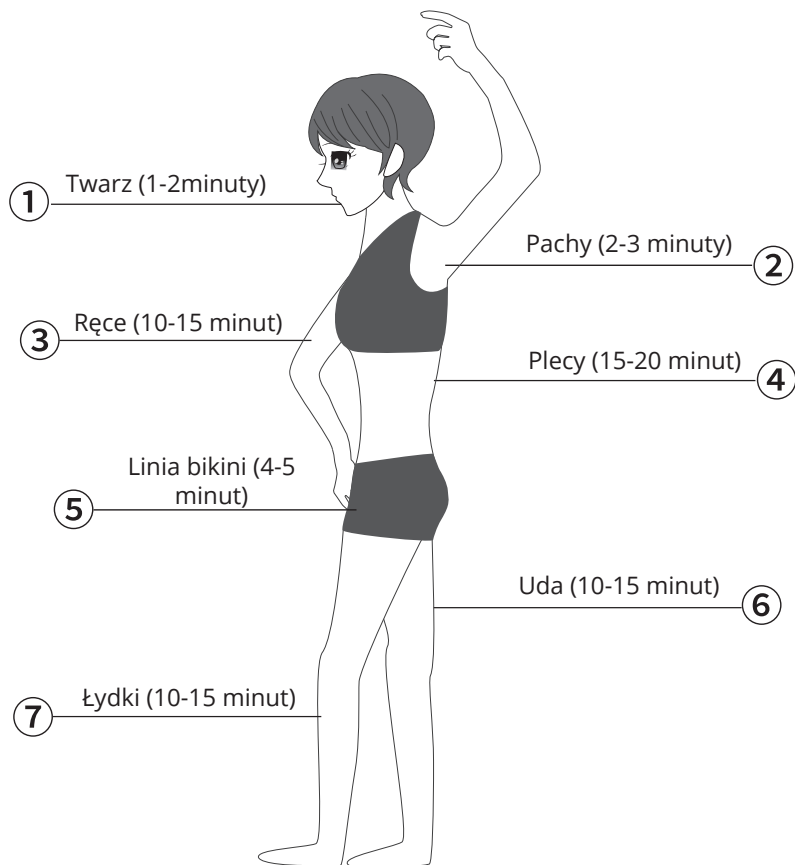

UWAGA

Powyższy zalecany czas służy tylko dla odniesienia. Podczas użycia, proszę dostosować czas stosowania do stanu skóry.

## Możliwe symptomy

Symptomy	Rozwiązanie
Uczucie mrowienia podczas użytkowania.	Jest to normalna reakcja po użyciu depilatora.
Ból i dyskomfort podczas stosowania są silne i trwają po użyciu.	Zaprzestań stosowania i skonsultuj się z lekarzem.
Po użyciu skóra się zaczerwieniła.	Jest to normalna reakcja po użyciu depilatora IPL. Zazwyczaj znika ona w ciągu 24 godzin.
Nawet po 24-48 godzinach stosowania zaczerwienienie skóry nie znika.	Zaprzestań stosowania i skonsultuj się z lekarzem.
Bardzo rzadkie przypadki	
Symptomy	Rozwiązanie
Obszar wokół mieszków włosowych stał się czerwony i obrzęknięty.	Dolegliwości znikną w ciągu 3 dni.
Zaczerwienienie i obrzęk wokół mieszków włosowych nie znika nawet po kilku dniach.	Zaprzestań stosowania i skonsultuj się z lekarzem.
Odcień skóry jest zmieniony po użyciu (jaśniejszy lub ciemniejszy niż przed użyciem).	W przypadku zmiany koloru skóry należy natychmiast przerwać stosowanie i skonsultować się z lekarzem.
Zwiększyła się liczba włosów na depilowanym obszarze.	Nawet po kilkukrotnym użyciu, ilość włosów pozostaje. Jeśli się zwiększy, przerwij stosowanie i skonsultuj się z lekarzem.

## Po użyciu

- Odłącz przewód zasilający od gniazdka.
- Port naświetlający stanie się gorący, dlatego przed wytarciem należy odczekać co najmniej 5 minut.
- Należy schłodzić skórę okładem zawierającym witaminę C i nawilżyć ją balsamem lub kremem.
- Wychodząc na zewnątrz, pamiętaj o nałożeniu kremu z filtrem SPF3++ lub wyższym.
- W ciągu 24 godzin po zakończeniu depilacji unikaj stosowania produktów do pielęgnacji skóry, które obciążają skórę, np. kąpiele, sauny, noszenia ubrań ściągających, balsamów złuszczących, perfum, kremów odbarwiających itp.
- Delikatnie przetrzyj główny korpus i port promieniowania wilgotną chusteczką lub ściereczką, która została mocno wykręcona.
- \* Nie należy myć produktu wodą, ponieważ urządzenie nie jest wodoodporne.
- \* Nie należy używać rozpuszczalników, takich jak benzyna i rozcieńczalnik.
- Aby utrzymać produkt w czystości, włóż go do pojemnika i przechowuj tak, aby się nie kurzył.
- Unikaj bezpośredniego światła słonecznego, wysokiej temperatury i wilgotności, a także trzymaj produkt poza zasięgiem dzieci.

## Najczęściej zadawane pytania

P: Nie widzę efektu.

O: Cykl wzrostu włosów różni się w zależności od części ciała i wynosi około 18 do 24 miesięcy. Dla lepszego wyniku zalecamy ciągłe stosowanie przez 3-4 miesiące.

P: Czy podczas korzystania z tego urządzenia jest to szkodliwe, aby wyjść na słońce?

O: Podczas korzystania z depilatora IPL, należy unikać opalania w ciągu 24 godzin od użycia.

P: Czy mogę używać produktu nad górną wargą?

O: Tak, można użyć pierwszego lub drugiego trybu w tym miejscu.

P: Nie widzę natychmiastowego efektu, dlaczego?

O: To urządzenie wykorzystuje najnowszą technologię IPL do osiągnięcia bezbolesnego i trwałego usunięcia włosów. Stałe usunięcie włosów nie może być osiągnięte bez pewnego okresu czasu. Na początku, wzrost włosów ulega spowolnieniu. Przy ciągłym stosowaniu, wzrost włosów zatrzyma się i trwałe usunięcie włosów zostanie osiągnięte.

P: Który poziom jest najbardziej skuteczny?

O: To zależy od danej osoby. Efekt różni się w zależności od typu i koloru skóry (im ciemniejszy kolor skóry, tym niższy poziom). Zaczynaj od niskiego poziomu i stopniowo go zwiększaj. Im wyższy poziom, tym skuteczniejszy rezultat uzyskasz i tym krótszy będzie cykl. Proszę pamiętać o wykonaniu testu skórniego przed usunięciem włosów.

## Ochrona środowiska



Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.



Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkowania, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.

Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji dystrybutora / producenta dostępne na stronie internetowej <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>.