



BabyScale B5 BT

EN - MANUAL

DE - ANLEITUNG

CS - NÁVOD

SK - NÁVOD

PL - INSTRUKCJA

HU - HASZNÁLATI UTASÍTÁS

SL - NAVODILA

HR - UPUTE

PL - INSTRUKCJA

INFORMACJE WSTĘPNE

- Przed pierwszym uruchomieniem włóż dołączone 3 baterie AAA do otworu w dolnej części wagi. Upewnij się, że są zorientowane zgodnie z rysunkiem na dnie otworu.
- Umieść wagę na płaskiej i stabilnej powierzchni lub podkładce w suchym środowisku.
- Jeśli będziesz używać wagi na miękkiej powierzchni lub dywanie, produkt nie będzie w stanie optymalnie zmierzyć wagi dziecka.
- Nie przekraczaj maksymalnej wagi (20 kg).
- Gdy waga nie jest używana, nie kładź nic na jej powierzchni i nie przeciążaj jej niepotrzebnie.
- Nie potrząsaj wagą i unikaj ostrych uderzeń.
- Unikaj kontaktu z wodą.
- Pozostałe informacje dotyczące bezpiecznego użytkowania urządzenia można znaleźć w Instrukcjach bezpieczeństwa znajdujących się w opakowaniu.

PIERWSZE UŻYCIE, WAŻENIE BEZ APLIKACJI

1. Naciśnij przycisk **ON/OFF/TARE**, waga się włączy, rozświeci się wyświetlacz i pojawi się „Hi”.
2. Gdy tekst zniknie, a na wyświetlaczu wagi pojawi się 0, waga jest gotowa do użycia.
3. Umieść dziecko na wadze, która wyświetli zmierzoną wagę.
4. Zmierzona wartość na wyświetlaczu miga 3 razy, a następnie pozostaje wyświetlona.
5. Wagę można wyłączyć przytrzymując przycisk **ON/OFF/TARE** lub waga sama wyłączy się po 2 minutach.

PIERWSZE UŻYCIE, WAŻENIE Z APLIKACJĄ

- Można również używać wagi z inteligentną aplikacją, która pomoże Ci śledzić rozwój i wzrost dziecka za pomocą historii pomiarów i wykresów.

1) Pobierz aplikację i zarejestruj się

- a. Zeskanuj kod QR lub wprowadź link URL i zainstaluj aplikację.
- b. Wypełnij dane osobowe i zarejestruj się.



truelife.eu/58605/app

2) Sparuj wagę z aplikacją

- a. Włącz aplikację i Bluetooth w swoim telefonie komórkowym.

- b. W aplikacji kliknij na przycisk **Dodaj urządzenie** lub na przycisk + w prawym górnym rogu.
- c. W menu wybierz **Waga dziecięca (Bluetooth)**.
- d. Włącz wagę – w prawym górnym rogu wyświetlacza zacznie migać ikona Bluetooth.
- e. W aplikacji kliknij na przycisk **Dalej**, a następnie kliknij na wagę.
- f. Teraz możesz nazwać wagę i wybrać pomieszczenie, w którym będziesz jej używać. Następnie kliknij na przycisk **Rozpocznij używanie**.
- g. Wybierz jednostki, w których aplikacja powinna wyświetlać dane o wadze i wzroście oraz potwierdź swój wybór.
- h. Waga jest pomyślnie sparowana i gotowa do użycia.

3) Ważenie z aplikacją

- a. Włącz aplikację i wagę.
- b. Umieść dziecko na wadze. Waga natychmiast pokazuje wagę dziecka zarówno na swoim wyświetlaczu, jak i w aplikacji na telefonie.
- c. Zmierzona wartość na wyświetlaczu zamiga 3 razy, a następnie pozostaje wyświetlona i jest przesyłana bezpośrednio do aplikacji w trybie automatycznego HOLD.
- d. Możesz wyzerować wagę w aplikacji za pomocą przycisku **Wyzeruj** lub jeśli używasz ręcznego HOLD, możesz tutaj zablokować i przenieść wagę do aplikacji za pomocą przycisku **Zapisz**.
- e. Na dole możesz zobaczyć historię pomiarów. Po kliknięciu dowolnego z zarejestrowanych pomiarów zobaczysz bardziej szczegółowe informacje, w tym wyświetlenie graficzne.
- f. Wagę można wyłączyć przytrzymując przycisk **ON/OFF/TARE** lub waga sama wyłączy się po 2 minutach.

FUNKCJE

1. Funkcja HOLD (automatyczna)

- Waga TrueLife BabyScale B5 BT posiada funkcję HOLD, która pomaga rodzicom dokładnie ważyć niespokojne dzieci, które wiercą się na wadze.
- Po umieszczeniu dziecka na wadze funkcja jest aktywowana i waga mierzy wagę dziecka w momencie, gdy najmniej się ono porusza i blokuje wartość na wyświetlaczu lub zapisuje ją bezpośrednio do aplikacji.
- Domyślne ustawienie funkcji HOLD jest automatyczne.

2. Funkcja HOLD (ręczna)


- Jeśli nie chcesz używać funkcji HOLD (lub używać jej ręcznie), na wadze istnieje możliwość przełączenia z domyślnego automatycznego HOLD na ręczny HOLD w dowolnym momencie.
- Pomiędzy automatycznym i ręcznym trybem HOLD przełączasz przytrzymując przycisk HOLD po uruchomieniu wagi. Po przełączeniu do ręcznego HOLD na wadze pojawia się napis OFF, po przełączeniu z powrotem do automatycznego HOLD pojawia się napis ON.

- Jeśli jesteś w ręcznym trybie HOLD, waga nie zablokuje wartości na wyświetlaczu. Jeśli chcesz zablokować wagę i ewentualnie zapisać ją w aplikacji, naciśnij przycisk HOLD na wadze lub przycisk Zapisz w aplikacji.

Funkcja TARE

- Waga TrueLife BabyScale B5 BT posiada funkcję TARE, dzięki której możesz np. zważyć ubrania dla dziecka, a następnie zważyć je bezpośrednio z nim. Aby aktywować funkcję, wykonaj następujące czynności:
 1. Włącz wagę i poczekaj, aż na wyświetlaczu pojawi się 0.
 2. Połóż ubrania na wadze.
 3. Naciśnij przycisk TARE – na wyświetlaczu pojawi się ikona TARE i waga zostanie wyzerowana.
 4. Zdejmij ubrania z wagi.
 5. Połóż dziecko na wadze w ubraniu lub owinięte w koc, a waga wskaże rzeczywistą wagę dziecka.

OBSŁUGA

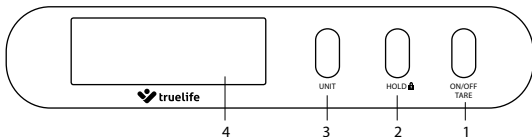

1. Przycisk ON/OFF/ TARE

- a. Naciśnij, aby włączyć wagę
- b. Naciśnij, aby aktywować funkcję TARE
- c. Przytrzymanie wyłącza wagę

2. Przycisk HOLD/

- a. Naciśnij, aby aktywować funkcję HOLD (tylko w trybie ręcznym HOLD)
- b. Przytrzymanie przełącza funkcję HOLD między trybem automatycznym/ręcznym


3. Przycisk UNIT

- a. Naciśnięcie przełącza układy jednostek

4. Wyświetlacz

OPIS DANYCH NA WYŚWIETLACZU

1. Ikona TARE (po włączeniu funkcji)
2. Wskaźnik masy
3. Ikona Bluetooth
4. Rodzaje układu jednostek

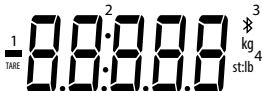

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

- Jeśli na wyświetlaczu pojawi się komunikat błędu **-oLd** waga jest przeciążona.
- Jeśli waga wyświetla komunikat o błędzie **Lo**, należy wymienić baterie.

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

- 1× Waga dla niemowląt Truelife BabyScale B5 BT
- 3× Bateria AAA
- 1× Instrukcja
- 1× Wskazówki bezpieczeństwa

PODSTAWOWE SPECYFIKACJE

- Wymiary: 67 cm × 33 cm × 5,2 cm
- Zakres ważenia: 50 g ~ 20 kg
- Odchyłka ważenia: 5 g
- Akumulator: 3× 1,5V AAA
- Temperatura pracy: 5–35°C
- Temperatura przechowywania: -5–45°C

BEZPIECZEŃSTWO PODCZAS PRACY Z URZĄDZENIEM

1. Dokładnie zapoznaj się z załączoną instrukcją bezpieczeństwa.
2. W celu prawidłowego obchodzenia się z produktem należy zapoznać się z najnowszą wersją instrukcji, która jest dostępna do pobrania na stronie: www.truelife.eu

Błędy w druku i zmiany informacji zastrzeżone.

Producent:

elem6 s.r.o.,
Braškovská 15, 16100 Praga 6,
Republika Czeska

