



# GIOsonic

giraffe / crocodile / panda


Soniczna szczoteczka do zębów dla dzieci

## INSTRUKCJA OBSŁUGI


### Poprawne ładowanie urządzenia

1. Upewnij się, że ładowarka oraz gniazdko nie stanowią zagrożenia, są zgodne z wymogami oraz są odpowiednio do używanego napięcia.
2. Sprawdź, czy kabel USB jest suchy oraz czy na wtyczce ładowarki nie ma żadnych zacieków, uszkodzeń, itp. Podłącz ładowarkę w bezpiecznych warunkach.
3. Szczoteczkę elektryczną należy włączyć przed pierwszym użyciem. W przypadku niskiego poziomu naładowania baterii lub jej całkowitego rozładowania, należy ją w pełni naładować przed pierwszym użyciem.


### Kroki

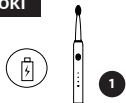

W przypadku, gdy poziom naładowania baterii jest niski, a wskaźnik ładowania LED miga, przed naładuj baterie szczoteczki przed pierwszym użyciem\*.

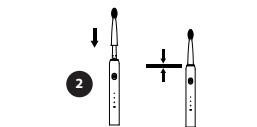

Podłącz główkę szczoteczki w sposób przedstawiony na grafice. Występowanie odstępu pomiędzy główką a rączką szczoteczki jest normalnym zjawiskiem.

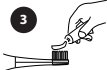



Zwільz główkę szczoteczki oraz nałóż odpowiednią ilość pasty.




Włóż główkę szczoteczki do jamy ustnej; trzymaj szczoteczkę pod kątem 45° względem linii dziąsła; naciśnij przycisk i wybierz tryb szczotkowania.

### Uwaga:


Przed użyciem produktu zapoznaj się dokładnie z instrukcją. Prosimy o zgłaszanie wszelkich nieprawidłowości.

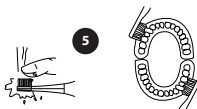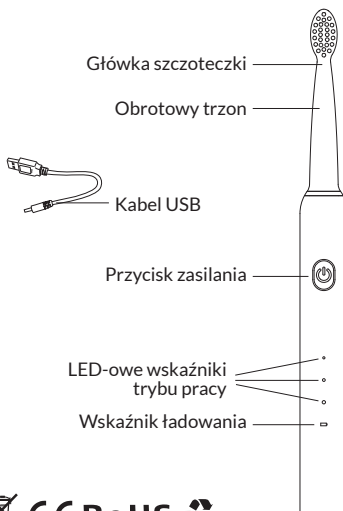

Poruszaj główką szczoteczki w górę i w dół; nie należy mocno przyciskać szczoteczki ani używać jej do szorowania zębów.

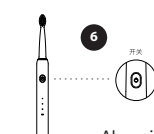

Aby uniknąć rozchłapania piany, wyłącz szczoteczkę zanim wymieszasz ją z jamy ustnej.

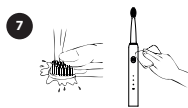

Przeptucz główkę szczoteczki po zakończeniu mycia zębów.



Przechowuj główkę szczoteczki w suchym oraz wentylowanym miejscu.

\*Więcej informacji na temat ładowania znajduje się w sekcji „Poprawne ładowanie urządzenia”.

### Opis wskaźnika poziomu baterii

Status diody	Opis
Wskaźnik	Tryb czuwania
Czerwone światło	Niski poziom baterii, wymagane ładowanie
Wyłączone światło	Bateria rozładowana, urządzenie niezdolne do pracy

### Specyfikacje & Informacje

Nazwa urządzenia: innoGIO GIOsonic Giraffe/Crocodile/Panda  
– Soniczna szczoteczka dla dzieci  
Model: GIO-460GIRAFFE / GIO-460CROCODILE / GIO-460PANDA  
Poziom wodoodporności: IPX7  
Napięcie/moc znamionowa: DC 3,7 V-0,5 W  
Czas ładowania: ok. 3 godziny  
Zawartość opakowania: Uchwyt oraz główka szczoteczki, kabel USB, instrukcja obsługi

**Higiena jamy ustnej – porady**  
Myj zęby co najmniej dwa razy dziennie.  
Wymieniaj główkę szczoteczki co 2-3 miesiące.

Niski poziom (Zęby mleczne)
Pielęgnuj nawyk mycia zębów delikatnie czyszcząc jamę ustną dziecka przy użyciu miękkiej szczoteczki
Średni poziom (Wyrzynanie zębów)
Aby zęby rosły zdrowo, pielęgnuj wrażliwe dziąsła i upewnij się, że zęby są codziennie myte.
Wysoki poziom (Zęby stałe)
Utrzymaj dobre nawyki czyszczenia zębów, myj je dokładnie w celu zapobiegnięcia próchnicy.

Status diody podczas ładowania	Opis
Czerwone światło	Tryb ładowania
Zmiana czerwonego światła na zielone	Zakończono ładowanie

UTYLIZACJA NIEPOTRZEBNEGO SPRZĘTU PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW DOMOWYCH W UNII EUROPEJSKIEJ



Obecność tego symbolu na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że nie można pozbyć się tego produktu w taki sam sposób jak odpadów z gospodarstwa domowego. Co za tym idzie jesteście Państwo odpowiedzialni za prawidłowe użycie sprzętu i jesteście zobowiązani dostarczyć go do autoryzowanego punktu recyklingu niepotrzebnego sprzętu elektronicznego i elektrycznego. Sortowanie, usuwanie i recykling przyczyniają się zużytego sprzętu przyczyni się do ochrony zasobów naturalnych i zapewni, że recykling będzie odbywał się zgodnie z zasadami poszanowania środowiska i zdrowia ludzkiego. Żeby uzyskać więcej informacji na temat punktów zbiórki zużytego sprzętu, należy skontaktować się z lokalnym punktem utylizacji odpadów domowych lub z lokalnymi władzami.

# innoGIO

www.innogio.pl

Importer: INNOGIO sp. z o.o.  
ul. Ostródzka 74H, 03-289 Warszawa, Polska

Facebook: @innogio.official Instagram: @innogio\_com