


GESKE

GERMAN BEAUTY TECH



Roller soniczny do twarzy 4w1
Skrócona instrukcja obsługi

Zeskanuj kod QR, aby pobrać pełną wersję instrukcji obsługi w Twoim języku.

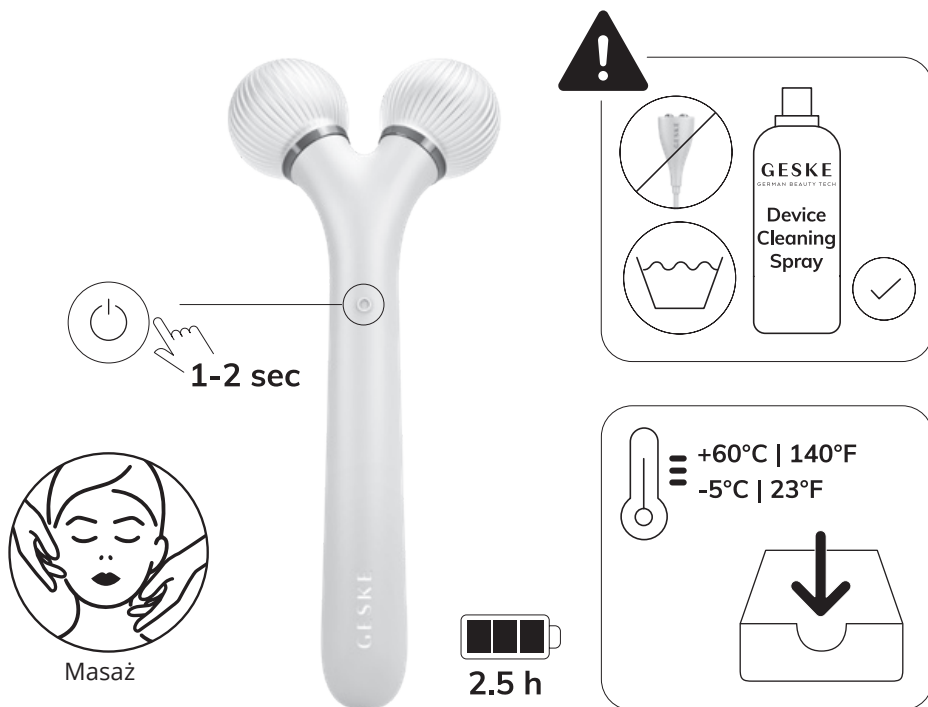

Aplikacja GESKE German Beauty Tech
Dostępna w 36 językach



Apple i logo Apple są znakami towarowymi Apple Inc.
Google Play i logo Google Play są znakami towarowymi
Google LLC.

Przeczytaj informacje dotyczące bezpieczeństwa przed pierwszym użyciem. Zachowaj obydwie instrukcje używania.

TWÓJ PRODUKT W SKRÓCIE

Twój produkt to wielofunkcyjny derma roller. Można go bezpiecznie stosować do 3 razy dziennie, nie należy stosować częściej. W celu zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa i doskonałym rezultatów należy zawsze przestrzegać indywidualnie dobranej rutyny pielęgnacji skóry stworzonej za pomocą aplikacji GESKE.

Pobierz aplikację GESKE i stwórz swoją spersonalizowaną rutynę.

DANE TECHNICZNE:

Materiały: ABS, silikon | **Temperatura przechowywania:** -5 – +60°C / 23 – 140°F | **Akumulator:** litowo-jonowy 3,7 V | **Pojemność akumulatora:** 140 mAh | **Maksymalny prąd ładowania:** 140 mA | **Napięcie ładowania:** 5 V |

Czas ładowania: ok. 2,5 godziny | **Czas użytkowania:** Czas działania różni się w zależności od aktywowanych technologii i poziomu intensywności.
Interfejs: USB | **Programy:** wibracje, 1 poziom intensywności

WAŻNE WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA! NALEŻY PRZECZYTAĆ PRZED UŻYCIEM!

- Nie stosować produktu na podrażnioną lub zranioną skórę, otwarte rany (po wszelkiego rodzaju urazach), infekcje bakteryjne lub wirusowe skóry (zarówno w obszarze poddawany zabiegowi, jak i w innych miejscach)
- Produkt nie jest przeznaczony do leczenia chorób skóry. Jeżeli występują u Ciebie choroby skóry, przed użyciem tego produktu skonsultuj się z dermatologiem
- Nie należy używać produktu, jeśli jest on 1. nadmiernie ciepły, 2. uszkodzony mechanicznie lub zdeformowany, 3. odbarwiony
- Jeśli podczas stosowania preparatu wystąpi ból i/lub dyskomfort, należy przerwać stosowanie produktu i skonsultować się z lekarzem
- Okolice oczu są bardzo wrażliwe: Należy zachować szczególną ostrożność i unikać kontaktu produktu z powiekami lub samym okiem
- Produkt należy stosować wyłącznie zgodnie z zaleceniami w ramach indywidualnej rutyny
- Ze względów higienicznych zalecamy, aby nie udostępniać produktu innym osobom
- Produkt jest przeznaczony do stosowania kosmetycznego na twarz. GESKE nie ponosi odpowiedzialności za szkodliwe skutki wynikające z zastosowania na innych częściach ciała lub innego niewłaściwego użycia, podłączenia do nieodpowiednich źródeł napięcia, zanieczyszczonej cieczy przewodzącej lub kulek
- Przed ładowaniem należy zawsze upewnić się, że wtyczka i gniazdo są całkowicie suche. W przeciwnym razie może dojść do porażenia prądem, zwarcia lub pożaru. Nie wolno używać produktu, gdy jest on podłączony do gniazdka elektrycznego

www.geske.com

GESKE Beauty Tech GmbH,
Leipziger Platz 18, 10117 Berlin, Germany
info@geske.com, www.geske.com

Środki ostrożności

1. Przed przystąpieniem do ładowania sprawdź, czy styki urządzenia są czyste.
2. Nigdy nie pozostawiaj urządzenia podczas użytkowania i ładowania bez nadzoru.
3. Zadbaj o to, aby w sytuacji awaryjnej móc szybko odłączyć urządzenie od źródła zasilania.
4. Nigdy nie wystawiaj urządzenia na działanie wysokiej temperatury.
5. Ładuj urządzenie w miejscu suchym i dobrze wentylowanym z dala od materiałów łatwopalnych, zachowaj wolną przestrzeń min. 1m od innych obiektów.
6. Nigdy nie zakrywaj urządzenia podczas ładowania.
7. Nigdy nie używaj zasilacza, stacji ładowania, kabli itp. bez rekomendacji i atestu producenta.
8. Zadbaj o swoje mienie, urządzenie wyposażone jest w ogniwa, które są trudne do ugaszenia, wyposaż się w płachtę gaśniczą.

Ochrona środowiska



Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.



Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkownika, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.

Niniejszy dokument jest tłumaczeniem oryginalnej instrukcji obsługi, stworzonej przez producenta.

Produkt należy regularnie konserwować (czyścić) we własnym zakresie lub przez wyspecjalizowane punkty serwisowe na koszt i w zakresie użytkownika. W przypadku braku informacji o koniecznych akcjach konserwacyjnych cyklicznych lub serwisowych w instrukcji obsługi, należy regularnie, minimum raz na tydzień oceniać odmiennność stanu fizycznego produktu od fizycznie nowego produktu. W przypadku wykrycia lub stwierdzenia jakiegokolwiek odmienności należy pilnie podjąć kroki konserwacyjne (czyszczenie) lub serwisowe. Brak poprawnej konserwacji (czyszczenia) i reakcji w chwili wykrycia stanu odmienności może doprowadzić do trwałego uszkodzenia produktu. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z zaniedbania.

Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji dystrybutora /
producenta dostępne na stronie internetowej
<https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Akumulator LI-ION

Urządzenie wyposażone jest w akumulator LI ION (litowo-jonowy), który z uwagi na swoją fizyczną i chemiczną budowę starzeje się z biegiem czasu i użytkowania. Producent określa maksymalny czas pracy urządzenia w warunkach laboratoryjnych, gdzie występują optymalne warunki pracy dla urządzenia, a sam akumulator jest nowy i w pełni naładowany. Czas pracy w rzeczywistości może się różnić od deklarowanego w ofercie i nie jest to wada urządzenia a cecha produktu. Aby zachować maksymalną żywotność akumulatora, nie zaleca się go rozładowywać do poziomu poniżej 3,18V lub 15% ogólnej pojemności. Niższe wartości, jak np. 2,5V dla ogniwa uszkadzają je trwale i nie jest to objęte gwarancją. W przypadku zaniechania używania akumulatora lub całego urządzenia przez czas dłuższy niż jeden miesiąc należy akumulator naładować do 50% i sprawdzać cyklicznie co dwa miesiące poziom jego naładowania. Przechowuj akumulator i urządzenie w miejscu suchym, z dala od słońca i ujemnych temperatur.

Akumulator LIPO

Urządzenie wyposażone jest w akumulator LI PO (litowo-polimerowy), który z uwagi na swoją fizyczną i chemiczną budowę starzeje się z biegiem czasu i użytkowania. Producent określa maksymalny czas pracy urządzenia w warunkach laboratoryjnych, gdzie występują optymalne warunki pracy dla urządzenia, a sam akumulator jest nowy i w pełni naładowany. Czas pracy w rzeczywistości może się różnić od deklarowanego w ofercie i nie jest to wada urządzenia a cecha produktu. Aby zachować maksymalną żywotność akumulatora, nie zaleca się go rozładowywać do poziomu poniżej 3,5V lub 5% ogólnej pojemności. Niższe wartości, jak np 3,2V dla ogniwa uszkadzają je trwale i nie jest to objęte gwarancją. W przypadku zaniechania używania akumulatora lub całego urządzenia przez czas dłuższy niż jeden miesiąc należy akumulator naładować do 50% i sprawdzać cyklicznie co dwa miesiące poziom jego naładowania. Przechowuj akumulator i urządzenie w miejscu suchym, z dala od słońca i ujemnych temperatur.