



WARM & COOL EYE ENERGIZER | 6 IN 1



Skin Scan & Personal
Routine Guide



SmartSonic
Pulsation Technology



Energizing Eye
Cooling Technology



Relaxing Eye
Warming Technology



Youthful Glow
Massage Technology



High Efficiency
Depuffing System

1

Minuta
Jasne oczy



**Create your personal
Skincare Routine**

and Download our GESKE App



GESKE Beauty Tech GmbH
Leipziger Platz 18
10117 Berlin Germany
info@geske.com, www.geske.com



DOBRZE WIEDZIEĆ

WSKAZÓWKA 01

Rozgrzewające i chłodzące działanie urządzenia ma na celu relaks i przywrócenie blasku Twoim oczom.

WSKAZÓWKA 02

Naciśnij i przytrzymaj przycisk słońca lub płatka śniegu przez 2 sekundy, aby automatycznie aktywować urządzenie i przejść w tryb ogrzewania lub chłodzenia bez pulsacji.

WSKAZÓWKA 03

Po każdym użyciu wyczyść urządzenie środkiem do czyszczenia urządzeń GESKE.



Masaż

Młodzieńczy blask



Wł./Wył.


Naciskaj przez 1-2 sekundy



Pulsacje SmartSonic

10 poziomów natężenia

Czas ładowania wynosi 4 godziny

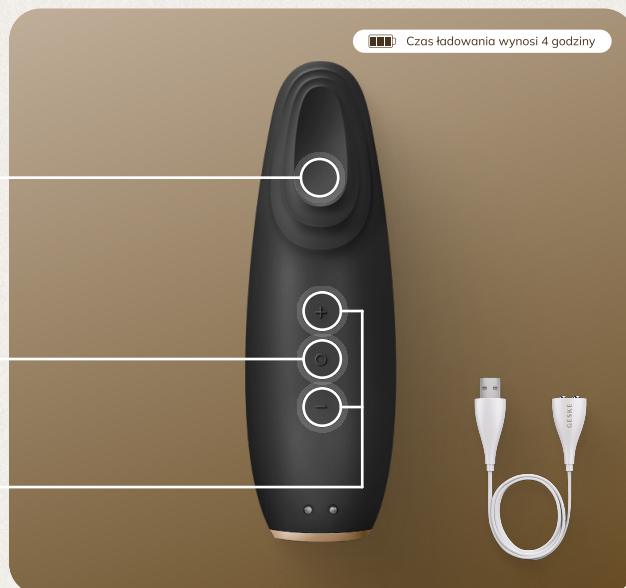

Niwelowanie obrzęków

Jasne oczy



Ogrzewanie

Zrelaksowane oczy



Chłodzenie

Pobudzone oczy

OPANUJ PIERWSZE KROKI

Jasne oczy bez cieni i worków pod oczami dzięki połączeniu kilku zaawansowanych technologii: Oto nasz SmartAppGuided™ Warm & Cool Eye Energizer | 6 w 1.



RELAKSUJĄCY I ROZGRZEWAJĄCY MASAŻ OCZU

PRZYGOTOWANIE

Zacznij od czystej twarzy bez makijażu.

ZASILANIE WŁĄCZONE

Włącz technologię SmartSonic Pulsation Technology, naciskając i przytrzymując przycisk zasilania przez 2 sekundy. Wybierz żądaną intensywność za pomocą przycisków plus i minus. Następnie naciśnij ikonę słońca, aby włączyć technologię Relaxing Eye Warming Technology.

MASAŻ

Umieść urządzenie na każdym oku na 90 sekund. Następnie odwróć urządzenie i delikatnie przesuwaj masującymi grzbietami małymi półkolami pod okiem w kierunku skroni.

ZAKOŃCZENIE

Wyłącz urządzenie, naciskając i przytrzymując przycisk zasilania przez 2 sekundy i wyczyść je, opłukując wodą. Po każdym użyciu wyczyść urządzenie środkiem do czyszczenia urządzeń GESKE.



ODŚWIEŻAJĄCY, CHŁODZĄCY MASAŻ OCZU

PRZYGOTOWANIE

Upewnij się, że twarz jest czysta i wolna od makijażu.

ZASILANIE WŁĄCZONE

Włącz technologię SmartSonic Pulsation Technology, naciskając i przytrzymując przycisk zasilania przez 2 sekundy. Wybierz żądaną intensywność za pomocą przycisków plus i minus. Następnie naciśnij ikonę płatka śniegu, aby włączyć technologię Energizing Eye Cooling Technology.

MASAŻ

Umieść urządzenie na każdym oku na 15 sekund. Technologia energetyzująco-chłodzącego zabiegu do oczu zmniejsza obrzęk wokół oka poprzez krótkotrwałe zwężenie naczyń krwionośnych.

ZAKOŃCZENIE

Wyłącz urządzenie, naciskając i przytrzymując przycisk zasilania przez 2 sekundy i wyczyść je, opłukując wodą. Po każdym użyciu wyczyść urządzenie środkiem do czyszczenia urządzeń GESKE.

**Stwórz swoją osobistą
rutynę pielęgnacji skóry**

i pobierz naszą aplikację GESKE



Zaawansowana
Aplikacja



Wideo Z
przewodnikiem



Wykorzystuje
sztuczną inteligencję
Skanowanie skóry



Ekspert
Porady



Osobisty
Przewodnik



W aplikacji
Nagrody



WAŻNA INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA. PRZECZYTAJ PRZED UŻYCIEM.

Przeczytaj informacje dotyczące bezpieczeństwa przed pierwszym użyciem. Zachowaj obdywie instrukcje używania.

Twój produkt w skrócie

Twój produkt to wielofunkcyjne urządzenie energetyzujące do oczu. Można go bezpiecznie stosować do 3 razy dziennie, nie należy stosować częściej. W celu zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa i doskonałych rezultatów należy zawsze przestrzegać indywidualnie dobranej rutyny pielęgnacji skóry stworzonej za pomocą aplikacji GESKE.

UWAGI DOTYCZĄCE UŻYCIA

Przed pierwszym użyciem urządzenia należy przeczytać w całości niniejszą broszurę dotyczącą bezpieczeństwa i skróconą instrukcję obsługi. Obie instrukcje należy zachować, ponieważ zawierają ważne informacje dotyczące bezpiecznego użytkowania oraz wymagań technicznych i prawnych. Urządzenie jest produktem do pielęgnacji skóry dla osób dorosłych, a nie wyrobem medycznym ani produktem o właściwościach medycznych lub innych właściwościach leczniczych. Zamierzone zastosowanie obejmuje również przestrzeganie skróconej instrukcji obsługi, wymienionych tutaj ostrzeżeń i sponalizowanych zaleceń firmy GE dotyczących stosowania. Urządzenie nadaje się do ponownego ładowania i pozwala na wygodną, bezprzewodową pracę. Przed pierwszym użyciem należy je w pełni naładować. Potrzebujesz tylko dołączonego kabla do ładowania USB. Pierwsze ładowanie może potrwać do ośmiu godzin. Kabel musi łączyć się z obydwooma stykami magnetycznymi w wyznaczonych metalowych punktach stykowych urządzenia. Jeżeli kabel ładujący nie podłączył się sam, podłącz go do prądu i poczekaj. Spowoduje to ponowne aktywowanie efektu magnetycznego i styki połączą się automatycznie. Upewnij się, że styki magnetyczne łączą się tylko z punktami styku urządzenia, a nie z innymi metalowymi powierzchniami.

Dane techniczne

Materiały: ABS, silikon, stop aluminium | **Temperatura przechowywania:** -5 - +60°C/23-140°F | **Bateria:** Li-Ion 3,7 V | **Pojemność baterii:** 800 mAh | **Maksymalna wartość prądu ładowania:** 450 mA | **Napięcie ładowania:** 5V | **Czas ładowania:** ok. 4 godziny | **Czas działania** różni się w zależności od aktywowanych technologii i intensywności. | **Interfejs:** USB | **Programy:** Wibrację: 10 poziomów natężenia, funkcja rozgrzania, funkcja chłodzenia

Produkt nie nadaje się do stosowania w następujących warunkach:

Nie stosować, jeżeli u użytkownika występuje nadwrażliwość na ciepło (np. pokrzywka cieplna). Jeżeli podczas stosowania wystąpi uczucie (zbyt) intensywnego ciepła, należy natychmiast przerwać używanie produktu.

Dalsze informacje dotyczące stosowania:

Nie stosować produktu na podrażnioną lub uszkodzoną skórę, otwarte rany (po wszelkiego rodzaju urazach), w przypadku infekcji bakteryjnych lub wirusowych skóry (zarówno w miejscu stosowania, jak i poza nim). Produkt nie jest przeznaczony do leczenia chorób skóry. Jeżeli występują u Ciebie choroby skóry, przed użyciem tego produktu skonsultuj się z dermatologiem. Nie należy używać produktu jeżeli jest 1) nadmiernie rozgrzany, 2) uszkodzony mechanicznie lub zdeformowany, 3) odbarwiony. Jeżeli podczas stosowania wystąpi ból i (lub) dyskomfort, należy zaprzestać stosowania produktu i zasięgnąć porady lekarza. Skóra wokół oczu jest bardzo wrażliwa: Zachowaj szczególną ostrożność w tym obszarze i unikaj kontaktu produktu z oczami. Używać produktu wyłącznie zgodnie z zaleceniami w ramach sponalizowanej rutyny. Ze względów higienicznych zalecamy, aby nie udostępniać produktu nikomu innemu. Produkt przeznaczony do stosowania kosmetycznego na usta. GESKE nie ponosi odpowiedzialności za szkodliwe skutki wynikające z użycia na innych obszarach ciała lub innego niewłaściwego użycia, podłączenia do nieodpowiednich źródeł napięcia, zanieczyszczonej cieczy przewodzącej lub kulek. Przed ładowaniem zawsze upewnij się, że wtyczka i gniazdko są całkowicie suche. W przeciwnym razie może dojść do porażenia prądem, zwarcia lub pożaru. Produktu nie wolno używać, gdy jest podłączony do gniazdka elektrycznego.

Ostrzeżenia

Ryzyko obrażeń w przypadku nieprawidłowego użycia!

Używaj produktu wyłącznie w sposób opisany w skróconej instrukcji obsługi i instrukcjach wideo. Jeżeli nadal masz pytania, skontaktuj się z naszym działem obsługi klienta pod adresem support@geske.com.

Ryzyko obrażeń na skutek pożaru/zapłonu!

Nie gasić produktu wodą. Nie wrzucać produktu do ognia.

Niebezpieczeństwo obrażeń na skutek uszkodzonych akumulatorów!

Niewłaściwe obchodzenie się z akumulatorami może spowodować niekontrolowaną reakcję egzotermiczną. W takim przypadku należy natychmiast i w odpowiedni sposób zutilizować cały produkt.

Ryzyko obrażeń u dzieci!

Produkt należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Niebezpieczeństwo obrażeń na skutek porażenia prądem!

Płyn może uszkodzić obwód ładowania i zagrozić zdrowiu. Na czas czyszczenia odłączyć produkt od kabla/obwodu ładowania.

Niebezpieczeństwo uszkodzenia przez pole magnetyczne!

Pola magnetyczne mogą oddziaływać na elementy mechaniczne i elektroniczne, takie jak na przykład rozruszniki serca. Nie należy używać produktu bezpośrednio nad rozrusznikiem serca. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się ze swoim lekarzem prowadzącym. Nie umieszczaj kart z paskami magnetycznymi (np. kart kredytowych) w pobliżu produktu, ponieważ magnesy produktu mogą je uszkodzić.

Niebezpieczeństwo uszkodzenia na skutek zmieniających się temperatur otoczenia!

Zmiana temperatury otoczenia (np. po transporcie) może prowadzić do powstawania kondensacji. W takim przypadku nie należy używać produktu, dopóki nie dostosuje się do nowej temperatury otoczenia. Nigdy nie wystawiaj produktu na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, ekstremalnych temperatur lub wrzącej wody.

Bezpieczne używanie w temperaturze otoczenia do 50°C (122°F).

Ryzyko uszkodzenia na skutek zbyt długiego ładowania!

Po każdym ładowaniu należy odłączyć kabel ładujący od obwodu.

Bezpieczne ładowanie do temperatury otoczenia 45°C (113°F).



Informacje na temat utylizacji urządzenia i ZSEE. To urządzenie elektryczne zostało po raz pierwszy wprowadzone do obrotu po 13 sierpnia 2005 roku. Zgodnie z europejską dyrektywą WEEE i przepisami krajowymi, urządzeń elektrycznych i części elektronicznych objętych niniejszą dostawą nie można wyrzucać razem z odpadami domowymi. Po zakończeniu okresu użytkowania produktu należy je oddać do miejskiego punktu zbiórki, aby zapewnić utylizację przyjazną dla środowiska.

Informacje dotyczące baterii / akumulatorów

W kontekście dystrybucji baterii i akumulatorów, zgodnie z przepisami europejskimi jesteśmy zobowiązani poinformować Cię, konsumenta, o następujących kwestiach: Użytkownik jest prawnie zobowiązany do zwrotu baterii i akumulatorów. Po zużyciu możesz je nam zwrócić, oddać do miejskiego punktu zbiórki lub bezpłatnie dostarczyć do lokalnego sprzedawcy. Baterie i akumulatory są oznaczone w następujący sposób:



Symbol te oznaczają, że baterie i akumulatory nie powinny być wyrzucane przez użytkownika wraz z odpadami domowymi. Baterie i akumulatory zawierające szkodliwe substancje są oznaczone jednym z poniższych symboli. Symbol składa się z przekreślonego kosza na śmieci na kółkach oraz symbolu chemicznego metalu ciężkiego, który jest główną substancją zanieczyszczającą. W szczególności powyższe symbole oznaczają: Pb = akumulator zawiera ołów, Cd = akumulator zawiera kadm, Hg = akumulator zawiera rtęć

Informacje dotyczące baterii litowych/akumulatorów

Baterie litowe i akumulatory litowe można rozpoznać po symbolu chemicznym Li*. Oprócz informacji podanych powyżej pragniemy zwrócić uwagę również na następujące kwestie: Pozywiając się baterii litowych lub akumulatorów, zwracając je do nas, zanosząc do miejskiego punktu zbiórki lub przekazując lokalnym sprzedawcom detalicznym lub publicznym firmom zajmującym się utylizacją odpadów, należy upewnić się, że są one całkowicie rozładowane. Prosimy również o zakrycie powierzchni stykowych baterii oznaczonych „+” i „-” taśmą klejącą, aby uniknąć ryzyka pożaru.



GESKE Beauty Tech GmbH, Leipziger Platz 18, 10117 Berlin oświadcza niniejszym, że wszystkie urządzenia elektroniczne odpowiadają odpowiednim warunkom odpowiednich dyrektyw europejskich 2014/30/EU i 2011/65/EU.

Ograniczenie odpowiedzialności

Firma GESKE Beauty Tech GmbH i (lub) jej sprzedawcy ponoszą odpowiedzialność za szkody spowodowane umyślnym lub rażąco niedbałym zachowaniem firmy GESKE Beauty Tech GmbH, przedstawiciela lub podmiotu zastępującego, zgodnie z przepisami prawa. Z wyjątkiem utraty życia, ciała lub zdrowia oraz naruszenia istotnych zobowiązań umownych (obowiązków kardynalnych), firma GESKE Beauty Tech GmbH i (lub) jej sprzedawcy ponoszą odpowiedzialność wyłącznie za szkody, które można przypisać celowemu lub rażącemu zaniedbaniu. Dotyczy to również szkód pośrednich, w szczególności utraconych korzyści. Ponadto odpowiedzialność wobec konsumentów z tytułu przejętej gwarancji, z wyjątkiem przypadków działania umyślnego lub rażącego niedbalstwa, naruszenia życia, ciała lub zdrowia oraz naruszenia istotnych zobowiązań umownych (obowiązków kardynalnych) ogranicza się do typowych, przewidywalnych szkód w momencie zawarcia umowy, a także do poziomu przeciętnych szkód typowych dla tej umowy. Dotyczy to również szkód pośrednich, w szczególności utraconych korzyści. W przypadku firm, z wyjątkiem przypadków utraty życia, kończyny i zdrowia lub umyślnego lub rażącego niedbalstwa zachowania GESKE Beauty Tech GmbH i (lub) jej sprzedawców detalicznych, odpowiedzialność ogranicza się do typowych, przewidywalnych szkód w momencie zawarcia umowy, oraz także do poziomu średnich szkód typowych dla tej umowy. Dotyczy to również szkód pośrednich, w szczególności utraconych korzyści. Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody spowodowane przez: Nieprzestrzeganie niniejszej instrukcji/niewłaściwe użytkowanie/nieautoryzowane zmiany/zmiany techniczne/stosowanie niezatwierdzonych części zamiennych/stosowanie niezatwierdzonych akcesoriów Roszczenia z tytułu odpowiedzialności wynikające z niemieckich przepisów dotyczących odpowiedzialności za produkt pozostają nienaruszone.