


Götze & Jensen

SZCZOTECZKA SONICZNA DLA DZIECI ST050*

Instrukcja obsługi
i warunki gwarancji

*oznaczenie koloru urządzenia

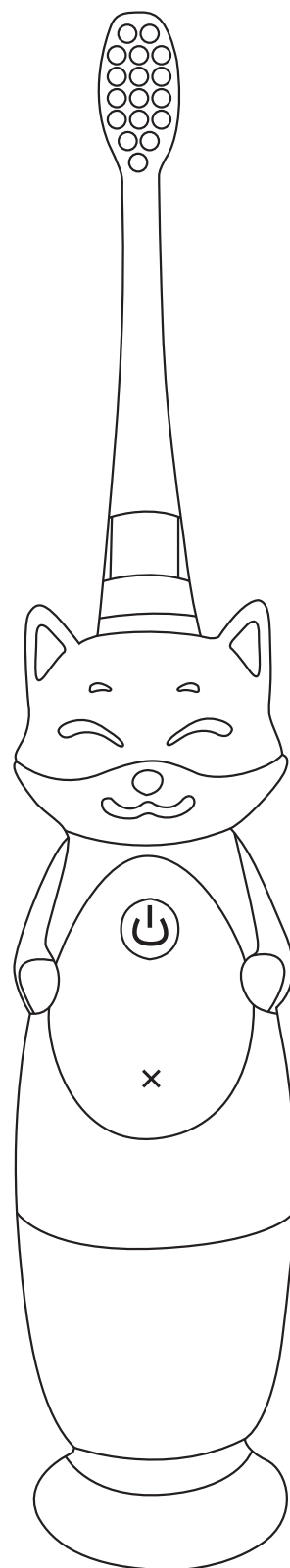

WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA I ZAGROŻENIA

1. Należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia.
2. Nie należy ingerować we wnętrze urządzenia i zmieniać jego konstrukcji, poza czynnością wymiany baterii.
3. Ze względów bezpieczeństwa, do wszelkich napraw urządzenia uprawniony jest jedynie producent, serwis autoryzowany przez producenta lub osoba o odpowiednich kwalifikacjach.
4. Nie należy używać komponentów i akcesoriów innych niż oryginalne.
5. Nie należy zanurzać urządzenia w wodzie lub innych płynach.
6. Należy używać tego produktu zgodnie z jego przeznaczeniem, w sposób opisany w instrukcji obsługi. Nie należy używać dodatków, które nie są rekomendowane przez producenta.
7. Jeżeli produkt zostanie upuszczony, końcówka szczoteczki powinna zostać wymieniona przed ponownym użyciem, nawet jeśli nie ma widocznych uszkodzeń.
8. Niniejszy sprzęt może być użytkowany przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat i przez osoby o obniżonych możliwościach fizycznych, umysłowych i osoby o braku doświadczenia i znajomości sprzętu, jeżeli zapewniony zostanie nadzór lub instruktaż odnośnie do użytkowania sprzętu w bezpieczny sposób, tak aby związane z tym zagrożenia były zrozumiałe. Dzieci nie powinny bawić się sprzętem. Dzieci bez nadzoru nie powinny wykonywać czyszczenia i konserwacji sprzętu.
9. Dzieci powinny korzystać z urządzenia pod nadzorem osoby dorosłej.
10. Produkt powinien być przechowywany w miejscu niedostępnym dla dzieci.
11. Ten produkt przeznaczony jest wyłącznie do użytku domowego, do czyszczenia zębów, dziąseł oraz języka. Nie należy używać produktu do innych celów.
12. Nie należy narażać produktu na działanie wysokich temperatur oraz narażać na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
13. Przy umieszczaniu baterii wewnątrz urządzenia należy zwrócić uwagę na prawidłową biegunowość.
14. Końcówka szczoteczki powinna być wymieniona na nową co 3 miesiące.
15. Jeśli w ciągu ostatnich 2 miesięcy dziecko przeszło jakąkolwiek operację związaną z jamą ustną, przed użyciem należy skonsultować się z dentystą.

16. Jeśli produkt nie jest użytkowany przez dłuższy okres, należy wyciągnąć z niego baterię.
17. Urządzenie przeznaczone jest do higieny osobistej, nie jest przeznaczone do użytku przez większą liczbę pacjentów w gabinetach i placówkach stomatologicznych.
18. Jeśli po użyciu wystąpi nadmierne krwawienie, które występuje nadal po 1 tygodniu użytkowania, ból lub dyskomfort należy zaprzestać korzystania z urządzenia i skonsultować się dentystą lub lekarzem.
19. W przypadku obaw dotyczących zdrowia, przed skorzystaniem z urządzenia skonsultuj się z lekarzem.

WPROWADZENIE

Dziękujemy za zaufanie, jakim nas Państwo obdarzyli, dokonując zakupu urządzenia marki **Götze & Jensen**.

Jesteśmy przekonani, że to bardzo dobrej jakości urządzenie zapewni Państwu dużo radości i satysfakcji z jego użytkowania.

NALEŻY DOKŁADNIE PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ OBSŁUGI I JEJ PRZESTRZEGAĆ!


To urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego lub podobnego, nie dotyczącego celów komercyjnych.

Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku użytkowania niewłaściwego lub niezgodnego z przeznaczeniem.

DANE TECHNICZNE


Model	ST050
Zasilanie	1x AAA 1.5 V (brak w zestawie)
Moc	0.24 W
Żywotność baterii	Do 120 dni
Wibracje	Do 17 000 ruchów/minutę
Klasa wodoszczelności	IPX7
Sposób działania	4x interwały po 30 sekund
Temperatura pracy	0-50°C

OPIS PRODUKTU

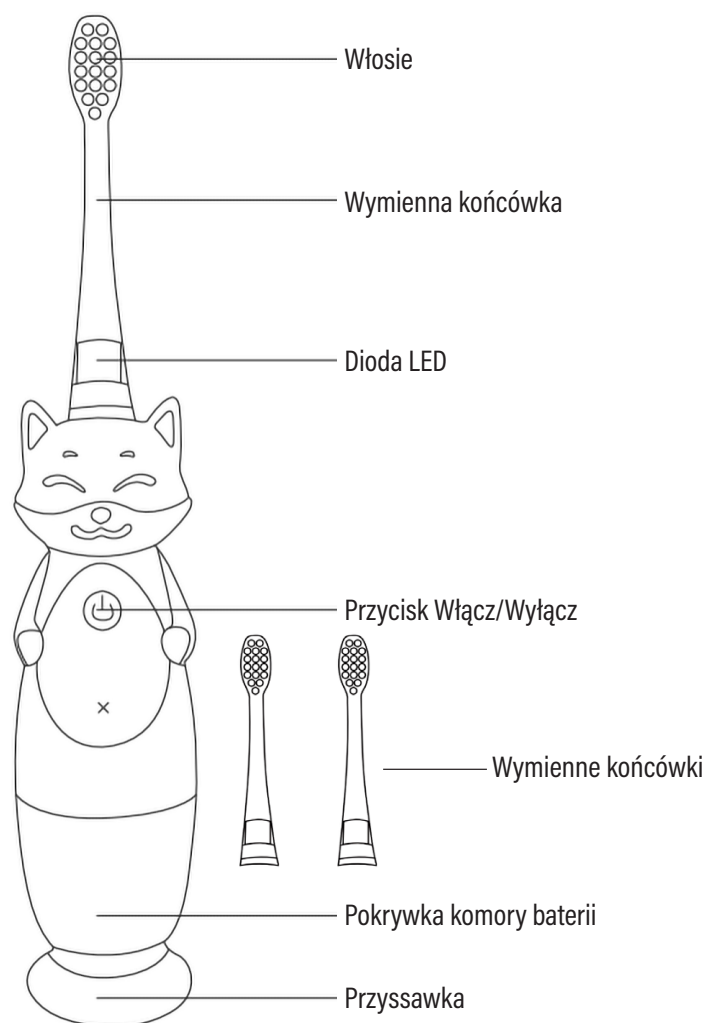

Wymiana baterii

1. Zdemontuj pokrywę baterii przekręcając ją zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Wskazana na rysunku linia zrówna się z dolną częścią strzałki.
2. Pociągnij pokrywę baterii, aby ją zdjąć.
3. Odkręć śrubkę zabezpieczającą baterię w przegrodzie za pomocą śrubokrętu.
4. Włóż do komory baterię AAA, zachowując przy tym odpowiednią polaryzację.
5. Przykręć śrubkę zabezpieczającą baterię.
6. Załóż i przekręć pokrywę baterii w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara tak, aby wskazana linia pokrywała się z kropką.

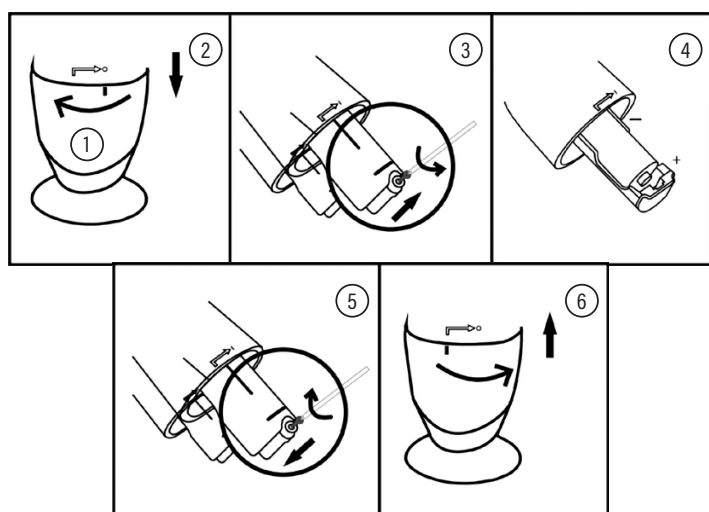


Bateria oraz śrubokręt nie są częścią zestawu.

Wymiana końcówek


Zalecany czas wymiany końcówki w szczoteczce wynosi 3 miesiące. Regularne używanie szczoteczki sprawi, że po tym czasie końcówka straci swoją skuteczność i może stać się siedliskiem bakterii.

1. Przekręć końcówkę szczoteczki ruchem przeciwnym do ruchu wskazówek zegara i pociągnij ją do góry, aby ją zdemontować.
2. Do zainstalowania końcówki nałóż ją na rączkę tak, aby dopasować wewnętrzne wcięcie, po czym przekręć końcówkę zgodnie z ruchem wskazówek zegara.

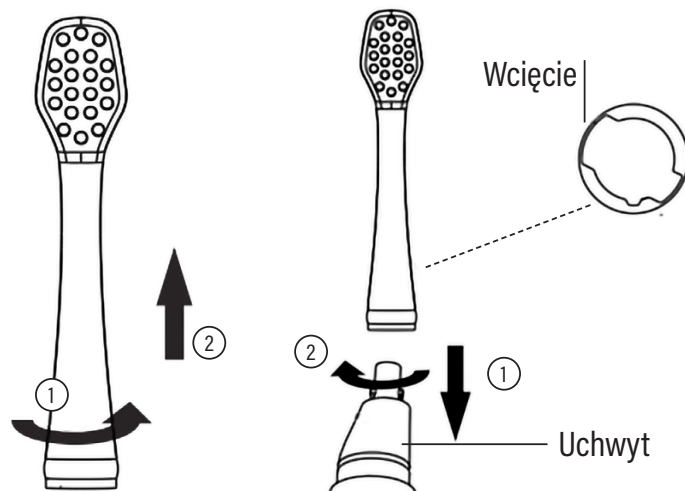

Instrukcja szczotkowania

1. Nałóż niewielką ilość pasty do zębów na zwilżone włosie szczoteczki.
2. Przyłóż końcówkę szczoteczki do zębów pod niewielkim kątem w kierunku linii dziąseł i włącz szczoteczkę. Pierwsze naciśnięcie przycisku Włącz / Wyłącz spowoduje włączenie podświetlenia, następne naciśnięcie rozpocznie pracę szczoteczki.
3. Szczotkuj przód, tył i powierzchnię żującą każdego z 4 obszarów jamy ustnej, przesuwając główkę szczoteczki wzdłuż wybranego łuku zębowego oraz wykonując delikatne ruchy wymiatające.
4. Każdy obszar jamy ustnej szczotkuj przez 30 sekund. Szczoteczka zasygnalizuje, kiedy należy przejść do następnego obszaru, poprzez krótkie interwałowe przerwy.
5. Szczoteczka wyłączy się automatycznie po 2 minutach pracy.
6. Po zakończonym szczotkowaniu opłucz główkę szczoteczki wodą i pozostaw ją do wyschnięcia.

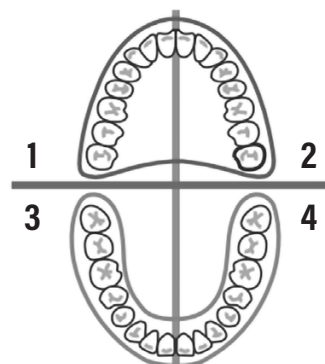

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

PROBLEM	MOŻLIWA PRZYCZYNA	ROZWIĄZANIE
Siła wibracji zmalała.	Główka szczoteczki jest przyłożona do zębów ze zbyt dużą siłą.	Główka szczoteczki powinna być delikatnie przyłożona do zębów.
	Bateria ma zbyt małą moc.	Wymień baterię na nową.
Krótszy czas pracy.	Bateria ma zbyt małą moc.	Wymień baterię na nową.
Szczoteczka po czasie gorzej czyści.	Końcówka szczoteczki jest już zbyt zużyta.	Wymień końcówkę na nową, zaleca się to robić co 3 miesiące.
Szczoteczka nie uruchamia się.	Bateria ma zbyt małą moc.	Wymień baterię na nową.

EKOLOGICZNA I PRZYJAZNA DLA ŚRODOWISKA UTYLIZACJA

To urządzenie jest oznaczone, zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/19/UE z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE), symbolem przekreślonego kontenera na odpady:



Nie należy wyrzucać urządzeń oznaczonych tym symbolem, razem z odpadami domowymi.

Urządzenie należy zwrócić do lokalnego punktu przetwarzania i utylizacji odpadów lub skontaktować się z władzami miejskimi.

MOŻESZ POMÓC CHRONIĆ ŚRODOWISKO!

Właściwe postępowanie ze użytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu.

WARUNKI GWARANCJI DOTYCZĄCE SZCZOTECZKI SONICZNEJ

- ART-DOM Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (92-402) przy ul. Zakładowej 90/92 Numer Krajowego Rejestru Sądowego 0000354059 (Gwarant) gwarantuje, że zakupione urządzenie jest wolne od wad fizycznych. Gwarancja obejmuje tylko wady wynikające z przyczyn tkwiących w rzeczy sprzedanej (wady fabryczne).
- Ujawniona wada zostanie usunięta na koszt Gwaranta w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia uszkodzenia do serwisu autoryzowanego lub punktu sprzedaży.
- W wyjątkowych przypadkach, np. konieczności sprowadzenia części zamiennych od producenta, termin naprawy może zostać wydłużony do 30 dni.
- Okres gwarancji dla użytkownika wynosi 24 miesiące od daty wydania towaru.
- Towar przeznaczony jest do używania wyłącznie w warunkach indywidualnego gospodarstwa domowego.
- Gwarancja nie obejmuje:
 - uszkodzeń powstałych na skutek używania urządzenia niezgodnie z instrukcją obsługi,
 - uszkodzeń mechanicznych, chemicznych lub termicznych,
 - napraw i modyfikacji dokonanych przez firmy lub osoby nieposiadające autoryzacji producenta,
 - części z natury łatwo zużywalnych lub materiałów eksploatacyjnych takich jak: baterie, żarówki, bezpieczniki, filtry, pokrętła, półki, akcesoria,
 - instalacji, konserwacji, przeglądów, czyszczenia, odblokowania, usunięcia zanieczyszczeń oraz instruktażu.
- O sposobie usunięcia wady decyduje Gwarant.

Usunięcie potwierdzonej wady urządzenia nastąpi poprzez wykonanie naprawy gwarancyjnej lub wymianę urządzenia. Gwarant może dokonać naprawy, gdy kupujący żąda wymiany lub Gwarant może dokonać wymiany, gdy kupujący żąda naprawy, jeżeli doprowadzenie do zgodności towaru (urządzenia) zgodnie z udzieloną gwarancją w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Gwaranta. W szczególnie uzasadnionych wypadkach, jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Gwaranta może on odmówić doprowadzenia towaru do zgodności z udzieloną gwarancją i zaproponować inny sposób załatwienia reklamacji z gwarancji.

8. Wymiany towaru dokonuje punkt sprzedaży, w którym towar został zakupiony (wymiana lub zwrot gotówki) lub autoryzowany punkt serwisowy, jeżeli dysponuje taką możliwością (wymiana). Zwracane urządzenie musi być kompletne, bez uszkodzeń mechanicznych. Niespełnienie tych warunków może spowodować nieuznanie gwarancji.
9. W przypadku braku zgodności towaru z umową sprzedaży, kupującemu z mocy prawa przysługują środki ochrony prawnej ze strony i na koszt sprzedawcy, a gwarancja nie ma wpływu na te środki ochrony prawnej.
10. Niniejsza gwarancja obowiązuje na terytorium Polski.
11. Warunkiem dokonania naprawy lub wymiany urządzenia w ramach gwarancji jest przedstawienie dowodu zakupu oraz użytkowanie towaru zgodnie z informacjami zawartymi w instrukcji obsługi.

UWAGA!

Uszkodzenie lub usunięcie tabliczki znamionowej z urządzenia może spowodować nieuznanie gwarancji.

Cały czas udoskonalamy nasze produkty, dlatego mogą się one nieznacznie różnić od zdjęć przedstawionych na opakowaniu oraz w instrukcji obsługi. Przed przystąpieniem do użytkowania urządzenia przeczytaj instrukcję obsługi.

ART-DOM Sp. z o.o., ul. Zakładowa 90/92, 92-402 Łódź,
info@artdom.net.pl. Numer Krajowego Rejestru Sądowego 0000354059. v. 2

