

# V1-说明书(波兰)-V1(20240110)

## 技术要求:

- 1.成型尺寸:125\*215mm, 风琴折;
- 2.材质:80g书纸;
- 3.印刷:单色 双面印刷 色彩准确, 无套印不准等现象;
- 4.裁切整齐无毛边;
- 5.其他要求:产品需满足REACH法规及最新RoHS指令要求。  
产品需满足欧可林《包装材料来料检验通用标准》。


6.公差:±1mm

7.标注单位mm

封面

波兰

封底

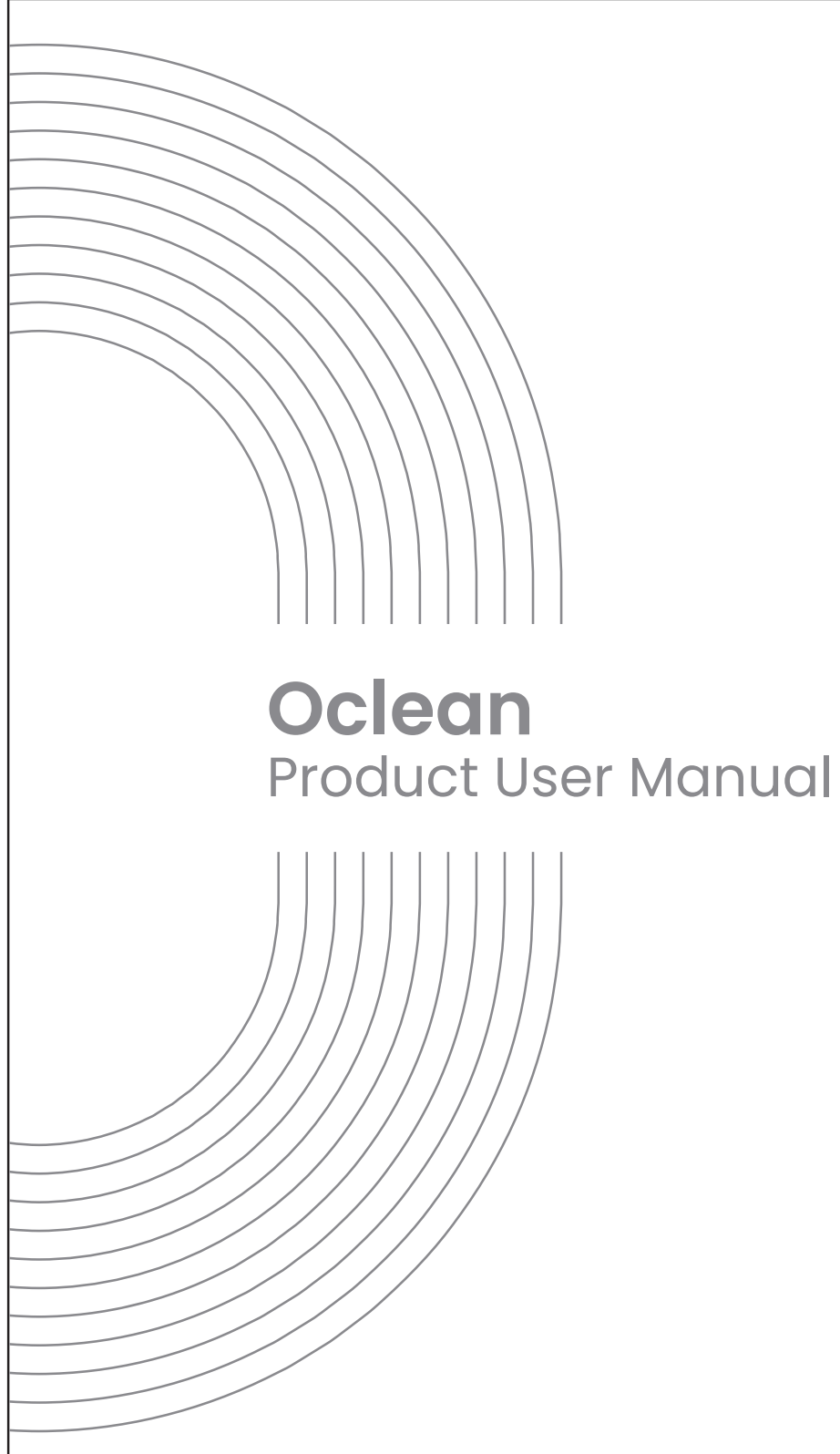

**Oclean**  
Product User Manual


Oclean X Ultra WiFi i inteligentna Soniczna Elektroniczna szczoteczka do zębów  
Instrukcja użytkownika

**Ważne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa**

Ten produkt jest przeznaczony dla osób powyżej 12 roku życia.  
Produkt można stosować tylko z wymiennymi końcówkami marki Oclean. Nie ponosimy odpowiedzialności za skutki wynikające z korzystania z nieoryginalnych, nieopatrzonych końcówek do szczoteczki.  
Ten produkt jest przeznaczony tylko do użytku wewnątrz pomieszczeń. Nie należy wyżywiać szczoteczką na niebezpieczne dla zdrowia pomieszczeniach proszku chemicznego. Zależy się przed wyżywieniem jej w suchym, dobrze wentylowanym pomieszczeniu w temperaturze pokojowej.  
Przed każdorazowym użyciem szczoteczki powinna być sucha. Należy osuszyć ją miękką ściereczką, a także regularnie czyścić podstawę ładującą suchą ściereczką, aby zapobiec gromadzeniu się zanieczyszczeń.


**Końcówka szczoteczki**  
Podczas wymiany końcówki szczoteczki, należy włączyć lub wyłączyć ją pilnowo. Nie należy obracać jej w lewo lub prawo. Zależy się wymieniać końcówki szczoteczki co 2-3 miesiące zgodnie z zaleceniami dentystów.

**Należy zachować szczególną ostrożność w przypadku występowania poniższych stanów nadnaturalności jamy ustnej:**  
Długo, które niedawno przeszły operację przyzębia lub na tkance szkieletowej.  
Osoby z innymi schorzeniami jamy ustnej, w tym osoby z niestabilnymi protezami lub z aparatami, obfitym nawilżaniem z dziąsł.  
Podstawie choroby z nadnaturalną śluzówką jamy ustnej.  
Nie należy się stosować tego produktu przez przewlekłe choroby jamy ustnej lub stosowanie się z dentystą przed jego użyciem.  
Ten produkt nie jest odpowiedni dla osób niepełnosprawnych, chorujących psychicznie lub posiadających odpowiedniego doświadczenia i wiedzy (w tym dzieci 0-12 lat). Chyba że jest używany pod nadzorem ich opiekunów.

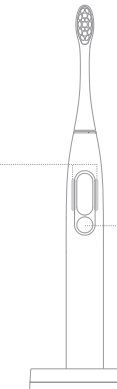

Bezon dotykowy  
Odkrywanie przeszarpienia w górę i w dół, należy przesunąć palcem po lewej stronie ekranu.

Przyścisł, kiedy szczoteczka jest uruchomiona, nadajca przycisku zaprasza je szczoteczka rozpoczęcie czyszczenia, a kiedy zostanie naciśnięty w czasie pracy szczoteczki, szczoteczka zostanie zatrzymane. Naciśnij przycisk ponownie w ciągu 30 sekund, aby wznowić czyszczenie. Będzie w trybie trybów, naciśnij przycisk ponownie przez 2 sekundy, aby zmniejszyć lub zwiększyć ekran, naciśnij przycisk ponownie przez 8 sekund, aby przywrócić urządzenie do ustawień fabrycznych.

 Google Play Store & iOS App Store

**Instrukcja użytkownika**

**Rezerwa uruchomienia**  
Aby włączyć szczoteczka do zębów, naciśnij przycisk zasilania. Po włączeniu szczoteczka przejdzie w tryb gotowości. Bluetooth i Wi-Fi zostaną włączone o ekran będzie uruchomiony. Po włączeniu ekranu Bluetooth i Wi-Fi automatycznie wyłączą się po 30 sekundach bezczynności.

**Instrukcja obsługi**  
Zainstaluj aplikację Oclean Care w aplikacji Oclean Care. Następnie przejdź do podzestawienia do zębów w aplikacji. Uważaj, kliknięcie się ze szczoteczka do zębów przez "ustawienia Bluetooth" w ustawieniach systemowych telefonu nie będzie działać.

**Poręczenie aplikacji**  
W zakładce "Urządzenia" w aplikacji kliknij zdjęcie urządzenia na górze, aby przejść do zakładki "Informacje o urządzeniu", a następnie kliknij "Automatyczne przełączenie między trybami porannym/wieczornym" w sekcji "Ustawienia funkcji", aby umożliwić szczoteczka do zębów automatyczne przełączenie między trybami "Poranne" i "Wieczorne".

**Ustawienia planu czyszczenia**  
Po ponownym powiązaniu szczoteczki do zębów z aplikacją, uzupełnij swoje informacje demograficzne, aby otrzymać rekomendowane plany czyszczenia. Będzie najlepszy plan dla Ciebie. Alternatywnie możesz mieć własny, indywidualny plan czyszczenia, wybierając "Twój własny plan" w zakładce "Urządzenia" w aplikacji.

**Procedura raportu czyszczenia w aplikacji**  
Aplikacja może przesyłać dane ze szczoteczki do zębów tylko, gdy podczas czyszczenia, szczoteczka jest połączona z Wi-Fi i połączona z aplikacją. Dane szczoteczki do zębów będą przesyłane tylko, jeśli nie są w trybie trybów. Szczoteczka do zębów może przesyłać: ograniczona ilość danych ze czyszczeniem (do 7 dni), więc należy podłączyć szczoteczka do zębów do Wi-Fi i synchronizować dane z aplikacją w ciągu 7 dni.

Non czyszczenia: Nie białych ustach, szczoteczka do zębów będzie działać domyślnie w programie "Inteligentne czyszczenie", podczas którego zostanie wygenerowane przygotowanie, gdy szczoteczka do zębów będzie działać przez 2 minuty i automatycznie wyłączy się po 5 minutach pracy.

**Ustawienie szczoteczki do zębów**  
Przed każdorazowym rusz jedną część szczoteczki do zębów, a następnie włóż prawą ręką do podstawy ładującej do adaptera. Następnie możesz aktywować poziom naładowania baterii za pomocą wskaźnika wyświetlanego na ekranie szczoteczki elektronicznej Oclean. Po pełnym naładowaniu zielona szczoteczka do zębów z podstawą ładującą. Należy powstrzymać naładowanie, gdy szczoteczka do zębów powiadomi Cię o niskim poziomie naładowania baterii.

**Automatyczne wybudzenie**  
Domyślnie podświetlenie szczoteczki spowoduje automatyczne wybudzenie ekranu. Jeśli ekran zostanie automatycznie wybudzony kilka razy z rzędu bez mycia zębów, następnym razem będzie wymagane nacisnięcie przycisku, aby go włączyć. Podczas niskiego poziomu baterii, podświetlenie szczoteczki nie spowoduje automatycznego wybudzenia ekranu.

**Program Wytycznych Naukowych**  
Brush Activity Clover: Brush Activity Clover implementuje codzienne zalecenia zalecane przez cykl życia jamy ustnej. Odpowiada on ilości mycia zębów dziennie (do dwóch razy) i czasu mycia zębów (nie mniej niż 2 minuty). Czas mycia zębów jest przez więcej niż 2 minuty (kwalifikacja) stopni oceniania mycia (Ankieta oceniana powyżej 90 punktów za każdy raz). Brush Activity Clover jest wyznaczaniem czyszczenia jamy ustnej na 0-10 dni.


**Przygotowanie o nadmiernym nacisku podczas mycia zębów**  
Jeśli strąca się zbyt duży nacisk, może to uszkodzić dziąsła lub powiększyć zębów. Magg to na uwaga, gdy szczoteczka do zębów wykryje zbyt duży nacisk, wyemituje sygnał dźwiękowy, o duży wskaznik świetlny zapali się na ekranie. (Ta funkcja jest włączona domyślnie).

**Przygotowanie o nadmiernym suchych posuszone-owocnych podczas mycia zębów**  
Nadmierne suchy posuszone-owocne podczas mycia mogą łatwo doprowadzić do krwawienia dziąsła lub uszkodzenia sztywnych zębów. Magg to na uwaga, gdy szczoteczka do zębów wykryje nadmierne suchy posuszone-owocne podczas mycia, wyemituje sygnał dźwiękowy. (Ta funkcja jest włączona domyślnie).


**Ustawienie końcówki szczoteczki pod kątem 45°**  
Dzięki ustawieniu końcówki szczoteczki pod kątem 45° do linii dziąsła, płytko nagłębno przysiądła się w tym miejscu może być lepiej usunięta, co prowadzi do zdrowego zębów. Aby rozpocząć mycie, szczoteczka do zębów wyemituje sygnał dźwiękowy, aby ustawić końcówkę szczotki w pozycji pod kątem 45°. (Ta funkcja musi być włączona w aplikacji).

**Przygotowanie o myciu powierzchni grzybnicy powierzchni grzybnicy zębów**  
Jeśli zostanie na próchnicy, długiego końcówka jest szczególnie ważna. Aby rozpocząć mycie w tym obszarze, podczas procesu mycia szczoteczka do zębów wyemituje sygnał dźwiękowy, aby wyszczelnić powierzchnie grzybnicy. (Ta funkcja musi być włączona w aplikacji).

**Przygotowanie o zmianie obszarów mycia**  
Aby skutecznie zapobiegać próchnicom, je zębów zębów, wyciągnij obszar mycia, aby być dokładnie wyznaczony. Po użyciu innego obszaru, pogłęb się sygnał dźwiękowy o zmianie obszaru mycia. (Ta funkcja musi być włączona w aplikacji).



Przebieg ekranu w górze w DM

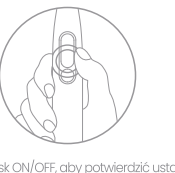


Naciśnij przycisk ON/OFF, aby powstrzymać ustawienie

**Ostrzeżenie o niskim poziomie naładowania baterii**  
Gdy poziom naładowania baterii spadnie poniżej 10%, na wyświetlaczu szczoteczki będzie się pojawiać komunikaty informujące o niskim poziomie naładowania baterii. Wyświetlenie komunikatu będzie się pojawiać naładowanie baterii. Gdy poziom baterii będzie bardzo niski, szczoteczka do zębów wyłączy się, a ekran szczoteczki będzie błyskać, informując o potrzebie naładowania baterii.


**Uwaga: Szczoteczka nie ładowana, używać tylko, że szczoteczka jest całkowicie prawnie i zgodna z podstawą naładowania.**  
Podczas standardowego naładowania szczoteczki włączony będzie poziom naładowania baterii oraz linie naładowania. Do pełnego naładowania będzie potrzebne nie więcej niż 5-6 godzin (zależnie od pomocy stacji ładującej).

**Ważne ostrzeżenie dotyczący ładowarki**  
Z uwagi na to, że ekran czujka szczoteczka do zębów została wyposażona w mechanizm szybkiego ładowania, zależy się podłączenie i ładowanie szczoteczki tylko wtedy, gdy jest to wymagane. Nie należy pozostawiać naładowanej szczoteczki na ładowaniu, gdy nie jest to konieczne lub gdy bateria jest już w pełni naładowana. Pozostawienie całkowicie naładowanej szczoteczki w ładowaniu przez dłuższy czas może prowadzić do przedłużenia jej czasu użytkowania baterii, a to z kolei może wpłynąć na komfort użytkownika.


**Zalecana metoda czyszczenia zębów**



Przesuwaj szczoteczka powoli pod kątem 45° w kierunku do linii dziąsła. Nie ma potrzeby wykonywania ruchów w górę i w dół podczas tej czynności.



Trzymaj szczoteczka delikatnie, wykonaj powolne ruchy okrężne i nie wywieraj nadmiernego nacisku na zęby.



Po umyciu zębów przepłucz jamę ustną czystą wodą.

| * Specyfikacja         |   |
|------------------------|---|
| Nazwa produktu         | Oclean WiFi Smart Sonic Electric Toothbrush           |
| Model                  | V800  |
| Stopień wodoodporności | IPX7  |
| Ładowność              | Bezprzewodowa podstawowa ładująca V1P2                |
| Napięcie wejściowe     | 5V=1A   |
| Czas pracy na baterii* | 40 dni  |
| Waga modelu baterii    | 3200 mAh  |
| Czas ładowania         | Około 4h godzin (zależnie od pomocy stacji ładującej) |
| Bateria                | BE 5.0  |
| Wielkość czyszczeniowa | WiFi: 2402MHz-2479MHz<br>BT: 2402MHz-2483.6MHz        |

\* Przy użyciu domyślnego trybu mycia zębów 2 razy dziennie każdorazowo po 2 minuty.  
\* Poziom ładowanie należy zastosować zgodnie z produktem wykonanym w celu zapewnienia maksymalnego czasu użytkowania do 90 dni (zależnie od warunków).  
\* Nie należy używać urządzenia, jeśli jego bateria była narażona na zmniejszenie w wodzie.

1. Nie narażać, nie uderzać, nie kłócić ani nie wystawiać urządzenia do ognia.
2. Nie używać szczoteczki do zębów, jeśli bateria jest wyładowana lub powiększona.
3. Nie umieszczać jej w środowisku o wysokiej temperaturze.
4. Nie używać urządzenia, jeśli jego bateria była narażona na zmniejszenie w wodzie.