


折叠尺寸95*180mm， 80克双胶

Intelligent Water Flosser Product Manual

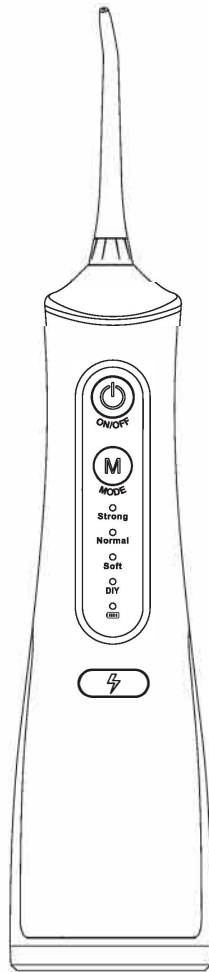

Before using the product , please read this product manual carefully and keep it for future reference.

Instrukcja bezpieczeństwa

Niebezpieczeństwo

- Jeśli nie rozumiesz procedur obsługi i instrukcji bezpieczeństwa, nie używaj tego produktu, aby uniknąć obrażeń spowodowanych nieprawidłową obsługą.
- Nie należy obsługiwać produktu w sposób inny niż opisany w niniejszej instrukcji.
- Nie należy demontować produktu ani zmieniać jego elementów, aby uniknąć uszkodzenia produktu lub porażenia prądem elektrycznym o wysokim napięciu.
- Nie używaj wody o temperaturze powyżej 40c w zbiorniku wody i czyść usta, aby uniknąć działań.
- Jeśli flosser wpadnie do wody podczas ładowania, należy odłączyć wtyczkę zasilania przed wyjęciem produktu.
- Jeśli przewód zasilający lub wtyczka są uszkodzone, przed użyciem należy wymienić zasilacz.
- Nie wkładaj produktu do ognia ani nie podgrzewaj go, nie ładuj, nie używaj ani nie umieszczaj w wysokiej temperaturze.

Ostrzeżenie

- Nie należy używać tego produktu do innych celów niż czyszczenie jamy ustnej.
- Nie należy mocno naciskać dyszy na dziąsła lub zęby, aby uniknąć uszkodzenia dziąseł.
- Produkt należy umieścić w bezpiecznym miejscu, aby uniknąć upadku lub wypadnięcia do wody.
- Nie zanurzać produktu w wodzie, aby uniknąć awarii, pożaru, porażenia prądem, wybuchu i innych zagrożeń.
- Nie wolno podłączać ani odłączać wtyczki zasilania i wtyczki ładowania mokrymi rękami.
- Przed podłączeniem wtyczki zasilania należy sprawdzić, czy napięcie oznaczone przez zasilacz jest zgodne z napięciem lokalnym.
- Nie uszkodzaj, nie niszcz ani nie modyfikuj przewodu zasilającego; nie rozciągaj, nie zginań ani nie skręcaj przewodu zasilającego z użyciem siły; nie naciskaj ciężkich przedmiotów na przewód zasilający ani nie zakleszczaj przewodu zasilającego między przedmiotami.
- Nie należy umieszczać produktu, a zwłaszcza przewodu zasilającego, w pobliżu gorących przedmiotów.
- Przed przystąpieniem do konserwacji należy odłączyć wtyczkę zasilania i wtyczkę ładowania.
- Nie umieszczać produktu w miejscach o wysokiej temperaturze lub wilgotności i unikać bezpośredniego nasłonecznienia.

Nie ładować produktu w gorących lub wilgotnych miejscach, takich jak łazienki i toalety.


- Jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, należy odłączyć wtyczkę zasilania i wtyczkę ładowania, aby uniknąć pożaru lub zagrożenia.

Uwaga

- Ten produkt nie ma części, które można wymienić lub naprawić. W razie konieczności naprawy należy odesłać go do producenta.
- Nie używać w przypadku braku dyszy.

- Niektóre płyny do płukania jamy ustnej mogą powodować korozję produktu, dlatego nie należy używać płynów do płukania jamy ustnej w tym produkcie.
- Ten produkt nie jest odpowiedni dla dzieci, niemowląt i operatorów, którzy nie mogą go używać, chyba że są nadzorowani lub poinstruowani przez osobę odpowiedzialną za bezpieczne korzystanie z tego produktu. Urządzenie II należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci i niemowląt. Nie używaj II jako nakładki.
- Pacjenci z chorobami przyzębia lub pacjenci, którzy przeszli operację jamy ustnej w ciągu ostatnich 2 miesięcy, powinni skonsultować się z lekarzem przed użyciem.

Opis produktu

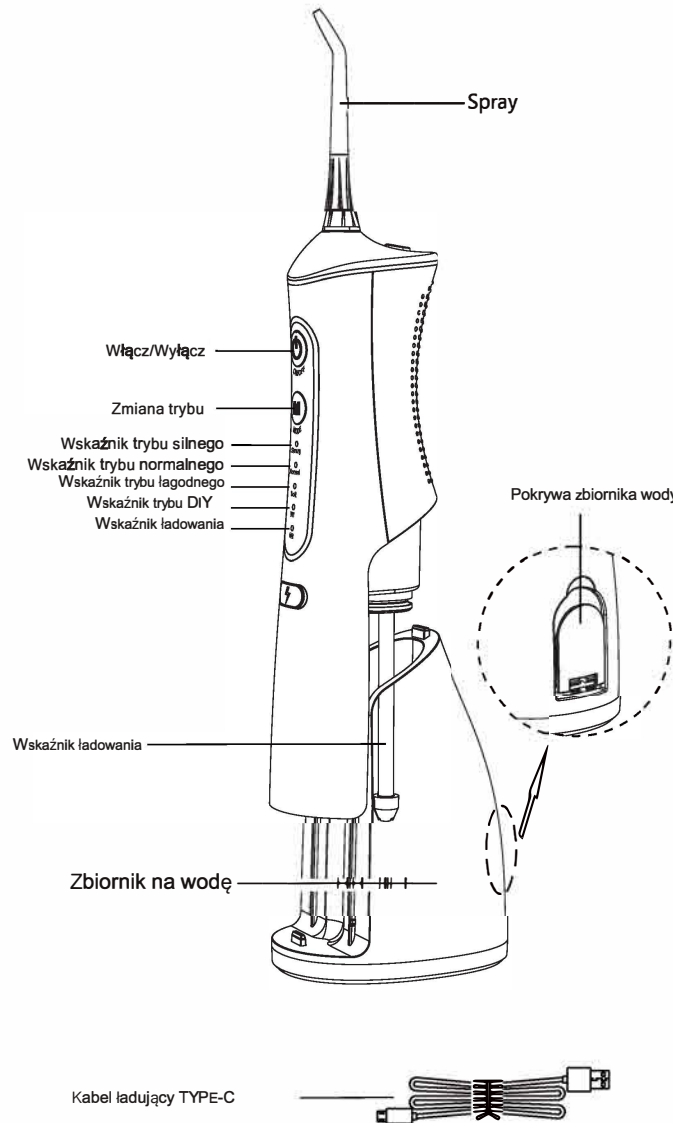

Instrukcja działania

Przed użyciem należy naładować produkt w następujący sposób:

1. Upewnić się, że produkt i ręce są suche, a następnie podłączyć wtyczkę USB do adaptera 5 V (adapter jest przygotowywany przez użytkownika) i podłączyć go do gniazda (rysunek 1).
2. Zdejmij pokrywę ładowania, włóż drugi koniec kabla USB do gniazda ładowania stępła, zwróć uwagę na wtyczkę ładowania i upewnij się, że jest włożona na miejsce (rysunek 2).

Wskazówki:

Jeśli wskaźnik miga podczas lub po użyciu, oznacza to, że bateria jest rozładowana i wymaga naładowania. Pełne naładowanie trwa 4-5 godzin. Podczas ładowania wskaźnik miga, wskazując, że trwa ładowanie. Kontrolka przestanie migać, wskazując, że urządzenie jest w pełni naładowane.

Podczas korzystania należy wykonać poniższe czynności:

1. Włóż dyszę do otworu w górnej części urządzenia do płukania wodą (rysunek 3-1). W razie konieczności wymiany dyszy należy najpierw wyłączyć urządzenie i nacisnąć przycisk, aby łatwo wymienić dyszę. (rysunek 3-2).
2. Napelnij zbiornik na wodę wodą. Istnieją dwie następujące metody napełniania zbiornika wodą:

- a.Otwórz pokrywę zbiornika wody, przytrzymaj flosser poziomo, wlej wodę do zbiornika wody, a następnie zamknij pokrywę. (Rysunek 4).
- b.Pociągnij zbiornik wody w dół, zdejmij go i przytrzymaj w pozycji pionowej, wlej wodę do zbiornika wody i popchnij w górę, aby go zainstalować (Rysunek 5).

3. Wybierz żądany tryb, naciskając przycisk trybu. Można również przełączyć na żądany tryb, naciskając przycisk trybu podczas użytkowania. Ten produkt ma pięć trybów: silny, normalny, łagodny i tryb DIY. Poszczególne funkcje są następujące:

Tryb silny: Głębokie czyszczenie, szybkie czyszczenie; Tryb normalny: Standardowe ciśnienie wody do codziennego czyszczenia; Tryb delikatny: Delikatne czyszczenie, odpowiednie dla osób z wrażliwymi zębami; Tryb DIY: Tryb ustawień niestandardowych, w którym można dowolnie regulować ciśnienie płukania. Korzystanie z trybu DIY: W trybie pracy DIY, naciśnij i przytrzymaj przycisk ON/OFF, ciśnienie wody zmieni się z 20-140 psi. Po osiągnięciu odpowiedniego ciśnienia wody, zwolnij przycisk, aby spuścić z ustawioną siłą. Przy kolejnym użyciu po wyłączeniu, gdy urządzenie jest ustawione na tryb DIY, automatycznie zapamięta ostatnio ustawione ciśnienie wody, bez konieczności dalszej regulacji. Jeśli konieczna jest zmiana innego ciśnienia wody, należy ponownie nacisnąć i przytrzymać przycisk ON/OFF w celu regulacji.

Wskazówki:Eksperci stomatologiczni zalecają, aby pierwszy użytkownik korzystał z trybu miękkiego przez 1 tydzień, a następnie używał innych trybów po adaptacji.

4. Przed użyciem należy trzymać flosser pionowo, dysza wysuwa się do jamy ustnej, wyrównuje zęby lub dziąsła, a usta lekko się otwierają, aby woda mogła płynnie wypływać (rysunek 6-1 i 2),

5. Naciśnij przycisk przełącznika, aby użyć. Podczas użytkowania należy zwrócić uwagę na następujące punkty: (rysunek 7)

- a. Kierunek przepływu wody jest prostopadły do zębów lub dziąseł;
 - b. Porusza się powoli wzdłuż zębów i oczyścić zęby w odpowiedniej kolejności;
 - c. Dysza jest wyrównana z linią dziąseł i prostopadła do dziąseł.
- Wskazówki: Nie rozpylać wody bezpośrednio wzdłuż kieszonek przyzębnych. Po użyciu naciśnij przycisk wyłączania, aby wyłączyć urządzenie. Ten produkt ma funkcję 2-minutowego timera. Urządzenie wyłączy się automatycznie po 2 minutach. Aby kontynuować korzystanie z urządzenia, naciśnij przycisk wyłączania.

Po użyciu należy wykonać poniższe czynności:

- 1.Otwórz pokrywę zbiornika wody i wylej wodę (Rysunek 8).
- 2.Naciśnij przycisk przełącznika, aby przepłukuje zęby i automatycznie odprowadza nagromadzoną wodę (Rysunek 9).
3. Naciśnij przycisk wyłącznika, aby wyłączyć irygator do jamy ustnej, a następnie zamknij pokrywę zbiornika wody.
4. Osuszyć irygator do jamy ustnej - szmatką (rysunek 10).

Wskazówki : Aby uniknąć rozprzestrzeniania się bakterii, należy upewnić się, że w spłuczce dentylistycznej nie ma resztek wody. Jeśli produkt nie będzie używany przez dłuższy czas, należy go wyczyścić i przechowywać po wyschnięciu.

Rutynowe czynności konserwacyjne

Do czyszczenia produktu używaj czystej wody lub neutralnego detergentu, nie używaj żrących lub ściernych detergentów, ponieważ mogą one uszkodzić produkt. Nie myć gorącą wodą o temperaturze powyżej 50°C. Czyszczenie korpusu:

- Korpus należy czyścić suchą lub wilgotną szmatką.
- Nie zanurzać korpusu w wodzie w celu czyszczenia.

Czyszczenie zbiornika wody:

- Można go czyścić suchą lub mokrą ściereczką albo usunąć i spłukać czystą wodą.
- Jeśli nie planujesz używać go przez dłuższy czas, wyczyść wodę wewnątrz.

Czyszczenie dyszy:

- Można go czyścić suchą lub wilgotną szmatką albo wyjąć i przepłukać czystą wodą, a następnie wytrzeć do sucha szmatką.
- Nie zginać, nie ciągnąć ani nie skręcać węża dyszy.
- Eksperci stomatologiczni zalecają wymianę dyszy co 6 miesięcy.

Rozwiązywanie problemów

Problemy	Możliwe przyczyny	Rozwiązanie
Przestał działać	Nowy zakup lub długi czas bez ładowania prowadzi do rozładowania baterii	Please charge for more than 3 hours
Niskie ciśnienie wody podczas użytkowania lub brak strumienia wody	Dysza jest czynnikiem zablokowany Wlot ssący jest zablokowany Od jakiegoś czasu jest zamulony	Replace the nozzle Clean the suction inlet Pull out the nozzle to flush the nozzle hole on the main unit When the tank is full of water, pick it up horizontally and switch it on
Działa tylko przez krótki czas po naładowaniu	Akumulator osiągnął koniec okresu użytkowania Niewystarczający czas ładowania	Skontaktuj się z dystrybutorem Należy ładować przez ponad 3 godziny
Wskaźnik ładowania nie świeci się podczas ładowania	Złącze zasilania nie jest prawidłowo podłączone Obwód ładowania produktu jest uszkodzony	Należy prawidłowo podłączyć zasilanie Skontaktuj się z dystrybutorem

Prawidłowa utylizacja tego produktu



Ten produkt wykorzystuje baterie wielokrotnego ładowania. Po zakończeniu eksploatacji produktu, przed jego wyrzuceniem, należy wyjąć akumulator i podać go recyklingowi lub zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi gospodarki odpadami. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lokalnym działem gospodarki odpadami.

Deklaracja zgodności



Urządzenie zostało zaprojektowane, wyprodukowane i wprowadzone do obrotu zgodnie z wymaganiami dyrektyw "nowego podejścia", w związku z czym produkt został oznaczony znakiem CE i wystawiono dla niego deklarację zgodności, która jest udostępniana organom nadzoru rynku.