

Depilator IPL **Beauty Cool**



Instrukcja obsługi

Droga Klientko/Drogi Kliencie, dziękujemy za zakup naszego produktu.

Poniższa instrukcja została przygotowana w oparciu o najnowszą wiedzę w zakresie kosmologii. Przeprowadzi Cię krok po kroku, przez zabieg depilacji laserowej, tak abyś mogła/mógł w pełni skorzystać z mocy urządzenia i cieszyć się efektami na długo.

O produkcie

Garett Beauty Cool służy do usuwania zbędnego owłosienia w warunkach domowych. To lekki i poręczny aparat, który możesz wszędzie ze sobą zabrać i wykonać zabieg w dogodnym dla siebie czasie, aby nie przerywać serii zabiegów. Zastosowanie technologii **IPL (intensywnego światła pulsacyjnego)** gwarantuje trwałą i bezbolesną depilację. Wiązka światła emitowana przez urządzenie, zostaje pochłonięta przez ciemny barwnik włosa (melaninę), co w efekcie uszkadza i skutecznie opóźnia jego wzrost. System chłodzenia dodatkowo gwarantuje komfort podczas wykonywania zabiegu. W łatwy i bezinwazyjny sposób możesz pozbyć się niechcianego owłosienia z twarzy, pach, nóg, rąk oraz bikini i pleców. Żywotność lampy wynosi 999 999 impulsów, co pozwala na długotrwałe korzystanie z urządzenia, a systematyczne stosowanie zapewnia gładką skórę na lata.

KIERUNKI DZIAŁANIA:

- opóźniony odrost włosów
- redukcja zbędnego owłosienia
- gładka skóra przez wiele miesięcy

Cykl wzrostu włosa składa się z różnych faz. Technologia IPL jest skuteczna tylko pod warunkiem, że włos jest właśnie w fazie wzrostu. Naturalnie w fazie wzrostu znajduje się 80% wszystkich włosów – pozostałe muszą wyrosnąć, aby można było skutecznie je naświetlić. Zalecane jest przeprowadzenie

min. 8 tygodniowego cyklu zabiegów, a następnie okresowe odświeżanie, aby upewnić się, że wszystkie włosy zostały skutecznie naświetlone w najlepszym do tego momencie.

WSKAZANIA:

- nadmierne/niechciane owłosienie (twarz, pachy, nogi, ręce, plecy, bikini)
- ciemne owłosienie – jasna, nieopalona skóra

PRZECIWSKAZANIA:

- jasne, siwe, rude włosy
- choroby nowotworowe
- ciemna skóra, świeża opalenizna, tatuaż, makijaż permanentny, znamiona barwnikowe, po użyciu samoopalacza/balsamów brązujących
- nie stosować na bliznach
- ciąża, karmienie piersią
- przyjmowanie leków i preparatów światłouczulających, np. dziurawiec, polopiryna, ibuprofen, retinoidy/pochodne witaminy A
- włosy osłabione przez depilację woskiem/pęsetą/depilatorem
- kuracja twarzy kwasami owocowymi, zabiegi wybielające
- epilepsja (może nasilać ataki), nadwrażliwość na światło, migreny
- świeże rany, uszkodzenie naskórka, alergię skóry, inne stany zapalne, występujące w obrębie obszaru zabiegowego
- osoby poniżej 18 roku życia oraz osoby o ograniczonej zdolności fizycznej, psychicznej lub czuciowej (chyba że są one nadzorowane)
- nie stosować do skóry głowy, brwi, rzęs, sutków, miejsc intymnych mających kontakt z błonami śluzowymi
- użycie urządzenia w okolicach oczu może spowodować poważne i trwałe uszkodzenie oka, nie należy również patrzeć na źródło światła


- nie stosować na męskiej twarzy lub szyi
- przy wykonywaniu zabiegów na twarzy (u kobiet) nie należy stosować urządzenia powyżej kości policzkowych
- nie stosować na twarzy w czasie opryszczki lub zaraz po jej wyleczeniu

Odcień skóry Kolor włosów						
						
biały/szary 	✗	✗	✗	✗	✗	✗
jasny blond 	✗	✗	✗	✗	✗	✗
rudą 	✗	✗	✗	✗	✗	✗
ciemny blond 	✓	✓	✓	✓	✗	✗
brąz 	✓	✓	✓	✓	✗	✗
ciemny brąz 	✓	✓	✓	✓	✗	✗
czarny 	✓	✓	✓	✓	✗	✗

Funkcje produktu


- **IPL** – wiązka światła emitowanego przez urządzenie zostaje pochłonięta przez melaninę (barwnik we włosie). Dlatego im jaśniejsza skóra, a włos ciemniejszy, tym zabieg skuteczniejszy. Mieszki włosowe zostają osłabione, co powoduje wypadanie włosów, a regularne naświetlanie zapobiega odrastaniu nowych.
- **5 poziomów intensywności pracy** – pozwala na wykonanie zabiegu praktycznie na każdym typie skóry i o różnym progu wrażliwości. Rekomendowane jest używanie danego trybu zgodnie z przeznaczeniem. Nie ma przeciwwskazań do używania trybów do innych części ciała niż jest to zalecane. **Kolejność trybów: od najłagodniejszego - I do najmocniejszego - V.**
- **Tryb auto/manual** – automatyczne bądź ręczne uruchamianie lampy. Zapewnia wygodę i komfort wykonywania zabiegu dostosowanego do potrzeb i indywidualnych odczuć. **Zmiana trybów przez naciśnięcie i przytrzymanie przycisku uruchamiania lampy przez 3 sec.**

Tryb I - FACE Tryb II - BODY Tryb III - ARMPIT Tryb IV - BIKINI Tryb V - BEAUTY

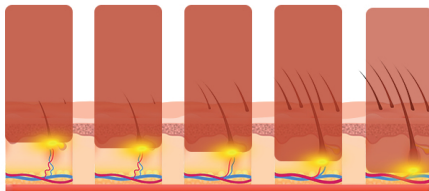

- **Chłodzenie** – ręczna regulacja funkcji pozwala na bezbolesne i komfortowe przeprowadzenie zabiegu.

Opis produktu

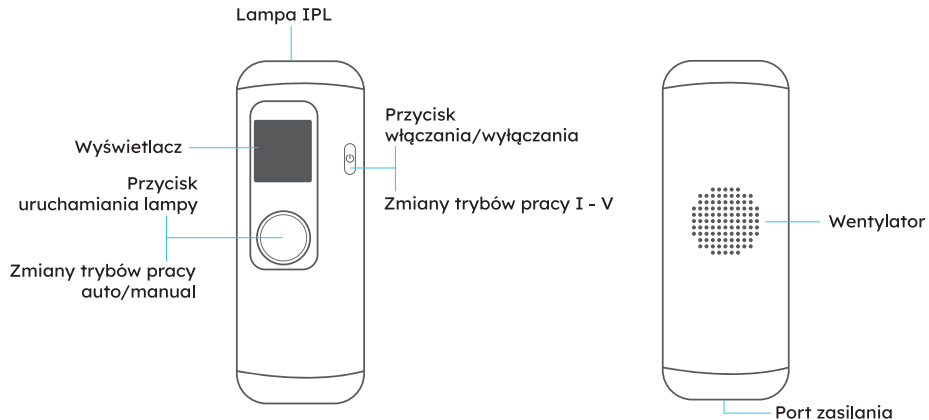

Opis wyświetlacza

Aktualny tryb pracy

Dostępne tryby:

FACE
BODY
ARMPIT
BIKINI
BEAUTY

Face



Tryb pracy: **CHŁODZENIE**



Tryb pracy: **AUTO/MANUAL**

Zmiana trybu przez naciśnięcie przycisku uruchamiania lampy przez 2 sec.

Specyfikacja techniczna


Nazwa produktu: Garrett Beauty Cool	
Powierzchnia emitowania światła: 3 cm ²	Moc: 24 W
Długość wiązki światła: 480 - 1100 nm	Waga produktu (netto): 230 g
Typ zasilania: sieciowe	Wymiary: 163 x 60 x 37 mm

Więcej informacji na temat tego urządzenia dostępnych jest na stronie www.garett.pl. Odwiedź naszą stronę, aby poznać więcej produktów i akcesoriów.

Instrukcja użytkowania

Przed przystąpieniem do zabiegu:

- Należy ogolić obszar ciała poddawany depilacji.
- Skóra musi być oczyszczona z preparatów kosmetycznych i sucha.
- Przed pierwszym zabiegiem, należy wykonać próbę uczuleniową (2 - 3 impulsy świetlne. np. na łydce i obserwować skórę przez 24 godziny, aby sprawdzić czy nie pojawią się żadne reakcje uczuleniowe lub skutki uboczne).

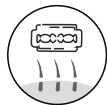

Krok 1

Podłącz zasilacz do urządzenia.



Krok 3

Założ okulary ochronne dołączone do zestawu.



Krok 2

Włącz urządzenie przytrzymując ikonę zasilania przez kilka sekund. Usłyszysz pracę wentylatora. Ustaw moc impulsu, krótko naciskając przycisk zasilania. Masz do wyboru 5 poziomów. Naciśnięcie i przytrzymanie przycisku uruchamiania lampy przez 2 sec. spowoduje zmianę trybu auto/manual.



Krok 4

Przyłóż urządzenie prostopadle do skóry, tak, aby zapewnić głowicy pełny kontakt z jej powierzchnią. Jeśli urządzenie ustawione jest prawidłowo, ekran zacznie migać. Krótko naciśnij główny przycisk urządzenia. Zostanie wyemitowany impuls świetlny i uruchomiony tryb chłodzenia.

W zależności od indywidualnych odczuć możesz zwiększyć/zmniejszyć moc impulsu.

Krok 5

Przesuń głowicę w następne miejsce, które ma zostać poddane depilacji i postępuj analogicznie do poprzedniego punktu.



Nigdy nie używaj urządzenia w tym samym miejscu dwa razy!

Części ciała	Czas pracy	Rekomendowany tryb pracy
pachy	4 - 5 min	Ręczny tryb pracy lampy błyskowej
bikini	8 - 10 min	Ręczny tryb pracy lampy błyskowej
okolice ust	2 - 3 min	Ręczny tryb pracy lampy błyskowej
uda	25 - 30 min	Ręczny tryb pracy lampy błyskowej
łydki	25 - 30 min	Ręczny tryb pracy lampy błyskowej
ramiona	25 - 30 min	Ręczny tryb pracy lampy błyskowej
klatka	25 - 30 min	Ręczny tryb pracy lampy błyskowej
plecy	25 - 30 min	Ręczny tryb pracy lampy błyskowej
brzuch	25 - 30 min	Ręczny tryb pracy lampy błyskowej

Uwagi po zakończeniu zabiegu:

Unikaj wystawiania miejsc, które były poddane depilacji, na działanie słońca. Chroń skórę przed słońcem przez cały okres stosowania depilacji, zwłaszcza pierwsze 48 godzin po ostatniej sesji depilacyjnej. Używaj kremów z filtrem UV. Jeśli czujesz dyskomfort, a twoja skóra jest czerwona i obrzęknięta, zastosuj żel chłodzący po poparzeniach bądź np. **urządzenie do mezoterapii Garrett Beauty Fresh Pro** lub **Garrett Beauty Magic Skin**.


Nie używaj perfum, kremów, balsamów ani dezodorantów/antyperspirantów zapachowych w miejscach, które poddane były depilacji. Bezpośrednio po zabiegu unikaj gorących kąpeli, korzystania z saun i zabiegów drażniących skórę, tj. peelingów, masowania skóry szorstką rękawicą, itp.

Zaleca się wykonywanie zabiegów w odstępach 7-dniowych przez pierwszy miesiąc i 2-tygodniowych przez kolejny miesiąc. W zależności od tempa wzrostu włosów przez okres minimum 8 tygodni. Następnie dla podtrzymania efektów zaleca się wykonać zabieg przypominający co 4 tygodnie. Częstsze wykonywanie depilacji nie przyspieszy oczekiwanych rezultatów, ze względu na fakt, iż czas wzrostu nowych włosów trwa ok. 4 tygodnie.




1 - 4 tydzień, 1 raz na 7 dni

Włosy wypadają naturalnie, zmniejsza się ich liczba.

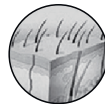


4 - 8 tydzień, 1 raz na 14 dni

Nowe włosy wypadają, ich wzrost zostaje zahamowany.

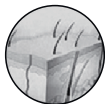

Po 8 tygodniach

Włosy stają się cieńsze i wolniej rosną, pozostawiając gładką i piękną skórę.

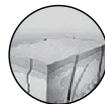

W celu podtrzymania efektów zaleca się wykonanie depilacji co 4 tygodnie.

Uwagi dla użytkowników

1. Przed użyciem tego produktu prosimy o uważne przeczytanie instrukcji i zachowanie jej na przyszłość.
2. Depilator nie jest przeznaczony dla każdego. Najskuteczniejszy jest w przypadku osób o jasnej karnacji i ciemnym owłosieniu.
3. Depilator działa jedynie wtedy, gdy jest podłączony do źródła zasilania. Używaj wyłącznie dedykowanego kabla.
4. Nie należy używać urządzenia oraz próbować go odłączać od gniazda mokrymi rękami.
5. Nie należy niszczyć, modyfikować przewodu zasilającego oraz produktu, ponieważ może to skutkować jego uszkodzeniem.
6. Należy unikać zabrudzeń portu i przewodu zasilającego.
7. Należy zaprzestać użytkowania w przypadku uszkodzenia wtyczki, przewodu zasilającego lub nagrzewania się nawet jednego z elementów.
8. Używanie akcesoriów, które nie są dostarczane z tym produktem, może być niebezpieczne.
9. Nie przechowywać produktu w wilgotnych miejscach, wysokiej temperaturze, ponieważ może to spowodować porażenie prądem lub pożar.
10. W przypadku uszkodzenia należy zaprzestać użytkowania i skontaktować się ze sprzedawcą lub bezpośrednio z serwisem firmy Garrett.
11. Nie należy używać urządzenia w okolicach skóry podrażnionej, uczulonej lub w stanie zapalnym. Patrz – przeciwwskazania.
12. Nie pozostawiaj urządzenia w zasięgu dzieci.
13. Nie dotykaj okna impulsu świetlnego – grozi uszkodzeniem czujnika i oparzeniem skóry.
14. Po zakończeniu zabiegu odłącz urządzenie od źródła zasilania.
15. Nie patrz bezpośrednio na lampę błyskową ani nie stosuj urządzenia w okolicach oczu.
16. Jeśli nie masz pewności czy depilator nadaje się dla Ciebie, skonsultuj się z lekarzem.

17. Przerwij zabieg, jeśli Twoja skóra wykazuje oznaki poparzenia lub pojawią się pęcherze.
18. Czas trwania pracy depilatora w okolicach twarzy nie powinien przekraczać 10 min. Zaleca się 5 sekundowe odstępy między impulsami.
19. Zabezpiecz urządzenie podczas transportu przed wstrząsami czy upadkiem.
20. Niewłaściwe stosowanie urządzenia może grozić uszkodzeniem wzroku lub poparzeniem skóry.
21. Do zabiegów na twarzy urządzenie jest przeznaczone do usuwania owłosienia u kobiet
22. Urządzenie nie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego.

Naprawa i konserwacja

1. W przypadku uszkodzenia lub awarii prosimy o wstrzymanie użytkowania tego produktu i kontakt z serwisem firmy Garrett. Podejmowanie prób własnoręcznej naprawy może prowadzić do uszkodzenia urządzenia oraz skutkuje unieważnieniem gwarancji.
2. Po każdym użyciu należy dokładnie wyczyścić produkt. Nie należy używać w tym celu silnych detergentów i innych stymulantów do czyszczenia produktu.
3. Urządzenie nie jest całkowicie wodoodporne i nie należy myć go wodą.
4. Zaleca się przechowywanie urządzenia w suchym i wentylowanym miejscu, aby przedłużyć jego żywotność.



GARETT SPÓŁKA Z O. O. niniejszym oświadcza, że produkt jest zgodny z Dyrektywą 2014/30/EU, 2014/35/EU oraz 2011/65/EC. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: www.garett.pl



GARETT

Gwarancja i reklamacja

Produkt jest objęty 24 - miesięczną gwarancją producenta. Gwarancja nie obejmuje: wad i uszkodzeń powstałych z winy użytkownika bądź wskutek niewłaściwego użytkowania (niezgodnego z przeznaczeniem), uszkodzeń mechanicznych oraz powstałych wskutek stosowania akcesoriów innych niż dołączone w zestawie, materiałów eksploatacyjnych.

Warunki gwarancji/dane kontaktowe dostępne na stronie:

www.garett.pl

Producent:

GARETT sp. z o.o.

ul. Targowa 18/1413

25 - 520 Kielce

www.garett.pl



Prawidłowe usuwanie produktu
(zużyty sprzęt elektryczny
i elektroniczny)

Oznaczenie umieszczone na produkcie lub w odnoszących się do niego tekstach wskazuje, że po upływie okresu użytkowania nie należy usuwać go z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych. Aby uniknąć szkodliwego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi wskutek niekontrolowanego usuwania odpadów, prosimy o oddzielenie produktu od innego typu odpadów oraz odpowiedzialny recykling w celu promowania ponownego użycia zasobów materialnych jako stałej praktyki. Informacje na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska recyklingu tego produktu użytkownicy w gospodarstwach domowych mogą uzyskać w punkcie sprzedaży detalicznej, w którym dokonali zakupu produktu, lub u organów władz lokalnych. Użytkownicy w firmach powinni skontaktować się ze swoim dostawcą i sprawdzić warunki umowy zakupu. Produktu nie należy usuwać razem z innymi odpadami komercyjnymi.



Wyprodukowano w P.R.C.

v. 1/24

Odwiedź nas:



