

Depilator IPL
Beauty Flash Pro



Instrukcja obsługi

Droga Klientko/Drogi Kliencie, dziękujemy za zakup naszego produktu.

Poniższa instrukcja została przygotowana w oparciu o najnowszą wiedzę w zakresie kosmologii. Przeprowadzi Cię ona krok po kroku, przez zabieg depilacji laserowej, tak abyś mogła/mógł w pełni skorzystać z mocy urządzenia i cieszyć się efektami na długo.

O produkcie

Garett Beauty Flash Pro służy do usuwania zbędnego owłosienia w warunkach domowych. To lekki i poręczny aparat, który możesz wszędzie ze sobą zabrać i wykonać zabieg w dogodnym dla siebie czasie, aby nie przerwać serii zabiegów. Zastosowanie **technologii IPL (intensywnego światła pulsacyjnego)** gwarantuje trwałą i bezbolesną depilację. Wiązka światła emitowanego przez urządzenie, zostaje pochłonięta przez ciemny barwnik włosa (melaninę), co w efekcie uszkadza i skutecznie opóźnia jego wzrost. Urządzenie posiada również tryby przeznaczone do walki z trądzikiem, odmładzania twarzy oraz spłykania zmarszczek do zastosowania profesjonalnego w środowisku opieki zdrowotnej bądź przez profesjonalistów posiadających kwalifikacje w zakresie bezpiecznego i skutecznego stosowania tego urządzenia. Żywotność lampy wynosi 999 999 impulsów, co pozwala na długotrwałe korzystanie z urządzenia, a systematyczne stosowanie zapewnia gładką skórę na lata.

KIERUNKI DZIAŁANIA:

- opóźniony odrost włosów
- redukcja zbędnego owłosienia
- gładka skóra przez wiele miesięcy

Cykl wzrostu włosa składa się z różnych faz. Technologia IPL jest skuteczna tylko pod warunkiem, że włos jest właśnie w fazie wzrostu. Naturalnie w fazie wzrostu znajduje się 80% wszystkich włosów – pozostałe muszą wyrosnąć, aby można było skutecznie je naświetlić. Zalecane jest przeprowadzenie

min. 8 tygodniowego cyklu zabiegów, a następnie okresowe odświeżanie, aby upewnić się, że wszystkie włosy zostały skutecznie naświetlone w najlepszym do tego momencie. Tryb usuwania trądziku i odmłodzenia skóry zaleca się stosować 1 zabieg co 4 tygodnie. Należy pamiętać o unikaniu wykonywania zabiegu w okolicach oczu. Patrz przeciwwskazania.

WSKAZANIA:

nadmierne/niechciane owłosienie (twarz, pachy, nogi, ręce, plecy, bikini)
ciemne owłosienie – jasna, nieopalona skóra

PRZECIWSKAZANIA:

jasne, siwe, rude włosy
choroby nowotworowe
ciemna skóra, świeża opalenizna, tatuaż, makijaż permanentny, znamiona barwnikowe, po użyciu samoopalacza/balsamów brązujących
nie stosować na bliznach
ciąża, karmienie piersią
przyjmowanie leków i preparatów światłoczułych, np. dziurawiec, polopiryna, ibuprofen, retinoidy/pochodne witaminy A
włosy osłabione przez depilację woskiem/pęsetą/depilatorem
kuracja twarzy kwasami owocowymi, zabiegi wybielające
epilepsja (może nasilać ataki), nadwrażliwość na światło, migreny
świeże rany, uszkodzenie naskórka, alergie skóry, inne stany zapalne, występujące w obrębie obszaru zabiegowego
osoby poniżej 18 roku życia oraz osoby o ograniczonej zdolności fizycznej, psychicznej lub czuciowej (chyba że są one nadzorowane)
nie stosować do skóry głowy, brwi, rzęs, sutków, miejsc intymnych mających kontakt z błonami śluzowymi

użycie urządzenia w okolicach oczu może spowodować poważne i trwałe uszkodzenie oka, nie
 należy również patrzeć na źródło światła
 nie stosować na męskiej twarzy lub szyi
 nie stosować na twarzy w czasie opryszczki lub zaraz po jej wyleczeniu

Odcień skóry Kolor włosów						
						
biały/szary 	✗	✗	✗	✗	✗	✗
jasny blond 	✗	✗	✗	✗	✗	✗
rudą 	✗	✗	✗	✗	✗	✗
ciemny blond 	✓	✓	✓	✓	✗	✗
brąz 	✓	✓	✓	✓	✗	✗
ciemny brąz 	✓	✓	✓	✓	✗	✗
czarny 	✓	✓	✓	✓	✗	✗

Funkcje produktu

IPL – wiązka światła emitowanego przez urządzenie, zostaje pochłonięta przez melaninę (barwnik we włosie). Im jaśniejsza skóra, a włos ciemniejszy, tym zabieg będzie skuteczniejszy. Mieszki włosowe zostają osłabione, co powoduje wypadanie włosów, a regularne naświetlanie zapobiega odrastaniu nowych.

9 poziomów intensywności pracy – pozwala na wykonanie zabiegu praktycznie na każdym typie skóry i o różnym progu wrażliwości.

3 tryby pracy:

HR: (Hair Removal) Usuwanie włosów - cykl 8 tygodniowy

SC: (Skin Rejuvenation) Odmładzanie skóry - Redukcja drobnych linii i zmarszczek

1 zabieg na 4 tygodnie

RA: (Improve Acne Marks) Polepszenie skóry po śladach po trądzikowych - Zmniejszenie śladów po trądzikowych - 1 zabieg na 4 tygodnie

Zakres pracy:

HR: 5 - 16,8 J

SC: 5 - 12 J

RA: 5 - 11,6 J


Tryb auto/manual - automatyczne bądź ręczne uruchamianie lampy. Zapewnia wygodę i komfort wykonywania zabiegu dostosowanego do potrzeb i indywidualnych odczuć. Zmiana trybów przez naciśnięcie i przytrzymanie przycisku uruchamiania lampy przez 3 sec.

Zasada usuwania owłosienia i odmładzania skóry za pomocą urządzeń do usuwania owłosienia jest osiągana głównie poprzez efekty fototermiczne i fotochemiczne. Urządzenia do usuwania owłosienia zazwyczaj wykorzystują technologię IPL (Intense Pulsed Light), która emituje impulsy światła o wysokiej intensywności, które mogą przenikać przez powierzchnię skóry i docierać do mieszków włosowych, powodując ich nagrzewanie i niszczenie, osiągając w ten sposób efekt usuwania owłosienia.


Podczas procesu usuwania włosów światło IPL generuje również pewien efekt fototermiczny na skórze, wspomagając krążenie krwi i metabolizm, poprawiając w ten sposób elastyczność skóry, dzięki czemu skóra staje się gładza.

Ponadto światło IPL może stymulować regenerację białek kolagenowych i włókien elastycznych w skórze, redukując drobne linie i zmarszczki, dzięki czemu skóra staje się jędrniejsza i odmłodzona.

Opis produktu

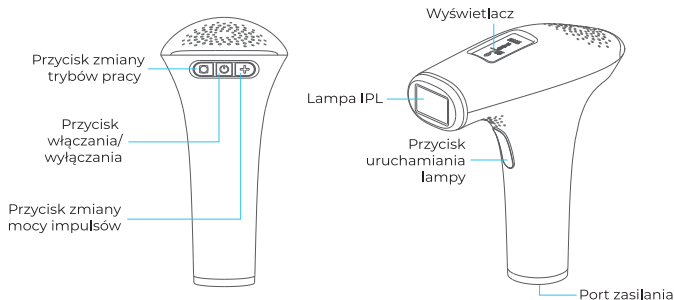

Opis wyświetlacza

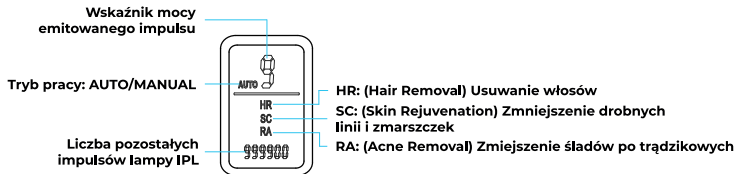

Specyfikacja techniczna

Nazwa produktu: Garrett Beauty Flash Pro	
Powierzchnia emitowania światła: 5 cm ²	Moc: 36 W
Długość wiązki światła: 640 - 1200 nm	Waga produktu (netto): 295 g
Typ zasilania: sieciowe	Wymiary: 155 x 172 x 76 mm

Więcej informacji na temat tego urządzenia dostępnych jest na stronie www.garett.pl. Odwiedź naszą stronę, aby poznać więcej produktów i akcesoriów.


Instrukcja użytkowania

Przed przystąpieniem do zabiegu:

Należy ogolić obszar ciała poddawany depilacji.

Skóra musi być oczyszczona z preparatów kosmetycznych i sucha.

Przed pierwszym zabiegiem, należy wykonać próbę uczuleniową (2 - 3 impulsy świetlne. np. na łydce i obserwować skórę przez 24 godziny, aby sprawdzić czy nie pojawią się żadne reakcje uczuleniowe lub skutki uboczne).

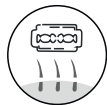

Krok 1

Podłącz zasilacz do urządzenia.



Krok 3

Załóż okulary ochronne dołączone do zestawu.



Krok 2

Włącz urządzenie przytrzymując ikonę zasilania przez kilka sekund. Usłyszysz pracę wentylatora. Ustaw tryb w jakim chcesz pracować : HR, SC, RA przy użyciu przycisku zmiany trybu oraz moc impulsu, krótko naciskając przycisk „+” .

Masz do wyboru 9 poziomów. Na ekranie wyświetla się liczba dostępnych impulsów.



Krok 4

Przyłóż urządzenie prostopadłe do skóry, tak, aby zapewnić głowicy pełny kontakt z jej powierzchnią. Jeśli urządzenie ustawione jest prawidłowo, ekran zacznie migać.

Krótko naciśnij główny przycisk urządzenia. Zostanie wyemitowany impuls świetlny - możesz poczuć ciepło.

W zależności od indywidualnych odczuć możesz zwiększyć/zmniejszyć moc impulsu.

Krok 5

Przesuń głowicę w następne miejsce, które ma zostać poddane zabiegowi i postępuj analogicznie do poprzedniego punktu.



Nigdy nie używaj urządzenia w tym samym miejscu dwa razy!

Części ciała	Czas pracy	Rekomendowany tryb pracy
pachy	4 - 5 min	Ręczny tryb pracy lampy błyskowej
bikini	8 - 10 min	Ręczny tryb pracy lampy błyskowej
okolice ust	2 - 3 min	Ręczny tryb pracy lampy błyskowej
uda	25 - 30 min	Ręczny tryb pracy lampy błyskowej
łydki	25 - 30 min	Ręczny tryb pracy lampy błyskowej
ramiona	25 - 30 min	Ręczny tryb pracy lampy błyskowej
klatka	25 - 30 min	Ręczny tryb pracy lampy błyskowej
plecy	25 - 30 min	Ręczny tryb pracy lampy błyskowej
brzuch	25 - 30 min	Ręczny tryb pracy lampy błyskowej

Uwagi po zakończeniu zabiegu:

Unikaj wystawiania miejsc, które były poddane depilacji, na działanie słońca. Chroń skórę przed słońcem przez cały okres stosowania depilacji, zwłaszcza pierwsze 48 godzin po ostatniej sesji depilacyjnej. Używaj kremów z filtrem UV. Jeśli czujesz dyskomfort, a twoja skóra jest czerwona i obrzęknięta, zastosuj żel chłodzący po poparzeniach bądź np. **urządzenie do mezoterapii Garrett Beauty Fresh Pro** lub **Garrett Beauty Magic Skin**.


Nie używaj perfum, kremów, balsamów ani dezodorantów/antyperspirantów zapachowych w miejscach, które poddane były depilacji. Bezpośrednio po zabiegu unikaj gorących kąpeli, korzystania z saun i zabiegów drażniących skórę, tj. peelingów, masowania skóry szorstką rękawicą, itp.

W celu usunięcia włosów zaleca się wykonywanie zabiegów w odstępach 7 - dniowych przez pierwszy miesiąc i 2 - tygodniowych przez kolejny miesiąc, czyli w zależności od tempa wzrostu włosów przez okres minimum 8 tygodni. Następnie dla podtrzymania efektów zaleca się wykonać zabieg przypominający co 4 tygodnie. Częstsze wykonywanie depilacji nie przyspieszy oczekiwanych rezultatów, ze względu na fakt, iż czas wzrostu nowych włosów trwa ok. 4 tygodnie.




1 - 4 tydzień, 1 raz na 7 dni

Włosy wypadają naturalnie, zmniejsza się ich liczba.

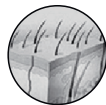


4 - 8 tydzień, 1 raz na 14 dni

Nowe włosy wypadają, ich wzrost zostaje zahamowany.

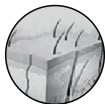

Po 8 tygodniach

Włosy stają się cieńsze i wolniej rosną, pozostawiając gładką i piękną skórę.

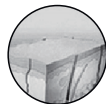

W celu podtrzymania efektów zaleca się wykonanie depilacji co 4 tygodnie.

Zabieg zmniejszania drobnych linii i zmarszczek zaleca się wykonywać 1 raz na 4 tygodnie.
Zabieg zmniejszania śladów po trądzikowych zaleca się wykonywać 1 raz na 4 tygodnie.

Uwagi dla użytkowników

1. Przed użyciem tego produktu prosimy o uważne przeczytanie instrukcji i zachowanie jej na przyszłość.
2. Depilator nie jest przeznaczony dla każdego. Najskuteczniejszy jest w przypadku osób o jasnej karnacji i ciemnym owłosieniu.
3. Depilator działa jedynie wtedy, gdy jest podłączony do źródła zasilania. Używaj wyłącznie dedykowanego kabla.
4. Nie należy używać urządzenia oraz próbować go odłączać od gniazda mokrymi rękami.
5. Nie należy niszczyć, modyfikować przewodu zasilającego oraz produktu, ponieważ może to skutkować jego uszkodzeniem.
6. Należy unikać zabrudzeń portu i przewodu zasilającego.
7. Należy zaprzestać użytkowania w przypadku uszkodzenia wtyczki, przewodu zasilającego lub nagrzewania się nawet jednego z elementów.
8. Używanie akcesoriów, które nie są dostarczane z tym produktem, może być niebezpieczne.
9. Nie przechowywać produktu w wilgotnych miejscach, wysokiej temperaturze, ponieważ może to spowodować porażenie prądem lub pożar.
10. W przypadku uszkodzenia należy zaprzestać użytkowania i skontaktować się ze sprzedawcą lub bezpośrednio z serwisem firmy Garrett.
11. Nie należy używać urządzenia w okolicach skóry podrażnionej, uczulonej lub w stanie zapalnym. Patrz – przeciwwskazania.
12. Nie pozostawiaj urządzenia w zasięgu dzieci.
13. Nie dotykaj okna impulsu świetlnego – grozi uszkodzeniem czujnika i oparzeniem skóry.
14. Po zakończeniu zabiegu odłącz urządzenie od źródła zasilania.
15. Nie patrz bezpośrednio na lampę błyskową ani nie stosuj urządzenia w okolicach oczu.
16. Jeśli nie masz pewności czy depilator nadaje się dla Ciebie, skonsultuj się z lekarzem.

17. Przerwij zabieg, jeśli Twoja skóra wykazuje oznaki poparzenia lub pojawią się pęcherze.
18. Czas trwania pracy depilatora w okolicach twarzy nie powinien przekraczać 10 min. Zaleca się 5 sekundowe odstępy między impulsami.
19. Zabezpiecz urządzenie podczas transportu przed wstrząsami czy upadkiem.
20. Niewłaściwe stosowanie urządzenia może grozić uszkodzeniem wzroku lub poparzeniem skóry.
21. Do zabiegów na twarzy urządzenie jest przeznaczone do usuwania owłosienia u kobiet
22. Urządzenie nie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego.

Ad. 22

Urządzenie w trybie usuwania włosów jest przeznaczone do użytku domowego. Tryby zmniejszania drobnych linii i zmarszczek oraz zmniejszania śladów po trądzikowych jest przeznaczone o użytku profesjonalnego.

Naprawa i konserwacja

1. W przypadku uszkodzenia lub awarii prosimy o wstrzymanie użytkowania tego produktu i kontakt z serwisem firmy Garrett. Podejmowanie prób własnoręcznej naprawy może prowadzić do uszkodzenia urządzenia oraz skutkuje unieważnieniem gwarancji.
2. Po każdym użyciu należy dokładnie wyczyścić produkt. Nie należy używać w tym celu silnych detergentów i innych stymulantów do czyszczenia produktu.
3. Urządzenie nie jest całkowicie wodoodporne i nie należy myć go wodą.
4. Zaleca się przechowywanie urządzenia w suchym i wentylowanym miejscu, aby przedłużyć jego żywotność.



GARETT SPÓŁKA Z O. O. niniejszym oświadcza, że produkt jest zgodny z Dyrektywą 2014/30/EU, 2014/35/EU oraz 2011/65/EC. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: www.garett.pl



GARETT

Gwarancja i reklamacja

Produkt jest objęty 24 - miesięczną gwarancją producenta. Gwarancja nie obejmuje: wad i uszkodzeń powstałych z winy użytkownika bądź wskutek niewłaściwego użytkowania (niezgodnego z przeznaczeniem), uszkodzeń mechanicznych oraz powstałych wskutek stosowania akcesoriów innych niż dołączone w zestawie, materiałów eksploatacyjnych.

Warunki gwarancji/dane kontaktowe dostępne na stronie:

www.garett.pl

Producent:

GARETT sp. z o.o.
ul. Targowa 18/1413
25 - 520 Kielce

www.garett.pl



Prawidłowe usuwanie produktu
(zużyty sprzęt elektryczny
i elektroniczny)

Oznaczenie umieszczone na produkcie lub w odnoszących się do niego tekstach wskazuje, że po upływie okresu użytkowania nie należy usuwać go z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych. Aby uniknąć szkodliwego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi wskutek niekontrolowanego usuwania odpadów, prosimy o oddzielenie produktu od innego typu odpadów oraz odpowiedzialny recykling w celu promowania ponownego użycia zasobów materialnych jako stałej praktyki. Informacje na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska recyklingu tego produktu użytkownicy w gospodarstwach domowych mogą uzyskać w punkcie sprzedaży detalicznej, w którym dokonali zakupu produktu, lub u organów władz lokalnych. Użytkownicy w firmach powinni skontaktować się ze swoim dostawcą i sprawdzić warunki umowy zakupu. Produktu nie należy usuwać razem z innymi odpadami komercyjnymi.



Wyprodukowano w P.R.C.
v. 1/24