


Ulike

Air Series

Depilator IPL Ulike Air3 UI06

Instrukcja obsługi

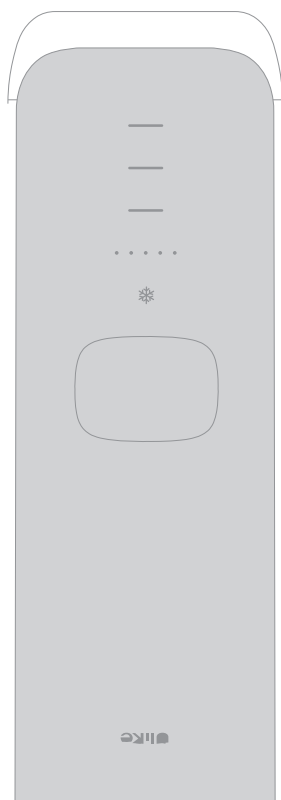

Dziękujemy za zakup tego produktu.

Aby ułatwić używanie, proszę uważnie przeczytać niniejszą instrukcję i przechowywać ją w odpowiednim miejscu. Zdjęcia w niniejszej instrukcji mają charakter poglądowy.

Środki ostrożności

Szczególna uwaga

- Przed użyciem nie należy stosować żadnych żeli ani środków pielęgnacyjnych (żelu aloesowego itp.).
- Należy pamiętać, aby montować i używać produktu zgodnie z przepisami zawartymi w instrukcji obsługi.
- Proszę uważnie przeczytać instrukcję obsługi i przechowywać ją na przyszłość.

⊗ **NIEBEZPIECZEŃSTWO:** Zawartość związana z obrażeniami ciała w wyniku nieprawidłowej obsługi

! **OSTRZEŻENIE:** Niebezpieczne treści związane z nieprawidłową obsługą

⚠ **UWAGA:** Treści związane z bezpieczeństwem osobistym lub uszkodzeniem mienia w wyniku nieprawidłowego działania

Niebezpieczeństwo 

- Nie należy używać urządzenia bezpośrednio przy oczach, w przeciwnym razie silne źródło światła emitowane przez produkt może spowodować uszkodzenie oczu.

- W normalnych warunkach pracy nie należy bezpośrednio montować wylotu bocznego, w przeciwnym razie temperatura może spowodować oparzenia skóry.

- W normalnych warunkach pracy nie należy wkładać do produktu żadnych przedmiotów, w przeciwnym razie może to spowodować uszkodzenie ciała ludzkiego.

- Obecnie nie są dostępne dane dotyczące stosowania u dzieci poniżej 15 roku życia, dlatego dzieciom poniżej 15 roku życia nie wolno dotykać ani używać tego urządzenia. Podczas używania produktu należy przechowywać go z dala od dzieci poniżej 15 roku życia.

Ostrzeżenia:

- W przypadku nieprzestrzegania instrukcji mogą wystąpić działania niepożądane.

- Nie należy stosować antyperspirantu bezpośrednio po napromieniowaniu pach.

- Aby uniknąć poparzeń i awarii podczas używania, proszę regularnie sprawdzać i czyścić zabrudzenia portu napromieniania.

- Nie umieszczaj portu napromieniania w pobliżu przedmiotów, które łatwo ulegają roz magnesowaniu, w przeciwnym razie może to spowodować awarię i uszkodzenie.

- Nie należy używać produktu, gdy otwór wentylacyjny jest zablokowany, w przeciwnym razie może to spowodować dym i pożar.
- Aby zapewnić prawidłowe działanie produktu, proszę nie kierować portu promieniowania w stronę czarnych przedmiotów.
- Aby uniknąć zaczernienia, odbarwienia i pęknięcia, nie należy napromieniowywać ubrań, włosów i innych przedmiotów.
- Nie używaj produktu na zwierzętach domowych, w przeciwnym razie może to spowodować obrażenia.
- Produkt może powodować uszkodzenia oczu (potencjalnie ślepotą) lub skóry, jeżeli instrukcje nie będą przestrzegane. Proszę przeczytać i przestrzegać instrukcji.
- Nie przedłużaj użycia i nie używaj ponownie produktu na tej samej powierzchni ciała, unikaj nadmiernego używania, w tym nadmiernego stosowania impulsów i/lub nadmiernej częstotliwości, co może spowodować uszkodzenie skóry.
- Niewłaściwe użycie może spowodować uszkodzenie oczu, proszę chronić oczy. Nie używaj produktu powyżej powiek lub w pobliżu oczu.
- Nie należy ignorować mechanizmów bezpieczeństwa właściwych dla produktu, na przykład, prawidłowe noszenie gogli, prawidłowe dopasowanie do skóry, itd.
- Przed użyciem proszę wykonać test skórny i sprawdzić stan skóry po 2 godzinach testu. Można używać produktu, jeżeli w miejscu napromieniowanym nie występują żadne nieprawidłowości (zaczerwienienia lub pęcherze).
- Podczas używania proszę założyć gogle i umieścić okienko do depilacji blisko skóry w celu wykonania zabiegu depilacji.
- Po użyciu proszę wytrzeć włosy i produkty do pielęgnacji skóry dołączone do depilatora, aby uniknąć awarii i uszkodzenia skóry.
- Proszę postępować zgodnie z instrukcją, prawidłowo zakładać gogle, aby używać produktu i uniknąć silnej stymulacji świetlnej.
- Proszę ustawić intensywność naświetlania odpowiednio do stanu skóry i upewnić się, że po raz pierwszy używamy urządzenia od 1. poziomu.
- Jeśli po użyciu skóra jest lekko gorąca i czerwona, jest to normalne.
- Po włączeniu produktu nie można pozostawiać go bez nadzoru, a po użyciu należy go wyłączyć na czas.
- Oczyszczyć skórę, aby upewnić się, że nie ma na niej pozostałości włosów, jest całkowicie sucha i wolna od substancji olejowych i plam.
- Jeżeli różnica temperatur środowiska pracy wynosi więcej niż 20 stopni (z otoczenia o niskiej temperaturze do otoczenia o wysokiej temperaturze lub odwrotnie), proszę wyłączyć urządzenie i odczekać około 2 godzin, zanim ponownie będą Państwo go używać.
- Nie używaj produktu w pobliżu przedmiotów łatwopalnych i wybuchowych (w tym opryskiwaczy, stacji benzynowych itp.), co może spowodować pożar, porażenie prądem i inne niebezpieczeństwa.
- Temperatura otoczenia depilatora wynosi 0-45°C. Przed użyciem proszę sprawdzić pomieszczenie.
- Proszę unikać bezpośredniego promieniowania ultrafioletowego na napromieniowaną część ciała w ciągu 24 godzin po depilacji.

- Jeśli wbudowany wentylator nie działa po włączeniu produktu (brak szumu), proszę go nie używać, w przeciwnym razie może on spowodować dym, pożar itp.
- Nie należy wystawiać produktu na działanie promieni słonecznych ani umieszczać go przez dłuższy czas w świetle ultrafioletowym, co spowoduje poważne uszkodzenie produktu.
- Jeżeli wbudowany wentylator nie działa po włączeniu zasilania (nie słychać szumu), nie należy go używać, w przeciwnym razie może spowodować awarie, takie jak dym, pożar itp.
- Nie należy używać produktu w wannie, pod prysznicem lub w innych miejscach w pobliżu źródła wody.
- Proszę przechowywać produkt i zasilacz w suchym miejscu.
- Podczas używania produktu nie jest wskazane używanie go przez długi czas. Po użyciu przez 1 godzinę proszę wyłączyć go na 10 minut.
- Jeżeli obudowa, obiektyw lub zasilacz są uszkodzone, proszę natychmiast zaprzestać używania produktu. Nie należy naprawiać produktu bez upoważnienia. Naprawa musi być przeprowadzona serwis.



Nieodpowiednie sytuacje

- Używanie produktu może powodować dyskomfort lub negatywne skutki u osób z alergiami, osób z chorobami skóry i alergicznym zapaleniem skóry, osób o wrażliwej skórze itp. Jeżeli podczas używania produktu wystąpią jakiegokolwiek działania niepożądane, należy natychmiast zaprzestać jego używania.
- Nie należy używać produktu na obszarach o naruszonej integralności skóry (np. oparzenia, pęcherze, skaleczenia, rany, aktywne choroby skóry lub infekcje).
- Jeżeli przyjmują Państwo leki światłoczułe w ramach ważnych terapii, przed użyciem produktu konieczna jest konsultacja lekarska, w przeciwnym razie używanie produktu może spowodować uszkodzenie skóry.
- Produktu nie mogą używać kobiety w ciąży, kobiety karmiące, kobiety w okresie menstruacji, osoby posiadające blizny na ciele, cukrzycę, skórę delikatną i wrażliwą na światło.
- Zabronione jest używanie produktu osobom, które mają ciężkie choroby serca, umiarkowane lub ciężkie nadciśnienie, nowotwory złośliwe, zapalenie mieszków włosowych, zakaźne choroby skóry, poparzoną skórę i zaburzenia antykoagulacyjne.
- Nie używaj produktu w przypadku zaburzeń metabolizmu kolagenu, w tym posiadania blizn i słabego gojenia się ran w przeszłości.
- Nie używaj produktu, jeśli twoja skóra jest wrażliwa na światło i skłonna do wysypek lub alergii.
- Nie używaj produktu, jeśli napromieniowane miejsce jest zakażone, posiadasz opryszczkę pospolitą (herpes simplex), zmiany skórne i krwiaki, choroby związane z odpowiedzią immunologiczną (w tym HIV, toczeń rumieniowaty, porfiria itp.), zaburzenia krwawienia. Nie używaj produktu jeśli używasz izotretynoiny, kwasu owocowego (AHA), kwasu salicylowego (BHA) lub kwasu azaliowego.

- Prosimy o ostrożne stosowanie tego produktu przez osoby, które stosowały chemiczne usuwanie włosów w ciągu ostatnich 30 dni, osoby, które w krótkim czasie używały produktów do wybielania skóry lub osoby, które używały składników witaminy A.
- Nie należy używać produktu jednocześnie z produktami zawierającymi olejki eteryczne. Proszę upewnić się, że skóra w obszarze naświetlania jest czysta i sucha, nie używaj balsamów, smarów i innych kosmetyków.
- Jeżeli powierzchnia skóry nie jest czysta i sucha, może to wpłynąć na wrażenia z używania produktu, a nawet spowodować jej uszkodzenie.
- Zabronione jest używanie produktu podczas przyjmowania leków z grupy aspiryny, używania leków immunosupresyjnych, izotretynoiny i innych leków. Zabronione jest używanie produktu w trakcie stosowania leków wrażliwych na światło (takich jak tetracyklina i sulfa).
- Zabronione jest używanie produktu przez osoby, które w ostatnim czasie wstrzykiwały sobie wypełniacze i toksyny.

Nie używaj produktu na następujących częściach ciała lub w następujących warunkach:


- Wewnątrz ust, na genitaliach, na błonach śluzowych itp.
- Na częściach ciała po zabiegach chirurgii plastycznej
- Wokół oczu
- Na głowie
- W okolicach trądziku
- Na plamach i znamionach
- Na brwiach
- Na uszach
- Na sutkach i w okolicach
- Wewnątrz pępka
- Wokół dużych żył
- Na tatuażu

Uwaga: Ta lista nie jest wyczerpująca, jeśli nie jesteś pewien, czy możesz używać tego produktu, wskazana jest konsultacja z lekarzem.

Po użyciu produktu mogą wystąpić następujące niepożądane działania:

- Oparzenia skóry
- Miejscowe zaczerwienienie i obrzęk
- Obrzęk i pęcherze mieszków włosowych
- Erytmia i pigmentacja
- Swędzenie i ból
- Blizna

Uwaga: Lista nie jest wyczerpująca; w przypadku wystąpienia innych dolegliwości zaleca się konsultację z lekarzem.


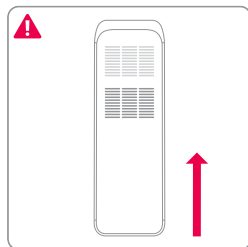


Wprowadzenie do produktu


- Produkt, w przeciwieństwie do urządzeń do depilacji gorącym światłem wkleśnym, wykorzystuje technologię kosmetycznego usuwania włosów metodą zamrażania. Innowacyjna technologia szafirowego chłodzenia skóry skutecznie chłodzi skórę, redukuje ciepło skóry, zapobiega poparzeniom skóry i lepiej ją chroni. Podczas usuwania włosów, szafirowa głowica płaska uciska skórę i dociska mieszki włosowe, aby przybliżyć ich korzenie do obszaru o wyższej energii i poprawić efektywność absorpcji energii przez mieszki włosowe. Szafirowa głowica płaska jest łatwa do czyszczenia i lepiej przepuszcza światło, zapewniając lepszy efekt usuwania włosów.

- Produkt posiada zintegrowaną głowicę lampy o długiej żywotności, która nie wymaga wymiany i nadaje się do wielu obszarów (takich jak twarz, usta, pachy, linie bikini, ręce, nogi itp.), co pozwala zaoszczędzić na kosztach wymiany głowicy lampy. Nie muszą Państwo często kupować akcesoriów ani martwić się o ewentualne dodatkowe koszty. Ponadto posiada doskonały system filtracji, który bardzo dobrze filtruje nieefektywne krótkie fale i szkodliwe światło.


Zawartość opakowania

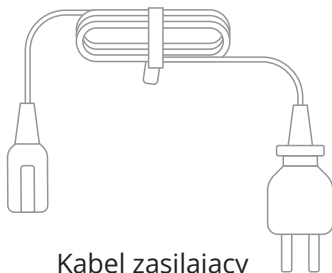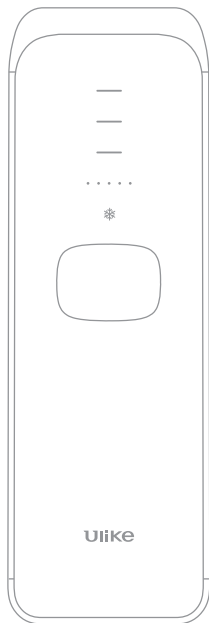

Kabel zasilający

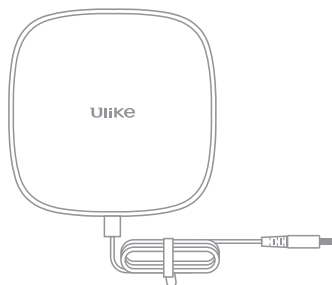


Adapter

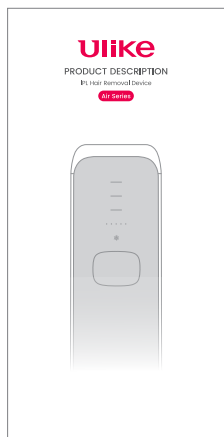

Instrukcja obsługi




Okulary ochronne


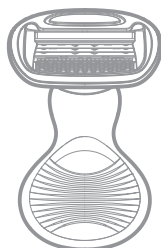


Żyłetka

Opis produktu

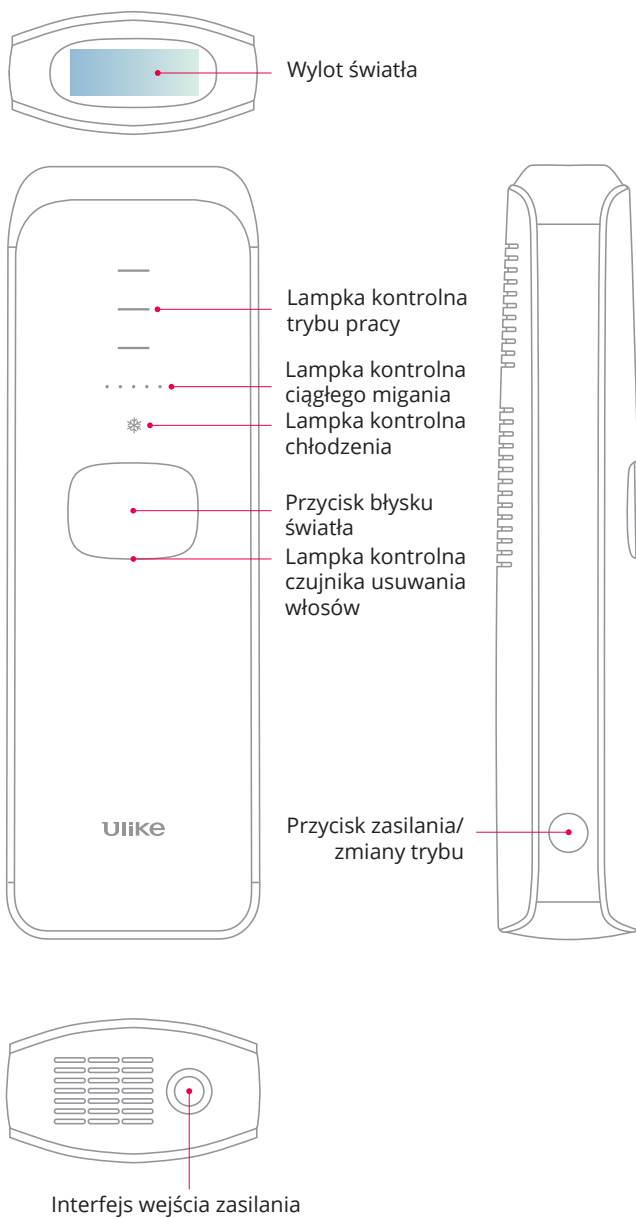

Przygotowanie przed użyciem

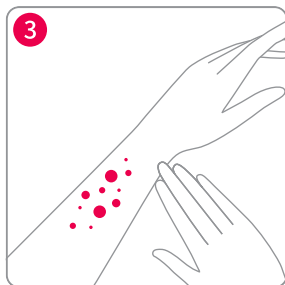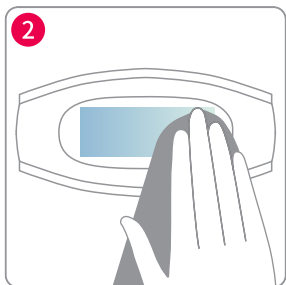

1) Dokładnie oczyścić skórę, aby upewnić się, że nie ma na niej włosów ani substancji oleistych (perfum, balsamów, dezodorantów, filtrów przeciwsłonecznych itp.) i jest całkowicie sucha.

2) Upewnij się, że w porcie napromieniowywania nie ma brudu, włosów lub innych zanieczyszczeń i że nie jest on uszkodzony lub nie ma innych nieprawidłowych warunków. W przypadku zabrudzenia, proszę je wyczyścić, aby uniknąć awarii, pogorszenia jakości i problemów ze skórą.

3) Przed użyciem produktu należy wykonać test skórny i sprawdzić stan skóry po 2 godzinach. Można używać produktu, jeżeli na napromieniowanym obszarze nie wystąpią żadne nieprawidłowości (zaczerwienienie lub pęcherze).

Intensywność napromieniowania

Produkt posiada trzy tryby o różnej intensywności energii dla różnych stopni wrażliwości skóry i różnych kolorów włosów. Poniżej wskazano zalecane sposoby użycia:

Tryb Soft: Odpowiedni dla wrażliwych obszarów, takich jak wąsik i części intymne, oraz dla osób o ciemniejszej i wrażliwej skórze itp.

Tryb Body: Odpowiedni dla obszarów tułowia osób o gęstym owłosieniu i średniej lub mniejszej szorstkości i twardości włosów, takich jak ręce i nogi, itp.

Tryb Powerful: Odpowiedni dla obszarów tułowia osób z gęstym owłosieniem (Ze względu na wyższą energię emitowaną przez tryb Powerful, mogą Państwo odczuwać wyższą temperaturę niż w przypadku używania trybu Soft i Body, ale nie jest to wada).

Proszę zapoznać się z poniższą tabelą, aby wybrać tryb odpowiedni dla Państwa skóry i koloru włosów:

Kolor skóry Kolor włosów						
	Biały	Beige	Jasny brąz	Średni brąz	Ciemny brąz	Ciemny brąz i ciemniejszy
Biały/siwy	×	×	×	×	×	×
Rudy	×	×	×	×	×	×
Jasny blond	×	×	×	×	×	×
Ciemny blond	二/三	二/三	二/三	一/二	×	×
Brązowy	二/三	二/三	二/三	一/二	×	×
Ciemny brąz	二/三	二/三	二/三	一/二	×	×
Czarny	二/三	二/三	二/三	一/二	×	×


(Uwaga: X oznacza nie dotyczy)

Jeżeli odczuwasz ból lub dyskomfort, proszę używać innego trybu (jeżeli odczuwasz ciepło lub łagodne ciepło bez bólu, jest to normalne). Osoby o ciemnym kolorze skóry są podatne na alergie skórne, dlatego wskazany jest tryb Soft lub Body. Przy pierwszym użyciu produktu proszę używać trybu Soft.


Użycie




1. Użyj żyłетки do włosów, aby zgolić włosy. Proszę używać jej razem z pianką lub podczas kąpieli i używać jej ostrożnie, aby uniknąć zadrapań.

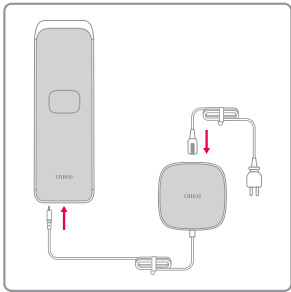


2. Podłącz przewód zasilający do adaptera i podłącz przewód zasilający do złącza wejścia zasilania z tyłu produktu.

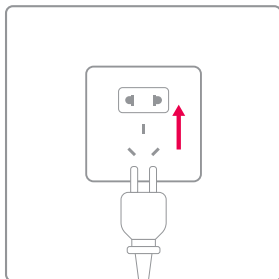


3. Po podłączeniu kabla zasilającego do interfejsu wejścia zasilania, włóż wtyczkę do gniazda zasilania.

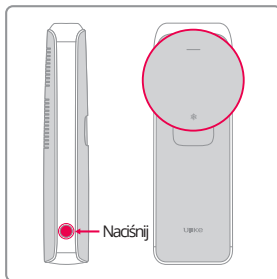


4. Naciśnij przycisk zasilania z boku jednostki głównej, aby włączyć produkt. Poziom i tryb chłodzenia zostaną wyświetlone po włączeniu produktu.

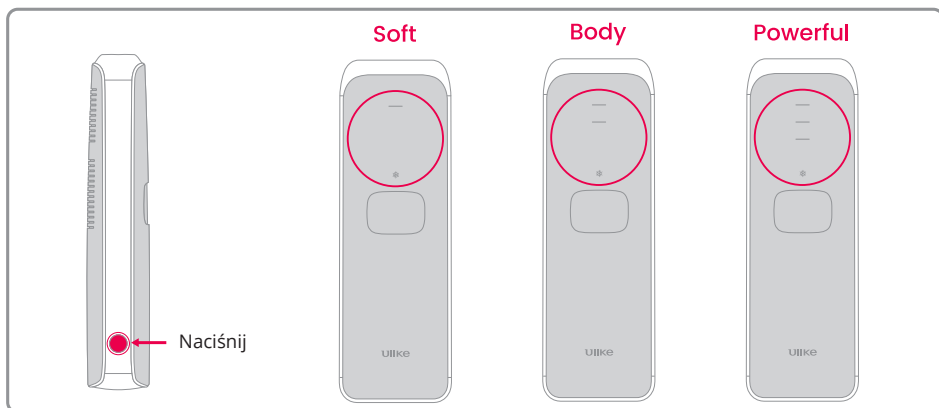


5. Produkt posiada trzy tryby. Należy nacisnąć na przycisk zasilania/zmiany trybu z boku urządzenia głównego, aby włączyć urządzenie i zmienić żądany tryb pracy depilatora. Kolejność poszczególnych trybów jest następująca: Tryb Soft - tryb Body - tryb Powerful - tryb Body - tryb Soft.

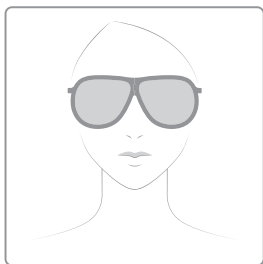

6. Przed goleniem włosów należy założyć okulary ochronne, aby chronić oczy.

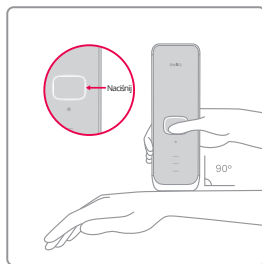

7. Umieść wylot światła na skórze, która ma być poddana zabiegowi i przyłóż go pionowo. Zaświeci się kontrolka czujnika usuwania włosów, wskazując, że jest on w pełni kontaktowy. Naciśnij migający przycisk, aby rozpocząć operację usuwania włosów. Jeśli nie zapali się białe światło, oznacza to, że głowica lampy nie przylega całkowicie do skóry, a urządzenie nie będzie emitować światła.

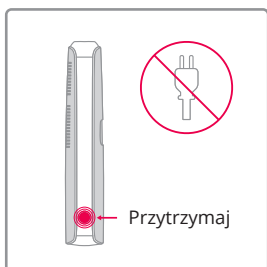


8. Po zakończeniu depilacji należy nacisnąć i przytrzymać przycisk zasilania przez 1s, aby wyłączyć urządzenie (nigdy nie wyciągaj wtyczki bez wyłączenia urządzenia, aby uniknąć uszkodzenia).

Tryby

- Tryb ciągłego błysku (odpowiedni dla dużych powierzchni, takich jak ręce i nogi): Umieść wylot lampy na obszarze, który ma być poddany zabiegowi i pozwól, aby w pełni zetknął się ze skórą. W tym czasie zaświeci się lampka kontrolna czujnika usuwania włosów, wskazując, że głowica lampy w pełni styka się ze skórą. Przytrzymaj migający przycisk, zaświeci się lampka kontrolna trybu ciągłego i zostanie on włączony. Proszę utrzymywać wylot światła w kontakcie ze skórą. Błyski będą emitowane w określonych odstępach czasu. Proszę utrzymywać produkt w ruchu. Proszę poruszać nim dwa razy w przód i w tył na danym obszarze, aby upewnić się, że obszar został równomiernie pokryty i uniknąć brakującego światła.


Wskazówka: Można dostosować prędkość poruszania depilatora do prędkości migania, aby produkt mógł pokryć obszar bardziej równomiernie. Częstotliwość błysków jest wyższa w trybie Soft i nieco niższa w trybie Body. Ponadto, im wyższy poziom, tym wolniej będzie emitowane światło.

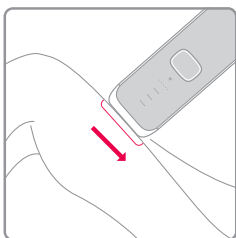

- Tryb pojedynczego błysku (odpowiedni do małych powierzchni, takich jak palce i wąsik):

Umieść wylot lampy na obszarze, który ma być poddany zabiegowi i pozwól mu na pełny kontakt ze skórą. W tym czasie zaświeci się lampka kontrolna czujnika usuwania włosów, wskazując, że głowica lampy w pełni styka się ze skórą. Naciśnij migający przycisk, aby rozpocząć usuwanie włosów. Przesuń głowicę lampy na następny obszar. Zaczekaj, aż zaświeci się białe światło wskaźnika czujnika usuwania włosów, a następnie ponownie naciśnij przycisk migania, aby powtórzyć powyższą operację w kolejności.


Wskazówka: Jeśli podczas procesu depilacji poczujesz nadmierne ciepło na skórze, przed ponownym użyciem produktu należy przerwać na kilka sekund, aby ostudzić wylot światła.

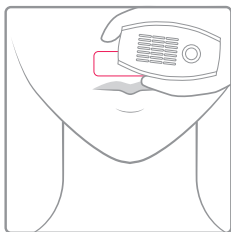

Wskazówki dotyczące używania produktu

- Z powodu ciągłych błysków, produkt będzie stale wytwarzał ciepło. Aby utrzymać efekt chłodzenia, wskazane jest używanie głowicy lampy szafirowej do schłodzenia lecznego obszaru przez około 30 sekund po usunięciu włosów, a następnie wykonanie depilacji na kolejnym obszarze. To ponownie schłodzi skórę i zapewni lepszy efekt chłodzenia.

- Mocno dociśnij głowicę lampy do skóry, aby zapewnić pełną energię głowicy lampy, co zapewni lepsze efekty depilacji. Poza tym, gdy głowica szafirowa dotyka skóry, może ją wcześniej schłodzić, zmniejszyć ciepłotę skóry i lepiej ją chronić.

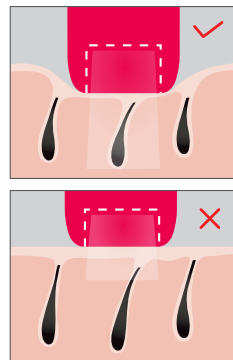

Cykl używania

Używaj produktu 3 razy w tygodniu przez pierwsze 1-2 tygodnie;

Przez kolejne 3-5 tygodni używaj produktu 2 razy w tygodniu;

Po 5 tygodniach używaj produktu co pół roku lub co miesiąc.

Uwaga: Proszę używać produktu w zależności od wzrostu włosów. W przypadku zbyt grubych włosów można odpowiednio zwiększyć poziom mocy i częstotliwość. Konkretna sytuacja różni się w zależności od osoby.

Pielęgnacja po użyciu

Środki ostrożności po depilacji

- Wskazane jest unikanie kontaktu z wodą w ciągu 6 godzin po zabiegu depilacji.
- Po depilacji skóry nie należy używać perfum, masek ani kosmetyków. Unikaj ekspozycji na promieniowanie UV przez 24 godziny po depilacji, a w razie potrzeby stosuj filtry przeciwsłoneczne.
- Opalanie może spowodować ściemnienie skóry lub oparzenia słoneczne. Napromieniowanie w tym czasie spowoduje zaczerwienienie, obrzęk i stan zapalny. Dlatego podczas używania tego produktu należy uważać, aby nie być wystawionym na działanie promieni słonecznych nie krócej niż przez 1 tydzień.
- Sztuczne opalanie nie jest dozwolone podczas zabiegu usuwania włosów.
- W przypadku konieczności przeprowadzenia operacji plastycznej po depilacji (tylko w obszarze depilacji), należy skonsultować się z lekarzem.
- W przypadku złego samopoczucia należy zaprzestać używania produktu i skonsultować się z lekarzem.

Czyszczenie i konserwacja

W celu zapewnienia najlepszych wyników i najdłuższej żywotności produktu, proszę czyścić produkt przed i po każdej depilacji, aby uniknąć długotrwałego gromadzenia się włosów i kurzu. Jeśli nie wyczyści się go prawidłowo, produkt nie będzie miał właściwego działania

- Przed rozpoczęciem czyszczenia, urządzenie musi być wyłączone i odłączone od prądu.

- Miękką, czystą i suchą szmatką należy wytrzeć i wyczyścić lustrzaną powierzchnię wylotu światła.

- Urządzenie należy przechowywać w suchym, wolnym od kurzu otoczeniu w temperaturze -10-60°C.

- Nigdy nie myj produktu i akcesoriów w kranach i zmywarkach do naczyń.

- Do czyszczenia produktu nie należy używać ściernych środków czyszczących (pasta do zębów itp.) ani żrących płynów (benzyna, olej silnikowy, aceton itp.).

Uwaga: Jeżeli woda nie zapewnia dobrego czyszczenia, do czyszczenia powyższych części można używać kilku kropli alkoholu o wysokim stężeniu (nie więcej niż 96%).

Najczęściej zadawane pytania

W tym rozdziale przedstawiono problemy, które mogą Państwo napotkać podczas używania tego produktu. Jeżeli nie mogą Państwo rozwiązać napotkanych problemów za pomocą poniższych rozwiązań, należy skontaktować się z centrum obsługi klienta.

- W przypadku wystąpienia nienormalnej sytuacji lub niemożności usunięcia usterki, należy skontaktować się z serwisem.

Problem	Możliwa przyczyna	Rozwiązanie
Nie można włączyć produktu.	Zasilanie nie jest podłączone.	Sprawdź, czy zasilanie jest podłączone.
Brak emitowania światła	Temperatura depilatora jest zbyt wysoka/ Niedociśnięcie głowicy do skóry	Przed użyciem odczekaj, aż urządzenie ostygnie. Przytrzymaj depilator przy skórze, aż zaświeci się wskaźnik świetlny.
Wskaźnik jest wyłączony.	Nieprawidłowy kontakt z urządzeniem	Sprawdź, czy zasilacz działa prawidłowo. Napraw lub wymień produkt.
Podczas błysku pojawia się nieprzyjemny zapach.	Filtr jest zanieczyszczony/resztki włosów na powierzchni urządzenia	Wytrzyj filtr/oczyść z włosów
Nieznosny ból podczas usuwania włosów	Nie zgolono włosów do usunięcia.	Przed użyciem tego produktu należy ogolić włosy, które mają być poddane napromieniowaniu.
	Zabrania się używania tego produktu w miejscach nieprzeznaczonych do usuwania włosów	Nie używaj tego produktu do wewnętrznych warg sromowych, pochwy, odbytu, sutków i okolic. Mężczyźni nie mogą używać tego produktu na twarz lub genitalia.
	Natężenie światła jest zbyt duże.	Zmniejsz natężenia światła.
	Uszkodzone okno przepuszczające światło.	Skontaktuj się z serwisem.
Po użyciu miejsce depilacji staje się czerwone.	Lekkie zaczerwienienie jest normalne i nieszkodliwe dla organizmu i wkrótce zniknie.	Do łagodzenia skóry należy używać żelu aloesowego lub głowicy lampy szafirowej do chłodzenia.
Niezadowalający efekt usuwania włosów	Używasz zbyt niskiego poziomu natężenia światła.	Proszę wybrać wyższy poziom.
	Brakujący błysk na obszarze depilacji	Błyski muszą znajdować się w bliskiej odległości od siebie.
	To urządzenie nie ma wpływu na kolor włosów.	Jeśli włosy są koloru bladego blondu, siwe, rude lub białe, naświetlanie nie będzie skuteczne.
	Niewystarczająca częstotliwość używania tego urządzenia	Aby skutecznie usunąć wszystkie włosy, należy zapoznać się z zalecanym schematem napromieniowania.
	Reakcja na ekspozycję na światła jest powolna.	Produkt ten powinien być używany nieprzerwanie przez co najmniej 5 miesięcy.
Produkt podczas używania staje się gorący i wilgotny.	Może być spowodowane długotrwałym działaniem urządzenia.	Wyłącz urządzenie i pozwól mu ostygnąć.

Producent:

Hangzhou Collect Time Technology Co., Ltd
Adres: 810, Budynek 1, Sunmax Technology
Park, Science Park Community, Yuehai Street,
Nanshan District, Shenzhen, Chiny

Importer: INNPRO Robert
Błędowski sp. z o.o. ul. Rudzka 65c
44-200 Rybnik, Polska
tel. +48 533 234 303
hurt@innpro.pl



Środki ostrożności

1. Przed przystąpieniem do ładowania sprawdź, czy styki urządzenia są czyste.
2. Nigdy nie pozostawiaj urządzenia podczas użytkowania i ładowania bez nadzoru.
3. Zadbaj o to, aby w sytuacji awaryjnej móc szybko odłączyć urządzenie od źródła zasilania.
4. Nigdy nie wystawiaj urządzenia na działanie wysokiej temperatury.
5. Ładuj urządzenie w miejscu suchym i dobrze wentylowanym z dala od materiałów łatwopalnych, zachowaj wolną przestrzeń min. 1m od innych obiektów.
6. Nigdy nie zakrywaj urządzenia podczas ładowania.
7. Nigdy nie używaj zasilacza, stacji ładowania, kabli itp. bez rekomendacji i atestu producenta.
8. Zadbaj o swoje mienie, urządzenie wyposażone jest w ogniwa, które są trudne do ugaszenia, wyposaż się w płachtę gaśniczą.

Ochrona środowiska



Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.



Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkownika, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.

Niniejszy dokument jest tłumaczeniem oryginalnej instrukcji obsługi, stworzonej przez producenta.

Produkt należy regularnie konserwować (czyścić) we własnym zakresie lub przez wyspecjalizowane punkty serwisowe na koszt i w zakresie użytkownika. W przypadku braku informacji o koniecznych akcjach konserwacyjnych cyklicznych lub serwisowych w instrukcji obsługi, należy regularnie, minimum raz na tydzień oceniać odmiennność stanu fizycznego produktu od fizycznie nowego produktu. W przypadku wykrycia lub stwierdzenia jakiegokolwiek odmienności należy pilnie podjąć kroki konserwacyjne (czyszczenie) lub serwisowe. Brak poprawnej konserwacji (czyszczenia) i reakcji w chwili wykrycia stanu odmienności może doprowadzić do trwałego uszkodzenia produktu. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z zaniedbania.

Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji dystrybutora /
producenta dostępne na stronie internetowej
<https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Akumulator LI-ION

Urządzenie wyposażone jest w akumulator LI ION (litowo-jonowy), który z uwagi na swoją fizyczną i chemiczną budowę starzeje się z biegiem czasu i użytkowania. Producent określa maksymalny czas pracy urządzenia w warunkach laboratoryjnych, gdzie występują optymalne warunki pracy dla urządzenia, a sam akumulator jest nowy i w pełni naładowany. Czas pracy w rzeczywistości może się różnić od deklarowanego w ofercie i nie jest to wada urządzenia a cecha produktu. Aby zachować maksymalną żywotność akumulatora, nie zaleca się go rozładowywać do poziomu poniżej 3,18V lub 15% ogólnej pojemności. Niższe wartości, jak np. 2,5V dla ogniwa uszkadzają je trwale i nie jest to objęte gwarancją. W przypadku zaniechania używania akumulatora lub całego urządzenia przez czas dłuższy niż jeden miesiąc należy akumulator naładować do 50% i sprawdzać cyklicznie co dwa miesiące poziom jego naładowania. Przechowuj akumulator i urządzenie w miejscu suchym, z dala od słońca i ujemnych temperatur.

Akumulator LIPO

Urządzenie wyposażone jest w akumulator LI PO (litowo-polimerowy), który z uwagi na swoją fizyczną i chemiczną budowę starzeje się z biegiem czasu i użytkowania. Producent określa maksymalny czas pracy urządzenia w warunkach laboratoryjnych, gdzie występują optymalne warunki pracy dla urządzenia, a sam akumulator jest nowy i w pełni naładowany. Czas pracy w rzeczywistości może się różnić od deklarowanego w ofercie i nie jest to wada urządzenia a cecha produktu. Aby zachować maksymalną żywotność akumulatora, nie zaleca się go rozładowywać do poziomu poniżej 3,5V lub 5% ogólnej pojemności. Niższe wartości, jak np 3,2V dla ogniwa uszkadzają je trwale i nie jest to objęte gwarancją. W przypadku zaniechania używania akumulatora lub całego urządzenia przez czas dłuższy niż jeden miesiąc należy akumulator naładować do 50% i sprawdzać cyklicznie co dwa miesiące poziom jego naładowania. Przechowuj akumulator i urządzenie w miejscu suchym, z dala od słońca i ujemnych temperatur.