

BeautyMe



ZESTAW DO MIKRODERMABRAZJI BR501

Instrukcja obsługi
i warunki gwarancji

WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA I ZAGROŻENIA

1. Należy przeczytać uważnie instrukcję przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia.
2. Należy używać urządzenia zgodnie z przeznaczeniem opisanym w instrukcji obsługi.
3. Urządzenie jest przeznaczone do pielęgnacji skóry twarzy. Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przemysłowego lub laboratoryjnego.
4. Nie należy zanurzać urządzenia w wodzie lub innych płynach.
5. Urządzenia można używać tylko w temperaturze pokojowej. Nie narażaj produktu na szkodliwe warunki atmosferyczne.
6. Nie należy ładować urządzenia jeżeli ma uszkodzony przewód zasilający. Jeżeli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez serwis lub osobę do tego uprawnioną, w przeciwnym razie może dojść do porażenia prądem.
7. Niniejszy sprzęt może być użytkowany przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat i przez osoby o obniżonych możliwościach fizycznych, umysłowych i osoby o braku doświadczenia i znajomości sprzętu, jeżeli zapewniony zostanie nadzór lub instruktaż odnośnie do użytkowania sprzętu w bezpieczny sposób, tak aby związane z tym zagrożenia były zrozumiałe. Dzieci nie powinny bawić

się sprzętem. Dzieci bez nadzoru nie powinny wykonywać czyszczenia i konserwacji sprzętu.

8. Nie należy umieszczać ani nie przechowywać urządzenia w miejscu, w którym może spaść lub zostać wciągnięte do wanny lub zlewu.
9. Nie należy umieszczać urządzenia lub jego wyposażenia na niestabilnych lub gorących powierzchniach, ani w ich pobliżu.
10. Nie stosować w pobliżu wanien, umywalek lub innych zbiorników napełnionych wodą.



11. Ładowanie baterii należy przeprowadzać w dobrze wentylowanym pomieszczeniu.
12. Urządzenie nie ma zasilacza sieciowego w zestawie. Należy ładować urządzenie zgodnie z wskazówkami w instrukcji obsługi w sekcji ŁADOWANIE URZĄDZENIA.
13. Należy wysuszyć ręce przed użyciem.
14. Należy pielęgnować skórę codziennie w czasie używania tego produktu.
15. Należy używać tylko jednego urządzenia do mechanicznego oczyszczania twarzy.

PRZECIWWSKAZANIA DO UŻYTKU

1. Aktywny trądzik ropny; trądzik różowaty; cera naczyniowa ; łuszczyca; zabiegi kwasowe; lasery; terapia

retinoidami; choroby wirusowe i bakteryjne; świeże rany; wypełniacze w twarzy (4 tygodnie odstępu po zabiegu); nowotwory skóry; skłonność do bliznowacenia.

WPROWADZENIE

Dziękujemy za zaufanie, jakim nas Państwo obdarzyli, dokonując zakupu urządzenia marki **BeautyMe**.

Jesteśmy przekonani, że to bardzo dobrej jakości urządzenie zapewni Państwu dużo radości i satysfakcji z jego użytkowania.

Należy dokładnie przeczytać instrukcję obsługi i jej przestrzegać!


To urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego lub innego, niedotyczącego celów komercyjnych.

Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku użytkowania niewłaściwego lub niezgodnego z przeznaczeniem.

DANE TECHNICZNE

Model:	BR501
Zasilanie:	100-240V~ 50/60Hz
Bateria:	3.7V --- 600mAh Polimerowa Li-ion
Wejście:	5.0V --- 1.0A
Poziom hałasu:	<60dB
Moc ssąca:	Około 62 Kpa ± 5Kpa
Moc:	1.8W
Tryb pracy:	3 (soft,normal,strong)
Akcesoria:	Przewód USB-C, 4x końcówki wymienne, 6 filtrów
Czas ładowania:	Do 2.5h
Całkowity czas pracy urządzenia:	Do 2.5h - tryb soft Do 1h 15min - tryb strong

OPIS URZĄDZENIA

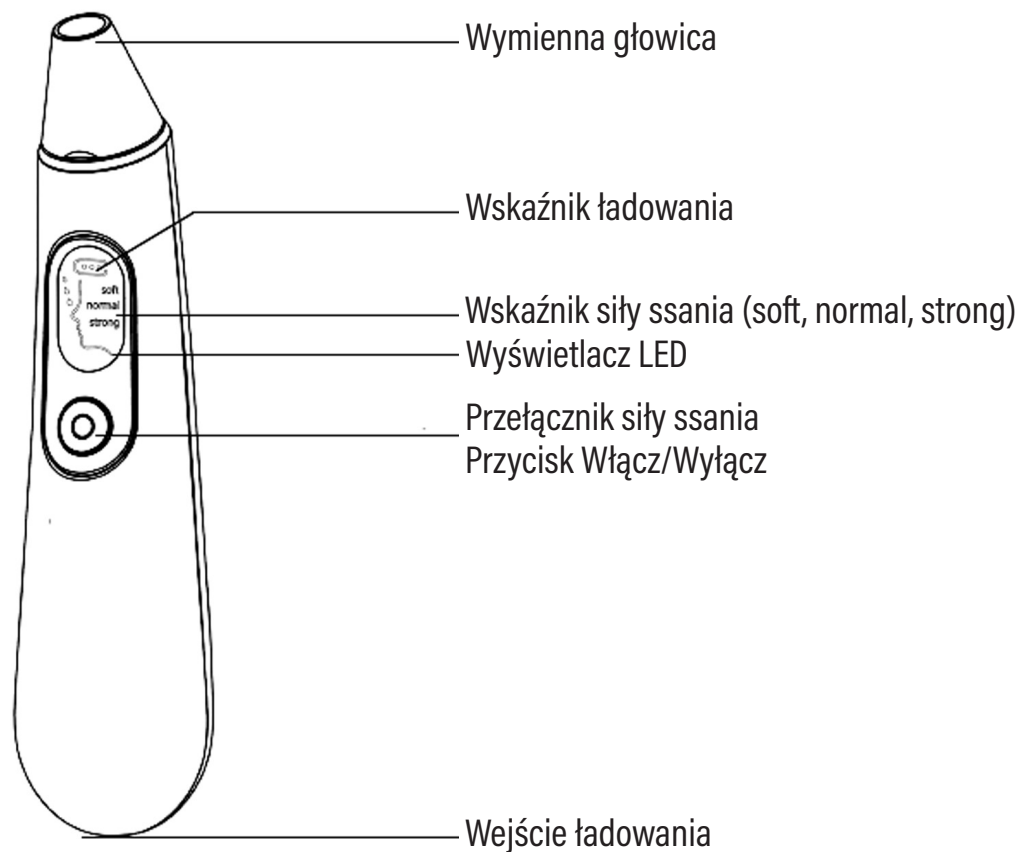

Owalna końcówka



Duża okrągła końcówka



Mała okrągła końcówka



Końcówka mikrokrystaliczna

CHARAKTERYSTYKA WYMIENNYCH KOŃCÓWEK

1. Owalna końcówka

Zwiększa elastyczność i napięcie skóry. Spłyca drobne zmarszczki.

Stosowana do delikatnych rys twarzy.

2. Duża okrągła końcówka

Służy do liftingu twarzy. Silne ssanie oraz łatwe czyszczenie zaskórników. Poprawia mikrokrążenie, dzięki czemu skóra jest bardziej napięta.

3. Mała okrągła końcówka

Wspomaga usuwanie wągrów i zaskórników z trudno dostępnych miejsc.

4. Końcówka mikrokrystaliczna

Końcówka z diamentowymi drobinkami. Doskonała do usunięcia martwego i zrogowaciałego naskórka czy blizny trądzikowe. Cera pozostaje gładka i delikatna. Końcówka diamentowa spłyca małe blizny oraz niweluje uczucie wiotkości skóry.

INSTALACJA I PIERWSZE URUCHOMIENIE

1. Rozpakuj urządzenie i zdejmij wszelkie folie zabezpieczające.
2. Włącz urządzenie poprzez naciśnięcie przez 3 sekundy przycisku Włącz/Wyłącz.

UWAGA! ZALECA SIĘ PRZETESTOWANIE SIŁY SSANIA PRZED UŻYCIEM GO NA TWARZY.

3. Dostosuj końcówkę oczyszczającą oraz tryb ssący do swoich potrzeb.
4. Kiedy chcesz zmienić tryb ssący naciskaj kolejno przełącznik siły ssania.
5. Po zakończonym czyszczeniu wyłącz urządzenie poprzez naciśnięcie i przytrzymanie przycisku Włącz/Wyłącz.

OBSŁUGA URZĄDZENIA


1. Oczyszczyć i osuszyć twarz. Możesz użyć esencji do usuwania zaskórników, aby wspomóc otwarcie porów.



2. Sprawdź czy w trzpieniu jednostki urządzenia znajduje się filtr.


UWAGA! ZALECANE JEST UŻYWANIE URZĄDZENIA RAZ W TYGODNIU DLA CERY SUCHEJ, NATOMIAST DLA SKÓRY TŁUSTEJ DWA RAZY.

3. Nałóż końcówkę mikrokryształiczną lub dużą okrągłą końcówkę na trzpień jednostki urządzenia.

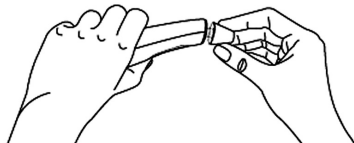

4. Włącz urządzenie.

UWAGA! DOMYŚLNYM TRYBEM URZĄDZENIA JEST TRYB SOFT.

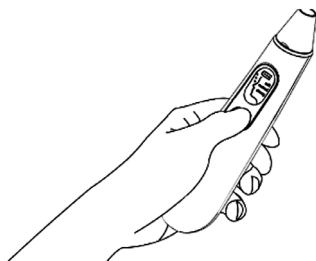

5. Dostosuj tryb ssania do typu skóry.



6. Przyłóż końcówkę do twarzy. Zacznij od brody poruszając urządzenie od góry do dołu.
7. Przyłóż urządzenie do nosa i przesuwaj od wewnętrznej do zewnętrznej strony dzięki czemu oczyścisz każdy płatek nosa.



UWAGA! PAMIĘTAJ, ABY NIE TRZYMAĆ ZBYT DŁUGO URZĄDZENIA W JEDNYM MIEJSCU.

8. Następnie przyłóż urządzenie do czoła i przesuwaj od środka do zewnątrz.
9. Wyłącz urządzenie po zakończonym zabiegu.
10. Przemyj twarz i użyj preparatu nawilżającego.



11. Po każdym użyciu wyczyść urządzenie wraz z jego akcesoriami.

ŁADOWANIE URZĄDZENIA

Urządzenie można ładować na dwa sposoby poprzez port USB w komputerze oraz zasilacz sieciowy.

1. Aby naładować urządzenie do pełna, upewnij się, że urządzenie jest wyłączone.
2. Upewnij się, że urządzenie jest suche przed ładowaniem.
3. Podłącz urządzenie poprzez przewód USB do dowolnego portu USB w komputerze.
4. Podłącz urządzenie poprzez przewód USB do zasilacza. A następnie podłącz urządzenie do gniazda zasilania.
5. Podczas ładowania urządzenia na wyświetlaczu migają kolejno jednostki poziomu ładowania baterii.
6. Po naładowaniu na wyświetlaczu w sposób ciągły zaświecą się 3 jednostki baterii informujące o zakończeniu ładowania.
7. Ładuj urządzenie wyłącznie gdy bateria urządzenia rozładowuje się. Wydłuży to jego żywotność.

UWAGA ! ZUŻYCIE AKUMULATORA PODCZAS EKSPLOATACJI URZĄDZENIA JEST NATURALNYM ZJAWISKIEM. ABY UTRZYMAĆ AKUMULATOR W DOBREJ KONDYCJI I WYDŁUŻYĆ JEGO ŻYWOTNOŚĆ, NALEŻY STOSOWAĆ SIĘ DO PONIŻSZYCH ZALECEŃ:

1. Nie uruchamiaj urządzenia, jeśli akumulator jest rozładowany.
2. Akumulator ładuj zgodnie z danymi o napięciu i prądzie ładowania podanymi na tabliczce znamionowej.
3. Przed dłuższym okresem przechowywania naładuj akumulator do poziomu 50% oraz doładuj go co 3-4 miesiące. Jeśli w produkcie nie ma możliwości ustalenia konkretnego poziomu naładowania, rozładuj urządzenie, po czym ładuj je przez połowę czasu potrzebnego do pełnego naładowania. Pozostawienie rozładowanego akumulatora na dłuższy okres może skutkować jego uszkodzeniem lub utratą jego właściwości.

4. Przy regularnym użytkowaniu urządzenia unikaj pełnego rozładowania akumulatora oraz zawsze ładuj go do pełna.
5. Po naładowaniu akumulatora odłącz wtyczkę ładowarki od gniazda ładowania w urządzeniu.
6. Nie pozostawiaj urządzenia w trakcie ładowania bez nadzoru.
7. Używanie ładowarek oraz przewodów innych, niż zalecane w instrukcji z urządzeniem, może prowadzić do uszkodzenia produktu, a nawet do eksplozji akumulatora.


CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

1. Wyłącz urządzenie.
2. Wyczyść obudowę oraz panel wyświetlacza za pomocą zwilżonej miękkiej ściereczki.

UWAGA! DO CZYSZCZENIA NIE UŻYWAJ SZORSTKICH MATERIAŁÓW ORAZ OSTRYCH DETERGENTÓW.

NIE ZANURZAJ URZĄDZENIA WE WODZIE. URZĄDZENIE NIE JEST WODOODPORNE.

3. Filtr z gąbki umyj pod bieżącą wodą oraz poczekaj, aż wyschnie przed kolejnym użyciem lub użyj zapasowego.

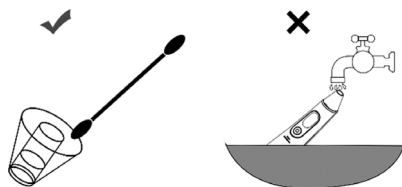

UWAGA! WYMIENIAJ FILTR Z GĄBKI CO OKOŁO 4 MIESIĄCE.

4. Końcówki myj pod bieżącą wodą a resztki kosmetyków wyczyść za pomocą patyczka higienicznego.

PROBLEMY I ROZWIĄZANIA

PROBLEM	PRZYCZYNA	ROZWIĄZANIE
Urządzenie nie włącza się.	Bateria w urządzeniu jest rozładowana.	Naładuj urządzenie.
Urządzenie słabo zasysa.	Nieprawidłowo zamontowana końcówka bądź filtr.	Zdemontuj urządzenie i zamontuj akcesoria ponownie.
	Słaba bateria w urządzeniu.	Naładuj urządzenie.

EKOLOGICZNA I PRZYJAZNA DLA ŚRODOWISKA UTYLIZACJA

To urządzenie jest oznaczone, zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/19/UE z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE), symbolem przekreślonego kontenera na odpady:



Nie należy wyrzucać urządzeń oznaczonych tym symbolem razem z odpadami domowymi.

Urządzenie należy zwrócić do lokalnego punktu przetwarzania i utylizacji odpadów lub skontaktować się z władzami miejskimi.

Możesz pomóc chronić środowisko!

Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu.

WARUNKI GWARANCJI DOTYCZĄCE URZĄDZENIA DO MIKRODERMABRAZJI

1. ART-DOM Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (92-402) przy ul. Zakładowej 90/92 Numer Krajowego Rejestru Sądowego 0000354059 (Gwarant) gwarantuje, że zakupione urządzenie jest wolne od wad fizycznych. Gwarancja obejmuje tylko wady wynikające z przyczyn tkwiących w rzeczy sprzedanej (wady fabryczne).
2. Ujawniona wada zostanie usunięta na koszt Gwaranta w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia uszkodzenia do serwisu autoryzowanego lub punktu sprzedaży.
3. W wyjątkowych przypadkach, np. konieczności sprowadzenia części zamiennych od producenta, termin naprawy może zostać wydłużony do 30 dni.
4. Okres gwarancji dla użytkownika wynosi 24 miesiące od daty wydania towaru.
5. Towar przeznaczony jest do używania wyłącznie w warunkach indywidualnego gospodarstwa domowego.
6. Gwarancja nie obejmuje:
 - a. uszkodzeń powstałych na skutek używania urządzenia niezgodnie z instrukcją obsługi,
 - b. uszkodzeń mechanicznych, chemicznych lub termicznych,
 - c. napraw i modyfikacji dokonanych przez firmy lub osoby nieposiadające autoryzacji producenta,
 - d. części z natury łatwo zużywalnych lub materiałów eksploatacyjnych takich jak: baterie, żarówki, bezpieczniki, filtry, pokrętła, półki, akcesoria,
 - e. instalacji, konserwacji, przeglądów, czyszczenia, odblokowania, usunięcia zanieczyszczeń oraz instruktażu.
7. O sposobie usunięcia wady decyduje Gwarant. Usunięcie potwierdzonej wady urządzenia nastąpi poprzez wykonanie naprawy gwarancyjnej lub wymianę urządzenia. Gwarant może dokonać naprawy, gdy kupujący żąda wymiany lub Gwarant może dokonać wymiany, gdy kupujący żąda naprawy, jeżeli doprowadzenie do zgodności towaru (urządzenia) zgodnie z udzieloną gwarancją w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe

albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Gwaranta. W szczególnie uzasadnionych wypadkach, jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Gwaranta może on odmówić doprowadzenia towaru do zgodności z udzieloną gwarancją i zaproponować inny sposób załatwienia reklamacji z gwarancji.

8. Wymiany towaru dokonuje punkt sprzedaży, w którym towar został zakupiony (wymiana lub zwrot gotówki) lub autoryzowany punkt serwisowy, jeżeli dysponuje taką możliwością (wymiana). Zwracane urządzenie musi być kompletne, bez uszkodzeń mechanicznych. Niespełnienie tych warunków może spowodować nieuznanie gwarancji.
9. W przypadku braku zgodności towaru z umową sprzedaży, kupującemu z mocy prawa przysługują środki ochrony prawnej ze strony i na koszt sprzedawcy, a gwarancja nie ma wpływu na te środki ochrony prawnej.
10. Niniejsza gwarancja obowiązuje na terytorium Polski.
11. Warunkiem dokonania naprawy lub wymiany urządzenia w ramach gwarancji jest przedstawienie dowodu zakupu oraz użytkowanie towaru zgodnie z informacjami zawartymi w instrukcji obsługi.

UWAGA: Uszkodzenie lub usunięcie tabliczki znamionowej z urządzenia może spowodować nieuznanie gwarancji.

Cały czas udoskonalamy nasze produkty, dlatego mogą się one nieznacznie różnić od zdjęć przedstawionych na opakowaniu oraz w instrukcji obsługi. Przed przystąpieniem do użytkowania urządzenia przeczytaj instrukcję obsługi.

ART-DOM Sp. z o.o., ul. Zakładowa 90/92, 92-402 Łódź, info@artdom.net.pl. Numer Krajowego Rejestru Sądowego 0000354059.



v. 2