

Götze & Jensen



WAGA I ANALIZATOR SKŁADU CIAŁA BS910*

Instrukcja obsługi
i warunki gwarancji

* - oznacza kolor urządzenia

WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA I ZAGROŻENIA

1. Należy przeczytać uważnie instrukcję przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia.
2. Należy używać urządzenia zgodnie z przeznaczeniem opisanym w instrukcji obsługi.
3. Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przemysłowego lub laboratoryjnego.
4. Zanim użytkownik stanie na wagę należy upewnić się, że jej powierzchnia jest sucha, aby nie poślizgnąć się na śliskiej płycie.
5. Urządzenie należy przechowywać w suchym miejscu.
6. Do czyszczenia nie należy używać rozpuszczalników i nie zanurzać produktu w wodzie lub innych płynach.
7. Nie należy ingerować w części i elementy wagi.
8. Nie należy przechowywać wagi w pozycji pionowej. Nie należy kłaść żadnych przedmiotów na płycie wagi w trakcie przechowywania.
9. Nie należy wskakiwać na urządzenie lub z niego zeskakiwać.
10. Urządzenie nie jest zabawką. Przechowywać z dala od dzieci.
11. Urządzenie generuje fale radiowe, które mogą mieć wpływ na działanie urządzeń medycznych np. implantów ślimakowych, aparatów słuchowych. W trakcie korzystania z urządzenia należy zachować odległość co najmniej 20 cm od urządzeń medycznych.
12. Nie należy korzystać z urządzenia w miejscach zabronionych np. szpitalach i placówkach ochrony zdrowia. Należy postępować zgodnie z regulaminem ustalonym przez te placówki.
13. Nie należy wystawiać baterii na działanie bardzo niskich lub bardzo wysokich temperatur. Ekstremalne temperatury mogą mieć wpływ na żywotność baterii.
14. Nie należy ładować nieładowalnych baterii.
15. Nie należy mieszać ze sobą różnych typów baterii lub nowych i używanych baterii.
16. Należy używać jedynie baterii zalecanego typu lub równoważnych.
17. Baterie należy wkładać z zachowaniem prawidłowej biegunowości.
18. Urządzenie nie jest zalecane dla kobiet w ciąży, niemowląt, małych dzieci i dzieci poniżej 10 roku życia.

19. Wszelkie pomiary uzyskane przy użyciu tego urządzenia służą wyłącznie jako odniesienie i nie powinny być traktowane jako opinia medyczna.
20. Wagi nie należy używać z implantami medycznymi, takimi jak rozruszniki serca.
21. Nie należy wyrzucać baterii z odpadami komunalnymi. Należy przekazać je do punktu selektywnej zbiórki baterii i akumulatorów.

WPROWADZENIE

Dziękujemy za zaufanie, jakim nas Państwo obdarzyli, dokonując zakupu urządzenia marki **Götze & Jensen**. Jesteśmy przekonani, że to bardzo dobrej jakości urządzenie zapewni Państwu dużo radości i satysfakcji z jego użytkowania.

NALEŻY DOKŁADNIE PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ OBSŁUGI I JEJ PRZESTRZEGAĆ!

To urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego lub podobnego niedotyczącego celów komercyjnych. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku użytkowania niewłaściwego lub niezgodnego z przeznaczeniem.

DANE TECHNICZNE

Nazwa:	Waga osobowa i analizator składu ciała
Model:	BS910*
Bateria:	4 x AAA (LR03) (baterie znajdują się w zestawie)
Minimalne obciążenie:	5kg/11lb
Maksymalne obciążenie:	180kg/400lb
Dokładność pomiaru:	100g/0.2lb
Jednostki miary:	kg/lb
Maksymalne ustawienie wzrostu użytkownika:	220cm
Zasięg łączności Bluetooth:	do 10m
Maksymalna moc transmisji Bluetooth:	0,62dBm
Częstotliwość transmisji Bluetooth:	2.4GHz
Zakres częstotliwości Bluetooth:	2402-2480MHz
Ilość czujników/elektrod:	4
Funkcje:	Waga/Wskaźnik tkanki tłuszczowej/BMI/BMR/Masa mięśniowa/Zawartość wody/Masa białka/Masa tłuszczu/Masa mięśni/Masa mięśni szkieletowych/Masa kości/Tłuszcz trzewny/Rodzaj sylwetki/Poziom otyłości/Ocena stanu zdrowia/Wiek ciała
Tolerancja pomiaru:	0-50kg ±100g; 51-100kg ±200g; 101-150kg ±300g 151-180kg ±500g
Wersja Bluetooth:	V4.0

OPIS URZĄDZENIA

1. Wyświetlacz LED.
2. Elektrody pomiarowe w szkle.
3. Przycisk zmiany jednostki kg/lb
4. Miejsce na baterie.



INSTALACJA I PIERWSZE URUCHOMIENIE

1. Wyjmij wagę z opakowania oraz zdejmij wszelkie folie zabezpieczające. Wymagane baterie 4 x AAA LR03 znajdują się wewnątrz opakowania. Baterie należy rozpakować i zamontować je z tyłu wagi. Należy pamiętać o zachowaniu odpowiedniej biegunowości.
2. Ustaw wagę na równej, płaskiej powierzchni, aby zapewnić dokładność pomiaru.
3. Stań na wadze w prawidłowy sposób, następnie na wyświetlaczu pojawi się pomiar wagi.
4. Urządzenie pozostawione w spoczynku wyłączy się automatycznie po około 10 sekundach od ostatniego pomiaru.


ZALECENIA

1. Upewnij się, że urządzenie znajduje się na równej i płaskiej powierzchni. Unikaj dywanów lub miękkich powierzchni. Nierówne podłoża mogą mieć wpływ na odczyt.
2. Dokonuj pomiarów bez ubrań i obuwia, zalecane jest ważenie przed posiłkami i zawsze o tej samej porze dnia.
3. Aby uzyskać większą dokładność, nie zaleca się pomiaru w ciągu 2 godzin od momentu przebudzenia się.

UWAGA! WAGA WSKAŻE PRAWIDŁOWY POMIAR PO UMIESZCZENIU NA NIEJ CIĘŻARU POWYŻEJ 5 KG.

OBSŁUGA URZĄDZENIA

1. Stań boso na wadze, w taki sposób aby stopa dotykała jednocześnie dwóch elektrod.

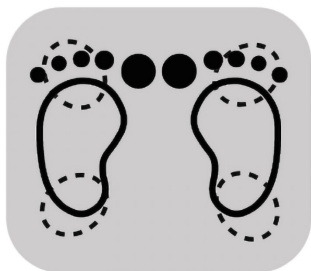

UWAGA! ABY SKALIBROWAĆ WAGĘ NALEŻY NA NIĄ WEJŚĆ, ABY JĄ WŁĄCZYĆ. NASTĘPNIE ZEJŚĆ, ABY WYŚWIETLACZ WSKAZYWAŁ 0.0KG.

2. Na wyświetlaczu pojawi się pomiar wagi. Po zakończonym ważeniu wyświetlacz zamruga 3 razy.
3. Symbol - - - na wyświetlaczu, oznacza, że są mierzone i analizowane inne parametry ciała. Gdy wartość masy pojawi się ponownie, oznacza to, że wszystkie pomiary zostały zakończone.
4. Urządzenie pozostawione w spoczynku wyłączy się automatycznie po 10 sekundach od ostatniego pomiaru.

Wymiana baterii:

1. Zdemontuj osłonkę z miejsca gdzie znajdują się baterie.
2. Wyciągnij zużyte baterie.

UWAGA! BATERIE NALEŻY PRZEKAZAĆ DO PUNKTU SELKTYWNEJ ZBIÓRKI BATERII I AKUMULATORÓW.

3. Nowe baterie umieść w miejscu na baterie zachowując odpowiednią biegunowość.
4. Zamontuj osłonkę z powrotem.

INSTALACJA I OBSŁUGA APLIKACJI



Unique Health



App Store / Google Play

1. Pobierz aplikację Unique Health z Apple Store lub Google Play:
2. Włącz łączność Bluetooth w ustawieniach telefonu, uruchom aplikację i dostosuj dane osobowe użytkownika. Jeśli nie masz jeszcze spersonalizowanego konta użytkownika, utwórz je. Jeśli posiadasz już konto, wystarczy się zalogować.

UWAGA! UPEWNIJ SIĘ, ŻE BLUETOOTH JEST WŁĄCZONY ORAZ, ŻE AUTORYZACJA BLUETOOTH, GPS I LOKALIZACJA JEST DOZWOLONA NA TWOIM URZĄDZENIU.

3. Sparuj urządzenie za pomocą Bluetooth – symbol na wyświetlaczu wagi przestanie migać po poprawnym zsynchronizowaniu urządzeń.
4. Umieść wagę na twardej, płaskiej powierzchni.
5. Stań na wadze w wyprostowanej pozycji, boso, obiema stopami.

UWAGA! UPEWNIJ SIĘ, ŻE TWOJA POSTAWA JEST PRAWIDŁOWA PRZED POMIAREM. NIE SCHODŹ Z WAGI AŻ DO POJAWIENIA SIĘ POMIARU NA WYŚWIELACZU. DOKONAJ POMIARU BOSYMI STOPAMI, ZACHOWAJ PEŁNY KONTAKT Z ELEKTRODAMI.

6. Dane pomiaru m.in. BMI, masy mięśni, tłuszczu, poziomu białka, nawodnienia, pojawią się w aplikacji.

UWAGA! DANE MAJĄ CHARAKTER WYŁĄCZNIE POGLĄDOWY I NIE POWINNY BYĆ UŻYWANE W CELACH MEDYCZNYCH. U UŻYTKOWNIKÓW POSIADAJĄCYCH METALOWE ELEMENTY W CIELE, MOGĄ WYSTĄPIĆ RÓŻNICE W POMIARACH.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

1. Przed czyszczeniem zakończ używanie urządzenia.
2. Wagę oraz elektrody przetrzyj suchą ściereczką lub gąbką.
3. Do czyszczenia nie używaj żrących środków chemicznych.
4. Nie zanurzaj urządzenia w wodzie lub innych płynach.
5. Waga powinna być zawsze sucha i przechowywana w bezpiecznym miejscu.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

PROBLEM	PRZYCZYNA	ROZWIĄZANIE
Urządzenie nie włącza się.	Baterie w urządzeniu są rozładowane.	Wymień baterie na nowe.
Waga nie wskazuje poprawnych odczytów.	Nieprawidłowe umieszczenie stóp na elektrodach pomiarowych.	Postępuj zgodnie z sekcją OBSŁUGA URZĄDZENIA, aby wyniki pomiarów były prawidłowe. Upewnij się, że stopy i waga są suche. Pozostań na wadze, aż waga odczyta wszystkie dane.
	Niezaktualizowana aplikacja Unique Health.	Zaktualizuj aplikację Unique Health do najnowszej wersji.
Połączenie z Bluetooth nie powiodło się.	Wyłączona funkcja Bluetooth w telefonie komórkowym.	Zresetuj połączenie Bluetooth. Upewnij się, że Bluetooth i GPS (tylko Android) jest włączony w Twoim urządzeniu.
Wyświetlacz wskazuje „LO”.	Rozładowane baterie.	Wymień baterie na nowe.
Urządzenie wyłącza się.	Waga jest przeciążona. Na wadze jest ponad 180 kg.	Używaj wagi zgodnie z sekcją „DANE TECHNICZNE”.

DEKLARACJA

ART-DOM Sp. z o.o. niniejszym oświadcza, że waga BS910K jest zgodna z odpowiednimi wymaganiami unijnego prawodawstwa harmonizacyjnego: dyrektywą 2014/53/UE i innym unijnym prawodawstwem harmonizacyjnym. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem:

<https://www.artdom.net.pl/deklaracja/BS910K/>

EKOLOGICZNA I PRZYJAZNA DLA ŚRODOWISKA UTYLIZACJA

To urządzenie jest oznaczone, zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/19/UE z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE) symbolem przekreślonego kontenera na odpady:



Nie należy wyrzucać urządzeń oznaczonych tym symbolem razem z odpadami domowymi.

Urządzenie należy zwrócić do lokalnego punktu przetwarzania i utylizacji odpadów lub skontaktować się z władzami miejskimi.

MOŻESZ POMÓC CHRONIĆ ŚRODOWISKO!

Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu.

WARUNKI GWARANCJI DOTYCZĄCE WAGI OSOBOWEJ

1. ART-DOM Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (92-402) przy ul. Zakładowej 90/92 Numer Krajowego Rejestru Sądowego 0000354059 (Gwarant) gwarantuje, że zakupione urządzenie jest wolne od wad fizycznych. Gwarancja obejmuje tylko wady wynikające z przyczyn tkwiących w rzeczy sprzedanej (wady fabryczne).
2. Ujawniona wada zostanie usunięta na koszt Gwaranta w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia uszkodzenia do serwisu autoryzowanego lub punktu sprzedaży.
3. W wyjątkowych przypadkach, np. konieczności sprowadzenia części zamiennych od producenta, termin naprawy może zostać wydłużony do 30 dni.
4. Okres gwarancji dla użytkownika wynosi 24 miesiące od daty wydania towaru.
5. Towar przeznaczony jest do używania wyłącznie w warunkach indywidualnego gospodarstwa domowego.
6. Gwarancja nie obejmuje:
 - a. uszkodzeń powstałych na skutek używania urządzenia niezgodnie z instrukcją obsługi,
 - b. uszkodzeń mechanicznych, chemicznych lub termicznych,
 - c. napraw i modyfikacji dokonanych przez firmy lub osoby nieposiadające autoryzacji producenta,
 - d. części z natury łatwo zużywalnych lub materiałów eksploatacyjnych takich jak: baterie, żarówki, bezpieczniki, filtry, pokręta, półki, akcesoria,
 - e. instalacji, konserwacji, przeglądów, czyszczenia, odblokowania, usunięcia zanieczyszczeń oraz instruktażu.
7. O sposobie usunięcia wady decyduje Gwarant. Usunięcie potwierdzonej wady urządzenia nastąpi poprzez wykonanie naprawy gwarancyjnej lub wymianę urządzenia. Gwarant może dokonać naprawy, gdy kupujący żąda wymiany lub Gwarant może dokonać wymiany, gdy kupujący żąda naprawy, jeżeli doprowadzenie do zgodności towaru (urządzenia) zgodnie z udzieloną gwarancją w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Gwaranta. W szczególnie uzasadnionych wypadkach, jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Gwaranta może on odmówić doprowadzenia towaru do zgodności z udzieloną gwarancją i zaproponować inny sposób załatwienia reklamacji z gwarancją.
8. Wymiany towaru dokonuje punkt sprzedaży, w którym towar został zakupiony (wymiana lub zwrot gotówki) lub autoryzowany punkt serwisowy, jeżeli dysponuje taką możliwością (wymiana). Zwracane urządzenie

musi być kompletne, bez uszkodzeń mechanicznych. Niespełnienie tych warunków może spowodować nieuznanie gwarancji.

9. W przypadku braku zgodności towaru z umową sprzedaży, kupującemu z mocy prawa przysługują środki ochrony prawnej ze strony i na koszt sprzedawcy, a gwarancja nie ma wpływu na te środki ochrony prawnej.
10. Niniejsza gwarancja obowiązuje na terytorium Polski.
11. Warunkiem dokonania naprawy lub wymiany urządzenia w ramach gwarancji jest przedstawienie dowodu zakupu oraz użytkowanie towaru zgodnie z informacjami zawartymi w instrukcji obsługi.

UWAGA!

Uszkodzenie lub usunięcie tabliczki znamionowej z urządzenia może spowodować nieuznanie gwarancji.

Cały czas udoskonalamy nasze produkty, dlatego mogą się one nieznacznie różnić od zdjęć przedstawionych na opakowaniu oraz w instrukcji obsługi. Przed przystąpieniem do użytkowania urządzenia przeczytaj instrukcję obsługi.

ART-DOM Sp. z o.o., ul. Zakładowa 90/92, 92-402 Łódź. Numer Krajowego Rejestru Sądowego 0000354059.

