

Götze & Jensen



WAGA I ANALIZATOR SKŁADU CIAŁA BS960*

Instrukcja obsługi
i warunki gwarancji

* - oznacza kolor urządzenia

WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA I ZAGROŻENIA

1. Należy przeczytać uważnie instrukcję przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia.
2. Należy używać urządzenia zgodnie z przeznaczeniem opisanym w instrukcji obsługi.
3. Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przemysłowego lub laboratoryjnego.
4. Zanim użytkownik stanie na wagę należy upewnić się, że jej powierzchnia jest sucha, aby nie poślizgnąć się na śliskiej płycie.
5. Urządzenie należy przechowywać w suchym miejscu.
6. Do czyszczenia nie należy używać rozpuszczalników i nie zanurzać produktu w wodzie lub innych płynach.
7. Nie należy ingerować w części i elementy wagi.
8. Nie należy przechowywać wagi w pozycji pionowej. Nie należy kłaść żadnych przedmiotów na płycie wagi w trakcie przechowywania.
9. Nie należy skakać na urządzeniu lub z niego zeskakiwać.
10. Urządzenie nie jest zabawką. Przechowywać z dala od dzieci.
11. Urządzenie generuje fale radiowe, które mogą mieć wpływ na działanie urządzeń medycznych np. implantów ślimakowych, aparatów słuchowych. W trakcie korzystania z urządzenia należy zachować odległość co najmniej 20 cm od urządzeń medycznych.
12. Nie należy korzystać z urządzenia w miejscach zabronionych np. szpitalach i placówkach ochrony zdrowia. Należy postępować zgodnie z regulaminem ustalonym przez te placówki.
13. Nie należy wystawiać akumulatora na działanie bardzo niskich lub bardzo wysokich temperatur. Ekstremalne temperatury mogą mieć wpływ na żywotność akumulatora.
14. Nie należy ładować urządzenia jeżeli ma uszkodzony przewód zasilający. Jeżeli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez serwis lub osobę do tego uprawnioną, w przeciwnym razie może dojść do porażenia prądem..
15. Ładowanie akumulatora należy przeprowadzać w dobrze wentylowanym pomieszczeniu.

16. Urządzenie nie ma zasilacza sieciowego w zestawie. Należy ładować urządzenie zgodnie z wskazówkami w instrukcji obsługi w sekcji ŁADOWANIE URZĄDZENIA.
17. Nie należy umieszczać urządzenia lub jego wyposażenia na niestabilnych lub gorących powierzchniach, ani w ich pobliżu.
18. Urządzenie nie jest zalecane dla kobiet w ciąży, niemowląt, małych dzieci i dzieci poniżej 10 roku życia.
19. Wszelkie pomiary uzyskane przy użyciu tego urządzenia służą wyłącznie jako odniesienie i nie powinny być traktowane jako opinia medyczna.
20. Wagi nie należy używać z implantami medycznymi, takimi jak rozruszniki serca.

WPROWADZENIE

Dziękujemy za zaufanie, jakim nas Państwo obdarzyli, dokonując zakupu urządzenia marki **Götze & Jensen**. Jesteśmy przekonani, że to bardzo dobrej jakości urządzenie zapewni Państwu dużo radości i satysfakcji z jego użytkowania.

NALEŻY DOKŁADNIE PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ OBSŁUGI I JEJ PRZESTRZEGAĆ!

To urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego lub podobnego niedotyczącego celów komercyjnych. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku użytkowania niewłaściwego lub niezgodnego z przeznaczeniem.

DANE TECHNICZNE

Nazwa:	Waga osobowa i analizator składu ciała
Model:	BS960*
Wejście:	5.0V --- 1.0V
Akumulator:	3.7V --- 800mAh
Minimalne obciążenie:	5kg
Maksymalne obciążenie:	180kg/400lb
Dokładność pomiaru:	100g; 0.2lb
Jednostki miary:	kg/lb/st
Maksymalne ustawienie wzrostu użytkownika:	220cm
Zasięg łączności Bluetooth:	do 10m
Maksymalna moc transmisji Bluetooth:	3.3dBm
Częstotliwość transmisji Bluetooth:	2.4GHz
Zakres częstotliwości Bluetooth:	2400-2483.5MHz
Maksymalna moc transmisji WIFI:	15.50dBm

Częstotliwość transmisji WIFI:	2.4GHz
Zakres częstotliwości WIFI:	2400-2483.5MHz
Ilość czujników/elektrod:	4
Funkcje:	Waga/Wskaźnik tkanki tłuszczowej/BMI/BMR/Masa mięśniowa/Zawartość wody/Masa białka/Masa tłuszczu/Masa mięśni/Masa mięśni szkieletowych/Masa kości/Tłuszcz trzewny/Rodzaj sylwetki/Poziom otyłości/Ocena stanu zdrowia/Wiek ciała /Masa mięśniowa lewej ręki/Masa mięśniowa prawej ręki/Masa tłuszczu lewej ręki/Masa tłuszczu prawej ręki/Masa mięśniowa lewej nogi/Masa mięśniowa prawej nogi/Masa tłuszczu lewej nogi/Masa tłuszczu prawej nogi/Masa mięśni tułowia/Masa tłuszczu tułowia/Zawartość soli nieorganicznych/Tętno
Tolerancja pomiaru:	0.1-5kg+-50g; 5-50kg+-100g; 51-100kg+-200g; 101-150kg+-300g 151-180kg+-500g
Wersja Bluetooth:	V4.0

OPIS URZĄDZENIA

1. Wyświetlacz LED.
2. Elektrody pomiarowe.
3. Przycisk zmiany jednostki kg/lb
4. Miejsce na baterie.



PIERWSZE URUCHOMIENIE I OBSŁUGA URZĄDZENIA

1. Wyjmij wagę z opakowania oraz zdejmij wszelkie folie zabezpieczające. W razie potrzeby naładuj akumulator za pomocą przewodu USB-C.
2. Ustaw wagę na równej, płaskiej powierzchni, aby zapewnić dokładność pomiaru.
3. Stań na wadze, umieść dłonie na uchwycie w prawidłowy sposób, następnie na wyświetlaczu pojawi się pomiar wagi oraz parametrów ciała.

4. Urządzenie pozostawione w spoczynku wyłączy się automatycznie po około 10 sekundach od ostatniego pomiaru.


ZALECENIA

1. Upewnij się, że urządzenie znajduje się na równej i płaskiej powierzchni. Unikaj dywanów lub miękkich powierzchni. Nierówne podłoża mogą mieć wpływ na odczyt.
2. Dokonuj pomiarów bez ubrań i obuwia, zalecane jest ważenie przed posiłkami i zawsze o tej samej porze dnia.
3. Aby uzyskać większą dokładność, nie zaleca się pomiaru w ciągu 2 godzin od momentu przebudzenia się.


UWAGA! WAGA WSKAŻE PRAWIDŁOWY POMIAR PO UMIESZCZENIU NA NIEJ CIĘŻARU POWYŻEJ 5 KG.

OBSŁUGA URZĄDZENIA

1. Stań na wadze. Trzymaj ręce na uchwycie prosto pod kątem 30 stopni lub 45 stopni. Wszystkie palce muszą być w jednej linii na uchwycie elektrody.

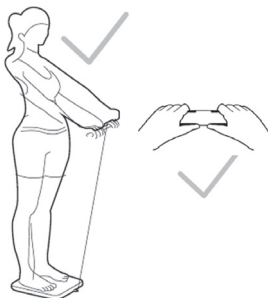

UWAGA! NIE TRZYMAJ RĄK NA DOLE ANI BLISKO PASA. PAMIĘTAJ, ABY PRZEWÓD ELEKTROD POMIAROWYCH NIE BYŁ ZAGIĘTY.

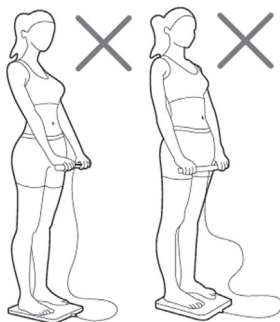

UWAGA! KCIUKI NIE POWINNY ZBLIŻAĆ SIĘ DO SIEBIE. UPEWNIJ SIĘ, ŻE WSZYSTKIE PALCE DOTYKAJĄ ELEKTRODY.



UWAGA! ABY ZRESETOWAĆ WAGĘ. WEJDŹ NA WAGĘ, ABY JĄ WŁĄCZYĆ. NIECH AUTOMATYCZNIE SPADNIE DO 0.0KG, ABY PRZEPROWADZIĆ KALIBRACJĘ.

2. Na wyświetlaczu pojawi się pomiar wagi oraz parametrów ciała (offline).
3. Po zakończonym pomiarze zejź z wagi, a uchwyt umieść delikatnie na równej powierzchni. Kompletny pomiar trwa około 30 sekund.
4. Urządzenie pozostawione w spoczynku wyłączy się automatycznie po 15 sekundach od ostatniego pomiaru.

INSTALACJA I OBSŁUGA APLIKACJI

1. Pobierz aplikację Unique Health z Apple Store lub Google Play:



Unique Health



App Store / Google Play

2. Włącz łączność Bluetooth w ustawieniach telefonu, uruchom aplikację i dostosuj dane osobowe użytkownika. Jeśli nie masz jeszcze spersonalizowanego konta użytkownika, utwórz je. Jeśli posiadasz już konto, wystarczy się zalogować.

UWAGA! UPEWNIJ SIĘ, ŻE BLUETOOTH JEST WŁĄCZONY. UPEWNIJ SIĘ, ŻE AUTORYZACJA BLUETOOTH, GPS I LOKALIZACJA JEST DOZWOLONA NA TWOIM URZĄDZENIU.

3. Sparuj urządzenie za pomocą Bluetooth – symbol na wyświetlaczu wagi przestanie pulsować po poprawnym zsynchronizowaniu urządzeń.
4. Umieść wagę na twardej, płaskiej powierzchni.
5. Stań na wadze w wyprostowanej pozycji, boso, obiema stopami.

UWAGA! UPEWNIJ SIĘ, ŻE TWOJA POSTAWA JEST PRAWIDŁOWA PRZED POMIAREM. NIE SCHODŹ Z WAGI AŻ DO POJAWIENIA SIĘ POMIARU NA WYŚWIELACZU. DOKONAJ POMIARU BOSYMI STOPAMI, ZACHOWAJ PEŁNY KONTAKT Z ELEKTRODAMI.

6. Dane pomiaru m.in. BMI, masy mięśni, tłuszczu, poziomu białka, nawodnienia, pojawiają się w aplikacji.

UWAGA! DANE MAJĄ CHARAKTER WYŁĄCZNIE POGLĄDOWY I NIE POWINNY BYĆ UŻYWANE W CELACH MEDYCZNYCH. U UŻYTKOWNIKÓW POSIADAJĄCYCH METALOWE ELEMENTY W CIELE, MOGĄ WYSTĄPIĆ RÓŻNICE W POMIARACH.

ŁADOWANIE URZĄDZENIA

Urządzenie można ładować na dwa sposoby poprzez port USB w komputerze oraz zasilacz sieciowy.

1. Upewnij się, że urządzenie jest suche przed ładowaniem.
2. Podłącz urządzenie poprzez przewód USB do dowolnego portu USB w komputerze.
3. Podłącz urządzenie poprzez przewód USB do zasilacza. A następnie podłącz urządzenie do gniazda zasilania.

- Podczas ładowania urządzenia na wyświetlaczu migają kolejno jednostki poziomu ładowania baterii.
- Po naładowaniu na wyświetlaczu w sposób ciągły zaświecą się wszystkie jednostki baterii informujące o zakończeniu ładowania.
- Ładuj urządzenie wyłącznie, gdy bateria urządzenia rozładowuje się. Wydłuży to jego żywotność.

UWAGA! ZUŻYCIE AKUMULATORA PODCZAS EKSPLOATACJI URZĄDZENIA JEST NATURALNYM ZJAWISKIEM. ABY UTRZYMAĆ AKUMULATOR W DOBREJ KONDYCJI I WYDŁUŻYĆ JEGO ŻYWOTNOŚĆ, NALEŻY STOSOWAĆ SIĘ DO PONIŻSZYCH ZALECEŃ:

- Nie uruchamiaj urządzenia, jeśli akumulator jest rozładowany.
- Akumulator ładuj zgodnie z danymi o napięciu i prądzie ładowania podanymi na tabliczce znamionowej.
- Przed dłuższym okresem przechowywania naładuj akumulator do poziomu 50% oraz doładuj go co 3-4 miesiące. Jeśli w produkcie nie ma możliwości ustalenia konkretnego poziomu naładowania, rozładuj urządzenie, po czym ładuj je przez połowę czasu potrzebnego do pełnego naładowania. Pozostawienie rozładowanego akumulatora na dłuższy okres może skutkować jego uszkodzeniem lub utratą jego właściwości.
- Przy regularnym użytkowaniu urządzenia unikaj pełnego rozładowania akumulatora oraz zawsze ładuj go do pełna.
- Po naładowaniu akumulatora odłącz wtyczkę ładowarki od gniazda ładowania w urządzeniu.
- Nie pozostawiaj urządzenia w trakcie ładowania bez nadzoru.
- Używanie ładowarek oraz przewodów innych, niż zalecane w instrukcji z urządzeniem, może prowadzić do uszkodzenia produktu, a nawet do eksplozji akumulatora.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

- Przed czyszczeniem zakończ używanie urządzenia.
- Wagę oraz elektrody przetrzyj suchą ściereczką lub gąbką.
- Do czyszczenia nie używaj żrących środków chemicznych.
- Nie zanurzaj urządzenia w wodzie lub innych płynach.
- Waga powinna być zawsze sucha i przechowywana w bezpiecznym miejscu.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

PROBLEM	PRZYCZYNA	ROZWIĄZANIE
Urządzenie nie włącza się.	Akumulator w urządzeniu jest rozładowany.	Naładuj akumulator.
Waga nie wskazuje poprawnych odczytów.	Nieprawidłowe umieszczenie stóp na elektrodach pomiarowych.	Postępuj zgodnie z sekcją OBSŁUGA URZĄDZENIA, aby wyniki pomiarów były prawidłowe. Upewnij się, że stopy i waga są suche. Pozostań na wadze, aż waga odczyta wszystkie dane.
	Niezaktualizowana aplikacja Unique Health.	Zaktualizuj aplikację Unique Health do najnowszej wersji.
Połączenie z Bluetooth nie powiodło się.	Wyłączona funkcja Bluetooth w telefonie komórkowym.	Zresetuj połączenie Bluetooth. Upewnij się, że Bluetooth i GPS (tylko Android) jest włączony w Twoim urządzeniu.

Wyświetlacz nie uruchamia się.	Rozładowany akumulator.	Naładuj akumulator.
Urządzenie wyłącza się.	Waga jest przeciążona. Na wadze jest ponad 180 kg.	Używaj wagi zgodnie z sekcją „DANE TECHNICZNE”.

DEKLARACJA

ART-DOM Sp. z o.o. niniejszym oświadcza, że waga BS960 jest zgodna z odpowiednimi wymaganiami unijnego prawodawstwa harmonizacyjnego: dyrektywą 2014/53/UE i innym unijnym prawodawstwem harmonizacyjnym. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem:

<https://www.artdom.net.pl/deklaracja/BS960/>

EKOLOGICZNA I PRZYJAZNA DLA ŚRODOWISKA UTYLIZACJA

To urządzenie jest oznaczone, zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/19/UE z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE) symbolem przekreślonego kontenera na odpady:



Nie należy wyrzucać urządzeń oznaczonych tym symbolem razem z odpadami domowymi.

Urządzenie należy zwrócić do lokalnego punktu przetwarzania i utylizacji odpadów lub skontaktować się z władzami miejskimi.

UTYLIZACJA ZUŻYTYCH AKUMULATORÓW

Zgodnie z dyrektywą UE 2006/66/EC z późn. zm. o akumulatorach, produkt ten jest oznaczony symbolem przekreślonego kosza na śmieci. Symbol oznacza, że zastosowane w tym produkcie baterie lub akumulatory nie powinny być wyrzucane razem z normalnymi odpadami z gospodarstw domowych. Użytkownicy baterii i akumulatorów muszą korzystać z dostępnej sieci odbioru tych elementów, która umożliwia ich zwrot, recykling oraz utylizację.



Li-Ion

MOŻESZ POMÓC CHRONIĆ ŚRODOWISKO!

Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu.

WARUNKI GWARANCJI DOTYCZĄCE WAGI

1. ART-DOM Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (92-402) przy ul. Zakładowej 90/92 Numer Krajowego Rejestru Sądowego 0000354059 (Gwarant) gwarantuje, że zakupione urządzenie jest wolne od wad fizycznych. Gwarancja obejmuje tylko wady wynikające z przyczyn tkwiących w rzeczy sprzedanej (wady fabryczne).
2. Ujawniona wada zostanie usunięta na koszt Gwaranta w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia uszkodzenia do serwisu autoryzowanego lub punktu sprzedaży.
3. W wyjątkowych przypadkach, np. konieczności sprowadzenia części zamiennych od producenta, termin naprawy może zostać wydłużony do 30 dni.
4. Okres gwarancji dla użytkownika wynosi 24 miesiące od daty wydania towaru.

5. Towar przeznaczony jest do używania wyłącznie w warunkach indywidualnego gospodarstwa domowego.
6. Gwarancja nie obejmuje:
 - a. uszkodzeń powstałych na skutek używania urządzenia niezgodnie z instrukcją obsługi,
 - b. uszkodzeń mechanicznych, chemicznych lub termicznych,
 - c. napraw i modyfikacji dokonanych przez firmy lub osoby nieposiadające autoryzacji producenta,
 - d. części z natury łatwo zużywalnych lub materiałów eksploatacyjnych takich jak: baterie, żarówki, bezpieczniki, filtry, pokręta, półki, akcesoria,
 - e. instalacji, konserwacji, przeglądów, czyszczenia, odblokowania, usunięcia zanieczyszczeń oraz instruktażu.
7. O sposobie usunięcia wady decyduje Gwarant. Usunięcie potwierdzonej wady urządzenia nastąpi poprzez wykonanie naprawy gwarancyjnej lub wymianę urządzenia. Gwarant może dokonać naprawy, gdy kupujący żąda wymiany lub Gwarant może dokonać wymiany, gdy kupujący żąda naprawy, jeżeli doprowadzenie do zgodności towaru (urządzenia) zgodnie z udzieloną gwarancją w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Gwaranta. W szczególnie uzasadnionych wypadkach, jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Gwaranta może on odmówić doprowadzenia towaru do zgodności z udzieloną gwarancją i zaproponować inny sposób załatwienia reklamacji z gwarancji.
8. Wymiany towaru dokonuje punkt sprzedaży, w którym towar został zakupiony (wymiana lub zwrot gotówki) lub autoryzowany punkt serwisowy, jeżeli dysponuje taką możliwością (wymiana). Zwracane urządzenie musi być kompletne, bez uszkodzeń mechanicznych. Niespełnienie tych warunków może spowodować nieuznanie gwarancji.
9. W przypadku braku zgodności towaru z umową sprzedaży, kupującemu z mocy prawa przysługują środki ochrony prawnej ze strony i na koszt sprzedawcy, a gwarancja nie ma wpływu na te środki ochrony prawnej.
10. Niniejsza gwarancja obowiązuje na terytorium Polski.
11. Warunkiem dokonania naprawy lub wymiany urządzenia w ramach gwarancji jest przedstawienie dowodu zakupu oraz użytkowanie towaru zgodnie z informacjami zawartymi w instrukcji obsługi.

UWAGA!

Uszkodzenie lub usunięcie tabliczki znamionowej z urządzenia może spowodować nieuznanie gwarancji.

Cały czas udoskonalamy nasze produkty, dlatego mogą się one nieznacznie różnić od zdjęć przedstawionych na opakowaniu oraz w instrukcji obsługi. Przed przystąpieniem do użytkowania urządzenia przeczytaj instrukcję obsługi.

ART-DOM Sp. z o.o., ul. Zakładowa 90/92, 92-402 Łódź, info@artdom.net.pl. Numer Krajowego Rejestru Sądowego 0000354059.

