

pango

Inteligentny masażer talii i brzucha

PG-2645L

Importer i dystrybutor:
4cv Mobile Sp. z o.o. Sp. K.
ul. Broniewskiego 28
01-771 Warszawa
serwis@4cv.gsm.pl
wyprodukowano w ChRL

Shenzhen Pango Medical Electronics Co., Ltd

Tel.: +86-0755-33825988

Faks: +86-0755-33825989

Główna siedziba: No.25 1st Industry Zone, Fenghuang Road,
Xikeng Village, Henggang Town, Longgang District, Shenzhen,
Guangdong, Chiny

Strona internetowa: www.pan-go.com



- Zasilanie akumulatorem litowym
- Niska i średnia częstotliwość
- Ergonomiczna konstrukcja
- Nagrzewanie
- Czerwona lampka
- Efekt magnetyczny
- Szybkie ładowanie przez USB

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup inteligentnego masażera talii i brzucha. Był to ważny krok na drodze do poprawy stanu zdrowia. Produkt pomaga dbać o zdrowie poprzez umożliwianie wyboru symulacji efektów różnych aktywności sportowych w zależności od potrzeb w dowolnym miejscu i czasie. Dzięki urządzeniu dbanie o zdrowie jest przyjemne, wygodne i łatwe. Dołącz do nas już teraz! Przed rozpoczęciem użytkowania produktu należy dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi.

Zasadą działania produktu jest wysyłanie sygnału ruchu do skóry w celu ćwiczenia mięśni lędźwiowych i brzucha. Siła pracy urządzenia jest regulowana w zakresie niskiej częstotliwości. Produkt ma funkcję gorącego kompresu, wspomaga krążenie krwi, przyspiesza spalanie tłuszczu i zmniejsza poczucie zmęczenia, spełniając potrzeby różnych grup osób.

Mimo że produkt jest zasilany przez akumulator litowy, obowiązujące przepisy wymagają poinformowania o konieczności przerwania użytkowania w przypadku odczuwania jakiegokolwiek dyskomfortu. Produktu ponadto nie mogą używać kobiety w ciąży, osoby starsze, dzieci oraz pacjenci z rozrzedzonymi sercem. Szczegółowe informacje znajdują się w rozdziale „Środki ostrożności” w tej instrukcji.

Cechy

- Ergonomiczna, piękna konstrukcja, dopasowana do krzywizny talii i brzucha;
- Bezprzewodowy pilot, wyświetlacz LCD i przyjazna dla użytkownika obsługa;
- Synchroniczne ćwiczenia z użyciem gorącego kompresu, impulsu elektrycznego o niskiej częstotliwości o efektu magnetycznego w celu stworzenia kompleksowego pola energetycznego;
- Gorący kompres może poprawiać krążenie krwi i przyspieszać spalanie tłuszczu; temperatura (niska, średni i wysoka) jest regulowana na żądanie i w zależności od środowiska pracy urządzenia;
- Widoczne czerwone światło o długości fali 600~650 nm w celu poprawy lokalnego krążenia krwi;
- 2 tryby pracy automatycznej z masażem z użyciem impulsu elektrycznego i 4 tryby ręcznego masażu impulsem elektrycznym do wyboru w zależności od potrzeb, co oznacza możliwość dostosowania do szerokiej grupy użytkowników;
- Urządzenie wyposażone jest w kilka wbudowanych magnesów;
- Inteligentna technologia podświetlania 3D i łatwo regulowane elektrody dostosowane do krzywizny talii i brzucha sprawiają, że użytkowanie jest bardziej komfortowe.
- Szybkie ładowanie przez USB, ułatwiające obsługę urządzenia.

Parametry techniczne i specyfikacje

1. Specyfikacje produktu

Nazwa: Inteligentny masażer talii i brzucha

Model: PG-2645L

Źródło ładowania: 5 VDC, 1 A (USB)

Moc znamionowa: 5 W

Akumulator litowy jednostki głównej: 3,7 VDC, 2000 mAh

Mała bateria pilota: CR2032 3 VDC

Wymiary opakowania: 265 X 130 X 75 mm

Waga: ok. 700 g

2. Normalne warunki pracy:

Temperatura otoczenia: +5°C~+40°C;

Wilgotność względna: ≤80%; Ciśnienie atmosferyczne: 86 kPa - 106 kPa;

3. Wydajność elektryczna

Częstotliwość impulsu: 1 Hz - 1000 Hz;

Częstotliwość modulacji impulsów: (4~10) KHz

Szerokość impulsu: 20 μs - 400 μs;

Pojedyncza moc impulsu dla maksymalnej amplitudy wyjścia: >7 μC;

Maksymalna energia wyjściowa pojedynczego impulsu: ≤300 mJ;

Efektywna wartość maksymalnej amplitudy wyjściowej: ≤25 V (50 mA);

Szczytowe napięcie wyjściowe dla pomiaru otwartej pętli: ≤500 V;

Wpływ na otwarty obwód i zwarcie zacisku wyjściowego: Wytrzymuje wpływ na otwarty obwód i zwarcie zacisku wyjściowego oraz nie można osłabić jego właściwej wydajności.

Regulacja amplitudy wyjściowej: Ciągła i zrównoważona, minimalna moc

wyjściowa przekracza 2% maksymalnej mocy wyjściowej.

Impedancja znamionowa obciążenia: 500 Ω, dopuszczalne odchylenie ±10%;

Czas trwania: Regulowany w zakresie od 15 do 30 minut;

Temperatura gorącego kompresu: W zakresie 38°C~ 45°C (w środowisku 23°C±2°C).

4. Warunki transportu i przechowywania

Zakres temperatury otoczenia: -20°C- +55°C;



Zakres wilgotności względnej: ≤93%;

Zakres ciśnienia atmosferycznego: 50 kPa - 106 kPa.

Elementy produktu

1. Pilot	4. Podręcznik użytkownika
2. Jednostka główna	5. Mała bateria Cr2032
3. Połączenie USB	

Schemat produktu

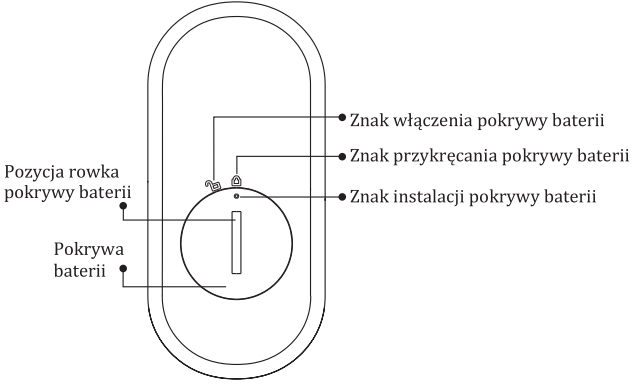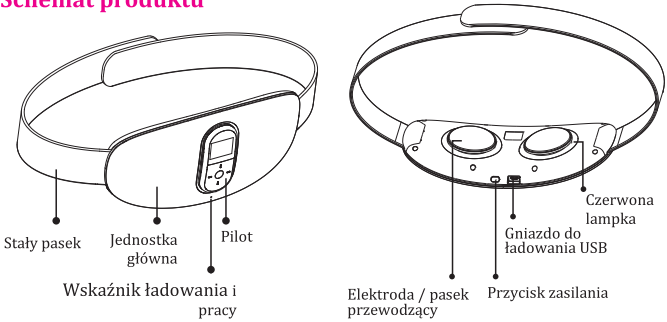

Środki ostrożności


Produkt może być stosowany przez osoby zdrowe w wieku od 18 do 60 lat jako urządzenie do ćwiczeń brzucha i talii dla osób otyłych, pacjentów z zatwardzeniem i schorzeniami lędźwiowymi. Przed rozpoczęciem użytkowania produktu należy dokładnie przeczytać poniższe ostrzeżenia:

1. Nie wolno używać w poniższych warunkach

- Używanie wraz z innymi urządzeniami elektronicznymi (takimi jak rozrusznik serca, elektrokardiograf itp.) może spowodować niebezpieczeństwo;
- Z urządzenia nie mogą korzystać kobiety w ciąży oraz pacjenci z alergiami skórnymi, chorobami serca, nadciśnieniem, złośliwymi nowotworami i poważnymi schorzeniami naczyniowo-mózgowymi;
- Urządzenia nie mogą używać osoby chore na nowotwór, epileptycy lub inne osoby z zaburzeniami czynnościowymi;
- Z urządzenia nie mogą korzystać osoby z krwawieniem żołądkowo-jelitowym, z marskością wątroby lub chorobami śledziony;
- Nie wolno użytkować produktu w pobliżu urządzeń wytwarzających krótkie fale lub mikrofały;
- Produktu nie mogą używać osoby, które brały lub którym podawano leki przed długi okres;

2. Przed użyciem należy mieć na uwadze poniższe warunki:

- Kobiety mogą rozpocząć użytkowanie urządzenia po co najmniej sześciu tygodniach po porodzie i po konsultacji z lekarzem;
- Kobiety mogą rozpocząć użytkowanie urządzenia po co najmniej 3 miesiącach po cesarskim cięciu i po konsultacji z lekarzem;

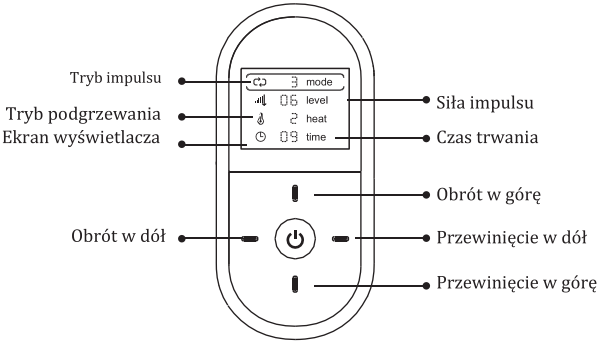

3. W następujących przypadkach przed użyciem należy skonsultować się z lekarzem:

- a) Osoby odczuwające dyskomfort brzuszny;
- b) Pacjenci z poważnymi chorobami lub obecnie odczuwający dolegliwości;
- c) Osoby, które niedawno przeszły operację;
- d) Osoby z cukrzycą;
- e) Dzieci;
- f) Osoby z urazami mięśniowymi;
- g) Pacjenci, którzy chcą użyć produktu, aby wrócić do zdrowia.

4. W trakcie użytkowania należy mieć na uwadze poniższe kwestie:

- a) Produkt może być używany wyłącznie w talii lub na brzuchu;
- b) Nie wolno zakładać go na głowę, piersi, serce i inne ważne części ciała;
- c) Nie wolno go używać w przypadku problemów skórnych, takich jak urazy, alergie, zakażenia itp.;
- d) Nie używać produktu na miejscach ciała, w których obecne są urazy lub siniaki;

5. Przed dostosowaniem pozycji produktu w trakcie użytkowania należy go najpierw wyłączyć, aby uniknąć możliwego lekkiego porażenia elektrycznego.

6. Inne istotne uwagi

- a) Należy trzymać produkt z daleka od dzieci;
- b) Nie wolno go używać wraz z innymi produktami;
- c) Należy przerwać użytkowanie produktu i skontaktować się z lekarzem w przypadku jakichkolwiek zawrotów głowy lub kołatania serca;
- d) Przy pierwszym użytkowaniu stymulacja mięśni może powodować dyskomfort. Należy rozpocząć od niskiej częstotliwości;
- e) Podczas użytkowania należy używać najbardziej komfortowego biegu i intensywności, aby uniknąć nadmiernej dynamiki;
- f) Przed użyciem urządzenia należy wyjąć kolczyk z pępka.

7. Produkt należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi ochrony środowiska, aby ograniczyć zanieczyszczenie środowiska.


Instrukcja obsługi

1. Przygotowania przed użytkowaniem

- ① Należy upewnić się, że bateria CR2032 została prawidłowo włożona do pilota (tak, jak ukazano poniżej); należy użyć monety lub prostego śrubokręta, aby odkręcić pokrywę baterii na rowku, obrócić do „☒”, aby poluzować pokrywę baterii, a następnie

przesunąć prawą (dodatnią) stronę baterii CR2032 w górę, włożyć ją do uchwytu baterii pilota, a następnie założyć pokrywę baterii. Należy wyrównać znak na pokrywie baterii z „☒” i przykręcać w stronę „☒”.

Schemat instalacji baterii CR2032

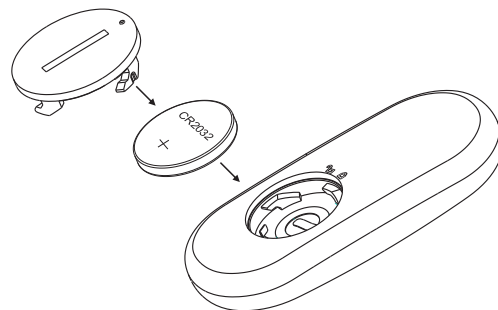

- ② Podłączyć kabel USB do przenośnego urządzenia ładującego lub gniazda USB komputera (napięcie 5 VDC), a następnie włożyć wtyczkę micro USB do gniazda ładującego jednostki głównej; wówczas wskaźnik ładowania zacznie migać. Po pełnym naładowaniu wskaźnik naładowania będzie się świecił. Jeśli poziom naładowania wbudowanego akumulatora litowego masażera jest wystarczający, należy przejść do kolejnego kroku.
- 2. Włączyć masażer i założyć pasek przewodzący ciasno na skórę talii lub brzucha (nie używać na ubraniach). Prawidłowo zamocować hak na obu stałych paskach za pomocą pętli i odpowiednio dostosować naciąg stałych pasków, tak aby nie były ani zbyt ciasne, ani zbyt luźne.
- 3. Instrukcje dotyczące przycisków pilota
 - ① przycisk „☒”: Włączanie/wyłączanie zasilania
 - ② przycisk „⬆️”: Góra/dół
 - ③ przycisk „⬅️”: lewo, aby obrócić w dół, prawo, aby obrócić w górę
- 4. Wcisnąć przycisk „☒”, aby włączyć; pilot wyda z siebie pojedynczy sygnał dźwiękowy, podświetlenie ekranu się włączy, a wskaźnik pracy jednostki głównej będzie powoli migał; zastosowane będą następujące ustawienia:

- A. Automatyczny tryb połączony 1 masażu;
- B. Siła masażu stopnia 0;
- C. Średni stopień ogrzewania;
- D. Czas 15 minut
- E. Czerwona lampka zapalona

Aby zatrzymać pracę, należy wcisnąć przycisk „”.

Uwaga:

- ① Podczas używania pilota prawidłowy odbiór sygnału przez hosta będzie potwierdzany sygnałem dźwiękowym; w przeciwnym wypadku należy ponownie użyć pilota.
- ② Jeśli nie wykonana zostanie żadna czynność w ciągu 10 sekund po włączeniu, pilot przejdzie w stan lekkiego podświetlenia, aby oszczędzać baterię; ekran znowu podświetli się normalnie po ponownym użyciu pilota.

5. Regulacja siły masażu

Wcisnąć „Up” („W górę”) lub „Down” („W dół”), aby wybrać „”, a następnie wcisnąć prawy przycisk „”, by zwiększyć siłę masażu. Jednokrotne wciśnięcie zwiększa siłę o jeden stopień (maksymalnie 16 stopni). Na wyświetlaczu ukazana zostanie odpowiednia wartość. Należy wcisnąć lewy przycisk „”, aby zmniejszyć siłę masażu, czemu również towarzyszyło będzie wyświetlenie stosownej wartości. Domyślna siła po włączeniu to „0”. Masaż zostanie wykonany ze wskazaną siłą. W trakcie pierwszego użytkowania należy stopniowo regulować siłę, tak aby znaleźć komfortowe ustawienie.

6. Przełączanie trybów masażu

Wcisnąć „Up” („W górę”) lub „Down” („W dół”), aby wybrać „”, a następnie wcisnąć prawy lub lewy przycisk „”, by przełączać pomiędzy 6 trybami. Trybem domyślnym po włączeniu jest tryb 1 (automatyczny tryb połączony 1). Na ekranie wyświetlona zostanie informacja o właściwym trybie. Dostępne tryby masażu wymienione są poniżej:

- Tryb 1: Automatyczny połączony 1, tryb cyrkulacji 3, tryb 4, tryb 5;
- Tryb 2: Automatyczny połączony 2, tryb cyrkulacji 4, tryb 3, tryb 6;
- Tryb 3: Symulacja masażu manipulacyjnego;
- Tryb 4: Symulowany masaż z akupresurą;
- Tryb 5: Symulacja masażu łagodzącego;
- Tryb 6: Symulacja masażu z oklepywaniem.

Automatyczne tryby połączone 1 i 2 są trybami ręcznymi przeprowadzanymi po cyklu automatycznym. Program przełącza się co minutę. Są to zalecane tryby.

7. Używanie funkcji ogrzewania

Wcisnąć „Up” („W górę”) lub „Down” („W dół”), aby wybrać „”, a następnie wcisnąć prawy lub lewy przycisk „”, by przełączać pomiędzy trybami niskiego ogrzewania (1), średniego ogrzewania (2) i wysokiego ogrzewania (3). Właściwy tryb zostanie wyświetlony na ekranie. „0” oznacza brak ogrzewania, a domyślnym ustawieniem jest średnie ogrzewanie. Wraz z włączeniem ogrzewania zapala się czerwona lampka, a jej jasność nie ulega zmianie w zależności od pozycji ogrzewania.

8. Regulacja czasu trwania

Wcisnąć „Up” („W górę”) lub „Down” („W dół”), aby wybrać „”, a następnie wcisnąć prawy lub lewy przycisk „”, by przełączać pomiędzy trzema trybami ogrzewania z czasem trwania od 5 do 30 minut. Domyślnym czasem po włączeniu jest 15 minut. Należy wcisnąć przycisk zasilania „”, aby uruchomić ponownie.

Plan referencyjny

Tydzień	Poniedziałek	Wtorek	Środa	Czwartek	Piątek	Sobota	Niedziela
1	Siła 3	Odpoczynek	Siła 2	Odpoczynek	Siła 4	Siła 4	Siła 4
2	Odpoczynek	Siła 4	Siła 4	Odpoczynek	Siła 8	Siła 8	Siła 8
3	Odpoczynek	Siła 9	Siła 9	Odpoczynek	Siła 9	Siła 10	Siła 10
4	Odpoczynek	Siła 9	Siła 9	Odpoczynek	Siła 9	Siła 9	Siła 10

Należy wybrać najbardziej komfortową siłę w zależności od sytuacji. Należy zapisywać swój stan każdego dnia i przechowywać taką ewidencję w widocznym miejscu, aby zwiększyć dynamikę terapii. Konsekwentne stosowanie urządzenia pozwoli osiągnąć ostateczny cel.

Zaleca się, aby korzystać z urządzenia raz lub dwa razy w ciągu dnia po 15 minut w przypadku masażu impulsami elektrycznymi lub 30 minut w przypadku masażu rozgrzewającego.

Obsługa małej baterii pilota

1. W pilocie znajduje się mała bateria CR2032, która wystarczy na około 3 miesiące pracy (30 minut każdego dnia).
2. Gdy podświetlenie ekranu LCD pilota przyciemni się lub jednostka główna przestanie reagować po wciśnięciu przycisku, oznacza to, że bateria wyczerpuje się; należy ją wówczas wymienić na nową;


3. Jeśli produkt nie jest używany przez dłuższy czas, należy wyjąć baterię. W przeciwnym wypadku może dojść do awarii urządzenia z powodu wycieku baterii;
4. Nie wolno używać baterii innych niż ta wskazana.
5. Nie wolno mylić dodatniej elektrody baterii z ujemną – dodatnia musi znajdować się na górze, a ujemna na dole.
6. Nie należy używać baterii w temperaturze przekraczającej 45°C, ponieważ może to negatywnie wpłynąć na jej wydajność i żywotność.
7. Baterie należy utylizować zgodnie z właściwymi miejskimi przepisami dotyczącymi ochrony środowiska.

Obsługa akumulatora

1. Jeśli w trakcie użytkowania inteligentny masażer talii i brzucha wyda 3 sygnały dźwiękowe, oznaczać to będzie, że poziom naładowania wbudowanego akumulatora litowego jest niewystarczający. Należy wówczas naładować go za pomocą kabla USB. W trakcie ładowania zielona lampka sygnalizacyjna będzie szybko migała. Po naładowaniu zielona lampka sygnalizacyjna zapali się na stałe. Pełne ładowanie trwa od dwóch do trzech godzin.
2. Po pełnym naładowaniu z urządzenia można korzystać od 3 do 4 dni (30 minut każdego dnia);
3. W przypadku normalnego użytkowania żywotność akumulatora będzie wynosiła nie mniej niż 500 cykli ładowania i rozładowywania, tzn. około 3 lat (zakładając, że urządzenie będzie używane przez 30 minut każdego dnia).
4. Gdy akumulator nie jest używany przez dłuższy czas, jego żywotność ulega skróceniu. Zaleca się, aby go ładować co najmniej raz w miesiąc.

Wymowanie akumulatora

1. Wbudowany w produkt akumulator litowy zawiera substancje, które mogą zanieczyścić środowisko. Dlatego należy go wyjąć przed zutylizowaniem produktu.
2. Przed zdemontowaniem produktu i wyjęciem akumulatora litowego należy wyłączyć lub odciąć zasilanie urządzenia.
3. Poniżej przedstawiono szczegółową instrukcję wymowania akumulatora litowego. Należy zdemontować produkt zgodnie z krokami ①–③ i wyjąć akumulator litowy.
4. Wyjęty akumulator należy oddać do zakładu utylizacji lub recyklingu zgodnie z lokalnymi przepisami.

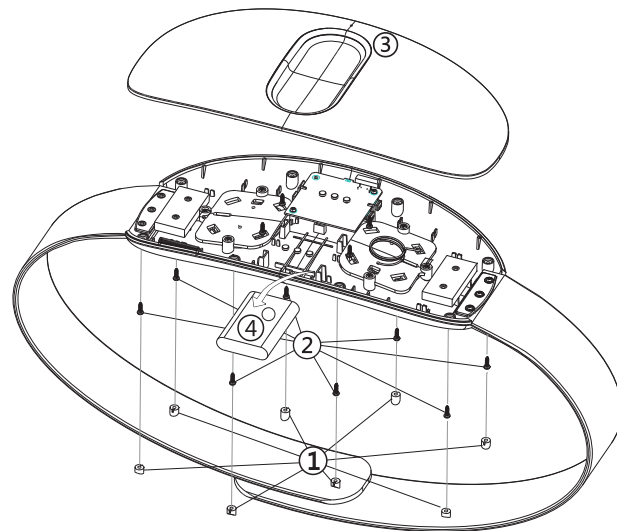

Czyszczenie, konserwacja i przechowywanie

1. Czyszczenie i konserwacja

- 1) Gdy jednostka główna ulegnie zabrudzeniu, należy ją przetrzeć suchą, miękką szmatką lub suchym ręcznikiem.
- 2) Po każdym użyciu należy wyczyścić pasek przewodzący za pomocą suchej, miękkiej szmatki lub ręcznika i czystej wody. W przypadku szczególnie zabrudzonych miejsc należy użyć miękkiej szmatki z alkoholem medycznym (stężenie alkoholu 75%) w celu przetarcia lub dezynfekcji.

2. Przechowywanie

- 1) Produkt należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- 2) Nie przechowywać produktu w miejscu, na które oddziałują bezpośrednie promienie słoneczne, wysokie temperatury lub wilgoć.
- 3) Produkt należy przechowywać w suchym i wentylowanym miejscu.
- 4) Nie wolno samowolnie demontować, naprawiać ani modyfikować produktu, ponieważ może to doprowadzić do wypadku lub uszkodzenia urządzenia.

Częste awarie i rozwiązania

Usterka	Kwestie do sprawdzenia	Rozwiązania
Pilot nie uruchamia urządzenia.	Sprawdzić, czy bateria pilota nie jest rozładowana.	Włożyć nową baterię CR2032.
Wyświetlacz pilota działa prawidłowo, ale jednostka główna nie reaguje.	Sprawdzić, czy poziom naładowania wbudowanego akumulatora jest wystarczający.	Jeśli poziom naładowania wbudowanego akumulatora jest niski, należy naładować go za pomocą kabla USB.
	Czy funkcja ładowania działa prawidłowo?	Sprawdzić źródło ładowania (przenośne źródło energii, gniazdo USB komputera itp.); napięcie wyjściowe wynosi 5 V; po prawidłowym podłączeniu wskaźnik ładowania masażera będzie migał.
	Czy jednostka główna była noszona przed ponad 2 godziny po użyciu?	Należy zdjąć jednostkę główną, założyć ją ponownie i uruchomić urządzenie.
Urządzenie nie ładuje się lub niewyświetlana jest informacja o ładowaniu.	Czy prawidłowo podłączono kabel USB?	Sprawdzić, czy wtyczki po obu stronach kabla USB są prawidłowo włożone.
	Czy moc ładowania jest wystarczająca?	Sprawdzić, czy moc źródła ładowania (przenośne źródło energii, ładowarka itp.) jest prawidłowa.
Wyświetlacz jednostki głównej działa prawidłowo, ale użytkownik nie czuje masażu.	Czy elektrody jednostki głównej prawidłowo stykają się ze skórą?	Elektrody jednostki głównej muszą mieć bezpośredni kontakt ze skórą.
	Czy pomiędzy elektrodami i skórą znajduje się ubranie?	Należy zdjąć lub odciągnąć ubranie.
	Czy wyregulowano siłę masażu?	Po uruchomieniu domyślnie ustawiona jest siła 0, dlatego należy ją wyregulować. Jeśli niektórzy użytkownicy nic nie odczuwają przy stopniu 1 lub 2, należy odpowiednio zwiększyć siłę.

		Jeżeli masażer nie działa, należy dotknąć dwóch elektrod dwoma palcami; jeśli ten stan będzie się utrzymywał, należy przeprowadzić konserwację urządzenia.
Poczucie przesywającego bólu	Czy skóra brzucha zetknęła się z elektrodami jednostki głównej?	Przetrzeć skórę brzucha mokrym ręcznikiem i sprawić, by elektrody stykały się ze skórą, a następnie prawidłowo wyregulować siłę i tryb masażu.
	Czy czas trwania masażu jest zbyt długi?	Masaż należy przeprowadzać przez 10 do 20 minut raz lub maksymalnie dwa razy dziennie.
	Czy siła masażu jest zbyt duża?	Należy odpowiednio zmniejszyć siłę.
	Czy skóra jest wrażliwa na elektrody?	Upewnić się, że użytkownik nie ma alergii skórnych; należy skrócić czas masażu w przypadku użytkowników z lekką alergią. Użytkownicy z silną alergią przed użyciem produktu powinni poddać się odczulaniu.
	Zbyt zimna pogoda i za bardzo sucha skóra.	Przetrzeć skórę i powierzchnie elektrod wilgotnym ręcznikiem.
Słabe nawodnienie	Użytkowanie w późnych godzinach wieczornych	Należy użyć urządzenia następnego dnia, ponieważ późnym wieczorem ilość elektrolitów spada.
	Czy skóra brzucha miała bliski kontakt z elektrodami?	Należy zbliżyć elektrody do skóry i odpowiednio wyregulować siłę.
	Czy na elektrodach są zabrudzenia lub plamy tłuszczu?	Wyczyścić powierzchnie elektrod.
	Czy poziom naładowania akumulatora jest wystarczający?	Jeśli poziom naładowania akumulatora jest niewystarczający, należy użyć zewnętrznego źródła zasilania, aby go naładować.
Po użyciu widoczna jest czerwona kropka lub pęcherz.	Czy w trakcie użytkowania wystąpił przesywający ból lub używana była jakaś inna maść?	Należy przerwać użytkowanie produktu i nałożyć krem z masy perłowej lub olej wężowy.

Najczęściej zadawane pytania

P: Czy kobiety w połogu mogą korzystać z produktu?

O: Tak. Kobiety mogą rozpocząć użytkowanie urządzenia po co najmniej 6 tygodniach po porodzie i po konsultacji z lekarzem. W przypadku cesarskiego cięcia kobiety muszą uzyskać zgodę lekarza po 3 miesiąca po porodzie.

P: Czasami po użyciu urządzenia występują niekomfortowe podrażnienia skóry. Jak ich uniknąć?

O: 1. Należy upewnić się, że masażer był założony prawidłowo i dostosować pozycję łąt w zależności od sytuacji.

2. W razie konieczności należy lekko zamoczyć powierzchnię łąt, aby zwiększyć komfort. Należy pamiętać, aby wcześniej wyłączyć urządzenie i nie oblać wodą sterownika w trakcie pracy.

3. Jeśli skóra jest zbyt wysuszona, należy włączyć funkcję gorącego kompresu na 5 do 10 minut i dopiero wtedy użyć funkcji masażu impulsami elektrycznymi.

P: Skóra jest zaczerwieniona po użyciu produktu. Czy to jest normalne?

O: Jest to normalne zjawisko. Z jednej strony przy niskiej częstotliwości krew będzie krążyła szybciej, co spowoduje zaczerwienienie. Z drugiej mocne dociśnięcie pasa może zostawić sześć czerwonych śladów na skórze. Nie ma powodów do zmartwień – takie ślady stopniowo znikną.

Jeśli taki czerwony ślad będzie zbyt głęboki, należy poluzować pas i wybrać mniejszą siłę masażu. Jeśli to nie pomoże, należy przerwać użytkowanie urządzenia i skontaktować się z lekarzem.

P: Czy używanie masażera może powodować ból mięśni?

O: Podobnie, jak wszystkie aktywności sportowe, użytkowanie produktu może powodować ból mięśni o różnym stopniu nasilenia. Jest to normalne zjawisko, które może trwać od 1 do 2 dni. Należy dostosować częstotliwość użytkowania w zależności od sytuacji.

W razie problemów należy skonsultować się z naszym przedstawicielem sprzedaży.

Deklaracja zgodności

Producent oświadcza, że urządzenie PG-2645L jest zgodne z dyrektywą 2014/30/UE (EMC) oraz dyrektywą 2011/65/UE (RoHS)