

Götze & Jensen



MASAŻER FM800

Instrukcja obsługi
i warunki gwarancji

WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA I ZAGROŻENIA

1. Należy zachować szczególną ostrożność, gdy w pobliżu urządzenia znajdują się dzieci!
2. Masażer powinien być nadzorowany przez dorosłych, aby nie był traktowany przez dzieci jako zabawka.
3. Z urządzenia nie powinny korzystać:
 - a. Kobiety w ciąży;
 - b. Osoby z chorobami zakaźnymi skóry;
 - c. Osoby cierpiące na jakiegokolwiek choroby skóry;
 - d. Pacjenci z osteoporozą;
 - e. Osoby z wysoką gorączką;
 - f. Pacjenci z chorobami serca i z elektronicznymi implantami medycznymi, takimi jak stymulator serca;
 - g. Osoby znajdujące się pod wpływem alkoholu lub środków odurzających;
 - h. Pacjenci, którzy niedawno przeszli operację, mogą korzystać z urządzenia tylko po konsultacji z lekarzem.
4. Użycie akcesoriów niezalecanych przez producenta może spowodować uszkodzenie urządzenia, pożar lub obrażenia ciała.
5. Nie należy podejmować się samodzielnych napraw urządzenia oraz modyfikowania produktu.
6. Nie należy zanurzać urządzenia, przewodu, wtyczki w wodzie i w innych płynach – przewód zasilający i wtyczka muszą być zawsze suche!
7. Urządzenie powinno być używane przez maksymalnie 15 minut, po czym należy je wyłączyć na przynajmniej 15 minut, zanim zostanie ponownie włączone.
8. Jeśli ładowanie urządzenia zostanie zakończone, należy odłączyć je z sieci, zawsze trzymając palcami za plastikową oprawę wtyczki, a nie za przewód.
9. Masażer jest przeznaczony wyłącznie do użytku domowego i nie może być używany do zabiegów o charakterze medycznym.
10. Niniejszy sprzęt może być użytkowany przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat i przez osoby o obniżonych możliwościach fizycznych, umysłowych i osoby o braku doświadczenia i znajomości sprzętu, jeżeli zapewniony zostanie nadzór lub instruktaż odnośnie do użytkowania sprzętu w bezpieczny sposób, tak aby

związane z tym zagrożenia były zrozumiałe. Dzieci nie powinny bawić się sprzętem. Dzieci bez nadzoru nie powinny wykonywać czyszczenia i konserwacji sprzętu.

11. Zawsze należy stosować urządzenie z założoną końcówką.
12. Należy unikać kontaktu palców oraz włosów z końcówką.
13. Nigdy nie przykładać dłoni do otworu urządzenia, podczas gdy urządzenie jest włączone.
14. Nie używać masażera na twarzy i na innych wrażliwych częściach ciała (np. bezpośrednio na kręgosłupie).
15. Podczas masażu należy delikatnie przesuwac urządzenie pomiędzy punktami, nie zatrzymując się w jednym miejscu na dłuższy czas. Przetrzymanie działającej końcówki w jednym miejscu może skutkować poparzeniami i uszkodzeniami skóry.
16. Nigdy nie należy używać urządzenia i jego akcesoriów z nadmierną siłą.
17. Nie należy używać urządzenia podczas jego ładowania.
18. Używanie baterii litowo-jonowych wiąże się z pewnym ryzykiem. Należy być świadomym ryzyka nieprawidłowego działania, pożaru i obrażeń ciała podczas nieprawidłowego użytkowania baterii.
19. Jeśli akumulator zacznie przeciekać, należy unikać kontaktu ze skórą lub oczami. W przypadku kontaktu należy przemyć miejsce wodą i zwrócić się o pomoc do lekarza.
20. W przypadku wyczucia specyficznego zapachu lub dymu wydobywającego się z baterii, należy ją natychmiast odłączyć, jeśli to możliwe oraz odsunąć się na bezpieczną odległość.
21. Nie wolno ładować uszkodzonego akumulatora.
22. Nie wrzucać akumulatorów do ognia.
23. Ładowanie akumulatorów powinno odbywać się w zakresie temperatur 15-25°C.
24. Do ładowania urządzenia należy używać przewodu dołączonego do zestawu.
25. Urządzenie przeznaczone jest wyłącznie do użytku w pomieszczeniach. Nie należy narażać urządzenia na szkodliwe warunki atmosferyczne.



26. Przechowuj urządzenie, jego akcesoria i opakowanie z dala od zasięgu dzieci
27. Nie używaj aparatu na częściach ciała z siniakami lub jeśli występuje ból lub nietypowe reakcje organizmu

28. Nie używaj tego urządzenia na skórze mokrej lub brudnej.
29. Aparat może być stosowany w miejscach przykrytych ubraniami.
30. Trzymaj urządzenie z dala od ognia i źródeł ciepła.
31. Nie należy używać urządzenia w środowisku o wysokiej wilgotności, takim jak łazienka.
32. Nie pozostawiać ładującego się urządzenia bez nadzoru.
33. Ładować w dobrze wentylowanym pomieszczeniu.
34. Podłączaj urządzenie tak, aby nie można go było uszkodzić oraz aby nie stanowiło zagrożenia dla ludzi i zwierząt.
35. Produkt nie jest przeznaczony do użytkowania na zwierzętach.
36. Nie wykorzystuj urządzenia do celów innych niż masowanie części ciała.
37. Nie modyfikuj i nie naprawiaj urządzenia. Naprawy może dokonywać jedynie autoryzowany serwis producenta
38. Nie należy używać urządzenia w przypadku jakiegokolwiek widocznego uszkodzenia.
39. Nie należy używać urządzenia gdy zostanie ono upuszczone na podłogę lub uderzone.
40. W przypadku nieprawidłowego działania należy wyłączyć urządzenie i nie podejmować prób samodzielnej naprawy.
41. Przed podłączeniem zasilacza do sieci elektrycznej, należy upewnić się, że informacje znajdujące się na tabliczce znamionowej zasilacza są zgodne z parametrami sieci elektrycznej stosowanej przez użytkownika.
42. Nie należy podłączać lub odłączać urządzenia od źródła zasilania mokrymi rękami.
43. Urządzenie należy czyścić wyłącznie lekko wilgotną (nie mokrą) ściereczką. Nie należy używać materiałów ściernych, alkoholu, rozpuszczalników

WPROWADZENIE

Dziękujemy za zaufanie, jakim nas Państwo obdarzyli, dokonując zakupu urządzenia marki **Götze & Jensen**. Jesteśmy przekonani, że to bardzo dobrej jakości urządzenie zapewni Państwu dużo radości i satysfakcji z jego użytkowania.

NALEŻY DOKŁADNIE PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ OBSŁUGI I JEJ PRZESTRZEGAĆ!

To urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego lub podobnego nie dotyczącego celów komercyjnych. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku użytkowania niewłaściwego lub niezgodnego z przeznaczeniem.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Model	FM800
Akumulator	Li-ion 14.8V 2600mAh 38.48 Wh
Zasilanie	3.6 V - 25.2 V
Moc	1.8 W - 50.4 W
Ilość poziomów	20
Prędkość	1000-3200 obr./min
Maksymalny moment obrotowy	80 mN/m
Amplituda	8 mm
Czas pracy	Do 6 godzin
Czas ładowania	Do 4 godzin
Ilość wymiennych końcówek	13
Rodzaje masażu	Punktowy Antycellulitowy Wibracyjny Relaksacyjny Ostukujący
Końcówka grzejąca	
Wejście	5 V=1 A
Czas działania	do 75 minut
Czas ładowania	do 3 godzin
Akumulator	Li-Ion 3.7 V 900 mAh 3.33 Wh

OPIS URZĄDZENIA

1. Panel sterowania.
2. Wskaźnik naładowania.
3. Gniazdo zasilania.
4. Włącznik główny masażera.
5. Etui.
6. Końcówka sferyczna.
7. Końcówka płaska z wypustkami.
8. Końcówka widełkowa.
9. Końcówka punktowa.
10. Końcówka poduszkowa z wypustkami.
11. Końcówka spłaszczona.
12. Końcówka punktowa z wypustkami.
13. Końcówka łopatkowa.
14. Końcówka korkowa.
15. Końcówka stożkowa.
16. Końcówka łukowa.
17. Końcówka chłodząca.
18. Końcówka grzejąca.
19. Ładowarka.



MONTAŻ

Przed montażem lub demontażem końcówek upewnij się, że urządzenie jest wyłączone. Wybierz jedną z dostępnych końcówek masujących, włóż ją do otworu masażera oraz dociśnij. Nieprawidłowo zamontowana końcówka może wypaść z masażera podczas pracy. Aby zdemontować końcówkę należy ją wyciągnąć poprzez pociągnięcie jej.

UWAGA! POD ŻADNYM POZOREM NIE PRÓBUJ MONTOWAĆ LUB DEMONTOWAĆ KOŃCÓWEK PODCZAS PRACY URZĄDZENIA. MOŻE TO SIĘ SKOŃCZYĆ OBRAŻENIAMI CIAŁA UŻYTKOWNIKA LUB USZKODZENIEM URZĄDZENIA.

WYMIENNE KOŃCÓWKI

- **Końcówka spłaszczona „łopatkowa”** - Służy przede wszystkim do masażu rozluźniającego w dowolnym miejscu na ciele. Dzięki swemu kształtowi dociera do najgłębszych partii mięśniowych. Przyspiesza regenerację mięśni po treningach.
- **Końcówka widelkowa „U”** - Przeznaczona do masażu mięśni węższych i długich (np. prostownik i czworoboczny grzbietu, brzuchaty tydki). Umożliwia także pracę na tkankach sąsiadujących ze ścięgmem Achillesa. Zaokrąglone zakończenia sprawiają, że końcówka płynnie przesuwają się po ciele.
- **Końcówka płaska „T” z wypustkami** - Idealna do głębokiego masażu większych powierzchni ciała (np. pleców, mięśni ud i pośladków). Dzięki wypustkom znakomicie relaksuje i poprawia krążenie. Przy regularnym używaniu wygładza skórę i pomaga w walce z cellulitem.
- **Końcówka punktowa „pocisk” i Końcówka punktowa „pocisk” z wypustkami** - Bardzo precyzyjne, wykonane z twardego tworzywa i przeznaczone do masażu punktów spustowych (zgrubień na tkance mięśniowej powodujących ból, często promieniujący do innych obszarów ciała). Dociera do najtrudniej położonych partii mięśniowych.
- **Końcówka poduszkowa „tłumik” z wypustkami** - Dedykowana czułym miejscom oraz obszarom położonym blisko kości. Działa bardzo delikatnie. Idealnie sprawdzi się do masażu ciała ze skłonnościami do uszkodzeń (np. pękające naczynka).

- **Kończówka sferyczna „kula”** - Najbardziej uniwersalna ze wszystkich kończówek. Przeznaczona do masażu wszystkich części ciała. Najczęściej używa się jej do powierzchniowej pracy o umiarkowanej intensywności.
- **Kończówka punktowa „stożek”** - Stożek pozwala na bardzo precyzyjny, głęboki masaż punktowy i najczęściej stosowany jest do rozmasowywania bolesnych zgrubień w tkankach mięśniowych lub małych partii mięśni.
- **Kończówka łukowa „szerokie T” z wypustkami** - Masaż kończówką łukową z wypustkami przy regularnym stosowaniu wspiera walkę z opuchlizną i bolesnością nóg po stojącej pracy, jeździe na rowerze i bieganiu. Pomaga również szybciej pozbyć się zakwasów z okolic brzucha oraz pleców.
- **Kończówka korkowa „pazur”** - Kończówka o najbardziej sprężystej budowie, przeznaczona do masażu mięśni w okolicach kości.
- **Kończówka łopatkowa „wypukła”** - Głowica służąca do rozmasowywania zgrubień na tkance mięśniowej oraz pozbyciu się bólów mięśniowych spowodowanymi przez nadwężone mięśnie.
- **Kończówka chłodząca** - Żelowa kończówka chłodząca łagodzi ból i obrzęki, zapewniając przyjemny, chłodzący efekt podczas masażu. Przed użyciem należy schłodzić ją w lodówce.
- **Kończówka grzejąca** - Zapewnia kojące ciepło, które pomaga rozluźnić napięte mięśnie i złagodzić ból. Idealna do relaksacyjnych masażu, wspiera regenerację i poprawia krążenie, wzmacniając efektywność terapii cieplnej.

OBSŁUGA URZĄDZENIA

Włącz urządzenie za pomocą przełącznika znajdującego się na spodzie produktu. Naciskając  możesz rozpocząć oraz zatrzymać pracę masażera. Jeśli urządzenie jest włączone, ale nie jest użytkowane, po 3 minutach przejdzie w tryb uśpienia, aby oszczędzić baterię.

Urządzenie zawsze uruchamia się na 1 poziomie prędkości. Za pomocą  i  na panelu sterowania możesz zmieniać prędkość z jaką pracuje masażer. Masażer posiada 20 poziomów prędkości. Dzięki temu możesz wybrać prędkość pomiędzy 1000-3200 obrotów na minutę.

Przy wybieraniu prędkości pracy masażera należy pamiętać, że przy wrażliwszych częściach ciała należy używać niższych poziomów prędkości.

Aby skorzystać z kończówki grzejącej włącz jeden z 3 poziomów mocy za pomocą przycisku (wstaw on/off) znajdującego się na spodzie kończówki. Kończówka automatycznie wyłączy się po 10 min działania.

Temperatura kończówki grzejącej (dla temperatury otoczenia 25°C):

- 1 poziom - 45°C $\pm 5^{\circ}\text{C}$
- 2 poziom - 50°C $\pm 5^{\circ}\text{C}$
- 3 poziom - 55°C $\pm 5^{\circ}\text{C}$


Przy używaniu masażera wykonuj ruchy rekomendowane dla masażu dowolnej partii mięśni. Nie należy dociskać masażera w jednym miejscu bez wykonywania żadnego ruchu.

REKOMENDOWANE MASAŻE

1. KOŃCZYNY GÓRNE

(wykonuj ruchy z góry do dołu)

Rekomendowane: Kończówka Sferyczna, Kończówka Poduszkowa

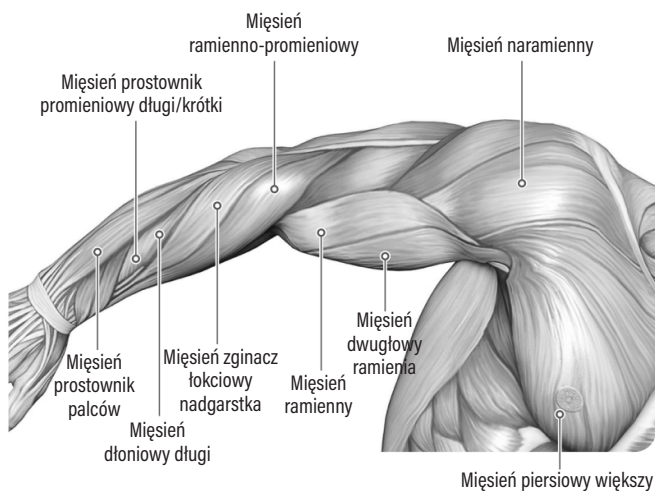


MIĘŚIEN	CZAS	SERIE
Mięsień naramienny	12-20s	x3 serie
Mięsień ramienno-promieniowy	10-15s	x3 serie
Mięsień prostownik promieniowy długi/krótki	5-10s	x2 serie
Mięsień prostownik palców	5-10s	x2 serie
Mięsień dłoniowy długi	12-15s	x3 serie
Mięsień zginacz łokciowy nadgarstka	10-15s	x3 serie
Mięsień ramienny	12-20s	x3 serie
Mięsień dwugłowy ramienia	12-20s	x3 serie
Mięsień piersiowy większy	12-20s	x3 serie

2. SZYJA, BARKI I PLECY

(wykonuj ruchy od środka na boki lub z góry do dołu)

Rekomendowane: Kończówka Widelkowa, Kończówka Sferyczna, Kończówka Poduszkowa, Kończówka Płaska

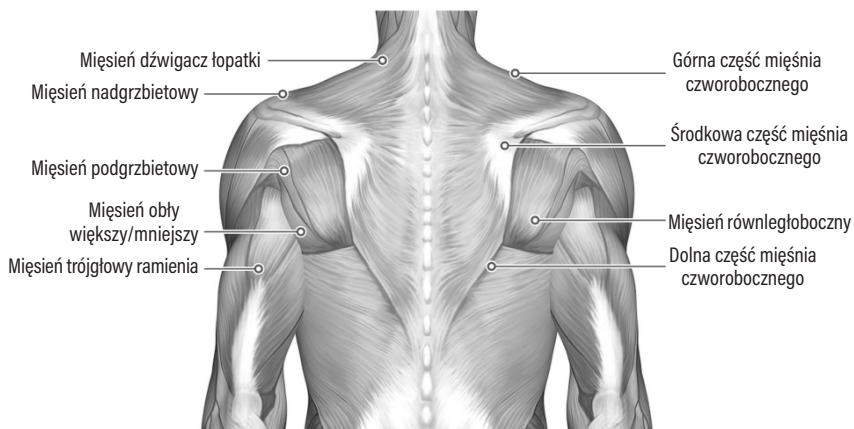


MIĘŚIŃ	CZAS	SERIE
Mięsień dźwigacz łopatki	10-12s	x2 serie
Mięsień nadgrzbietowy	10-15s	x3 serie
Mięsień podgrzbietowy	10-12s	x2 serie
Mięsień obły większy/mniejszy	10-12s	x2 serie
Mięsień trójętłowy ramienia	15-20s	x3 serie
Górna część mięśnia czworobocznego	15-20s	x3 serie
Środkowa część mięśnia czworobocznego	15-20s	x3 serie
Mięsień równoległoboczny	20-30s	x3 serie
Dolna część mięśnia czworobocznego	15-20s	x3 serie

3. TALIA I BIODRA

(wykonuj ruchy od środka na boki lub z góry do dołu)

Rekomendowane: Kończówka Sferyczna, Kończówka Poduszkowa, Kończówka Płaska

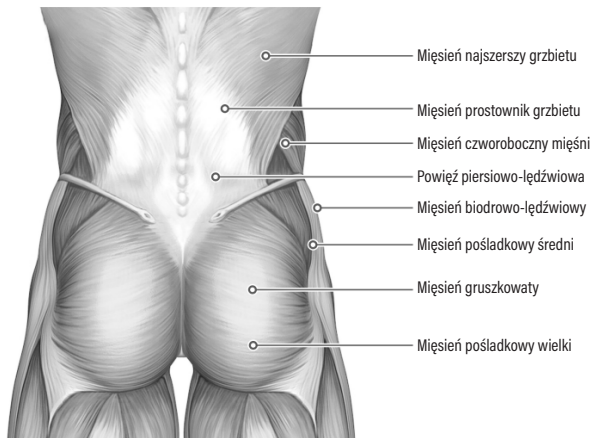


MIĘŚIŃ	CZAS	SERIE
Mięsień najszerszy grzbietu	30-60s	x4 serie
Mięsień prostownik grzbietu	30-60s	x4 serie
Mięsień czworoboczny mięśni	20-30s	x2 serie
Powieź piersiowo-lędźwiowa	40-60s	x3 serie
Mięsień biodrowo-lędźwiowy	20-30s	x3 serie
Mięsień pośladkowy średni	30-60s	x4 serie
Mięsień gruszkowaty	60-90s	x1 seria
Mięsień pośladkowy wielki	30-60s	x4 serie

4. KOŃCZYNY DOLNE

(wykonuj ruchy z góry do dołu)

Rekomendowane: Kończówka Sferyczna, Kończówka Poduszkowa

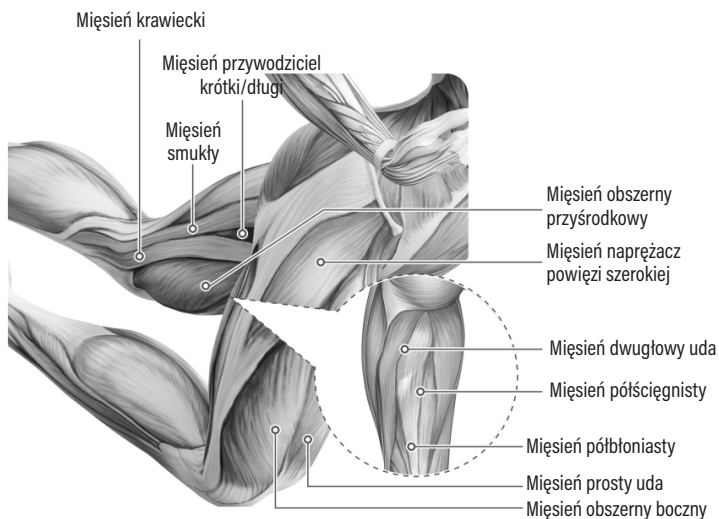


MIĘSIEŃ	CZAS	SERIE
Mięsień krawiecki	30-45s	x1 seria
Mięsień smukły	10-15s	x2 serie
Mięsień przywodziciel krótki/długi	10-15s	x2 serie
Mięsień obszerny przyśrodkowy	30-45s	x2 serie
Mięsień naprężacz powięzi szerokiej	15-20s	x2 serie
Mięsień dwugłowy uda	20-30s	x3 serie
Mięsień półścięgnisty	20-30s	x3 serie
Mięsień półbłoniasty	20-30s	x3 serie
Mięsień prosty uda	30-45s	x2 serie
Mięsień obszerny boczny	30-45s	x2 serie

5. STOPA

(wykonuj ruchy z góry do dołu)

Rekomendowane: Kończówka Punktowa, Kończówka Sferyczna, Kończówka Poduszkowa

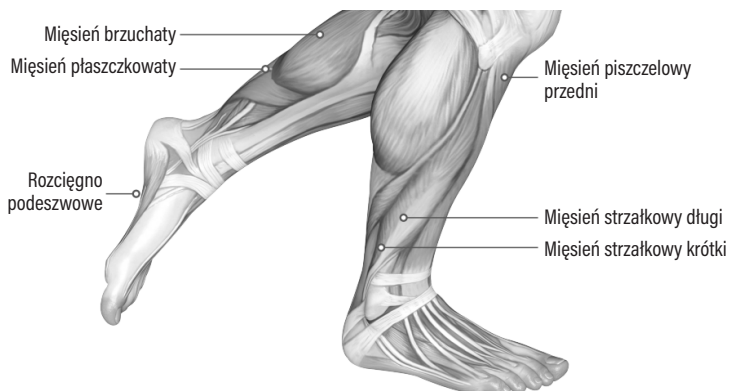

MIĘSIEŃ	CZAS	SERIE
Mięsień brzuchaty	20-30s	x3 serie
Mięsień płaszczkowaty	20-30s	x3 serie
Rozciągnięno podeszwowe	20-30s	x3 serie
Mięsień piszczelowy przedni	15-20s	x2 serie
Mięsień strzałkowy długi	15-20s	x2 serie
Mięsień strzałkowy krótki	15-20s	x2 serie

ŁADOWANIE

Aby naładować masażer używaj ładowarki dołączonej do zestawu. Możesz śledzić aktualny stan naładowania urządzenia na diodach znajdujących się na boku uchwytu.

Kiedy masażer zostanie naładowany do pełna, wszystkie diody na boku będą świecić światłem stałym.

Do naładowania końcówki grzejącej użyj przewodu USB-C. Podczas ładowania wskaźnik na końcówce będzie świecił się na czerwono, a po pełnym naładowaniu zmieni się na zielony.

UWAGA! ZUŻYCIE AKUMULATORA PODCZAS EKSPLOATACJI URZĄDZENIA JEST NATURALNYM ZJAWISKIEM. ABY UTRZYMAĆ AKUMULATOR W DOBREJ KONDYCJI I WYDŁUŻYĆ JEGO ŻYWOTNOŚĆ NALEŻY STOSOWAĆ SIĘ DO PONIŻSZYCH ZALECEŃ:

1. Nie uruchamiaj urządzenia, jeśli akumulator jest rozładowany.
2. Akumulator ładuj zgodnie z danymi o napięciu i prądzie ładowania podanymi na tabliczce znamionowej.
3. Przed dłuższym okresem przechowywania naładuj akumulator do poziomu 50% oraz doładuj go co 3-4 miesiące. Pozostawienie rozładowanego akumulatora na dłuższy okres może skutkować jego uszkodzeniem lub utratą jego właściwości.
4. Przy regularnym użytkowaniu urządzenia unikaj pełnego rozładowania akumulatora oraz zawsze ładuj go do pełna.
5. Po naładowaniu akumulatora odłącz wtyczkę ładowarki od gniazda ładowania w urządzeniu.
6. Nie pozostawiaj urządzenia w trakcie ładowania bez nadzoru.
7. Używanie ładowarek oraz przewodów innych, niż zalecane w instrukcji z urządzeniem, może prowadzić do uszkodzenia produktu, a nawet do eksplozji akumulatora.
8. Ładowanie przeprowadzaj w miejscu suchym, dobrze wentylowanym oraz nienarażonym na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

Przed przystąpieniem do czyszczenia wyłącz urządzenie. Do czyszczenia używaj lekko zwilżonej ściereczki.

UWAGA! NIE ZANURZAJ URZĄDZENIA W WODZIE!

Aby uniknąć uszkodzenia urządzenia w transporcie, na czas podróży trzymaj je w etui dołączonym do zestawu.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

PROBLEM	MOŻLIWA PRZYCZYNA	ROZWIĄZANIE
Masażer nie działa.	Akumulator jest rozładowany.	Naładuj urządzenie.
	Urządzenie jest przegrzane.	Odczekaj kilka minut przed ponownym uruchomieniem.
Końcówki wypadają z masażera podczas pracy.	Niepoprawnie zamontowane końcówki.	Upewnij się, że końcówki są odpowiednio przyciśnięte.
Masażer sam się wyłącza.	Masażer działał przez 15 min, przez co został wyłączony przez zabezpieczenie.	Urządzenie nie powinno działać przez dłuższy okres czasu. Zabezpieczenie, które wyłącza urządzenie ma na celu ochronę akumulatora oraz urządzenia.
Masażer zatrzymuje się przy mocniejszym docisku.	Została użyta za duża siła przy dociskaniu masażera.	Używaj mniej siły przy dociskaniu masażera.

EKOLOGICZNA I PRZYJAZNA DLA ŚRODOWISKA UTYLIZACJA

To urządzenie jest oznaczone, zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/19/UE z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE) symbolem przekreślonego kontenera na odpady:



Nie należy wyrzucać urządzeń oznaczonych tym symbolem razem z odpadami domowymi.

Urządzenie należy zwrócić do lokalnego punktu przetwarzania i utylizacji odpadów lub skontaktować się z władzami miejskimi.

UTYLIZACJA ZUŻYTYCH AKUMULATORÓW

Zgodnie z dyrektywą UE 2006/66/EC z późn. zm. o akumulatorach, produkt ten jest oznaczony symbolem przekreślonego kosza na śmieci. Symbol oznacza, że zastosowane w tym produkcie baterie lub akumulatory nie powinny być wyrzucane razem z normalnymi odpadami z gospodarstw domowych. Użytkownicy baterii i akumulatorów muszą korzystać z dostępnej sieci odbioru tych elementów, która umożliwia ich zwrot, recykling oraz utylizację. Przed utylizacją urządzenie należy przekazać do specjalistycznego zakładu celem usunięcia akumulatorów.



Li-Ion

MOŻESZ POMÓC CHRONIĆ ŚRODOWISKO!

Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu.

WARUNKI GWARANCJI DOTYCZĄCE MASAŻERA

1. ART-DOM Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (92-402) przy ul. Zakładowej 90/92 Numer Krajowego Rejestru Sądowego 0000354059 (Gwarant) gwarantuje, że zakupione urządzenie jest wolne od wad fizycznych. Gwarancja obejmuje tylko wady wynikające z przyczyn tkwiących w rzeczy sprzedanej (wady fabryczne).

2. Ujawniona wada zostanie usunięta na koszt Gwaranta w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia uszkodzenia do serwisu autoryzowanego lub punktu sprzedaży.
3. W wyjątkowych przypadkach, np. konieczności sprowadzenia części zamiennych od producenta, termin naprawy może zostać wydłużony do 30 dni.
4. Okres gwarancji dla użytkownika wynosi 24 miesiące od daty wydania towaru.
5. Towar przeznaczony jest do używania wyłącznie w warunkach indywidualnego gospodarstwa domowego.
6. Gwarancja nie obejmuje:
 - a. uszkodzeń powstałych na skutek używania urządzenia niezgodnie z instrukcją obsługi,
 - b. uszkodzeń mechanicznych, chemicznych lub termicznych,
 - c. napraw i modyfikacji dokonanych przez firmy lub osoby nieposiadające autoryzacji producenta,
 - d. części z natury łatwo zużywalnych lub materiałów eksploatacyjnych takich jak: baterie, żarówki, bezpieczniki, filtry, pokrętła, półki, akcesoria,
 - e. instalacji, konserwacji, przeglądów, czyszczenia, odblokowania, usunięcia zanieczyszczeń oraz instruktażu.
7. O sposobie usunięcia wady decyduje Gwarant. Usunięcie potwierdzonej wady urządzenia nastąpi poprzez wykonanie naprawy gwarancyjnej lub wymianę urządzenia. Gwarant może dokonać naprawy, gdy kupujący żąda wymiany lub Gwarant może dokonać wymiany, gdy kupujący żąda naprawy, jeżeli doprowadzenie do zgodności towaru (urządzenia) zgodnie z udzieloną gwarancją w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Gwaranta. W szczególnie uzasadnionych wypadkach, jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Gwaranta może on odmówić doprowadzenia towaru do zgodności z udzieloną gwarancją i proponować inny sposób załatwienia reklamacji z gwarancji.
8. Wymiany towaru dokonuje punkt sprzedaży, w którym towar został zakupiony (wymiana lub zwrot gotówki) lub autoryzowany punkt serwisowy, jeżeli dysponuje taką możliwością (wymiana). Zwracane urządzenie musi być kompletne, bez uszkodzeń mechanicznych. Niespełnienie tych warunków może spowodować nieuznanie gwarancji.
9. W przypadku braku zgodności towaru z umową sprzedaży, kupującemu z mocy prawa przysługują środki ochrony prawnej ze strony i na koszt sprzedawcy, a gwarancja nie ma wpływu na te środki ochrony prawnej.
10. Niniejsza gwarancja obowiązuje na terytorium Polski.
11. Warunkiem dokonania naprawy lub wymiany urządzenia w ramach gwarancji jest przedstawienie dowodu zakupu oraz użytkowanie towaru zgodnie z informacjami zawartymi w instrukcji obsługi.

UWAGA!

Uszkodzenie lub usunięcie tabliczki znamionowej z urządzenia może spowodować nieuznanie gwarancji.

Cały czas udoskonalamy nasze produkty, dlatego mogą się one nieznacznie różnić od zdjęć przedstawionych na opakowaniu oraz w instrukcji obsługi.
Przed przystąpieniem do użytkowania urządzenia przeczytaj instrukcję obsługi.

ART-DOM Sp. z o.o., ul. Zakładowa 90/92, 92-402 Łódź, info@artdom.net.pl. Numer Krajowego Rejestru Sądowego 0000354059.

